


## 6 Devolución

Para devolver la muestra, coloque todos los tubos etiquetados y la lámina absorbente en la bolsa de riesgo biológico y séllela.

Inserte el formulario la tarjeta de información de la muestra en el segundo bolsillo de la bolsa de riesgo biológico.

Coloque la bolsa de riesgo biológico sellada en la caja GeneDx y ciérrela.

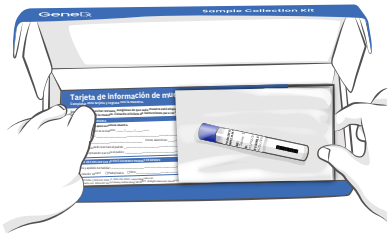

Coloque la kit de muestras dentro del paquete de FedEx, retire la tira adhesiva y selle el paquete de FedEx. Adhiera la etiqueta de envío en el exterior del paquete.

Deje el paquete en una oficina local de FedEx. Puede encontrar la oficina de FedEx más cercana llamando a FedEx o visitando [FedEx.com/locate](https://www.fedex.com/locate).



Si no puede acceder a una oficina local de FedEx, llame a **GeneDx** para recibir ayuda con el envío de su kit.



## Importante

Antes de sellar y enviar el kit completo, asegúrese de incluir:

- Muestras etiquetadas con nombre, fecha de nacimiento y fecha de recolección (por ejemplo, el tubo o ambos tubos)  
Las muestras no etiquetadas no se procesarán.
- Tarjeta de información de muestra completada

GeneDx®

205 & 207 Perry Parkway, Gaithersburg, MD 20877  
T 1 (888) 729-1206 or 1 (301) 519-2100  
F 1 (201) 421-2100  
support@genedx.com • www.genedx.com

©2026 GeneDx, LLC. All Rights Reserved 18988

GeneDx.com | MKT-00301-v1i Jan 2026

GeneDx®

## Recolección de muestras orales (hisopo oral de la mejilla)

Lea estas instrucciones completas antes de recolectar la muestra.

También puede escanear este código QR, usando la cámara de su teléfono móvil, para ver un breve video con instrucciones de toma de muestras orales de las mejillas.

Saque todo fuera de la caja GeneDx y póngalo en una mesa/mostrador frente a usted.



## 1 Preparación

No beba, no coma nada (incluyendo chicles, mentas, patillas o dulces duros) ni fume durante al menos 30 minutos antes de tomar la muestra.




## 2 Muestra

Saque un hisopo oral de su paquete sellado sin tocar la punta de la esponja o sacarlo del tubo. No toque la punta.


Coloque la esponja en la parte superior interna de la mejilla izquierda, en el espacio donde las encías superiores se unen a la mejilla. Deslice (o arrastre) a lo largo de esta área con un movimiento de ida y vuelta por lo menos 10 veces. Repita el movimiento de arrastre en los lados medio e inferior de la mejilla izquierda. Recuerde: no frotar los dientes.

10x

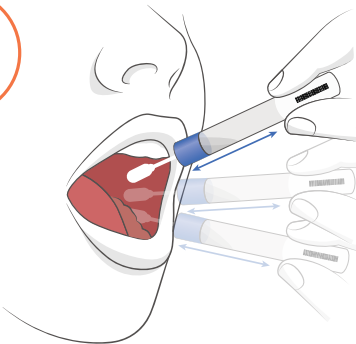


## 3 Sacudir

Sostenga el tubo en posición vertical para evitar que se derrame algo. Desenrosque el tapón azul, póngalo boca abajo e introduzca la esponja en el tubo con la solución. Cierre bien la tapa. Agite con fuerza, hacia arriba y hacia abajo 10 veces. **Si su kit incluye dos hisopos, repita los pasos 2 y 3 utilizando el segundo hisopo en la mejilla derecha.**

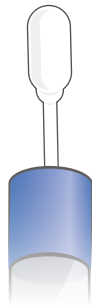

Tubo de muestra con punta de esponja expuesta

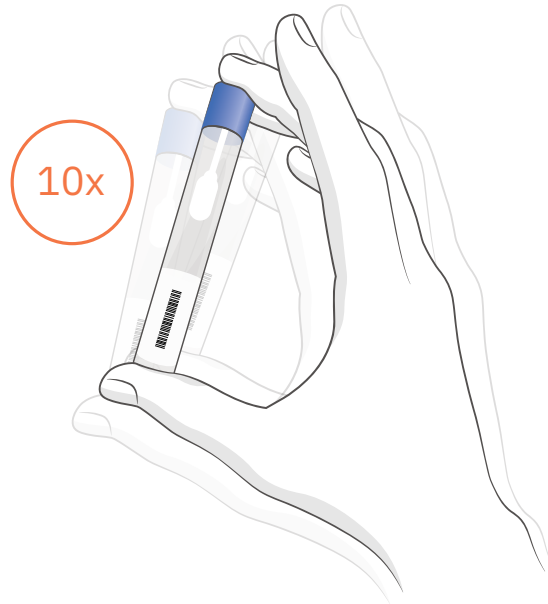


10x

Agite la muestra sellada con fuerza 10 veces

## 4 Etiqueta

Complete las etiquetas que se le dieron, on el nombre, apellido, y la fecha de nacimiento de la persona cuya muestra está dentro de los tubos, como la fecha en que se recolectó la muestra. Coloque las etiquetas en cada uno de los tubos.

**Recordatorio: todos los tubos deben estar etiquetados. Las muestras no etiquetadas no se procesarán.**

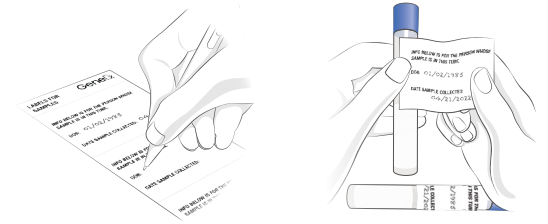

## 5 Información de muestra

Cada muestra DEBE estar acompañada de una tarjeta de información de la muestra completada. **Las muestras presentadas sin este formulario o tarjeta no se procesarán.**



Tarjeta de información de muestra