


6 Retour

Pour retourner vos échantillons, placez tous les tubes étiquetés et la feuille absorbante dans le sac pour matières contaminées et fermez-le hermétiquement.

Insérez le formulaire de demande de test et/ou la carte d'information sur les échantillons dûment remplis dans la seconde pochette du sac pour matières contaminées.

Placez le sac pour matières contaminées hermétiquement fermé dans la boîte GeneDx et fermez-la.

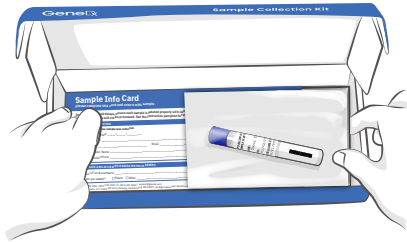

Placez la boîte dans le sac FedEx (FedEx Pak), retirez la bande adhésive et fermez le sac. Apposez l'étiquette FedEx à l'extérieur du sac.

Déposez le colis à un centre FedEx local.

Vous pouvez trouver le centre FedEx le plus proche en appelant FedEx ou en allant à [FedEx.com/locate](https://www.fedex.com/locate).



Si vous n'avez pas accès à un point de dépôt FedEx, veuillez communiquer avec **GeneDx** pour organiser le ramassage de votre colis.



Important

Avant de fermer et d'expédier la trousse complète, assurez-vous d'y inclure ce qui suit :



Échantillon(s) étiqueté(s) avec nom, date de naissance et date de prélèvement (c.-à-d., un ou les deux tubes)

Les échantillons non étiquetés ne seront pas traités.



Carte d'information sur le ou les échantillons dûment remplie

GeneDx[®]

205 & 207 Perry Parkway, Gaithersburg, MD 20877 États-Unis

Téléphone 1 (888) 729-1206 ou 1 (301) 519-2100

Télécopieur 1 (201) 421-2100

support@genedx.com • www.genedx.com

©2026 GeneDx, LLC. Tous droits réservés 18988

GeneDx.com | MKT-00301-v1i Jan 2026

GeneDx[®]

Prélèvement d'échantillon buccal avec écouvillon pour joue

Veillez lire toutes les instructions avant de commencer.

Balayez le code QR pour regarder la vidéo d'instruction avant de prélever votre échantillon.

Retirez tout le contenu de la boîte GeneDx et posez-le sur une surface plane et propre.



1 Préparation

Ne buvez rien, ne mangez rien (y compris gomme à mâcher, pastilles de menthe ou contre la toux, ou bonbons durs) et ne fumez pas au moins 30 minutes avant de prélever l'échantillon.




2 Écouvillon

Retirez un écouvillon oral de son emballage scellé sans toucher l'extrémité éponge ni l'extraire du tube. **Ne touchez pas l'extrémité.**


Placez l'éponge contre la partie supérieure interne de la joue gauche, à la jonction des gencives supérieures et de la joue. Balayez (ou frottez) au moins 10 fois dans un mouvement de va-et-vient le long de cette zone. Répétez le mouvement de va-et-vient au moins 10 fois de plus sur le milieu et la partie inférieure de la joue gauche.

N'oubliez pas : ne frottez pas l'éponge sur les dents.

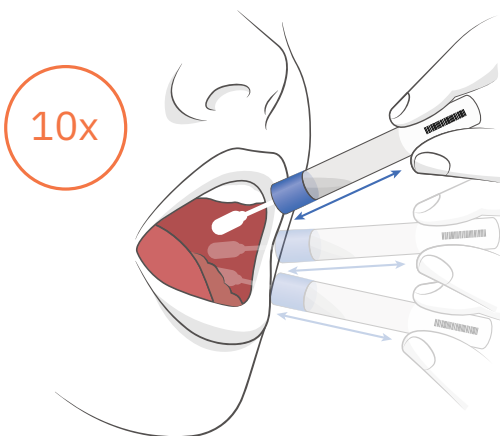

3 Agitez

Tenez le tube à la verticale pour empêcher tout déversement de la solution. Dévissez le capuchon bleu et tournez-le à l'envers, puis insérez l'éponge dans le tube contenant la solution. Refermez bien le capuchon. Agitez le tube vigoureusement une dizaine de fois en le tenant à la verticale. **Si votre trousse comporte deux écouvillons, répétez les étapes 2 et 3 avec le second pour la joue droite.**

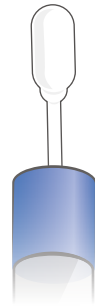

Tube d'échantillon avec extrémité éponge exposée




Agitez vigoureusement l'échantillon scellé 10 fois

4 Étiquette

Remplissez les étiquettes fournies avec le nom complet et la date de naissance de la personne ayant fourni les échantillons, de même que la date de prélèvement. Apposez les étiquettes sur les deux tubes.

Si vous prélevez des échantillons auprès de patients différents, veuillez suivre toutes les étapes pour le premier échantillon avant de passer au patient suivant.

Rappel : tous les tubes doivent être étiquetés. Les échantillons non étiquetés ne seront pas traités.

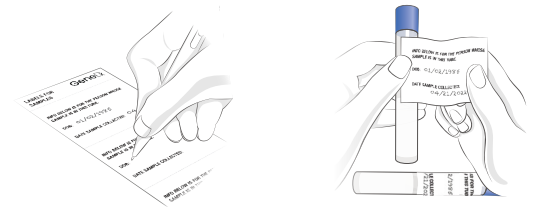

5 Information sur l'échantillon

Rappel : chaque échantillon DOIT être accompagné d'une carte d'information remplie.

Les échantillons soumis sans cette carte ne seront pas traités.



Carte d'information sur l'échantillon