

mobi-click[®]
your safety-kit



Bedienungsanleitung

Hausnotruf Watch 1

ST101-7

07.08.2025



Sehr geehrte Kundin und sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sollten Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@mobi-click.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung-Funktionsweise	4
2. Zubehör	5
3. Vorbereitung für eine Benutzung des Hausnotruf Watchs	6
4. Installation der SIM-Karte	7
5. Laden des Notruf Armband	8
6. Einschalten/Ausschalten	9
7. Funktionen der Gerätetasten	10
8. Installation der App zur Bedienung und Programmierung des Hausnotruf Watchs	11
9. SOS-Taste	14
10. Fallalarm/Sturzalarm-Einstellungen	15
11. Telefonnummern im Buch speichern	16
12. Beschreibung des Menüs der App – Startseite	17
13. Beschreibung des Menüs der App des Benutzers	38
14. GPS-Ortung	39
15. Problemlösungen	40
16. Entsorgung	41
17. Pflege und Reinigung	42
18. Konformitätserklärung	42
19. Spezifikation	43

1. Einführung-Funktionsweise



2. Zubehör



Netzgerät/USB



Magnetisches USB-Ladekabel



Werkzeug zum Öffnen der SIM-Kartenabdeckung




Bedienungsanleitung

3. Vorbereitung für eine Benutzung des Hausnotruf Watch

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, bitte lesen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb sorgfältig durch.


Sie benötigen eine Nano SIM-Karte für das 4G- Netz. Das Hausnotruf Watch muss ausgeschaltet sein, wenn Sie die SIM-Karte einlegen.

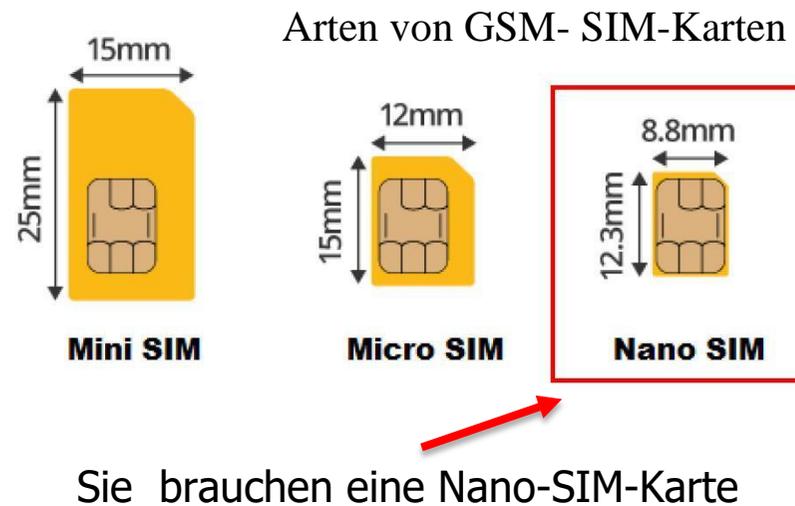

Auf der SIM-Karte müssen die Funktionen GPRS, WiFi-Calling und die Anrufer-ID-Anzeigefunktion aktiv sein. Das Hausnotruf Watch arbeitet ohne PIN-Code. Wenn Ihre SIM-Karte einen PIN Code hat, so deaktivieren Sie die PIN-Abfrage mit Hilfe eines Mobiltelefons. Bitte stellen Sie sicher, dass auf der SIM-Karte, die im Gerät verwendet wird, auch providerseitig die Funktion WiFi-Calling aktiviert ist. Für weitere Informationen zu diesem Feature wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.

4. Installation der SIM-Karte

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie den SIM-Kartenhalter mit dem mitgelieferten Werkzeug..

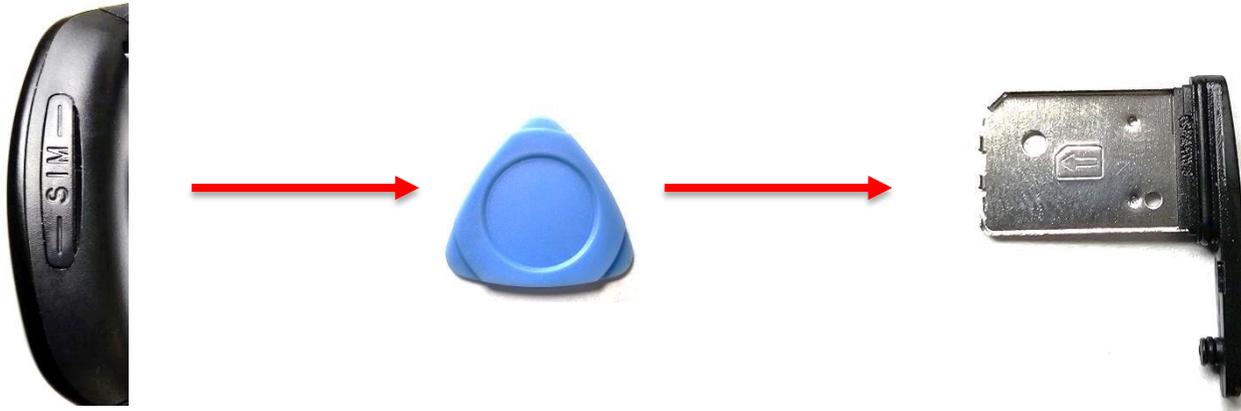

- Legen Sie die Nano-SIM-Karte in die Halterung ein. Achten Sie darauf, dass der Chip der Karte nach oben zeigt. Setzen Sie anschließend die Halterung in die Hausnotruf Watch ein.



5. Laden des Hausnotruf Watchs

- Schließen Sie das USB-Kabel an das Ladegerät an.
- Platzieren Sie dann das magnetische Ende des USB-Kabels korrekt an das Hausnotruf Watch.
- Bitte überprüfen Sie den Akku täglich und laden Sie ihn ggf. ca. 2 Stunden auf.



Rote LED leuchtet – lädt
Blaue LED leuchtet – vollständig geladen



Die Batterie in diesem Alarmarmband ist nicht austauschbar. Nach längerer Inaktivität lässt sich die Hausalarmuhr möglicherweise aufgrund einer schwachen Batterie nicht mehr einschalten. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Hausalarmuhr zu gewährleisten, laden Sie sie regelmäßig auf.

6. Einschalten / Ausschalten

- Einschalten: Halten Sie die SOS-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Haus Notrufwatch startet. (akustische Quittierung)



- Ausschalten: Halten Sie die SOS-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt, bis das Haus Notrufwatch herunterfährt. (akustische Quittierung)

7. Funktionen der Gerätetasten



LED-Status

ROT (GSM) Langsames Blinken – Suche nach einem GSM-Signal
Schnelles Blinken – Verbindung mit einem GSM-Netz

BLAU (GPS) Langsames Blinken – Positionierung
Schnelles Blinken – GPS-Position übertragen

Rote LED leuchtet – lädt
Blaue LED leuchtet – vollständig geladen

Taste dient zur Stromversorgung, SOS, Trennung und Gesundheitsüberwachung.

SOS: Drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang, bis Sie spüren, wie das Gerät vibriert.

Einen Sprachanruf beenden: Drücken Sie die Taste, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Gesundheitsmonitor: Drücken Sie die Taste dreimal schnell hintereinander, um den Herzfrequenz- und Blutdruckmonitor zu starten.

Temperaturüberwachung – Drücken Sie viermal schnell, um die Temperaturüberwachung zu starten.

Überprüfen der GSM-Verbindung: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Netzschalter einmal kurz drücken, um den GSM-Verbindungsstatus zu überprüfen. Blinkend die LED rot, ist die Verbindung zum GSM-Netz aktiv. Bei einer roten Anzeige, wurde keine Verbindung zum GSM-Netz hergestellt.

8. Installation der App zur Bedienung und Programmierung des Notruf Armband



- Scannen Sie den QR-Code, um die App für Ihr Hausnotruf Watch herunterzuladen – Der Name der App lautet: Beesure GPS App. Sie können auch den QR-Code der App im App-Download-Menü auf Ihres Hausnotruf Watches finden.



Die App kann man auf Smartphones mit Android-System aus dem Google Play Store, und auf iPhones mit IOS-System - aus dem App Store herunterladen.


- Registrierung und Login. Folgen Sie die Informationen der App, um Ihr Konto korrekt zu registrieren und sich anzumelden.



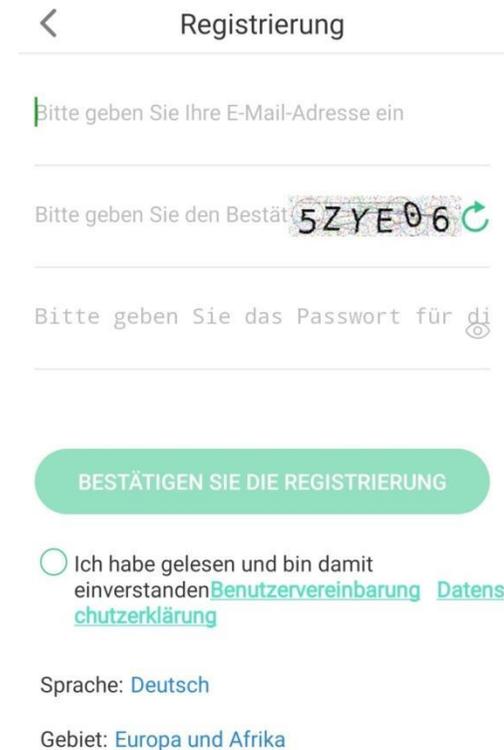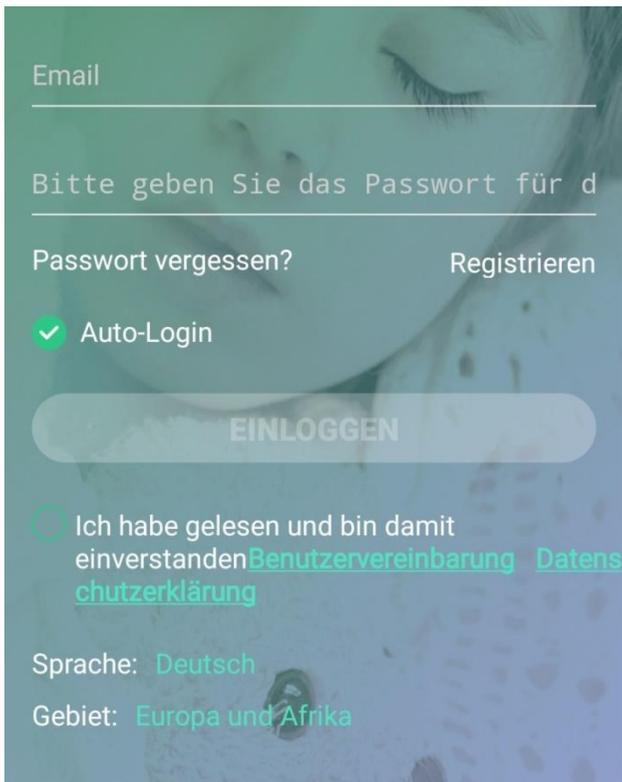

- Nachdem Sie Ihr Konto registriert und sich in der App angemeldet haben, müssen Sie Ihr Hausnotruf Watch Ihrem App-Konto zuordnen. Scannen Sie dazu den QR-Code, den Sie mit dem Hausnotruf Watch bekommen haben. Auch den Registrierungscode finden Sie im Hausnotruf Watch-Menü, Sie können den 15-stelligen Registrierungscode auch manuell eingeben. Ihr Hausnotruf Watch ist mit Ihrem E-Mail-Konto verknüpft. Die App kann auf mehr als einem Gerät installiert werden, sollte jedoch bei dem selben Konto angemeldet sein, das Sie erstellt haben.


- Nach dem Start der Besure GPS-Anwendung müssen Sie das Hausnotruf Watch 1 dieser Anwendung zuweisen. Dieser Schritt muss nur einmal durchgeführt werden. An jedem Hausnotruf Watch 1 sind eine IMEI-Nummer und eine ID-Nummer am Armband angebracht. Nach dem ersten Start der Anwendung auf Ihrem Smartphone erscheint das folgende Fenster. Geben Sie dort die ID-Nummer und den Namen des Armbandes ein. Nach einem Klick auf OK ist das Armband betriebsbereit.

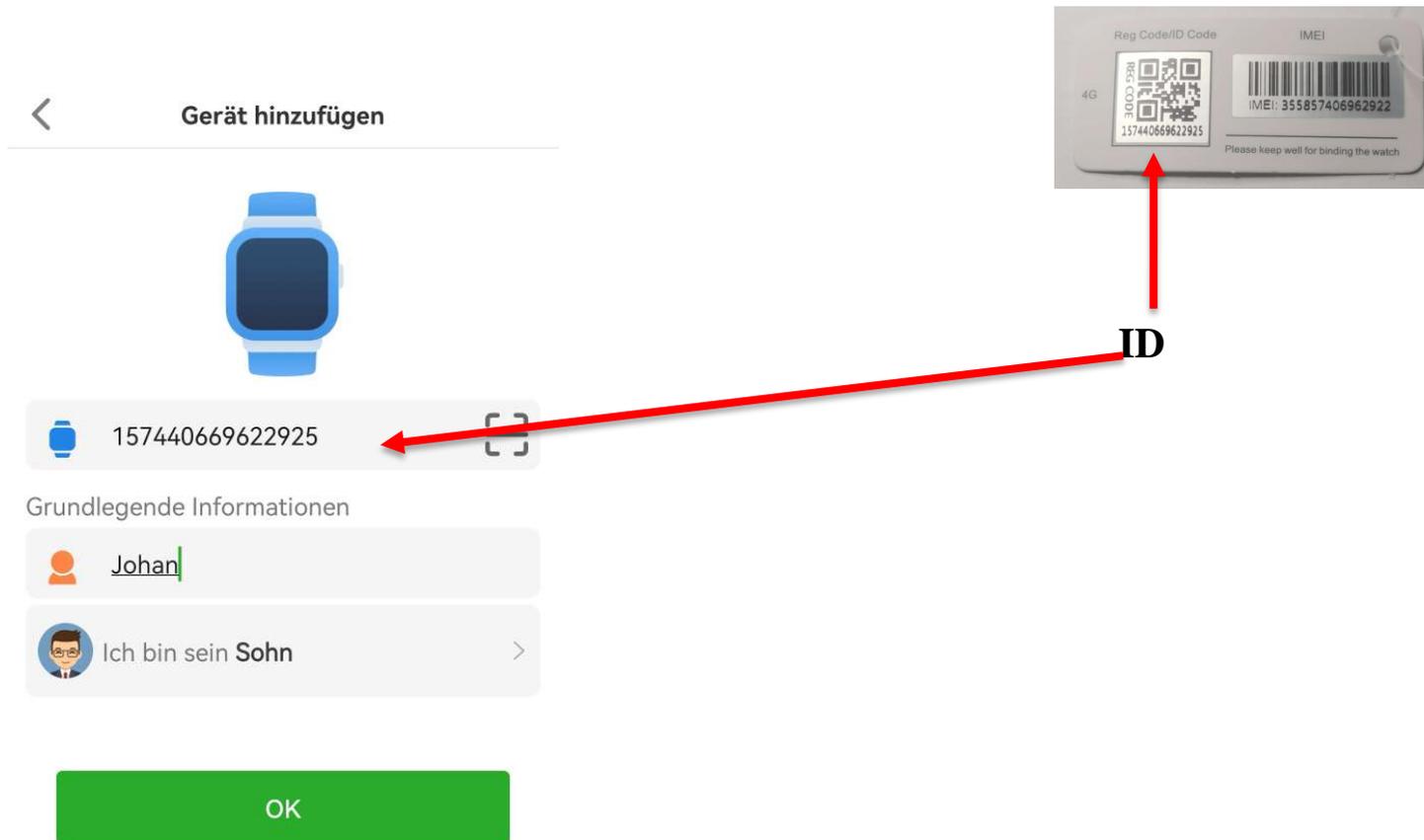

Bitte behalten Sie dieses Etikett.

9. SOS - Taste

In der App hinterlegen Sie die Telefonnummern, die im Notfall zu benachrichtigen sind. Sie können bis zu 3 Telefonnummern für Alarme hinterlegen. Wenn Sie im Notfall die SOS-Taste für 3 Sek. drücken, werden die drei hinterlegten Telefonnummern angerufen.

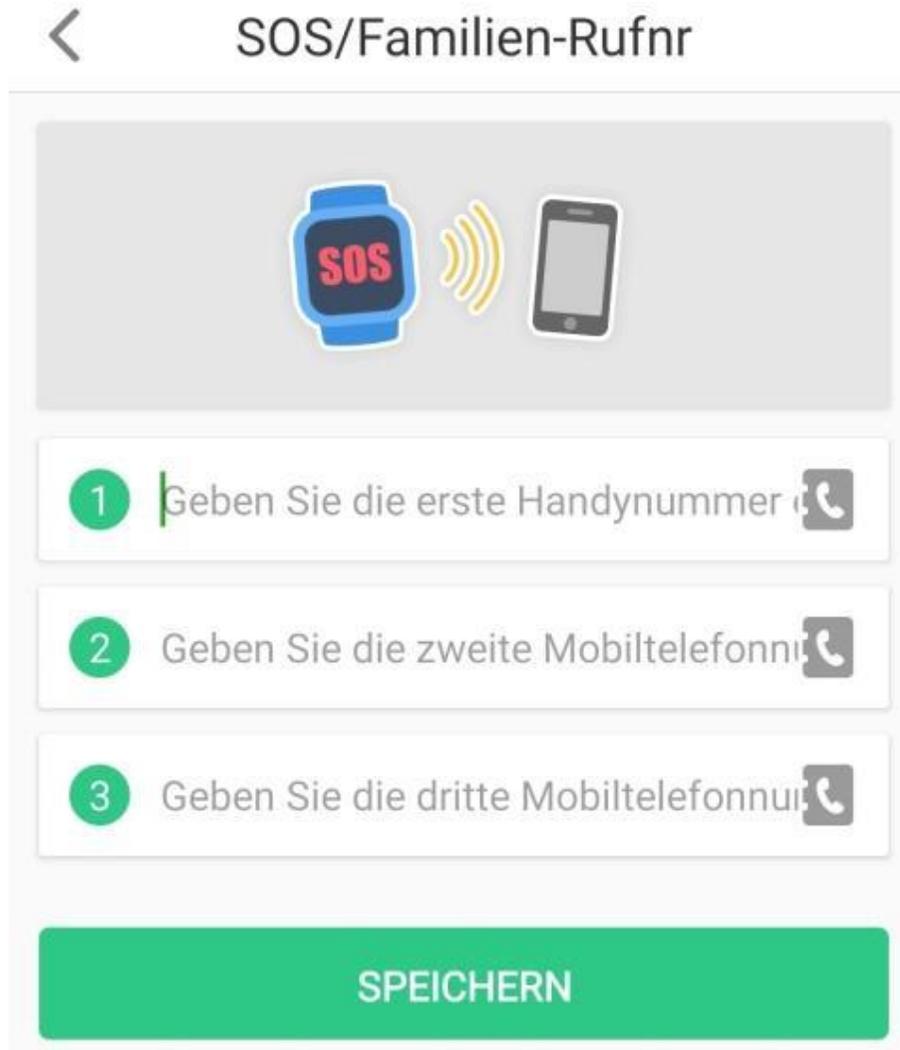


The screenshot shows the 'SOS/Familien-Rufnr' (SOS/Family Number) screen in an app. At the top, there is a back arrow and the title 'SOS/Familien-Rufnr'. Below the title is a header image featuring a blue smartwatch with 'SOS' on its screen, a yellow signal icon, and a black smartphone. The main content area contains three numbered input fields for phone numbers, each with a telephone icon on the right:

- 1 | Geben Sie die erste Handynummer ☎
- 2 | Geben Sie die zweite Mobiltelefonnummer ☎
- 3 | Geben Sie die dritte Mobiltelefonnummer ☎

At the bottom of the screen is a large green button labeled 'SPEICHERN' (SAVE).

10. Sturzalarm/Fallalarm – Einstellungen

Sturzalarm mit Voralarm. Sie können die Benachrichtigung selbst in der App und die Benachrichtigung per Telefonanruf einstellen.

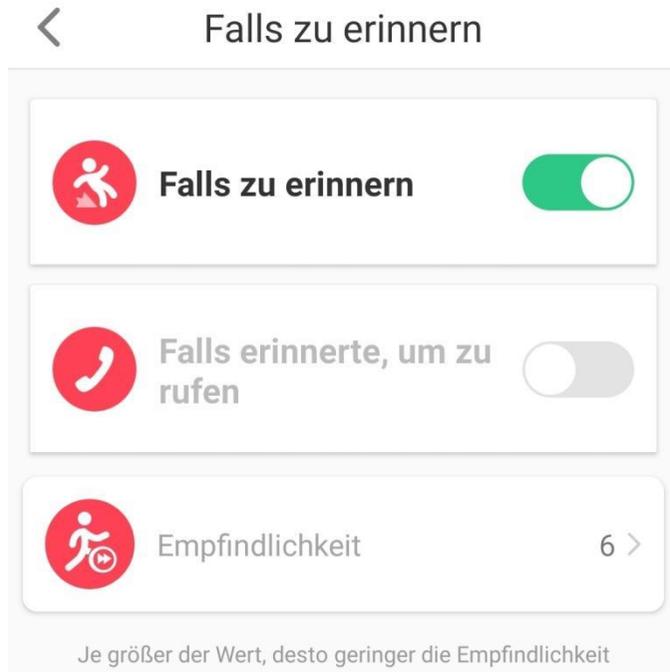

Einschalten der Benachrichtigung in der App über den ausgelösten Alarm.

Einschalten des Anrufs nach dem Auslösen des Alarms

Einstellung der Empfindlichkeit beim Sturzalarm 1 – 6 möglich.

1 - höchste Empfindlichkeit



6 - niedrigste Empfindlichkeit



<	Sturzerinnerung	boss
	01-09-2020 21:54:21	
	01-09-2020 06:07:59	
	31-08-2020 09:10:31	
	31-08-2020 09:05:13	
	31-08-2020 09:04:08	
	31-08-2020 09:03:35	
	30-08-2020 22:08:23	


11. Telefonnummern im Buch speichern

Sie können bis zu 10 Telefonnummern im Telefonbuch speichern. Um diese Nummern zu speichern, klicken Sie im Hauptanwendungsmenü auf die Option „Telefon“. Klicken Sie dann im Telefonmenü auf die Option - „Neue Nummer hinzufügen“

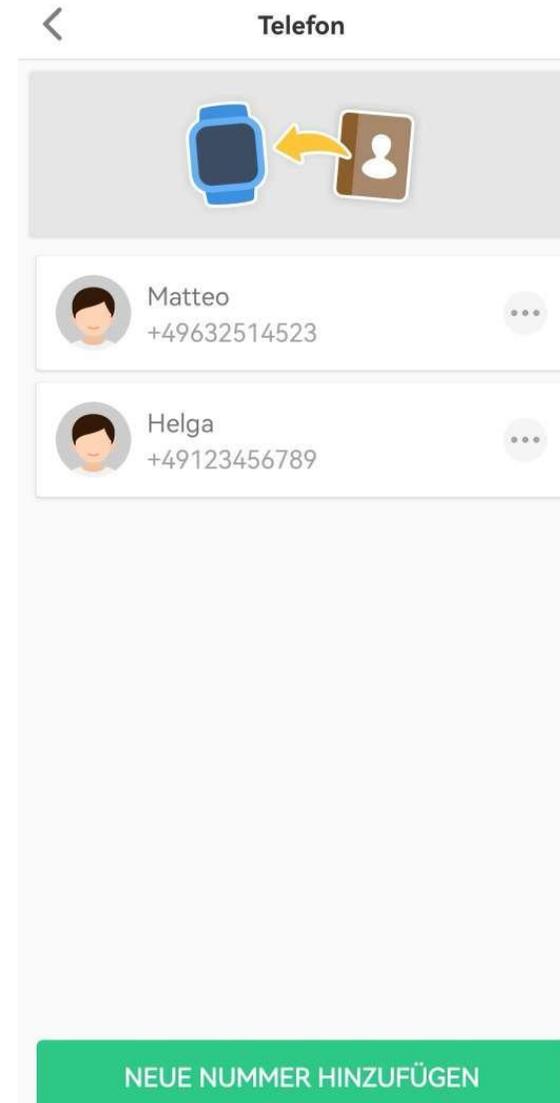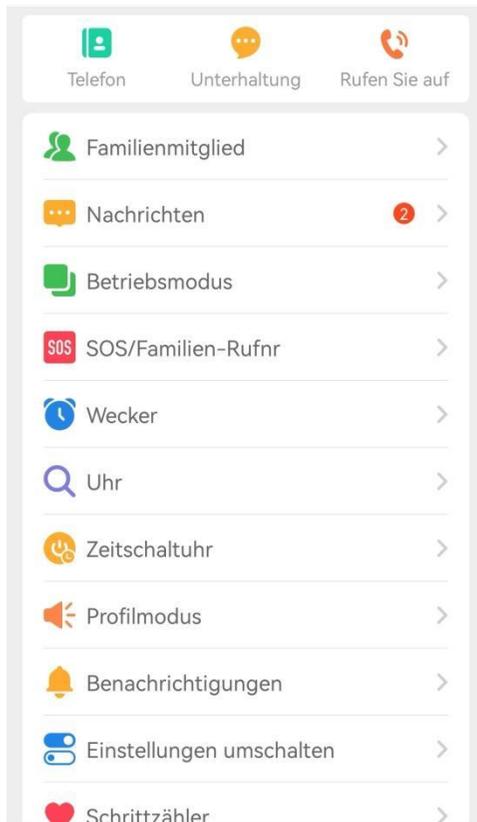

12. Beschreibung des Menü der App – Startseite

- **Benutzer** – zeigt alle Konten von Benutzer an, die das Hausnotruf Watch 1 zugeordnet wurden.
- **Nachrichten**

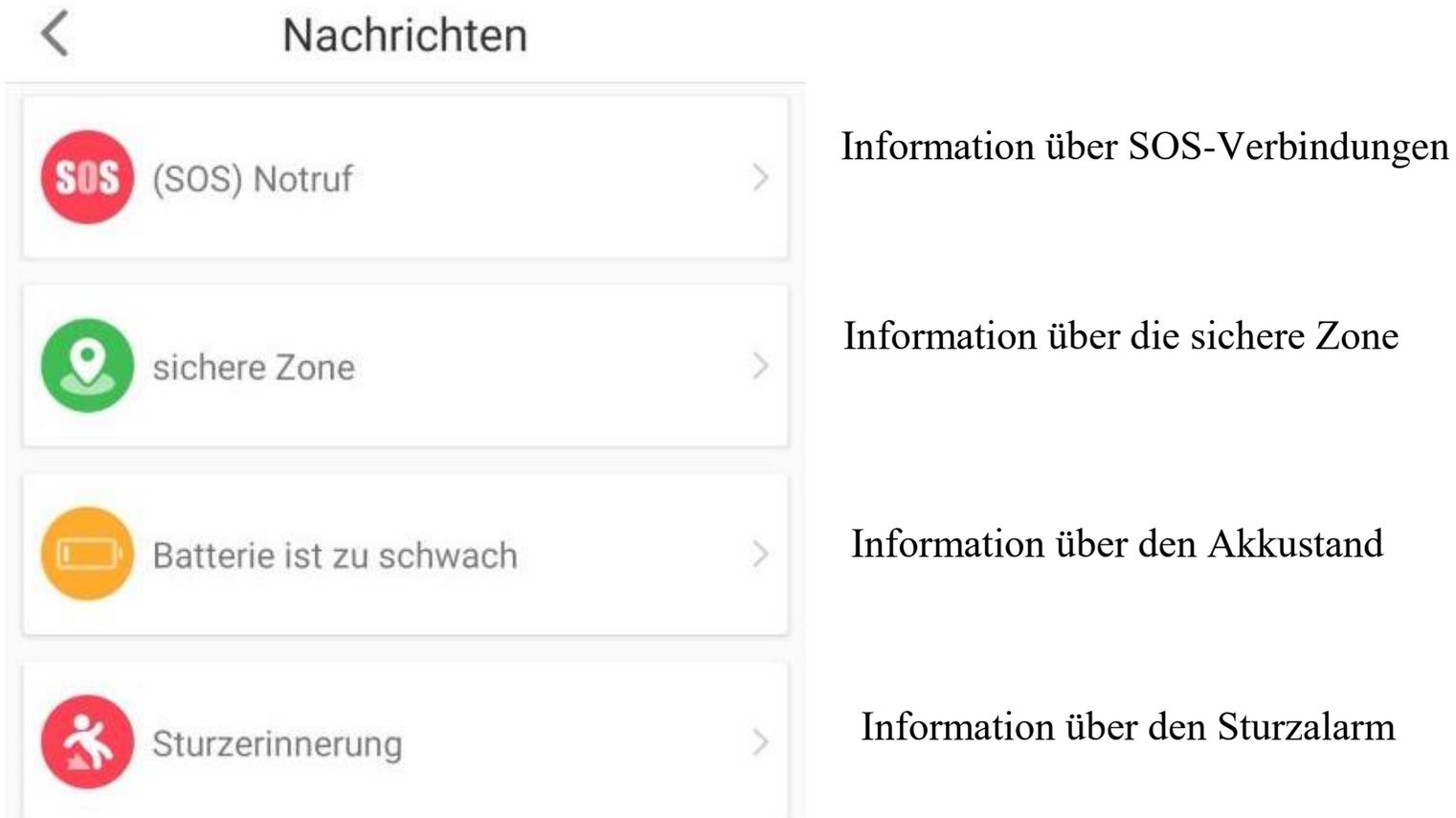

- **Betriebsmodus** – 3 Betriebsarten: Normalbetrieb, Energiesparmodus, Schlafmodus

< Betriebsmodus





Normalbetrieb: 10 Min.(or 6x/h)

Energiesparmodus: 60 Min.(or 1x/h)

Schlafmodus: Manuelles Positionieren

SPEICHERN


- **Wecker** – 3 verschiedene Uhrzeiten einstellbar

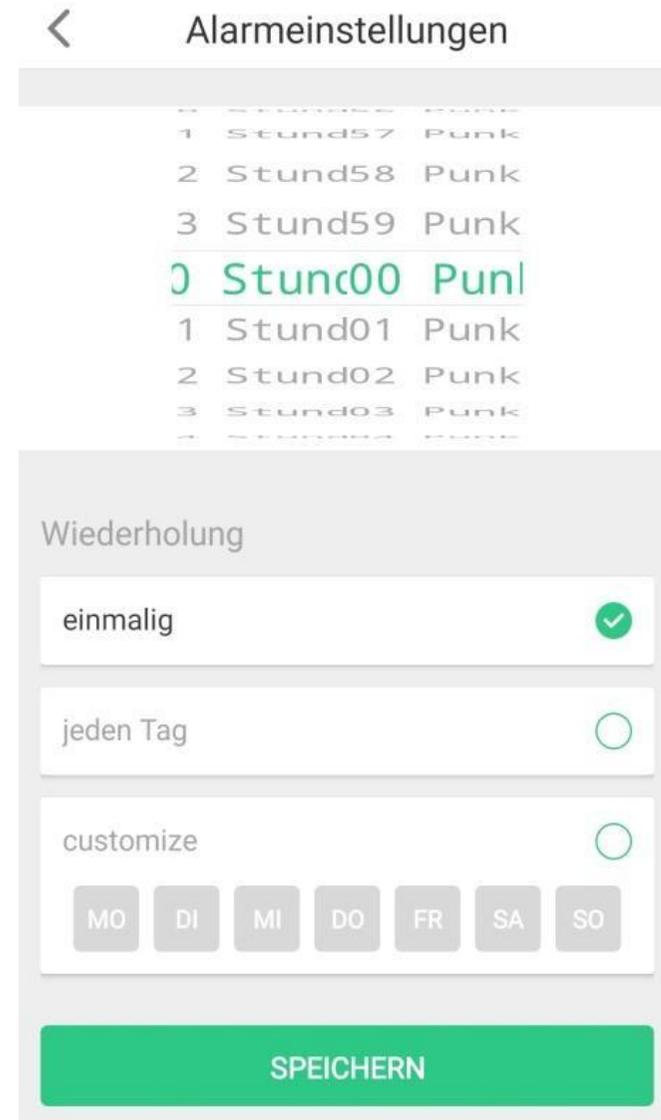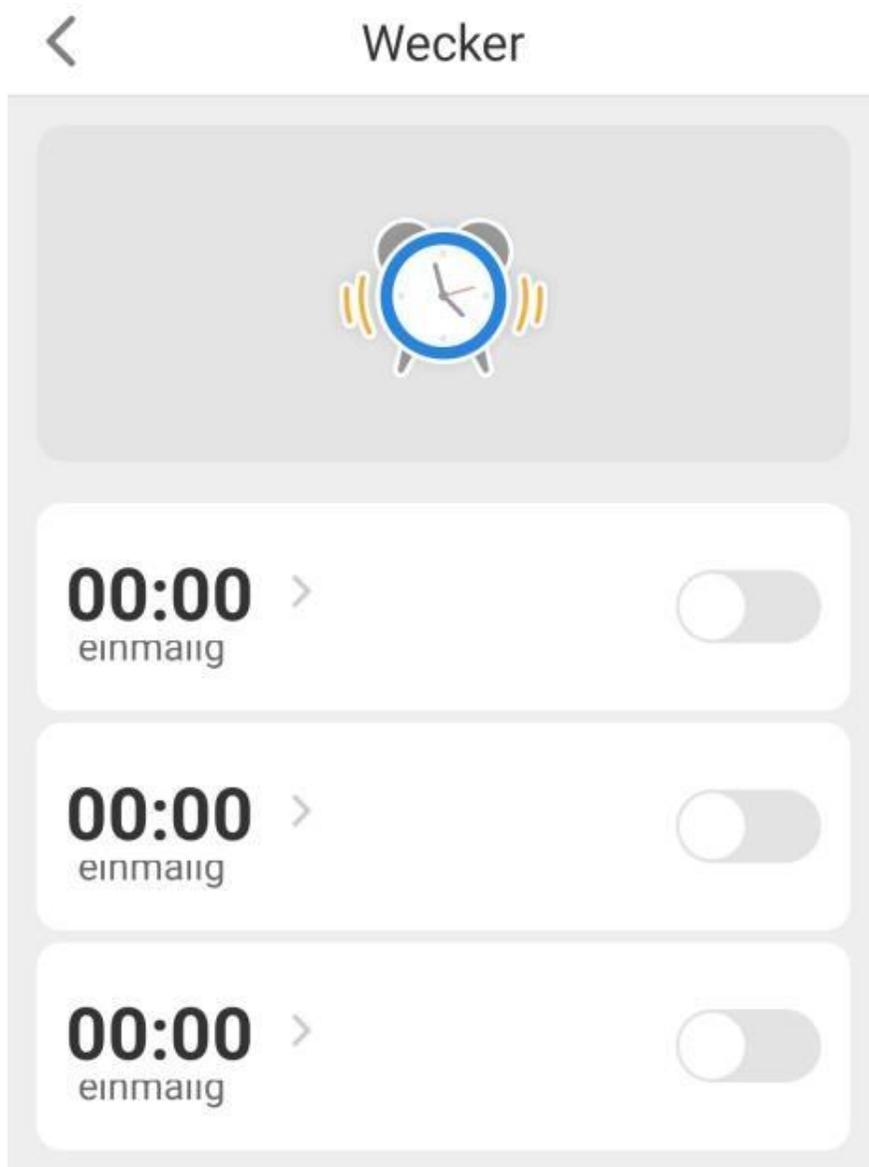

- **Hausnotruf Watch 1** – akustische Ortung des Hausnotruf Watches, falls Sie es verlegt haben. Bei Nutzung dieser Funktion, vibriert und klingelt das Hausnotruf Watch.



- **Zeitschaltuhr** – für das automatische Ein- und Ausschalten des Hausnotruf Watch 1

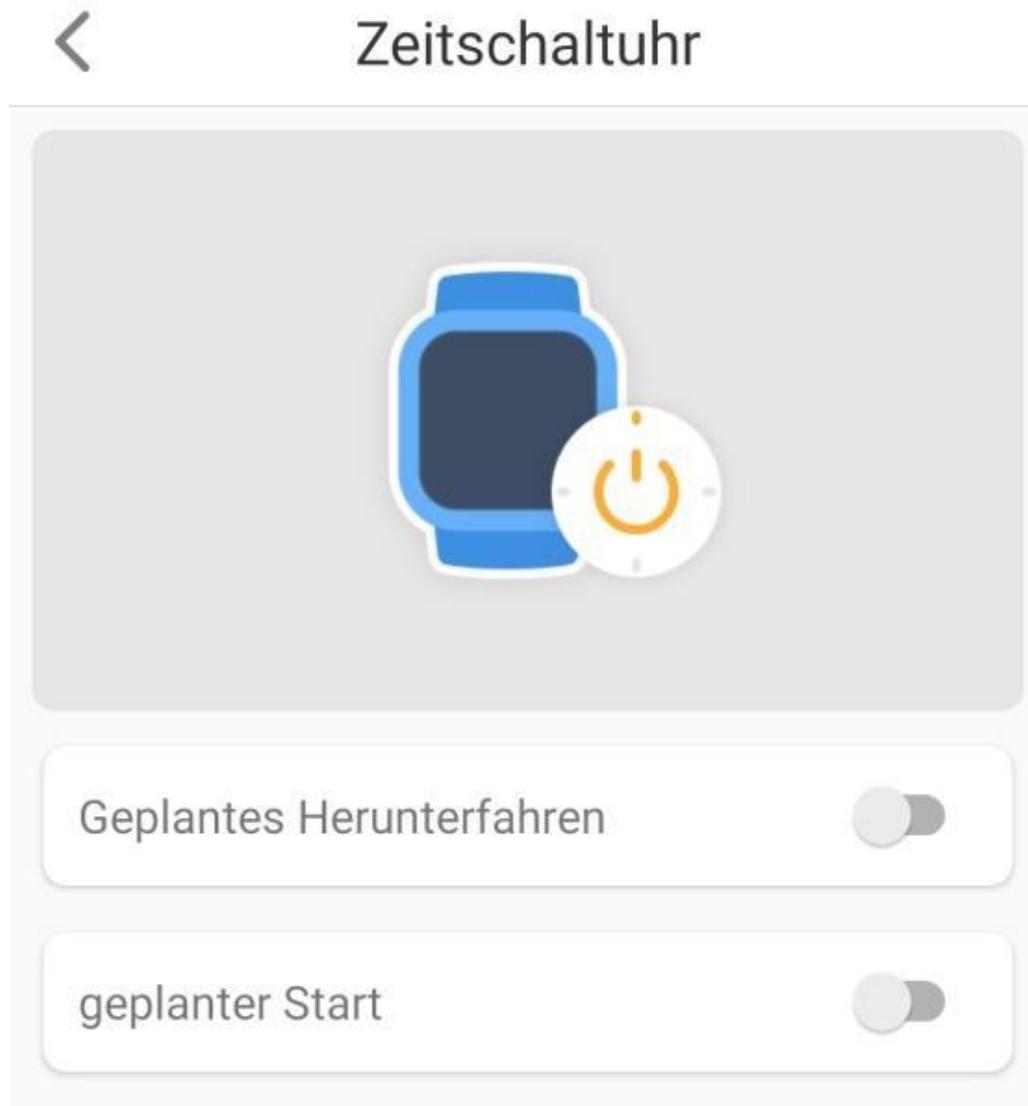

- **Nachtstromsparmmodus** – für die Aktivierung/Deaktivierung des Nachtbatteriesparmodus



- **Benachrichtigungen per SMS** – Rufnummer für SMS-Benachrichtigungen bei zu geringem Akkustand und nach Betätigung des SOS-Buttons auf der Uhr

< Benachrichtigungen


Rufnummer

 Akkustand Warnung

 SOS-Nachricht

SPEICHERN

- **Einstellungen umschalten** – Aktivierung der Funktionen für das NotfallArmand: Telefonnummer wählen und GPS-Positionierung

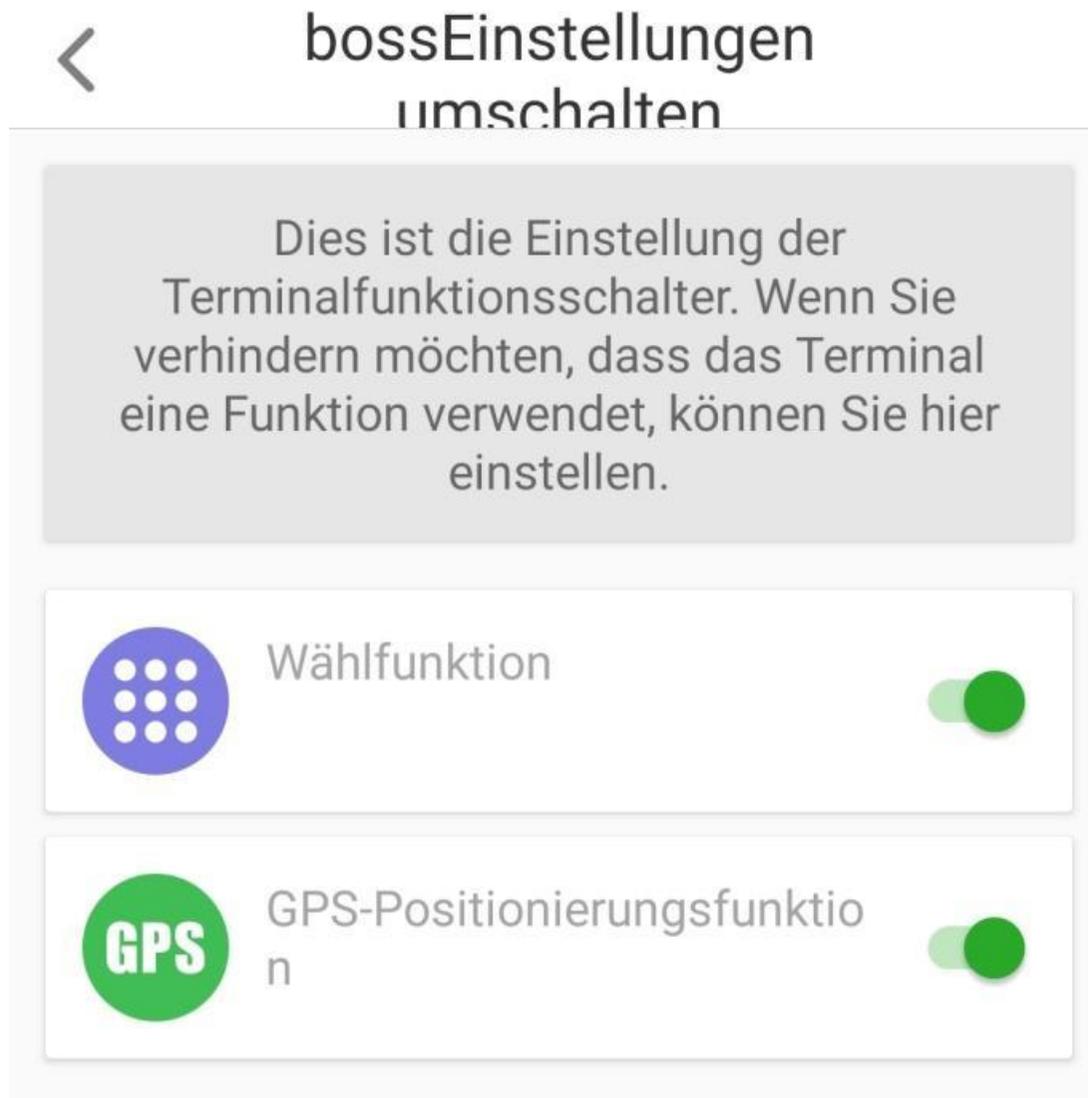

- **WiFi – Einstellungen des Terminals**

Einstellung der Internetverbindung per WiFi



- **Schrittzähler**

< Schrittzähler

25-08-2020  Verlauf

 Weg 0 >
Schritt

 Aufgaben 0 >
Kalorien

 Tour 0 >
Meter

 Schlafrhythmus 0 >
Zeiten

 Blutdruck /Herzfrequenz >

Einstellungen und Informationen über die körperliche Aktivität und Blutdruckmessung

← Einstellungen

 Zeit: 00:00-23:59

 Schritte (cm): 50

 Gewicht(kg): 80

 Routenverlauf-Taste

← Einstellungen

 Zeit: 00:00-00:00

 Taste

← BLUTDRUCK /HERZFREQUENZ



110 72
 Der systolische Blutdruck/mmHg Der diastolische Blutdruck/mmHg

Starten Sie die Messung

Normalbereich		
Puls	60-100	Zeiten
Der systolische Blutdruck	90-139	mmHg
Der diastolische Blutdruck	60-89	mmHg

- **Körpertemperaturmessung**




- **Medizinische Erinnerung** – Einstellungen für die Medikamenteneinnahme



Medizinische Erinnerung



- **Seltsame Anrufe ablehnen** – Anrufe von Nummern werden blockiert, die nicht im Telefonbuch Ihres Hausnotruf Watches hinterlegt sind.

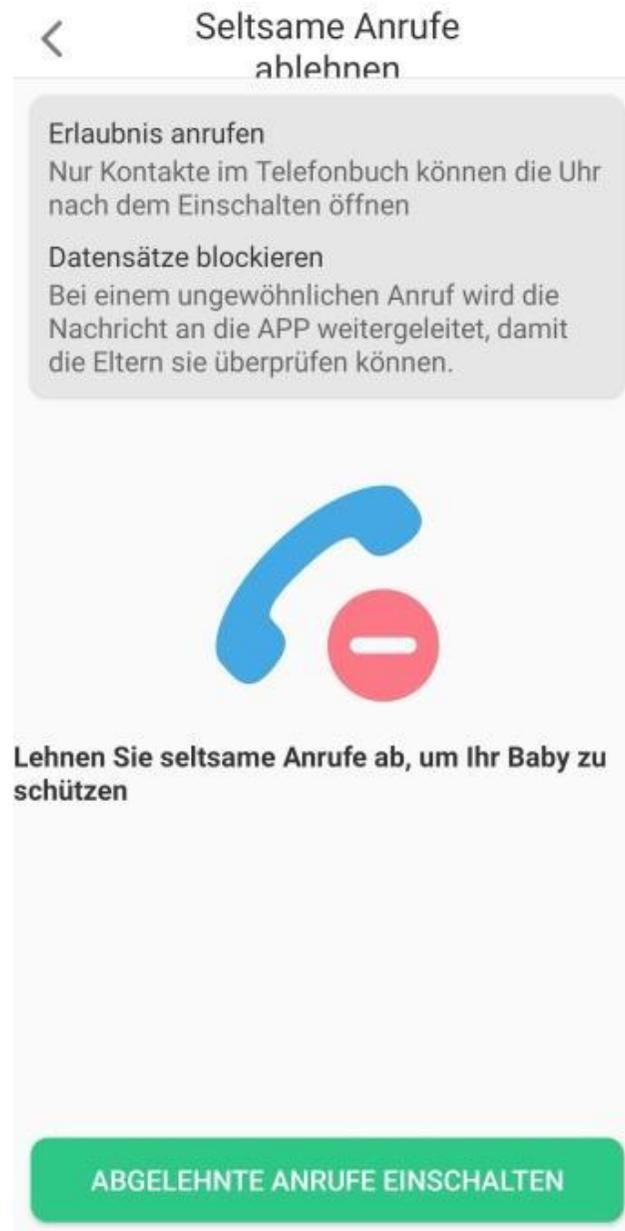

- **Zeitzonenauswahl** – Festlegung der Zeitzone, in dem das Hausnotruf Watch verwendet wird

< Zeitzonenauswahl

Sommerzeit:

East:GMT+12:00

East:GMT+11:30

East:GMT+11:00

East:GMT+10:30

East:GMT+10:00

East:GMT+9:30

East:GMT+9:00

East:GMT+8:30

East:GMT+8:00

OK


- **Sprachwahl** – Festlegung der Konfigurationssprache

< Sprachwahl

español	<input type="radio"/>
English	<input type="radio"/>
português	<input type="radio"/>
中文繁体	<input type="radio"/>
Malay	<input type="radio"/>
Deutsch	<input checked="" type="radio"/>
Polski	<input type="radio"/>
français	<input type="radio"/>
Türkçe	<input type="radio"/>
lingua italiana	<input type="radio"/>

OK

- **LBS** – Einschaltung der Ortung über LTE-Sende-/Empfangsanlagen (nützlich, bei schwachem GPS-Signal)

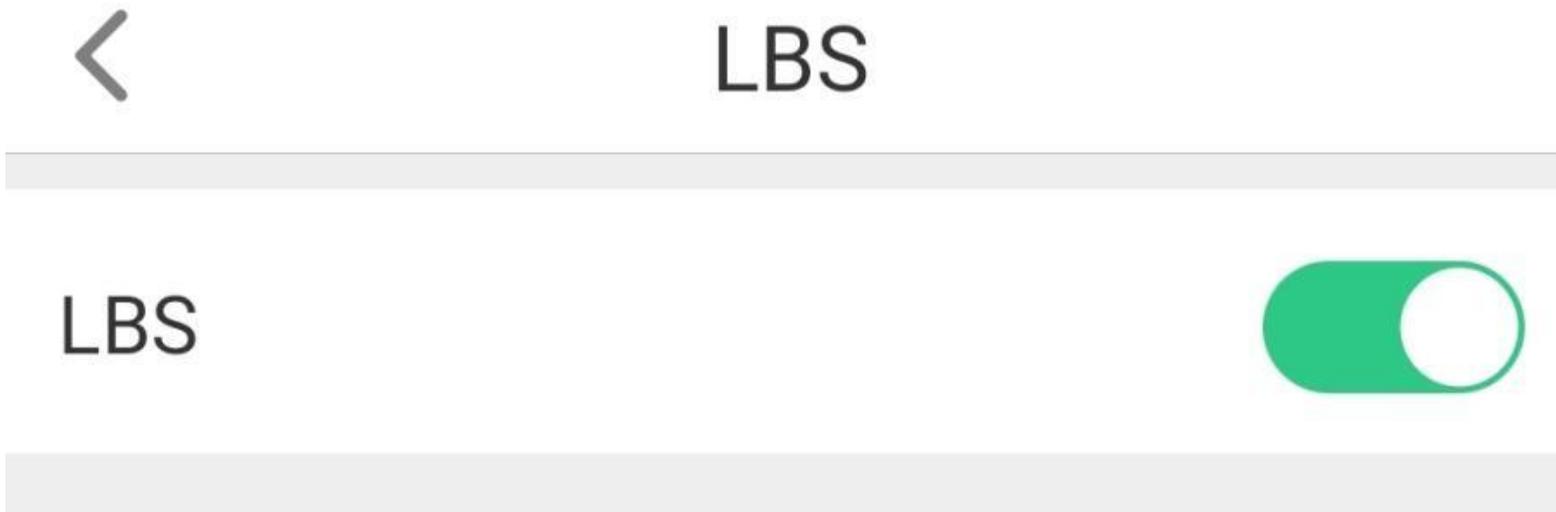

- **Konto Logout** – Kontolöschung (kann nicht rückgängig gemacht werden)

< Konto Logout



Konto Logout

Das Kündigen eines Kontos ist ein irreversibler Vorgang. Bitte bestätigen Sie, dass alle mit dem Konto verbundenen Dienste ordnungsgemäß abgewickelt wurden.


Nach der Kündigung Ihres Kontos können Sie dieses Konto nicht mehr verwenden oder Inhalte oder Informationen abrufen, die Sie hinzugefügt oder gebunden haben (selbst wenn Sie dasselbe Konto zum Registrieren und erneuten Verwenden verwenden), einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

1. können Sie sich nicht anmelden und verwenden Dieses Konto.
2. Die persönlichen Informationen und historischen Informationen Ihres Kontos werden nicht abgerufen.
3. Alle Datensätze von Diensten von Drittanbietern, die Sie durch Kontobindung oder Kontobindung verwenden, können nicht abgerufen werden. Sie können sich nicht mehr anmelden und die oben genannten Dienste nutzen. Die Liebe, Goldmünzen, Punkte von Drittanbietern, Bestellungen, Tickets und andere Gutscheine, die Sie erhalten haben, gelten als von Ihnen aufgegeben und werden nicht verwendet.

Bitte beachten Sie, dass die Kündigung Ihres Kontos nicht bedeutet, dass das Kontoverhalten und die


- **Gerät zurücksetzen** – Werkeinstellungen wiederherstellen

< Gerät zurücksetzen

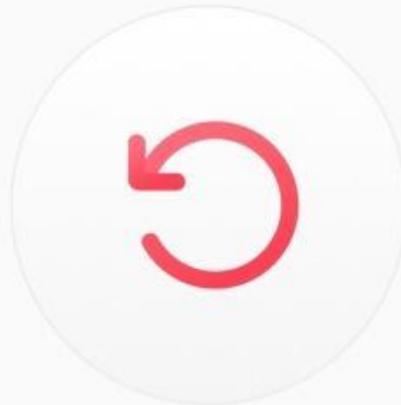


Stellen Sie Ihr Gerät auf die Werkeinstellungen zurück

- **Remote-Neustart** – Restart des Hausnotruf Watches aus der Ferne

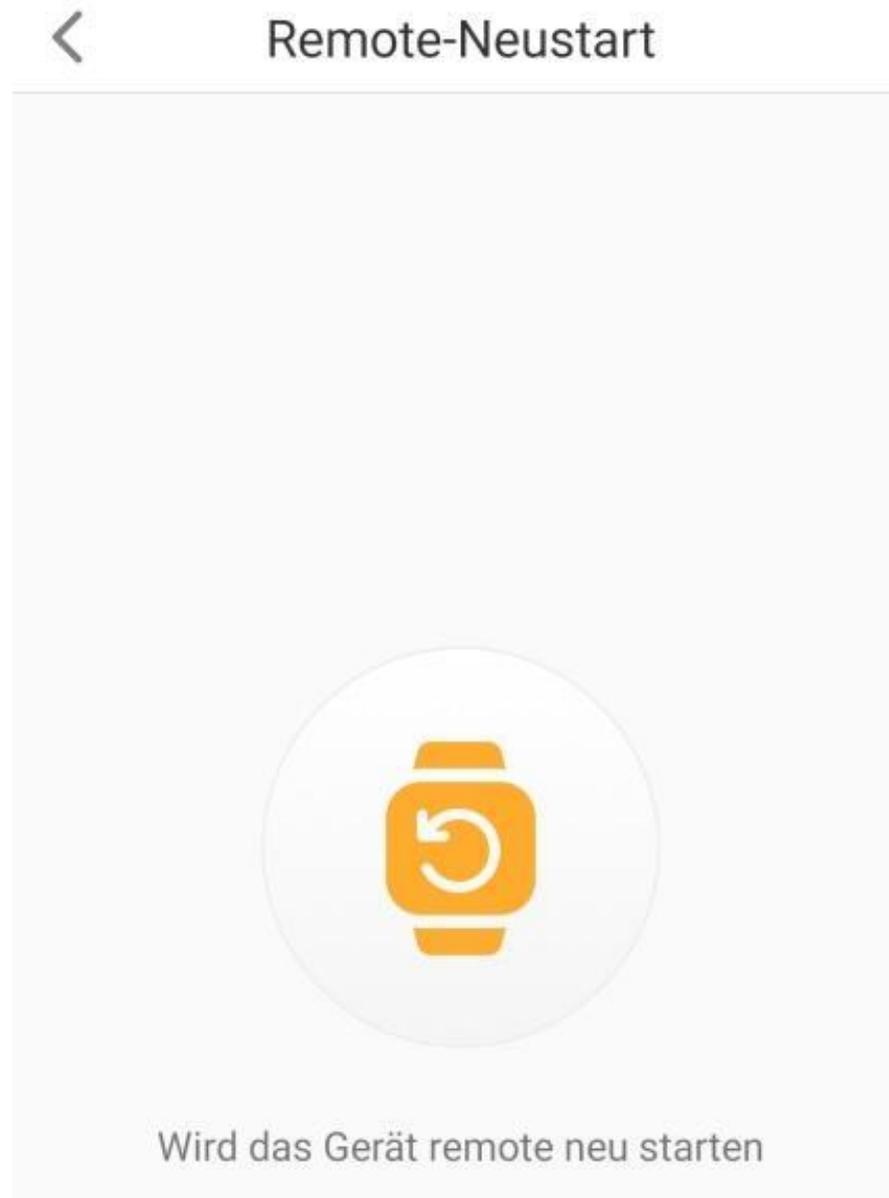


- **Fernabschaltung** – Ausschalten des Hausnotruf Watches aus der Ferne

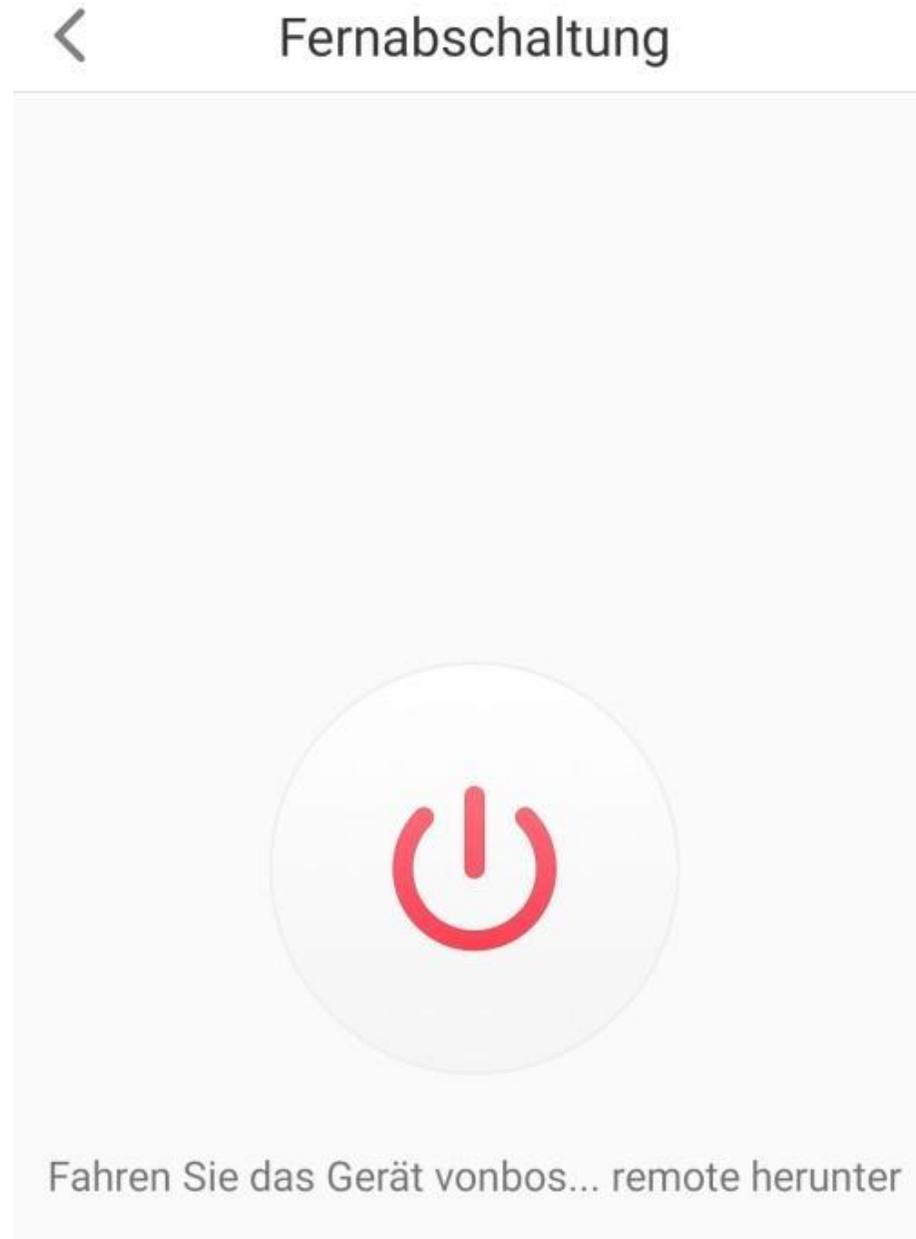

13. Beschreibung des Menü der Benutzer-App

- **Persönliche Daten** – persönliche Daten des Benutzers
- **Passwort ändern** – Änderung des Passworts
- **Geräteliste** – Liste der in der App zugeordneten Geräte
- **Werbedienst entfernen** – Entfernung von Anzeigen in der App (kostenpflichtiger Service)
- **Konto Logout** – Konto löschen
- **Ausloggen** – Ausloggen aus der App

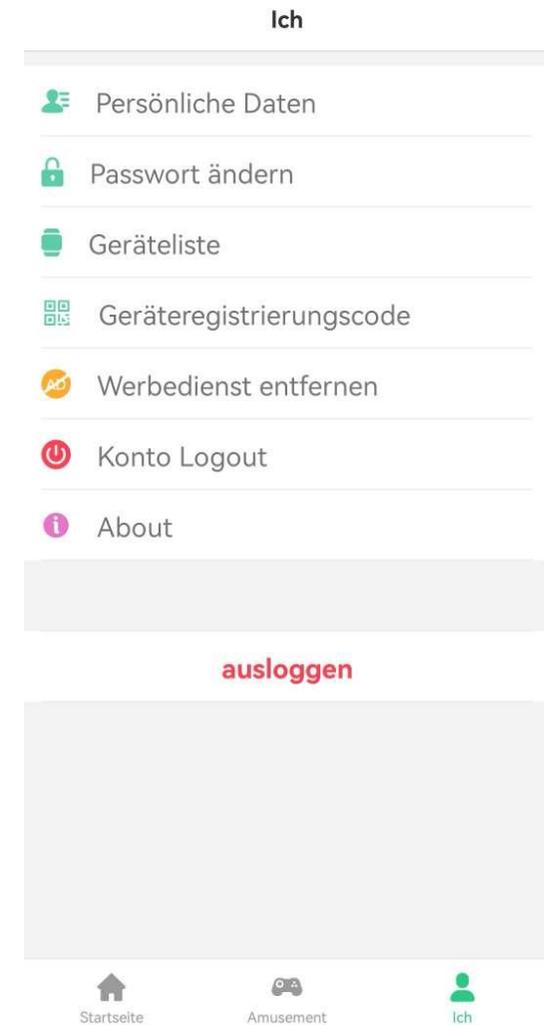


14. GPS-Ortung

Das Hausnotruf Watch 1 bietet die Möglichkeit, die Position des Benutzers zu lokalisieren und in der App anzuzeigen. Die Ortung funktioniert nicht in geschlossenen Räumen, d.h. das eine Ortung des genauen Raumes in der sich der Armbandnutzer gerade befindet nicht möglich ist. Die App zeigt den letzten GPS-Standort und den ungefähren WiFi-Standort an. Dabei wird der WiFi-Hotspot verwendet, in dessen Bereich sich das WiFi-Calling der SIM-Karte des Hausnotruf Watch 1 rmbandes registriert.

Wenn Sie in der App den Standort des Hausnotruf Watch 1 manuell aktualisieren, beachten Sie bitte, dass die Rückmeldung des aktuellen Standortes bis zu 10 Minuten dauern kann.

- **Beispiele für die Standortanzeige**

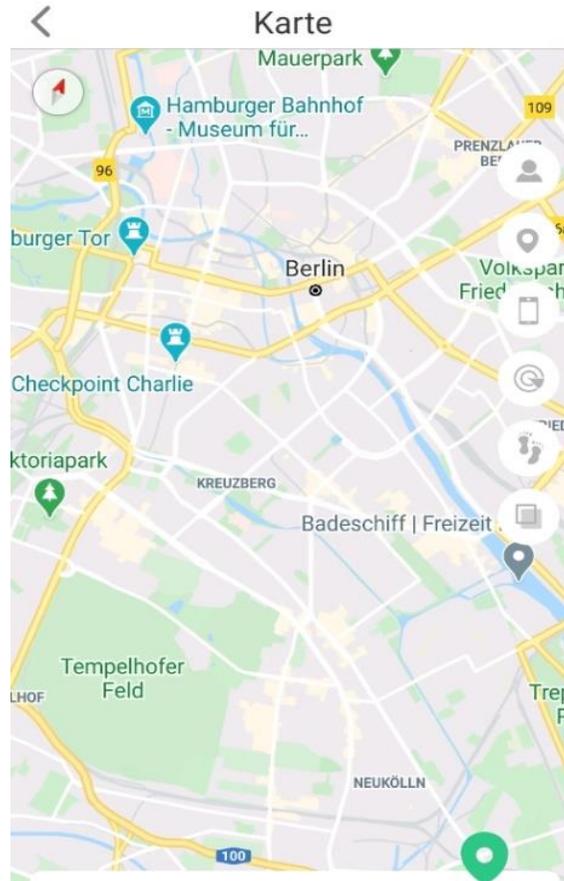

15. Problemlösungen

Ihr Hausnotruf Watch 1 kann keine Verbindung zum Server herstellen, wenn das Armband zum ersten Mal eingeschaltet wird. Bitte überprüfen Sie:

- Ist die SIM-Karte für das 4G-Netz geeignet?
- Ist Ihre SIM-Karte aktiv und die ID-Nummer (siehe Barcode auf dem Armband) mit der ID in der App identisch?
- Haben Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte entfernt?
- Sind alle Einstellungen in der App korrekt?

16. Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Der eingebaute Akku muss vor der Entsorgung entnommen werden.

Schrauben Sie hierzu das Gehäuse wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben auf, lösen Sie die Verbindung des Akkus zur Platine und entnehmen Sie den eingebauten Akku. Falls ein Zusatzakku angeschlossen ist, lösen Sie dessen Verbindung zur Platine ebenfalls.

Entsorgen Sie den/die Akkus getrennt vom Produkt.

b) Batterien und Akkus



Sie sind als Endverbraucher gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol). Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden! Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

17. Pflege und Reinigung

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch die Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Smart Watch und ihre Bauteile mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einem weichen Pinsel.

18. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Mobi-Click GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 60, D-15230 Frankfurt (Oder), dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/34/EU entspricht.

19. Spezifikation

Abmessungen: 54 mm x 37 mm x 17 mm

Gewicht: 51g

Material: PC+ABS+Silicon

Operationssystem: RT System

Batteriekapazität: Klasse A 800mAh LiPo

Netz: 4G/2G

Bildschirm: kein Bildschirm

Taste: SOS-Taste

SIM Karte: Nano SIM-Karte

Frequenzbänder:

- 4G-FDD: Band 1/2/3/5/7/8/20

- 4G-TDD: Band 38/39/40/41

- 2G-GSM: Band 2/3/5/8

Ortung: GPS+LBS+Wifi Hotspots

Speicher: 128MB+196MB

Betriebszeit: 4-5 Tage

Wasser/Schutzklasse: IP67

Farbe: schwarz

GPS-Positionsgenauigkeit: weniger als 5 Meter



So verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Hausnotruf Watch 1

- Benutzen und lagern Sie das Hausnotruf Watch 1 nicht in staubigen, heißen und kalten Plätzen, in Kontakt mit Elektrizität und Chemie. Halten Sie das Hausnotruf Watch 1 und das Zubehör immer trocken.
- Vermeiden Sie unsachgemäße Gewalteinwirkung auf das Hausnotruf Watch 1.
- Reinigen Sie das Hausnotruf Watch 1 mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Versuchen Sie nicht das Hausnotruf Watch 1 selbst zu reparieren, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Die Verwendung anderer Batterien führt zu unerwünschten Situationen.
- Um einen Unfall zu vermeiden, beschäftigen Sie sich nicht mit dem Hausnotruf Watch 1, wenn Sie ein Fahrzeug führen.
- Bitte schalten Sie Ihre Hausnotruf Watch 1 im Flugzeug aus und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen. Drahtlose, elektronische Geräte können Störungen im Flugzeug verursachen.