



MOPEDIA®

IT **PEDALIERE**
MANUALE DI ISTRUZIONI

EN **PEDAL EXERCISERS**
INSTRUCTION MANUAL

ES **PEDALIERS**
MANUAL DE INSTRUCCIONES

SCAN QR-CODE
FOR MORE LANGUAGES



INDICE

1. CODICI	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE	PAG.3
5.2 Avvertenze per l'uso	pag. 3
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA	PAG.4
7. PRIMA DI OGNI USO	PAG.4
8. VISTA DELLE PARTI E ASSEMBLAGGIO	PAG.5
8.1 Vista delle parti RP950	pag. 5
8.2 Vista delle parti RP951	pag. 6
8.3 Vista delle parti RP953	pag. 7
9. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.12
10. DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA (SOLO PER RP951 RP958)	PAG.12
11. MANUTENZIONE	PAG.13
12. PULIZIA E DISINFEZIONE	PAG.14
12.1 Pulizia	pag. 14
12.2 Disinfezione	pag. 14
13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	PAG.14
14. GARANZIA	PAG.14
15. RIPARAZIONI	PAG.14
15.1 Riparazione in garanzia	pag. 14
15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag. 14
15.3 Prodotti non difettosi	pag. 15
16. RICAMBI	PAG.15
17. CLAUSOLE ESONERATIVE	PAG.15

1. CODICI

- RP950** Pedaliera meccanica attiva
- RP951** Pedaliera elettrica attiva-passiva
- RP953** Pedaliera magnetica
- RP955** Cyclette accesso facilitato
- RP958** Pedaliera elettrica attiva-passiva dual

Nota: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

3. DESTINAZIONE D'USO

Le pedalieri Mopedi Crossy sono dispositivi medici ad uso interno e professionale, destinato a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia PEDALIERE PER RIABILITAZIONE sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 Aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE

- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili e non oltre i 10 anni.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

ATTENZIONE!

Per l'utilizzo in sicurezza, seguire attentamente le seguenti disposizioni:



- L'apparecchiatura deve avere almeno 60 cm di spazio libero sui lati di accesso alla postazione di allenamento
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali
- Impedire ai bambini l'accesso non supervisionato del dispositivo

5.2 Avvertenze per l'uso

- Le basi di appoggio devono essere a contatto con il piano in qualsiasi momento durante l'uso per garantire il corretto bilanciamento del dispositivo e la massima sicurezza.
- Non usare il dispositivo se deformato. Pericolo d'incidente!

- Modifiche alla pedaliera non autorizzate o l'uso di parti di ricambio non originali possono cambiare la struttura del prodotto e creare condizioni di pericolo, che possono provocare seri danni ed invalidare la garanzia.
- Il prodotto è soggetto a particolari sforzi che dipendono dalla qualità di utilizzo e dal peso della persona. Per questo motivo consigliamo di controllarne l'integrità con un controllo periodico ogni 3 o 4 mesi, soprattutto se viene sottoposto ad urti o a sollecitazioni non naturali per il suo utilizzo.

ATTENZIONE!

Siate consapevoli dei segnali del vostro corpo. Un esercizio fisico scorretto o eccessivo può danneggiare la salute. Smettete di fare esercizio se avvertite uno dei seguenti sintomi: dolore, oppressione al petto, battito cardiaco irregolare, mancanza di respiro, sensazione di testa leggera, vertigini o nausea. Se si verifica una di queste condizioni è necessario consultare il medico prima di continuare il programma di esercizi.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

Codice prodotto



Identificativo univoco del dispositivo



Marchio CE



Fabbricante



Lotto di produzione



Leggere il manuale per le istruzioni



Dispositivo Medico



Condizioni di smaltimento



Attenzione



Data di produzione



Smaltimento prodotto secondo la direttiva CE/19/2012



Protezione da polvere e spruzzi d'acqua



Parte applicata di tipo B



Peso max supportato

7. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al bloccaggio dei pedali e al loro corretto inserimento
- Verificare sempre il corretto funzionamento del freno per la regolazione dell'intensità di sforzo
- Assicurarsi che le viti siano tutte completamente serrate prima dell'uso;
- Posizionare il prodotto in modo stabile e su una superficie piana, lontano da tappeti o simili.
- Verificare l'integrità delle parti elettriche e dei cavi di alimentazione
- Assicurarsi di essere fisicamente in grado di utilizzare il dispositivo
- Assicurarsi di avere l'abbigliamento adeguato all'attività
- Indossare sempre calzature o calze per l'allenamento delle gambe

**ATTENZIONE!**

Consultare sempre il vostro medico o terapista prima di eseguire qualsiasi terapia riabilitativa.

ATTENZIONE!

Il dispositivo deve ricevere una regolare manutenzione e deve essere controllato quotidianamente per operare in modo corretto. Si raccomanda di sostituire immediatamente le parti usurate o rotte perché potrebbero causare danni al paziente. È consigliabile che un esperto mostri come si usa la pedaliera, invitando il paziente a ripetere più volte le operazioni necessarie sotto la sua supervisione. Per una corretta riabilitazione è necessario mantenere una postura adeguata. Prima di iniziare le attività, rivolgersi al proprio medico/terapista.



ATTENZIONE!


Il mancato rispetto delle indicazioni può causare lesioni o gravi problemi di salute.



Nota: assicurarsi sempre di assumere una posizione corretta durante l'utilizzo delle pedalieri basse RP950-RP951-RP953 come riportato nell'immagine di fianco

8. VISTA DELLE PARTI E ASSEMBLAGGIO

8.1 Vista delle parti RP950

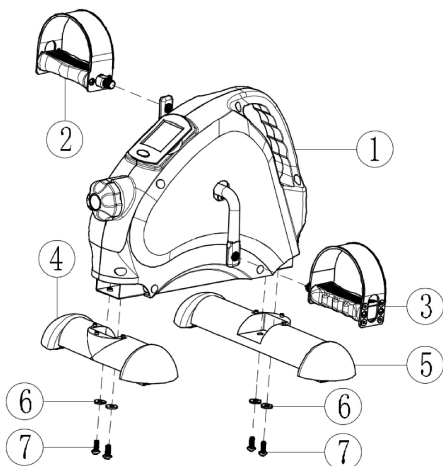

1. Struttura base 1
2. Pedale sinistro 1
3. Pedale destro 1
4. Base anteriore 1
5. Base posteriore 1
6. Rondella 4
7. Vite 4
8. Vano batterie

Utensili: Chiave a brugola e chiave esagonale incluse nella confezione

8.1.1 Assemblaggio:


- Fissare la base anteriore (4) e la base posteriore (5) alla struttura di base (1) con le viti e la rondella (6) .
- Assicurandosi che siano posizionati correttamente.
- I pedali e le pedivelle sono contrassegnati da "L" per sinistra e "R" per destra;
- Collegare il pedale sinistro (2) e il pedale destro (3) alle pedivelle corrispondenti assicurandosi che le marcature corrispondano.

8.1.2 Utilizzo

- Posizionare la pedaliera su una superficie stabile e con un buon attrito
- Controllare che le batterie siano correttamente inserite
- Svolgere l'attività su di una sedia stabile (sedia o poltrona) posta ad una distanza funzionale dalla pedaliera, eventualmente utilizzare il cinturino in dotazione per una maggiore stabilità
- Regolare l'intensità della resistenza
- Inserire i piedi nei pedali, e iniziare a pedalare con intensità gradualmente crescente fino alla velocità desiderata

8.1.3 Funzione display

- Il computer è dotato di un display a due righe sul quale possono essere visualizzate le diverse funzioni.
- La velocità è visualizzata sempre nella riga superiore.
- Nella riga inferiore sono disponibili diverse visualizzazioni.
- Premere il tasto ovale sotto il display per passare da una visualizzazione all'altra:

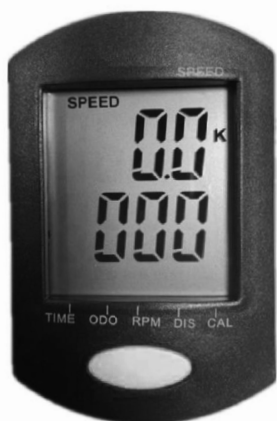

SCAN: ogni funzione viene visualizzato per alcuni secondi.

TEMPO: Tempo di allenamento precedente in minuti e secondi (0:00 - 99:59).

ODO: Distanza totale percorsa dall'ultimo inserimento della batteria (0 - 9999,0).

BATTERIA: (0 - 9999,0 km).

Nota: questo valore viene azzerato non appena la batteria esausta viene rimossa e sostituita con una nuova


RPM: Indica la velocità di rotazione al minuto (0 - 999).

DIST: Indica la distanza percorsa. (0,00 - 99,99 km)

CAL: mostra il numero di calorie bruciate

Tenere premuto il tasto ovale per circa tre secondi per cancellare tutti i valori (tranne l'ODO).

8.2 Vista delle parti RP951

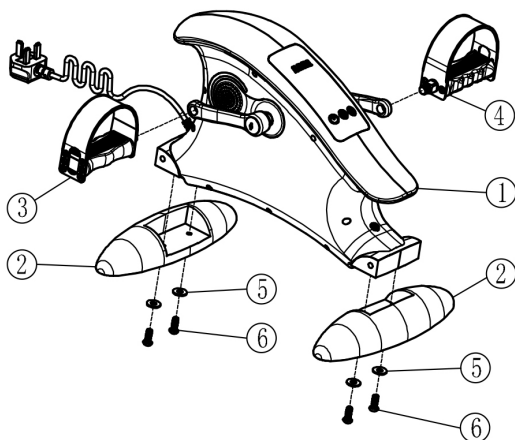

1. Struttura base 1

2. Basi 2

3. Pedale sinistro 1

4. Pedale destro 1

5. Rondella 4

6. Vite 4

7. Telecomando:

1. Aumento velocità/resistenza

2. Cambio modalità Attiva/passiva/

3. Diminuzione velocità/resistenza

4. Accensione/spengimento

Utensili: Chiave a brugola inclusa nella confezione

Immagini a scopo illustrativo

8.2.1 Assemblaggio

- Assemblare le basi (2) alla struttura principale utilizzando viti e rondelle (4) e (6).
- I pedali e le pedivelle sono contrassegnati da "L" per sinistra e "R" per destra, quindi assemblare i pedali destro (4) e sinistro (3) assicurandosi che le marcature corrispondano.

8.2.2 Utilizzo

- Posizionare la pedaliera su una superficie stabile e con un buon attrito
- Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito alla presa di corrente
- Svolgere l'attività su di una seduta stabile (sedia o poltrona) posta ad una distanza funzionale dalla pedaliera, eventualmente utilizzare il cinturino in dotazione per una maggiore stabilità
- Regolare l'intensità della resistenza
- Premere il pulsante di accensione. Sullo schermo viene visualizzato "----" : modalità standby.
- Premere il pulsante M per passare alla modalità di esercizio.
- In modalità standby, premere il pulsante M per selezionare la modalità passiva H001 o attiva A001
- La modalità passiva ha 9 livelli di velocità impostabili col pulsante di sinistra
- La modalità attiva ha 6 livelli di resistenza impostabili col pulsante di sinistra
- Col pulsante centrale è possibile invertire il senso di marcia
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente subito dopo l'uso e prima della pulizia.




ATTENZIONE!

Rimuovere la linguetta di plastica trasparente sul lato del telecomando per metterlo in funzione

Nota: Se l'intera persona si alza in piedi o tiene intenzionalmente la pedaliera per impedire il movimento, la pedaliera andrà in protezione e non funzionerà, per evitare danni da sovraccarico

8.3 Vista delle parti RP953

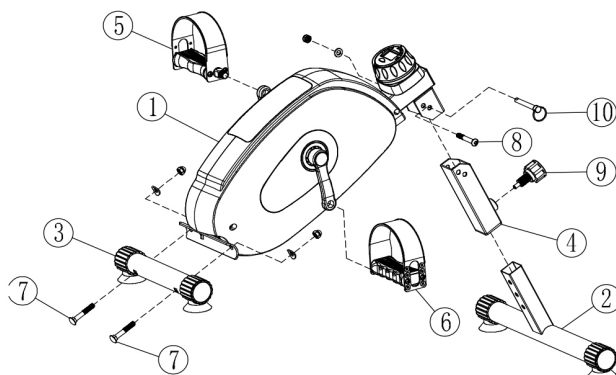

1. Struttura base 1
2. Base anteriore 1ù
3. Base posteriore 1
4. Tubo connettore 1
5. Pedale sinistro 1
6. Pedale destro 1
7. Vite fissaggio base 2
8. Vite fissaggio tubi 1
9. Manopola 1
10. Pin di blocco
11. Vano batterie

Utensili: Chiave a brugola e chiave esagonale incluse nella confezione

8.3.1 Assemblaggio:

- Assemblare la base posteriore N3 con la struttura base N1 con le viti N7.
- Assemblare il tubo connettori N4 con struttura base N1.
- Con la vite N8, bloccare col pin di blocco N10.
- Collegare la base anteriore N2 con la struttura base usando la manopola N9.
- Assemblare il pedale sinistro N5 e il pedale destro N6 alla struttura base.

8.3.2 Utilizzo

- Posizionare la pedaliera su una superficie stabile e con un buon attrito
- Controllare che le batterie siano correttamente inserite
- Svolgere l'attività su di una seduta stabile (sedia o poltrona) posta ad una distanza funzionale dalla pedaliera, eventualmente utilizzare il cinturino in dotazione per una maggiore stabilità
- Regolare l'intensità della resistenza
- Inserire i piedi nei pedali, e iniziare a pedalare con intensità gradualmente crescente fino alla velocità desiderata

8.3.3 Funzione display

MODE: Premere questo tasto per selezionare e bloccare le funzioni specifiche richieste. Premere a lungo questo tasto per 4 secondi per cancellare tutte le letture.

TMR: Tempo totale pedalato

CNT: mostra il numero di ripetizioni

TOTCNT: Numero totale di ripetizioni

CAL: Calorie totali bruciate


TMR: Visualizza il tempo di movimento corrente, che può essere temporizzato in avanti, o il conto alla rovescia (quando si imposta il valore target, che può essere conteggiato alla rovescia). Intervallo di visualizzazione: 00:00 -- 99:59 minuti: secondi.

CTN: Mostra il numero di ripetizioni durante l'allenamento (contatore 0~9999).

TOTCNT: Mostra il numero totale di ripetizioni durante l'allenamento (contatore 0~9999).

CAL: Mostra le calorie consumate dall'esercizio quando si imposta il valore target

8.4 Vista delle parti RP955

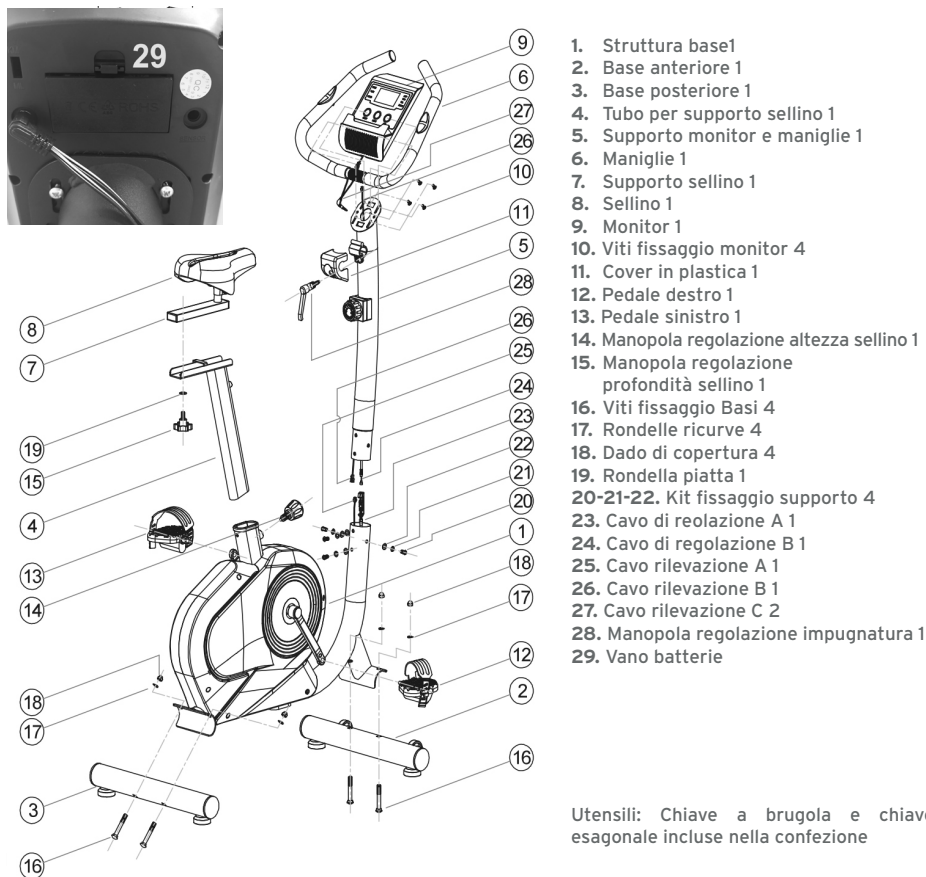

Utensili: Chiave a brugola e chiave esagonale incluse nella confezione

8.4.1 Assemblaggio

1. Assemblare la base anteriore (con ruote) e la base posteriore (2 e 3) alla struttura base (1) fissare sul corpo principale (1) usando le viti (16), rondelle ricurve (17) e dadi di copertura (18).
2. Installare il pedale destro e sinistro (12 e 13) con il segno R per il destro e L per il sinistro sulla struttura base (1), dopodiché serrare in senso orario il pedale destro e antiorario il sinistro.
3. Posizionare la manopola di regolazione (14) nell'alloggio evitando di stringere fino in fondo.
4. Inserire il tubo per il supporto sellino (4) nell'alloggio, a questo punto sollevare la manopola e far scivolare il tubo fino a bloccarlo.
5. Avvicinare la colonna di supporto monitor e maniglie (5) al tubo di uscita cavi della struttura base e collegare i cavi nel seguente modo:
6. Cavo di regolazione A1 (23) col cavo di regolazione B1 (24).
7. Collegare il cavo di rilevazione A1 (25) col cavo di rilevazione B2 (26).
8. Posizionare la colonna di supporto (5) nel foro del telaio della struttura base nella direzione indicata in figura, allineare i fori e fissarla saldamente con il kit di fissaggio supporto (20+21+22).

Nota: Estruendo la manopola di regolazione (14) è possibile regolare l'altezza del montante della sella (4) o del montante dell'impugnatura (5).

9. Posizionare il sellino nel supporto (4) e fissarlo con la manopola di regolazione (15) insieme alla rondella piatta (19).
10. Posizionare le maniglie (6) nel punto di installazione sulla colonna, allacciare la cover in plastica (11) e utilizzare la manopola di regolazione dell'impugnatura (28) per fissare saldamente il sistema.
11. Collegare il filo di rilevamento monitor (9) al cavo di rilevazione B (26) come mostrato nella figura, dopodiché collegare il cavo di rilevamento C (27) nella spina del filo di rilevamento sul retro del monitor.
12. Posizionare il monitor (9) sulla piastra di fissaggio della colonna (5), far passare il cavo di rilevazione (26) attraverso il foro rotondo al centro, e fissarlo utilizzando le 4 viti di fissaggio (10).

8.4.2 Utilizzo:



ATTENZIONE!

I sistemi per la rilevazione della frequenza cardiaca possono non essere accurati. Se si avverte un mancamento o una sensazione di malessere, interrompere immediatamente l'allenamento.

Nota: Prima di provare a salire sulla cyclette, posizionare il sellino all'altezza minima per prendere consapevolezza della posizione più adeguata e confidenza con la struttura, in seguito regolare di conseguenza altezza e profondità.


1. Posizionare la cyclette su una superficie stabile e con un buon attrito
2. Controllare che le batterie siano correttamente inserite
3. Regolare l'intensità della resistenza al minimo per iniziare
4. Inserire i piedi nei pedali, e iniziare a pedalare con intensità gradualmente crescente fino alla velocità desiderata
5. Dopo circa 5 pedalate si accenderà il display, e sarà possibile usare l'interfaccia per la programmazione
6. Per il rilevamento della frequenza cardiaca le mani devono poggiare costantemente sui rilevatori posti sulle maniglie

Nota: È possibile regolare la seduta ad una distanza minima di 42cm dalle maniglie, fino ad una massima di 48 cm

8.4.3 Funzione display


1. Scansione automatica (SCAN in questo stato tutte le funzioni di TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL saranno sequenzialmente visualizzate sul display principale.
2. Il tempo di movimento (TIME): calcolo cumulativo del tempo di movimento da 00:00-99:59, l'utente può premere il pulsante per selezionare lo stato di visualizzazione del valore temporale.
3. La distanza di movimento (DIST): calcolo cumulativo del movimento da 0,0 a 999,9 l'utente può premere il pulsante per selezionare il valore di visualizzazione della distanza.
4. Calorie (CAL): mostra il consumo cumulativo di calorie da 0,0-9999. Premere il pulsante per selezionare il valore visualizzato. Nota: questi dati sono solo una descrizione approssimativa e non possono essere utilizzati per il trattamento medico.
5. La velocità di movimento (SPEED): mostra la velocità attuale, con un intervallo di 0,0-999,9 km/miglio/ora.
6. Odometro (ODO): la distanza massima misurabile è 0-9999 km.
7. Polso (PUL): frequenza cardiaca istantanea, 40-240 volte / minuto.

Nota: Questi dati sono solo una descrizione approssimativa e non possono essere utilizzati per il trattamento medico.

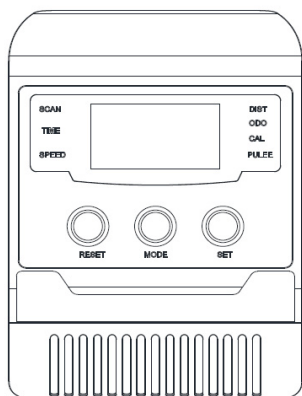

- Pulsante MODE: premendolo è possibile visualizzare tutte le funzioni sequenzialmente
- Pulsante RESET: premendolo resetta singolarmente ogni dato di progresso di allenamento per le funzioni TIME CAL e ODO; tenendolo premuto per 3 secondi le resetta tutte
- Pulsante SET: permette di impostare gli obiettivi di allenamento per le funzioni TIM, CAL e ODO

8.5 Vista delle parti RP958

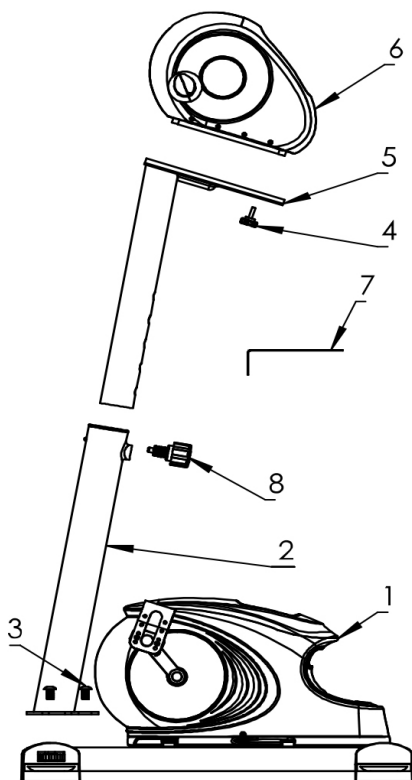

1. Struttura base
2. Tubo base
3. Vite per base 4
4. Manopola di regolazione
5. Tubo di supporto regolabile
6. Macchinario superiore
7. Chiave
8. Manopola di regolazione

Utensili: Chiave a brugola inclusa nella confezione

8.5.1 Assemblaggio:

1. Collegare il macchinario superiore (6) al tubo di supporto (5) e fissarlo con la manopola di regolazione (4), facendo attenzione a far passare i fili lungo il tubo fino a farli uscire dalla parte inferiore.
2. Collegare i fili sporgenti dalla struttura base (1) e del tubo della struttura superiore, poi fissare le due parti con le 4 viti (3) e stringerle saldamente

8.4.2 Utilizzo

1. Posizionare la pedaliera su una superficie stabile e con un buon attrito
2. Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito alla presa di corrente
3. Svolgere l'attività su di una seduta stabile (sedia o poltrona) posta ad una distanza funzionale dalla pedaliera
4. Dopo essersi seduti, regolare la parte superiore del dispositivo secondo le proprie necessità, tramite la manopola di regolazione (8)

8.4.3 Funzione display



- I primi due schermi indicano rispettivamente la velocità della parte superiore e della parte inferiore.
- Lo schermo in basso visualizza il tempo di allenamento, la distanza percorsa e le calorie bruciate.
- I quattro schermi piccoli in basso indicano la modalità attualmente attiva per la modalità passiva.

- **Pulsante on/off** accende la macchina.
- **Pulsante Full body:** avvia la parte superiore e inferiore della pedaliera.

Premere nuovamente per ripetere i movimenti. Tenere premuto per invertire il moto di entrambe le parti

- **Pulsante Upper body:** Avvia la parte superiore; tenere premuto per invertire il moto.
- **Pulsante Resistance:** premendo questo pulsante si passa dalla modalità passiva alla modalità attiva, con livelli di resistenza crescente da 1 a 20.
- **Pulsante Mode:** seleziona una modalità tra HR-P1-P2-P3.

La modalità HR ovvero la modalità manuale, è predefinita all'avvio. Premere il tasto + per impostare la velocità di esecuzione.

Nota: Nella modalità P1--P2--P3, la velocità di marcia è data dal computer, e non può essere regolata dall'utente.

- **Pulsante "+":** pedaliera ferma aumenta il tempo di funzionamento da 5 minuti a 30 minuti.

Pedaliera in movimento imposta la velocità da 1 a 20 livelli

- **Pulsante "-":** Premere questo pulsante quando la pedaliera è ferma per diminuire il tempo di funzionamento da 30 minuti fino a un minimo di 5 minuti.

Pedaliera in movimento diminuisce la velocità di 1 livello fino al livello minimo

9. CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione e peso						
Codici	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP950	40 cm	39 cm	30 cm	-	3.5 kg	-
RP951	49 cm	40 cm	30 cm	-	4.5 kg	-
RP953	64 cm	42 cm	31 cm	-	9 kg	-
RP955	98 cm	48 cm	128 cm	80-97 cm	25 kg	150 kg
RP958	46 cm	41 cm	92 cm	-	12 kg	-

Specifiche Tecniche					
Codici	Alimentazione	Resistenze	Esercizio	Classe di utilizzo e accuratezza (ISO 20957-1 20957-5)	Sistema frenante
RP950	Batterie AAA	Volano in Plastica 0.5 kg	Attivo	I C	Indipendente dalla velocità
RP951	220V 50Hz 70WBatteria CR2025 per telecomando	Motore elettrico	Attivo/Passivo	I C	
RP953	Batterie LR33	Volano in ferro 1.6 kg	Attivo	I A	
RP955	Batterie AAA	Volano in ferro 5 kg	Attivo	I B	
RP958	110V-220V 90W	Motore elettrico	Attivo/Passivo	I B	

Nota: Tutti i prodotti presenti in questo manuale sono stati testati secondo normativa UNI EN ISO 20957-1 e 20957-5.

9.1 Classe di utilizzo e di accuratezza

Le norme UNI EN ISO 20957-1 e 20957-5 definiscono rispettivamente le classi di utilizzo (I S H), e di accuratezza (A B C) dei dispositivi di allenamento di questo manuale. La classe di utilizzo definisce il campo di applicazione (in ambiente domestico o in struttura specializzata) e la destinazione d'uso di un dispositivo (uso privato o uso professionale). Nella fattispecie la classe I, per la quale tutti i nostri dispositivi sono conformi, indica l'indirizzo d'uso professionale in strutture specializzate; la classe di accuratezza (A elevata B media e C bassa), definisce il livello di precisione per i dispositivi che hanno sistemi di raccolta dati.

Nota: I dispositivi di classe di accuratezza B e C non sono idonei per scopi che richiedono un'accuratezza elevata


ATTENZIONE!
L'uso delle pedaliere in ambiente domestico è consentito sotto la diretta supervisione di uno specialista

10. DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (SOLO PER RP951 RP958)

Il rapido sviluppo dell'elettronica, soprattutto nel campo delle comunicazioni, ha saturato il nostro ambiente con onde radio elettromagnetiche (EM) che sono emesse da segnali televisivi, radiofonici e di comunicazione. Queste onde EM sono invisibili e la loro forza aumenta con un avvicinamento alla fonte. Tutti i conduttori elettrici agiscono come antenne per i segnali EM e, in misura diversa, tutti i dispositivi possono essere influenzati dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). L'interferenza può causare movimenti accidentali e/o controllo irregolare del dispositivo.

L'energia elettromagnetica emessa da sorgenti quali:

- stazioni di trasmissione radio;
- stazioni di trasmissione tv;
- stazioni di radioamatori;
- allarmi dei negozi;
- telefoni cellulari e telefoni cordless possono interferire con le pedaliere elettriche

Le interferenze possono interferire con la velocità di pedalata passiva. Esse possono inoltre danneggiare

Immagini a scopo illustrativo

in modo permanente la centralina elettronica del dispositivo. Nell'ambiente quotidiano vi sono un certo numero di sorgenti elettromagnetiche relativamente intense. L'intensità dell'energia EM può essere misurata in Volt per metro (V/m). La vostra pedaliera elettrica è dotata di una protezione contro le interferenze elettromagnetiche testata e certificata in conformità ai requisiti internazionali vigenti, fino ad una certa intensità. Questo è chiamato "livello di immunità". Maggiore è il livello di immunità maggiore sarà la protezione. In questo momento, la tecnologia attuale è in grado di fornire almeno 20 V/m del livello di immunità, che fornisce la protezione utile contro le comuni fonti di EMI irradiate. Tuttavia riteniamo che seguendo le precauzioni elencate di seguito il rischio possa essere ulteriormente minimizzato.

- Quando la pedaliera elettrica è accesa evitare di usare radiotrasmettenti portatili, radio CB ed evitare di accendere apparecchi di comunicazione personale come telefoni cellulari ed altri.
- Evitare di essere troppo vicini a potenti impianti di trasmissione radio - televisiva.
- Se avviene un movimento della pedaliera non inerente al programma o alla velocità impostata interrompere immediatamente l'attività e spegnere il dispositivo.
- L'aggiunta di accessori o componenti elettrici, oppure la modifica del motore della vostra pedaliera elettrica può renderlo più suscettibile alle interferenze elettromagnetiche e rendere pericoloso l'utilizzo. Inoltre questo fa decadere la garanzia del vostro dispositivo.
- In ogni caso segnalare al vostro rivenditore di fiducia od alla MORETTI SPA ogni movimento involontario del dispositivo che può essersi verificato, annotatelo su questo manuale ed annotate se vicino a voi vi è una sorgente di onde elettromagnetiche.

10.1 Compatibilità elettromagnetica(solo per RP951 e RP958)

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE-EMISSIONI ELETTRICHE		
I DISPOSITIVI SOVRACITATI SONO PREVISTI PER FUNZIONARE NELL' AMBIENTE ELETTRICO SOTTO SPECIFICATO. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DEL DISPOSITIVO DEVE GARANTIRE CHE ESSO VENGA USATO IN TALE AMBIENTE.		
PROVE DI EMISSIONE	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTRICO-GUIDA
EMISSIONI RF CISPR 11	GRUPPO 1	I MODELLI RP951 E RP958 UTILIZZANO ENERGIA RF SOLO PER IL SUO FUNZIONAMENTO INTERNO. PERCIÒ LE SUE EMISSIONI RF SONO MOLTO BASSE E VEROSIMILMENTE NON CAUSANO NESSUNA INTERFERENZA NEGLI APPARECCHI ELETTRICI VICINI
EMISSIONI RF CISPR 11	CLASSE B	I MODELLI RP951 E RP958 SONO ADATTI PER L'USO IN TUTTI GLI EDIFICI, COMPRESI GLI EDIFICI DOMESTICI, E QUELLI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE CHE ALIMENTA EDIFICI PER USI DOMESTICI.
EMISSIONI ARMONICHE IEC 61000-3-2	CLASSE A	
EMISSIONI DI FLUTTUAZIONI DI TENSIONE/FLICKER IEC 61000-3-3	CONFORME	

11. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti S.p.A. al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.

Per ispezione periodica si intende un esame delle seguenti parti:

- La struttura portante della pedaliera e parti di collegamento;
- Controllare montaggio dei pedali, dei piedini in gomma e il funzionamento del freno per la regolazione dell'intensità di sforzo;
- Controllare che tutti i bulloni siano stretti;
- Verificare tutti i punti di saldatura;
- Lubrificazione: la pedaliera è pensata per una manutenzione minima; comunque, un controllo ogni sei mesi e la lubrificazione dovrebbero assicurare l'ottima durata.

Nota: In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.



ATTENZIONE!

Nel caso in cui il prodotto risulti danneggiato o non funzionante, sostituire immediatamente le parti danneggiate, altrimenti tenere il dispositivo fuori servizio fino a riparazione

Immagini a scopo illustrativo

12. PULIZIA E DISINFEZIONE

12.1 Pulizia

- Utilizzare esclusivamente un panno umido. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo. Non utilizzare getti d'acqua diretti.
- Utilizzare acqua ad una temperatura non superiore ai 30 °C.
- Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore.

12.2 Disinfezione

- Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzando un comune detergente disinfettante.
- Una disinfezione totale del sistema è da effettuarsi ad intervalli regolari o a cambio utente. La perdita del colore di alcuni materiali può essere causata da particolari tipi di sudorazione, dai raggi UV, dall'usura, dal calore, dall'umidità, ed è considerata un processo naturale non coperto da garanzia.

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 
AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

TRATTAMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE (SOLO per RP950 RP953 e RP955) 
(Direttiva 2006/66/CE):

Questo simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le batterie siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle batterie esauste o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato l'apparecchio.

14. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

15. RIPARAZIONI

15.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto

Immagini a scopo illustrativo

autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

15.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

16. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

17. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge.

Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

Immagini a scopo illustrativo