



# Istruzioni per l'uso di Smilecloud Blueprint

V1.0 10.10.2025



## Indice

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Panoramica delle istruzioni per l'uso.....                      | 3  |
| Accesso alle istruzioni per l'uso e lingua.....                 | 3  |
| Informazioni di contatto e identificazione del dispositivo..... | 3  |
| Simboli e marcature utilizzati nelle istruzioni per l'uso.....  | 4  |
| Informazioni normative.....                                     | 4  |
| Descrizione del dispositivo.....                                | 4  |
| Rischi residui e avvertenze.....                                | 7  |
| Sicurezza e privacy.....                                        | 8  |
| Segnalazione di un incidente.....                               | 8  |
| 1. Avvia un progetto.....                                       | 9  |
| 1.1. Da Progetti:.....                                          | 9  |
| 1.2. Da uno Smile Design esistente:.....                        | 9  |
| 1.3. Da +Nuovo progetto:.....                                   | 10 |
| 2. Stack.....                                                   | 10 |
| 3. Struttura.....                                               | 16 |
| 4. Progettazione.....                                           | 16 |
| 4.1 Strumenti di visualizzazione.....                           | 16 |
| 4.2. Livelli.....                                               | 17 |
| 4.3. Menu di controllo 3D.....                                  | 18 |
| 4.4. Controlli di progettazione.....                            | 21 |
| 4.5. Allinea strumenti.....                                     | 22 |
| 4.6 Esporta il progetto come STL sul tuo computer.....          | 23 |
| 4.7 Salva il progetto.....                                      | 24 |



## Panoramica delle istruzioni per l'uso dell'

Le presenti istruzioni per l'uso (IFU) forniscono una guida completa all'uso del modulo software Smilecloud Blueprint. Sono state concepite per aiutare i professionisti del settore odontoiatrico a comprendere, accedere e utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro. Le IFU includono istruzioni dettagliate sulle caratteristiche del sistema, l'uso previsto, le limitazioni e le responsabilità relative alla sicurezza e alla protezione dei dati.

**Avviso legale e copyright.** Tutti i contenuti del presente documento sono di proprietà esclusiva di Smilecloud SRL. È severamente vietata la riproduzione, la distribuzione o l'utilizzo non autorizzati del presente documento o di qualsiasi sua parte senza previo consenso scritto.

Tutti i diritti riservati.

© 2025 Smilecloud SRL. Tutti i diritti riservati.

Smilecloud® è un marchio registrato di Smilecloud SRL.

**Dichiarazione di non responsabilità relativa alla riproduzione e alla modifica.** Le presenti istruzioni per l'uso sono fornite a solo scopo informativo. Non possono essere riprodotte, copiate, archiviate o trasmesse in alcuna forma senza previa autorizzazione scritta da parte di Smilecloud SRL. Smilecloud si riserva il diritto di aggiornare o modificare il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso senza preavviso. Gli utenti devono assicurarsi di fare riferimento alla versione più recente del documento, accessibile secondo le istruzioni riportate di seguito.

**Accesso alle istruzioni per l'uso e lingua.** Le istruzioni per l'uso sono disponibili in formato digitale e sono accessibili direttamente dalla piattaforma Smilecloud o tramite il sito web smilecloud.com. Gli utenti possono scaricarne una copia per consultarla offline. È possibile richiedere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso senza costi aggiuntivi, in conformità con i requisiti normativi applicabili.

## Identificazione del produttore e del dispositivo

Per assistenza tecnica, richieste di informazioni sui prodotti o richieste di documentazione, contattare:



Smilecloud SRL

Indirizzo: 8 Calea Aradului, 5° piano, Timisoara, Timis, Romania E-mail:

contact@smilecloud.com

Sito web: <https://www.smilecloud.com>



Nome del dispositivo: Smilecloud Blueprint

Versione software: 1.0

UDI-DI: (01)5940805430006

## Simboli e marcature utilizzati nelle istruzioni per l'uso di

I seguenti simboli possono comparire nelle presenti istruzioni per l'uso, nell'interfaccia Smilecloud o nella documentazione e nell'etichettatura associate, ove applicabile:

| Simbolo                                                                           | Significato                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Produttore                      |
|  | Seguire le istruzioni per l'uso |
|  | Attenzione                      |
|  | Dispositivo medico              |

## Informazioni normative sull'

### Dichiarazioni di conformità

Smilecloud Blueprint è sviluppato e mantenuto in conformità con le normative e gli standard nazionali e internazionali quali:

- ISO 13485:2016 – Sistema di gestione della qualità per dispositivi medici
- Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) – applicabile al software classificato come dispositivo medico

La documentazione di conformità e le dichiarazioni di conformità sono disponibili su richiesta per gli utenti e le istituzioni autorizzati.

### Classificazione normativa e regioni di mercato di destinazione

Smilecloud Blueprint è destinato all'uso all'interno dell'Unione Europea e in altri territori in cui l'approvazione normativa o l'esenzione ne consentono l'utilizzo.

### Considerazioni relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza elettrica

Smilecloud Blueprint è un servizio software basato sul web (ospitato su cloud) e non si interfaccia direttamente con hardware medico elettrico né richiede installazione locale.

## Informazioni sul dispositivo

### Scopo previsto

Smilecloud Blueprint è un modulo esclusivamente software che consente ai professionisti del settore odontoiatrico di visualizzare

Dati di imaging e progettazione forniti dall'utente relativi alla regione oro-maxillo-facciale per la comunicazione e l'illustrazione. Consente l'importazione e l'allineamento degli input (ad esempio immagini ritratto, scansioni intraorali, CBCT), fornisce la segmentazione e permette la regolazione interattiva delle rappresentazioni illustrative 3D



. Blueprint non esegue diagnosi, previsioni, monitoraggio o pianificazione del trattamento e non deve essere utilizzato come base per decisioni cliniche.

### **Indicazioni per l'uso**

Da utilizzare da parte di professionisti del settore odontoiatrico, in contesti professionali, su pazienti con dentatura mista o permanente, per creare e esaminare visualizzazioni illustrative dei potenziali risultati estetici e del contesto anatomico ai fini della comunicazione con i pazienti e i team interdisciplinari. Non destinato alla diagnosi, alla valutazione clinica o alla pianificazione del trattamento.

**Caratteristiche del profilo utente.** Smilecloud Blueprint è destinato esclusivamente a professionisti del settore odontoiatrico, inclusi dentisti e specialisti odontoiatrici, che hanno ricevuto una formazione nell'acquisizione, nell'interpretazione e nell'uso clinico delle immagini dentali e maxillo-facciali.

Gli utenti devono possedere:

- Formazione formale e abilitazione professionale in odontoiatria o in una specialità odontoiatrica.
- Familiarità con i sistemi di imaging digitale quali TC, CBCT e scanner intraorali.
- Competenza nell'interpretazione delle immagini dentali e nell'integrazione dei risultati della visualizzazione nei flussi di lavoro clinici.

Il produttore non fornisce una formazione specifica agli utenti prima di concedere l'accesso al software.

**Caratteristiche della popolazione di pazienti.** Smilecloud Blueprint è destinato a pazienti con dentatura mista o permanente della regione orale e maxillo-facciale. Il software non è indicato per pazienti con solo denti da latte.

### **Controindicazioni**

- Pazienti senza denti permanenti: controindicato per l'uso in pazienti che hanno solo denti primari e nessuna dentatura permanente erotta. Uso in pazienti con dentatura mista o La dentatura permanente è a discrezione del professionista dentale.
- Uso non professionale: controindicato per l'uso da parte di non professionisti o per applicazioni dirette al consumatore. Il funzionamento è destinato esclusivamente ai professionisti del settore odontoiatrico.
- Decisioni cliniche basate esclusivamente sul software: controindicato per formulare o confermare diagnosi o decisioni terapeutiche basandosi esclusivamente sulle visualizzazioni del software. I risultati devono sempre essere interpretati nel contesto di altre informazioni cliniche e del giudizio professionale

**Caratteristiche dell'ambiente di utilizzo, inclusi software e hardware.** Smilecloud Blueprint è un modulo software della piattaforma Smilecloud, destinato all'uso in un ambiente odontoiatrico professionale, come uno studio dentistico, un istituto accademico o un centro sanitario ambulatoriale.

È possibile accedere al software tramite una connessione Internet sicura e un dispositivo compatibile (PC o Mac) e richiede un browser web conforme.

È necessario rispettare i seguenti requisiti minimi:



|                        | Requisiti minimi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisiti consigliati                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Windows                                                                 | Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Windows                                                                       | Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dispositivo            |                                                                         | iMac®, Mac® Mini (*), Mac Pro®, MacBook Pro®, MacBook Air® (*). Sono supportati tutti i modelli rilasciati dal 2020.<br>(* ) La scheda grafica di alcune configurazioni MacBook Air® e Mac® Mini presenta delle limitazioni per quanto riguarda il rendering del volume. Si consiglia di selezionare il rendering volumetrico a bassa risoluzione. | -                                                                             | iMac®, Mac® Mini (*), Mac Pro®, MacBook Pro®, MacBook Air® (*). Sono supportati tutti i modelli rilasciati dal 2022.<br>(* ) La scheda grafica di alcune configurazioni MacBook Air® e Mac® Mini presenta delle limitazioni per quanto riguarda il rendering volumetrico. Si consiglia di selezionare il rendering volumetrico a bassa risoluzione. |
| Sistema operativo (OS) | MS Windows 10 (build 18362+)                                            | macOS 11.0 o versioni successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MS Windows 10 (build 18362+)                                                  | macOS 11.0 o versioni successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | MS Windows 11 - 64 bit                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MS Windows 11 - 64 bit                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Processore (CPU)       | Intel Core i5-12500                                                     | Chip Apple M1 o versioni successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intel Core i7-13700                                                           | Chip Apple M2 Pro o successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | (ad es.) AMD Ryzen 5 5600X                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ad es.) AMD Ryzen 7 6800H                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Memoria (RAM)          | 16 GB                                                                   | 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 GB                                                                         | 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modello scheda grafica | NVIDIA RTX 2060                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NVIDIA RTX 4070                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Driver scheda grafica  | Aggiornare all'ultima versione disponibile sul sito web del produttore. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornare alla versione più recente disponibile sul sito Web del produttore. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Browser Internet       | Ultima versione del browser Chrome                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monitor                | Consigliato 1920 / 1080 px                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connessione Internet   | Consigliata +50 Mbit/s                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spazio su disco        | Minimo 5 GB liberi sull'unità con il browser                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Si consiglia di utilizzare Smilecloud Blueprint esclusivamente in ambito clinico professionale, ambiente, in cui siano garantiti livelli adeguati di sicurezza dei dati, riservatezza e attenzione.



## Rischi residui e avvertenze relative all'

La nostra gestione dei rischi conclude che il progetto Smilecloud è stato concepito in modo tale che, se utilizzato nelle condizioni e per gli scopi previsti, tutti i rischi costituiscono rischi accettabili se valutati rispetto ai benefici per il paziente.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Smilecloud Blueprint non è destinato a rilevare, misurare o diagnosticare patologie. Fornisce visualizzazioni estetiche e anatomiche illustrative dei potenziali risultati dei trattamenti odontoiatrici a fini di comunicazione. Utilizzare solo come descritto nella sezione "Uso previsto" delle presenti istruzioni per l'uso; il software non fornisce diagnosi, previsioni, misurazioni o raccomandazioni terapeutiche automatizzate.                                                                                                     |
|    | La fedeltà e la rappresentatività delle visualizzazioni dipendono dalla qualità, dalla completezza e dalla pertinenza dei dati inseriti (ad esempio, accuratezza della scansione, qualità fotografica, visibilità delle strutture anatomiche). Input non ottimali o incompleti possono produrre visualizzazioni meno rappresentative.                                                                                                                                                                                                           |
|    | Smilecloud Blueprint deve essere utilizzato in conformità con le presenti istruzioni per l'uso e lo scopo previsto dichiarato. L'uso al di fuori di queste istruzioni può portare a visualizzazioni fuorvianti o errate o comportamenti imprevisti.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Smilecloud Blueprint non è progettato per attività di rilevamento e non garantisce sensibilità o specificità. Le visualizzazioni potrebbero non rappresentare ogni dettaglio anatomico o protesico; gli utenti devono verificare le caratteristiche rilevanti confrontandole con i dati clinici originali.                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | I medici devono sempre esaminare i dati clinici originali. Tutte le visualizzazioni e i modelli generati da Smilecloud Blueprint devono essere esaminati insieme alle scansioni e alle immagini originali. Il software è uno strumento ausiliario e non sostituisce il ruolo o la competenza del medico.                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Smilecloud non garantisce i tempi di risposta o la disponibilità di servizi specifici. Il software non è destinato all'uso in situazioni di emergenza. In caso di emergenza medica, gli utenti devono rivolgersi immediatamente a un medico professionista.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Smilecloud Blueprint richiede una connessione Internet attiva per l'accesso, il caricamento, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati tramite la piattaforma Smilecloud. Le interruzioni della connettività possono influire sull'accesso, sul caricamento/esportazione o sul salvataggio del lavoro in . Assicurarsi di disporre di una connettività affidabile e mantenere l'accesso all'originale. dati di origine in conformità con le politiche della vostra clinica e la legge applicabile.                                              |
|  | <p>Comportamenti vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gli utenti non possono caricare, generare o trasmettere contenuti che violino i diritti di proprietà intellettuale, i diritti alla privacy o le leggi applicabili.</li> <li>● La piattaforma non può essere utilizzata per condividere o diffondere materiale illegale, osceno, diffamatorio, minaccioso o comunque dannoso.</li> <li>● È severamente vietato l'uso di Smilecloud Blueprint in violazione delle normative locali, nazionali o internazionali.</li> </ul> |



## Sicurezza e privacy dell'

Smilecloud Blueprint è progettato ponendo grande enfasi sulla sicurezza dei dati, sulla privacy e Conformità normativa. Il dispositivo può trattare dati sensibili relativi alla salute e opera secondo un modello di responsabilità condivisa per garantire che sia Smilecloud che i suoi utenti rispettino le migliori pratiche in materia di protezione dei dati.

**Protezione dei dati.** Tutti i trattamenti delle informazioni sanitarie personali (PHI) sono soggetti alle norme di legge applicabili e alle politiche interne di protezione dei dati. Per ulteriori informazioni, si prega di Consultare [la](#) nostra [Informativa sulla privacy](#) disponibile pubblicamente e visita [il](#) nostro [Centro legale e di conformità](#) per la documentazione normativa, le appendici sul trattamento dei dati e le risorse di conformità.

Si prega di notare che l'utilizzo effettivo di Smilecloud Blueprint è soggetto al rispetto dei nostri [Termini di servizio generali](#).

## Segnalazione di un incidente di sicurezza relativo ad

Se sospettate un incidente di sicurezza o una violazione dei dati, segnalatelo immediatamente a [contact@smilecloud.com](mailto:contact@smilecloud.com) con una breve descrizione, l'ora in cui si è verificato e gli account interessati. Una volta ricevuta la segnalazione, Smilecloud indagherà sul problema, conterrà eventuali minacce, informerà gli utenti interessati, se necessario, e implementerà azioni correttive. Gli obblighi normativi (ad esempio le notifiche di violazione del GDPR/HIPAA) saranno rispettati come applicabile. Gli utenti devono collaborare con l'indagine di Smilecloud, informare terze parti se richiesto dalla legge e rivedere le pratiche interne di accesso e sicurezza. Qualsiasi account o autorizzazione compromessa deve essere aggiornata immediatamente.





## 1. Avvia un progetto

Ci sono 3 opzioni per avviare un progetto:


- Da Progetti
- Da uno Smile Design esistente
- Da + Nuovo progetto

### 1.1. Da Progetti:

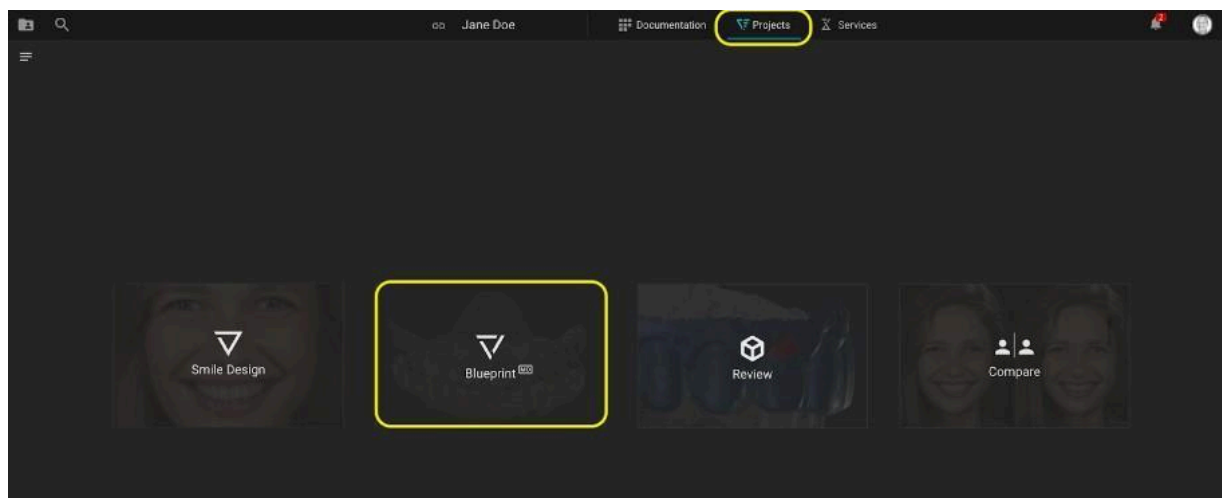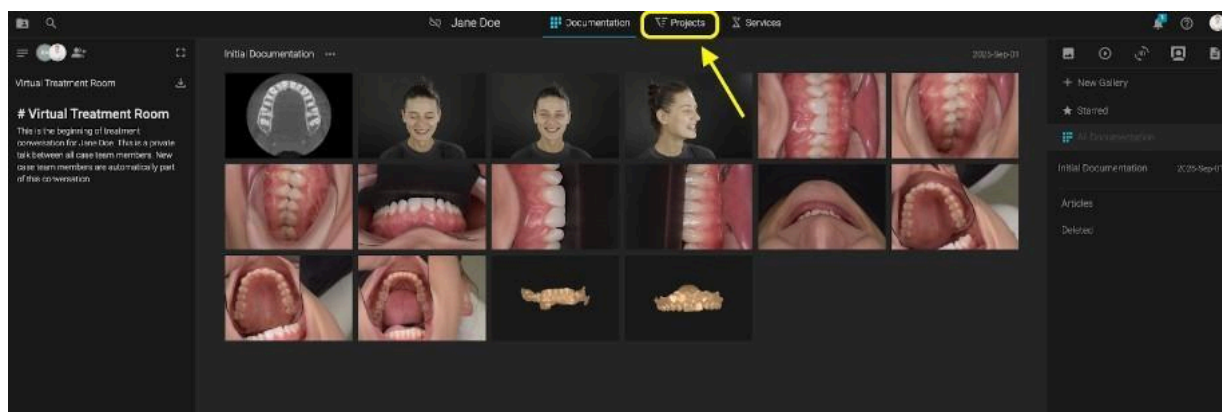


Se non sono stati creati altri progetti, clicca sulla scheda Progetti e seleziona Blueprint.

### 1.2. Da un progetto Smile Design esistente:

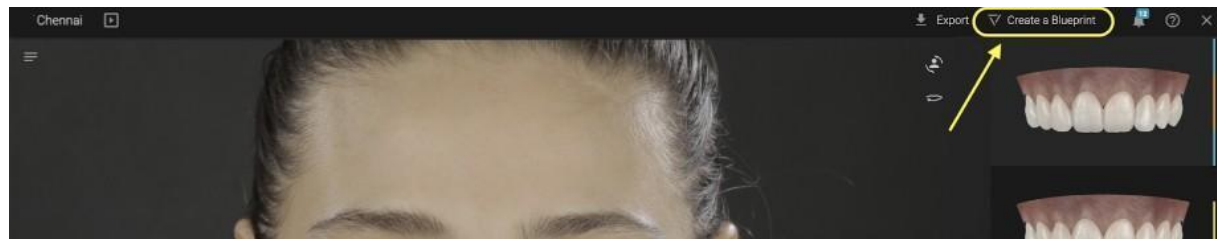


Se è stato creato in precedenza uno Smile Design, aprirlo in modalità di modifica -> fare clic sul pulsante diretto per avviare un Blueprint.

### 1.3. Da +Nuovo progetto:

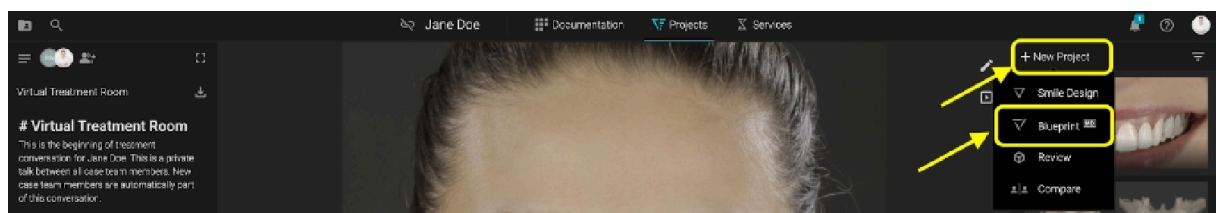


Nella scheda Progetti -> Fare clic su +Nuovo progetto -> Selezionare Blueprint

Quando si crea un progetto per la prima volta, leggere le **istruzioni per l'uso** e confermare le informazioni richieste.

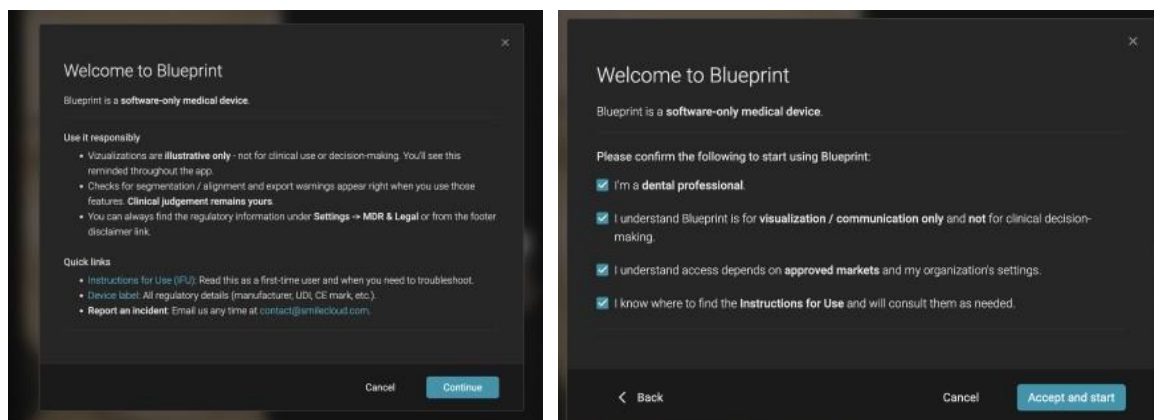

## 2. Stack


Lo stack è il primo passo nel Blueprint.

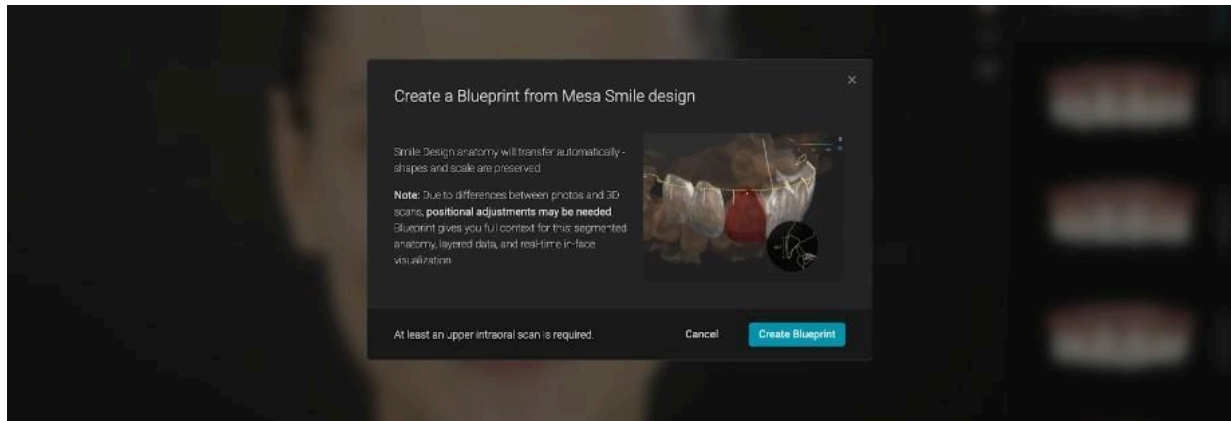


Se il progetto è stato avviato da uno Smile Design -> il ritratto è già presente nello stack -> ti verrà richiesto di caricare almeno una scansione intraorale superiore.

Facoltativamente, è possibile aggiungere:


- Scansione inferiore
- CBCT
- Modjaw Motion File.xml

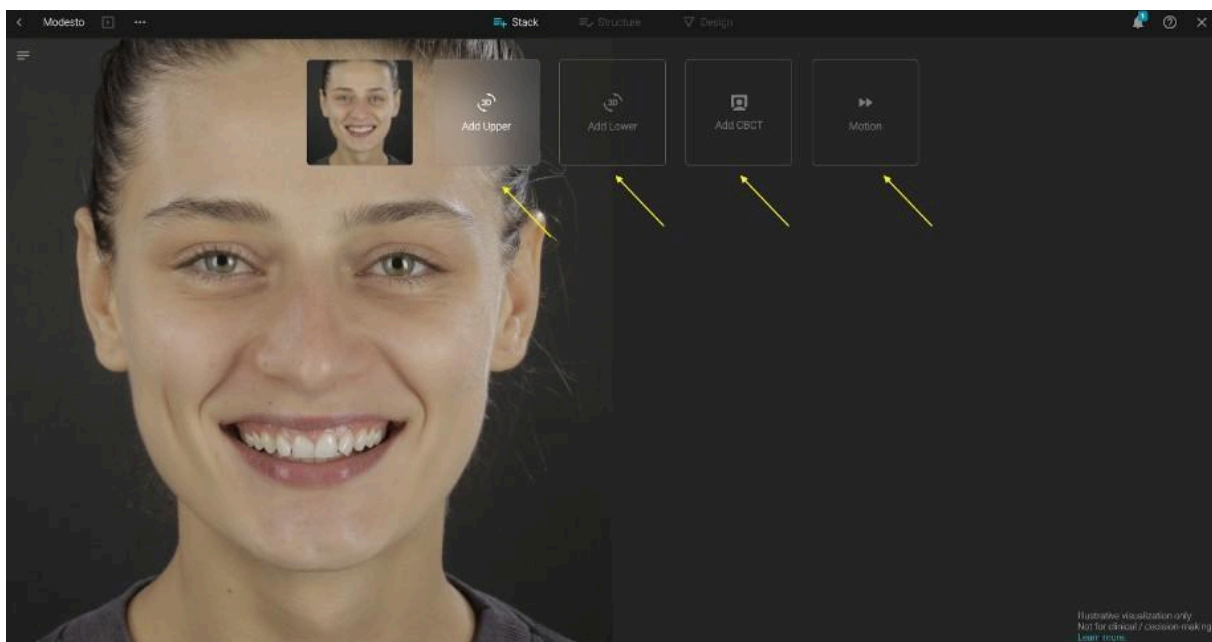


Quando si utilizza la segmentazione, è importante ricordare che i risultati devono sempre essere rivisti e confermati prima dell'uso o dell'esportazione.

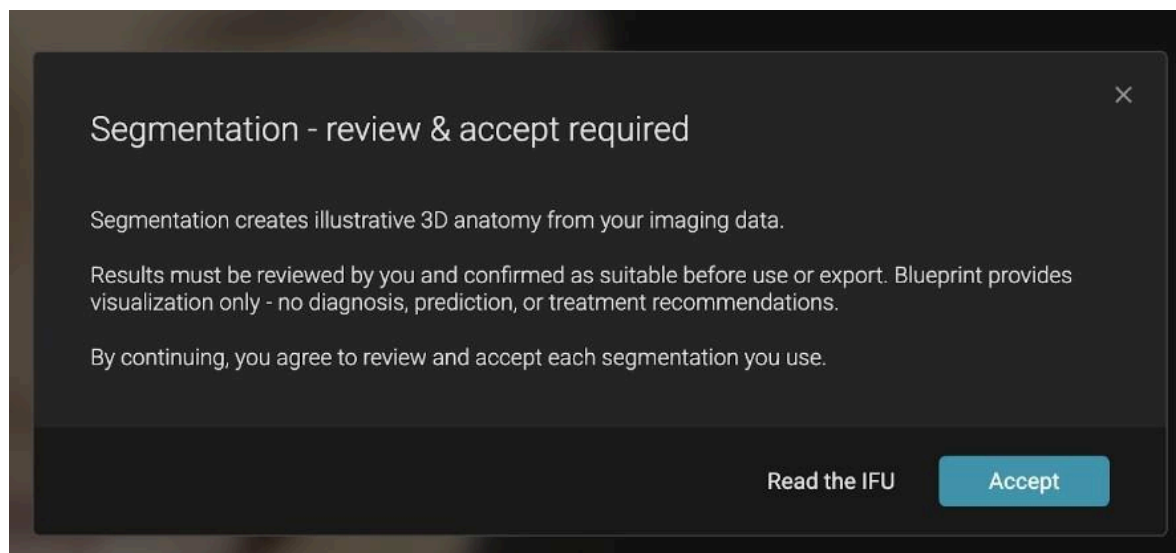


Una volta accettati, è possibile selezionare la scansione superiore, che verrà richiesto di allineare con l'immagine del ritratto.


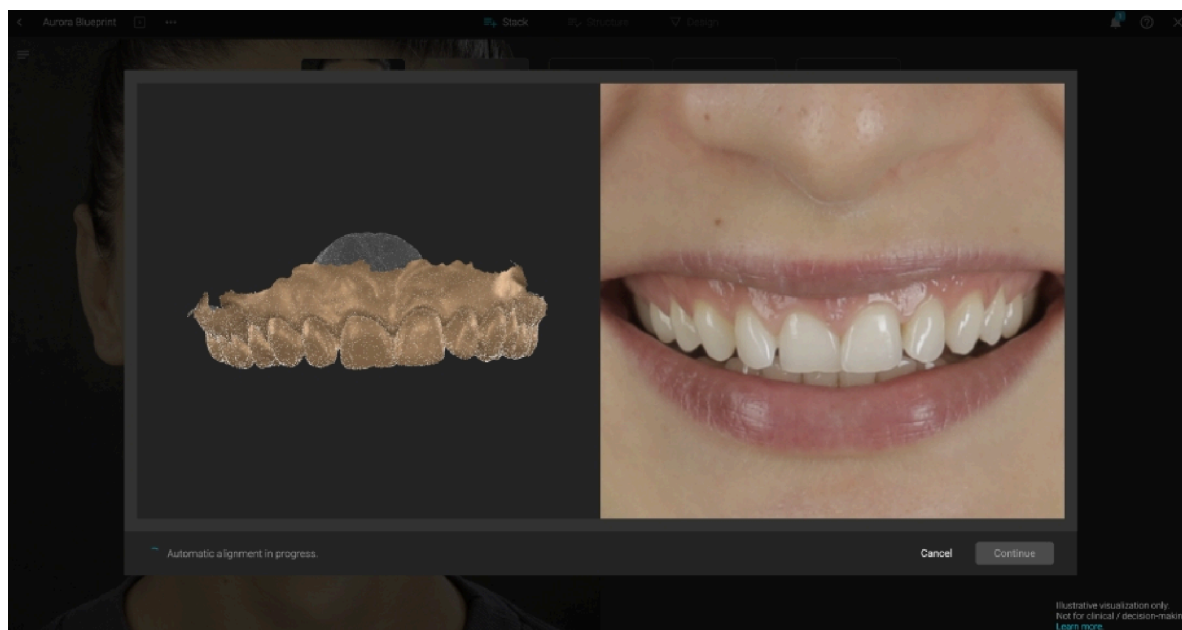


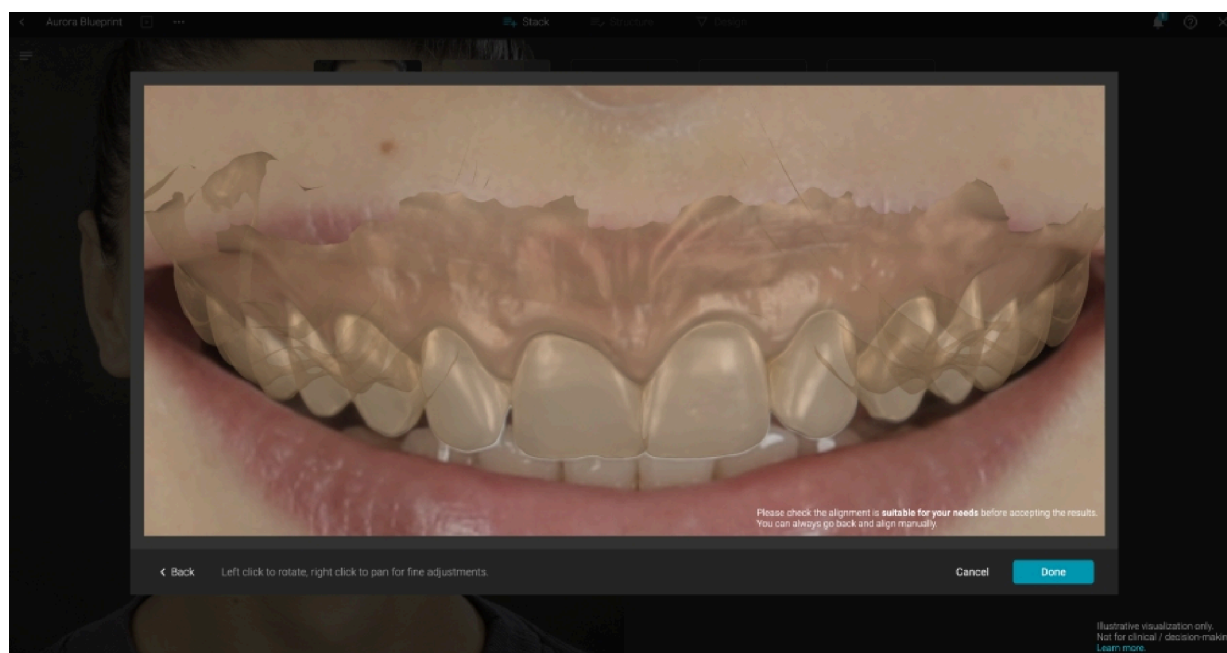

Verificare sempre che l'allineamento sia adeguato alle proprie esigenze prima di accettare i risultati.

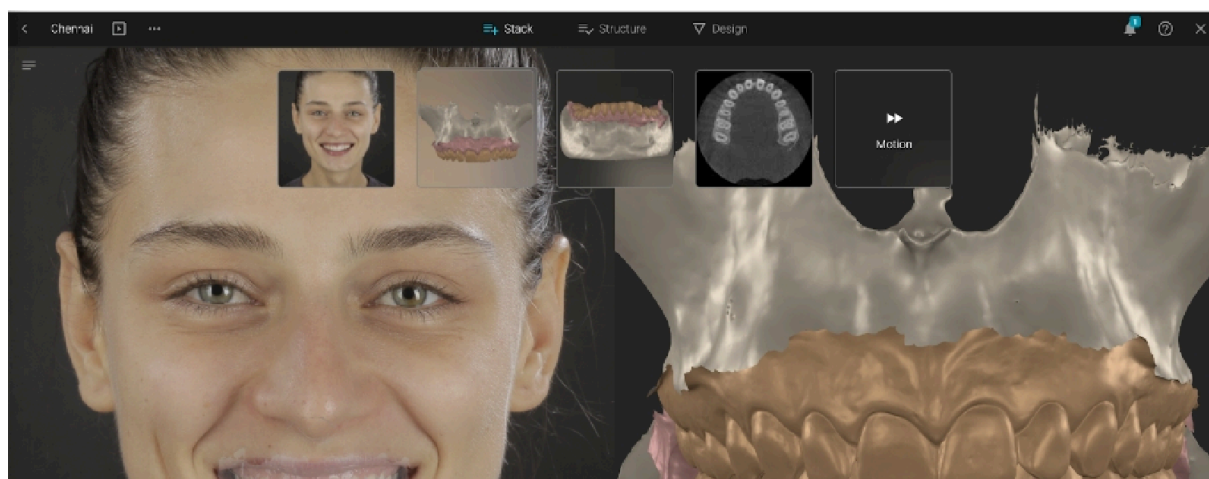


Carica movimento:

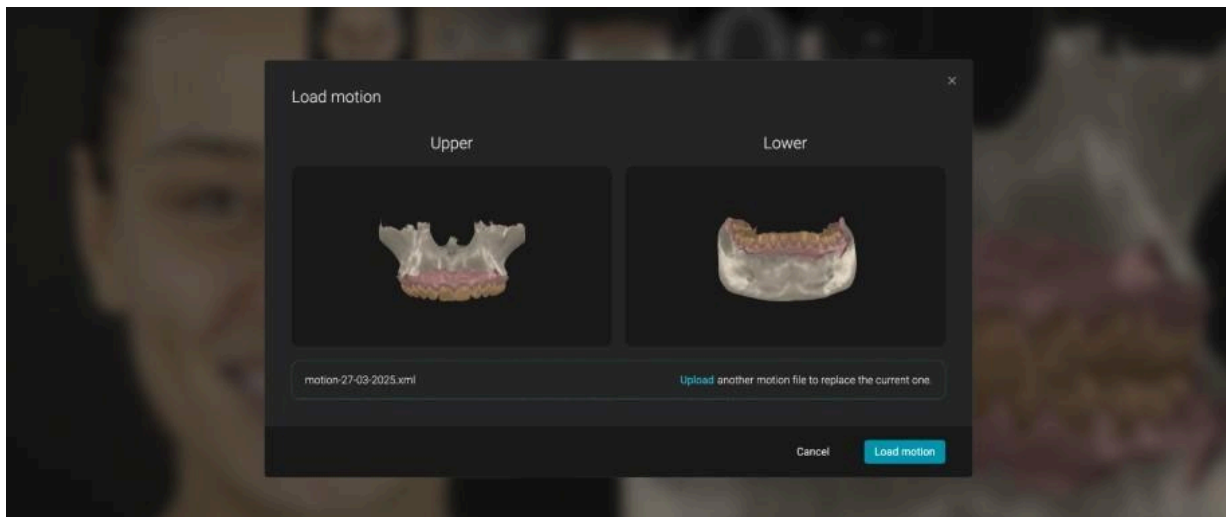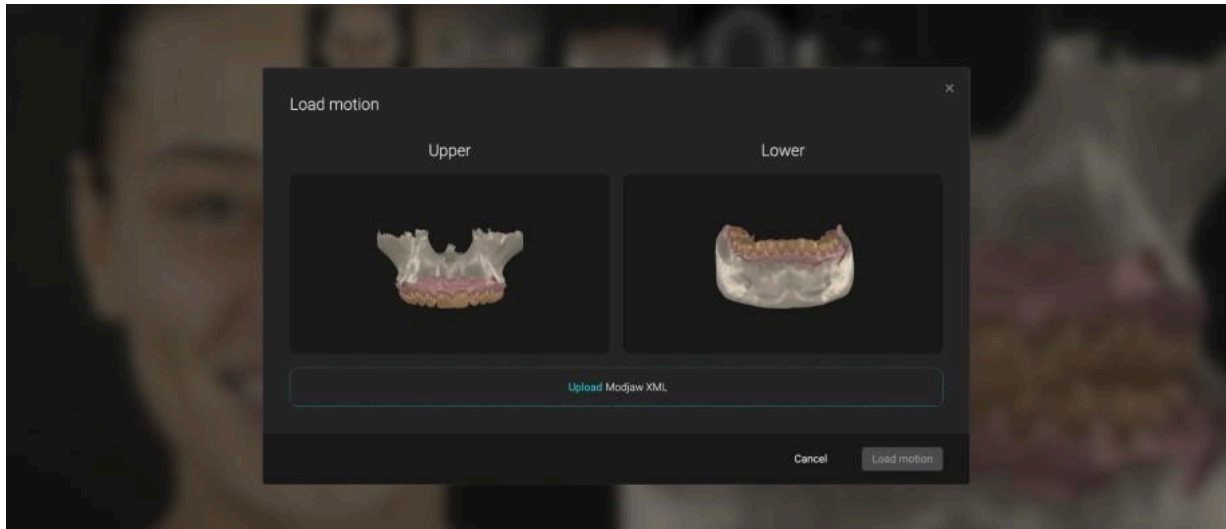


Se avvii un Blueprint direttamente dai progetti, devi anche caricare un'immagine ritratto.

Il ritratto può essere sostituito oppure, dal pulsante +, è possibile aggiungere ulteriori immagini del viso da più angolazioni:


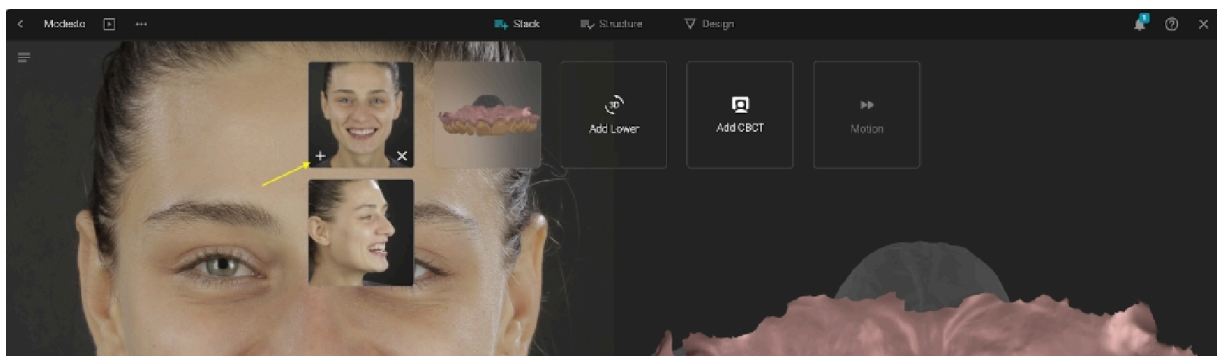


È anche possibile aggiungere ulteriori scansioni superiori, scansioni inferiori o CBCT dal pulsante +.



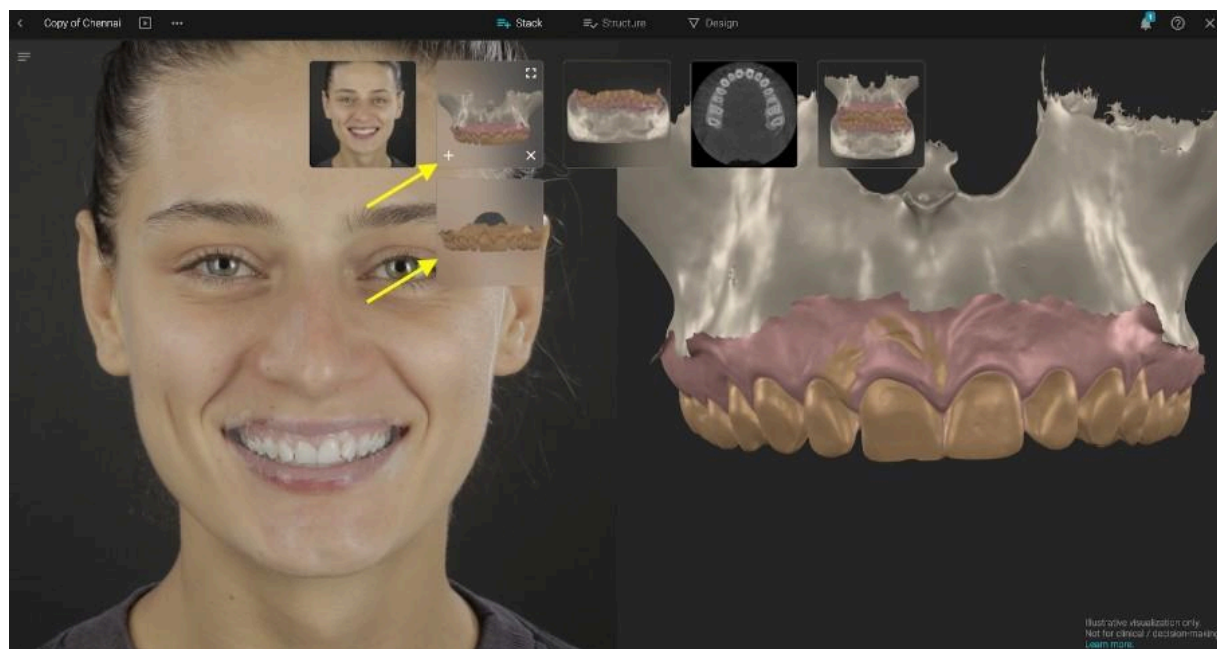

Allineamento manuale: quando si aggiungono ulteriori scansioni o CBCT, si utilizzerà lo strumento di allineamento manuale. Per allineare due file, posizionare almeno 3 punti corrispondenti con clic del mouse.

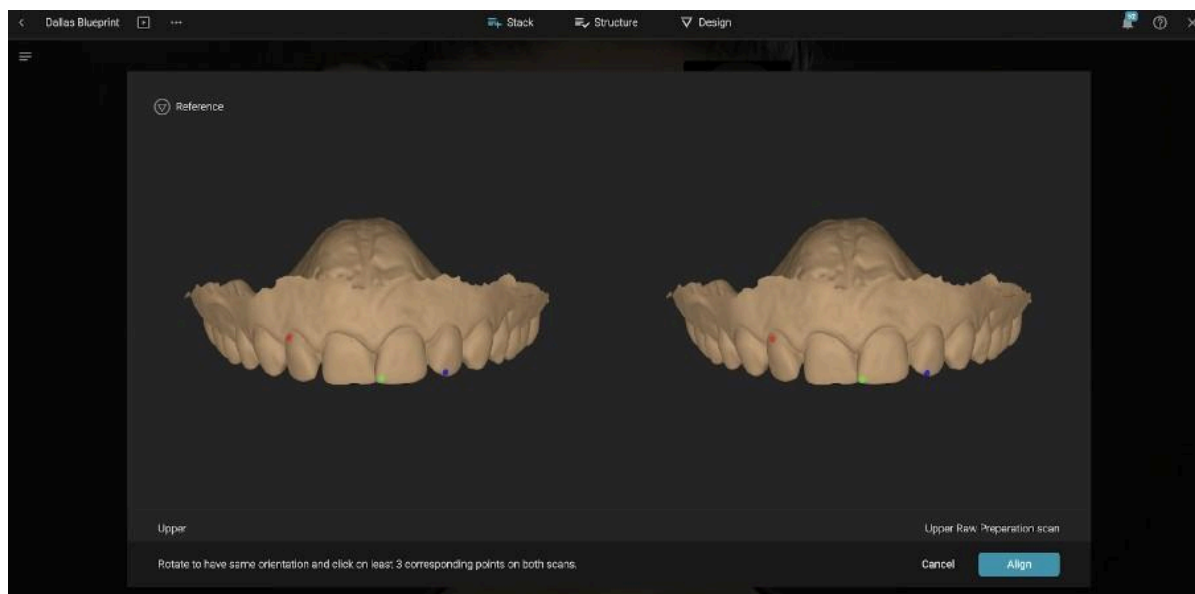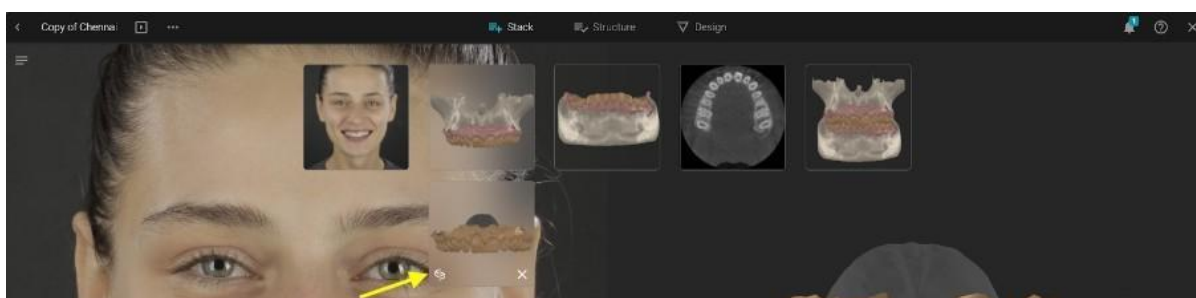


### 3. Struttura

Nella fase Struttura, è possibile creare un ordine definendo quali denti si intende modificare nella simulazione Blueprint. Fare clic su un dente e selezionare una delle opzioni seguenti:

- Rimodella
- Allinea
- Rimuovi
- Rinomina

Per selezionare più denti, tenere premuto il tasto COMMAND o CTRL sulla tastiera e selezionarli con dei clic.

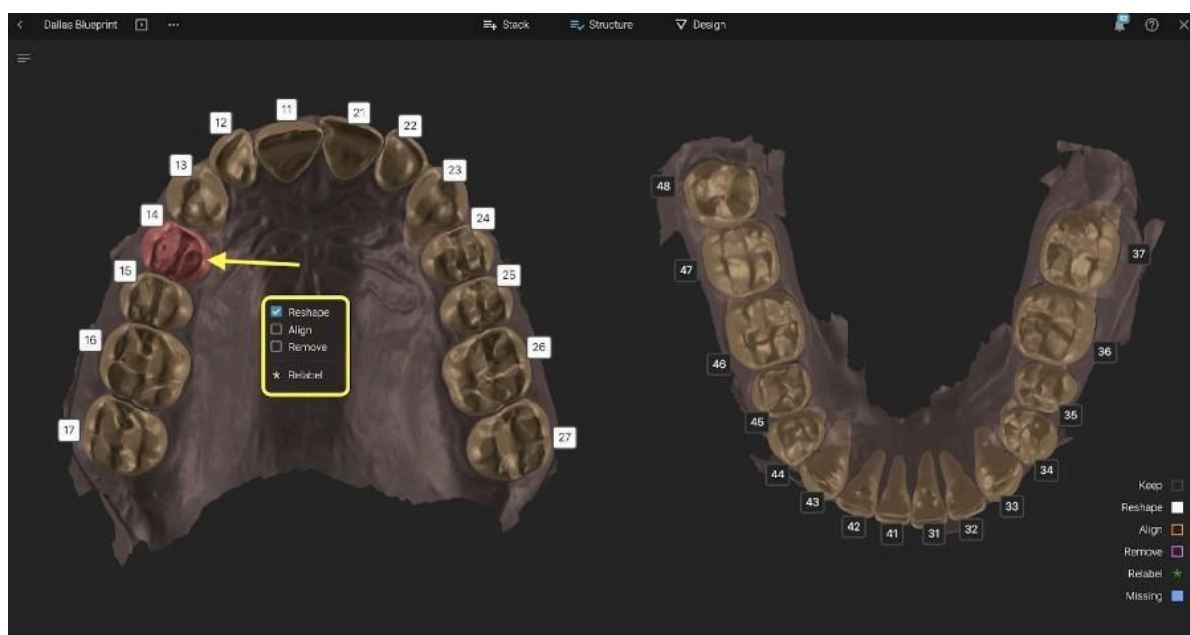


È possibile eseguire queste azioni sia sulla mascella superiore che su quella inferiore.

Ricorda che procedendo con la progettazione, dichiarare di aver esaminato la segmentazione e di accettarne i risultati.


### 4. Progettazione

#### 4.1 Strumenti di visualizzazione




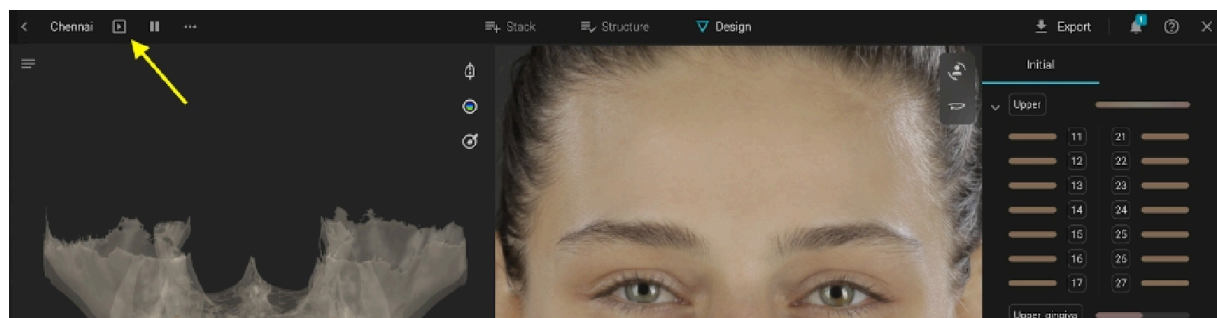

Modalità Presentazione -> consente di visualizzare il progetto prima e dopo la conversione in formato verticale. Modalità Visualizza

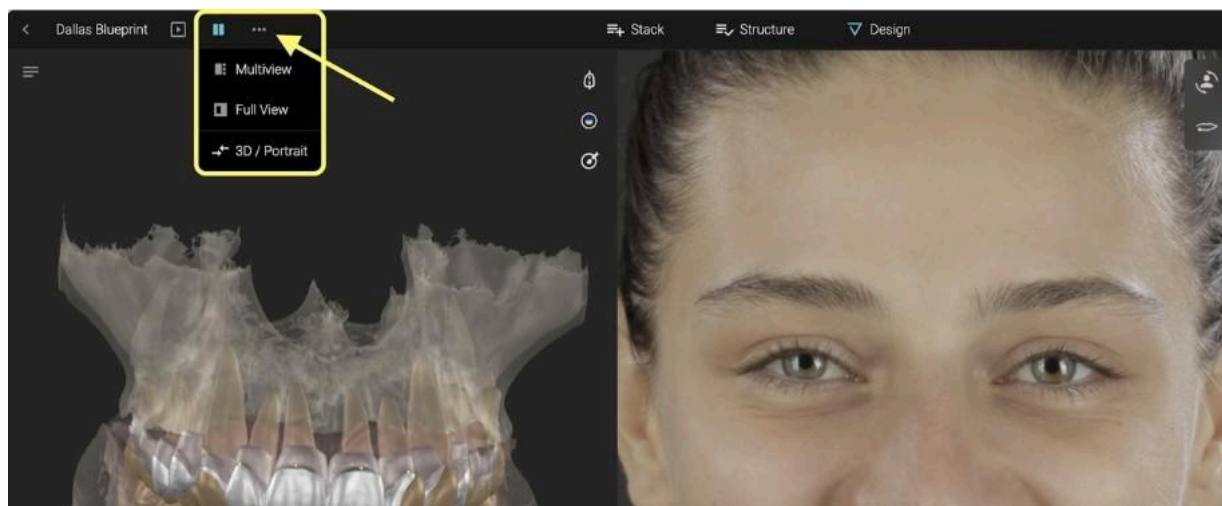


## 4.2. Livelli

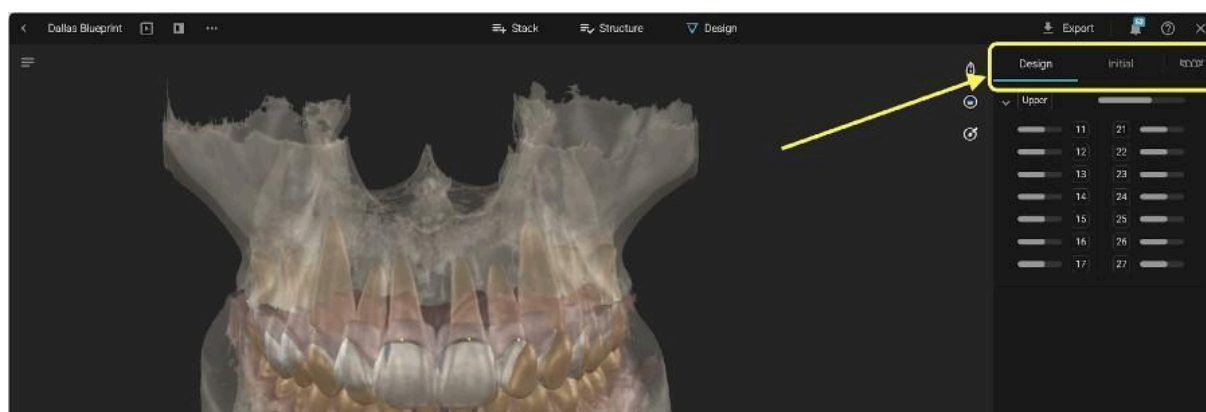

Scegli di mostrare o nascondere diversi oggetti/strutture dalla sezione Livelli.

Sul livello Design e livelli iniziali: Mostra/Nascondi trascinando con il mouse  
Sul livello Librerie: sfoglia diverse morfologie

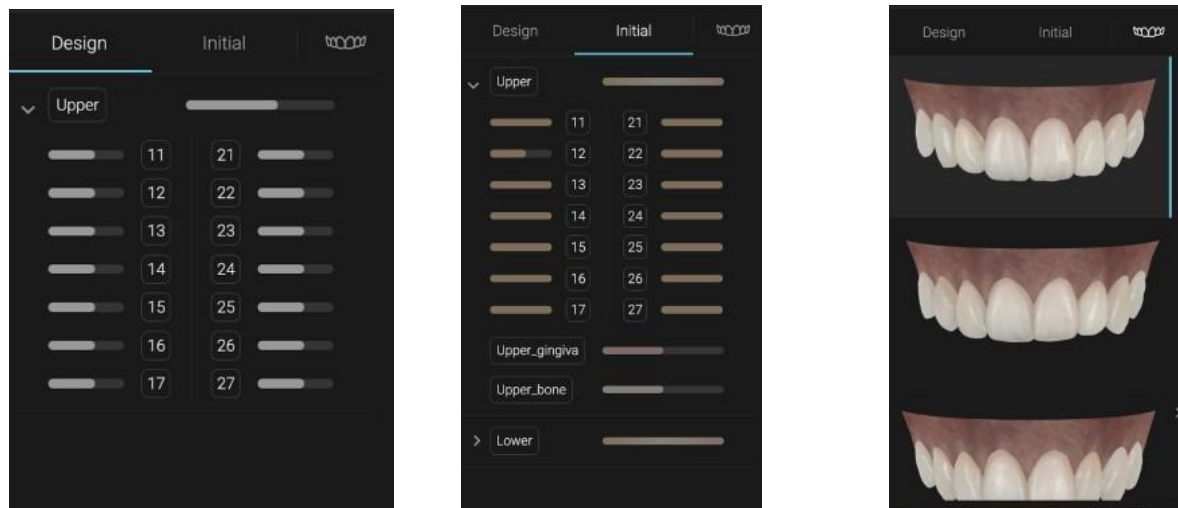


### 4.3. Menu di controllo 3D

#### Sezione trasversale



Fare clic sul pulsante Sezione trasversale -> quindi posizionare 2 punti per creare la sezione  
Nella finestra Sezione trasversale, fare doppio clic per posizionare i punti e misurare

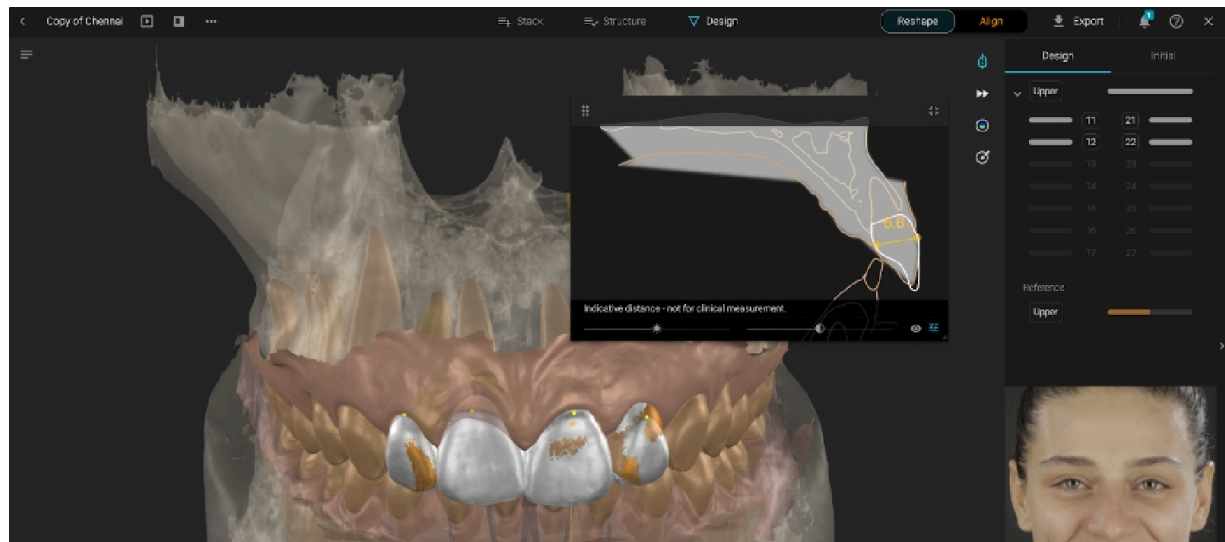

Ricorda che Blueprint mostra solo distanze indicative, non adatte alla misurazione clinica.




Mappa termica - Attiva la mappa termica per mostrare i contatti o le interferenze


Strumento Scultura - Seleziona il tipo di azione, la dimensione del pennello e l'intensità del pennello



Clicca su una struttura e trascina con il mouse per scolpire

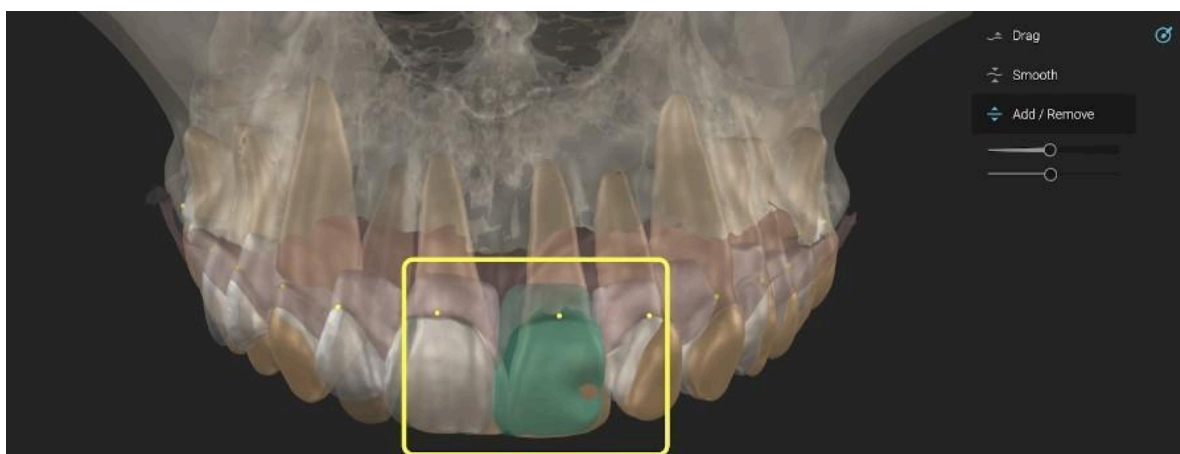


Strumento Movimento (se il file di movimento è stato aggiunto alla pila)

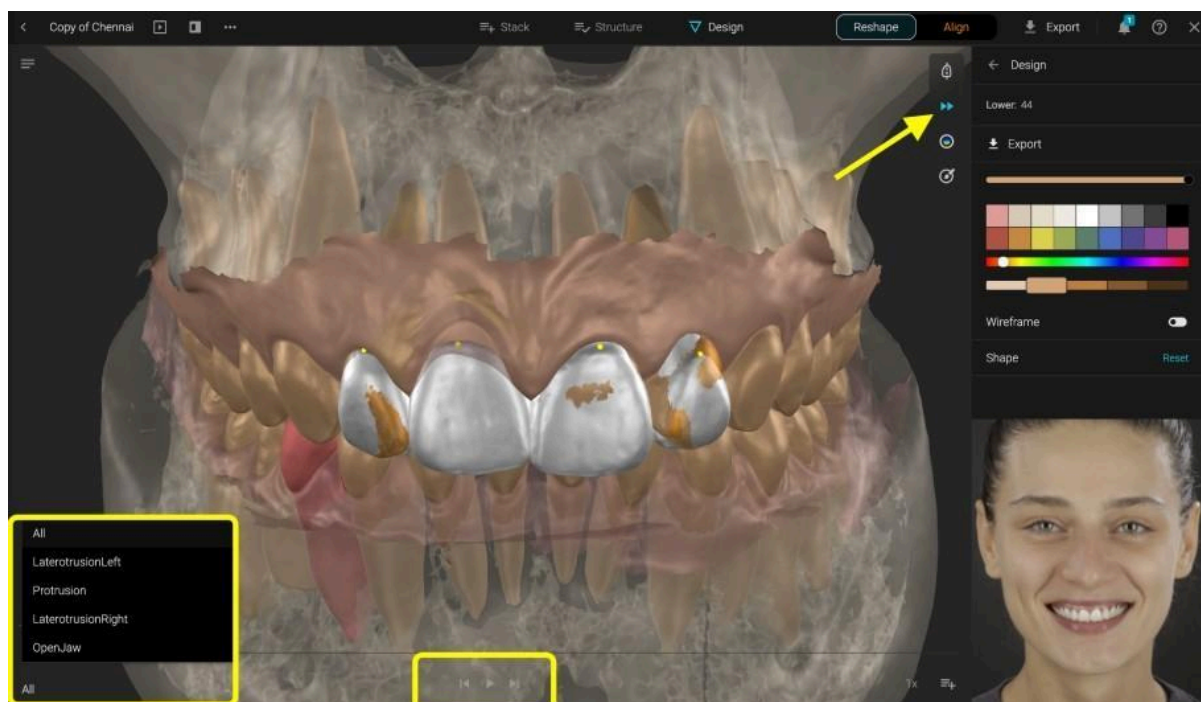




#### 4.4. Controlli di progettazione

Clicca su una forma dentale dal disegno per spostarla con il mouse  
Tieni premuto il tasto COMMAND o CTRL sulla tastiera per ruotare il dente sul proprio asse  
Trascina il cerchio esterno per ridimensionare

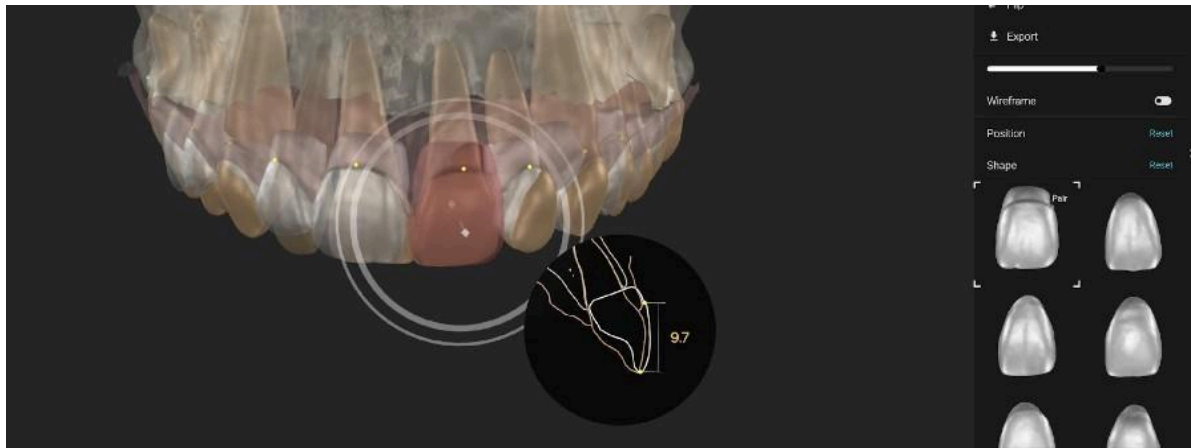


Trascina il cerchio interno per spostarlo sull'asse orizzontale.  
Altri strumenti sono disponibili nel menu di progettazione:

- Cerca forme diverse
- Rispecchia la forma
- Capovolgi la forma
- Esporta
- Mostra/nascondi
- Mostra/nascondi wireframe
- Ripristina modifiche alla posizione e modifiche alla forma

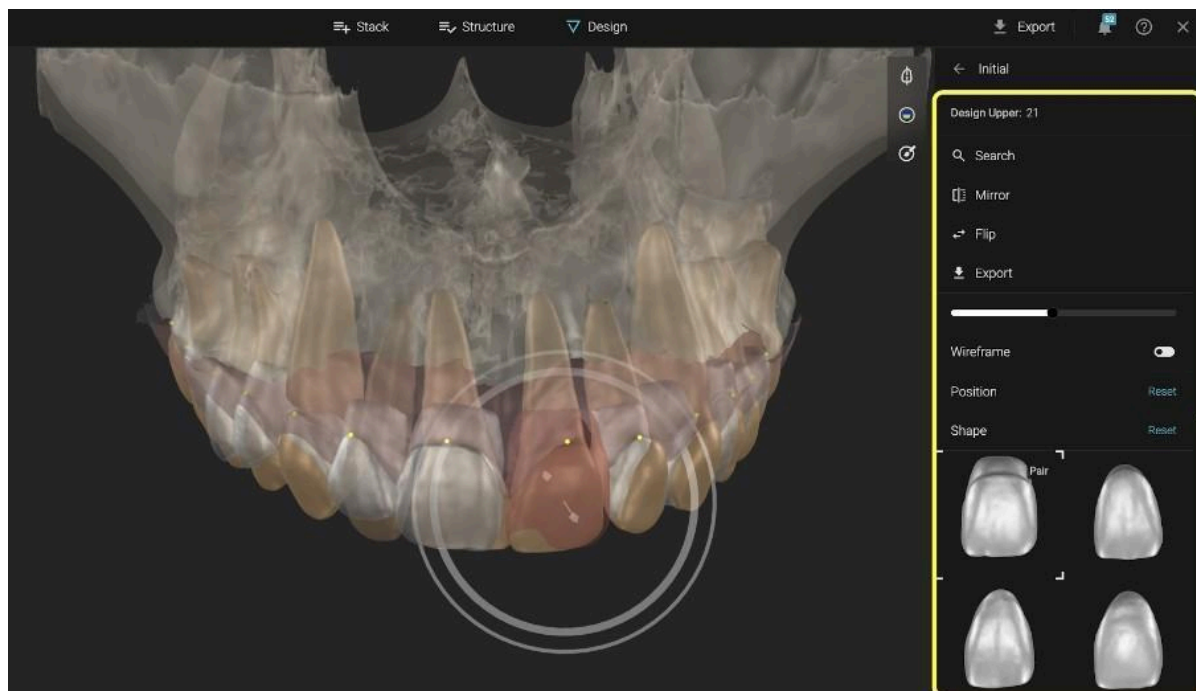



Per cercare forme per singoli denti, clicca sulla forma della libreria e modifica i parametri per ottenere diversi suggerimenti.

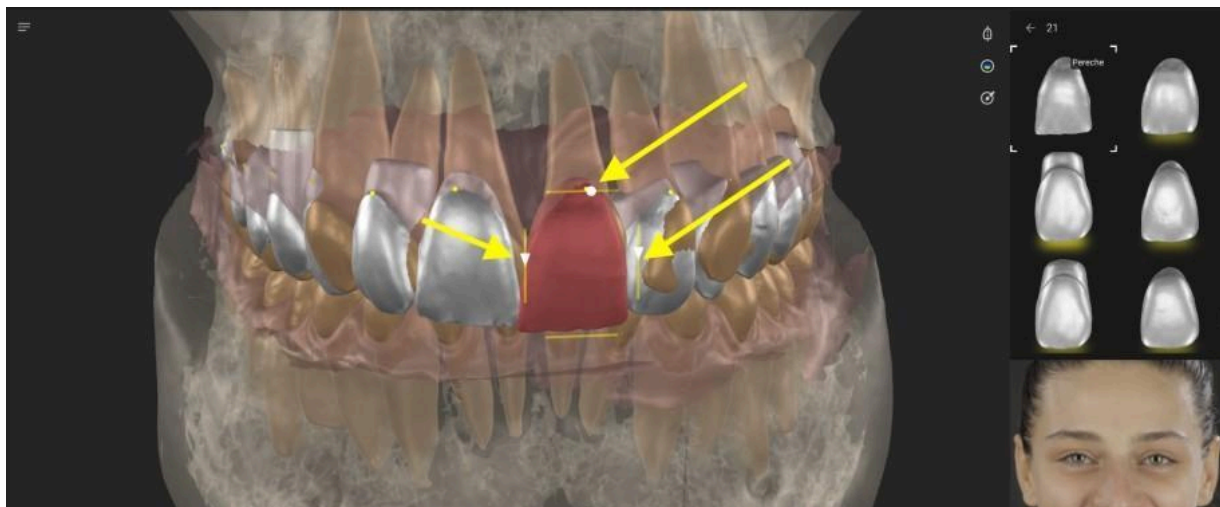

Per regolare il colore della simulazione in verticale, accedere al menu dei colori



#### 4.5. Strumenti di allineamento

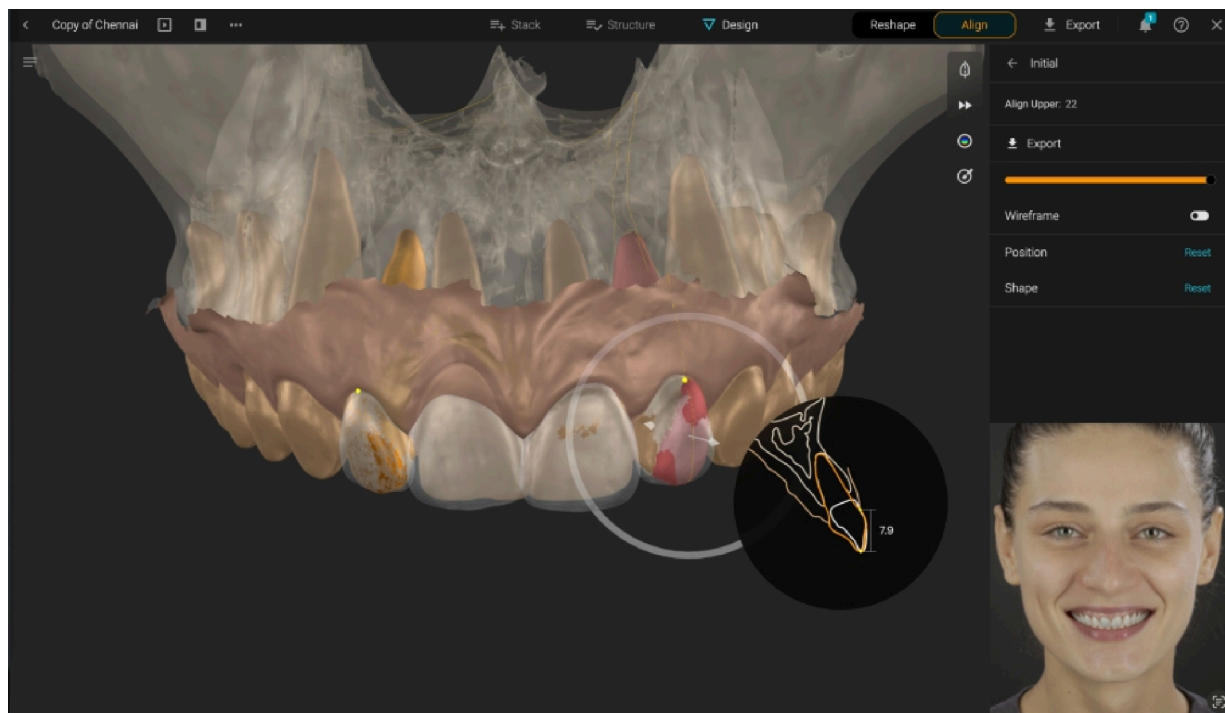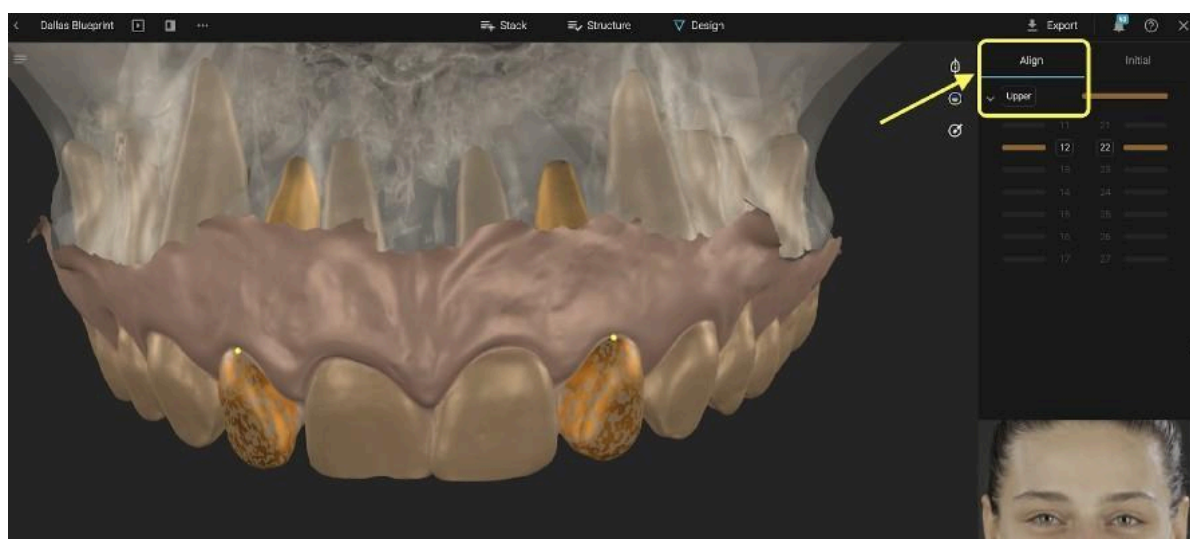

Quando la funzione di allineamento è selezionata su Struttura, il menu dello strumento di allineamento si trova sul lato destro. Mostra o nascondi i denti selezionati dal cursore





Controlli di allineamento dei denti: clicca su un dente contrassegnato per l'allineamento per spostarlo. Trascina dalla freccia o dal cerchio.

Sul lato destro sono disponibili strumenti aggiuntivi per ripristinare la posizione, la forma e mostrare/nascondere il wireframe.

## 4.6 Esporta il progetto come STL sul tuo computer

Esporta come file combinati o separati.  
Scegli gli oggetti che desideri esportare

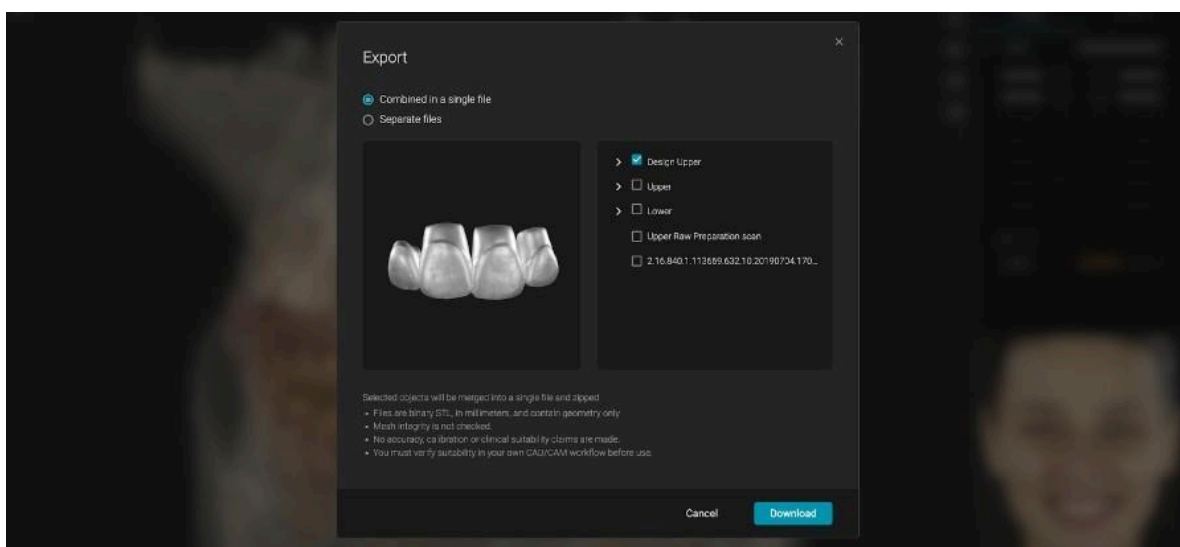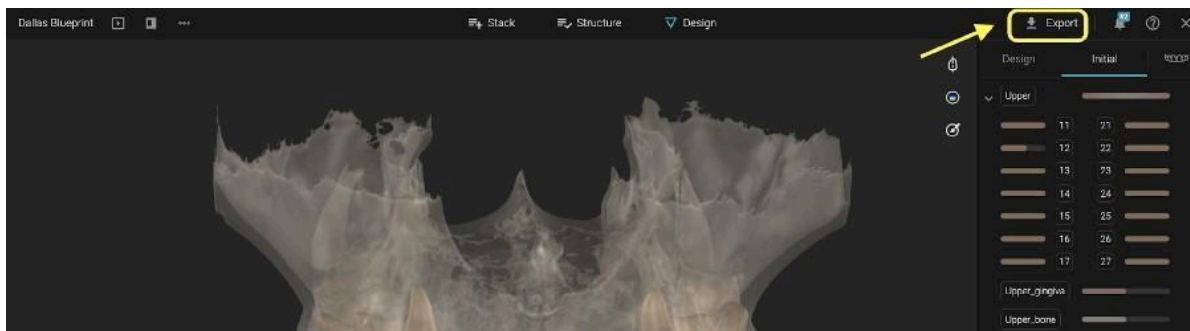

## 4.7 Salva il progetto

Clicca sulla X per salvare e chiudere il progetto



#### 4.8. Opzioni del progetto Blueprint

Dalla sezione Progetto sono disponibili diverse opzioni per la gestione del Blueprint:

- Rinomina
- Condividi con il paziente
- Duplica (crea una copia)
- Blocca (impedisce agli altri membri di apportare modifiche)
- Imposta come copertina del caso
- Elimina

