

Benutzerhandbuch – Gesundheitsplattform & Patienten-



Eine personalisierte Behandlung mit
mehr Einblick und Einbindung in den
Behandlungsverlauf.

App-Version : 2.2.0 und später

Manuelle Version: 17.2

Daten des Release Manuals : 27/01/2026

Link zum E-Learning: : <https://moveup.talentlms.com/index>

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
PRODUKTBESCHREIBUNG	3
BEABSICHTIGTE VERWENDUNG	3
VORGESEHENE NUTZER	4
Zielgruppe/Anwendungsindikation	5
Ansprüche	5
moveUP-App und Geräte	5
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	6
Kontraindikationen und mögliche Nebenwirkungen	7
Meldung schwerwiegender Vorfälle	7
Menschlicher Körperkontakt	7
Kombiniertes Zubehör/Produkte	8
Gerät-Lebensdauer	8
Unternehmensdetails	8
PATIENTEN-APP	9
MEDIZINISCHES MODUL	9
ERSTELLUNG EINES KONTOS FÜR DIE GESUNDHEITSPLATTFORM	9
ONBOARDING VON PATIENTEN	9
ALLGEMEINE FUNKTIONEN DER GESUNDHEITSPLATTFORM	11
HEALTHCARE PLATFORM CARE PLAN FUNCTIONS	20
WELLNESS-MODUL	23
AKTIVIERUNG DES WELLNESS-MODULS	23
ÜBERSICHT DES WELLNESS-MODULS	24
Überblick über das Wellness-Modul	25
Wellnessbericht	25

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bitte lesen Sie die Informationen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass Sie die Nutzung, die Funktionen und die Einschränkungen der moveUP App verstehen, bevor Sie den Dienst nutzen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an moveUP.

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt moveUP, dass der Benutzer alle relevanten Gebrauchsanweisungen für Geräte liest, die in Verbindung mit der moveUP App verwendet werden.

Der Nutzer erhält während des gesamten Nutzungszeitraums die notwendige technische und therapeutische Unterstützung. Im Falle eines Defekts oder Problems mit der App können Sie das moveUP-Team über die Nachrichtenfunktion der App, telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG

Für Gesundheitsdienstleister

moveUP bietet Gesundheitsdienstleistern ein effizientes klinisches Management von Pathologien und Behandlungen. Mit moveUP erhalten das Ärzte- & Pflege team wertvolle Einblicke in den Status des Patienten und seine Entwicklung.

Für Patienten

Für die Patienten bietet moveUP personalisierte Informationen und Anleitungen, die ihnen helfen, ihre Symptome zu bewältigen und Fortschritte in ihrer Rehabilitation zu erzielen. Die Intensität der Nachsorge wird an die Bedürfnisse der Patienten und den Zeitpunkt des Patientenverlaufs angepasst:

moveUP COMPANION = Überwachung und Bereitstellung von Informationen, kein aktives Follow-up

moveUP Companion bietet Patienten gezielte Informationen und Entwicklungsberichte. Ihr Pflege team berücksichtigt die Entwicklungsberichte, falls zutreffend, bei der weiteren Genesung.

moveUP COACH = aktive Nachsorge durch das Gesundheitsteam

moveUP Coach bietet Patienten gezielte Informationen und Entwicklungsberichte. Das Pflege team ist aktiver involviert, berücksichtigt die Entwicklungsberichte und kann über die digitale Plattform Ratschläge und Übungsvorschläge geben.

moveUP THERAPY = aktive Nachsorge durch das Gesundheitsteam mit datengesteuertem validiertem Pflegeprotokoll

Die moveUP-Therapie bietet ein datengesteuertes validiertes Pflegeprotokoll mit

bestimmten Kategorien und Ebenen von Übungen und Aktivitäten, die speziell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Ihr Pfllegeteam kann das datengesteuerte validierte Protokoll bei Bedarf manuell anpassen. Patienten können sich mit moveUP vollständig rehabilitieren, ohne ihre häusliche Umgebung zu verlassen.

Optional aktivierbare Funktionalität: Interoperabilität mit medizinischen Geräten der Klasse IIa für kontinuierliche passive Bewegung (CPM).

Für Knie- und Hüftpatienten, die ein CPM-Medizinprodukt der Klasse IIa verwenden, kann moveUP mit der CPM-Software der Klasse IIa verknüpft werden. moveUP ermöglicht die einfache Zuordnung von ärztlich ausgewählten CPM-Übungen an den Patienten und gewährt Einblicke in die durchgeführten CPM-Übungen auf dem medizinischen Dashboard.

VORGESEHENE NUTZER

Der Hauptnutzer der mobilen App und der Patienten-Website ist der Patient. Patienten sollten ansprechbar, geistig kompetent und in der Lage sein, ein Tablet / Smartphone und einen Aktivitätstracker zu bedienen.

Einschließlich:

- Alter:
 - Minimum: 18 Jahre
 - Maximum: keine Grenze
- Gewicht: Keine Einschränkungen
- Gesundheit & Zustand: in der Lage, grundlegende Alltagsaktivitäten durchzuführen
- Sprache: Der Patient versteht eine der verfügbaren Sprachen der App (Niederländisch, Französisch, Deutsch, Englisch)

Ausschließlich:

- Patienten, die geistig inkompetent sind oder Schwierigkeiten haben, auszudrücken, was sie fühlen (zum Beispiel psychisch kranke Menschen, Menschen, die in Altenpflegezentren bleiben, ...) sind ausgeschlossen.
- Patienten, die nicht in der Lage sind, ein Tablet/Smartphone und einen Aktivitätstracker zu bedienen.
- Patienten, die keine der verfügbaren Sprachen der App verstehen (Niederländisch, Französisch, Deutsch, Englisch)

Gesundheitsdienstleister

Der Hauptnutzer der medizinischen Webschnittstelle ist ein Arzt (Gruppe) oder ein klinischer

Forscher (Gruppe), genannt das Pflorgeteam. Das Pflorgeteam muss in der Lage sein, ein Webinterface per Webbrowser auf PC/Tablet/Smartphone zu bedienen. Der Arzt muss eine der verfügbaren Sprachen der Weboberfläche verstehen (bisher nur auf Englisch verfügbar).

Zielgruppe/Anwendungsindikation

moveUP companion & coach wird von muskuloskelettalen, onkologischen, respiratorischen, gastro-intestinalen, kardiovaskularen und neurologischen Patienten eingesetzt, wie z.B.:

- die sich einer Magenbypass- oder Magenhülsenoperation unterzogen haben oder unterziehen werden
 - die einen Schlaganfall, multiples Myelom, COVID, familiäre Hypercholesterinämie haben oder hatten
 - die Rücken- oder Gelenkprobleme oder dementsprechende Operationen hatten
- moveUP Therapy wird von Patienten mit Knie- und Hüftendoprothetik genutzt.

Ansprüche

moveUP Companion/Coach/Therapy

Die Intensität der Nachsorge wird über das moveUP Symptom & QoL Monitoring Tool an die Bedürfnisse des Patienten angepasst.

- **Verbesserung** - moveUP verbessert das klinische Management des Patienten, da eine frühzeitige Erkennung und Behandlung von Komplikationen über das Symptom- und QoL-Überwachungstool möglich ist
- **Effizienz**- Effizienteres klinisches Management, da u.a. die Anzahl der Beratungen reduziert werden kann
- **Compliance**- Durchsetzung der Therapie-Compliance/Einhaltung
- **Informationen**- Bereitstellung der richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt

moveUP-App und Geräte

Die moveUP App läuft auf:

- iPhones/iPads (iOS 11.0 oder neuer)
- Android-Systemen (Android 7.0.0 und neuer).

Wenn der Patient kein kompatibles Tablet/Smartphone besitzt, kann moveUP ihm diese Geräte vermieten.

- Lenovo Tab 3 – Android 6.0.1 oder höher
- Huawei MediaPad T3 – Android 7.0.0 oder höher

Die moveUP App benötigt eine Internetverbindung.

Die folgenden Aktivitätstracker werden derzeit unterstützt:

- Garmin Vivofit 3 und Vivofit 4
- Nokia Withings Go
- Alle mit HealthKit (iOS) kompatiblen Geräte
- Alle mit Google Fit (iOS und Android) kompatiblen Geräte

Die moveUP App ist mit folgenden Browsern kompatibel:

- Chrome
- Safari
- Edge
- Firefox

Wir empfehlen dringend, die neueste Browserversion zu verwenden.

Zur Sicherheit Ihrer Daten aktivieren Sie bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und verwenden Sie ein sicheres Netzwerk

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

	• moveUP ist nicht für Notfälle geeignet. Im Notfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder wählen Sie den Notruf/112.
	• moveUP ist nicht für die Überwachung/Behandlung von Vitalparametern kritischer Krankheiten vorgesehen.
	• moveUP companion ist kein Ersatz für eine Behandlung, die Sie befolgen müssen, sondern wird als Ergänzung verwendet.
	• Patienten müssen sich bewusst sein, wenn Fragebogen nicht häufig ausgefüllt werden oder nicht vertrauenswürdig ausgefüllt werden, das Pflgeteam hat mehr Schwierigkeiten, ihre Gesundheitssituation und Entwicklung zu kennen.
	• Die moveUP App bietet eine personalisierte Gesundheitsversorgung auf der Grundlage des Patientenprofils und kann daher nicht mit anderen Nutzern geteilt, ausgeliehen oder getauscht werden. Die Informationen und Ratschläge der moveUP-Anwendung gelten nicht für einen anderen Patienten als den, dessen Profil in der Anwendung gespeichert ist. Der Patient darf Dritten keinen Zugriff auf die moveUP App gewähren. Jede andere Person kann, auch versehentlich, falsche Informationen senden oder das Profil des Patienten ändern, mit der Folge, dass die moveUP-geführte Beratung nicht mehr den Bedürfnissen des Patienten entspricht.



- Bei Software gibt es immer ein Restrisiko für Fehler. Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt oder Sie keine Antwort in der App erhalten, kontaktieren Sie uns bitte über support@moveup.care oder rufen Sie 0800 88 008 an.

Die moveUP-Gebrauchsanweisung wird ausschließlich in elektronischer Form bereitgestellt. Falls Sie eine gedruckte Version benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der E-Mail-Adresse info@moveup.care. Diese E-Mail-Adresse ist rund um die Uhr erreichbar.

Kontraindikationen und mögliche Nebenwirkungen

Es gibt keine Kontraindikationen oder bekannte Nebenwirkungen.

Meldung schwerwiegender Vorfälle

Ein schwerwiegender Vorfall ist ein Vorfall, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte:

- Der Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
- die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person, die zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat:
 - lebensbedrohliche Krankheit oder Verletzung,
 - dauerhafte Beeinträchtigung einer Körperstruktur oder einer Körperfunktion, Krankenhausaufenthalt
 - Verlängerung des Krankenhausaufenthalts des Patienten, medizinischer oder chirurgischer Eingriff zur Verhinderung lebensbedrohlicher Erkrankungen oder Verletzungen
 - dauerhafte Beeinträchtigung einer Körperstruktur oder einer Körperfunktion,
 - chronische Krankheit,
- eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit;

Wenn Sie einen dieser Fälle feststellen, senden Sie bitte eine E-Mail an info@moveUP.care und Ihre zuständige Behörde:

- Niederlande: meldpunt@igj.nl
- Belgien: meddev@fagg.be
- Frankreich: dedim.ugsv@ansm.sante.fr
- Deutschland: zlg@zlg.nrw.de

Menschlicher Körperkontakt

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts (Software) besteht kein menschlicher Körperkontakt mit dem Patienten oder Benutzer.

Kombiniertes Zubehör/Produkte

Es gibt kein Zubehör.

Wenn der Patient kein kompatibles Tablet/Smartphone oder Aktivitätstracker hat, kann moveUP diese Geräte an den Patienten vermieten. Bei den geleasten Geräten handelt es sich um CE-gekennzeichnete Geräte, die die in der IFU für die App beschriebenen Kompatibilitätskriterien erfüllen.

Gerät-Lebensdauer

2 Jahre. Abhängig von der Bereitschaft des Nutzers, die App zu aktualisieren. Wir erinnern den Nutzer, die App zu aktualisieren, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die neuesten Funktionen nutzen zu können.

Unternehmensdetails

 moveUP NV/SA	Tel: +32 800 88 008	UDI: ++G166MOVEUP220MDDDM  (01)G166MOVEUP220MDD (10)+\$7220 (11)/16D20260127 (21)\$Y
Hauptsitz Brüssel: Cantersteen 47, B-1000 Brüssel, Belgien Zweitbüro: Kliniekstraat 27A 9050; Ghent, Belgium	Email: info@moveUP.care www.moveup.care	

Bei Fragen zur App oder zum Tablet können Sie moveUP über folgende Kanäle – in der Reihenfolge der Priorität – kontaktieren: Über das Nachrichtensystem der App. Per E-Mail an support@moveup.care – Per Telefon während der Bürozeiten: +32 800 88 008

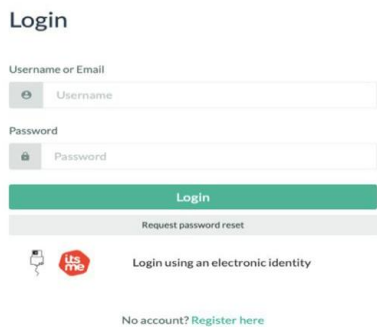
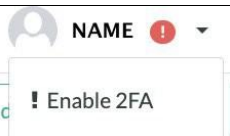
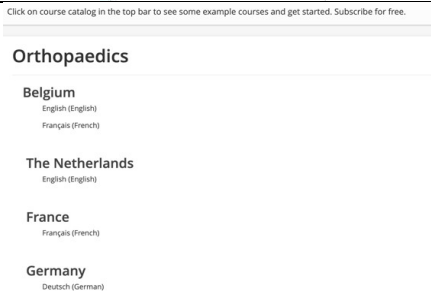
MoveUP garantiert die Lieferung der elektronischen Gebrauchsanweisung auf Anfrage innerhalb von sieben (7) Tagen. Bitte kontaktieren Sie info@moveUP.care, wenn Sie ein kostenloses Exemplar erhalten möchten.

PATIENTEN-APP

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch für Patienten um die Funktionen der Patienten-App anzuzeigen.

MEDIZINISCHES MODUL

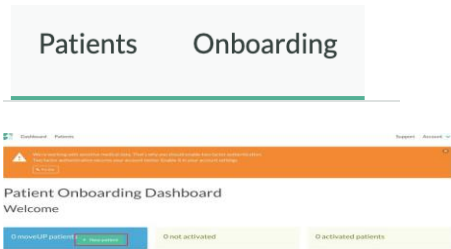
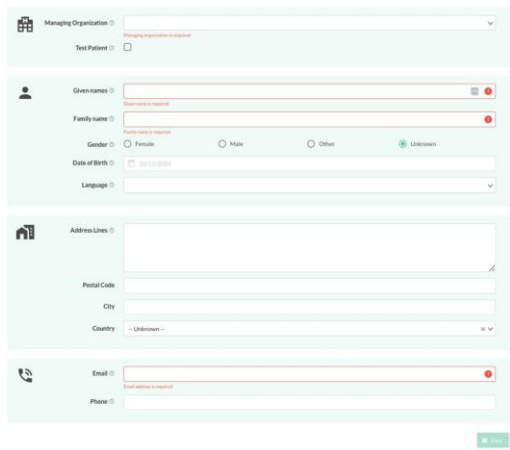
ERSTELLUNG EINES KONTOS FÜR DIE GESUNDHEITSPLATTFORM

Schritt 1: Der HCP registriert sich auf der Gesundheitsplattform unter https://v1.medical.moveup.care/	
Schritt 2: moveUP wird den HCP kontaktieren, um sein/ihr Profil der richtigen Organisation hinzuzufügen.	
Schritt 3: Sicherheitsmaßnahmen: Es ist wichtig, 2FA zu aktivieren, da Sie Zugriff auf sensible Gesundheitsdaten haben.	
E-Learning: Angehörigen von Gesundheitsberufen, die die Gesundheitsplattform nutzen, wird empfohlen, die E-Learning-Kurse für die unter https://moveup.talentlms.com aufgeführten Indikationen zu besuchen. Wir bitten Angehörige von Gesundheitsberufen, sich für den E-Learning-Kurs in ihrer jeweiligen Sprache anzumelden.	

ONBOARDING VON PATIENTEN

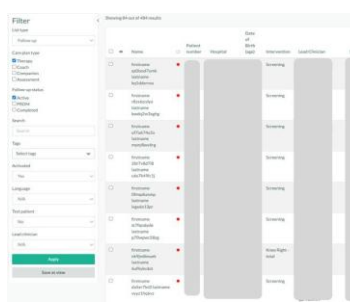
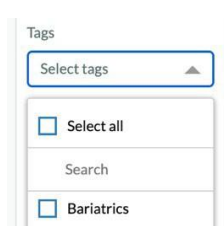
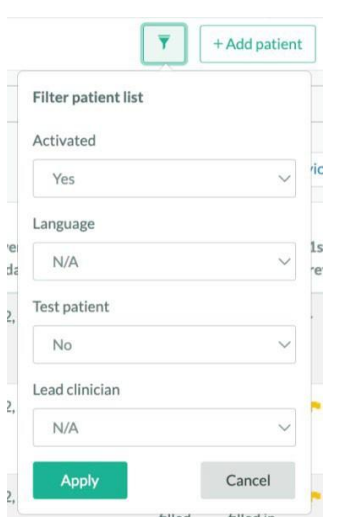
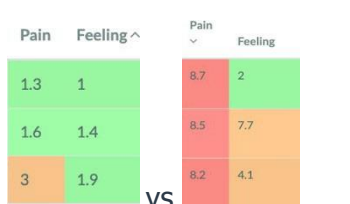
Onboarding ist der Prozess der Registrierung eines neuen Patienten in der Gesundheitsplattform.

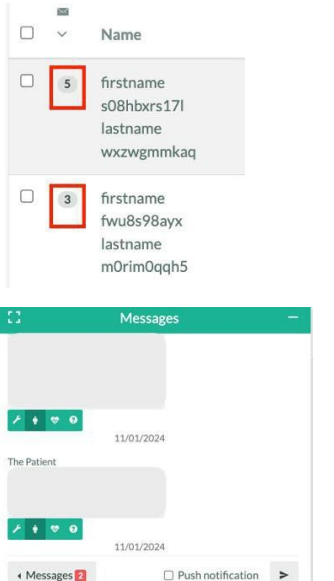
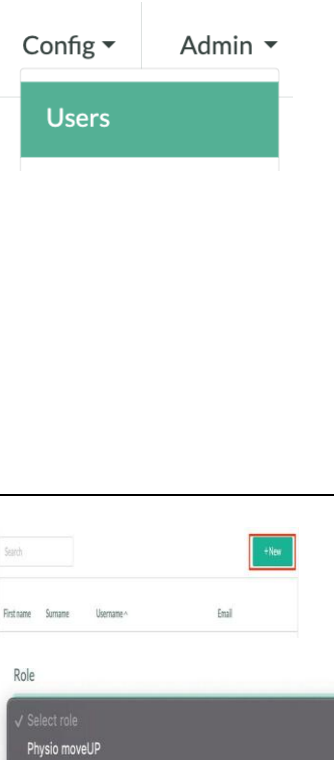
Ein entscheidender Teil ist das Hinzufügen eines Behandlungsplans zum Patientenprofil. Ein Behandlungsplan bestimmt, was für den Patienten in der Anwendung sichtbar sein wird, z. B. Art der Übungen, Informationsmodule, Nachrichtenfunktionen usw. Ein Behandlungsplan besteht in der Regel aus einer Intervention, einer Behandlung und einem oder mehreren Behandlungsteams.

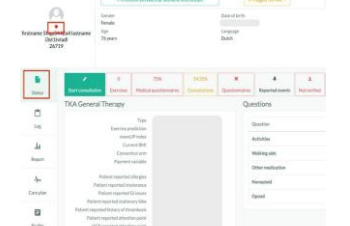
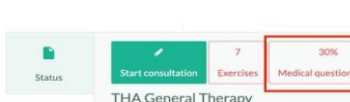
Onboarding von Patienten		Das Onboarding-Dashboard ist in der Gesundheitsplattform oben links unter "Onboarding" leicht erreichbar. Alternativ ist es über https://patient-onboarding-admin-moveup.care mit den HCP-Anmeldedaten der Gesundheitsplattform erreichbar. Klicken Sie auf "Neuer Patient", um einen neuen Patienten aufzunehmen und die Patienteninformationen einzugeben.
		Nachdem Sie die Patienteninformationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Speichern". Wichtiger Hinweis: Es kann nur ein Konto mit einer E-Mail-Adresse verknüpft werden. Die Wiederverwendung einer bereits in unserer Datenbank bekannten E-Mail-Adresse, z. B. die Wiederverwendung derselben E-Mail-Adresse für das Konto eines Partners oder Elternteils, ist nicht möglich.
		Wählen Sie anschließend den Behandlungsplan aus: Klicken Sie auf "Neuen Behandlungsplan starten". Ziehen Sie per Drag & Drop eine Intervention und Behandlung in den Behandlungsplan und geben Sie die Daten, den Namen des behandelnden Arztes und des Behandlungsteams ein. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Studie per Drag & Drop. Klicken Sie auf "Speichern".
		Eine E-Mail-Vorlage wird angezeigt. Der HCP überprüft die E-Mail-Variablen und klickt auf "Ausgewählte E-Mails senden". Dem Patienten wird eine Einladungs-E-Mail mit allen erforderlichen Informationen zur Installation und Aktivierung der Anwendung gesendet.

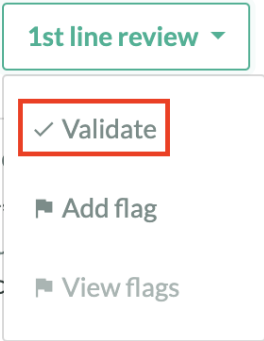
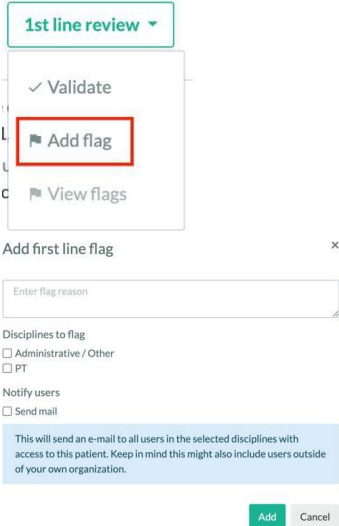
ALLGEMEINE FUNKTIONEN DER GESUNDHEITSPLATTFORM

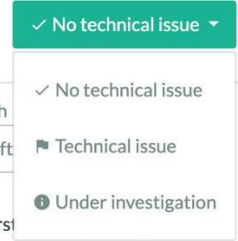
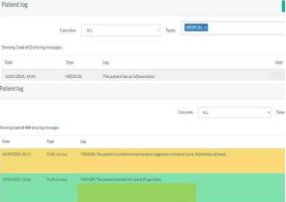
Nachfolgend kann der Gesundheitsdienstleister alle Funktionen der Gesundheitsplattform abrufen. Die entsprechenden Funktionen werden basierend auf dem Abonnement des Gesundheitsdienstleisters angezeigt. Der Umfang der verfügbaren Patienteninformationen richtet sich nach dem Abonnement des Patienten und seiner Compliance-Rate.

Patientenübersicht		Die Gesundheitsplattform bietet einen klaren Überblick über die Patienten des medizinischen Fachpersonals. In der oberen Leiste werden die relevanten Kategorien angezeigt, die den Patienten identifizieren und relevante Gesundheitsparameter, ungelesene Nachrichten, den leitenden Arzt und die Patienten-Compliance anzeigen. Standardmäßig wird beim Öffnen der Gesundheitsplattform die Patientenübersicht nach dem Interventionsdatum sortiert.
Schlagwörter		Wählen Sie mithilfe von Tags Patienten mit einer bestimmten Pathologie aus.
Filter		Wählen Sie Patienten nach Sprache, Testpatient, leitendem Arzt oder Aktivierung aus. Aktiviert kann zwei Dinge bedeuten: Entweder hat sich der Patient selbst mit einem Code über die App registriert oder er wurde beim Onboarding als sofort aktiviert markiert. Nicht aktiviert: Patienten, die sich noch nicht über die App registriert haben und nicht als sofort aktiviert markiert wurden.
Farbcodes		Farbcodes zeigen an, welche Patienten eine genauere Aufmerksamkeit benötigen.

Nachrichten		Die Anzahl der ungelesenen Nachrichten wird in der Übersicht angezeigt.
Bewertung / Flaggen		Mithilfe von Überprüfungskeuzichen ist bekannt, wann der Patient untersucht wurde oder wer ihn untersuchen muss. Weitere Informationen finden Sie unter Patientendetails – Überprüfung / Kennzeichen.
Benachrichtigungen		Benachrichtigungen können direkt an den Startbildschirm des Patientengeräts gesendet werden.
Benutzerverwaltung		Nur bestimmte medizinische Fachkräfte einer Organisation sind berechtigt, Benutzer hinzuzufügen. Verfügt eine medizinische Fachkraft über diese Berechtigung, kann sie Benutzer hinzufügen, indem sie auf die Schaltfläche "Neu" klickt, die Anmeldedaten eingibt, die entsprechende Rolle auswählt und auf "Registrieren" klickt. Der neu erstellte Benutzer erhält eine E-Mail mit den Schritten zur Kontoerstellung (siehe oben). Wählen Sie die entsprechende Rolle aus und klicken Sie auf "Registrieren". Der neu erstellte Benutzer erhält eine E-Mail mit den oben beschriebenen Schritten zur Kontoerstellung.

Patient details – Overview		In der Patientenübersicht sind alle relevanten (Gesundheits-)Informationen des jeweiligen Patienten abrufbar. Mithilfe der Schaltflächen "Vorheriger" und "Nächster Patient" kann das medizinische Fachpersonal einfach zu einem anderen Patienten wechseln. In der linken Seitenleiste kann das medizinische Fachpersonal zwischen Status, Protokoll, Behandlungsplan, Profil, Dokumenten und mehr navigieren.
Patientendaten – Status	 ● Compliance OK for today or yesterday ● Non compliant > 2 days ● Non compliant > 7 days	Die gemeldeten Gesundheitsdaten sind im Bereich "Status" abrufbar. Von dort aus kann zu den Ergebnissen wiederkehrender und medizinischer Fragebögen, Übungen und vielem mehr navigiert werden. Ein GRÜNER, GELBER oder ROTER Statuspunkt zeigt an, wie sehr der Patient den Behandlungsplan einhält. Das Ausfüllen aller vorgeschlagenen wiederkehrenden und medizinischen Fragebögen und die Durchführung der vorgeschlagenen Übungen führt beispielsweise zu einem GRÜNEN Statuspunkt.
Patientendaten – Medizinische Fragebögen		Über den Button "Medizinischer Fragebogen" wird angezeigt: ✓ Welche medizinischen Fragebögen sind für einen Patienten aktiv. ✓ Wie viele davon sind abgeschlossen oder nicht. ✓ Welche Ergebnisse werden zu den einzelnen Fragen des medizinischen Fragebogens berichtet. Wie hoch sind die Teil- und

		Klicken Sie auf "Bestätigen", wenn ein Patient überwacht wurde. Überwachung kann Folgendes bedeuten: ✓ Fragen beantwortet – Ratschläge gegeben Adjusted or checked exercises ✓ Angepasstes bzw. überprüftes Schrittziel ✓ Tägliche Parameter überprüft: Schmerzen, Schwellungen, Aktivität, ... ✓ Postoperatives Protokoll überprüft: Verwendung von Krücken/Gehhilfen, Medikamente, ... Dasselbe Prinzip gilt für die Überprüfung der zweiten Zeile.
		Jemanden aus der ersten Reihe melden: ✓ Der Patient muss von einer Person aus dem medizinischen Grundversorgungsteam (z. B. einem Physiotherapeuten) untersucht werden. ✓ Geben Sie einen Grund für die Markierung an. ✓ Optional: E-Mail-Benachrichtigung für gemeldete Verstöße hinzufügen. Der gemeldete Verstoß wird per E-Mail bestätigt. Durch das Setzen eines Flags wird im Patientenprotokoll eine neue Zeile mit dem Grund für das Flag hinzugefügt (siehe weiter unten).

		Jemanden aus der zweiten Reihe anhalten: ✓ Der Patient muss von einem Arzt der zweiten Versorgungsstufe (z. B. einem Chirurgen) untersucht werden. ✓ Geben Sie einen Grund für die Kennzeichnung an. ✓ Wählen Sie die zu markierende Disziplin aus. ✓ Optional: E-Mail-Benachrichtigung für die Markierung aktivieren. Die markierte Disziplin erhält eine E-Mail mit dem entsprechenden Hinweis.
		Ein technisches Problem melden.
Patientendaten – Protokoll		Flags und technische Aktualisierungen erscheinen automatisch im Patientenprotokoll. Im Falle einer Meldung: ✓ GRÜN: Flagge Gelöst ✓ ROT: Ungeklärter Verstoß gegen die Disziplinarordnung des angemeldeten Benutzers (z. B. PT) ✓ GELB: Ungelöster Fall für eine andere Fachrichtung als die des angemeldeten Benutzers (z. B. Chirurg) ✓ Weitere wichtige Informationen können manuell zum Protokoll hinzugefügt werden. Die entsprechenden Tags werden dem Protokoll hinzugefügt, um die Suche zu erleichtern.

Patientendetails – Bericht

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left containing icons for Home, Reports, LMS, Recent, Calendar, Profile, and Documents. The main content area is titled 'Patient's report - 17/09/2022'. It features a 'View report' button, which is highlighted with a red rectangle. Below this button is a link 'Print all (2 documents report)'. To the right of the button is a section titled 'Surf Information' containing details about the surgery type (Knee joint - total), surgeon (Olivier J. Serrano), therapist (Elise De Clerck), hospital (AZ Ziekenhuis Brussel), and treatment (TKA General Therapy). Below this is a section titled 'Patient-reported outcomes' with a table of scores.

Score	Pre op	Post op	Δ Pre
Overall knee scores (KSS)	50	70	20
Function (KSS)	53	75	22
Pain (KSS)	40	68	28
Activities of Daily Life (KSS)	39	61	22
Quality of Life (KSS)	31	55	24
Flexion/Extension (KSS)	4	4	0

Dieser Bericht dient dazu, die wichtigsten Meilensteine und medizinischen Fragebögen des Patienten sowie den Krankheitsverlauf zu visualisieren.

☆ Patient-reported outcomes

Score	Pre-op	6W	3M	6M	1Y	2Y
<u>Oxford Hip Score (/48)</u>	41	29	39			
<u>Symptoms (/100)</u>	75	70	75			
<u>Pain Score (/100)</u>	63	48	70			
<u>Activities of Daily Life (/100)</u>	72	68	70			
<u>Quality of Life (/100)</u>	50	38	63			
<u>Forgotten joint score (/100)</u>	21		50			

What are the scores meaning?
The mean score for the data using the oxford hip problem is 48, indicating full operation. **Red** supports for the knee 82%, and its average is 40 and for the patients with scores between 20, 40 and 60. **Blue** is for the knee between 60 and 80 and 82% of all patients for the patients above 80.

☆ Patient's scores over time

The radar chart displays scores for five metrics across six time points: Pre-op, 6 weeks, 3 months, 6 months, 1 year, and 2 years. The Test Group A (red) generally shows higher scores than the Other groups (blue) across most metrics and time points.

Metric	Pre-op	6 weeks	3 months	6 months	1 year	2 years
Oxford Hip Score	41	29	39			
Forgotten Joint Score	21		50			
Pain Score	63	48	70			
Symptoms	75	70	75			
Activities of Daily Life	72	68	70			

♣ Evolution of symptoms

The box plot shows the distribution of symptom scores over time. The Test Group A (red) shows a significant improvement in symptom scores over time, while the Other groups (blue) remain relatively stable.

Time Point	Test Group A (red)	Other groups (blue)
Pre-op	~41	~75
6 weeks	~29	~70
3 months	~39	~75
6 months	~40	~75
1 year	~40	~75
2 years	~40	~75

♣ Evolution of Activities of Daily Life

The box plot shows the distribution of Activities of Daily Life scores over time. The Test Group A (red) shows a significant improvement in Activities of Daily Life scores over time, while the Other groups (blue) remain relatively stable.

Time Point	Test Group A (red)	Other groups (blue)
Pre-op	~72	~72
6 weeks	~68	~72
3 months	~70	~72
6 months	~70	~72
1 year	~70	~72
2 years	~70	~72

Der Bericht kann als PDF heruntergeladen werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Bericht herunterladen" klicken. So kann die medizinische Fachkraft den Bericht an den Patienten senden. Alternativ kann der Link zum Bericht auch direkt über die Schaltfläche "Berichtslink kopieren" geteilt werden.

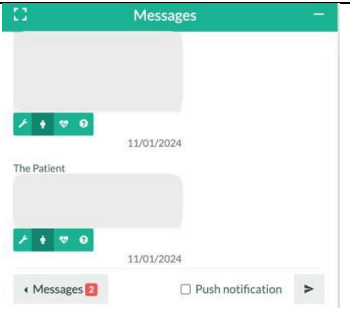
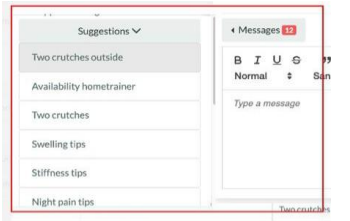
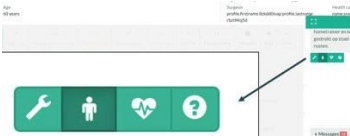
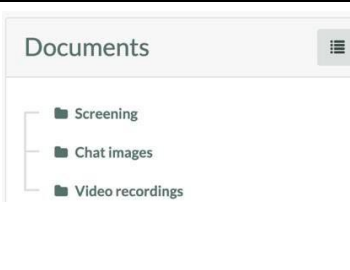
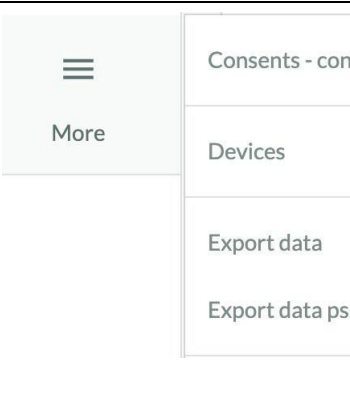
Patientendaten – Profil

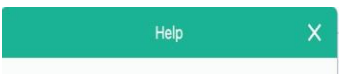
Basic information	Basic information
National health insurance	First Name *
Corona information	firstname.znetooa99
Bariatrics information	Surname *
	lastname.ix0nvk25f

Die medizinische Fachkraft kann alle relevanten grundlegenden, klinischen, administrativen oder pflegeplanbezogenen Daten im Patientenprofil einsehen, bearbeiten oder hinzufügen.

Patientendaten – Nachrichten

Das (vergrößerbare) Nachrichtenfenster ist standardmäßig geschlossen, die Anzahl neuer Nachrichten wird im schwebenden Button angezeigt. Diese Funktion dient dazu, Patienten zu beraten und ihre Fragen zu beantworten. Sie kann auch genutzt werden, um beispielsweise Bilder anzufordern, um den Heilungsverlauf, Schwellungen, Rötungen usw. zu

		dokumentieren.
		Beim Klicken auf "Nachrichten" wird eine Reihe vorgegebener persönlicher Nachrichten angezeigt, aus denen der Arzt eine passende Nachricht für den jeweiligen Patienten auswählen kann.
		Klicken Sie auf das "Symbol der ersten Zeile", um die Frage als gelesen zu markieren.
		Von medizinischen Fachkräften eingereichte Nachrichten können bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Nachricht fahren, wird eine Schaltfläche zum Bearbeiten oder Löschen der Nachricht angezeigt.
Patientendaten - Dokumente		Dokumente können im Bereich "Dokumente" hochgeladen werden. Chatbilder und Videoaufzeichnungen werden in diesem Bereich automatisch gesammelt, um einen einfachen Zugriff auf diese Materialien zu ermöglichen.
Patientendetails – Mehr		Sehen Sie, welche Dokumente/Verträge der Patient unterzeichnet hat. Sehen Sie, auf welchem Gerät der Patient die Anwendung nutzt und wann die Anwendung zum ersten und letzten Mal aufgerufen wurde. Der Datenexport ist aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Datenintegrität nur für eine begrenzte Anzahl von medizinischen Fachkräften möglich.
Abmelden		In der oberen rechten Ecke kann sich der Benutzer abmelden. Beachten Sie, dass die automatische Abmeldung nach 14 Tagen erfolgt. Daher wird empfohlen, sich häufiger

		abzumelden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Unterstützung		Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@moveup.care oder nutzen Sie die Schaltfläche "?" auf der Plattform.
Pflegeplanmanagement		Im Rahmen des Pflegeplanmanagements ist es möglich, zwischen verschiedenen Funktionen zu navigieren, die für die Indikation des Patienten relevant sind, wie z. B. Übungen, Schrittziel, wiederkehrende Fragebögen, Videoanalyse, Automatisierung usw. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

HEALTHCARE PLATFORM CARE PLAN FUNCTIONS

Die Gesundheitsplattform ermöglicht die Durchführung von Behandlungen. Mithilfe der folgenden Funktionen kann das medizinische Fachpersonal den Standardbehandlungsplan für den jeweiligen Patienten anpassen.

Es werden nur die für den Behandlungsplan relevanten Funktionen angezeigt.

Übungsmanagement

The screenshot displays the 'Exercise Management' interface. At the top, there's a 'Manage patient scheme' table with columns for exercises (Icepacks Hip, Circulation, Heel raises, Glutes contraction) and days (Day 1, Day 2, Day 3). The table shows active exercises with blue checkmarks and durations (e.g., 6x 20 minutes). Below the table, there's a 'Plan exercise' modal for 'Glutes contraction' on 'Day 5'. The modal includes fields for 'Start day / End day' (5 / 5), 'Repeat' (Daily), 'Intensity start' (10), 'Intensity target' (10), 'Frequency start' (3), and 'Frequency target' (3). Buttons for 'Cancel', 'Apply', and 'Apply & save' are at the bottom.

Das Modul zur Übungsverwaltung bietet folgende Anpassungsmöglichkeiten:

- ✓ Beschreibung, Häufigkeit und Intensität der Übungen des Tages anpassen.
- ✓ Passen Sie die tägliche Botschaft an.
- ✓ Das Übungsprogramm anpassen:
 - Blaue Häkchen kennzeichnen aktive Übungen, inklusive Angaben zu Häufigkeit und Intensität dieser Übungen.
 - Planen Sie die Übungen über einen längeren Zeitraum.
 - Erweitern Sie das Standard-Übungsprogramm um Übungen, die nicht im Pflegeplan enthalten sind.

Wiederkehrender Fragebogen

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** Medical questionnaires Video analysis

Questionnaires

Using treatment scheme **Personalize**

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** Medical questionnaires Video analysis Show in Patient language: No Advanced + Stop active follow-up Complete

Questionnaires

Name	Start day	End day	Frequency (Week)	Active from	Reminders	Order	Preview	Remove
Discharge	9	10	1	10:00	Reminders not set		Preview	Remove
Postoperative recovery	0	3	1	10:00	Reminders not set		Preview	Remove
Activities	15	100	1	10:00	Reminders not set		Preview	Remove
Exercises	5	100	1	10:00	Reminders not set		Preview	Remove

Add questionnaire to personalized care plan

Questionnaire

Start date

End date

Frequency

Daily

Activation hour

16

Activation minutes

0

Save Cancel

Wiederkehrende Fragebögen können entfernt, neu angeordnet oder durch neue ersetzt werden. Die Standardliste der wiederkehrenden Fragebögen, einschließlich Start- und Enddatum, Häufigkeit und Erinnerungen, ist im Pflegeplan vordefiniert.

Medizinischer Fragebogen

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** **Medical questionnaires** Video analysis Change Reset Stop active follow-up Complete

Medical scores scheme

Name	Start day	End day	Preview	Remove
HSP PROM collection month 6	170	210	Preview	Remove
HSP PROM collection Year 1	340	500	Preview	Remove
Discharge Questionnaire HSP	0	15	Preview	Remove

Add medical questionnaire to care plan

Medical score

Select a medical score

Activation type

Day in treatment

Start Date

0

End Date

0

Save Cancel

Medizinische Fragebögen können auch aus dem Standardschema entfernt oder hinzugefügt werden. Die Standardliste der medizinischen Fragebögen, einschließlich ihrer Start- und Endtermine, ist im Behandlungsplan vordefiniert.

Videoanalyse:

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** **Medical questionnaires** **Video analysis** Show in Patient language: No Advanced + Stop active follow-up Complete

Video analysis

Analysis enabled for this patient

Results NOT shown to this patient

Add request

Jan 12, 2024

Get analysis

not recorded

Video requests

Name	Start day	End day	Preview	Remove
Get analysis	-7	-1	Preview	Remove
Get analysis	21	30	Preview	Remove
Get analysis	40	45	Preview	Remove

Add video request to personalized care plan

Video request

Select a video type

Start date

0

End date

0

Save Cancel

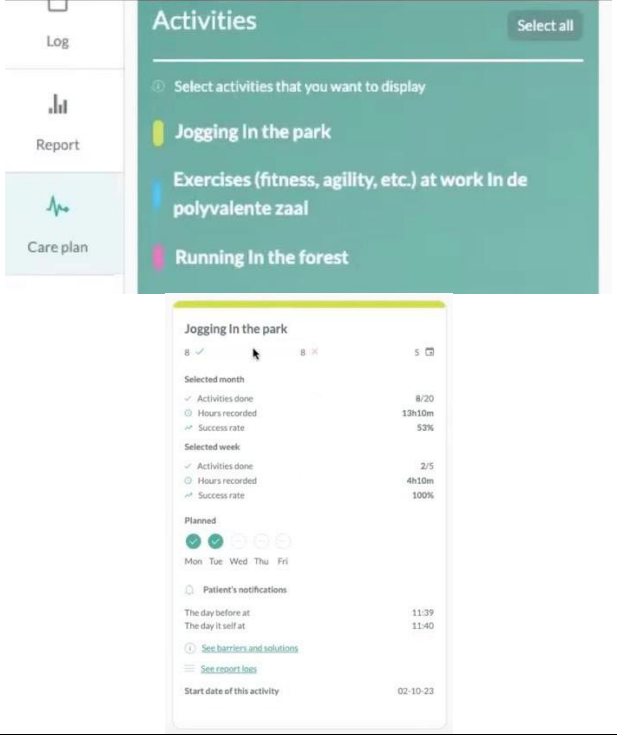
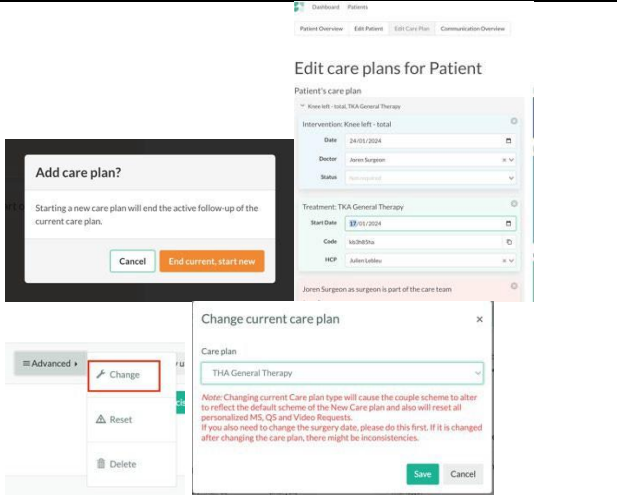
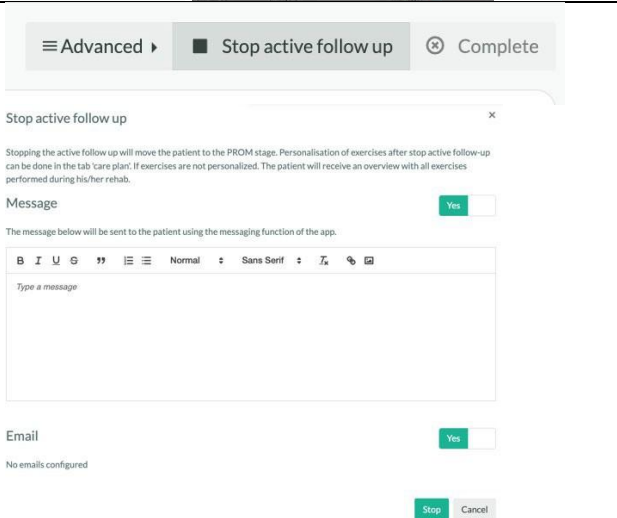
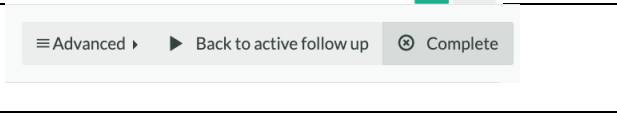
Request the patient to record a video for analysis

Video type

Select a Video type

Save Cancel

Mithilfe von Videoanforderungen lassen sich objektivere Informationen gewinnen, beispielsweise zur Ganganalyse oder zum Bewegungsumfang eines operierten Gelenks. Die Standardliste der Videoanforderungen ist im Behandlungsplan vordefiniert. Eine Videoanforderung kann direkt über die Schaltfläche "Anforderung hinzufügen" erstellt oder für einen längeren Zeitraum geplant werden, indem über die Schaltfläche "Hinzufügen" ein Start- und Enddatum angegeben werden.

Tormanager		Das medizinische Fachpersonal kann ein Instrument zur Verhaltensänderung aktivieren und deaktivieren, mit dem Patienten ihre persönlichen Ziele festlegen, Hindernisse definieren und Lösungen entwickeln können, um einen gesunden Lebensstil zu erreichen. Das medizinische Fachpersonal kann den Fortschritt der vom Patienten selbst definierten Ziele verfolgen.
Änderung des Pflegeplans		Der Pflegeplan kann an die Interventionen, Bedürfnisse und Wünsche des Patienten angepasst werden. Dies ist über das Onboarding-Tool oder über die Gesundheitsplattform via Schaltfläche "Erweitert" möglich. Anleitungen zur Änderung des Pflegeplans sind in den Tools klar dargestellt.
Beenden Sie die aktive Nachverfolgung.		When the active follow-up is finished (what falls under active follow-up is predetermined in the care plan), press 'Stop active follow-up'. This will redirect the patient to a passive long term follow-up if applicable (also predetermined in the care plan if long term follow-up is needed).
		Wenn seitens des medizinischen Fachpersonals oder des

	Stop treatment? Are you sure you want to stop the treatment? Stopping a treatment will mark the patient as being finished. Medical scores in the treatment will no longer be activated. Cancel Stop	Patienten keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind, kann der Patient auf den Status "Abgeschlossen" zurückgesetzt werden.
--	--	--

WELLNESS-MODUL

Das Wellness-Modul ist ein optionales, nicht-medizinisches Gerätemodul. Die angezeigten Daten sind daher nicht für klinische Entscheidungen vorgesehen.

Diese Daten geben einen Überblick über das allgemeine Wohlbefinden des Patienten.

Das Wellness-Modul ist standardmäßig ausgeblendet und muss aktiviert werden, um die Wellness-Daten des Patienten einzusehen.

AKTIVIERUNG DES WELLNESS-MODULS

Um das Wellness-Modul zu aktivieren, müssen Sie Ihre Profileinstellungen aufrufen und die Option aktivieren: Enable wellness data

The screenshot shows the 'Edit Laurens Baes' page in the moveUP interface. The top navigation bar includes 'moveUP', 'Patients', 'Onboarding', 'Config', 'Admin', and a user profile for 'Laurens'. The main content area is titled 'Edit Laurens Baes' and contains two columns of form fields. The left column includes fields for First name (Laurens), Surname (Baes), Username (laurens@moveup.care), Email (laurens@moveup.care), Telephone number (+32496123456), Social security number, and a dropdown for Residence. The right column includes fields for Address (Oktrooi plein 1), City (Gent), Postal code (9000), Country (Belgium), Title, Image, and Language (English). At the bottom, there are two sections: 'Authentication' with a toggle for 'Two factor authentication' (currently off) and 'Wellness module' with a toggle for 'Enable wellness module' (currently on). At the very bottom, there are three buttons: 'Save', 'Set new password', and 'Manage consent/contracts'.

Nach der Aktivierung erscheint ein obligatorisches Bestätigungsfenster. Darin werden Sie darüber informiert, dass die Daten des Wellness-Moduls nicht zur Unterstützung klinischer Entscheidungen verwendet werden dürfen.

Platform notice

Wellness module terms of use

Dear User,
You are about to activate the Wellness Module.

What is the Wellness Module?

The wellness module provides you with additional data about the general wellbeing and activity levels of your patients. The data in the Wellness Module can come from:

- imported data from general-purpose devices such as e.g. activity trackers
- manual entry by patients

This data does not come from medical devices. This means that neither the devices from which the data is imported, nor the manual entries by the patients have been verified or validated by moveUP, and therefore, it should not be used for clinical decision-making.

What is the purpose of this data?

We provide the option to see wellness data to give you a broader idea about the general wellbeing of the patients and to give you the opportunity to discuss and give further guidance regarding wellbeing.

This module is an optional module and is not linked to the medical data presented in the "Medical data" tab of the dashboard.

The data in the wellness module is not intended to be used for clinical decisions.

How to recognize the wellness data?

Wellness data is displayed in a separate tab in the dashboard or in a separate report.

Whenever wellness data is displayed in a column, together with other data it has a grey background to visually indicate that this does not concern medical data. Furthermore, it has a warning sign next to it.

Enabling/Disabling the Wellness Module

At any time, a user can enable/disable the Wellness Module in the user settings.

Acknowledgement

By clicking on the button below, you acknowledge that you have read and understood that the Wellness Module is an optional module that provides you with additional data regarding the general wellbeing of the patient. This data is not validated by moveUP and is not intended for clinical decision making.

☐ I agree

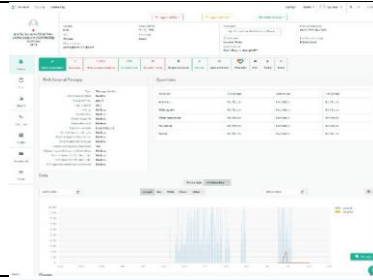
Sign

Cancel

Nach der Bestätigung erhalten Sie Zugriff auf die Wellnessdaten. Diese Aktivierung ermöglicht es Ihnen, die Wellnessdaten einzusehen und die Wellnessberichte zu exportieren.

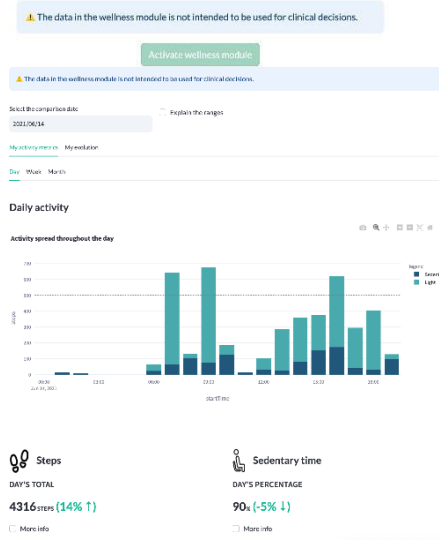
ÜBERSICHT DES WELLNESS-MODULS

Überblick über das Wellness-Modul



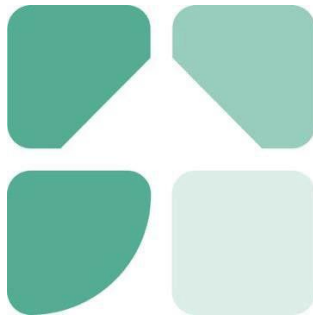
In diesem Tab können Sie die Schrittdaten des Patienten einsehen und deren Entwicklung verfolgen.

Wellnessbericht



Die Wellnessberichte können Sie bei Bedarf einsehen.

Gebruikershandleiding – Zorgplatform & Patiëntenapp voor HCP's



Krijg inzicht in de revalidatie van uw patiënten en zorg voor een goede opvolging

Versie app: 2.2.0 and later

Versie Handleiding: 17.2

Release Datum van deze handleiding: 27/01/2026

Link naar de e-learning: <https://moveup.talentlms.com/index>

Inhoudsopgave

PRODUCTBESCHRIJVING.....	3
<i>Beoogd gebruik</i>	<i>3</i>
<i>moveUP COMPANION = monitoring en informatie, geen actieve opvolging</i>	<i>3</i>
<i>moveUP COACH = actieve opvolging door het zorgteam</i>	<i>3</i>
<i>moveUP THERAPY = actieve opvolging door het zorgteam, met datagedreven gevalideerd zorgprotocol.....</i>	<i>3</i>
<i>Beoogde gebruikers</i>	<i>4</i>
<i>Doelgroep / indicatie voor gebruik</i>	<i>5</i>
<i>Claims</i>	<i>5</i>
<i>moveUP-app en apparaten</i>	<i>6</i>
<i>Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.....</i>	<i>7</i>
<i>Contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen</i>	<i>7</i>
<i>Melding van ernstige incidenten.....</i>	<i>7</i>
<i>Menselijk lichaamscontact</i>	<i>8</i>
<i>Accessoires/producten die in combinatie worden gebruikt</i>	<i>8</i>
<i>Levensduur van het apparaat.....</i>	<i>8</i>
<i>Bedrijfsgegevens</i>	<i>9</i>
PATIËNTEN-APP.....	10
MEDISCHE MODULE.....	10
<i>ACCOUNT AANMAKEN VOOR HET GEZONDHEIDSZORGPLATFORM</i>	<i>10</i>
<i>ONBOARDING VAN PATIËNTEN</i>	<i>10</i>
<i>ALGEMENE FUNCTIES VAN HET GEZONDHEIDSZORGPLATFORM</i>	<i>12</i>
<i>FUNCTIES VAN HET ZORGPLAN VAN HET GEZONDHEIDSZORGPLATFORM</i>	<i>20</i>
WELLNESS-MODULE.....	24
<i>ACTIVERING WELLNESSMODULE</i>	<i>24</i>
<i>OVERZICHT WELLNESSMODULE</i>	<i>26</i>
<i>OVERZICHT WELLNESSMODULE</i>	<i>26</i>

PRODUCTBESCHRIJVING

Lees zorgvuldig alle informatie en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Zorg ervoor dat u het gebruik, de schermen en de beperkingen van de moveUP-app begrijpt voordat u de service gebruikt. Als je vragen hebt, neem dan contact op met moveUP.

Om veiligheidsredenen raadt moveUP de gebruiker aan om de handleiding van de toestellen die in combinatie met de moveUP-app worden gebruikt, zorgvuldig te lezen en te begrijpen.

Tijdens het volledige gebruik van de dienst zal de nodige technische bijstand en therapeutische bijstand worden verleend. In geval van een defect of probleem met de App, kunt u contact opnemen met het moveUP-team via de berichtfunctionaliteit van de App, telefonisch of per e-mail.

Beoogd gebruik

Voor zorgverleners

Voor zorgverleners biedt moveUP een efficiënt klinisch beheer van pathologieën en behandelingen. Met behulp van moveUP krijgt de HCP/het zorgteam waardevolle inzichten in de status van de patiënt en zijn evolutie.

Voor patiënten

Voor patiënten biedt moveUP gepersonaliseerde informatie en instructies om hen te helpen hun symptomen te beheersen en vooruitgang te boeken bij hun revalidatie. De intensiteit van de follow-up wordt aangepast op basis van de behoeften van de patiënt en het tijdstip in het patiëntentraject:

moveUP COMPANION = monitoring en informatie, geen actieve opvolging

moveUP companion biedt gerichte informatie en evolutierapporten aan patiënten. Hun zorgteam houdt rekening met de evolutierapporten bij hun verdere herstel.

moveUP COACH = actieve opvolging door het zorgteam

moveUP coach biedt gerichte informatie en evolutierapporten aan patiënten. Hun zorgteam is actiever betrokken en houdt rekening met de evolutierapporten en kan via het digitale platform advies en oefeningen suggesties geven.

moveUP THERAPY = actieve opvolging door het zorgteam, met datagedreven gevalideerd zorgprotocol

moveUP therapy biedt een datagedreven gevalideerd zorgprotocol met bepaalde categorieën en niveaus van oefeningen en activiteiten, specifiek gericht op de individuele patiënt. Hun zorgteam kan het datagestuurd gevalideerde protocol handmatig aanpassen

wanneer dat nodig is. Patiënten kunnen volledig revalideren met moveUP zonder hun thuisomgeving te verlaten.

Optionele functionaliteit die kan worden ingeschakeld: interoperabiliteit met klasse IIa Continues Passieve Motions (CPM) medisch hulpmiddel.

Voor knie- en heuppatiënten die een klasse IIa CPM medisch hulpmiddel gebruiken, kan moveUP samenwerken met de klasse IIa CPM-software. moveUP fungeert als een facilitator om eenvoudig een aangewezen CPM-oefenprotocol gekozen door een arts aan een patiënt toe te wijzen en om de uitgevoerde CPM-oefeningen in het medische dashboard weer te geven.

Beoogde gebruikers

moveUP is bedoeld voor gebruik door patiënten en zorgverleners.

Patiënt

De belangrijkste gebruiker van de mobiele app en patiëntenwebsite is de patiënt. Patiëntgebruikers moeten alert en mentaal competent zijn en in staat om een tablet/smartphone en activity tracker te bedienen.

Inclusie:

- Leeftijd:
 - minimum: 18 jaar
 - maximum: geen limiet
- Gewicht: NVT
- Gezondheid en conditie: in staat om basisactiviteiten van het dagelijks leven uit te voeren
- Taal: het begrijpen van een van de beschikbare talen van de app (Nederlands, Frans, Duits, Engels)

Exclusie:

- Patiënten die mentaal incompetent zijn of moeite hebben om uit te drukken wat ze voelen (bijvoorbeeld mensen met een psychische aandoening, mensen die in bejaardenzorgcentra verblijven, ...) worden uitgesloten.
- Patiënten die niet in staat zijn om een tablet/smartphone en activity tracker te bedienen.
- Patiënten die een van de beschikbare talen van de app niet kunnen begrijpen (Nederlands, Frans, Duits, Engels)

Zorgverlener

De belangrijkste gebruiker van de medische webinterface is een zorgverlener (groep) of klinisch onderzoeker (groep), het zorgteam genoemd. Het zorgteam is in staat om een webinterface te bedienen via een webbrowser op pc/tablet/smartphone. De zorgverlener moet een van de beschikbare talen van de webinterface begrijpen (tegenwoordig alleen beschikbaar in het Engels).

Doelgroep / indicatie voor gebruik

moveUP companion & coach wordt gebruikt door musculoskeletale, oncologische, respiratoire, gastro-intestinale, cardiovasculaire en neurologische patiënten, zoals patiënten:

- die een gastric bypass of gastric sleeve operatie hebben ondergaan of van plan zijn te ondergaan
- die een beroerte, multipel myeloom, covid, familiale hypercholesterolemie hebben of hebben gehad
- die rug- of gewrichtsproblemen of operaties hebben of hebben gehad

moveUP-therapie wordt gebruikt door knie- en heupartroplastiepatiënten.

Claims

moveUP begeleider/coach/therapie

De intensiteit van de follow-up wordt aangepast aan de behoeften van de patiënt via de moveUP Symptoom & Kwaliteit van Leven monitoring tool.

moveUP verbetert de klinische behandeling van patiënten, omdat vroege detectie en behandeling van complicaties mogelijk is via de symptoom & Kwaliteit van Leven monitoring tool.

Efficiëntere klinische behandeling, zoals het aantal consulten, kan worden verminderd.

Versterkt therapietrouw.

De juiste informatie wordt op het juiste moment verstrekt.

moveUP therapie

Met behulp van moveUP therapie kunnen patiënten met een knie- of heupprothese volledig revalideren via het in-app zorgteam zonder hun thuisomgeving te verlaten. die een gastric bypass of gastric sleeve operatie hebben ondergaan of van plan zijn te ondergaan

die een beroerte, multipel myeloom, covid, familiale hypercholesterolemie hebben of hebben gehad

die rug- of gewrichtsproblemen of operaties hebben of hebben gehad

moveUP-therapie wordt gebruikt door knie- en heupartroplastiekpatiënten.

moveUP-app en apparaten

De moveUP-app draait op:

- iPhones/iPads (iOS 11.0 of nieuwer)
- Android-systemen (Android 7.0.0 en nieuwer).

Als de patiënt niet over een compatibele tablet/smartphone beschikt, kan moveUP deze apparaten aan de patiënt leasen.

- Lenovo Tab 3 - Android 6.0.1 of hoger
- Huawei MediaPad T3 - Android 7.0.0 of hoger

De moveUP-applicatie heeft een internetverbinding nodig tijdens gebruik.

Als de patiënt geen compatibele tablet/smartphone heeft, kan moveUP deze apparaten aan de patiënt leasen.

- Garmin Vivofit 3 en Vivofit 4
- Nokia Withings Go
- Alle apparaten die compatibel zijn met HealthKit (IOS)
- Alle apparaten die compatibel zijn met Google Fit (IOS en Android)

De moveUP-applicatie is compatibel met de volgende browsers:

- Chrome
- Safari
- Edge
- Firefox

We raden u ten eerste aan de nieuwste versie van de browser te gebruiken.

Voor de veiligheid van uw gegevens kunt u het beste tweefactorauthenticatie (2FA) inschakelen en een veilig netwerk gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

	• moveUP is geen noodhulpmiddel. Neem in geval van nood contact op met uw arts of bel 112.
	• moveUP is niet bedoeld om vitale parameters van kritieke ziekten te meten/behandelen.
	• moveUP is niet bedoeld om vitale parameters van kritieke ziekten te monitoren/behandelen.
	• moveUP companion is geen vervanging voor een behandeling die u moet volgen, maar wordt gebruikt als een aanvulling. Patiënten moeten zich ervan bewust zijn dat als vragenlijsten niet vaak worden ingevuld of niet betrouwbaar worden ingevuld, het zorgteam meer moeite heeft om hun gezondheidssituatie en evolutie te kennen.
	• De moveUP App biedt gepersonaliseerde gezondheidszorg op basis van het profiel van de patiënt en kan daarom niet worden gedeeld, geleend of verhandeld tussen gebruikers. De informatie en adviezen van de moveUP-applicatie zijn niet van toepassing op een andere patiënt dan degene wiens profiel in de applicatie is opgeslagen. De patiënt mag geen toegang tot de moveUP App verlenen aan derden. Elke andere persoon kan, zelfs per ongeluk, verkeerde informatie verzenden of het profiel van de patiënt wijzigen, met als gevolg dat het moveUP-geleide advies niet langer overeenkomt met de behoeften van de patiënt. • Bij software is er altijd een restrisico voor bugs. Heb je het gevoel dat er iets mis is of krijg je geen reactie in de app, neem dan contact met ons op via support@moveup.care of bel 0800 88 008.

De moveUP-gebruiksaanwijzingen worden alleen in elektronische vorm verstrekt. Als u een volledige gedrukte versie nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@moveup.care. Deze mail is 24/7 beschikbaar.

Contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen

Er zijn geen contra-indicaties of bekende bijwerkingen.

Melding van ernstige incidenten

Onder een ernstig incident wordt verstaan: elk incident dat direct of indirect heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot een van de volgende situaties:

- het overlijden van een patiënt, gebruiker of een andere persoon;
- de tijdelijke of permanente ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon die heeft geleid tot een van de volgende situaties:
 - o levensbedreigende ziekte of letsel,
 - o blijvende aantasting van een lichaamsstructuur of een lichaamsfunctie, ziekenhuisopname
 - o verlenging van de ziekenhuisopname van de patiënt, medische of chirurgische ingreep ter voorkoming van levensbedreigende ziekte of letsel
 - o blijvende aantasting van een lichaamsstructuur of een lichaamsfunctie,
 - o chronische ziekte,
- een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid;

If you detect any of these cases please send an email to info@moveUP.care and your competent authority:

- Nederland: meldpunt@igj.nl
- België: meddev@fagg.be
- Frankrijk: dedim.ugsv@ansm.sante.fr
- Duitsland: zlg@zlg.nrw.de

Menselijk lichaamscontact

Er is geen sprake van menselijk lichaamscontact met de patiënt of gebruiker, vanwege de aard van het product (software).

Accessoires/producten die in combinatie worden gebruikt

Er zijn geen accessoires.

Als de patiënt geen compatibele tablet/smartphone of activity tracker heeft, kan moveUP deze apparaten aan de patiënt leasen. De geleasede apparaten zijn apparaten met CE-markering die voldoen aan de compatibiliteitscriteria die zijn beschreven in de IFU voor de app.

De geleasede apparaten zijn zelf geen medische hulpmiddelen en geen accessoires van moveUP. De patiënt kan elke compatibele tablet of activiteitsmeter kiezen. Als de activiteitsmeter niet compatibel is met moveUP moet de patiënt de stappen handmatig invoeren op het toestel.

Levensduur van het apparaat

2 jaar, afhankelijk van de bereidheid van de gebruiker om de app te updaten. We hebben een melding gestuurd met de aanbeveling om de app te updaten, om ervoor te zorgen dat de app de prestaties en recent toegevoegde functies behoudt.

Bedrijfsgegevens

 moveUP NV/SA	Tel: +32 800 88 008	UDI: ++G166MOVEUP220MDDDM  (01)G166MOVEUP220MDDDM (10)+\$7220 (11)/16D20260127 (21)\$Y
Hoofdkantoor Brussel: Cantersteen 47, B-1000 Brussel, België Secundair adres: Kliniekstraat 27A 9050; Ghent, Belgium	Email: info@moveUP.care www.moveup.care	

Heeft u vragen over de app of de tablet? Neem dan contact op met moveUP via de volgende kanalen - in volgorde van prioriteit: Via het berichtensysteem van de app. Via e-mail naar support@moveup.care. Telefonisch tijdens kantooruren: +32 800 88 008.

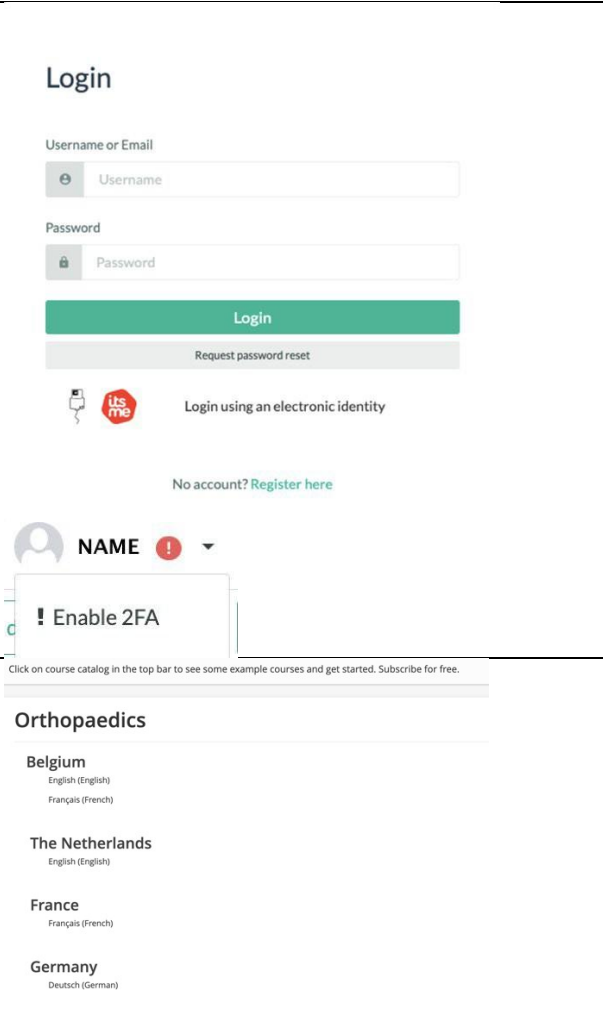
MoveUP garandeert de levering van de eIFU binnen zeven (7) dagen na aanvraag. Neem contact op met info@moveUP.care als u een gratis exemplaar wilt ontvangen.

PATIËNTEN-APP

Lees de gebruikershandleiding voor patiënten op www.moveup.care/appinfo om de functionaliteiten van de patiëntenapp te bekijken.

MEDISCHE MODULE

ACCOUNT AANMAKEN VOOR HET GEZONDHEIDSZORGPLATFORM

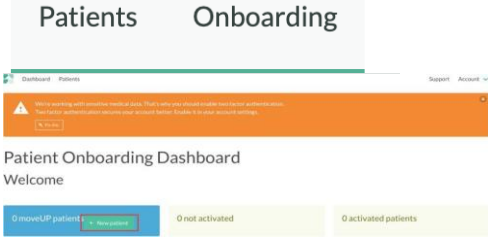
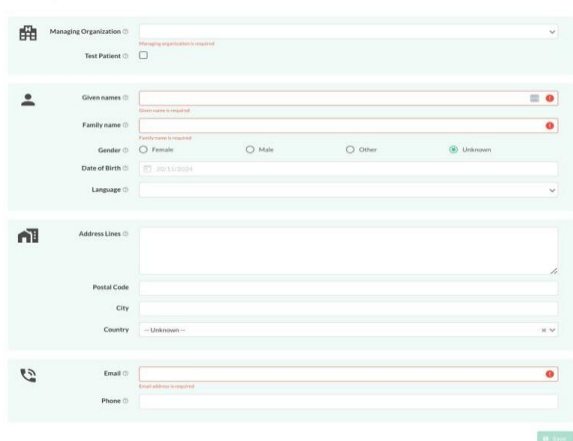
Stap 1: De zorgverlener registreert zich op het https://v1.medical.moveup.care/ zorgplatform	
Stap 2: moveUP neemt contact op met de HCP om zijn/haar profiel aan de juiste organisatie toe te voegen.	
Stap 3: Beveiligingsmaatregelen: Het is belangrijk om 2FA in te schakelen, aangezien u toegang hebt tot gevoelige gezondheidsgegevens.	
E-learning: Voor zorgverleners die zorg verlenen via het zorgplatform, is het raadzaam om de e-learningcursussen te volgen voor de indicaties die vermeld staan op https://moveup.talentlms.com . We vragen zorgverleners zich in te schrijven voor de e-learningcursus in hun taal.	

ONBOARDING VAN PATIËNTEN

Onboarding is het proces waarbij een nieuwe patiënt wordt geregistreerd in het zorgplatform.

Een cruciaal onderdeel is het toevoegen van een zorgplan aan het profiel van de patiënt. Een zorgplan bepaalt wat voor de patiënt zichtbaar is in de applicatie, bijvoorbeeld: het type oefeningen, informatiemodules, berichtfunctionaliteit, enz. Een zorgplan bestaat meestal uit

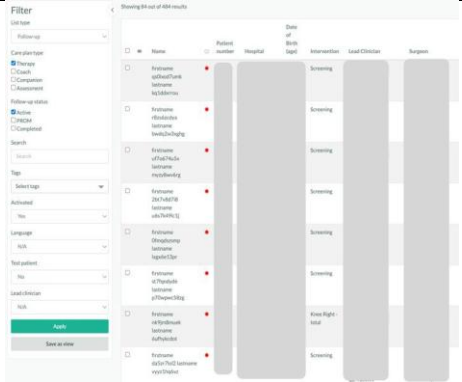
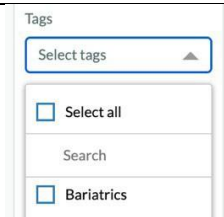
een interventie, een behandeling en (een) zorgteam(s).

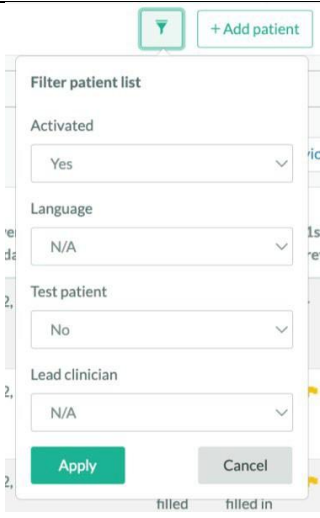
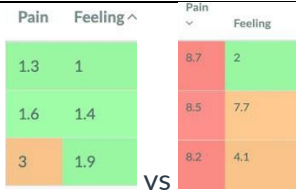
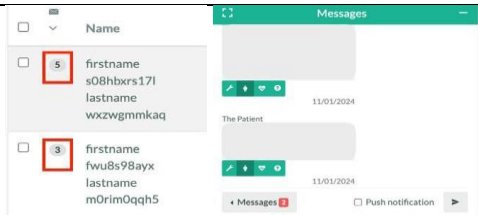
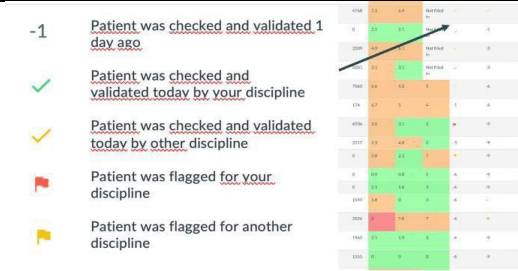
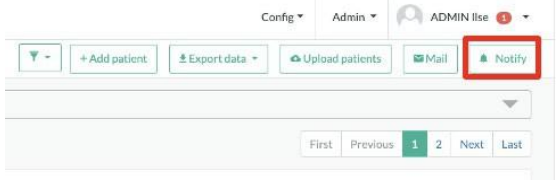
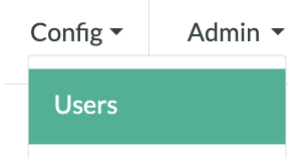
Patiënten onboarden		Het onboardingdashboard is eenvoudig te vinden in het zorgplatform in de linkerbovenhoek wanneer u op 'Onboarding' klikt. Het is ook toegankelijk via https://patient-onboarding-admin-moveup.care met behulp van de zorgverlenersgegevens van het zorgplatform. Klik op 'nieuwe patiënt' om een nieuwe patiënt te onboarden en de patiëntgegevens in te vullen. Nadat u de patiëntgegevens heeft ingevuld, drukt u op 'Opslaan'.
		Belangrijke opmerking: Er kan slechts één account aan een e-mailadres worden gekoppeld. Het is niet mogelijk om een e-mailadres dat al in onze database bekend is, opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld: hetzelfde e-mailadres opnieuw gebruiken voor het account van een partner of ouder.
		Selecteer vervolgens het zorgplan: klik op 'Start nieuw zorgplan'. Sleep een interventie en behandeling naar het zorgplan en vul de data, de naam van de behandelend arts en het zorgteam in. Versleep een studie indien van toepassing. Klik op 'Opslaan'.

	Email variables <pre> {{ firstname }} {{ lastname }} {{ code }} {{ registrationlink }} {{ organizationName }} {{ surgeonName }} {{ hosp_spec_par_start_NL }} {{ organizationName }} {{ bodyStructure }}</pre> ➤ Send selected e-mails Mails were sent	Er wordt een e-mailsjabloon weergegeven. De zorgverlener bekijkt de e-mailvariabelen en klikt op 'Geselecteerde e-mails verzenden'. Er wordt een uitnodigingsmail naar de patiënt gestuurd met alle benodigde informatie om de applicatie te installeren en te activeren.
--	--	---

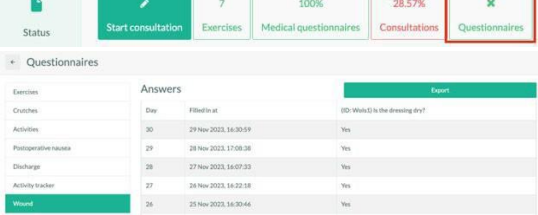
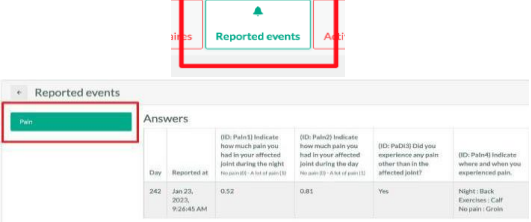
ALGEMENE FUNCTIES VAN HET GEZONDHEIDSZORGPLATFORM

Hieronder kan de zorgverlener alle functies van het zorgplatform raadplegen. De beschikbare functies worden weergegeven op basis van het abonnement van de zorgverlener. De omvang van de beschikbare patiëntinformatie is gebaseerd op het abonnement van de patiënt en zijn/haar nalevingspercentage.

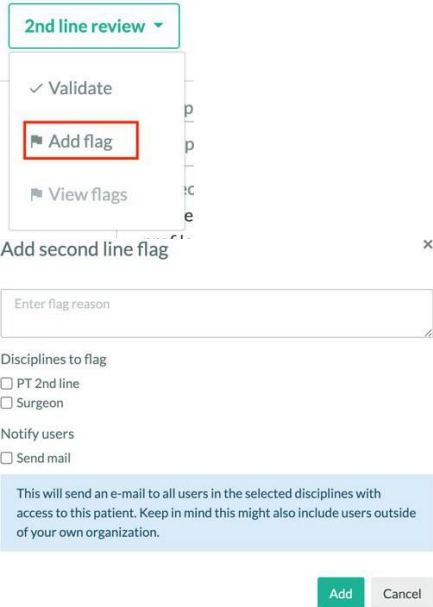
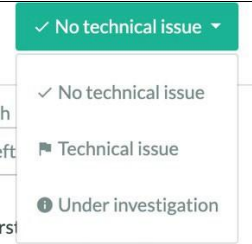
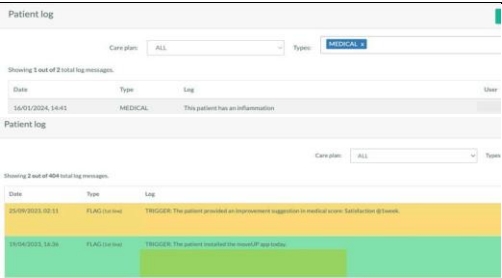
Patiëntenoverzicht		Het zorgplatform geeft een duidelijk overzicht van de patiënten van zorgverleners. In de bovenste balk worden de relevante categorieën weergegeven die de patiënt identificeren en relevante gezondheidsparameters, ongelezen berichten, de hoofdbehandelaar en de therapietrouw van de patiënt weergeven. Bij het openen van het zorgplatform wordt het patiëntenoverzicht standaard gesorteerd op interventiedatum.
Labels		Selecteer patiënten die gerelateerd zijn aan een specifieke pathologie met behulp van tags.

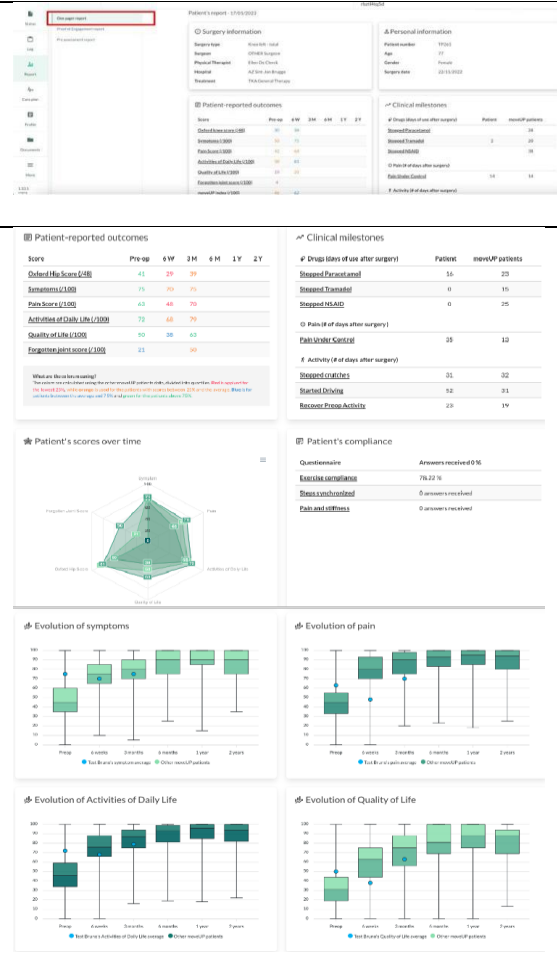
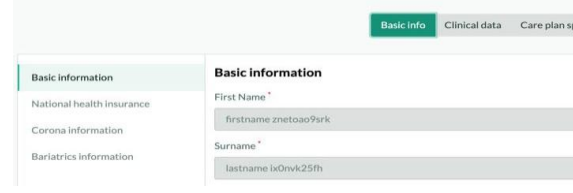
Filters		Selecteer patiënten op basis van taal, testpatiënt, hoofdbehandelaar of wel of niet geactiveerd. Geactiveerd kan twee dingen betekenen: ofwel heeft de patiënt zich via de app geregistreerd met een code, ofwel is hij/zij tijdens de onboarding direct als geactiveerd gemarkeerd. Niet-geactiveerd: patiënten die zich nog niet via de app hebben geregistreerd en niet direct als geactiveerd zijn gemarkeerd.
Kleurcodes		Met kleurcodes wordt aangegeven welke patiënten extra aandacht nodig hebben.
Berichten		Het aantal ongelezen berichten wordt in het overzicht weergegeven.
Beoordeling / Vlaggen		Met behulp van beoordelingsvlaggen is bekend wanneer de patiënt is gecontroleerd of wie de patiënt moet controleren. Zie Patiëntgegevens – Beoordeling / Vlaggen voor meer informatie.
Meldingen		Meldingen rechtstreeks naar het startscherm van het apparaat van de patiënt worden verzonden.
Gebruikersbeheer		Slechts een beperkt aantal zorgverleners binnen een organisatie heeft toestemming om gebruikers toe te voegen. Indien een zorgverlener deze toestemming heeft, kan hij/zij gebruikers toevoegen

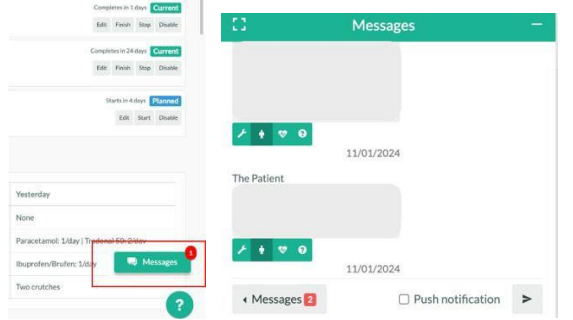
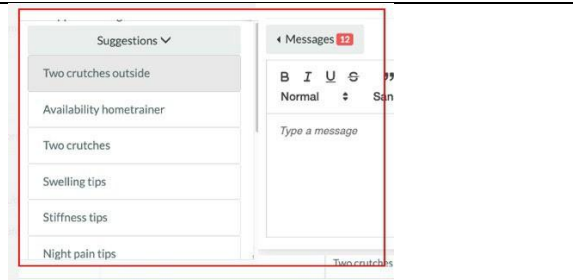
	Role ✓ Select role Physio moveUP Search New First name Surname Username ~ Email	door op de knop 'Nieuw' te klikken, de inloggegevens in te vullen en te selecteren. Selecteer de betreffende rol en klik op 'Registreren'. Er wordt een e-mail verzonden naar de nieuwe gebruiker om de stappen voor het aanmaken van een account te volgen, zie hierboven.
Patiëntgegevens - Overzicht	Firstname yb/Blank Sinf/ lastname (Blank Sinf) Control panel Phases THA General Therapy Questions	In het overzicht met patiëntgegevens zijn alle relevante (gezondheids)gegevens van de individuele patiënt op te vragen. Met de knoppen 'vorige' en 'volgende patiënt' kan de zorgverlener eenvoudig naar een andere patiënt overschakelen. In de linkerbalk kan de zorgverlener navigeren tussen status, logboek, zorgplan, profiel, documenten en meer.
Patiëntgegevens - Status	Firstname Sinf/Blank Sinf/ lastname (Blank Sinf) Gender Female Date of birth Age 76 years Language Dutch Status TKA General Therapy Questions Compliance OK for today or yesterday Non compliant > 2 days Non compliant > 7 days	De gerapporteerde gezondheidsgegevens zijn opvraagbaar in het gedeelte 'Status'. Van daaruit kunt u navigeren naar de resultaten van terugkerende en medische vragenlijsten, oefeningen en nog veel meer. Een GROENE, GELE of RODE statusstip geeft aan in hoeverre de patiënt zich aan het zorgplan houdt. Als de patiënt bijvoorbeeld alle voorgestelde terugkerende en medische vragenlijsten heeft ingevuld en de voorgestelde oefeningen heeft gedaan, resulteert dit in een GROENE statusstip.

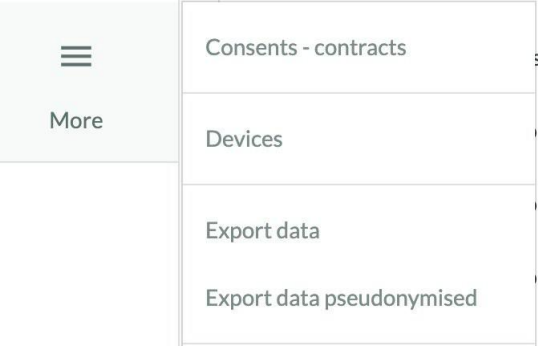
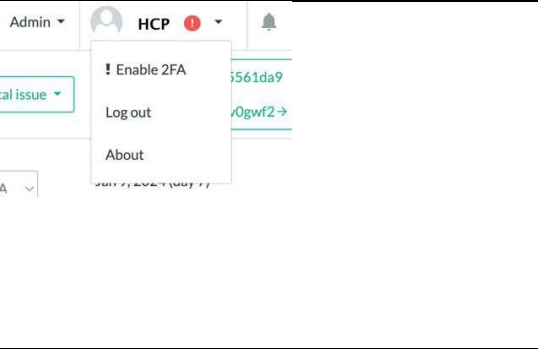
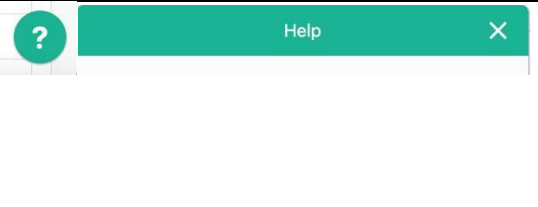
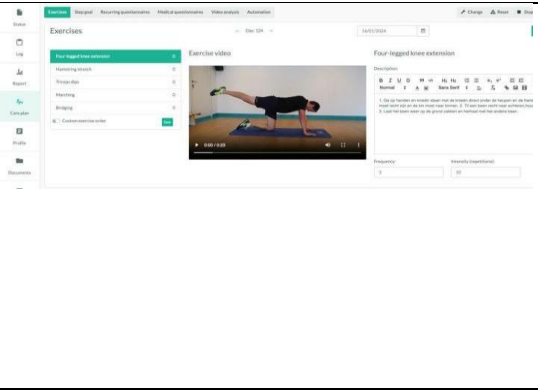
Patiëntgegevens – Medische vragenlijsten		Via de knop 'medische vragenlijst' wordt getoond: ✓ Welke medische vragenlijsten zijn actief voor een patiënt? ✓ Hoeveel hiervan zijn al dan niet ingevuld? ✓ Wat de gerapporteerde resultaten zijn van de afzonderlijke vragen in de medische vragenlijst. Wat de subscores en totaalscores zijn, zodat u snel kunt zien hoe het met de patiënt gaat.
Patiëntgegevens – Terugkerende vragenlijsten		Met deze door de patiënt gerapporteerde antwoorden is het mogelijk om de voortgang van belangrijke gezondheidsparameters frequent te volgen.
Patiëntgegevens- Gemelde gebeurtenissen		De gemelde gebeurtenissen zijn per gebeurtenis gecategoriseerd. Voor elke gemelde gebeurtenis kunt u het volgende bekijken: (1) De datum waarop de gebeurtenis is gemeld (+ dag in het zorgplan) (2) De antwoorden op alle vragen die aan de patiënt zijn gesteld.
Patiëntgegevens- Beoordeling / Vlaggen		De beoordeling van de eerste lijn is voor de zorgverlener die niet de hoofddarts is (bijv. een fysiotherapeut), de beoordeling van de tweede lijn is voor de hoofddarts (bijv. een chirurg)

	1st line review ▾ ✓ Validate Add flag View flags	Klik op Valideren wanneer een patiënt is gemonitord. Monitoring kan het volgende betekenen: ✓ Vragen beantwoord – Advies gegeven ✓ Oefeningen aangepast of gecontroleerd ✓ Stappendoel aangepast of gecontroleerd ✓ Dagelijkse parameters gecontroleerd: pijn, zwelling, activiteit,... ✓ Postoperatief protocol gecontroleerd: gebruik van krukken/rollator, medicatie,... Hetzelfde principe geldt voor tweedelijnsbeoordeling.
	1st line review ▾ ✓ Validate Add flag View flags Add first line flag Enter flag reason Disciplines to flag ☐ Administrative / Other ☐ PT Notify users ☐ Send mail This will send an e-mail to all users in the selected disciplines with access to this patient. Keep in mind this might also include users outside of your own organization. Add Cancel	Markeer iemand vanaf de eerste regel! ✓ Patiënt moet worden gecontroleerd door iemand uit de eerste lijn (bijv. een fysiotherapeut) ✓ Geef een reden voor de markering op ✓ Selecteer de discipline die u wilt markeren ✓ Optioneel: voeg een e-mailmelding toe om te

		markeren. De gemarkeerde discipline ontvangt een e-mail over de markering. Een vlag toevoegen zorgt voor een additionele rij in de patiëntenlog met de reden waarom de vlag werd toegevoegd. (zie verder).
		Voeg een vlag toe voor tweedelijns review ✓ De patiëntgegevens moeten bekeken worden door iemand in tweede lijn (bv een chirurg) ✓ Geef een reden voor het vlaggen ✓ Selecteer een discipline. Optioneel: voeg een e-mailmelding toe aan de vlag. De gemarkeerde discipline ontvangt een e-mail over die vlag.
		Meld een technisch probleem.
Patiëntgegevens - Logboek		Vlaggen en technische updates verschijnen automatisch in het logboek van de patiënt. In geval van vlaggen: ✓ GROEN: opgeloste vlag ✓ ROOD: Onopgeloste vlag voor discipline van ingelogde

		gebruiker (bijv. PT) ✓ GEEL: Onopgeloste vlag voor een andere discipline dan de ingelogde gebruiker (bijv. Chirurg) Andere belangrijke informatie kan handmatig aan het logboek worden toegevoegd. De relevante tags worden aan het logboek toegevoegd, zodat u eenvoudig in het logboek kunt zoeken.
Patiëntgegevens - Rapport	 The screenshot displays a comprehensive patient report. It includes sections for Patient-reported outcomes (with a table of scores over time), Clinical milestones (listing various events and dates), Patient's scores over time (a line graph), Evolution of symptoms (a bar chart), Evolution of pain (a bar chart), Evolution of Activities of Daily Life (a bar chart), and Evolution of Quality of Life (a bar chart). The interface is clean and professional, with clear headings and easy-to-read data visualizations.	Met behulp van dit rapport worden de belangrijkste mijlpalen en medische vragenlijsten van de patiënt gevisualiseerd, evenals de voortgang van de patiënt. Het rapport kan in pdf-formaat worden gedownload door op de knop 'Rapport downloaden' te klikken. Zo kan de zorgverlener het rapport naar de patiënt sturen. Het is ook mogelijk om de link naar het rapport rechtstreeks te delen via de knop 'Rapportlink kopiëren'.
Patiëntgegevens - Profiel	 The screenshot shows the patient profile section of the system. It features a tabbed interface with 'Basic info', 'Clinical data', and 'Care plans' tabs. The 'Basic info' tab is currently selected, displaying fields for First Name, Surname, National health insurance, Corona information, and Bariatrics information. The data is presented in a clear, structured manner, allowing for easy viewing and editing of patient details.	De zorgverlener kan alle relevante basis-, klinische, administratieve of zorgplanspecifieke gegevens in het patiëntprofiel bekijken, bewerken of toevoegen

Patiëntgegevens – Berichten		De berichtenpop-up (die vergroot kan worden) is standaard gesloten en het aantal nieuwe berichten is zichtbaar in de zwevende knop. Deze functionaliteit wordt gebruikt om patiënten advies te geven en hun vragen te beantwoorden. Het kan ook gebruikt worden om foto's op te vragen, bijvoorbeeld om de genezing, zwelling, roodheid, enz. te volgen.
		Wanneer u op 'berichten' klikt, wordt een reeks voorgeschreven persoonlijke berichten getoond, waaruit de zorgverlener een toepasselijk bericht voor de betreffende patiënt kan selecteren.
		Klik op het '1e regel-symbool' om de vraag als gelezen te markeren.
		Berichten die door een zorgverlener zijn ingediend, kunnen worden bewerkt of verwijderd. Wanneer u met de muis over een bericht beweegt, wordt een knop om het bericht te bewerken of te verwijderen zichtbaar.
Patiëntgegevens -- Documenten		Documenten kunnen worden geüpload in de sectie 'Documenten'. Chatbeelden en video-opnames worden hier automatisch verzameld, zodat deze materialen gemakkelijk toegankelijk zijn.

Patiëntgegevens - Meer		Bekijk welke documenten/contracten de patiënt heeft ondertekend. Bekijk op welk apparaat de patiënt de applicatie gebruikt en wanneer de applicatie voor het eerst en voor het laatst is bekeken. Het exporteren van gegevens is om veiligheidsredenen en ter bescherming van de gegevensintegriteit alleen mogelijk voor een beperkt aantal zorgverleners.
Uitloggen		Rechtsboven kan de zorgverlener uitloggen. Houd er rekening mee dat de automatische uitlogtijd 14 dagen bedraagt. Daarom is het raadzaam om vaker uit te loggen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Steun		Voor vragen kunt u contact opnemen via support@moveup.care of de '?'-knop op het platform gebruiken.
Zorgplanbeheer		Bij het beheer van het zorgplan kan er genavigeerd worden tussen meerdere functies die van toepassing zijn op de indicatie van de patiënt, zoals oefeningen, stappenplan, terugkerende vragenlijsten, videoanalyse, automatisering, etc. Voor meer informatie zie verderop.

FUNCTIES VAN HET ZORGPLAN VAN HET GEZONDHEIDSZORGPLATFORM

Het is mogelijk om zorg te verlenen via het zorgplatform. Met de onderstaande functies kan de zorgverlener het standaardbehandelplan van zijn/haar individuele patiënt aanpassen.

Alleen de functies die van toepassing zijn op het zorgplan worden weergegeven.

Oefenbeheer

De oefenmanagementmodule omvat de volgende aanpassingsmogelijkheden:

- ✓ Pas de beschrijving, frequentie en intensiteit van de oefeningen van de dag aan.
- ✓ Pas de dagelijkse boodschap aan.
- ✓ Pas het trainingsschema aan:
 - Blauwe vinkjes geven actieve oefeningen aan, met de frequentie en intensiteit van deze actieve oefeningen.
 - Plan oefeningen over een langere periode.

Breid het standaard oefenschema uit met een reeks oefeningen die niet tot de oefeningen behoren die in het zorgplan zijn vastgelegd

Terugkerende vragenlijst

Terugkerende vragenlijsten kunnen worden verwijderd, opnieuw worden geordend of er kan een nieuwe terugkerende vragenlijst worden toegevoegd. De standaardlijst met terugkerende vragenlijsten, inclusief start- en einddatum, frequentie en herinneringen, wordt vooraf bepaald in het zorgplan.

Terugkerende vragenlijst

Medical scores scheme

Name	Start day	End day	Preview	Remove
HIF PROM collection month 6	170	210	Preview	Remove
HIF PROM collection Year 1	240	300	Preview	Remove
Discharge Questionnaire HIF	0	15	Preview	Remove

Add medical questionnaire to care plan

Medical score: Select a medical score

Activation type: Day in treatment

Start Date: 0 End Date: 0

Save Cancel

Medische vragenlijsten kunnen ook worden verwijderd of toegevoegd aan het standaardschema. De standaardlijst met medische vragenlijsten, inclusief de begin- en einddatum, wordt vooraf bepaald in het zorgplan.

Videoanalyse

Video analysis

Analysis enabled for this patient

Results NOT shown to this patient

Add request

Jan 12, 2024

Gait analysis

not recorded

Video requests

Name	Start day	End day	Remove	Message
Gait analysis	-7	-1	Remove	
Gait analysis	21	30	Remove	
Gait analysis	40	45	Remove	

Add video request to personalized care plan

Video request: Select a video type

Start date: 0 End date: 0

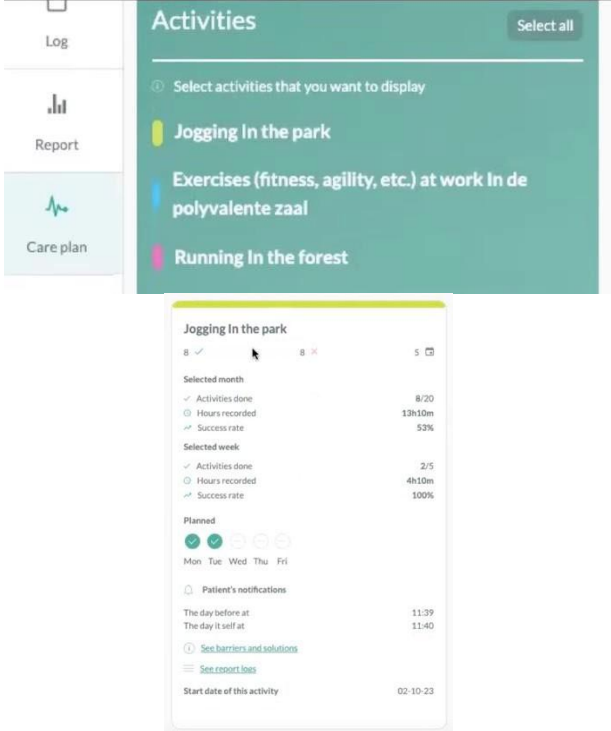
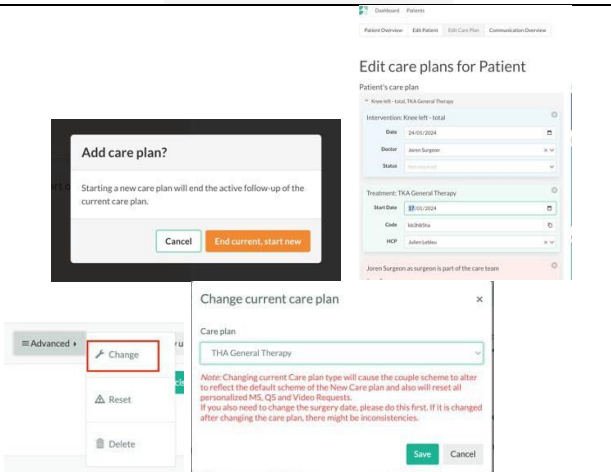
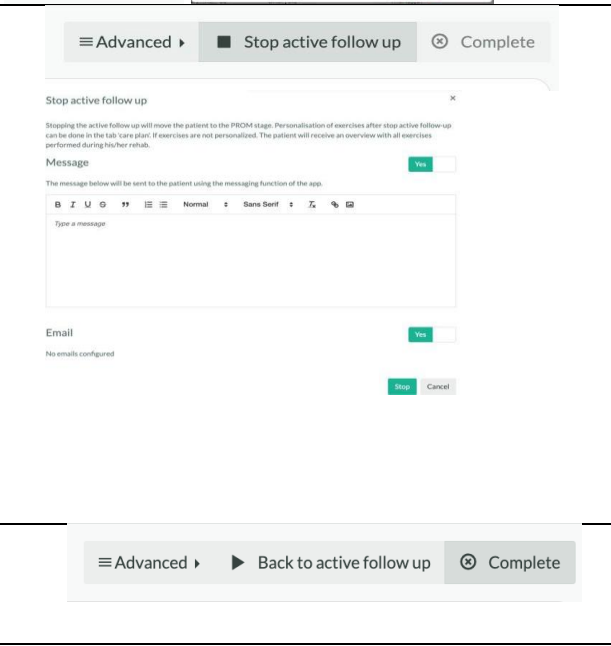
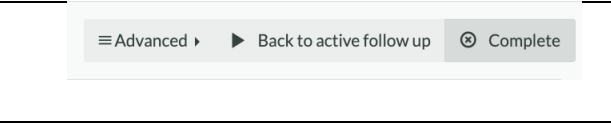
Save Cancel

Request the patient to record a video for analysis

Video type: Select a Video type

Save Cancel

Met behulp van videoverzoeken is het mogelijk om objectievere informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld over de loopanalyse of bewegingsuitslag van een geopereerd gewricht. De standaardlijst met videoverzoeken wordt vooraf bepaald in het zorgplan. Een videoverzoek kan direct worden toegevoegd via de knop 'Aanvraag toevoegen' of een videoverzoek kan voor een langere periode worden ingepland via de knop 'Toevoegen' en door een start- en einddatum toe te voegen om het videoverzoek actief te maken.

Doelmanager		De zorgverlener kan een tool voor gedragsverandering in- en uitschakelen waarmee patiënten hun persoonlijke doelen kunnen stellen, belemmeringen en oplossingen kunnen definiëren om een gezonde levensstijl te bereiken. De zorgverlener kan de voortgang zien ten aanzien van de doelen die de patiënt zelf heeft gedefinieerd.
Wijziging van zorgplan		Het zorgplan kan worden aangepast op basis van de interventies, behoeften en wensen van de patiënt. Dit kan via de onboardingtool of via het zorgplatform via de knop 'Geavanceerd'. Instructies voor het wijzigen van een zorgplan staan duidelijk aangegeven in de tools.
Stop actieve follow-up		Wanneer de actieve follow-up is afgerond (wat onder actieve follow-up valt, is vooraf bepaald in het zorgplan), klikt u op 'Stop actieve follow-up'. De patiënt wordt dan doorverwezen naar een passieve langetermijnfollow-up, indien van toepassing (ook vooraf bepaald in het zorgplan indien langdurige follow-up nodig is).
		Wanneer er geen verdere actie van de zorgverlener of de patiënt nodig is, kan de

	Stop treatment? Are you sure you want to stop the treatment? Stopping a treatment will mark the patient as being finished. Medical scores in the treatment will no longer be activated. Cancel Stop	patiënt worden doorgestuurd naar de status 'Voltooid'.
--	---	---

WELLNESS-MODULE

De wellnessmodule is een optionele module voor niet-medische hulpmiddelen en de getoonde gegevens zijn daarom niet bedoeld voor klinische besluitvorming.

Deze gegevens geven een overzicht van het algemene welzijn van de patiënt.

De wellnessmodule is standaard onscherp en moet worden geactiveerd om de wellnessgegevens van de patiënt te controleren.

ACTIVERING WELLNESSMODULE

Om de wellnessmodule te activeren moet u uw profielinstellingen invoeren en de optie activeren:

- Wellnessgegevens inschakelen

The screenshot shows the 'Edit Laurens Baes' form in the moveUP system. The form is divided into two columns. The left column contains fields for First name (Laurens), Surname (Baes), Username (laurens@moveup.care), Email (laurens@moveup.care), Telephone number (+32496123456), Social security number (Social security number), and Rizin nr (Rizin nr). The right column contains fields for Address (Oktrooi plein 1), City (Gent), Postal code (9000), Country (Belgium), Title (Title), Image (Image), Language (English), and Wellness module (Enable wellness module). At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Set new password', and 'Manage consent/contracts'.

Na activering verschijnt een pop-up met een verplichte bevestiging. Deze informeert u dat de gegevens uit de Wellness Module niet mogen worden gebruikt ter ondersteuning van klinische besluitvorming.

Platform notice

Wellness module terms of use

Dear User,
You are about to activate the Wellness Module.

What is the Wellness Module?

The wellness module provides you with additional data about the general wellbeing and activity levels of your patients. The data in the Wellness Module can come from:

- imported data from general-purpose devices such as e.g. activity trackers
- manual entry by patients

This data does not come from medical devices. This means that neither the devices from which the data is imported, nor the manual entries by the patients have been verified or validated by moveUP, and therefore, it should not be used for clinical decision-making.

What is the purpose of this data?

We provide the option to see wellness data to give you a broader idea about the general wellbeing of the patients and to give you the opportunity to discuss and give further guidance regarding wellbeing.

This module is an optional module and is not linked to the medical data presented in the "Medical data" tab of the dashboard.

The data in the wellness module is not intended to be used for clinical decisions.

How to recognize the wellness data?

Wellness data is displayed in a separate tab in the dashboard or in a separate report.

Whenever wellness data is displayed in a column, together with other data it has a grey background to visually indicate that this does not concern medical data. Furthermore, it has a warning sign next to it.

Enabling/Disabling the Wellness Module

At any time, a user can enable/disable the Wellness Module in the user settings.

Acknowledgement

By clicking on the button below, you acknowledge that you have read and understood that the Wellness Module is an optional module that provides you with additional data regarding the general wellbeing of the patient. This data is not validated by moveUP and is not intended for clinical decision making.

☐ I agree

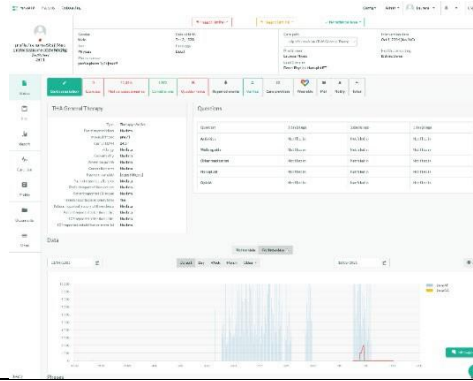
Sign

Cancel

Na bevestiging krijgt u toegang tot de wellness gegevens. Met deze activering kunt u de wellness gegevens bekijken en de wellness rapporten exporteren.

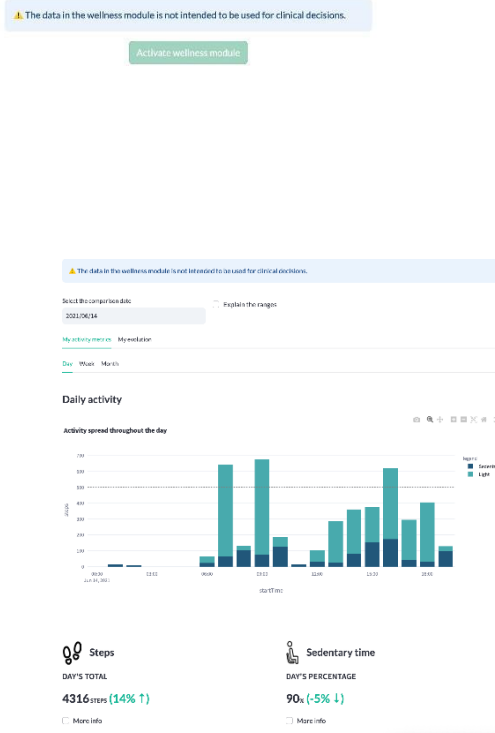
OVERZICHT WELLNESSMODULE

OVERZICHT WELLNESSMODULE



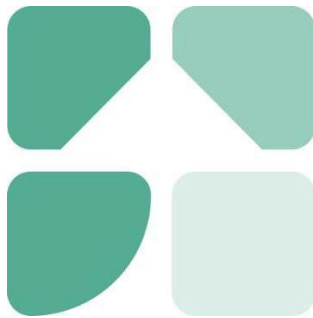
Op dit tabblad kunt u de stapgegevens van de patiënt bekijken en de ontwikkeling ervan volgen.

Welzijnsrapport



U kunt de welzijns rapporten bekijken wanneer u dat nodig heeft.

User manual for the Health Care Provider (HCP)



A personalized treatment, with more insight and involvement in the care pathway.

App version : 2.2.0 MDD and later

Manual version : 17.2

Data of release manual : 27/01/2026

Link to e-learning: <https://moveup.talentlms.com/index>

Table of Contents

PRODUCT DESCRIPTION.....	3
Instructions	3
Intended use.....	4
Intended users	4
Target population / indication for use	5
Claims	5
moveUP companion/coach/therapy	5
moveUP therapy	5
moveUP app & devices	6
Warnings and precautions	6
Contra-indications and potential side effects	7
Notification of serious incidents	7
Human body contact	7
Accessories/products used in combination	8
Device lifetime	8
Company details	8
PATIENT APP	9
MEDICAL MODULE	9
HEALTHCARE PLATFORM ACCOUNT CREATION.....	9
ONBOARDING OF PATIENTS	9
HEALTHCARE PLATFORM GENERAL FUNCTIONS	12
HEALTHCARE PLATFORM CARE PLAN FUNCTIONS	19
WELLNESS MODULE.....	22
WELLNESS MODULE ACTIVATION	22
WELLNESS MODULE OVERVIEW	23
Wellness module overview	24
Wellness report	24

PRODUCT DESCRIPTION

Instructions

	Read carefully this instruction for use. Make sure that you know how to use moveUP, but also understand the limitations of moveUP before you start using our service. If you do have any questions on the use, contact moveUP.
	In the final chapter of this document you find our contacts, which you can use during the use of our service, in case you would have technical problems with the application (moveUP dashboard or patient app) or when expertise is required about a care path.
	The Healthcare practitioner can't give access to third parties to access the moveUP dashboard. Every other person can, even by accident, send out wrong information or adapt the patient profile, with the result that the advice sent by moveUP no longer corresponds with the needs of the patient.
	In case the application is use while moveUP & b.clinic is not asked to do the follow-up of patients, the individual healthcare provider or the health care facility is responsible for the follow-up of the patient and the action that are carried out.
	In compliance with the medical device legislation, you are required to report any complaints towards the application, any alteration regarding characteristics/specifications of the application and incidents/complications potentially linked to the use of the application to support@moveup.care. The AFMPS can also be contacted in case of incident via https://www.famhp.be/en/human_use/health_products/medical_devices_accessories/materiovigilance/how_notify
	In compliance with the GDPR legislation, please report eventual data leaks linked to the use of moveUP. Please, read the entire privacy policy: https://www.moveup.care/legal/privacy-policy

Intended use

For healthcare providers, moveUP provides efficient clinical management of pathologies and treatments. With the use of moveUP, valuable insights are given to the HCP/care team of the status of the patient and its evolution.

For patients, moveUP provides personalised information and instructions to help them managing their symptoms and progress in their rehabilitation. The intensity of follow-up is adapted based on patients' needs and timepoint in the patient pathway:

moveUP companion = monitoring and information, no active follow-up

moveUP companion offers targeted information and evolution reports to patients. Their care team takes the evolution reports into account in their further recovery when appropriate.

moveUP coach = active follow-up by healthcare team

moveUP coach offers targeted information and evolution reports to patients. Their care team is more actively involved and takes the evolution reports into account and can provide advice and exercise suggestions through the digital platform.

moveUP therapy = active follow-up by healthcare team, with data driven validated care protocol

moveUP therapy offers a data-driven validated care protocol with certain category and level of exercises and activities, specifically targeted to the individual patient. Their care team can manually adapt the data driven validated protocol when needed. Patients can fully rehabilitation with moveUP without leaving their home environment.

* Optional functionality that can be enabled: interoperability with Class IIa continuous passive motion (CPM) medical device. For knee and hip patients who are using a Class IIa CPM medical device, moveUP can interoperate with the Class IIa CPM software. moveUP acts as a facilitator to easily assign a designated CPM exercise protocol chosen by a physician to a patient and to display the performed CPM exercises in the medical dashboard

Intended users

moveUP is intended to be used by patients and healthcare providers. The main user of the mobile app and patient website is the patient.

Inclusion:

- Age: minimum 18 years / maximum no limit
- Health & condition: capable of performing basic activities of daily living
- Language: understanding one of the available languages of the app (Dutch, French, German, English)

Exclusion:

- Patients who are mentally incompetent or having troubles to express what they are feeling (for instance, mentally diseased people, people staying in elderly care centres, ...) are excluded.
- Patients who are not capable of operating a tablet/smartphone and activity tracker.
- Patients who can't understand one of the available languages of the app (Dutch, French, German, English)

The main user of the medical web interface is a healthcare practitioner (group) or clinical researcher (group), named the care team. The care team is able to operate a web interface via web browser on PC/tablet/smartphone. The healthcare practitioner needs to understand one of the available languages of the web interface (today only available in English)

Target population / indication for use

moveUP companion & coach is used by Musculo-skeletal, oncologic, respiratory, gastro-intestinal, cardiovascular, and neurologic patients, such as patients:

- who underwent or planning a gastric bypass or gastric sleeve operation
- who have or had a stroke, multiple myeloma, covid, familial hypercholesterolemia
- who have or had back or joint problems or operations
- moveUP therapy is used by knee & hip arthroplasty patients.
- moveUP is used for rehabilitation but is possible to include a patient before an intervention to know the previous state of health and establish goals for the rehabilitation.

Claims

moveUP companion/coach/therapy

The intensity of follow-up is adapted based on the needs of the patient, via the moveUP Symptom & QoL monitoring tool.

moveUP enhances the clinical management of the patients, because early detection & management of complications is possible via the symptom & QoL monitoring tool

More efficient clinical management, such as the number of consultations, can be reduced

Enforces therapy compliance/adherence

The correct information is provided at the right time

moveUP therapy

With the use of moveUP therapy knee & hip arthroplasty patients can fully rehabilitate via the in-app care team without leaving their home environment

moveUP app & devices

The moveUP app runs on:

- iPhones/iPads (iOS 11.0 or newer)
- Android systems (Android 7.0.0 and newer).

If the patient has no compatible tablet/smartphone, moveUP can lease these devices to the patient.

- Garmin Vivofit 3 and Vivofit 4
- Nokia Withings Go
- All the devices compatible with HealthKit (IOS)
- All the devices compatible with Google Fit (IOS and Android)

The moveUP application needs an internet connection when in use.

The moveUP application is compatible with the following browsers:

- Chrome
- Safari
- Edge
- Firefox

We strongly recommend to use the latest version of the browser.

For your data safety please enable the 2-factor authentication(2FA) and use a safe network

Warnings and precautions

	• moveUP is not an emergency tool. In case of emergency please contact your doctor or call 112.
	• moveUP is not intended to monitor/treat vital parameters of critical diseases.
	• moveUP companion is not a replacement of any treatment you need to follow, but is used as an addition.
	• Patients need to be aware if questionnaires are not filled out on frequent basis or not filled out trustworthy, the care team has more difficulty to know their health situation & evolution. • The moveUP App offers personalized healthcare based on the patient's profile and therefore can not be shared, borrowed or traded between users. The information and advice of the moveUP application do not apply to a patient other than the one whose profile is stored in the application. The patient may not grant access to the moveUP App to third parties. Any

	other person can, even accidentally, send wrong information or change the profile of the patient, with the result that the moveUP-guided advice no longer corresponds to the needs of the patient • With software, there is always a residual risk for bugs. If you have the feeling something is wrong or you don't get a response in the app, please reach out to us via support@ or call 0800 88 008.
---	---

The moveUP IFU are only supplied in electronic format. If you need a full printed version please contact us at the e-mail address info@moveup.care. This mail is available 24/7.

Contra-indications and potential side effects

There are no contra-indications or known side effects

Notification of serious incidents

A serious incident means any incident that directly or indirectly led, might have led or might lead to any of the following:

- the death of a patient, user or another person,
- the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health that resulted in any of the following:
 - life-threatening illness or injury,
 - permanent impairment of a body structure or a body function, hospitalisation
 - prolongation of patient hospitalisation, medical or surgical intervention to prevent life-threatening illness or injury
 - permanent impairment to a body structure or a body function,
 - chronic disease,
- a serious public health threat;

If you detect any of these cases please send an email to info@moveUP.care and your competent authority:

- Netherlands: meldpunt@igj.nl
- Belgium: meddev@fagg.be
- France: dedim.ugsv@ansm.sante.fr
- Germany: zlg@zlg.nrw.de

Human body contact

No human body contact with the patient or user, due to the nature of the product (software).

Accessories/products used in combination

There are no accessories. If the patient has no compatible tablet/smartphone or activity tracker, moveUP can lease these devices to the patient. The leased devices are CE marked devices that meets the compatibility criteria outlined in the IFU for the app.

Device lifetime

2-years, depending on the willingness of the user to update the app. We sent out a notification with the recommendation to update the app, to make sure the app will keep the performance & recently included features.

Company details

 moveUP NV/SA	Tel: +32 800 88 008	UDI: ++G166MOVEUP220MDDDM  (01)G166MOVEUP220MDDDM (10)++\$7220 (11)/16D20260127 (21)\$Y
Head office Brussel: Cantersteen 47, B-1000 Brussels, Belgium Secondary office: Kliniekstraat 27A 9050; Ghent, Belgium	Email: info@moveUP.care www.moveup.care	

If you have any questions about the App or the tablet, you can contact moveUP via the following channels - in order of priority: Via the message system of the App. Via email to support@moveup.care - Via phone during office hours: +32 800 88 008

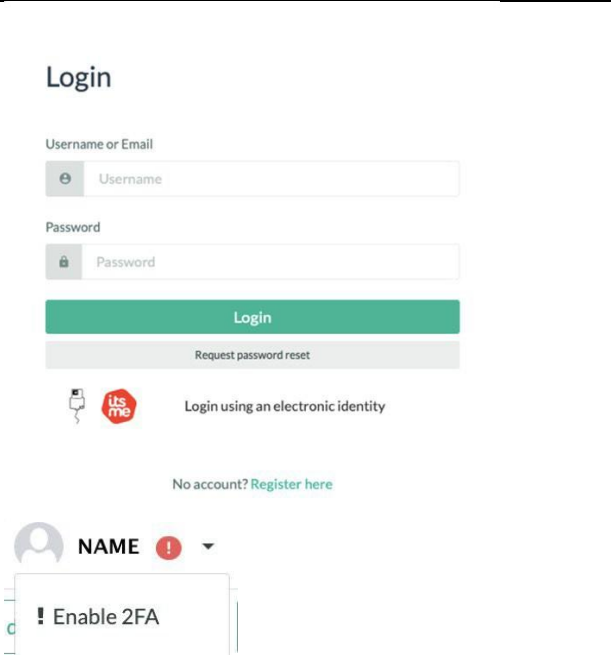
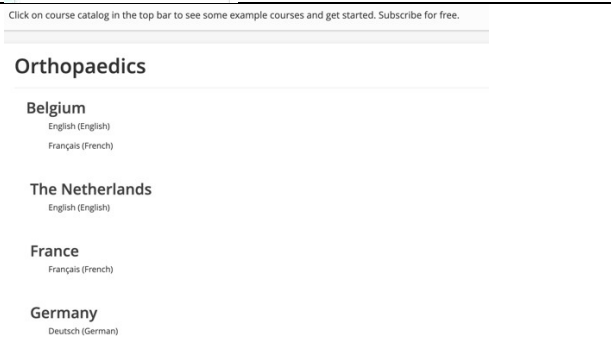
MoveUP guarantees delivery of the eIFU within seven (7) days upon request. Please contact info@moveUP.care if you want to obtain a free copy.

PATIENT APP

Please read the user manual for patients on www.moveup.care/appinfo to view the functionalities of the patient app.

MEDICAL MODULE

HEALTHCARE PLATFORM ACCOUNT CREATION

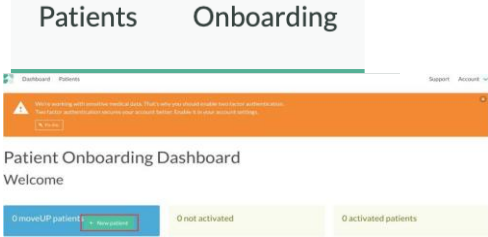
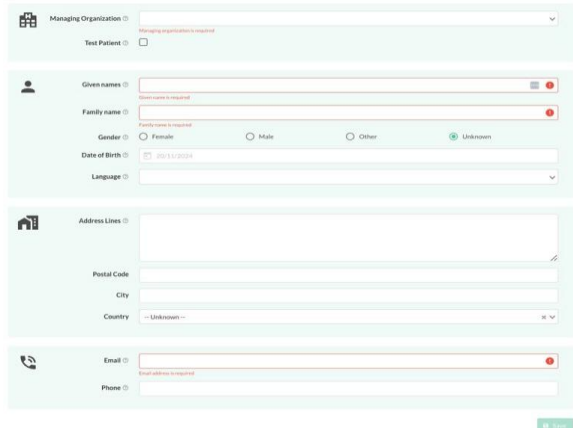
Step 1: The HCP registers on the healthcare platform on https://v1.medical.moveup.care/	
Step 2: moveUP will contact the HCP to add his/her profile to the correct organization.	
Step 3: Security measures: It is important to enable 2FA as you have access to sensitive health data.	
E-learning: For HCPs who will provide care through the use of the healthcare platform it is recommended to follow the e-learning courses for the indications listed on https://moveup.talentlms.com . We ask the HCPs to register for the e-learning course in their applicable language.	

ONBOARDING OF PATIENTS

Onboarding is the process of registering a new patient in the healthcare platform.

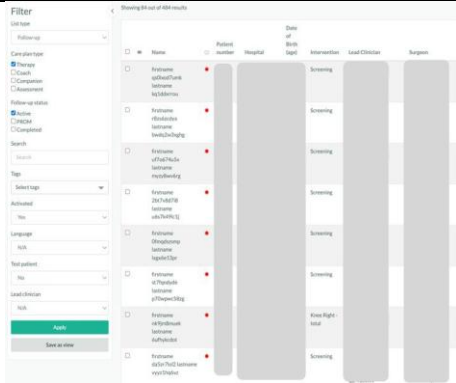
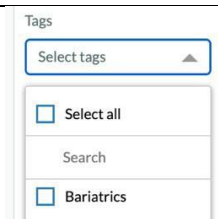
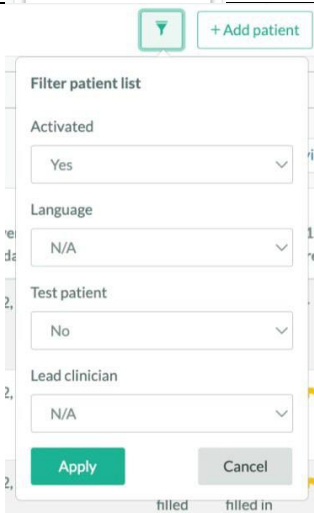
A crucial part is adding a care plan to the patient's profile. A care plan determines what will be visible for the patient in the application, e.g.: type of exercises, information modules, message functionality, etc. A care plan usually consists out of an intervention, a treatment and (a) care

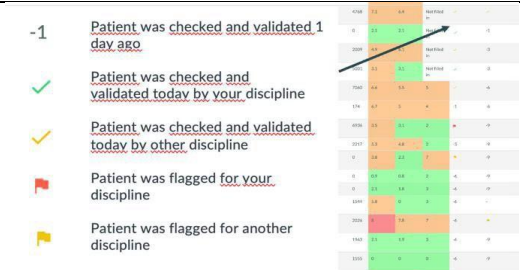
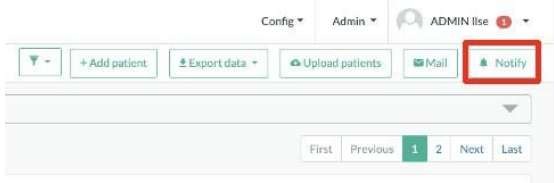
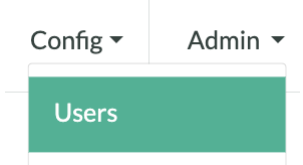
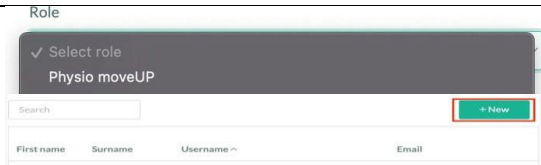
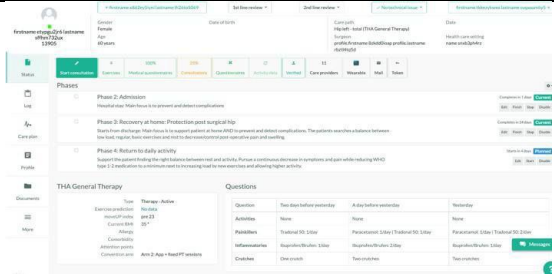
team(s).

Onboarding patients		The onboarding dashboard is easy retrievable in the health care platform in the upper left corner when clicking 'Onboarding'. It is also accessible through https://patient-onboarding-admin-moveup.care using the HCP credentials of the health care platform. Click on 'new patient' to onboard a new patient and fill out the patient information. After the patient information is filled out, press 'Save'.
	New patient 	Important note: Only one account can be coupled to an e-mail address. It is not possible to reuse an e-mail address that is already known within our database, e.g.: reusing the same e-mail address for the account of a partner or parent.
	Patient's care plans 	Next up, the care plan needs to be selected: press 'Start new care plan'. Drag and drop an intervention and treatment to the care plan and fill out the dates, name of the treating doctor and care team. Drag and drop a study if applicable. Click Save.
	Email variables <pre> {{ firstname }} {{ lastname }} {{ code }} {{ registrationlink }} {{ organizationName }} {{ surgeonName }} {{ hosp_spec_par_start_NL }} {{ organizationName }} {{ bodyStructure }} </pre> 	A mail template is shown. The HCP reviews the e-mail variables and clicks on 'send selected mails'. An invitation mail will be sent to the patient with all the needed information to install and activate the application.

HEALTHCARE PLATFORM GENERAL FUNCTIONS

Below the HCP can retrieve all functions of the healthcare platform. The applicable functions will be shown based on the HCPs subscription. The extent of the available patient information is based on the patients subscription & his/her compliancy rate.

Patient overview		The health care platform gives a clear overview of the HCPs patients. In the top bar the relevant categories are shown that identify the patient and show relevant health parameters, unread messages, the lead clinician and patient compliance. By default, when opening the healthcare platform, the patient overview is sorted based on intervention date.
Tags		Select patients related to a specific pathology by using tags.
Filters		Select patients based on language, test patient, lead clinician or being activated or not. Activated can mean 2 things: either the patient registered him/herself with a code through the app or he has been marked as immediately activated in onboarding. Non activated: patients who haven't registered themselves through the app yet and haven't been marked as immediately activated.
Color codes		Color codes indicate which patients need closer attention.

Messaging		The number of unread messages are displayed in the overview.
Review / Flags		With the use of review flags it is known when the patient was checked or who needs to check the patient. See more info in Patient details – Review / Flags.
Notifications		Notifications can be sent directly to the patient's device home screen.
User management		Only limited HCPs of an organization have the permission to add users. In case a HCP has this permission, they can add users by clicking the 'New' button, fill out the credentials, select
		the applicable role and press 'Register'. A mail will be sent to the newly created user to follow the account creation steps, see above .
Patient details – Overview		In the patient details overview all relevant (health) information of the individual patient can be retrieved. With the use of the previous and next patient buttons the HCP can easily switch to another patient. In the left side bar, the HCP can navigate between status, log, care plan, profile, documents and more.

Patient details – Status

firstname yb/last first/lastname last/initials 26719

Gender: Female, Age: 76 years, Date of birth: , Language: Dutch

Start consultation, Exercises, Medical questionnaires (75%), Consultations (54.55%), Questionnaires, Reported events, Not verified

TKA General Therapy

Compliance OK for today or yesterday (Green dot)
Non compliant > 2 days (Yellow dot)
Non compliant > 7 days (Red dot)

The reported healthcare data are retrievable in the 'Status' section. From there it is possible to navigate to the recurring and medical questionnaire results, exercises and many more.

A **GREEN**, **YELLOW** or **RED** status dot shows how compliant the patient is to the care plan, for example filling out all the suggested recurring and medical questionnaires and performing the suggested exercises will result in a **GREEN** status dot.

Patient details – Medical questionnaires

Status, Start consultation, Exercises (7), Medical questionnaires (30%), Consultations, Questionnaires

THA General Therapy

Via the 'medical questionnaire' button it is shown:

- ✓ Which medical questionnaires are active for a patient.
- ✓ How many of these are completed or not.
- ✓ What the reported results are on the individual questions within the medical questionnaire.

What the sub scores and total scores are to be able to see a quick indication on how the patient is progressing.

Patient details – Recurring questionnaires

Status, Start consultation, Exercises (7), Medical questionnaires (100%), Consultations (28.57%), Questionnaires

Questionnaires

Day	Reported at	DD-Week(s) in the dressing dry?
30	29 Nov 2023, 16:30:59	Yes
29	28 Nov 2023, 17:08:38	Yes
28	27 Nov 2023, 16:07:33	Yes
27	26 Nov 2023, 16:32:18	Yes
26	25 Nov 2023, 16:30:46	Yes

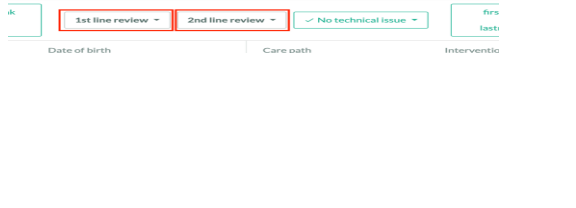
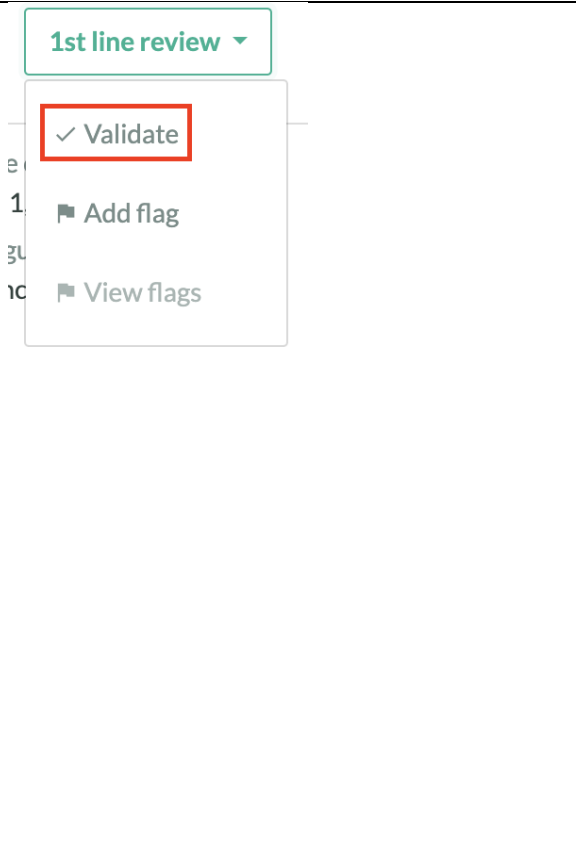
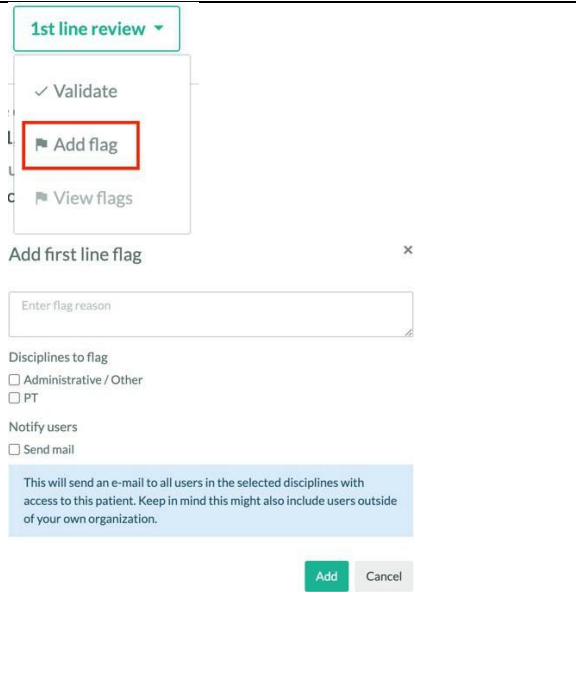
With these patient reported answers it is possible to follow the progress of important health parameters frequently.

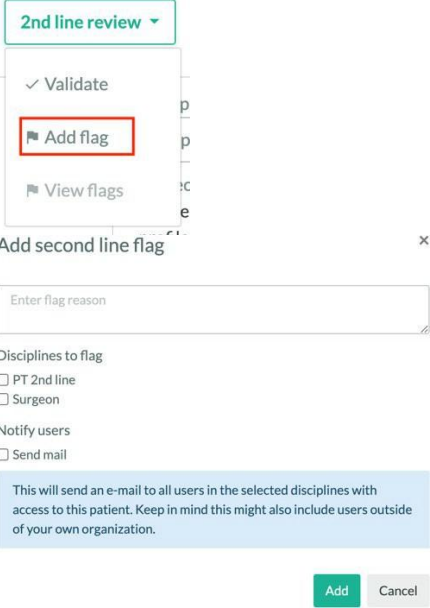
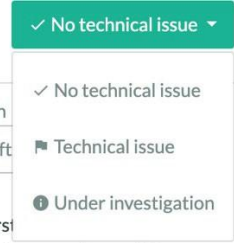
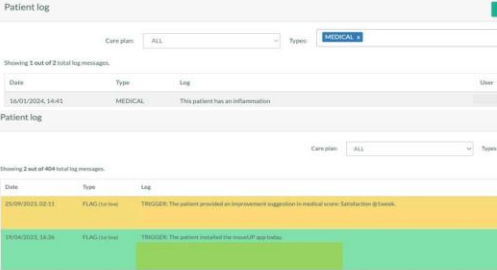
Patient details - Reported events

Reported events

Day	Reported at	DD-Pain(1) Indicate how much pain you had in your affected joint during the night	DD-Pain(2) Indicate how much pain you had in your affected joint during the day	DD-Pain(3) Did you experience any pain other than in the affected joint?	DD-Pain(4) Indicate where and when you experienced pain
242	Jan 25, 2023, 9:26:45 AM	0.52	0.81	Yes	Night: Back Exercises: Call Pain: Grains

The reported events are categorized per event. For each reported event you can view: (1) The date when the event was reported (+day in care plan) (2) The answers to all questions asked to the patient.

Patient details - Review / Flags		1st line review is for the HCP that is not the lead clinician (e.g. physical therapist), 2nd line review is for the lead clinician (e.g. surgeon)
		Click validate when a patient has been monitored. Monitoring can mean: ✓ Questions answered - Advice given ✓ Adjusted or checked exercises ✓ Adjusted or checked step goal ✓ Checked daily parameters: pain, swelling, activity,... ✓ Checked postoperative protocol: use of crutches/walker, medication,... Same principle for 2nd line review.
		Flag someone from first line ✓ Patient needs to be checked by someone from first line (e.g. a physical therapist) ✓ Give a reason for flag ✓ Select the discipline to flag ✓ Optional: add an e-mail notification to flag. Flagged discipline will receive an email about the flag. A flag will add a new line in the patient log with the reason for flagging(see further).

		Flag someone from second line ✓ Patient needs to be checked by someone from second line (e.g. a surgeon) ✓ Give a reason to flag. ✓ Select the discipline to flag. Optional: add an e-mail notification to flag. The flagged discipline will receive an email about that flag.
		Report a technical issue.
Patient details - Log		Flags and technical updates automatically appear in the log of the patient. In case of flagging: ✓ GREEN : solved flag ✓ RED : Unsolved flag for discipline of logged in user (e.g. PT) ✓ YELLOW : Unsolved flag for other discipline than logged in user (e.g. Surgeon) Other important information can be added to the log manually. The applicable tags are added to the log in view of easy log searches

Patient details – Report

Report

Personal information

Age: 22
Gender: Female
Height: 165 cm
Weight: 55 kg
Blood type: A Rh+

Surgery information

Surgery type: Laparoscopic cholecystectomy
Surgery date: 2023-10-10
Surgery location: General Surgery
Surgery status: Completed

Clinical milestones

Drop (days after surgery): 16
Discharge (days after surgery): 16
Pain (days after surgery): 16
Activity (days after surgery): 16
Solid food (days after surgery): 16
Bowel movement (days after surgery): 16
Catheter removal (days after surgery): 16
Wound dressing change (days after surgery): 16
Medication (days after surgery): 16
Vital signs (days after surgery): 16
Patient education (days after surgery): 16
Follow-up (days after surgery): 16

This report is used to visualize the main milestones and medical questionnaires of the patient, as well as the progression of the patient.



The report can be downloaded in pdf form by clicking the 'Download report' button. This way the HCP can send the report to the patient. It's also possible to share the link directly to the report, using the button 'Copy report link'.

Patient details – Profile

Basic info | Clinical data | Care plan

Basic information

National health insurance: [input field]
Corona information: [input field]
Bariatrics information: [input field]

Basic information

First Name: [input field]
Surname: [input field]

The HCP can view, edit or add all relevant basic, clinical, administrative or care plan specific data in the patient profile

Patient details – Messaging

Messages

11/01/2024

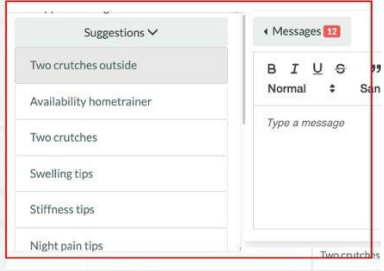
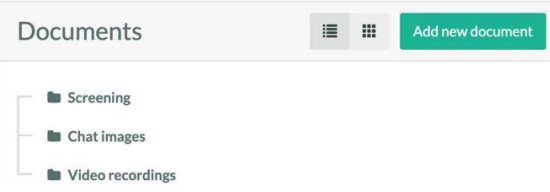
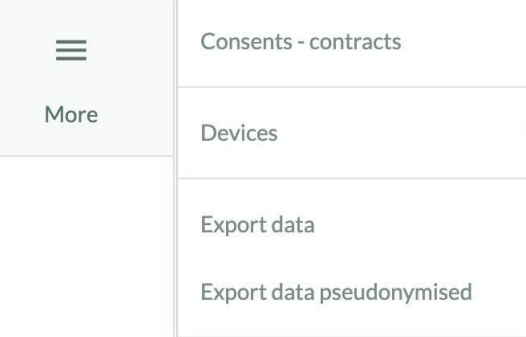
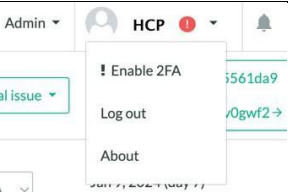
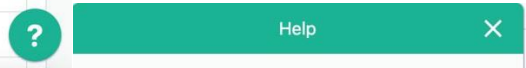
The Patient

11/01/2024

Messages 2

Push notification

The message popup (which can be enlarged) is closed by default and the number of new messages is visible in the floating button. This functionality is used to give advice to patients and answer their questions. It can also be used to ask for pictures, for example to follow-up on wound healing, swelling, redness etc...

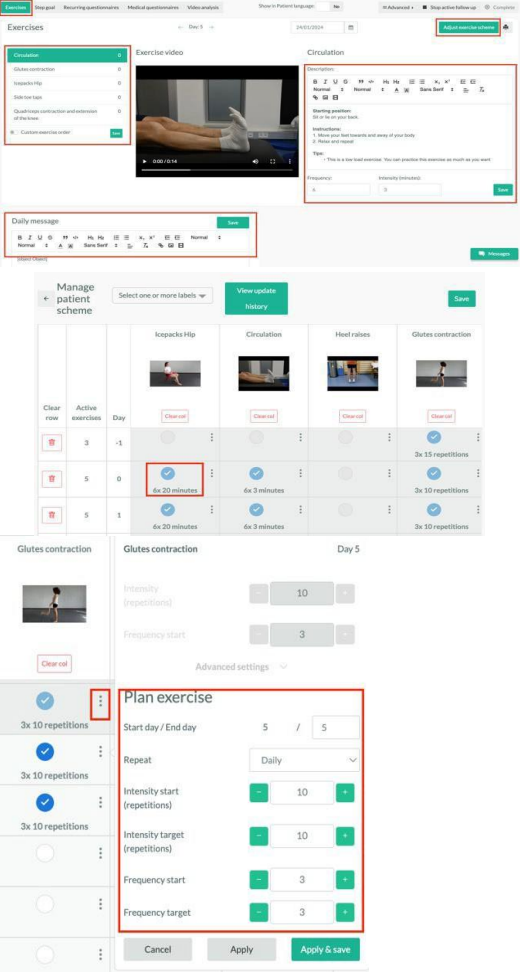
		When clicking 'messages', a set of prescribed personal messages is shown wherefrom the HCP can select an applicable message for that particular patient.
		Click on the "1st line symbol" to mark the question as read.
		Messages that are submitted by a HCP can be edited or removed. When hovering over a message, a button to edit or delete the message will become visible.
Patient details -- Documents		Documents can be uploaded in the 'Documents' section. Chat images and video recordings are automatically collected in this section in view of easy access to these materials.
Patient details - More		See which documents / contracts the patient has signed. See on which device the patient is using the application and when the application was first and last seen. Export data is only possible for limited HCPs due to security reasons and to protect data integrity.
Log out		In the upper right corner the HCP can log out. Know that the automatic log out time is 14 days, therefore it is recommended to log out more frequently to avoid unauthorized access.
Support		Reach out via support@moveup.care for questions or use the '?' button

		on the platform.
Care plan management		In care plan management it is possible to navigate between multiple functions that are applicable to the indication of the patient, such as exercises, step goal, recurring questionnaires, video analysis, automation, etc... For more information see further.

HEALTHCARE PLATFORM CARE PLAN FUNCTIONS

It is possible to provide care through the use of the healthcare platform. With the functions below the HCP can adapt the default treatment plan of their individual patient.

Only the applicable functions will be displayed conform the care plan.

Exercise management		The exercise management module includes the following possibilities of adaptation: ✓ Adapt description, frequency, and intensity of the exercises of the day. ✓ Adapt the daily message. ✓ Adapt the exercise scheme: ○ Blue check marks indicate active exercises, accompanied with frequency and intensity of these active exercises. ○ Schedule exercises over a longer period of time. Extend the standard exercise scheme with a set of exercises that are not part of the exercises defined in the care plan
---------------------	--	--

Recurring questionnaire

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** Medical questionnaires Video analysis

Questionnaires

Using treatment scheme **Personalize**

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** Medical questionnaires Video analysis Show in Patient language No Advanced Stop active follow-up Complete

Questionnaires

Name	Start day	End day	Frequency (days)	Active from	Reminders	Order	Preview	Remove
Discharge	3	10	1	10:00	No reminder set last	1	Preview	Remove
Postoperative reassess	0	3	1	10:00	No reminder set last	2	Preview	Remove
Activities	15	100	1	10:00	No reminder set last	3	Preview	Remove
Exercises	1	100	1	10:00	No reminder set last	4	Preview	Remove

Add questionnaire to personalized care plan

Questionnaire **Add**

Start date End date

Frequency Daily

Activation hour 15 Activation minutes 0

Save Cancel

Recurring questionnaires can be removed, reordered or a new recurring questionnaire can be added. The default list of recurring questionnaires, including their start day, end day, frequency and reminders is predetermined in the care plan.

Medical questionnaire

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** **Medical questionnaires** Video analysis Change Reset Stop active follow-up Complete

Medical scores scheme

Name	Start day	End day	Preview	Remove
HIP PROM collection month 6	170	210	Preview	Remove
HIP PROM collection Year 1	340	500	Preview	Remove
Discharge Questionnaire HIP	0	15	Preview	Remove

Add medical questionnaire to care plan

Medical score **Add**

Select a medical score

Activation type Day in treatment

Start Date End Date

0 0

Save Cancel

Medical questionnaires can also be removed or added to the default scheme. The default list of medical questionnaires, including their start and end day is predetermined in the care plan.

Video analysis

Exercises Step goal **Recurring questionnaires** **Medical questionnaires** **Video analysis** Show in Patient language No Advanced Stop active follow-up Complete

Video analysis

Analysis enabled for this patient

Results NOT shown to this patient

Add request

Jan 12, 2024

Gait analysis

not recorded

Video requests

Name	Start day	End day	Preview	Remove
Gait analysis	-7	-1	Preview	Remove
Gait analysis	21	30	Preview	Remove
Gait analysis	40	45	Preview	Remove

Add video request to personalized care plan

Video request **Add**

Select a video type

Start date End date

0 0

Save Cancel

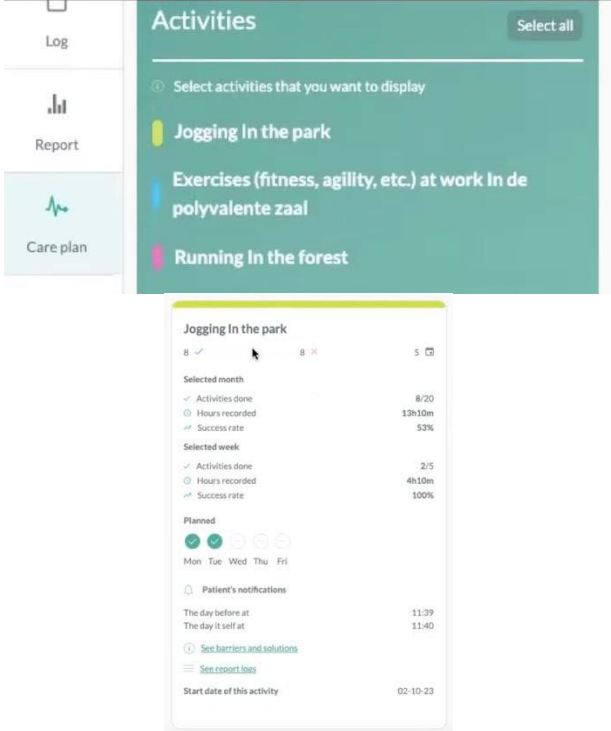
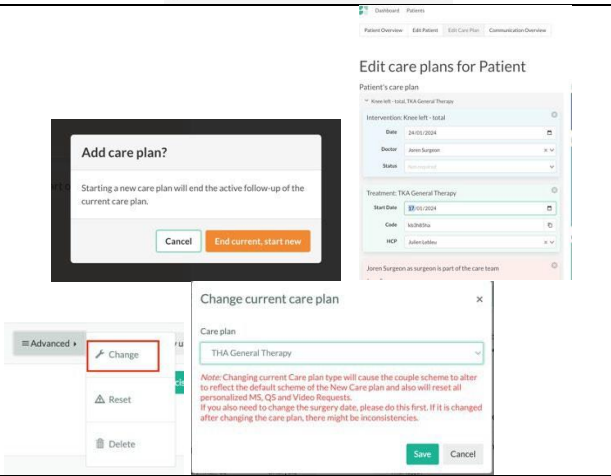
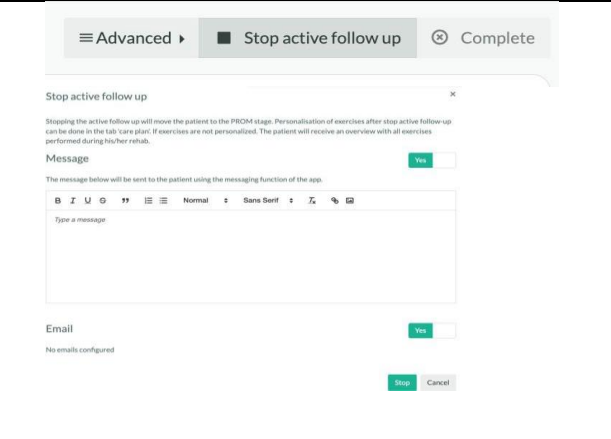
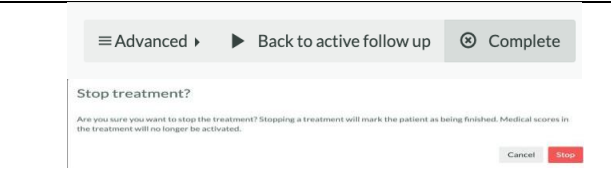
Request the patient to record a video for analysis

Video type **Add**

Select a Video type

Save Cancel

With the use of video requests, it is possible to gain more objective information, for example about the gait analysis or range of motion of an operated joint. The default list of video requests is predetermined in the care plan. A video request can be added directly by using the 'Add request' button or a video request can be scheduled for a longer period of time by using the 'Add' button and by adding a start and end day to put the video request active.

Goal manager		The HCP can enable and disable a behavioral change tool which enables patients to set their personal goal, define barriers and solutions in order to reach a healthy lifestyle. The HCP can see the progress on the patient's goals that are defined by the patient.
Change of care plan		The care plan can be adapted based on the patient's interventions, needs and wishes. This can be done via the onboarding tool or via the healthcare platform via the button 'Advanced'. Instructions how to change a care plan are clearly indicated within the tools.
Stop active follow-up		When the active follow-up is finished (what falls under active follow-up is predetermined in the care plan), press 'Stop active follow-up'. This will redirect the patient to a passive long term follow-up if applicable (also predetermined in the care plan if long term follow-up is needed).
		When no actions are required anymore from the HCP or the patient, the patient can be redirected to the 'Completed' status.

WELLNESS MODULE

The wellness module is an optional non-medical device module and therefore the data shown is not intended to be used for clinical decision making.

This data gives an overview of the general wellbeing of the patient.

The wellness module by default is blurred and needs to be activated to check the patient's wellness data.

WELLNESS MODULE ACTIVATION

To activate the wellness module you need to enter your profile settings and activate the option:

- Enable wellness data

The screenshot shows the 'Edit Laurens Baes' form in the moveUP system. The form is divided into two columns. The left column contains fields for First name (Laurens), Surname (Baes), Username (laurens@moveup.care), Email (laurens@moveup.care), Telephone number (+32496123456), Social security number (Rizin nr), and a section for Authentication with a toggle for 'Two factor authentication'. The right column contains fields for Address (Oktrooi plein 1), City (Gent), Postal code (9000), Country (Belgium), Title, Image, Language (English), and a section for the Wellness module with a toggle for 'Enable wellness module'. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Set new password', and 'Manage consent/contracts'.

Upon activation, a mandatory acknowledgment pop-up is displayed. It informs you that the data from the Wellness Module must not be used to support clinical decision-making.

Platform notice

Wellness module terms of use

Dear User,
You are about to activate the Wellness Module.

What is the Wellness Module?

The wellness module provides you with additional data about the general wellbeing and activity levels of your patients. The data in the Wellness Module can come from:

- imported data from general-purpose devices such as e.g. activity trackers
- manual entry by patients

This data does not come from medical devices. This means that neither the devices from which the data is imported, nor the manual entries by the patients have been verified or validated by moveUP, and therefore, it should not be used for clinical decision-making.

What is the purpose of this data?

We provide the option to see wellness data to give you a broader idea about the general wellbeing of the patients and to give you the opportunity to discuss and give further guidance regarding wellbeing.

This module is an optional module and is not linked to the medical data presented in the "Medical data" tab of the dashboard.

The data in the wellness module is not intended to be used for clinical decisions.

How to recognize the wellness data?

Wellness data is displayed in a separate tab in the dashboard or in a separate report.

Whenever wellness data is displayed in a column, together with other data it has a grey background to visually indicate that this does not concern medical data. Furthermore, it has a warning sign next to it.

Enabling/Disabling the Wellness Module

At any time, a user can enable/disable the Wellness Module in the user settings.

Acknowledgement

By clicking on the button below, you acknowledge that you have read and understood that the Wellness Module is an optional module that provides you with additional data regarding the general wellbeing of the patient. This data is not validated by moveUP and is not intended for clinical decision making.

☐ I agree

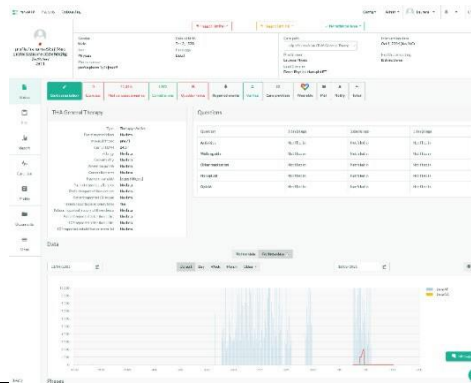
Sign

Cancel

Once acknowledged, you gain access to the wellness data. This activation allows you to view the wellness data and export the wellness reports.

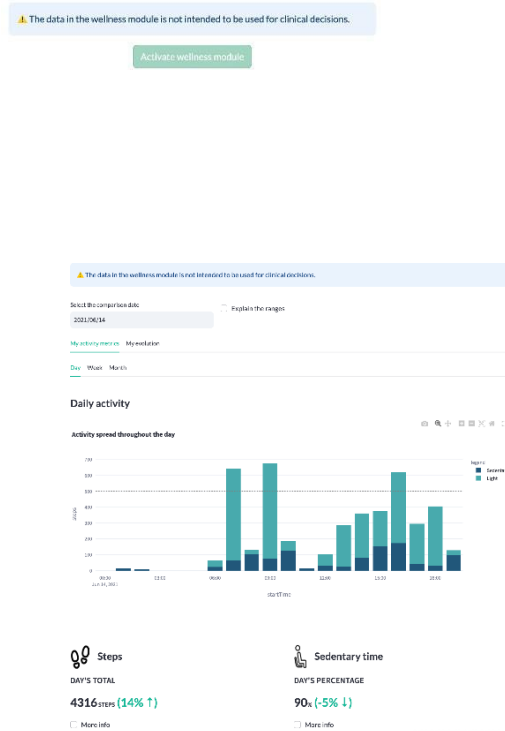
WELLNESS MODULE OVERVIEW

Wellness module overview



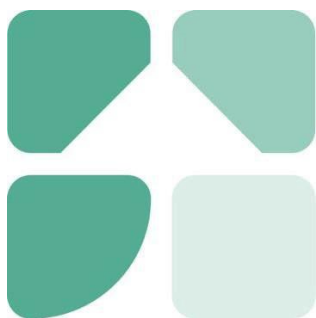
In this tab you'll be able to see the step data from the patient and see their evolution.

Wellness report



You can see the wellness reports when needed.

Manuel d'utilisation pour le professionnel de santé (PS)



Un traitement personnalisé, avec une meilleure compréhension et une implication accrue dans le parcours de soins.

Version de l'application: 2.2.0 et postérieure

Manual version : 17.2

Données du manuel de publication: 27/01/2026

Données du manuel de publication: <https://moveup.talentlms.com/index>

Table des matières

Table des matières	2
DESCRIPTION DU PRODUIT	3
<i>Usage prévu</i>	<i>3</i>
<i>Utilisateurs visés</i>	<i>4</i>
<i>Population cible / indication d'utilisation</i>	<i>5</i>
<i>Affirmation</i>	<i>5</i>
<i>moveUP app & devices</i>	<i>5</i>
<i>Avertissements et précautions</i>	<i>6</i>
<i>Contre-indications et effets secondaires potentiels</i>	<i>7</i>
<i>Notification des incidents graves</i>	<i>7</i>
<i>Contact corporel humain</i>	<i>8</i>
<i>Accessoires/produits utilisés en combinaison</i>	<i>8</i>
<i>Durée de vie de l'appareil</i>	<i>8</i>
<i>Détails de l'entreprise</i>	<i>9</i>
Application patient	10
Module médical	10
<i>INTÉGRATION DES PATIENTS</i>	<i>10</i>
<i>FONCTIONS GÉNÉRALES DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ</i>	<i>13</i>
<i>FONCTIONS DU PLAN DE SOINS DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ</i>	<i>20</i>
MODULE BIEN-ÊTRE	24
<i>ACTIVATION DU MODULE BIEN-ÊTRE</i>	<i>24</i>
<i>APERÇU DU MODULE BIEN-ÊTRE</i>	<i>25</i>
<i>Aperçu du module bien-être</i>	<i>26</i>
<i>Rapport de bien-être</i>	<i>26</i>

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lisez attentivement toutes les informations et précautions contenues dans ce manuel. Assurez-vous de comprendre le fonctionnement, les écrans et les limitations de l'application moveUP avant d'utiliser le service. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter moveUP.

Pour des raisons de sécurité, moveUP recommande à son utilisateur de lire attentivement et de comprendre le manuel des appareils utilisés en lien avec l'application moveUP.

Durant toute la durée de l'utilisation du service, un support technique et un soutien thérapeutique sont à votre disposition. En cas de problème technique ou de défaillance avec l'application, vous pourrez contacter l'équipe moveUP via la messagerie intégrée à l'application, par téléphone ou par e-mail.

Usage prévu

Pour les prestataires de soins de santé

Pour les prestataires de soins de santé, moveUP assure une prise en charge clinique efficace des pathologies et des traitements. Grâce à l'utilisation de moveUP, le personnel soignant et l'équipe de soins reçoivent des informations précieuses sur l'état du patient et son évolution.

Pour les patients

Pour les patients, moveUP fournit des informations et des instructions personnalisées pour les aider à gérer leurs symptômes et à progresser dans leur rééducation. L'intensité du suivi est adaptée en fonction des besoins des patients et du moment où ils se trouvent dans leur trajet:

- moveUP **COMPANION** = surveillance et information, pas de suivi actif
 - moveUP companion offre des informations ciblées et des rapports d'évolution aux patients. Leur équipe de soins tient compte des rapports d'évolution pour la suite de leur rétablissement, le cas échéant.
- moveUP **COACH** = suivi actif par l'équipe de soins de santé
 - moveUP coach fournit des informations ciblées et des rapports d'évolution aux patients. Leur équipe de soins de santé est plus activement impliquée et prend en compte les rapports d'évolution. Elle peut fournir des conseils et des suggestions d'exercices par le biais de la plateforme numérique.
- moveUP **THERAPY** = suivi actif par l'équipe de soins, avec un protocole de soins validé basé sur des données
 - La thérapie moveUP offre un protocole de soins validé basé sur des données avec certaines catégories et niveaux d'exercices et d'activités, spécifiquement ciblés sur le patient individuel. Leur équipe de soins peut adapter manuellement le

protocole validé basé sur des données en cas de besoin. Les patients peuvent se réadapter complètement avec moveUP sans quitter leur environnement domestique.

Une fonctionnalité optionnelle peut être activée : l'interopérabilité avec un dispositif médical de classe IIa à mouvement passif continu (CPM).

Pour les patients souffrant du genou ou de la hanche qui utilisent un dispositif médical CPM de classe IIa, moveUP peut interagir avec le logiciel CPM de classe IIa. moveUP agit comme un facilitateur pour attribuer facilement à un patient un protocole d'exercice CPM désigné et choisi par un médecin et pour afficher les exercices CPM effectués dans le tableau de bord médical.

Utilisateurs visés

moveUP est destiné à être utilisé par les patients et les prestataires de soins de santé.

Patient

Le patient est le principal utilisateur de l'application mobile et du site web du patient. Les patients utilisateurs doivent être alertes, mentalement compétents et capables d'utiliser une tablette/un smartphone et un tracker d'activité.

Inclusion:

- Âge:
 - minimum: 18 ans,
 - maximum: sans limite
- Pids: Sans objet
- Santé et condition physique: capable d'effectuer les activités de la vie quotidienne
- Langue: maîtrise d'une des langues disponibles dans l'application (néerlandais, français, allemand, anglais).

Exclusion:

- Les patients présentant une incapacité mentale ou des difficultés à exprimer leurs sentiments (par exemple, les personnes atteintes de troubles mentaux ou résidant en EHPAD) sont exclus.
- Les patients incapables d'utiliser une tablette ou un smartphone.
- Les patients ne comprenant pas l'une des langues disponibles dans l'application (néerlandais, français, allemand, anglais).

Prestataire de santé

L'utilisateur principal de l'interface web médicale est un praticien de santé (groupe) ou un chercheur clinique (groupe), nommé l'équipe de soins. L'équipe de soins est en mesure de faire fonctionner une interface via un navigateur sur PC/tablette/smartphone. Le professionnel de santé doit comprendre l'une des langues disponibles de l'interface (aujourd'hui uniquement disponible en anglais).

Seuls les professionnels de santé qualifiés, les titulaires d'un diplôme ou d'une certification dans le domaine de la santé, ou les chercheurs cliniciens qualifiés peuvent accéder à la plateforme et suivre les formations en ligne moveUP.

Population cible / indication d'utilisation

moveUP companion & coach est utilisé par les patients musculo-squelettiques, oncologiques, respiratoires, gastro-intestinaux, cardiovasculaires et neurologiques, tels que les patients:

- qui ont subi ou envisagent de subir un bypass gastrique ou une sleeve gastrique
- qui ont ou ont eu un accident vasculaire cérébral, un myélome multiple, la covid, une hypercholestérolémie familiale
- qui ont ou ont eu des problèmes de dos ou d'articulations ou des opérations

moveUP therapy est utilisé par les patients ayant subi une arthroplastie du genou ou de la hanche.

Affirmation

moveUP : accompagnement, coaching et thérapie

L'intensité du suivi est adaptée aux besoins du patient grâce à l'outil de suivi des symptômes et de la qualité de vie moveUP.

moveUP améliore la prise en charge clinique des patients grâce à la détection et à la gestion précoces des complications permises par l'outil de suivi des symptômes et de la qualité de vie.

Une prise en charge clinique plus efficace, notamment grâce à la réduction du nombre de consultations, est possible.

Favorise l'observance du traitement.

L'information pertinente est fournie au bon moment.

Thérapie moveUP

Grâce à la thérapie moveUP, les patients ayant subi une arthroplastie du genou ou de la hanche peuvent bénéficier d'une rééducation complète à domicile, avec l'aide de l'équipe soignante intégrée à l'application.

moveUP app & devices

L'application moveUP fonctionne sur:

- iPhones/iPads (iOS 11.0 et versions ultérieures)
- Systèmes Android (Android 7.0.0 et versions ultérieures).

Si le patient ne possède pas de tablette/smartphone compatible, moveUP peut faire louer ces appareils.

- Lenovo Tab 3 : Android 6.0.1 ou version ultérieure
- Huawei MediaPad T3 : Android 7.0.0 ou version ultérieure

L'application moveUP nécessite une connexion Internet pour être utilisée.

Si le patient ne possède pas de tablette ou de smartphone compatible, moveUP peut lui louer ces appareils.

- Garmin Vivofit 3 et Vivofit 4
- Nokia Withings Go
- Tous les appareils compatibles avec HealthKit (iOS)
- Tous les appareils compatibles avec Google Fit (iOS et Android)

L'application moveUP est compatible avec les navigateurs suivants:

- Chrome
- Safari
- Edge
- Firefox

Nous vous recommandons vivement d'utiliser la dernière version de votre navigateur.

Pour la sécurité de vos données, veuillez activer l'authentification à deux facteurs (2FA) et utiliser un réseau sécurisé.

Avertissements et précautions

	• moveUP n'est pas un outil d'urgence. En cas d'urgence, veuillez contacter votre médecin ou appeler le 112.
	• moveUP n'est pas destiné à surveiller/traiter les paramètres vitaux des maladies graves.
	• MoveUP companion ne remplace pas les traitements que vous devez suivre, mais est utilisé en complément.
	• Les patients doivent savoir que si les questionnaires ne sont pas remplis fréquemment ou s'ils ne sont pas remplis de manière fiable, l'équipe de soins a plus de difficulté à connaître leur état de santé et leur évolution.
	• L'application moveUP offre des soins de santé personnalisés basés sur le profil du patient et ne peut donc pas être partagée, empruntée ou échangée entre utilisateurs. Les informations et conseils de l'application moveUP ne s'appliquent pas à un patient autre que celui dont le profil est stocké dans l'application. Le patient ne peut pas accorder l'accès à l'application moveUP à des tiers. Toute autre personne peut, même accidentellement, envoyer des informations erronées ou modifier le profil du patient, de sorte que les conseils guidés par moveUP ne correspondent plus aux besoins du patient.
	• Avec les logiciels, il existe toujours un risque résiduel de dysfonctionnement. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas ou si vous n'obtenez pas de réponse dans l'application, veuillez nous contacter via support@moveup.care ou appeler le 0800 88 008.

Les instructions d'utilisation de moveUP sont fournies uniquement au format électronique. Si vous souhaitez recevoir une version imprimée complète, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail info@moveup.care. Cette adresse est disponible 24h/24 et 7j/7.

Contre-indications et effets secondaires potentiels

Il n'y a pas de contre-indications ni d'effets secondaires connus.

Notification des incidents graves

Un incident grave désigne tout incident qui a directement ou indirectement entraîné, aurait pu entraîner ou pourrait entraîner l'un des événements suivants : le décès d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne,

- la détérioration grave, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne, ayant entraîné l'un des éléments suivants:
 - maladie ou blessure mettant la vie en danger,
 - atteinte permanente à une structure ou à une fonction corporelle, hospitalisation
 - prolongation de l'hospitalisation du patient, intervention médicale ou chirurgicale visant à prévenir une maladie ou une blessure mettant la vie en danger

- atteinte permanente à une structure ou à une fonction corporelle,
 - maladie chronique,
- une menace grave pour la santé publique;

Si vous détectez l'un de ces cas, veuillez envoyer un courriel à info@moveUP.care et à votre autorité compétente:

- Pays-Bas: meldpunt@igj.nl
- Belgique: meddev@fagg.be
- France: dedim.ugsv@ansm.sante.fr
- Allemagne: zlg@zlg.nrw.de

Contact corporel humain

Aucun contact physique avec le patient ou l'utilisateur, en raison de la nature du produit (logiciel).

Accessoires/produits utilisés en combinaison

Il n'y a pas d'accessoires.

Si le patient n'a pas de tablette/smartphone ou de tracker d'activité compatible, moveUP se charge de lui louer ces appareils. Les appareils loués sont des appareils marqués CE qui répondent aux critères de compatibilité décrits dans l'IFU pour l'application.

Durée de vie de l'appareil

Deux ans, selon la volonté de l'utilisateur de mettre à jour l'application. Nous envoyons une notification recommandant la mise à jour afin de garantir le maintien des performances et des fonctionnalités récemment ajoutées.

Détails de l'entreprise

 moveUP NV/SA	Tel: +32 800 88 008	UDI: ++G166MOVEUP220MDDDM  (01)G166MOVEUP220MDDDM (10)+\$7220 (11)/16D20260127 (21)\$Y
Siège social à Bruxelles : Cantersteen 47, B-1000 Bruxelles, Belgique Bureau secondaire: Kliniekstraat 27A 9050; Ghent, Belgium	Email: info@moveUP.care www.moveup.care	

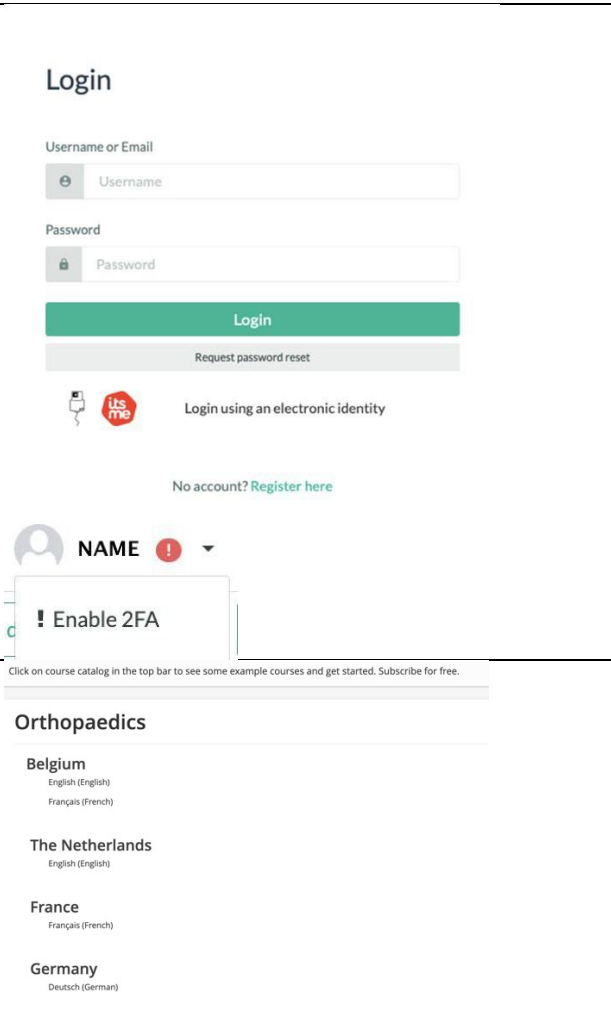
Pour toute question concernant l'application ou la tablette, vous pouvez contacter moveUP par les moyens suivants, par ordre de priorité: via la messagerie de l'application; par e-mail à l'adresse support@moveup.care; ou par téléphone pendant les heures de bureau au +3280088008.

MoveUP garantit la livraison de l'eIFU sous sept (7) jours sur demande. Veuillez contacter info@moveUP.care si vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit.

Application patient

Veuillez lire le manuel d'utilisation destiné aux patients sur www.moveup.care/appinfo pour découvrir les fonctionnalités de l'application patient.

Module médical

Étape 1 : Le professionnel de santé s'inscrit sur la plateforme de soins de santé à l'adresse https://v1.medical.moveup.care/	
Étape 2 : moveUP contactera le professionnel de santé pour ajouter son profil à l'organisation appropriée.	
Étape 3 : Mesures de sécurité : Il est important d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA) car vous avez accès à des données de santé sensibles.	
Formation en ligne : Il est recommandé aux professionnels de santé qui utiliseront la plateforme de soins de santé de suivre les formations en ligne relatives aux indications listées sur https://moveup.talentlms.com . Nous leur demandons de s'inscrire à la formation en ligne dans leur langue.	

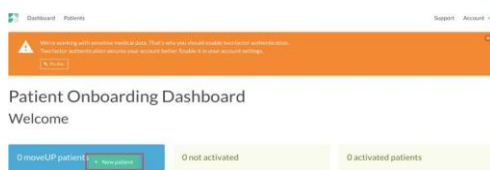
INTÉGRATION DES PATIENTS

L'intégration est le processus d'enregistrement d'un nouveau patient sur la plateforme de santé.

Une étape cruciale consiste à ajouter un plan de soins au profil du patient. Ce plan détermine les informations visibles pour le patient dans l'application, comme le type d'exercices, les modules d'information, la messagerie, etc. Un plan de soins comprend généralement une intervention, un traitement et une ou plusieurs équipes soignantes.

Accueil des patients

Patients Onboarding



Le tableau de bord d'accueil est facilement accessible depuis la plateforme de soins de santé, en haut à gauche, en cliquant sur «Accueil». Il est également accessible via <https://patient-onboarding-admin.moveup.care/dashboard> en utilisant les identifiants de professionnel de santé de la plateforme.

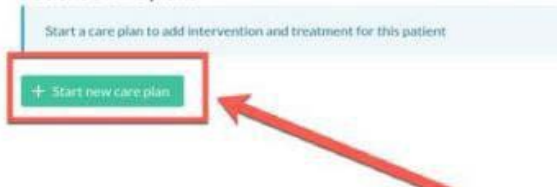
Cliquez sur « Nouveau patient » pour enregistrer un nouveau patient et renseigner ses informations.

Une fois les informations du patient saisies, appuyez sur «Enregistrer».

New patient

Remarque importante: Une seule adresse e-mail peut être associée à un seul compte. Il est impossible de réutiliser une adresse e-mail déjà enregistrée dans notre base de données, par exemple pour le compte d'un conjoint ou d'un parent.

Patient's care plans



Ensuite, sélectionnez le plan de soins: cliquez sur «Créer un nouveau plan de soins». Glissez-déposez une intervention et un traitement dans le plan de soins, puis renseignez les dates, le nom du médecin traitant et de l'équipe soignante.

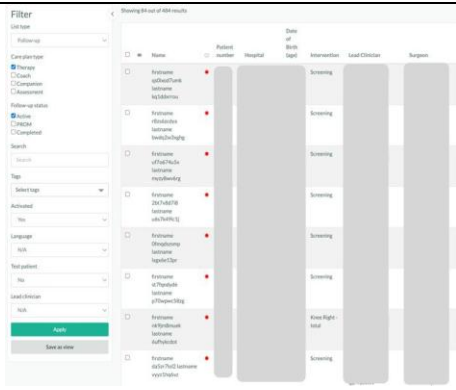
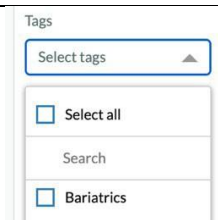
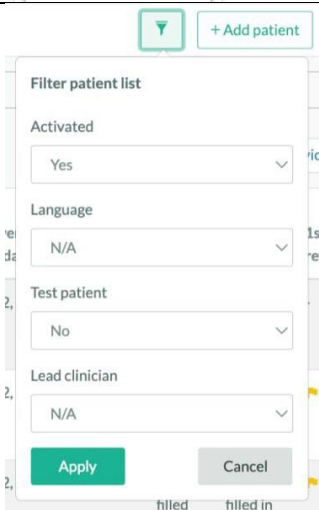
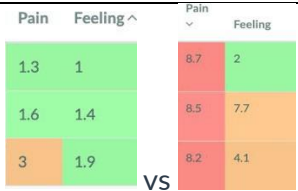
Glissez-déposez une étude, le cas échéant. Cliquez sur «Enregistrer».

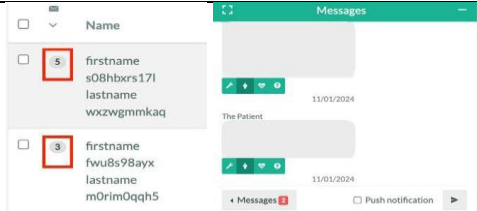
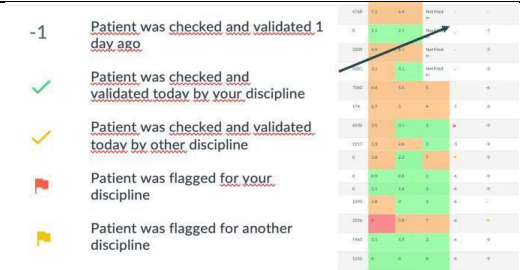
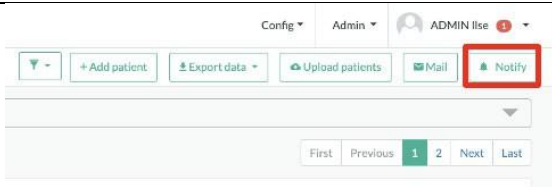
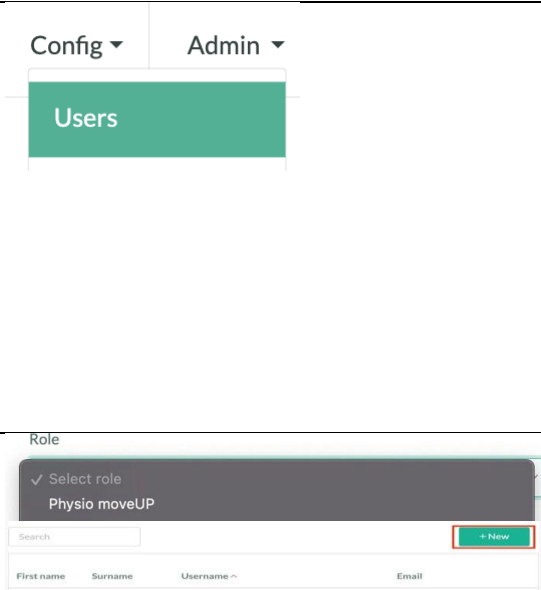
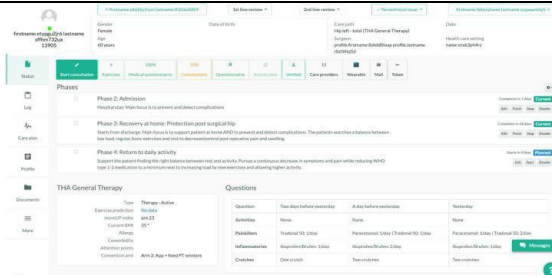
Un modèle d'e-mail s'affiche. Le professionnel de santé vérifie les paramètres de l'e-mail et clique sur «Envoyer le(s) e-

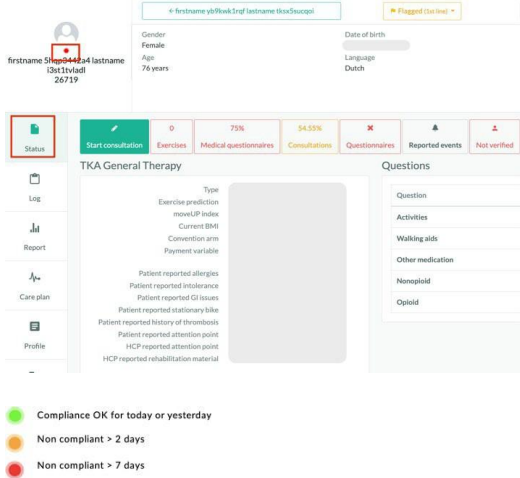
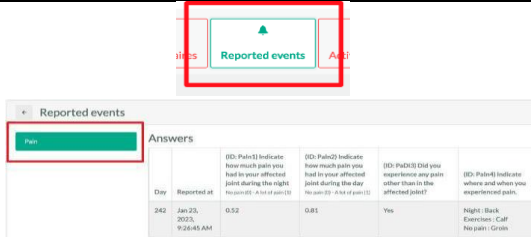
		mail(s) sélectionné(s)». Un e-mail d'invitation contenant toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'activation de l'application sera envoyé au patient.
		Un modèle d'e-mail s'affiche. Le professionnel de santé vérifie les paramètres de l'e-mail et clique sur «Envoyer le(s) e-mail(s) sélectionné(s)». Un e-mail d'invitation contenant toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'activation de l'application sera envoyé au patient.

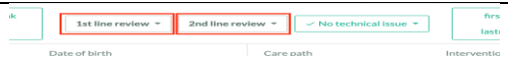
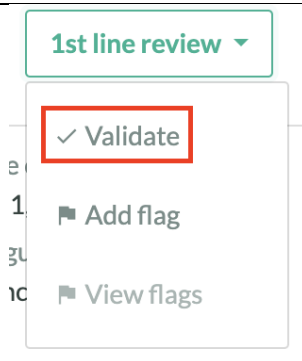
FONCTIONS GÉNÉRALES DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ

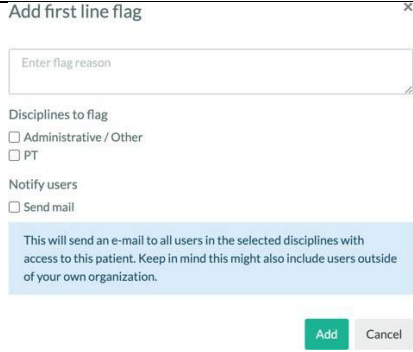
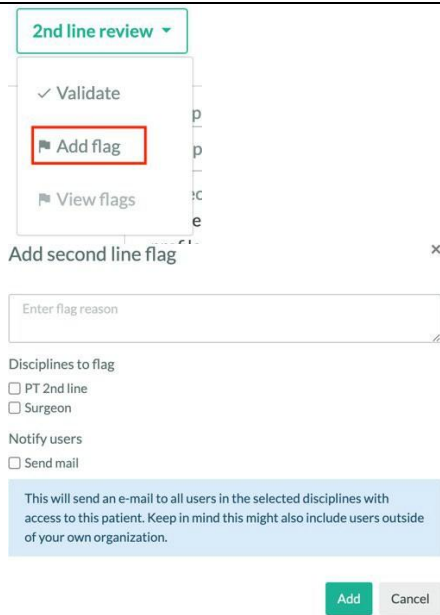
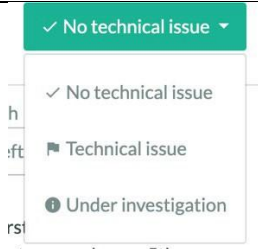
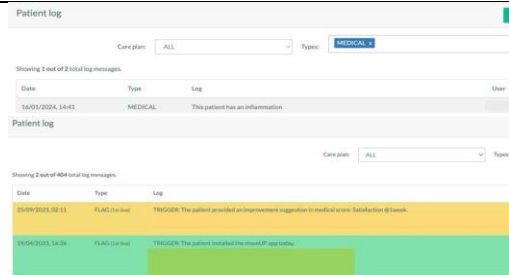
Ci-dessous, le professionnel de santé peut accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Les fonctionnalités disponibles s'affichent en fonction de son inscription . L'étendue des informations patient accessibles dépend de l'inscription du patient et de son taux d'observance.

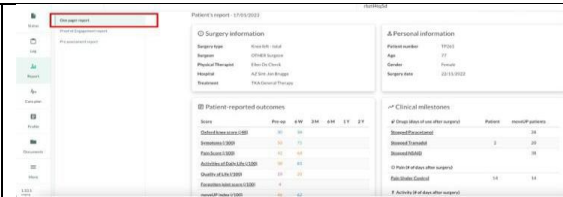
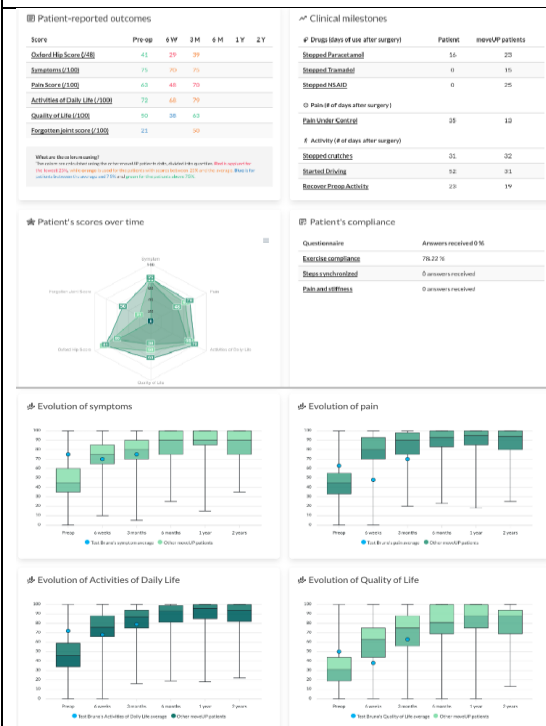
Aperçu du patient		La plateforme de soins de santé offre une vue d'ensemble claire des patients des professionnels de santé. La barre supérieure affiche les catégories pertinentes permettant d'identifier le patient et d'afficher ses paramètres de santé, les messages non lus, le médecin référent et l'observance du traitement. Par défaut, à l'ouverture de la plateforme, la vue d'ensemble des patients est triée par date d'intervention.
Étiquettes		Sélectionnez les patients présentant une pathologie spécifique à l'aide d'étiquettes.
Étiquettes		Sélectionnez les patients en fonction de la langue, du statut de patient test, du clinicien référent ou de leur statut d'activation. L'activation peut signifier deux choses: soit le patient s'est inscrit lui-même à l'aide d'un code via l'application, soit il a été marqué comme activé immédiatement lors de son intégration. Les patients non activés ne se sont pas encore inscrits via l'application et n'ont pas été marqués comme activés immédiatement.
Codes de couleur		Les codes couleur indiquent quels patients nécessitent une attention particulière.

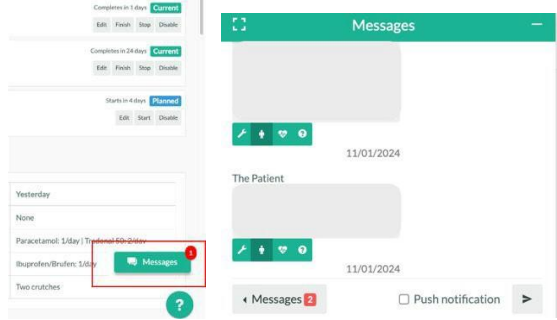
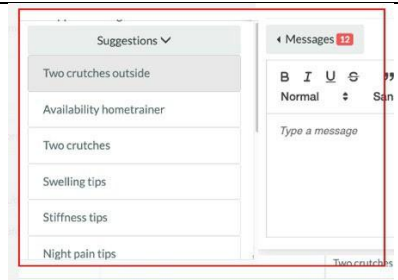
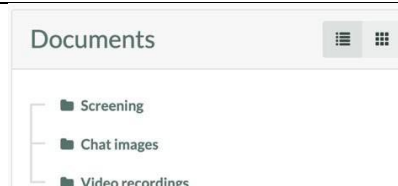
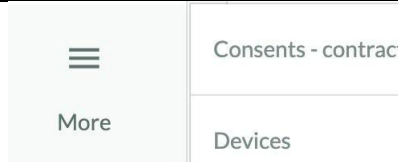
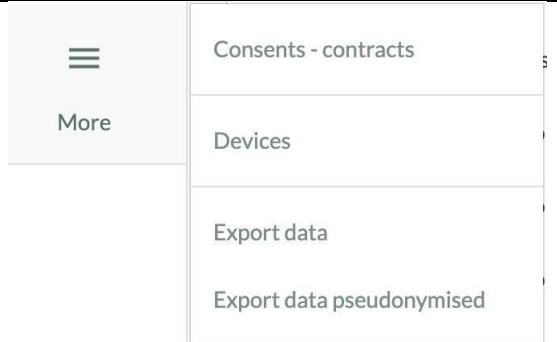
Messagerie		Le nombre de messages non lus est affiché dans l'aperçu.
Avis / Signalements		Grâce aux indicateurs de révision, on sait quand le patient a été examiné ou qui doit le faire. Pour plus d'informations, consultez la section «Détails du patient» – «Révision / Indicateurs».
Notifications		Les notifications peuvent être envoyées directement sur l'écran d'accueil de l'appareil du patient.
Gestion des utilisateurs		Seuls certains professionnels de santé d'une organisation sont autorisés à ajouter des utilisateurs. Si un professionnel de santé dispose de cette autorisation, il peut ajouter des utilisateurs en cliquant sur le bouton «+ New», en renseignant les informations d'identification et en sélectionnant
Informations patient - Aperçu		Dans la fiche patient, toutes les informations de santé pertinentes sont accessibles. Les flèches gauche et droite permettent au professionnel de santé de naviguer rapidement entre les patients, en affichant le nom du patient précédent ou suivant. La barre latérale gauche permet de naviguer entre le statut, le journal, le plan de soins, le profil, les documents et

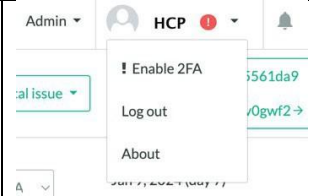
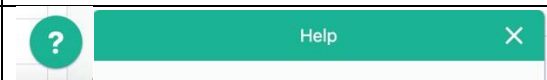
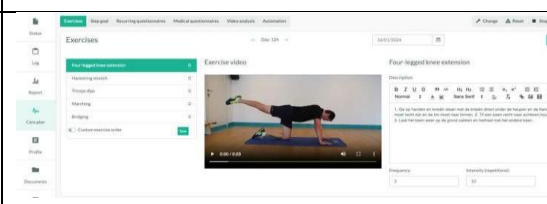
		plus encore.
Informations patient – Statut		Les données de santé enregistrées sont accessibles dans la section « Statut ». De là, vous pouvez consulter les résultats des questionnaires médicaux et récurrents, les exercices et bien plus encore. Un point de statut VERT, JAUNE ou ROUGE indique le degré d'adhésion du patient au plan de soins ; par exemple, remplir tous les questionnaires médicaux et récurrents suggérés et effectuer les exercices suggérés se traduira par un point de statut VERT.
Informations patient – Questionnaires médicaux		Il est affiché via le bouton «questionnaire médical» : ✓ Quels questionnaires médicaux sont actifs pour un patient? ✓ Nombre de questionnaires complétés ou non. Quels sont les résultats obtenus pour chaque question du questionnaire médical? À quoi servent les sous-scores et les scores totaux? Donner une indication rapide de la progression du patient.
Informations patient – Questionnaires récurrents		Grâce à ces réponses rapportées par les patients, il est possible de suivre fréquemment l'évolution de paramètres de santé importants.
Informations sur le patient - Événements signalés		Les événements signalés sont classés par catégorie. Pour chaque événement signalé, vous pouvez consulter: (1) La date à laquelle l'événement a été signalé (jour dans le plan de soins); (2) Les réponses à toutes

		les questions posées au patient.
Informations patient- Avis / Signalements		L'évaluation de première ligne est destinée au professionnel de santé qui n'est pas le clinicien principal (par exemple, un kinéthérapeute), l'évaluation de deuxième ligne est destinée au clinicien principal (par exemple, un chirurgien).
		Cliquez sur «Valider» lorsqu'un patient a été suivi. La surveillance peut comprendre: ✓ Réponses aux questions – Conseils prodigués ✓ Exercices ajustés ou vérifiés ✓ Objectif de pas ajusté ou vérifié ✓ Paramètres quotidiens vérifiés : douleur, gonflement, activité... ✓ Protocole postopératoire vérifié: utilisation de béquilles/déambulateur, médicaments...Questions answered – Advice given Même principe pour la révision de deuxième niveau.
		Signalez quelqu'un de la première ligne ✓ Le patient doit être examiné par un professionnel de santé de première ligne (par exemple, un kinésithérapeute). ✓ Indiquez le motif du signalement.

		✓ Sélectionnez la discipline concernée. ✓ Facultatif: ajoutez une notification par courriel. La discipline concernée recevra un courriel à ce sujet. Un signalement ajoutera une nouvelle ligne dans le dossier du patient avec la raison du signalement (voir plus loin).
		Signaler quelqu'un de la deuxième ligne ✓ Le patient doit être examiné par un professionnel de santé de deuxième ligne (par exemple, un chirurgien). ✓ Indiquez la raison du signalement. ✓ Sélectionnez la discipline concernée par le signalement. Facultatif: ajouter une notification par courriel pour signaler le problème. La discipline concernée recevra un courriel à ce sujet.
		Signaler un problème technique.
Informations patient – Journal		Les alertes et les mises à jour techniques apparaissent automatiquement dans le journal du patient. En cas d'alerte:

		✓ VERT: Problème résolu ✓ ROUGE: Problème non résolu pour la discipline de l'utilisateur connecté (ex. : kinésithérapeute) ✓ JAUNE: Problème non résolu pour une autre discipline que celle de l'utilisateur connecté (ex. : chirurgien). D'autres informations importantes peuvent être ajoutées manuellement au journal. Les tags appropriées sont ajoutées au journal afin de faciliter les recherches.
Informations patient - Rapport		Le rapport peut être téléchargé au format PDF en cliquant sur le bouton «Download report» (Télécharger le rapport). Le professionnel de santé pourra ainsi l'envoyer au patient. Il est également possible de partager directement le lien du rapport en utilisant le bouton "Copy report link" (Copier le lien du rapport)
Informations patient - Profil		Le professionnel de santé peut consulter, modifier ou ajouter toutes les données pertinentes de base, cliniques, administratives ou spécifiques au plan de soins dans le profil du patient.

Informations patient - Messagerie		La fenêtre contextuelle de messages (extensible) est fermée par défaut et le nombre de nouveaux messages est visible sur le bouton 'Messages'. Cette fonctionnalité permet de conseiller les patients et de répondre à leurs questions. Elle peut également servir à demander des photos, par exemple pour suivre l'évolution de la cicatrisation, l'apparition d'un gonflement, de rougeurs, etc.
		En cliquant sur « messages », une liste de messages personnalisés prédéfinis s'affiche, parmi lesquels le professionnel de santé peut sélectionner le message approprié pour ce patient.
		Cliquez sur le symbole de la première ligne pour marquer la question comme lue.
		Les messages envoyés par un professionnel de santé peuvent être modifiés ou supprimés. En survolant un message, un bouton permettant de le modifier ou de le supprimer apparaît.
Informations patient - Documents		Les documents peuvent être téléchargés dans la section « Documents ». Les captures d'écran et les enregistrements vidéo des conversations y sont automatiquement regroupés afin de faciliter leur accès.
Informations sur le patient - Plus d'informations		Consultez les documents/contrats signés par le patient. Consultez l'appareil utilisé par le patient pour accéder à l'application, ainsi que les dates de première et dernière utilisation. L'exportation des données est

		réservée à un nombre limité de professionnels de santé pour des raisons de sécurité et afin de préserver l'intégrité des données.
Déconnexion		Dans le coin supérieur droit, le professionnel de santé peut se déconnecter. Notez que la déconnexion automatique a lieu tous les 14 jours; il est donc recommandé de se déconnecter plus fréquemment afin d'éviter tout accès non autorisé.
Déconnexion		Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse support@moveup.care ou utiliser le bouton «?» sur la plateforme.
Gestion du plan de soins		Dans la gestion du plan de soins, il est possible de naviguer entre de multiples fonctions applicables à l'indication du patient, telles que les exercices, l'objectif de pas, les questionnaires récurrents, l'analyse vidéo, l'automatisation, etc. Pour plus d'informations, voir ci-dessous.

FONCTIONS DU PLAN DE SOINS DE LA PLATEFORME DE SOINS DE SANTÉ

Il est possible de prodiguer des soins via la plateforme de santé. Grâce aux fonctionnalités ci-dessous, le professionnel de santé peut adapter le plan de traitement par défaut de chaque patient.

Seules les fonctionnalités applicables au plan de soins seront affichées.

Gestion de l'exercice

The screenshot displays the 'Exercices' (Exercises) module interface. It includes a sidebar with a list of exercises, a main area with a video player and a 'Circulation' section, and a 'Manage patient scheme' section. A 'Plan exercise' dialog box is open, showing settings for 'Start day / End day', 'Repeat', 'Intensity start (repetitions)', 'Intensity target (repetitions)', 'Frequency start', and 'Frequency target'. The 'Plan exercise' dialog box is highlighted with a red border.

Le module de gestion des exercices comprend les possibilités d'adaptation suivantes:

- ✓ Adapter la description, la fréquence et l'intensité des exercices du jour.
- ✓ Adapter le message du jour.
- ✓ Adapter le programme d'exercices:
 - Les cases bleues indiquent les exercices actifs, accompagnés de leur fréquence et de leur intensité.
 - Planifiez vos exercices sur une période plus longue.

Complétez le programme d'exercices standard par une série d'exercices qui ne font pas partie de ceux définis dans le plan de soins.

Questionnaire récurrent

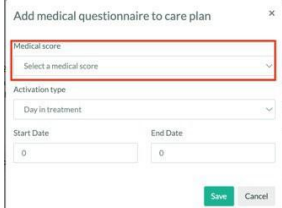
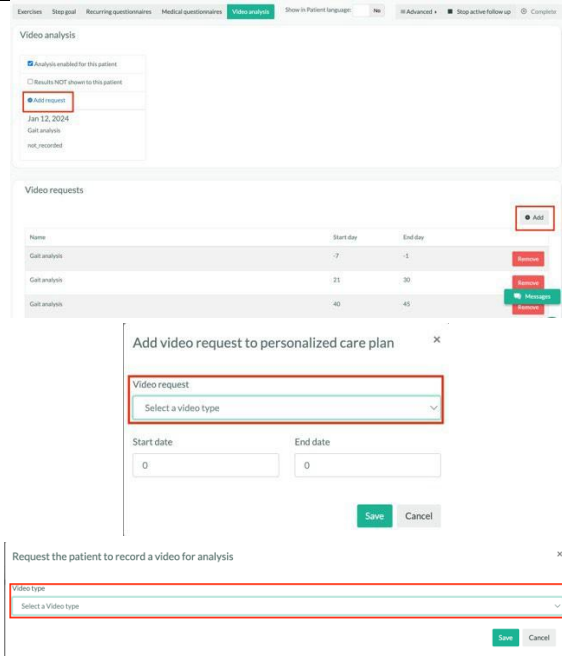
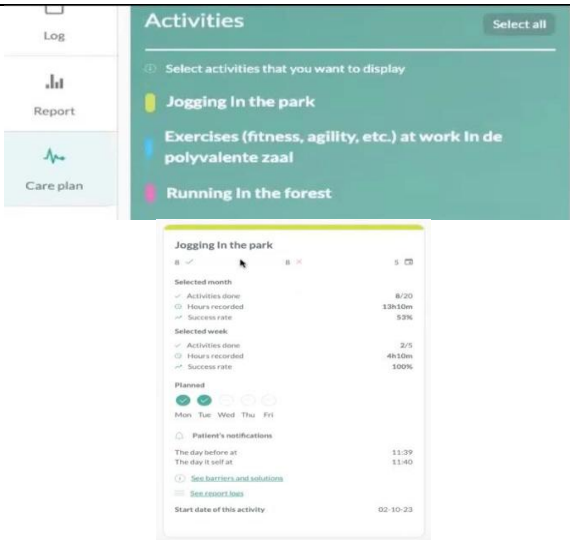
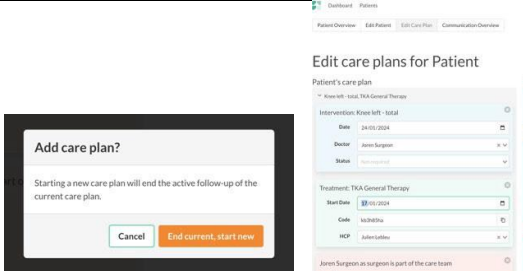
The screenshot displays the 'Questionnaires' module interface. It includes a sidebar with a list of questionnaires, a main area with a 'Questionnaires' section, and a 'Personalize' button. A 'Add questionnaire to personalized care plan' dialog box is open, showing fields for 'Questionnaire', 'Start date', 'End date', 'Frequency', 'Activation hour', and 'Activation minutes'. The 'Add questionnaire to personalized care plan' dialog box is highlighted with a red border.

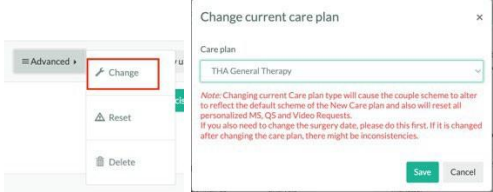
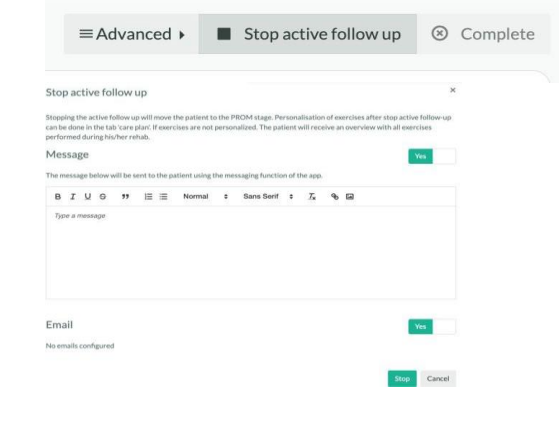
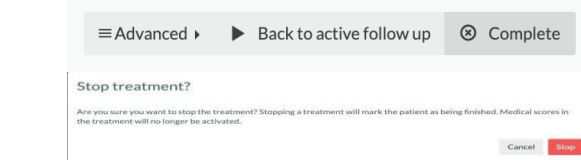
Il est possible de supprimer, de réorganiser ou d'ajouter de nouveaux questionnaires récurrents. La liste par défaut des questionnaires récurrents, incluant leur date de début, leur date de fin, leur fréquence et les rappels, est prédéfinie dans le plan de soins.

Questionnaire médical

The screenshot displays the 'Medical scores scheme' module interface. It includes a sidebar with a list of medical scores, a main area with a 'Medical scores scheme' section, and an 'Add' button. A table lists medical scores with columns for 'Name', 'Start day', 'End day', 'Provider', and 'Remove'.

Il est possible d'ajouter ou de supprimer des questionnaires médicaux du dispositif par défaut. La liste par défaut des questionnaires médicaux, incluant leurs dates de début

		et de fin, est prédéfinie dans le plan de soins.
Analyse vidéo		Les demandes d'enregistrement vidéo permettent d'obtenir des informations plus objectives, par exemple sur l'analyse de la marche ou l'amplitude des mouvements d'une articulation opérée. La liste des demandes d'enregistrement vidéo est prédéfinie dans le plan de soins. Vous pouvez ajouter une demande directement en cliquant sur le bouton «Ajouter une demande» ou la programmer pour une période plus longue en cliquant à nouveau sur le bouton «Ajouter» et en indiquant une date de début et une date de fin.
Gestionnaire d'objectifs		Le professionnel de santé peut activer ou désactiver un outil de changement comportemental permettant aux patients de définir leurs objectifs personnels, d'identifier les obstacles et les solutions pour adopter un mode de vie sain. Il peut également suivre les progrès du patient par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés.
Changement de plan de soins		Le plan de soins peut être adapté en fonction des interventions, des besoins et des souhaits du patient. Cette adaptation peut se faire via l'outil d'accueil ou via la plateforme de santé en

		cliquant sur le bouton « Avancé ». Les instructions pour modifier un plan de soins sont clairement indiquées dans les outils.
Arrêter le suivi actif		Une fois le suivi actif terminé (les éléments relevant du suivi actif sont prédéfinis dans le plan de soins), appuyez sur « Arrêter le suivi actif ». Le patient sera alors redirigé vers un suivi passif à long terme, le cas échéant (également prédéfini dans le plan de soins si un suivi à long terme est nécessaire).
		Une fois que le professionnel de santé ou le patient n'a plus d'actions à effectuer, le patient peut être marqué comme « Terminé »

MODULE BIEN-ÊTRE

Le module de bien-être est un module optionnel non médical ; les données affichées ne sont donc pas destinées à la prise de décisions cliniques.

Ces données donnent un aperçu du bien-être général du patient.

Le module de bien-être est masqué par défaut et doit être activé pour consulter les données de bien-être du patient.

ACTIVATION DU MODULE BIEN-ÊTRE

Pour activer le module bien-être, vous devez accéder aux paramètres de votre profil et activer l'option :

- Activer les données de bien-être

The screenshot shows the 'Edit Laurens Baes' profile page. The page has a header with 'moveUP Patients Onboarding' and a user menu for 'Laurens'. The main content area is titled 'Edit Laurens Baes' and contains a form with the following fields:

- First name: Laurens
- Surname: Baes
- Username: laurens@moveup.care
- Email: laurens@moveup.care
- Telephone number: +32496123456
- Social security number: Social security number
- RIZIV nr: RIZIV nr
- Address: Oltroolplein 1
- City: Gent
- Postal code: 9000
- Country: Belgium
- Title: Title
- Image: Image
- Language: English
- Authentication: Two factor authentication (checked)
- Wellness module: Enable wellness module (unchecked)

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Save', 'Set new password', and 'Manage consent/contracts'.

Lors de l'activation, une fenêtre contextuelle d'accusé de réception obligatoire s'affiche. Elle vous informe que les données du module Bien-être ne doivent pas être utilisées pour appuyer la prise de décisions cliniques.

Platform notice

Wellness module terms of use

Dear User,
You are about to activate the Wellness Module.

What is the Wellness Module?

The wellness module provides you with additional data about the general wellbeing and activity levels of your patients. The data in the Wellness Module can come from:

- imported data from general-purpose devices such as e.g. activity trackers
- manual entry by patients

This data does not come from medical devices. This means that neither the devices from which the data is imported, nor the manual entries by the patients have been verified or validated by moveUP, and therefore, it should not be used for clinical decision-making.

What is the purpose of this data?

We provide the option to see wellness data to give you a broader idea about the general wellbeing of the patients and to give you the opportunity to discuss and give further guidance regarding wellbeing.

This module is an optional module and is not linked to the medical data presented in the "Medical data" tab of the dashboard.

The data in the wellness module is not intended to be used for clinical decisions.

How to recognize the wellness data?

Wellness data is displayed in a separate tab in the dashboard or in a separate report.

Whenever wellness data is displayed in a column, together with other data it has a grey background to visually indicate that this does not concern medical data. Furthermore, it has a warning sign next to it.

Enabling/Disabling the Wellness Module

At any time, a user can enable/disable the Wellness Module in the user settings.

Acknowledgement

By clicking on the button below, you acknowledge that you have read and understood that the Wellness Module is an optional module that provides you with additional data regarding the general wellbeing of the patient. This data is not validated by moveUP and is not intended for clinical decision making.

☐ I agree

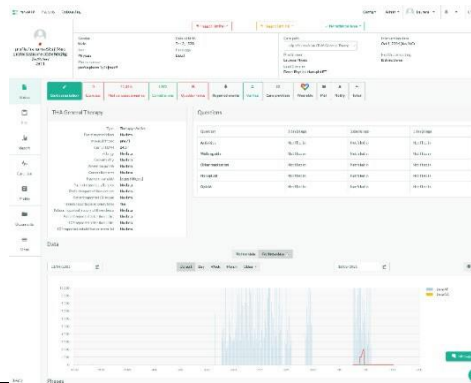
Sign

Cancel

Une fois votre compte validé, vous accédez aux données de bien-être. Cette action vous permet de consulter ces données et d'exporter les rapports de bien-être.

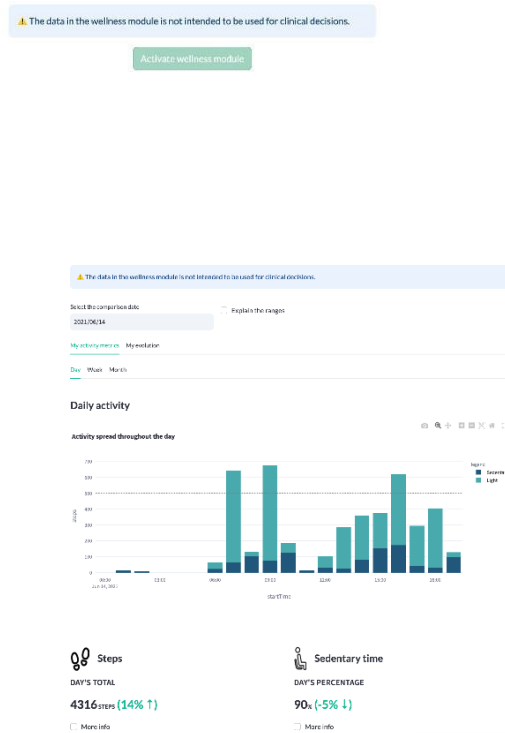
APERÇU DU MODULE BIEN-ÊTRE

Aperçu du module bien-être



Dans cet onglet, vous pourrez consulter les données de suivi du patient et observer leur évolution.

Rapport de bien-être



Vous pouvez consulter les rapports de bien-être en cas de besoin.