

Gelişmiş Oftalmik Görüntüleme Sistemi

Hızlı Başvuru Kılavuzu





Bu belge, Kullanım Talimatları'nın (IFU) okunmasının yerine geçmez. Tüm talimatlar, uyarılar, önlemler, kontrendikasyonlar ve temizlik talimatları için ICON yazılımı aracılığıyla IFU'ya erişin.

1 Seyahat Çantası İçeriği



	1. Kontrol kutusu ve dizüstü bilgisayarı ayarlayın - Kontrol kutusunu düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin - Tamamen şarj olmuş dizüstü bilgisayarı kontrol kutusunun üzerine yerleştirin - USB kablosunu dizüstü bilgisayara ve kontrol kutusunun arkasına takın <i>Not: Dizüstü bilgisayar USB-C hub'ı gerektiriyorsa verilen hub'ı kullanın</i>
	2. Pilleri takın - Pil bölmelerini açmak için kontrol kutusunun sol tarafındaki mandalları geriye çekin - Tamamen şarj olmuş pilleri, etiket tarafı yukarı ve dışarı bakacak şekilde bölmeye yerleştirin
	3. Tutucu kolunu kaldırın Kontrol kutusunun sağ tarafındaki mandalı geri çekin ve tutucu kolunu dikey konuma kilitlenene kadar kaldırın
	4. Tutucuyu takın Kolun üst iç kısmındaki mandalı geri çekin ve tutucu aparatını kanala kaydırın

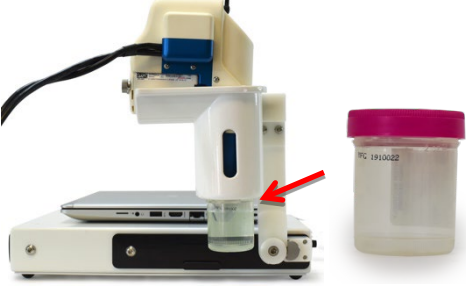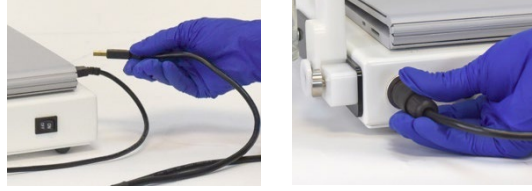	5. El aletini takın • El aletini tutucuya yerleştirin • Ucu temizleme zamanı geldiğinde, 50 ml sterilizasyon solüsyonu ile doldurulmuş bir kabı tutucunun altına vidalayın
 a b	6. El aletini bağlayın • El aleti USB kablosunu dizüstü bilgisayara takın (a) • <i>Not: Dizüstü bilgisayar USB-C hub'ı gerektiriyorsa verilen hub'ı kullanın</i> • On iki uçlu kabloyu kontrol kutusunun arkasına takın (b) • El aleti kablolarının görüntüleme için serbest olduğundan emin olun
	7. Ayak pedalını bağlayın • Ayak pedalını kontrol kutusunun yakınındaki uygun bir yere yerleştirin • Dokuz pimli kabloyu kontrol kutusunun arkasına takın

3 Sistemi Açma

- Güç düğmesine 5 saniye boyunca basın; pil durumu ışığı yanar

Bilgisayar düğmesine bir kez basın; açık olduğunda ışık yeşil renkte yanar



4 Oturum Açma

- **Kullanıcı Adı** ve **Parola** girin
- Açılır menüden **Klinik** ögesini seçin
- **Oturum Aç** ögesini seçin

User Name:


Password:

Clinic:

Sign In:

5 Klinik Ekleme veya Güncelleme


- 1) Ekranın altındaki Navigasyon Panelinden **Ayarlar** düğmesine tıklayın
 - a) Parolayı girin: 5678
- 2) **Hasta Bilgileri** sekmesini seçin
 - a) "Temp Clinic" Klinikler listesinde gösterilir. Bu varsayılan klinik.
 - b) Adı değiştirmek için "Temp Clinic"e çift tıklayın. Yeni adı girin ve Enter tuşuna basın.
 - c) Yeni bir Klinik eklemek için Klinik listesinin altındaki **Klasör** düğmesine tıklayın. Boş alana Klinik adını yazın ve Enter tuşuna basın.

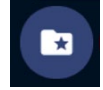

6 Kullanıcı Ekleme


- 1) **Kullanıcı** sekmesini seçin (hâlâ Ayarlar ekranında)
 - a) Güçlü parolaları etkinleştirmek için "Güçlü Parolaları Etkinleştir" onay kutusuna tıklayın. Bu, yeni kullanıcı Parolalarının en az 8 karakter, hem büyük hem de küçük harf, en az bir rakam, en az bir özel karakter gerektireceği anlamına gelir.
 - b) Sisteme kullanıcı eklemek için **Yeni Kullanıcı Ekle** düğmesine tıklayın
 - c) Bir Kullanıcı Adı ve Parola girin. Parolayı onaylamak için parolayı tekrar girin. (Parolanın son kullanma tarihine dikkat edin.)

- d) Kullanıcı için izinleri Seçme
- Kullanıcının gerçekleştirmesine izin verilecek işlevlerin yanındaki onay kutularını seçin.
 - Kullanıcının erişebileceği Kliniği/Klinikleri seçin.

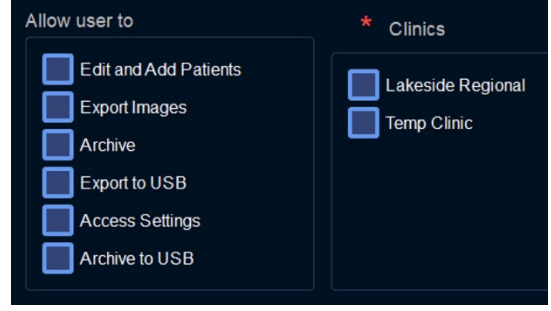

7 Tarih Formatını Ayarlama

- Tarih Formatı açılır menüsünden istediğiniz tarih formatını seçin (hâlâ Ayarlar -> Kullanıcı ekranında)
- Yeni kullanıcıyı ve tarih formatı ayarlarını kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayın.
- Ayarlar ekranından çıkmak için Navigasyon Panelinde Hastalar öğesine tıklayın.

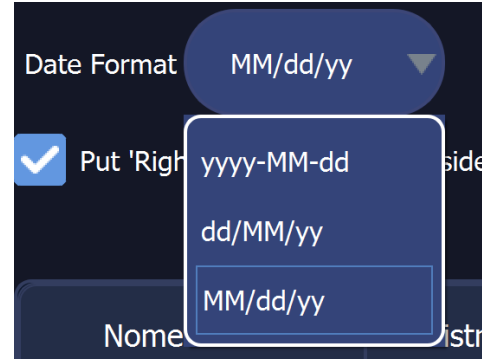


8 Windows Saat Dilimini Ayarlama

- Navigasyon panelindeki Oturumu Kapat düğmesine tıklayın
- ICON Yazılım oturum açma ekranında kapatma simgesine tıklayın
- Sistemin kapanmasını bekleyin ve ardından Shift tuşunu basılı tutarak sistemi yeniden başlatın. Bir Windows oturum açma ekranı görüntülenir.
- Windows kullanıcısı **phoenixpaints** olarak oturum açın, parola **PhoenixTech** şeklindedir


5) Başlat > Ayarlar > Saat ve Dil > Tarih ve saat kısmına gidin ve saat dilimini ayarlayın

6) **phoenixpaints** olarak oturum açmış durumdayken, ICON kamera sistemini ağa bağlamak ve bir Windows sürücü harfini paylaşılan bir klasöre eşlemek için ağ ayarlarını yapılandırmak da uygun olabilir. Bu sürücü, görüntüleri dışa aktarmak için bir hedef olarak kullanılabilir.

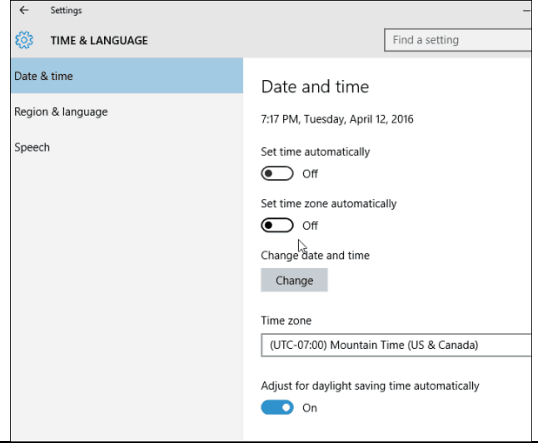



9 Hasta

- **Yeni Hasta** girmek için: İstenen hasta verilerini girin; kırmızı yıldız içeren alanlar zorunludur
 - **Kaydet** ögesini seçin
 - **Alma** Ekranına gidin
- **Hastayı bulmak** için: Boş arama alanına hasta adı veya kimliği girin
 - İstenen hastayı vurgulayın
 - **Alma** Ekranına gidin
- **Çalışma Listesini Güncellemek** için
 - Sunucuya bağlantı sağlayın
 - **Çalışma Listesini Güncelle** ögesini seçin
 - **Bugünün Çalışma Listesini Görüntüle** ögesini seçin
 - İstenen hastayı vurgulayın
 - **Alma** Ekranına gidin

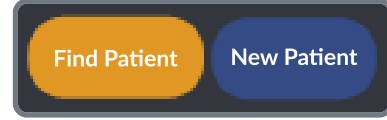

10 Alma

- Hasta bilgilerinin doğru olduğunu onaylayın
- **Çalışma Seç**
 - Yeni Çalışma Oluştur
- Görüntüleme Gözünü seçin
 - R – Sağ
 - L – Sol
- İstenirse Beyaz Dengesini Ayarla (AWB) işlemini gerçekleştirin: Beyaz Dengesini Ayarla (AWB) Hızlı Referans Sayfasını takip edin

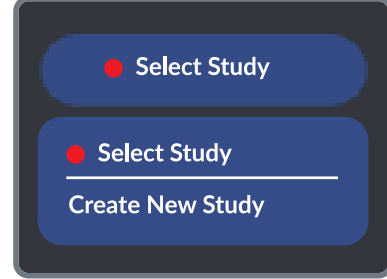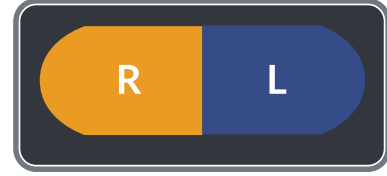

11 Alma: Kamera Kontrolleri

- Açılır menüden **Ön Ayar** ögesini seçin VEYA
- Görüntüleme için **Yoğunluk** ve **Kazanç** değerlerini manuel olarak ayarlayın



12 Alma: Görüntü Yakalama

- **Ayak Pedalı Hareketini** ayarlayın
 - Fotoğraf – Tek görüntü yakalama
 - Video – 2 dakika kaydeder
 - Flashback (FLB) – Önceki 2 saniyeyi kaydeder
- **Beyaz ışığı** aç
- Fotoğraf modunda yakala
 - Ayak Pedalı Yeşil Yakalama düğmesi



-
- Dokunmatik Ekran
 - Kamera düğmesi
 - Yüksek Dinamik Aralık (HDR) – 4 görüntü yakalar (Kazanç 0, 6, 12, 24)
 - Klavye Kısayol Tuşları
 - Video modunda yakalama
 - Ayak Pedalı Yeşil Yakalama düğmesi
 - Video kaydını başlat/duraklat
 - FLB 2 saniyelik kaydı yakalamak için bir kez basın
 - Dokunmatik Ekran
 - Videoyu başlatmak için REC düğmesi
 - Video kaydını Duraklat
 - Video kaydını Durdur
 - Oturum boyunca göz tanımını gerektiği gibi değiştirin
 - Oturum tamamlandığında **İnceleme** ekranına geçin
-

13 İnceleme: Video Kaydetme Karesi

- Bir video küçük resmi seçin
 - Video karelerinde istenen görüntüye gidin
 - **Kareyi Kaydet** düğmesini seçin
 - **Kareyi Kaydetmek** için klavye kısayolu kullanın



14 İnceleme: Medyayı Sil

- **Medyayı Sil**'i seçin
 - **Kullanıcı Parolasını** girin
 - Silinecek görüntü ve video küçük resimlerini seçmek için kaydırın
 - Medya KIRMIZI "X" ile işaretlenir
 - Komut isteminden Tamam'ı seçin; görüntüler kalıcı olarak silinir
 - İnceleme tamamlandığında **Dışa Aktar** ekranına gidin
-

- Dışa Aktarma ekranına gitmek için alt çubuktaki Dışa Aktar sekmesine tıklayın
- Hastaya Göre Ara veya Çalışma Tarihine Göre Ara
- Tümünü Seçin veya dışa aktarılacak belirli görüntüleri seçin
- Dışa Aktarma Dosya Türü ögesini seçin
 - DICOM, JPEG veya RAW (TIFF)
 - JPEG veya RAW (TIFF) için Hasta Verileri ile veya Hasta Verileri Olmadan seçeneğini belirleyin
- Dışa Aktarma Hedefi dosya konumunu seçin
- Dışa Aktar ögesini seçin
- Dışa aktarma işlemi tamamlandığında onay iletişim kutusunu inceleyin ve Tamam'ı seçin
- Dışa aktarma için harici USB kullanıyorsanız harici medyayı çıkarmadan önce USB'yi çıkar'ı seçin
- İsterseniz Raporlama ekranına gidin

Not: Hasta adlarındaki özel karakterlerden dolayı (örn. Chloë) dosya adı hatalarını engellemek için Ayarlar - Dışa Aktar/Arşivle sekmesine gidin ve aşağıda gösterildiği gibi "Soyadı" ve "Ad" seçeneklerinin işaretini kaldırın. Bu işlemle sadece dosya adındaki ad kaldırılır; tüm DICOM ve CSV dışa aktarımlarındaki hasta adı korunur.

Daha fazla bilgi için:

theneolight.com

support@theneolight.com

+1-866-934-8945


Sayfa 9 / 10

OPL-0160_B

©2025 Phoenix Technology Group, LLC. Tüm Hakları Saklıdır.


16 Temizleme Prosedürü

- Hastalar arasında önerilen temizlik prosedürleri için IFU'ya uyun
- Sistemi saklamadan önce önerilen temizleme prosedürleri için IFU'ya uyun

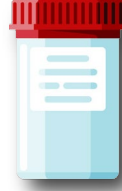

17 Sistemi Kapatma

- **Oturumu Kapat** ekranına gidin
- **Güç** ögesini seçin
- Kapatma isteminde **Tamam** ögesini seçin
- **Güç** düğmesini 5 saniye basılı tutun; pil durumu ışığı söner

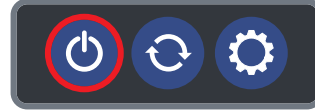

18 Sistemi Saklama

- Cihazın doğru şekilde saklanması ve kullanım arasında şarj edilmesi için IFU'ya uyun
-