

Regelschmerzen betreffen verschiedene Frauen auf unterschiedliche Weise. Es ist ein normaler Teil des Menstruationszyklus und kommt sehr häufig vor. Es kann schwerwiegende Auswirkungen auf Ihre Lebensqualität haben.

Feelgood bietet ein kleines, drogenfreies natürliches Gerät, einen Magneten, der hilft, verschiedene Symptome von Regelschmerzen und chronischen Beckenschmerzen bei Frauen zu lindern. Befestige den goldenen Magneten jeden Monat, ein paar Tage vor und während deiner Periode, diskret an deiner Unterwäsche, direkt auf deiner Haut, um die Schmerzen während der Periode zu lindern. Dieses Produkt ist die Alternative zu Schmerzmitteln, Entzündungshemmern und anderen oralen Präparaten!

Angaben?

Regelschmerzen treten in verschiedenen Formen auf. Das Produkt wurde entwickelt, um die Symptome von Regelschmerzen zu lindern, z. B. PMT (prämenstruelle Spannung), Regelschmerzen, Magenkrämpfe, Wassereinlagerungen, Brustspannen, Bauchschmerzen und IBS (Reizdarmsyndrom).

Wie funktioniert das?

Feelgood Regelschmerzen sind ein konzentrischer Magnet, der zu 100% natürlich und sicher ist. Der leistungsstarke, patentierte 3000+ Gauss Deep Penetration Magnet besteht aus Kreisen mit wechselnder Polarität, die geschaffen wurden, um die Heilungsprozesse der Natur zu beeinflussen. Der konzentrische Magnet mit seiner einzigartigen Konfiguration von konstanten und gradienten Magnetfeldern bewirkt eine Erhöhung des lokalen Blutflusses (Hall-Effekt), wodurch die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers beschleunigt und Schmerzen blockiert werden. Es gibt verschiedene Effekte:

Magnet → Erweiterung der Blutgefäße → Erhöhung der Durchblutung und des Sauerstoffs Schmerzlinderung
→ Magnet → Nervenstimulation → erzeugt Hitze → **Schmerzblockade**

Wie benutzt man?

Der **Feelgood** Periodenschmerzsmagnet ist diskret, unauffällig und einfach zu bedienen: Dein Magnet von **Feelgood** kommt in einer praktischen Box und besteht aus drei Teilen:


1. Ein goldener **Wohlfühlmagnet** für Periodenschmerzen
2. Kleiderclip (mit Kuppel für eine einfache Handhabung) und
3. Eine Packung mit 10 runden Klebepunkten.




Es gibt zwei Möglichkeiten, den **Feelgood** Periodenschmerzsmagneten zu befestigen und zu verwenden:



Anwendung mit Kleiderklammer: Mit festem Fingerdruck das Schmerzzentrum lokalisieren, positionieren Sie den goldenen Magneten in der Mitte der schmerzenden Stelle. Befestigen Sie dann den Magneten mit dem Kleiderclip an der Außenseite des Stoffes Ihrer Unterwäsche. Sie können entfernen, um die Position zu ändern.

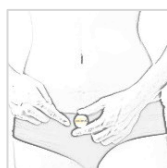

Anwendung mit Klebepunkten: Ziehen Sie das Trägerpapier von der Klebescheibe ab, platzieren Sie den Magneten in der Mitte der klebrigen Seite des Klebeclips. Der Magnet ist jetzt klebrig, so dass du diese Seite direkt dort platzieren kannst, wo du das Zentrum des Schmerzes auf deinem Körper lokalisierst. Drücken Sie die Klebescheibe fest um den Magneten herum, um sie auf Ihrer Haut zu befestigen. Nicht entfernen, um die Position zu ändern. Sobald sie auf Ihrer Haut platziert ist, hält die Klebescheibe den Magneten an Ort und Stelle. Um Irritationen empfindlicher Haut vorzubeugen, sollte die Klebescheibe idealerweise täglich ausgetauscht werden.

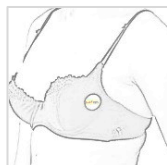

Um eine maximale Linderung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den Magneten ein oder zwei Tage vor Beginn der Menstruation aufzutragen. Durch die durchblutungsfördernde Wirkung des Regelschmerzsmagneten spürst du bereits nach wenigen Stunden eine natürlich entstehende angenehme Wärme. Setzen Sie die Anwendung fort, bis die Menstruation beendet ist. Darüber hinaus können Sie den Magneten verwenden, wenn Sie an IBS leiden: Befestigen Sie den Magneten an der Seite des Schmerzes. Falls Sie den Magneten verwenden möchten, um das Druckgefühl der Brust zu verringern und die Schwellung zu verringern, verwenden Sie die Kleiderklammer und positionieren Sie den Magneten in Ihrem BH im Bereich der maximalen Empfindlichkeit.

Kontraindikationen/Warnung

Feelgood Periodenschmerzsmagnete sind stark, aber zerbrechlich und sollten immer mit Vorsicht behandelt werden. Fallen sie auf harten Boden, können sie beschädigt werden und brechen. **Feelgood** Periodenschmerzsmagnete sollten niemals direkt über einer offenen Wunde platziert werden. Es sollte nicht von Personen verwendet werden, die Herzschrittmacher verwenden. Wenn Sie es während der Schwangerschaft anwenden möchten, konsultieren Sie zuerst Ihren Arzt. **Feelgood** Periodenschmerzsmagnete haben keine bekannten unangenehmen Nebenwirkungen.