

e-ASPECTS®

Gebruikshandleiding

Versie 14.2

e-ASPECTS-MAN-14.2 - 2026-01-28

e-ASPECTS maakt deel uit van Brainomix 360

V.S.-patent Nr. 10.902.596

EU-octrooi nr. 3701495

Historische herzieningen (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Inleiding
 - 1.1 Overzicht
 - 1.2 ASPECTS
- 2 Beoogd gebruik
 - 2.1 Indicaties
 - 2.2 Tegenindicaties
 - 2.3 Waarschuwingen
 - 2.4 Voorzorgsmaatregelen
 - 2.5 Klinische voordelen
 - 2.6 Gebruiksomgeving
- 3 Installatie en training
 - 3.1 Installatie
 - 3.2 Opleiding
- 4 Systeemspecificaties
 - 4.1 Server
 - 4.2 Klanten
 - 4.3 Talen
 - 4.4 Prestaties en levensduur
- 5 Scanner en beeldcompatibiliteit
- 6 Cyberbeveiliging
- 7 Toegangscontrole en meldingen
 - 7.1 bezig met inloggen
 - 7.2 bezig met uitloggen
 - 7.3 Uw wachtwoord wijzigen
 - 7.4 Tweefactorauthenticatie
 - 7.5 Oproepbaarheidsstatus
 - 7.6 App-meldingen
- 8 Desktop-interface
 - 8.1 Lijst met patiënten

- 8.2 Patiënten zoeken
- 8.3 Patiënt Viewer
- 8.4 e-ASPECTS Weergave
- 8.5 Handmatige resultaten
- 9 Mobiel scherm
 - 9.1 Lijst met patiënten
 - 9.2 Patiënt Viewer
 - 9.3 Berichten
 - 9.4 Een patiënt aanmerken voor interventie
- 10 Resultaatoutputs
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Cloudsynchronisatie
 - 10.3 Mobiele-app-meldingen
 - 10.4 Patiëntrapporten
- 11 Uploaden en verwerken
 - 11.1 Scans verwerken
 - 11.2 De DICOM-log
- 12 Beheer
- 13 Probleemoplossing
- 14 Onderhoud en upgrades
- 15 Rapportage incidenten
- 16 Ontmanteling
- 17 Symbolen
- 18 Een papieren exemplaar aanvragen

Informatie over registratie

	Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Verenigd Koninkrijk	 0197					
		EU/EEA/Turkije <table><tr><td> EU REP </td><td>Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nederland</td></tr><tr><td></td><td>Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Ierland</td></tr></table>		EU REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nederland		Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Ierland
EU REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nederland						
	Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Ierland						
	+44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)						
	LinguaVox, S.L. Pl. Portal de Elche, 6 03001 Alicante Spanje	Zwitserland <table><tr><td> CH REP </td><td>Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Zwitserland</td></tr><tr><td></td><td>Stryker Osteonics AG Burgunderstrasse 13 4562 Biberist Zwitserland</td></tr></table>		CH REP	Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Zwitserland		Stryker Osteonics AG Burgunderstrasse 13 4562 Biberist Zwitserland
CH REP	Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Zwitserland						
	Stryker Osteonics AG Burgunderstrasse 13 4562 Biberist Zwitserland						

1 Inleiding

1.1 Overzicht

Brainomix 360 e-ASPECTS (hierna zowel 'Brainomix 360 e-ASPECTS' als 'e-ASPECTS' genoemd) is een medisch softwarehulpmiddel voor het verwerken van CT-scans (Computer Tomography) van de hersenen van patiënten met een beroerte. Het wordt geleverd als een webservice, waarbij gebruikers toegang hebben tot het systeem via een webbrowser op elke machine met een verbinding met de Brainomix 360 software (bijv. een LAN- of internetverbinding) en kan verbinding maken met andere DICOM-compatibele apparaten via een lokale netwerkverbinding, waaronder CT-scanners en PACS-systemen.

Normaal gesproken moeten niet-contrast CT-scans van herseninfarctpatiënten via een DICOM C-STORE operatie van een CT-scanner naar de Brainomix 360 software worden gestuurd. Brainomix 360 kunnen worden geconfigureerd om de gegenereerde resultatenreeksen automatisch over te brengen naar een PACS via een DICOM C-STORE bewerking. Brainomix 360 kunnen bovendien worden geconfigureerd om resultaten en patiëntrapporten naar aanvullende bestemmingen te verzenden wanneer de software een scan verwerkt. Deze bestemmingen kunnen Brainomix 360 Cloud of andere Brainomix 360-instanties en Brainomix 360 Mobile-appmeldingen omvatten.

1.2 ASPECTS

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) is een systeem van topografische scoretoewijzing dat de zone van de hersenen die door de beroerte werd getroffen in 10 interessegebieden verdeelt. Er zijn zes corticale zones (M1-M6), en vier basale-gangliazones (nucleus caudatus, nucleus lentiformis, insula en de capsula interna). Voor elk van de gedefinieerde punten wordt één punt afgetrokken voor een zone met vroege ischemische verandering, zoals parenchymale hypoattenuatie. Een nulscore wijst op diffuse ischemische schade in de gehele getroffen hemisfeer, terwijl een normale CT-scan van de hersenen een ASPECTS van 10 punten krijgt toegewezen.

Merk op dat niet-acute ischemische veranderingen niet worden meegerekend in de berekening van een ASPECTS-score.

pc-ASPECTS

Een aanvullend scoresysteem voor gebruik bij beroerte in de posterieure circulatie is pc-ASPECTS (posterior-circulation ASPECTS) zoals beschreven in Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>). Het is onderverdeeld in 8 aandachtzones: thalami (elk 1 punt), occipitale kwabben (elk 1 punt), middenhersenen (2 punten), pons (2 punten), cerebellaire hersenhelft (elk 1 punt). Een normale CT-scan van de hersenen krijgt een pc-ASPECTS-score van 10 punten toegewezen.

Merk op dat de pc-ASPECTS-score, acute en niet-acute ischemische veranderingen in de pc-ASPECTS-zones niet worden berekend door e-ASPECTS.

2 Beoogd gebruik

Dit gedeelte bevat belangrijke veiligheidsinformatie over het gebruik van Brainomix 360 e-ASPECTS

Brainomix 360 e-ASPECTS is een softwarepakket voor beeldverwerking dat wordt gebruikt door getrainde professionals, waaronder beroertartsen en radiologen. De software draait op standaard 'off-the-shelf' hardware (fysiek of gevirtualiseerd). Gegevens en beelden worden verkregen via beeldvormingsapparatuur die voldoet aan DICOM. Dit omvat DICOM-bestanden die zijn geüpload via een webinterface.

Brainomix 360 e-ASPECTS biedt zowel analyse- als weergavemogelijkheden voor CT-datasets van herseninfarctpatiënten. De analysemogelijkheden bestaan uit het detecteren van veranderingen in het beeld die verband houden met een beroerte, het berekenen van de omvang van deze veranderingen (zoals ASPECTS, de Alberta Stroke Program Early CT Score) en het visualiseren van deze veranderingen.

2.1 Indicaties

1. Brainomix 360 e-ASPECTS is geïndiceerd als hulpmiddel bij de diagnose en behandeling van acuut hemorragisch of ischemisch herseninfarct. Voor ischemisch herseninfarct omvat dit patiënten met een MCA-occlusie (middelste hersenarterie) of intracraniële ICA-occlusie (interne halsslagader).
2. Brainomix 360 e-ASPECTS is geïndiceerd voor gebruik op niet-contrast hersen-CT-scans bij deze patiënten als beslissingsondersteunend hulpmiddel, dat geautomatiseerde beeldanalyse en ASPECTS-scoring biedt.
3. Brainomix 360 e-ASPECTS is geïndiceerd voor gebruik op niet-contrast hersen-CT-scans voor het markeren van vermoedelijke abnormale hyperdensiteiten in het parenchym door middel van geautomatiseerde beeldanalyse.
4. Brainomix 360 e-ASPECTS is geïndiceerd voor gebruik op niet-contrast hersen-CT-scans voor het identificeren van vermoedelijke occlusies in de intracraniële ICA en de MCA M1-tak door middel van geautomatiseerde beeldanalyse.

2.2 Tegenindicaties

Brainomix 360 e-ASPECTS is niet geschikt voor gebruik op hersenscans gerelateerd aan:

- tumoren of abcessen
- coils, shunts, embolisatie of bewegingsartefacten
- intracraniële vasculaire pathologieën zoals arteriële aneurysma's, arterioveneuze malformaties of veneuze trombose

Brainomix 360 e-ASPECTS mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke of andere beperking die hun vermogen om de uitvoer van de software waar te nemen en te interpreteren belemmert of waardoor zij niet in staat zijn om beelden te interpreteren zonder hulp van e-ASPECTS om eventuele uitvoer te bevestigen.

2.3 Waarschuwingen

	Brainomix 360 e-ASPECTS mag niet als enige basis voor diagnose worden gebruikt. De output mag niet worden beschouwd als een definitieve diagnose. Brainomix 360 e-ASPECTS mogen alleen worden gebruikt door een opgeleide professional met kennis van CT-beeldinterpretatie, als hulpmiddel om beelden te interpreteren.
	Brainomix 360 e-ASPECTS mag alleen worden gebruikt door professionals die een adequate training hebben gehad in het gebruik van de software door gekwalificeerde trainers van Brainomix of geautoriseerde derden.
	Brainomix 360 e-ASPECTS detecteren mogelijk niet alle chronische (oude) infarcten of classificeren deze onjuist als verse ischemische schade.
	Brainomix 360 e-ASPECTS zullen vroege ischemische veranderingen niet in elke scan correct identificeren en kunnen in elk gebied fout-positieven of fout-negatieven genereren. De gebruiker moet zijn eigen expertise in CT-beeldanalyse gebruiken om te controleren of de uitvoer van de software correct is.
	Brainomix 360 e-ASPECTS detecteren/tonen mogelijk niet alle abnormale hyperdensiteiten, zelfs als een verdachte ICH-melding wordt ontvangen, of markeren mogelijk ten onrechte gebieden van het beeld, zelfs bij afwezigheid van een verdachte ICH-melding.
	Brainomix 360 e-ASPECTS is niet bedoeld voor primaire interpretatie van CT-beelden. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij de evaluatie door een arts.
	Brainomix 360 e-ASPECTS mogen niet worden gebruikt bij ischemische beroerte buiten het ICA/MCA-gebied.
	Gevallen met structurele afwijkingen zoals tumoren of andere beeldvormingsartefacten kunnen de symptomen van een ischemische beroerte nabootsen en de prestaties van Brainomix 360 e-ASPECTS beïnvloeden. Brainomix 360 e-ASPECTS mogen in deze gevallen niet worden gebruikt. Andere gevallen met een niet-ischemische beroerte en structureel normale scans kunnen ook de symptomen van een ischemische beroerte nabootsen en moeten niet worden verwerkt met Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Brainomix 360 e-ASPECTS mogen alleen worden geïnstalleerd binnen een beveiligd netwerk dat is onderworpen aan passende beschermende maatregelen, waaronder antivirus-, antimalware- en firewallbescherming.
	Om het risico van onbevoegd gebruik van Brainomix 360 e-ASPECTS te minimaliseren, dienen gebruikers geen toegangsgegevens te delen en uit te loggen wanneer ze het systeem niet gebruiken.
	Gebruikers die toegang hebben tot de webgebruikersinterface van Brainomix 360 e-ASPECTS moeten ervoor zorgen dat zij analyses of diagnostische beeldweergave uitvoeren met behulp van een goedgekeurde radiologieweergave.
	Brainomix 360 e-ASPECTS is niet bedoeld voor diagnostische beeldweergave bij gebruik vanaf mobiele apparaten.

	Voordat de verwerkingsresultaten worden geëvalueerd, moet de nauwkeurigheid van de automatisch gesegmenteerde ASPECTS-regio's worden gecontroleerd. Als er onenigheid of bezorgdheid is over de kwaliteit van de segmentatie van de ASPECTS-regio, moeten gebruikers de resultaten handmatig bewerken of negeren.
	Brainomix 360 e-ASPECTS is geen vervanging voor de angiografie in de diagnostiek van ischemisch herseninfarct – het biedt prioritering van de workflow en notificatie.
	In het geval dat Brainomix 360 e-ASPECTS geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, of als verwerkte scans niet kunnen worden opgehaald, moeten gebruikers vertrouwen op standaardmethoden voor beeldinterpretatie volgens de zorgstandaard.
	Gebruikers moeten ervoor zorgen dat meldingen zijn ingeschakeld op hun mobiele Android- of iOS-apparaat om een pushmelding te ontvangen.
	Een melding kan mogelijk niet worden gegenereerd of kan worden vertraagd om verschillende redenen, inclusief maar niet beperkt tot: ▪ Algoritmische gegevensproblemen of verwerkingsfouten tijdens de analyse van scans (zie Voorzorgsmaatregelen voor meer informatie) ▪ Artefacten, beweging of andere factoren die de kwaliteit van de registratie verminderen ▪ Gebrek aan schijfruimte om nieuwe scans te verwerken ▪ Storing in onderliggend serverplatform ▪ Trage netwerkverbinding ▪ Trage verbinding van scanner/PACS naar de server Brainomix 360 ▪ Trage verbinding met de Brainomix 360 Cloud-service via internet ▪ Vertragingen in de mobiele meldingsdiensten van Apple of Google ▪ Slecht signaal op het ontvangende mobiele apparaat ▪ Energiebesparende modi van sommige mobiele apparaten kunnen meldingen vertragen

2.4 Voorzorgsmaatregelen

	De prestaties van Brainomix 360 e-ASPECTS worden beperkt door de kwaliteit van het ingevoerde CT-beeld. Als Brainomix 360 e-ASPECTS gegevens van slechte kwaliteit, ongeldig of beschadigd ontvangt, kan dit van invloed zijn op het vermogen van het systeem om resultaten effectief te verwerken. De gebruiker moet de afbeelding daarom handmatig inspecteren op scannerartefacten en afbeeldingen van slechte kwaliteit om onjuiste resultaten te voorkomen
	Brainomix 360 e-ASPECTS is afhankelijk van de juiste werking van het onderliggende serverplatform waarop het is geïnstalleerd en is niet bedoeld om te worden gebruikt als gegevensopslag. Resultaten en oorspronkelijke data dienen te worden opgeslagen in een PACS-systeem en op passende wijze te worden geback-up.
	Alle patiënten dienen adequate zorg te ontvangen voor hun symptomen, inclusief angiografie en/of andere passende zorg conform de standaard klinische praktijk, ongeacht de output van Brainomix 360 e-ASPECTS.

	Brainomix 360 e-ASPECTS is niet bedoeld als rule-out hulpmiddel; gevallen die door het systeem zijn verwerkt zonder melding voor vermoedelijke LVO mogen daarom niet worden opgevat als uitsluiting van een LVO. Alle gevallen dienen angiografie te ondergaan, conform de standaard stroke-work-up.
	Voorzichtigheid is geboden bij het beoordelen van scans, omdat Brainomix 360 e-ASPECTS een melding voor vermoedelijke LVO kan genereren zonder dat een Hyperdense Vessel Sign op de scan wordt geïdentificeerd, en omdat het geen melding voor vermoedelijke LVO kan genereren ondanks dat een Hyperdense Vessel Sign wél wordt geïdentificeerd.
	Brainomix 360 e-ASPECTS is uitsluitend gevalideerd en bedoeld voor gebruik bij volwassen patiëntpopulaties. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen is niet vastgesteld.

2.5 Klinische voordelen

Het primaire voordeel van Brainomix 360 e-ASPECTS is om de beoogde gebruiker een referentie ASPECTS-score te bieden met de gevoeligheid en specificiteit op het niveau van een expert.

2.6 Gebruiksomgeving

Brainomix 360 e-ASPECTS is bedoeld voor gebruik op desktop- of mobiele apparaten die door de gezondheidszorgorganisatie zijn goedgekeurd voor klinisch gebruik. Zowel de desktop- als de mobiele weergave biedt voordelen van het apparaat; mobiele voorbeeldafbeeldingen mogen echter niet worden gebruikt als hulpmiddel bij diagnostische metingen.

3 Installatie en training

Vóór het eerste gebruik van Brainomix 360 e-ASPECTS is installatie van de software en training voor de gebruiker(s) vereist.

3.1 Installatie

Brainomix 360 e-ASPECTS kunnen voor uw organisatie worden geïnstalleerd via een cloudgebaseerde serverimplementatie of een lokale fysieke serverinstallatie. Voorafgaand aan de installatie verzamelt Brainomix (of een geautoriseerde distributeur) alle benodigde installatie-informatie, waaronder locatie, stroom- en netwerkvereisten en systemen van derden die mogelijk samenwerken met de Brainomix 360 e-ASPECTS software. Neem contact op met Brainomix of de geautoriseerde distributeur met betrekking tot de methode en vereisten voor installatie.

Om de software op mobiele apparaten (smartphone en tablet) te gebruiken, downloadt u de app Brainomix 360 Mobile op uw apparaat:

- App Store (voor iOS-apparaten) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (voor Android-apparaten) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Volg de instructies van uw mobiele apparaat om het installatieproces te voltooien.

3.2 Opleiding

Het gebruik van Brainomix 360 e-ASPECTS vereist competentie in de interpretatie van niet-contrast CT-scans voor de behandeling van patiënten met een acute ischemische beroerte. Training is vereist voor het eerste gebruik van de software. De training wordt vooraf georganiseerd en gegeven door gekwalificeerde trainers van Brainomix (of door Brainomix aangestelde externe trainers) op het moment van de eerste installatie aan de klinische en/of IT-vertegenwoordiger(s) van uw organisatie. Vervolgens kunnen nieuwe gebruikers worden getraind in het gebruik van de software door de aangewezen hoofdtrainer(s) van uw organisatie. Brainomix zal laten weten of er nieuwe training nodig is na de eerste implementatie. Gelieve voor vragen over de training contact op te nemen met de hoofdtrainer(s) van uw organisatie of neem contact op met Brainomix via support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>)

4 Systeemspecificaties

4.1 Server

Het volgende moet worden beschouwd als minimumspecificaties voor betrouwbaar gebruik van de toepassing.

Processor	x86-64 compatibele processor met 4 kernen op 3,5+ GHz met ondersteuning voor AVX- instructies (bijv. Intel Xeon, AMD EPYC)
Geheugen	16 GB
Schijf	500GB
Netwerk	1Gb Ethernet
Besturingssysteem	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Klanten

De volgende webbrowsers en platforms moeten worden beschouwd als minimumvereisten voor een betrouwbare werking van de webgebruikersinterface.

Webbrowser	Ondersteunde versie
Google Chrome	Laatste versie
Mozilla Firefox	Laatste versie
Microsoft Edge	Laatste versie
Mobile Safari (iOS)	Laatste versie

Platform	Minimale specificaties
PC (desktop of laptop)	Geheugen: 4 GB RAM Schermgrootte: 13.3 inch en hoger Schermresolutie: 1024 x 768 Processor: Intel of AMD CPU
Tablet	Geheugen: 2 GB RAM Schermgrootte: 9.4 inch en hoger Schermresolutie: 2048 x 1536
Mobiele telefoon (iPhone of Android)	Geheugen: 2 GB RAM Schermgrootte: 4.7 inch en hoger Schermresolutie: 1334 x 750

4.3 Talen

De volgende talen worden ondersteund in de huidige versie van de software.

- Bulgaars (bg)
- Tsjechisch (cs)
- Welsh (cy)
- Duits (de)
- Grieks (el)
- Engels (en)
- Spaans (es)
- Fins (fi)
- Frans (fr)
- Kroatisch (hr)
- Hongaars (hu)
- Italiaans (it)
- Lets (lv)
- Litouws (lt)
- Nederlands (nl)
- Pools (pl)
- Portugees (pt)
- Portugees (Brazilië) (pt-br)
- Roemeens (ro)
- Servisch (sr)
- Slowaaks (sk)
- Sloveens (sl)
- Zweeds (sv)
- Turks (tr)

4.4 Prestaties en levensduur

De volgende prestatiespecificaties gelden voor de huidige versie van de software.

Verwerktijd (per CT-scan)	≤ 1 minuut (na ophalen uit het PCS of na voltooiing upload)
Gevoeligheid	avg. min. 50%
Specificiteit	gem. min. 94%

Een afzonderlijk technisch informatieblad voor het Brainomix 360 platform met informatie die relevant is voor de IT-afdeling van uw organisatie wordt bij de eerste installatie verstrekt en is op verzoek verkrijgbaar.

De productlevensduur van Brainomix 360 e-ASPECTS is onbepaald voor de huidige softwareversie en voor de duur van de gecontracteerde dienstverlening wanneer het wordt ingezet op een virtuele machine die regelmatig software-updates van Brainomix ontvangt.

5 Scanner en beeldcompatibiliteit

De Brainomix 360 e-ASPECTS software is ontworpen om te werken met niet-contrast CT-scans die via het DICOM-protocol zijn verzonden. Deze scans moeten de volgende kenmerken hebben:

Snededikte	2 mm maximale snededikte
Acquisitievolume	Enkele cerebrumsequentie van cirkel-van-Willis-niveau of lager, tot aan de vertex
Reconstructiemethode	Zachte weefselkernel (niet overmatig gladstrijken). Iteratief, deep learning of FBP-reconstructie kunnen worden gebruikt, zolang de kernelgrootte niet te groot is.
Venster	Hersenvenster (geen botvenster)

Het gebruik van dikkere snedes of een overmatig lage dosis kan leiden tot de introductie van beeldartefacten en daardoor tot verminderde scoringsprestaties. Het gebruik van het verkeerde venster leidt er meestal toe dat Brainomix 360 e-ASPECTS de scan niet kunnen verwerken.

6 Cyberbeveiliging

Brainomix 360 e-ASPECTS is geïnstalleerd op een server (fysiek of virtueel) binnen het ziekenhuisnetwerk en is als zodanig mogelijk kwetsbaar voor malware of virussen die het ziekenhuisnetwerk binnendringen waarin Brainomix 360 e-ASPECTS is ingesloten, of voor enige andere vorm van onbevoegde toegang.

Brainomix 360 e-ASPECTS vormt geen specifieke kwetsbaarheid voor het ziekenhuisnetwerk waarin het is opgenomen en zal waarschijnlijk niet opzettelijk worden misbruikt. Als dergelijke risico's zich echter voordoen, kunnen ze leiden tot corruptie of verlies van verwerkingsgegevens die worden ontvangen, opgeslagen of verzonden, corruptie, verlies of beschadiging van opgeslagen configuratiegegevens of onderbreking of verhindering van de normale werking.

Brainomix 360 e-ASPECTS is ontworpen en ontwikkeld met functies en vereisten om deze cyberbeveiligingsrisico's te beperken. Het systeem is zo ontworpen dat:

- Gebruikerstoegang kan worden beperkt en gecontroleerd
- Gegevensopslagcomponenten zijn niet toegankelijk via een netwerk anders dan via Brainomix web- servicecomponenten Alleen het minimum aantal poorten dat nodig is voor alle functionaliteit is opengelatenservicecomponenten van Brainomix
- Alleen het minimum aantal poorten dat nodig is voor alle functionaliteit is opengelaten
- Gegevensoverdracht over niet-vertrouwde verbindingen is beveiligd en versleuteld
- Brainomix kan het systeem op afstand monitoren en indien nodig beveiligingsupdates installeren

Brainomix 360 e-ASPECTS is ontworpen om een gelaagd autorisatiemodel te gebruiken op basis van gebruikersrollen. Dit zijn standaardgebruikers die toegang hebben tot het systeem en het gebruiken, en beheerders die extra rechten hebben om:

- Toegang tot patiëntgegevens of systeemconfiguratie
- Instellen en beheren van beveiligingsopties
- Verwijderen van patiëntgegevens/scans
- Wijzigen of verwijderen van gebruikers

Het installatiepakket voor Brainomix 360 e-ASPECTS bevat lokale firewall-, antivirus- en antimalwarebescherming voor de server. Deze kunnen worden gewijzigd of aangepast aan het lokale beveiligingsbeleid; het is echter belangrijk dat beheerders contact opnemen met Brainomix support voordat ze deze standaardbeveiliging verwijderen of opnieuw configureren om te voorkomen dat de beveiliging van het systeem in gevaar wordt gebracht.

Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, bevat Brainomix 360 e-ASPECTS ingebouwde gebruikersnaam/wachtwoord- en twee-factor authenticatiemechanismen die worden beschreven in het hoofdstuk Toegangsbeheer van deze gebruikershandleiding.

Als gebruikers of beheerders vermoeden dat de inloggegevens van een gebruiker zijn gecompromitteerd, moet het wachtwoord onmiddellijk worden gewijzigd of moet het account worden uitgeschakeld.

Wachtwoorden kunnen worden ingesteld en opnieuw worden ingesteld door gebruikers en/of beheerders, maar moeten voldoen aan de minimale vereisten voor wachtwoordcomplexiteit. De minimale complexiteit van wachtwoorden is standaard ingesteld, maar kan worden geconfigureerd door beheerders om opties voor meer complexiteit mogelijk te maken waar dit vereist of opgelegd is door het lokale beveiligingsbeleid.

Deze opties omvatten het instellen van het verplichte gebruik van speciale tekens, het maken van zwarte lijsten van wachtwoorden die niet gebruikt mogen worden en het instellen van de maximale leeftijd voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Tweefactorauthenticatie is standaard optioneel, maar kan ook worden afgedwongen door beheerders.

Brainomix 360 e-ASPECTS kunnen worden ingesteld om automatisch gebruikersaccounts te deactiveren die gedurende een bepaalde periode geen activiteit hebben gehad en bevatten voor actieve gebruikers ook een automatische time-outfunctie die gebruikers na een periode van inactiviteit uitlogt.

Om het risico van ongeautoriseerd gebruik van Brainomix 360 e-ASPECTS te minimaliseren, moeten gebruikers geen toegangsgegevens delen en onmiddellijk uitloggen als ze het systeem niet gebruiken.

Beheerders kunnen er ook voor kiezen om Active Directory gebruikersaccounts (via LDAP) te gebruiken in plaats van het standaard Brainomix authenticatiesysteem.

Hoewel er verschillende cyberbeveiligingsmaatregelen zijn ontworpen en geïmplementeerd, hangt het succesvol beperken van beveiligingskwetsbaarheden voor Brainomix 360 e-ASPECTS af van de beveiligingsinfrastructuur van de netwerkomgeving van het ziekenhuis, best practice door gebruikers en beheer door beheerders.

Brainomix 360 e-ASPECTS mogen alleen worden geïnstalleerd binnen een beveiligd ziekenhuisnetwerk dat wordt beschermd door een firewall op netwerkniveau, antivirus- en antimalwaresoftware en, idealiter, Intrusion Detection Software (IDS).


Klantenmachines die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de server waarop Brainomix 360 e-ASPECTS worden gehost, moeten ook worden beschermd door antivirus-/antimalwaresoftware en IDS en moeten up-to-date worden gehouden met beveiligingspatches en -updates.

7 Toegangscontrole en meldingen


7.1 Bezig met inloggen

1. Ga naar het Brainomix 360- of Brainomix 360 Cloud-serveradres in uw webbrowser.
2. U wordt gevraagd om in te loggen als u de applicatie recentelijk niet hebt gebruikt vanuit uw huidige webbrowser. Uw systeembeheerder kan u de inloggegevens verstrekken.


Brainomix 360:

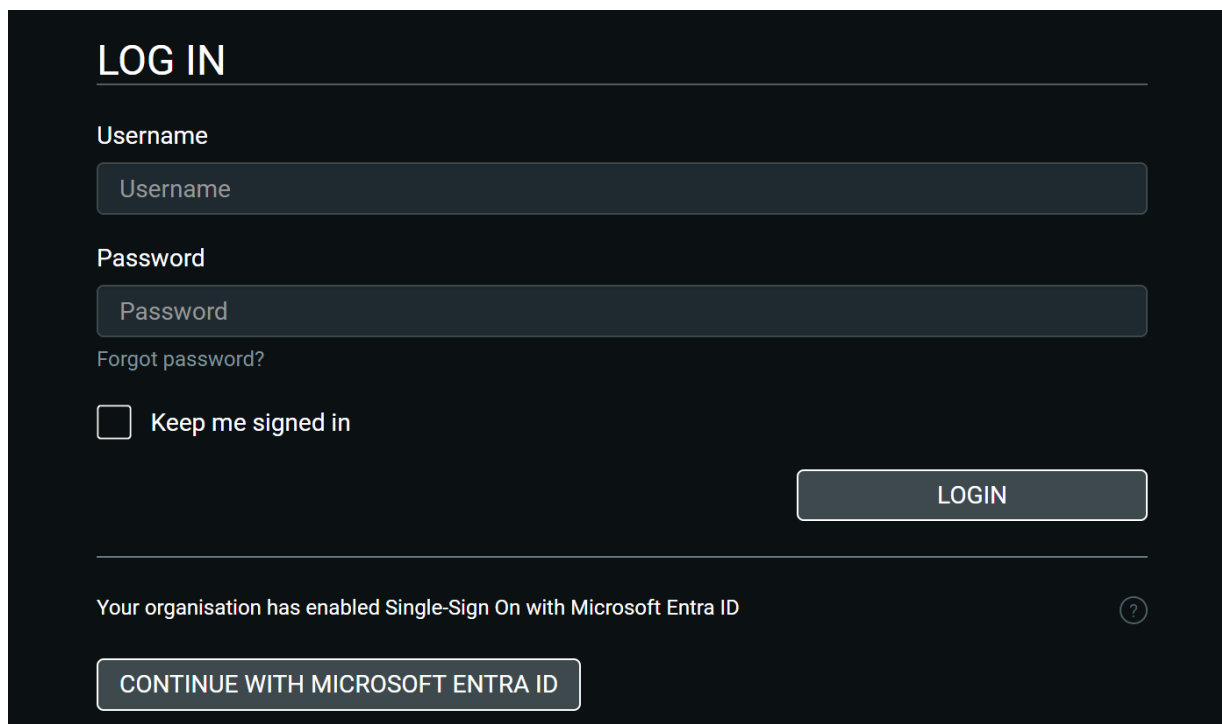


Brainomix 360 Cloud:

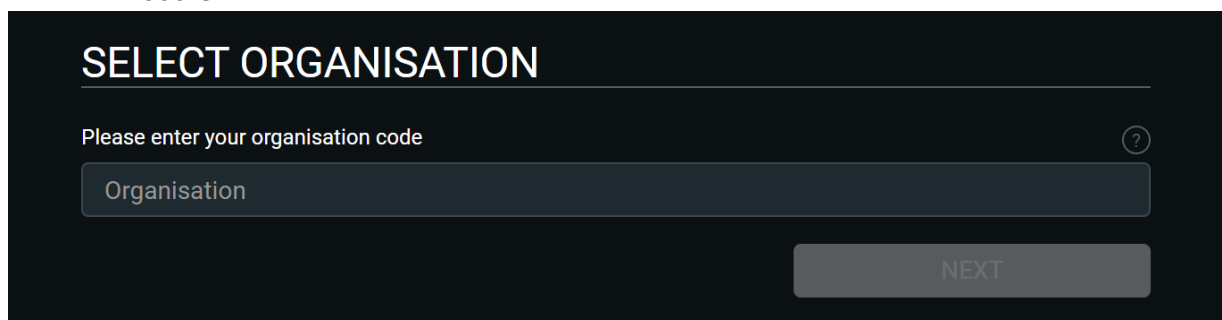

1. Als u zich aanmeldt bij Brainomix 360 Cloud, voer dan uw organisatie-ID in.
 2. Als uw organisatie Single Sign On heeft ingeschakeld, klikt u op 'Doorgaan met Microsoft Entra ID' en volgt u het standaard aanmeldproces. Anders:
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. Laat het vakje leeg als u automatisch wilt worden afgemeld na 1 uur of wanneer u de browser sluit. Vink het vakje aan als u aangemeld wilt blijven op deze computer totdat u zich afmeldt.
 5. Klik op de knop Inloggen
3. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een e-mail aanvragen om uw wachtwoord te resetten, door te klikken op Wachtwoord vergeten? ('Forgot password?').

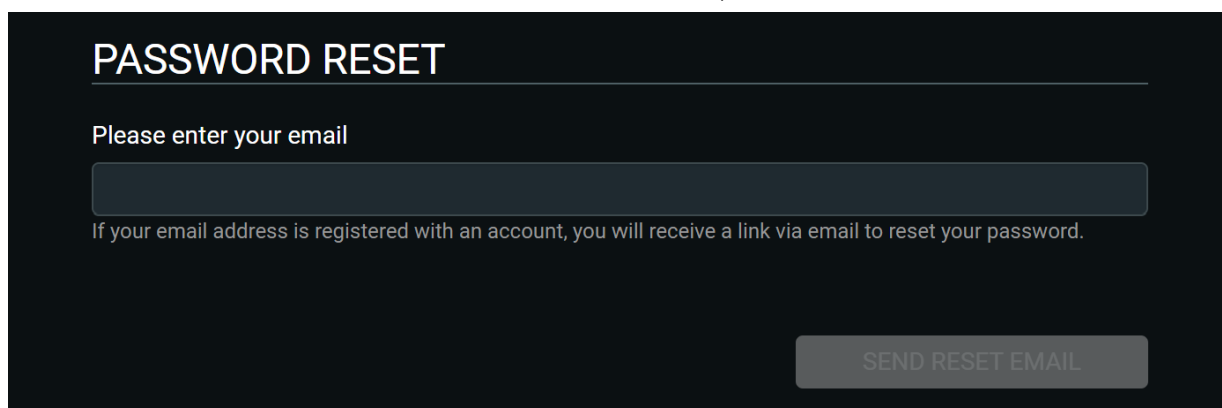


4. Als u zich hebt ingeschreven op tweefactorauthenticatie, wordt u mogelijk verzocht een tokencode in te voeren vanuit uw Authenticator-app.

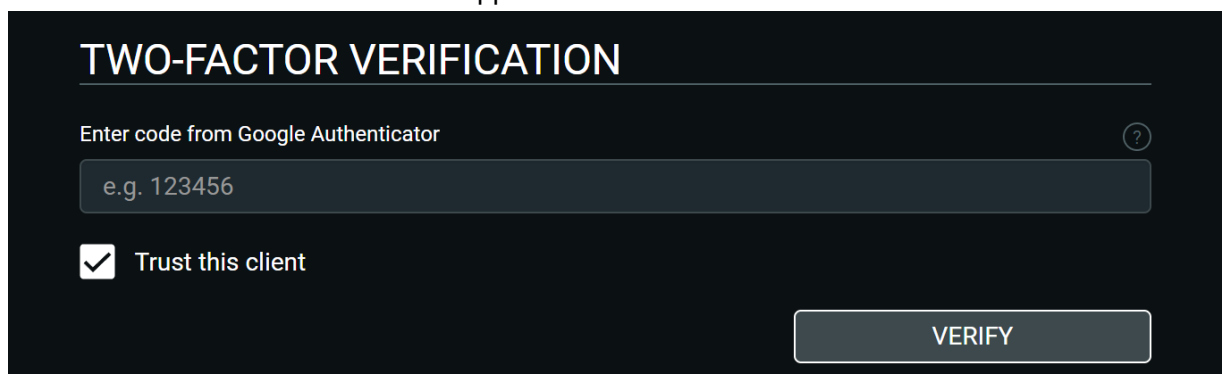

- Selecteer Deze klant vertrouwen ('Trust this client') om te voorkomen dat u op dit apparaat of deze browser nogmaals om een tokencode wordt gevraagd. Gebruik deze optie niet op gedeelde apparaten.
- Als u van uw Authenticator-app geen code kunt ontvangen, kunt u een van de ongebruikte herstelcodes invoeren uit de bij inschrijving op tweefactorauthenticatie verstrekte lijst.

7.2 Bezig met uitloggen


1. Open het menu en scroll naar beneden.

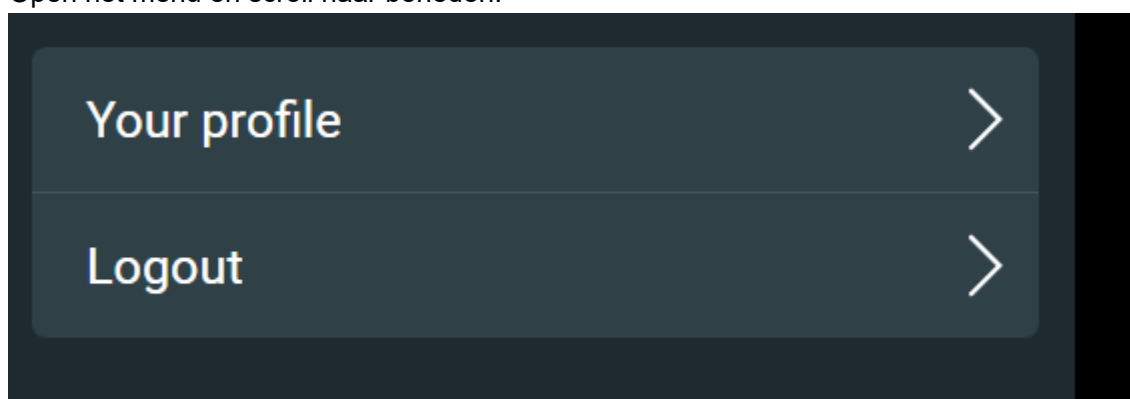

2. Klik op **Uitloggen**

7.3 Uw wachtwoord wijzigen


1. Open het menu en scroll naar beneden.

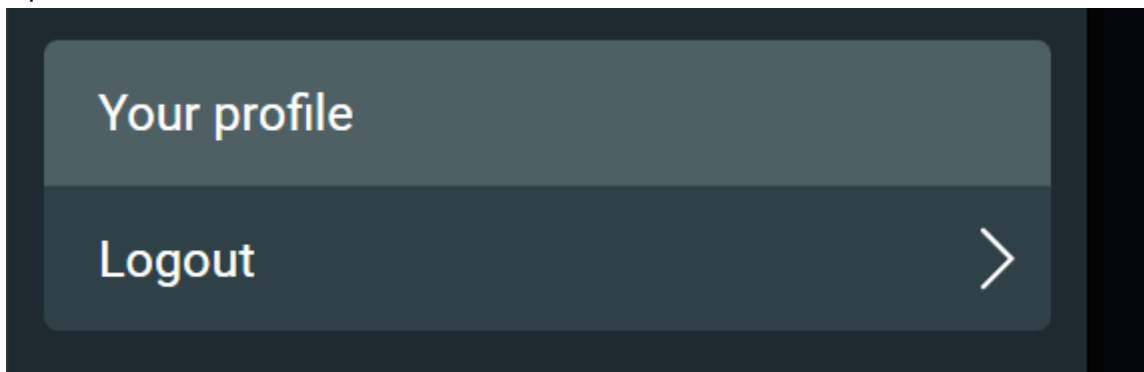

2. Klik op **Uw profiel**
3. Klik op het tabblad met het label **Wachtwoord wijzigen**
4. Voer uw oude en de nieuwe wachtwoorden in (De wachtwoorden moeten voldoen aan minimale eisen met betrekking tot complexiteit: 8 tekens met minstens één cijfer en letter).
5. Klik op **Opslaan** of druk op Enter

7.4 Tweefactorauthenticatie

1. Open het menu en scroll naar beneden.

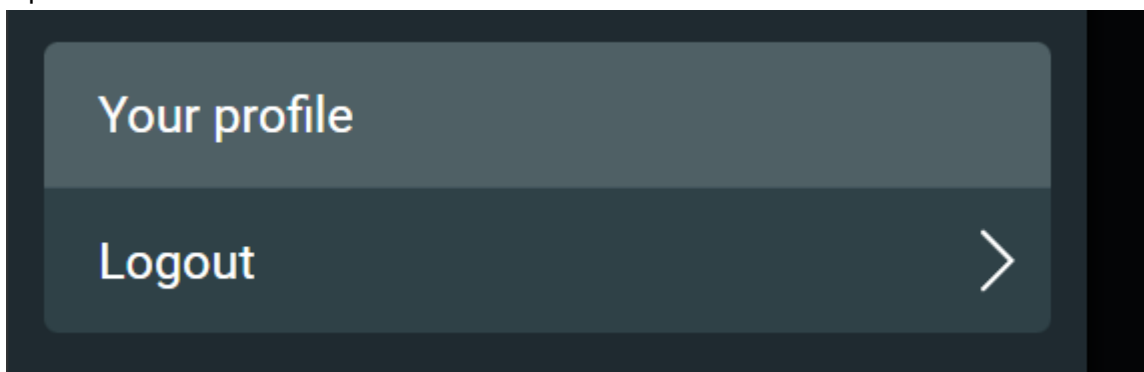


2. Klik op **Uw profiel**
3. Klik op het tabblad met het label **Twee-factorauthenticatie**
4. Klik op de knop **inschrijven**.
5. Volg de instructies op het scherm om u in te schrijven.

7.5 Oproepbaarheidsstatus


Configuratie

1. U kunt uw oproepbaarheidsstatus configureren via de app. U kunt kiezen om al dan niet oproepbaar te zijn en voor welke organisaties u oproepbaar wilt zijn.

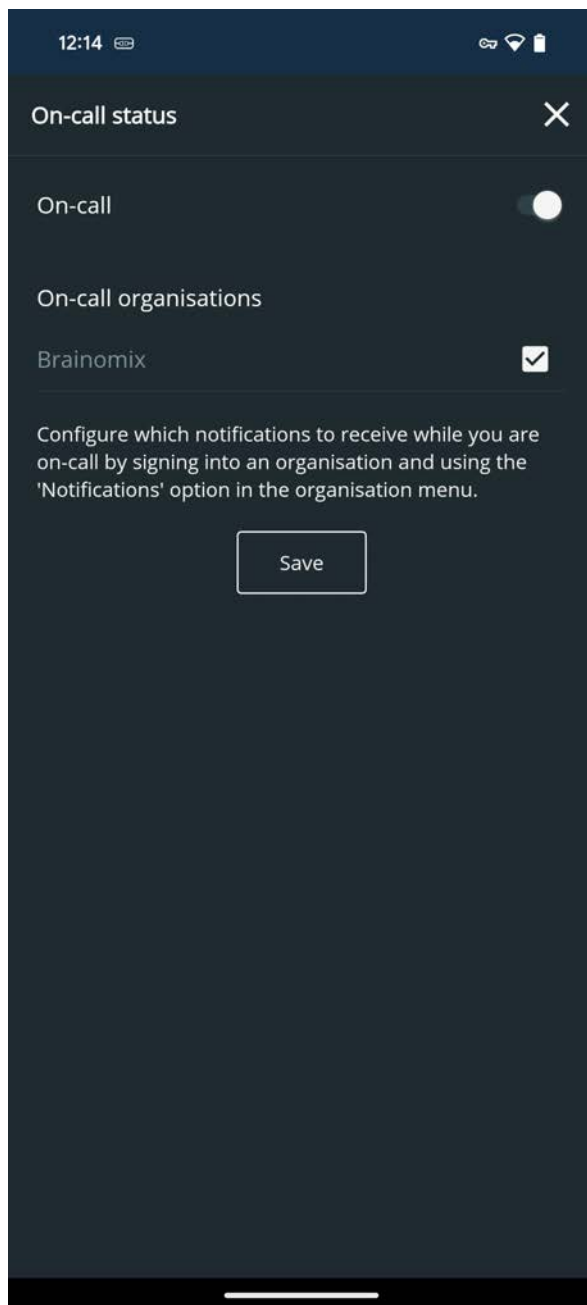

7.6 App-meldingen

1. U kunt ervoor kiezen om altijd meldingen te ontvangen, ze alleen te ontvangen als u oproepbaar bent voor een organisatie of ze nooit te ontvangen.
2. Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd door te tikken op 'Meldingen' in het app-menu voor een organisatie.

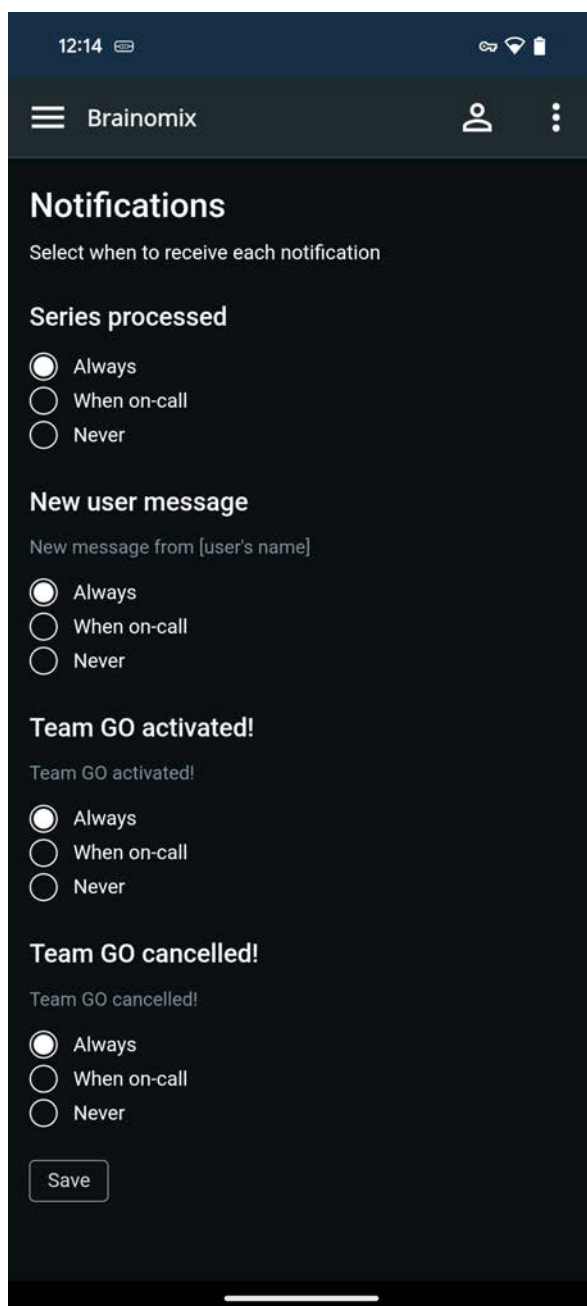

Om meldingen van de app Brainomix 360 Mobile te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat meldingen zijn ingeschakeld op uw mobiele apparaat. Dit kan worden gedaan tijdens de installatie van de Brainomix 360 Mobile-app op uw mobiele apparaat of kan later worden ingesteld aan de hand van de onderstaande stappen.

iOS


- Start de app Instellingen.
- Tik op Meldingen.
- Blader naar Brainomix 360 Mobile > Tikken.
- Zet de schakelaar **Meldingen toestaan** op **Aan** om meldingen in te schakelen.
- Zet de schakelaar **Tijdgevoelige meldingen** op **Aan** (meldingen worden altijd onmiddellijk afgeleverd en blijven een uur op het vergrendelscherm staan).
- Kies uw voorkeuren voor meldingen - het is aan te raden om alles te selecteren (vergrendelscherm, meldingscentrum en banners) en zet de stijl van de banner op **Aanhoudend**.
- Schakel de schakelaar **Geluiden en badges** in op **Aan** (aanbevolen).

Android

- Start de app Instellingen.
- Tik op Apps.
- Blader naar Brainomix 360 Mobile > Tikken.
- Tik op Meldingen.
- Zet de schakelaar **Meldingen toestaan** op **Aan** om meldingen in te schakelen, waaronder berichten, geluiden en trillingen.
- **Zet de schakelaar Stil tonen op Uit (aanbevolen).**
- **Zet de schakelaar Zet als prioriteit op** om het scherm aan te zetten als 'Niet storen' is ingeschakeld (aanbevolen).

8 Desktop-interface

8.1 Lijst met patiënten

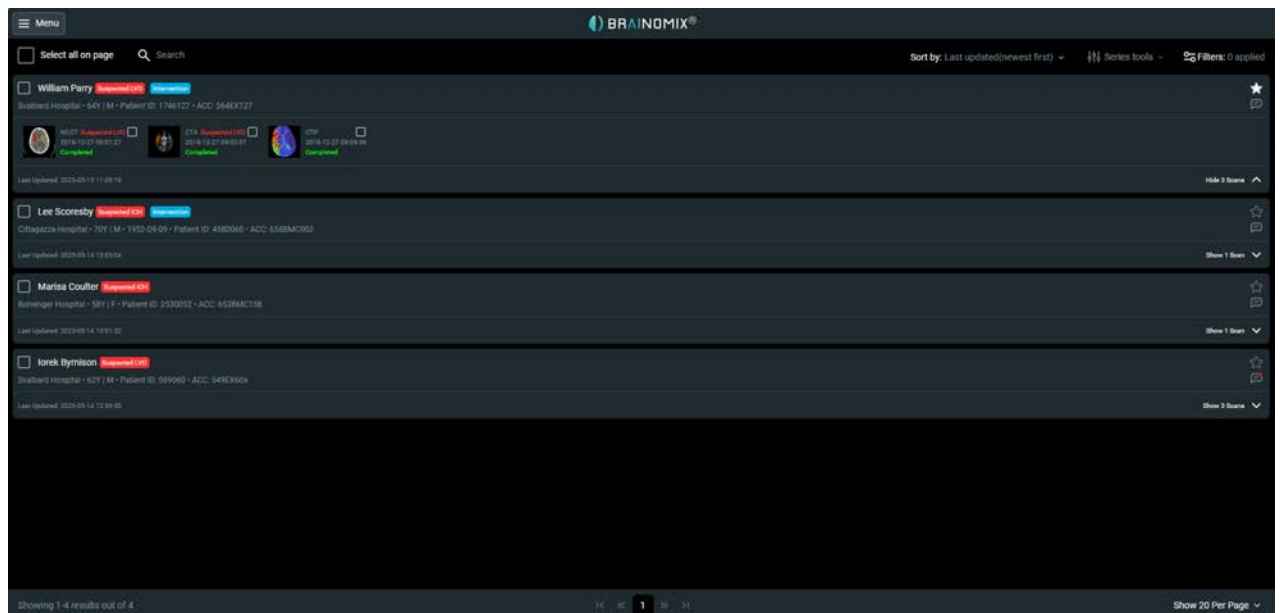

- Op de patiëntenlijstpagina worden alle patiënten weergegeven die voor u beschikbaar zijn. Standaard worden ze weergegeven in de volgorde van de laatste patiëntupdate.
- U kunt door de pagina's met patiënten bladeren door op de paginanummers onder de lijst te klikken.
- Klik op een patiënt om deze te openen in de Patiënt Viewer (zie het gedeelte Patient Viewer section).
- Klik op het pictogram  om de patiëntgegevens uit te vouwen en scandetails en een voorbeeldminiatuur van elke scan te bekijken.


8.2 Patiënten zoeken

Sorteren

Sorteer de patiëntenlijst door op de knop Sorteren op te klikken.


Sort by: Last updated(newest first) ▾

Selecteer een sorteervoorkeur uit de vervolgkeuzelijst.

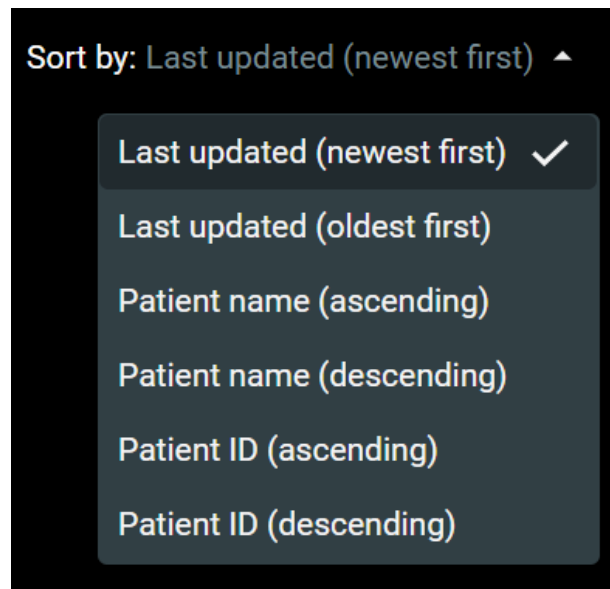


Zoek

Zoek een patiënt op naam, toegangsnummer of ID door tekst in te voeren in het zoekvak boven de Patiëntenlijst.

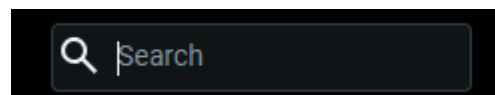

Filteren

Filter de patiënten door op de knop Filters te klikken.

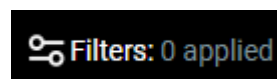

Selecteer de opties waarop u wilt filteren. Alleen patiënten met reeksen of resultaten die aan de geselecteerde filters voldoen, worden in de patiëntenlijst weergegeven.

8.3 Patiënt Viewer


Overzicht

Wanneer u een patiënt opent vanuit de patiëntenlijst, komt u in de Patiëntenviewer terecht.

Er is patiëntspecifieke informatie in de linker zijbalk:

- Weergeven: bekijk alle scandetails die beschikbaar zijn voor de geselecteerde patiënt
- Reeks: bekijk de volledige metagegevens voor deze scan, samen met eventuele verwerkingswaarschuwingen
- Berichten: bekijk en verstuur berichten voor deze patiënt

Boven de Patiëntenviewer en de zijbalk bevindt zich de patiënteninformatiekaart. Hier worden de patiëntgegevens weergegeven en kunt u met een sterretje een patiënt als favoriet markeren. Merk op dat deze informatie mogelijk werd verwijderd indien het geval werd gepseudonimiseerd, bv. indien het via peer-to-peer-synchronisatie werd ontvangen of u het op Brainomix 360 Cloud bekijkt.

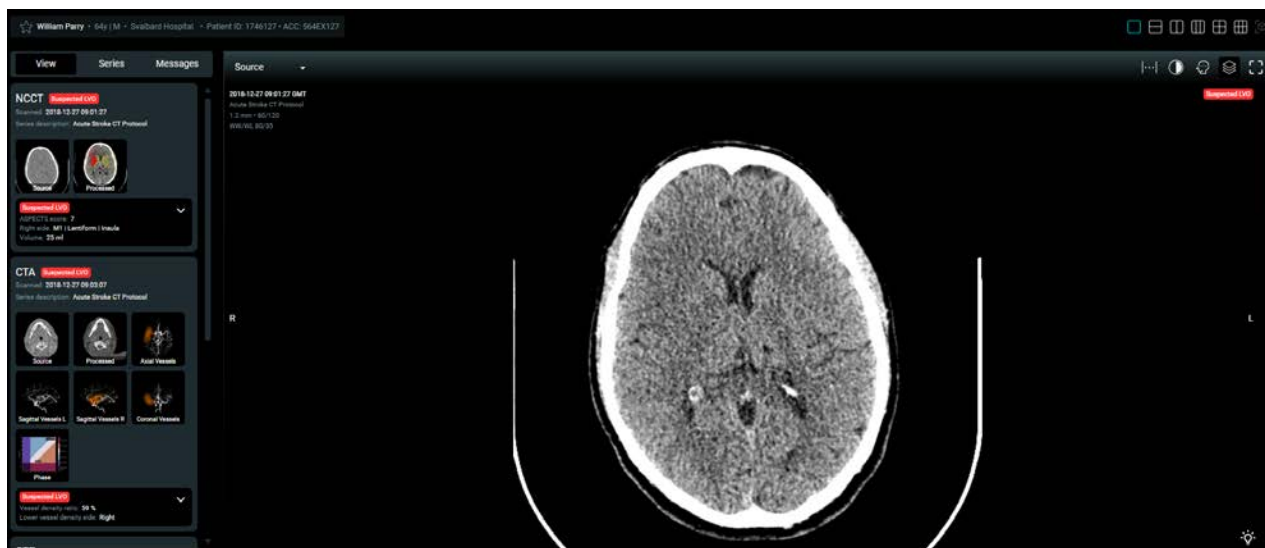

Scans bekijken

Onder de patiënteninformatiekaart en boven de afbeeldingsweergave bevindt zich een rij bedieningselementen voor de afbeeldingsweergave. Dit zijn, van links naar rechts:

- De weergaveselector ('Bron' wordt weergegeven). Hiermee kunt u snel wijzigingen in de weergave aanbrengen.
- De plakdikte-instelling. Indien beschikbaar, kunt u hiermee de plakdikte aanpassen door aangrenzende plakken te combineren met gemiddelde, MIP- of MinIP-filters.
- Vensterindeling. Hiermee kunt u de vensterbreedte en -niveau aanpassen en hebt u de keuze uit verschillende voorinstellingen. U kunt vensterindeling ook aanpassen door met de rechtermuisknop te klikken en te slepen met de muis.
- De overlay-schakelaar. Als u op deze knop drukt, worden overlays in- of uitgeschakeld.
- De MPR-besturing. Als deze knop beschikbaar is, krijgt u opties om te wisselen tussen axiale, sagittale of coronale weergaven.
- De knop Maximaliseren. Als u hierop drukt, wordt de afbeelding vergroot zodat deze zoveel mogelijk ruimte inneemt.

Het hoofdonderdeel van de patiëntenviewer is de beeldweergave. Hiermee wordt het huidige segment van de geselecteerde weergave weergegeven, waarop de juiste venster-, plak- en MPR-filters zijn toegepast. Overlays voor informatie en algoritmeresultaten kunnen over de basisafbeelding worden weergegeven.

In de rechterbovenhoek van de afbeelding worden indicatoren van algoritmeresultaten weergegeven, samen met eventuele bewerkingen of interventievlaggen van de gebruiker.

Onder de beeldweergave staat de snedebesturing. U kunt door alle snedes bladeren door de schuifbalk te verslepen.

Vensterindeling

Pixels in een CT-scan worden gemeten in Hounsfield Units (HU). Deze moeten worden omgezet naar grijsniveaus om ze te kunnen weergeven. Met de instellingen voor vensterniveau en -breedte in het menu **Vensterindeling** kunt u het bereik van de weergegeven waarden aanpassen.

Deze vooraf ingestelde vensters zijn bedoeld om u te helpen de scan handmatig te beoordelen:

- **Weefsel:** Geeft een goed totaalbeeld van hersenweefsel.
- **Bloedvaten:** Geeft een beter contrast om geaccentueerde bloedvaten gemakkelijker zichtbaar te maken.
- **Bot:** Goed om botstructuren te bekijken.

- **Hoog contrast:** Levert een beeld met hoog contrast op om vroege hypodense veranderingen gemakkelijker zichtbaar te maken.

U kunt de breedte en het niveau van het venster ook aanpassen door met de rechtermuisknop te klikken en de muis over het venster te slepen. U kunt de muis omhoog of omlaag bewegen (om het niveau te wijzigen) of naar links of rechts (om de breedte te wijzigen).

Gegevens Reeksen

De datum en tijd van de reeks worden in een overlay in de linkerbovenhoek van de afbeelding weergegeven, samen met weergaveparameters zoals de snededikte en het snedenummer. Meer informatie vindt u op het tabblad Reeksen. Sommige gegevens worden uit de tags van de DICOM-bronreeks (bv. onderzoeksbeschrijving) gehaald, terwijl andere uit de software zelf (bv. algoritmeversie) zijn afgeleid.

Resultaten exporteren

Onder het Resultaatoverzicht in het tabblad View bevinden zich knoppen om de originele bron- en resultaatbeelden in DICOM-formaat te downloaden voor alle beschikbare series.

8.4 e-ASPECTS Weergave



Samenvatting Resultaten

De ASPECTS-score en gerelateerde informatie wordt weergegeven in de Samenvatting Resultaten. Deze bevat de volgende informatie.

ASPECTS

Deze sectie toont de ASPECTS-score zoals berekend door e-ASPECTS en een lijst van zones die zijn gescoord als zones met acute hypodensiteit en die de ASPECTS-score dus hebben verlaagd.

Volumes - Hyperdensiteit



Brainomix 360 e-ASPECTS probeert abnormale hyperdensiteiten te detecteren in een niet-contrast CT-scan. Abnormale hyperdensiteiten verwijzen naar gebieden met verhoogde HU-waarden in de hersenen, vergeleken met wat normaal verwacht zou worden voor een gezonde CT-scan van de hersenen. Veel voorkomende oorzaken van dergelijke hyperdensiteiten bij patiënten die verdacht zijn van een beroerte zijn acute bloedingen, omdat vers bloed doorgaans meer hyperdens is dan grijze of witte stof, of contrastlekkage, hoewel dit niet te zien zou moeten zijn op een CT-scan zonder contrast als er niet recentelijk contrastmiddel is toegediend.

Indien er in de CT-scan een hyperdense zone wordt gedetecteerd, wordt deze zone gesegmenteerd en weergegeven als een overlay en wordt het volume van de gesegmenteerde zone gerapporteerd (in milliliter). Hoewel deze volumemeting correct met de gesegmenteerde zone zou moeten overeenstemmen, moet de gebruiker visueel verifiëren of de gesegmenteerde zone correct is voor wat betreft de onderliggende hyperdensiteiten in het beeld.

Opmerking: deze functie staat los van de hyperdensiteitsfunctie van bloedvaten, die probeert occlusies of calcificaties in bloedvaten te identificeren.

Wanneer een groot hyperdens volume wordt gedetecteerd, worden het hypodense volume, de ASPECTS-score en de resultaten voor hyperdense bloedvaten onderdrukt. Als een beheerder handmatig bewerken heeft ingeschakeld, kunt u de onderdrukte resultaten met deze functie herstellen.

Volumes - Acute / niet-acute hypodensiteit

Het volume van de hypodense tekenen in ml, zoals berekend door Brainomix 360 e-ASPECTS. Dit is een maat voor de 'hittekaart'. De nauwkeurigheid van de volumeberekening hangt af van de kwaliteit van de 'hittekaart', die handmatig gecontroleerd moet worden.

Beheerders kunnen aanvullend de berekening van Netto wateropname inschakelen, gebaseerd op de ernst van de hypodensiteit binnen het acute hypodense gebied. Indien ingeschakeld, wordt deze waarde als percentage weergegeven onder het acute hypodense volume wanneer voldoende hypodensiteit wordt gedetecteerd.

Hyperdense bloedvaten



e-ASPECTS probeert gelokaliseerde bloedvathyperdensiteiten vast te stellen op niet-contrast CT-scans. Die zijn typisch indicatief voor occlusies (stolsels) of calcificaties. Beeldeigenschappen zoals de vorm van de hyperdensiteit en HU-waarden binnen een hyperdens bloedvat worden in aanmerking genomen bij het classificeren van deze kenmerken, waarbij calcificaties doorgaans hogere en scherper gedefinieerde HU-waarden hebben in vergelijking met stolsels. De hyperdichte zone wordt gesegmenteerd en gemarkeerd als resultaatbeeld.

Als er een of meer occlusies worden gedetecteerd, wordt de lengte van de occlusie aangegeven op basis van een meting van de langste as van de gesegmenteerde zone waartoe de occlusie behoort. Wanneer er op de beide hemisferen van een CT-hersenscan occlusies worden gedetecteerd, worden de lengtemetingen per hemisfeer gegeven.

Merk op dat sommige hyperdensiteiten niet door software te detecteren zijn, en dat valse positieven mogelijk ook worden gemarkeerd. Dat deze kenmerken buiten bloedvaten zijn gemarkeerd is ook mogelijk; dan is de hyperdensiteit wellicht geen gevolg van een occlusie, al werd deze wel als zodanig gedetecteerd.

Verwerkt

De weergave Verwerkt toont de CT-afbeelding na verwerking en analyse met e-ASPECTS. De sneden worden geannoteerd om de segmentatie van ASPECTS-zones en de geïdentificeerde hypodense of hyperdense tekenen te tonen.

Overlays

Individuele overlays op de weergave 'Verwerkt' zijn achtereenvolgens:

- **ASPECTS-zones:** Toont de segmentatie van ASPECTS regio's.
- **Getroffen zones:** Markeert de ASPECTS-zones die gescoord zijn als zones met acute hypodense veranderingen.
- **Acute hypodensiteit:** Markeert zones met acute hypodense veranderingen.
- **Niet-acute hypodensiteit:** Markeert zones met oudere hypodense veranderingen die zijn uitgesloten door het e-ASPECTS-algoritme.
- **Hyperdensiteit:** Markeert zones met abnormale hyperdense tekenen.
- **Hyperdens bloedvat:** Markeert hyperdense bloedvaten die als occlusies zijn gedetecteerd.
- **Calcificatie:** Markeert hyperdense bloedvaten die als calcificaties zijn gedetecteerd.
- **pc-ASPECTS-zones:** Toont de segmentatie van pc-ASPECTS regio's.
- **Midden-sagittale vlak:** Toont de indicatielijn van het midden-sagittale vlak.
- **Tekstannotaties:** Toont de indicatoren aan de zijkant en andere overlappende informatietekst.

Waarschuwingen

Als er een uitroepteken in de Info- of Reeks-knop staat, zijn er waarschuwingen van e-ASPECTS die de nauwkeurigheid van de score kunnen beïnvloeden.

8.5 Handmatige resultaten

Indien uw beheerder dit heeft ingeschakeld, kunt u het automatische resultaat bewerken en uw eigen handmatige resultaat opslaan op Brainomix 360. Deze functie is niet beschikbaar bij het bekijken van gevallen op Brainomix 360 cloud.



U kunt het automatische resultaat bewerken door uw eigen score op te slaan. Klik op het pictogram 'Bewerken' rechtsonder in de beeldweergave om het bewerkingsvenster te openen.

Klik op de regionamen die moeten bijdragen aan de ASPECTS-score om uw handmatige ASPECTS-score te berekenen.


Vervolgens kunt u uw resultaat opslaan of verwijderen.

9 Mobiel scherm

9.1 Lijst met patiënten

Als u Brainomix 360 of Brainomix 360 Cloud opent met de telefoon, kunt u een lijst met alle patiënten bekijken. Tik op een patiënt om de Patiënt Viewer te openen. Door naar beneden te vegen wordt de patiëntenlijst vernieuwd.

Druk op het ☆-icoontje om een patiënt als favoriet te markeren, of op het ★-icoontje om de favoriet ongedaan te maken.

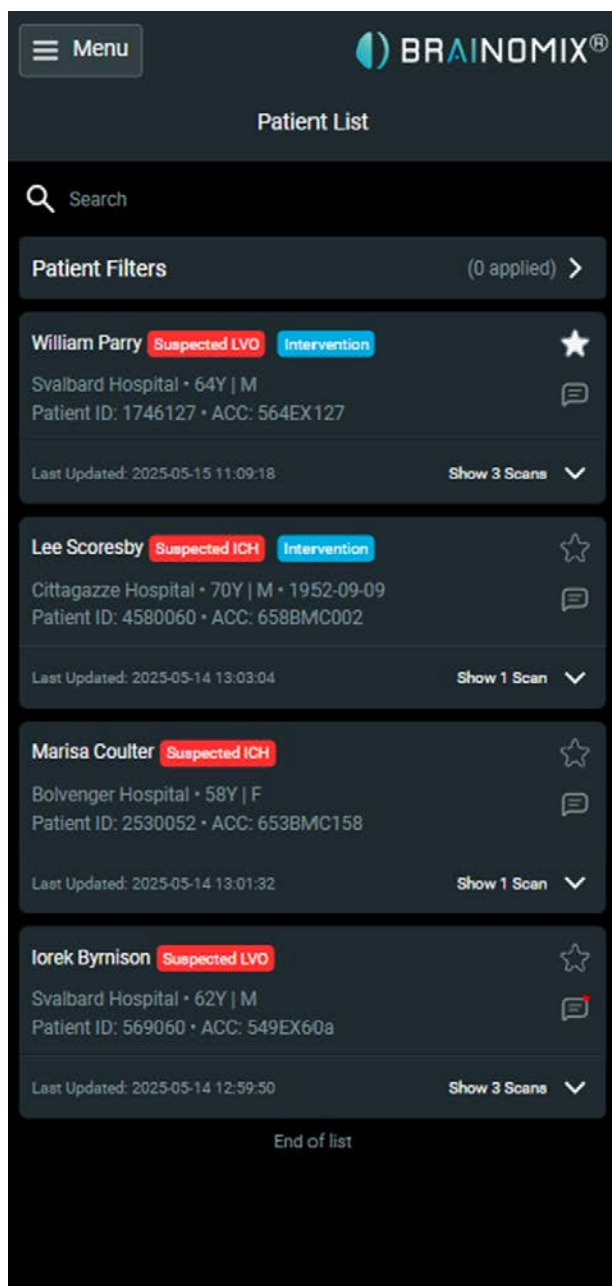

9.2 Patiënt Viewer


Alles reeksen

Wanneer u een patiënt opent vanuit de patiëntenlijst, komt u in de weergave Alle reeksen terecht. Als alternatief kunt u, als u zich al in de viewer bevindt, op de knop ALLES in de linkerbenedenhoek tikken. U kunt alle reeksen en resultaten voor deze patiënt inzien en naar elke beschikbare weergave navigeren met een klik op de miniatuur.

U kunt ook de modaliteitspecifieke knoppen onderaan gebruiken om direct naar de resultatenweergave van een scan te gaan:

- NCCT: indien beschikbaar, bekijk de CT-scan zonder contrast voor deze patiënt en alle bijbehorende resultaten
- CTA: indien beschikbaar, bekijk het CT-angiogram voor deze patiënt en alle bijbehorende resultaten
- CTP: indien beschikbaar, bekijk de CT-perfusiescan voor deze patiënt en alle bijbehorende resultaten
- MRI: indien beschikbaar, bekijk de MRI-scans voor deze patiënt en alle bijbehorende resultaten

Houd er rekening mee dat het Brainomix 360-platform resultaten van alle gelicentieerde producten toont. Deze schermafbeelding toont resultaten van andere producten naast e-ASPECTS.

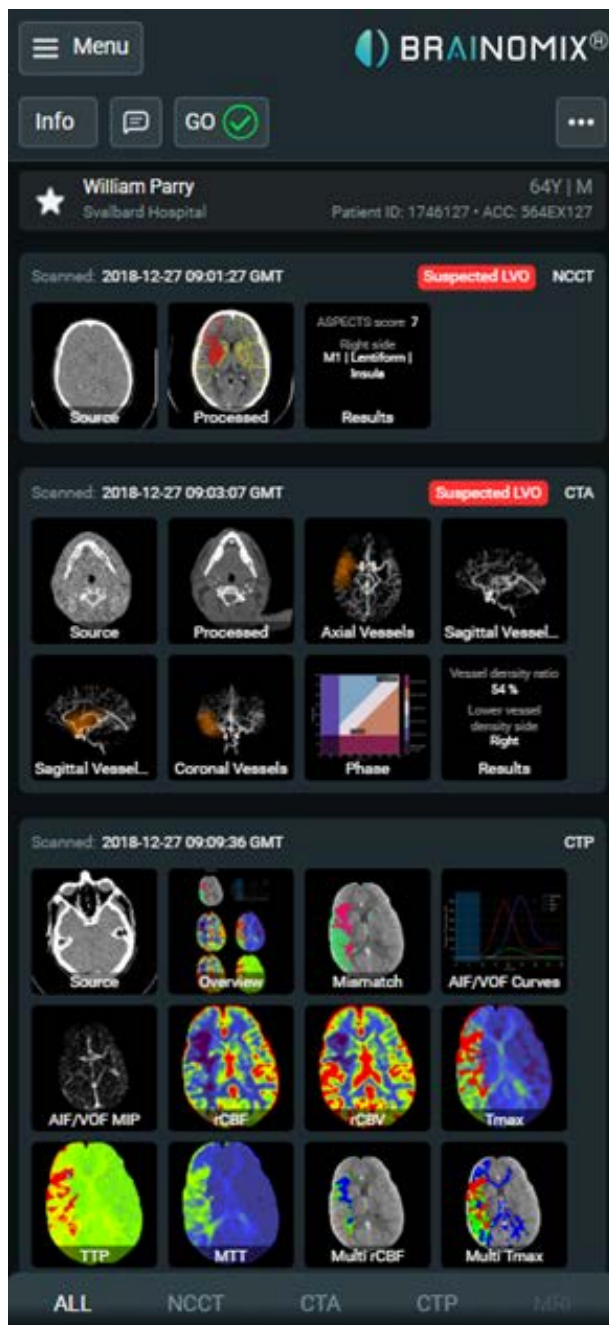

Scans bekijken

De viewer-indeling toont bovenaan enkele patiëntspecifieke bedieningselementen, met toegang tot:

- Info: bekijk de volledige metagegevens voor deze scan, samen met eventuele verwerkingswaarschuwingen
- Berichten: bekijk en verstuur berichten voor deze patiënt
- GO: markeer deze patiënt voor interventie

Met knijpen & zoomen kunt u inzoomen om de scan in meer detail te bekijken, en u kunt de scan verplaatsen door met twee vingers te slepen.




9.3 Berichten

Als uw systeembeheerder dit heeft ingeschakeld, kunnen berichten voor een patiënt worden bekeken en verzonden. Zodra er nieuwe berichten binnenkomen, kunt u deze bekijken in het chatgedeelte. Als u dit hebt geconfigureerd, wordt er een melding via de mobiele app naar alle geregistreerde gebruikers verzonden.

Nieuwe berichten worden onderaan het chatgedeelte weergegeven zodra ze zijn ontvangen.

Om een bericht te verzenden, typt u in het vak onderaan en klikt u op de knop Verzenden aan de rechterkant.

Om te zien wie een bericht heeft gelezen, klikt u op het infopictogram. Om de lijst 'Gelezen door' te sluiten, klikt u op het sluitpictogram.

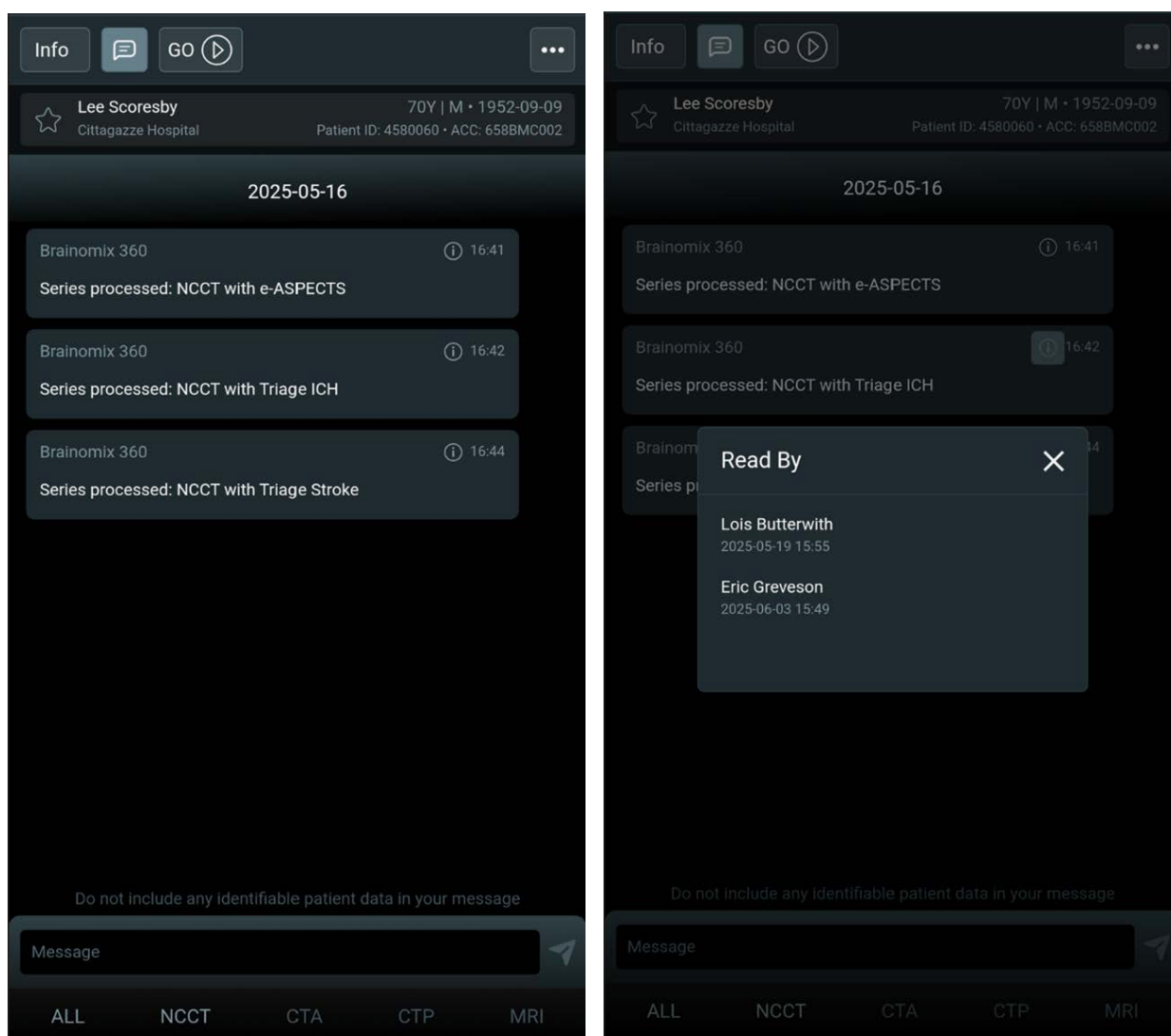

9.4 Een patiënt aanmerken voor interventie


Als deze functionaliteit is ingeschakeld door uw systeembeheerder, kunt u handmatig een patiënt markeren voor interventie vanuit het patiëntenoverzicht.

Druk op de knop 'GO' en veeg om te bevestigen. Alle gebruikers met ingeschakelde interventiemeldingen krijgen een melding dat de patiënt is gemarkeerd.

De markering kan indien nodig worden geannuleerd en gebruikers met ingeschakelde interventiemeldingen krijgen een melding dat deze is geannuleerd.

Het is ook mogelijk om een interventie als voltooid te markeren voor een reeds gemarkeerde patiënt.

Houd er rekening mee dat dit een puur handmatig communicatiemiddel is en dat deze functie niet kan worden geactiveerd met behulp van geautomatiseerde resultaten.

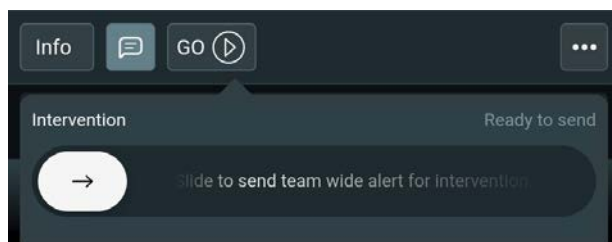

10 Resultaatoutputs

10.1 DICOM

Indien dit op uw locatie zo is geconfigureerd, wordt het resultaat van de DICOM-reeks via een DICOM-netwerkverbinding naar PACS overgedragen zodra de verwerking is voltooid.

10.2 Cloudsynchronisatie

Indien dit op uw locatie zo is geconfigureerd, worden volledige resultaten met optionele pseudonimisering gesynchroniseerd naar de Brainomix 360 Cloud-dienst. Resultaten kunnen op Brainomix 360 Cloud worden bekeken alsof de scan daar werd verwerkt.

10.3 Mobiele-app-meldingen

Als syncen met Brainomix 360 Cloud is ingeschakeld, kunnen pushmeldingen worden geconfigureerd om gebruikers van de Brainomix 360 Mobile-app te melden dat een resultaat beschikbaar is.

10.4 Patiëntrapporten

Indien dit op uw locatie zo is geconfigureerd, worden PDF's van patiëntrapport (PDF en/of afbeeldingen) en met een overzicht van alle beeldvormingsmodaliteiten en resultaten voor een patiënt naar de geconfigureerde PACS verzonden via een DICOM-netwerkverbinding.

11 Uploaden en verwerken

Deze sectie is alleen van toepassing op Brainomix 360. Scans direct uploaden of verwerken in Brainomix 360 Cloud is niet mogelijk.

11.1 Scans verwerken

Werkstromen

Brainomix 360 kan worden geconfigureerd om verschillende workflows te bieden voor gebruik in het acute klinische traject of voor klinische studies. Elke workflow kan worden geconfigureerd om resultaten naar verschillende DICOM-doelapparaten te sturen.

Er worden twee standaardsets workflows geleverd: 'Acuut' en 'Onderzoek'. De acute workflows zijn bedoeld voor het verwerken van een klein aantal scans met hoge prioriteit, terwijl de studieworkflows geschikt zijn voor het verwerken van een groot aantal scans met lagere prioriteit. Als een scan wordt verwerkt door een studieworkflow wanneer een acute scan wordt ontvangen, zal Brainomix 360 deze pauzeren en de acute scan verwerken voordat er wordt doorgegaan.

Voor hulp bij het configureren van uw workflows en de integratie met externe systemen (PACS, CT-scanners, e-mail, enz.), kunt u contact opnemen met uw lokale distributeur of met Brainomix-ondersteuning.

Handmatige DICOM-overdracht

1. Zorg ervoor dat het DICOM-bronapparaat (bijvoorbeeld een PACS- of CT-scanner) en de controlerende applicatie (bijvoorbeeld een PACS-viewer) zijn geconfigureerd met het serveradres van de Brainomix 360 en de Application Entity Title voor de juiste inkomende scanwachtrij van de Brainomix 360, gekoppeld aan de gewenste workflows (zie hierboven). Uw systeembeheerder kan u helpen bij de configuratie hiervan.
2. Gebruik de controlerende DICOM-toepassing om een scanreeks over te brengen naar de server van Brainomix 360. Raadpleeg de instructies van de applicatie voor meer informatie.
3. De server van de Brainomix 360 begint automatisch met het verwerken van de reeks.
4. Om de verwerking in uw webbrowser te controleren:
 1. Ga naar het serveradres van de Brainomix 360 in uw internetbrowser.
 2. U wordt gevraagd om in te loggen als u de applicatie de laatste tijd niet hebt gebruikt vanuit uw huidige webbrowser. Meld u aan zoals beschreven in de vorige sectie.
 3. Selecteer '**patiëntenlijst**' in de menubalk bovenaan de pagina.
 4. De nieuwe scan zou in de patiëntenlijst moeten verschijnen. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan het DICOM-logboek om te controleren op fouten.
5. Indien geconfigureerd, worden DICOM-resultaten automatisch naar PACS verzonden wanneer de verwerking is voltooid. Gebruik uw PACS-viewer om deze resultaten te bekijken.
6. U kunt ook op de patiënt in de patiëntenlijst klikken om de resultaten in uw webbrowser te bekijken.

Automatische DICOM-overdracht


U kunt een externe toepassing configureren om automatisch scanreeksen over te brengen naar de Brainomix 360-server.

Als dit is geconfigureerd, worden DICOM-resultaten automatisch naar PACS verzonden wanneer de verwerking is voltooid. Gebruik uw PACS-viewer om deze resultaten te bekijken. In deze configuratie hoeft u de webinterface van Brainomix 360 helemaal niet te gebruiken.

U kunt ook inloggen, dan verschijnen de scans in de patiëntenlijst zodra ze in de wachtrij voor verwerking staan. U kunt de resultaten bekijken door op een patiënt te klikken. De DICOM-netwerkactiviteit kan worden gecontroleerd door het DICOM-logboek te bekijken.

Handmatig uploaden via internetinterface

1. Meld u aan bij Brainomix 360
2. Open het menu met het menupictogram bovenaan de pagina.
3. Selecteer **Reeks uploaden** in het menu.

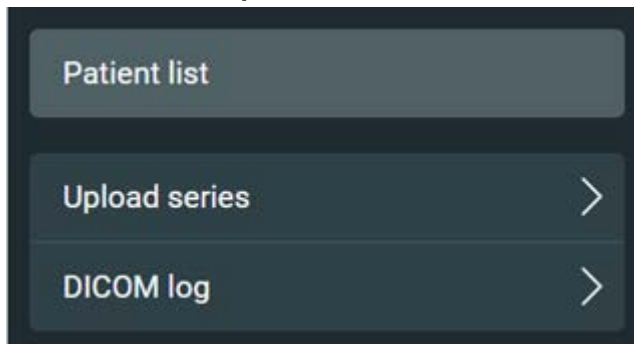

4. Selecteer de juiste inkomende scanwachtrij in het vervolgkeuzemenu onder het uploadgebied. Deze instelling wordt standaard ingesteld om de wachtrij voor inkomende scans te gebruiken.
5. Klik op '**Bestanden selecteren**' om DICOM-afbeeldingsbestanden of gecomprimeerde zip-bestanden met DICOM-afbeeldingen te selecteren.
Tip: U kunt bestanden rechtstreeks naar het uploadgebied slepen en neerzetten als de browser slepen en neerzetten ondersteunt.
Opmerking: Als u teveel bestanden selecteert, zal de browser deze weigeren. Als dit gebeurt, moet u de DICOM-afbeeldingen comprimeren tot één zip-bestand en dat uploaden.
6. Uw bestanden worden geüpload en geïndexeerd. Als er een zeer groot aantal bestanden is, kan dit enkele minuten duren.
7. Scans worden automatisch naar een workflow geleid. Wanneer het uploaden is voltooid, klikt u op **OK**.
8. Wanneer de verwerking is voltooid, worden e-mails met resultaten en DICOM-resultaten automatisch verzonden zoals geconfigureerd voor de workflow.
9. Klik op de patiënt in de patiëntenlijst om de resultaten in uw webbrowser te bekijken.

11.2 De DICOM-log

Klik op de link 'DICOM-log' om een log van de opgevraagde DICOM-reeksen te bekijken die door de Brainomix 360-server zijn ontvangen en verstuurd.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

☒ Select all

☒ Series requested

☒ Series received

☒ At least one workflow can process the series

☒ No workflows can process the series

☒ Upload failed

☒ Transfer failed

☒ Series sent to external system

☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View
Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613			
Description	Transfer failed			
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host			
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b			

12 Beheer

Beheerders-gebruikers beschikken over extra functies voor het beheren van gebruikers, het verwijderen van scans en het configureren van de integratie van het Brainomix 360-systeem in de klinische workflow. In het algemeen hoeven deze instellingen niet te worden veranderd en onjuiste instellingen kunnen leiden tot gegevensverlies, onjuiste werking of gecompromitteerde veiligheid. Als u ondersteuning nodig hebt bij de integratie van uw Brainomix 360-systeem in uw klinische workflow, gelieve contact op te nemen met uw lokale distributeur of Brainomix Support.

13 Probleemoplossing

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik of als u foutmeldingen krijgt, neem dan contact op met uw lokale beheerder of Brainomix support via een van de contactmogelijkheden die in het hoofdstuk Regelgeving worden vermeld.

14 Onderhoud en upgrades

In het geval van gepland onderhoud zal Brainomix de getroffen gebruikers vooraf informeren dat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en welke mate van onderbreking van de dienstverlening wordt verwacht. Gebruikerstoegang kan worden geweigerd tijdens het onderhoudsvenster. Als de app Brainomix 360 Mobile is geïnstalleerd op een mobiel apparaat, zorg er dan voor dat u deze bijwerkt naar de nieuwste versie wanneer hierom wordt gevraagd of wanneer deze beschikbaar is in de Google Play of de Apple App Store.

15 Rapportage incidenten


Gelieve ons te contacteren via support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) als u een mogelijk probleem hebt ontdekt met een van onze Brainomix 360uites. Als er een ernstig incident heeft plaatsgevonden met betrekking tot een van onze producten, vallend onder ons privacybeleid (https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support,)), gelieve dit dan ook te melden bij de plaatselijke bevoegde instantie van uw land:

- Lidstaten van de Europese Unie (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Zwitserland (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html>)
- Turkije (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Ontmanteling

In het geval van beëindiging en verwijdering van de dienst zal Brainomix het proces coördineren met de relevante belanghebbenden binnen uw organisatie om te zorgen voor een soepele en volledige verwijdering van het Brainomix 360systeem, inclusief alle activa en gegevens. De impact van verwijdering zal worden beoordeeld om te bepalen of dit zal leiden tot wijzigingen in uw klinische workflow en/of de configuratie van andere systemen. Alle middelen die eigendom zijn van Brainomix zullen worden verwijderd en integraties zullen uit het systeem worden verwijderd om ervoor te zorgen dat er geen gegevensoverdracht meer plaatsvindt van of naar de te verwijderen middelen. Gelieve voor meer informatie over het buiten bedrijf stellen van uw Brainomix 360 systeem contact op te nemen met uw plaatselijke distributeur of Brainomix support.

17 Symbolen

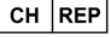Symbool	Beschrijving van symbool
	Geeft de naam en het adres van de fabrikant van het medische hulpmiddel aan.
	Geeft de datum aan waarop het medische hulpmiddel is gefabriceerd.
	Geeft de drager aan die unieke apparaatidentificatie-informatie bevat.
	Geeft de gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan.
	Geeft de bevoegde vertegenwoordiger in Zwitserland aan.
	Geeft de entiteit aan die het medische hulpmiddel importeert in de locale.
	Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	Geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de operator op de hoogte moet zijn van de huidige situatie of actie moet ondernemen om ongewenste gevolgen te voorkomen.
	Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is.
	De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie.

18 Een papieren exemplaar aanvragen

Als u een gedrukt exemplaar van deze revisie van de gebruikershandleiding van Brainomix 360 e-ASPECTS nodig hebt, gelieve te overwegen om deze webpagina af te drukken (klik met de rechtermuisknop + Afdrukken of download de laatste revisie van onze website (<https://www.brainomix.com/docs/>)). Als deze optie niet beschikbaar is voor u, gelieve ons dan te contacteren via support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) met uw verzoek en een gedrukt exemplaar zal naar u worden verzonden binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. Deze service is gratis.