

e-ASPECTS®

Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 14.4

e-ASPECTS-MAN-14.4 - 2026-09-16

Το e-ASPECTS είναι μέρος του Brainomix 360

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. αριθ. 10902596

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αριθ. 3701495

Ιστορικό αναθεωρήσεων (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Εισαγωγή
 - 1.1 Επισκόπηση
 - 1.2 ASPECTS
- 2 Προβλεπόμενη χρήση
 - 2.1 Ενδείξεις
 - 2.2 Αντενδείξεις
 - 2.3 Προειδοποιήσεις
 - 2.4 Προφυλάξεις
 - 2.5 Κλινικά οφέλη
 - 2.6 Περιβάλλον χρήσης
- 3 Εγκατάσταση και εκπαίδευση
 - 3.1 Εγκατάσταση
 - 3.2 Εκπαίδευση
- 4 Προδιαγραφές συστήματος
 - 4.1 Διακομιστής
 - 4.2 Πελάτες
 - 4.3 Γλώσσες
 - 4.4 Απόδοση και διάρκεια ζωής
- 5 Συμβατότητα τομογράφων και εικόνων
- 6 Κυβερνοασφάλεια
- 7 Έλεγχος πρόσβασης και ειδοποιήσεις
 - 7.1 Σύνδεση
 - 7.2 Αποσύνδεση
 - 7.3 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας
 - 7.4 Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
 - 7.5 Τηλεφωνικός κατάλογος
 - 7.6 Κατάσταση εφημερίας
 - 7.7 Ειδοποιήσεις εφαρμογής
- 8 Διεπαφή επιφάνειας εργασίας

- 8.1 Λίστα ασθενών
- 8.2 Εύρεση ασθενών
- 8.3 Εξαγωγή αποτελεσμάτων
- 8.4 Πρόγραμμα προβολής ασθενών
- 8.5 Εμφάνιση e-ASPECTS
- 8.6 Χειροκίνητα αποτελέσματα
- 9 Προβολή σε κινητό
 - 9.1 Λίστα ασθενών
 - 9.2 Πρόγραμμα προβολής ασθενών
 - 9.3 Ανταλλαγή μηνυμάτων
 - 9.4 Επισήμανση ασθενή για παρέμβαση
 - 9.5 Κλινικά δεδομένα
 - 9.6 Έλεγχος επιλεξιμότητας
 - 9.7 Κοινή χρήση δεδομένων ασθενών
- 10 Εξαγόμενα αποτελέσματα
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Συγχρονισμός νέφους
 - 10.3 Ειδοποιήσεις εφαρμογής κινητού
 - 10.4 Εκθέσεις ασθενούς
 - 10.5 Εξερχόμενα μηνύματα HL7
- 11 Αποστολή και επεξεργασία
 - 11.1 Επεξεργασία τομογραφιών
 - 11.2 Αρχείο καταγραφής DICOM
- 12 Διαχείριση
- 13 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 14 Συντήρηση και αναβαθμίσεις υπηρεσίας
- 15 Αναφορά περιστατικών
- 16 Παροπλισμός
- 17 Σύμβολα
- 18 Υποβολή αιτήματος για έντυπο αντίγραφο

Κανονιστικές πληροφορίες

	Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Ηνωμένο Βασίλειο	 0197	
		ΕΕ/ΕΟΧ/Τουρκία	
		EU REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Κάτω Χώρες
			Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Ιρλανδία
	+44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)	Ελβετία	
		CH REP	Taevas Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Ελβετία

1 Εισαγωγή

1.1 Επισκόπηση

Το Brainomix 360 e-ASPECTS αναφέρεται σε όλο το κείμενο ως 'Brainomix 360 e-ASPECTS' και ως 'e-ASPECTS' είναι ένα ιατροτεχνολογικό λογισμικό για την επεξεργασία τομογραφιών εγκεφάλου (CT) ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Παρέχεται ως διαδικτυακή υπηρεσία, με τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης web σε οποιοδήποτε μηχάνημα με σύνδεση στο λογισμικό Brainomix 360 (π.χ. μέσω LAN ή σύνδεσης στο Internet) και μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές συμβατές με το πρότυπο DICOM μέσω τοπικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των αξονικών τομογράφων και των συστημάτων PACS.

Συνήθως, οι αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω λειτουργίας DICOM C-STORE από τον αξονικό τομογράφο στο λογισμικό Brainomix 360. Το Brainomix 360 μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μεταφέρει αυτόματα τη σειρά αποτελεσμάτων που δημιουργείται σε σύστημα PACS μέσω λειτουργίας DICOM C-STORE. Το Brainomix 360 μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να αποστέλλει τα αποτελέσματα και τις αναφορές ασθενών σε επιπλέον προορισμούς κάθε φορά που μια τομογραφία υποβάλλεται σε επεξεργασία από το λογισμικό. Οι προορισμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν Brainomix 360 Cloud ή άλλες παρουσίες του Brainomix 360 και ειδοποιήσεις εφαρμογής του Brainomix 360 Mobile.

1.2 ASPECTS

Το ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) είναι ένα τοπογραφικό σύστημα βαθμολόγησης, το οποίο διαιρεί την έκταση του εγκεφάλου που έχει επηρεαστεί από το εγκεφαλικό επεισόδιο σε 10 περιοχές ενδιαφέροντος. Υπάρχουν έξι φλοιώδεις περιοχές (M1-M6) και τέσσερις περιοχές βασικών γαγγλίων (κερκοφόρος, φακοειδής, νησιωτικός φλοιός και έσω κάψα). Για κάθε έναν από τους καθορισμένους πόντους, αφαιρείται ένας πόντος για κάθε περιοχή πρόωρης ισχαιμικής αλλαγής, όπως η παρεγχυματική υποαραιώση. Μια βαθμολογία μηδέν υποδηλώνει διάχυτη ισχαιμική βλάβη σε ολόκληρο το επηρεαζόμενο ημισφαίριο, ενώ η φυσιολογική σάρωση αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου λαμβάνει βαθμολογία ASPECTS 10 πόντων.

Να σημειωθεί ότι οι μη οξείες ισχαιμικές αλλαγές δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της βαθμολογίας ASPECTS.

pc-ASPECTS

Ένα πρόσθετο σύστημα βαθμολόγησης για χρήση στο εγκεφαλικό επεισόδιο οπίσθιας κυκλοφορίας είναι το pc-ASPECTS (posterior-circulation ASPECTS), όπως ορίζεται στο Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>). Χωρίζεται σε 8 περιοχές ενδιαφέροντος: θάλαμοι (1 πόντος έκαστος), ινιακοί λοβοί (1 πόντος έκαστος), μεσεγκέφαλος (2 πόντοι), γέφυρα (2 πόντοι), εγκεφαλικό ημισφαίριο (1 πόντος έκαστο). Μια φυσιολογική αξονική τομογραφία εγκεφάλου λαμβάνει βαθμολογία pc-ASPECTS 10 πόντων.

Να σημειωθεί ότι στη βαθμολογία pc-ASPECTS, οι οξείες και μη οξείες ισχαιμικές αλλαγές στις περιοχές pc-ASPECTS δεν υπολογίζονται από το e-ASPECTS.

2 Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τη χρήση του Brainomix 360 e-ASPECTS

Το Brainomix 360 e-ASPECTS είναι ένα πακέτο λογισμικού επεξεργασίας εικόνων και προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, όπως ιατρούς εγκεφαλικών επεισοδίων και ακτινολόγους. Το λογισμικό εκτελείται σε στάνταρ εξοπλισμό 'έτοιμο προς χρήση' (φυσικό ή εικονικοποιημένο). Τα δεδομένα και οι εικόνες αποκτώνται μέσω συσκευών απεικόνισης συμβατών με το πρότυπο DICOM. Αυτό περιλαμβάνει αρχεία DICOM που έχουν αποσταλεί μέσω διαδικτυακής διεπαφής.

Το Brainomix 360 e-ASPECTS παρέχει τόσο δυνατότητες ανάλυσης όσο και προβολής για σύνολα δεδομένων αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι δυνατότητες ανάλυσης περιλαμβάνουν την ανίχνευση αλλαγών στην εικόνα που σχετίζονται με εγκεφαλικό επεισόδιο, τον υπολογισμό της έκτασης αυτών των αλλαγών (όπως το ASPECTS – Alberta Stroke Program Early CT Score), καθώς και την απεικόνισή τους.

2.1 Ενδείξεις

1. Το Brainomix 360 e-ASPECTS ενδείκνυται ως βοήθημα για τη διάγνωση και τη θεραπεία του οξέος αιμορραγικού ή ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Για το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, αυτό περιλαμβάνει ασθενείς με απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (MCA) ή ενδοκρανιακής απόφραξης της έσω καρωτίδας (ICA).
2. Το Brainomix 360 e-ASPECTS ενδείκνυται για χρήση σε αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό για αυτούς τους ασθενείς, ως εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων, παρέχοντας αυτοματοποιημένη ανάλυση εικόνας και βαθμολόγηση ASPECTS.
3. Το Brainomix 360 e-ASPECTS ενδείκνυται για χρήση σε αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό, με σκοπό την επισημάνση ύποπτων παθολογικών υπερπυκνώσεων μέσω αυτοματοποιημένης ανάλυσης εικόνων.
4. Το Brainomix 360 e-ASPECTS ενδείκνυται για χρήση σε αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό με σκοπό τον εντοπισμό ύποπτων αποφράξεων στην ICA και στον κλάδο M1 της MCA μέσω αυτοματοποιημένης ανάλυσης εικόνων.

2.2 Αντενδείξεις

Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν είναι κατάλληλο για χρήση με δεδομένα σάρωσης που περιέχουν χαρακτηριστικά εικόνες τα οποία σχετίζονται με:

- όγκους ή αποστήματα
- σπειράματα (coils), παράπλευρη τεχνητή κυκλοφορία (shunts), εμβολισμούς ή τεχνουργήματα κίνησης
- ενδοκρανιακές αγγειακές παθολογίες, όπως τα αρτηριακά ανευρύσματα, οι αρτηριοφλεβικές δυσμορφίες ή οι φλεβικές θρομβώσεις

Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή άλλη αναπηρία που θα μπορούσε να εμποδίζει την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα του λογισμικού ή να μην είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις εικόνες χωρίς τη βοήθεια του e-ASPECTS για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

2.3 Προειδοποιήσεις

	Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για τη διάγνωση. Το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να θεωρείται ως οριστική διάγνωση. Το Brainomix 360 e-ASPECTS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο επαγγελματία με γνώσεις ερμηνείας εικόνων αξονικής τομογραφίας, ως βοήθημα για την ερμηνεία των εικόνων.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες που έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Brainomix ή από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS ενδέχεται να μην ανιχνεύει όλα τα χρόνια (παλαιά) εμφράγματα ή να τα ταξινομεί εσφαλμένα ως πρόσφατες ισχαιμικές βλάβες.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν θα εντοπίζει με ακρίβεια πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις σε κάθε τομογραφία και ενδέχεται να παράγει ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε περιοχή. Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί την προσωπική του εμπειρογνωμοσύνη στην ανάλυση αξονικών τομογραφιών για να επαληθεύει την ορθότητα των αποτελεσμάτων του λογισμικού.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS ενδέχεται να μην απεικονίζει ή ανιχνεύει όλες τις παθολογικές υπερπυκνώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κατά τις οποίες λαμβάνεται ειδοποίηση υποψίας για ICH, ή ενδέχεται να επισημαίνει εσφαλμένα περιοχές της εικόνας ακόμη και απουσία ειδοποίησης υποψίας για ICH.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν προορίζεται για πρωτογενή ερμηνεία εικόνων αξονικής τομογραφίας. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της αξιολόγησης από τον ιατρό.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιστατικά ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου εκτός της περιοχής κατανομής της ICA/MCA.
	Περιστατικά με δομικές ανωμαλίες, όπως όγκοι ή άλλα τεχνουργήματα στην απεικόνιση, ενδέχεται να μιμούνται τα συμπτώματα ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και να επηρεάζουν την απόδοση του Brainomix 360 e-ASPECTS. Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοια περιστατικά. Άλλα περιστατικά με καταστάσεις μη ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και μορφολογικά φυσιολογικές τομογραφίες ενδέχεται επίσης να μιμούνται τα συμπτώματα ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με το Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε ασφαλές δίκτυο, το οποίο υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, καθώς και προστασία μέσω τείχους προστασίας.
	Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Brainomix 360 e-ASPECTS, οι χρήστες δεν θα πρέπει να κοινοποιούν τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και θα πρέπει να αποσυνδέονται από το σύστημα όταν δεν το χρησιμοποιούν.
	Οι χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στη διαδικτυακή διεπαφή χρήστη του Brainomix 360 e-ASPECTS πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ανάλυση ή η επισκόπηση διαγνωστικών εικόνων πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη οθόνη προβολής ακτινολογικών εξετάσεων.

	Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν προορίζεται για επισκόπηση διαγνωστικών εικόνων όταν η πρόσβαση γίνεται από κινητές συσκευές.
	Πριν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας, θα πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια των αυτόματα οριοθετημένων περιοχών ASPECTS. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία ή ανησυχία σχετικά με την ποιότητα της οριοθέτησης των περιοχών ASPECTS, οι χρήστες θα πρέπει είτε να τροποποιήσουν χειροκίνητα τις περιοχές είτε να αγνοήσουν τα αποτελέσματα.
	Brainomix 360 e-ASPECTS δεν υποκαθιστά την ανάγκη για αγγειογραφία στη διαγνωστική διερεύνηση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου - παρέχει ιεράρχηση της ροής εργασίας και ειδοποίηση.
	Σε περίπτωση που το Brainomix 360 e-ASPECTS καταστεί μερικώς ή πλήρως μη διαθέσιμο ή εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των επεξεργασμένων τομογραφιών, οι χρήστες θα πρέπει να βασιστούν στις καθιερωμένες μεθόδους ερμηνείας εικόνων, σύμφωνα με το πρότυπα κλινικής πρακτικής.
	Οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες στις φορητές συσκευές τους (Android ή iOS), ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις push.
	Μια ειδοποίηση ενδέχεται να μην δημιουργηθεί ή να καθυστερήσει για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: ■ Προβλήματα αλγοριθμικών δεδομένων ή σφάλματα επεξεργασίας κατά την ανάλυση των τομογραφιών (βλ. Προφυλάξεις για περισσότερες πληροφορίες) ■ Τεχνουργήματα, κίνηση ή άλλοι παράγοντες που μειώνουν την ποιότητα καταχώρισης, καθώς και έλλειψη διαθέσιμου χώρου στον δίσκο για την επεξεργασία νέων τομογραφιών ■ Βλάβη της υποκείμενης διακομιστικής πλατφόρμας ■ Χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης δικτύου ■ Χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης τομογράφου/PACS προς τον διακομιστή του Brainomix 360 ■ Χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης προς την υπηρεσία Brainomix 360 Cloud μέσω διαδικτύου ■ Καθυστερήσεις στις υπηρεσίες ειδοποιήσεων κινητών συσκευών της Apple ή της Google ■ Κακή λήψη σήματος στην κινητή συσκευή που λαμβάνει την ειδοποίηση ■ Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ορισμένων κινητών συσκευών ενδέχεται να καθυστερούν τις ειδοποιήσεις

2.4 Προφυλάξεις

	Η απόδοση του Brainomix 360 e-ASPECTS επηρεάζεται από την ποιότητα της εικόνας της αξονικής τομογραφίας εισόδου. Εάν το Brainomix 360 e-ASPECTS λάβει δεδομένα κακής ποιότητας, μη έγκυρα ή κατεστραμμένα, ενδέχεται να επηρεαστεί η ικανότητα του συστήματος να επεξεργάζεται αποτελεσματικά τα αποτελέσματα. Ο χρήστης πρέπει συνεπώς να ελέγχει χειροκίνητα την εικόνα για τεχνουργήματα του τομογράφου και εικόνες κακής ποιότητας, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα.
---	---

	Το Brainomix 360 e-ASPECTS εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία της υποκείμενης πλατφόρμας διακομιστή στην οποία έχει εγκατασταθεί και δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης δεδομένων. Τα αποτελέσματα και τα αρχικά δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε σύστημα PACS και να δημιουργούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας.
	Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα για τα συμπτώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της αγγειογραφίας ή/και άλλης ενδεδειγμένης φροντίδας σύμφωνα με την καθιερωμένη κλινική πρακτική, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν προορίζεται για χρήση ως συσκευή αποκλεισμού και τα περιστατικά που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τη συσκευή χωρίς ειδοποίηση υποψίας για LVO δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι υποδηλώνουν αποκλεισμό LVO. Όλα τα περιστατικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε αγγειογραφία, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαγνωστική διερεύνηση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
	Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση των τομογραφιών, καθώς το Brainomix 360 e-ASPECTS ενδέχεται να παράγει ειδοποίηση υποψίας για LVO χωρίς τον εντοπισμό σε μια τομογραφία σημείου υπέρπυκνου αγγείου και μπορεί να μην παράγει ειδοποίηση υποψίας για LVO παρά τον εντοπισμό σημείου υπέρπυκνου αγγείου.
	Το Brainomix 360 e-ASPECTS έχει επικυρωθεί σε πληθυσμούς ενηλίκων ασθενών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε παιδιατρικά περιστατικά δεν έχουν τεκμηριωθεί.

2.5 Κλινικά οφέλη

Τα πλεονεκτήματα του Brainomix 360 e-ASPECTS είναι το εξής:

- Να παρέχει στον προοριζόμενο χρήστη μια αναφορά βαθμολογίας ASPECTS με ευαισθησία και ειδικότητα σε επίπεδο ειδικού.
- Να παρέχει ταξινόμηση και ιεράρχηση ειδοποιήσεων για υποψία για LVO ή ICH.
- Να παρέχει αυτόματη επισήμανση, απεικόνιση και ογκομετρική ποσοτικοποίηση των παθολογικών υπερπυκνώσεων.

2.6 Περιβάλλον χρήσης

Το Brainomix 360 e-ASPECTS προορίζεται για χρήση σε επιτραπέζιες ή φορητές συσκευές που έχουν εγκριθεί από τον φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης για κλινική χρήση. Η προβολή σε επιτραπέζιες και φορητές συσκευές προσφέρει τα πλεονεκτήματα κάθε συσκευής. Ωστόσο, οι εικόνες προεπισκόπησης για φορητές συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βοήθημα για διαγνωστική αξιολόγηση.

3 Εγκατάσταση και εκπαίδευση

Πριν από την πρώτη χρήση του Brainomix 360 e-ASPECTS, απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού και η εκπαίδευση του/των χρήστη(-ών) του.

3.1 Εγκατάσταση

Το Brainomix 360 e-ASPECTS μπορεί να εγκατασταθεί στον οργανισμό σας είτε μέσω συσκευής βασισμένης σε cloud είτε σε τοπικό εικονικοποιημένο ή φυσικό περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες. Πριν από την εγκατάσταση, η Brainomix (ή ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας) συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας, των απαιτήσεων ισχύος και δικτύωσης, καθώς και τυχόν συστημάτων τρίτων που ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με το λογισμικό Brainomix 360 e-ASPECTS. Επικοινωνήστε με τη Brainomix ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα σχετικά με τη μέθοδο και τις απαιτήσεις εγκατάστασης.

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε κινητές συσκευές (smartphone και tablet), κατεβάστε την εφαρμογή Brainomix 360 Mobile στη συσκευή σας:

- App Store (για συσκευές iOS) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (για συσκευές Android) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Ακολουθήστε τις οδηγίες της κινητής συσκευής σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

3.2 Εκπαίδευση

Για τη χρήση του Brainomix 360 e-ASPECTS απαιτείται επάρκεια στην ερμηνεία αξονικών τομογραφιών χωρίς σκιαγραφικό για τη διαχείριση ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πριν από την πρώτη χρήση του λογισμικού απαιτείται εκπαίδευση. Η εκπαίδευση προγραμματίζεται εκ των προτέρων και πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτές της Brainomix (ή από εξουσιοδοτημένους τρίτους εκπαιδευτές), κατά τη φάση της αρχικής εγκατάστασης, προς τους αρμόδιους κλινικούς ή/και εκπροσώπους του οργανισμού σας. Στη συνέχεια, οι νέοι χρήστες μπορούν να εκπαιδευτούν στη χρήση του λογισμικού από τον/τους υπεύθυνο(-ους) εκπαιδευτή(-ές) του οργανισμού σας. Η Brainomix θα σας ενημερώσει σε περίπτωση που απαιτείται νέα εκπαίδευση μετά την αρχική εγκατάσταση. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο/-ους εκπαιδευτές του οργανισμού σας ή να επικοινωνήσετε με την Brainomix στη διεύθυνση support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>).

4 Προδιαγραφές συστήματος

4.1 Διακομιστής

Τα ακόλουθα θα πρέπει να θεωρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές για αξιόπιστη χρήση της εφαρμογής:

Επεξεργαστής	Συμβατός επεξεργαστής x86-64 με 4 πυρήνες στα 3,5+ GHz που υποστηρίζει εντολές AVX (π.χ. Intel Xeon, AMD EPYC)
Μνήμη	RAM 16 GB
Δίσκος	SSD 500 GB
Δίκτυο	Ethernet 1 Gb
Λειτουργικό σύστημα	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Πελάτες

Τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης web και οι ακόλουθες πλατφόρμες θα πρέπει να θεωρούνται ελάχιστες απαιτήσεις για την αξιόπιστη λειτουργία της διαδικτυακής διεπαφής χρήστη:

Πρόγραμμα περιήγησης web	Υποστηριζόμενη έκδοση
Google Chrome	Τελευταία έκδοση
Mozilla Firefox	Τελευταία έκδοση
Microsoft Edge	Τελευταία έκδοση
Mobile Safari (iOS)	Τελευταία έκδοση
Πλατφόρμα	Ελάχιστες προδιαγραφές
PC (επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής)	Μνήμη: RAM 4 GB Μέγεθος οθόνης: 13,3 ίντσες και άνω Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 Επεξεργαστής: Intel ή AMD CPU
Tablet	Μνήμη: RAM 2 GB Μέγεθος οθόνης: 9,4 ίντσες και άνω Ανάλυση οθόνης: 2048 x 1536
Κινητό τηλέφωνο (iPhone ή Android)	Μνήμη: RAM 2 GB Μέγεθος οθόνης: 4,7 ίντσες και άνω Ανάλυση οθόνης: 1334 x 750

4.3 Γλώσσες

Στην τρέχουσα έκδοση λογισμικού υποστηρίζονται οι εξής γλώσσες:

- Βουλγαρικά (bg)
- Τσεχικά (cs)
- Ουαλικά (cy)
- Γερμανικά (de)
- Ελληνικά (el)
- Αγγλικά (en)
- Ισπανικά (es)
- Φινλανδικά (fi)
- Γαλλικά (fr)
- Κροατικά (hr)
- Ουγγρικά (hu)
- Ιταλικά (it)
- Λετονικά (lv)
- Λιθουανικά (lt)
- Ολλανδικά (nl)
- Πολωνικά (pl)
- Πορτογαλικά (pt)
- Πορτογαλικά (Βραζιλία) (pt-br)
- Ρουμανικά (ro)
- Σερβικά (sr)
- Σλοβακικά (sk)
- Σλοβενικά (sl)
- Σουηδικά (sv)
- Τουρκικά (tr)

4.4 Απόδοση και διάρκεια ζωής

Για την τρέχουσα έκδοση λογισμικού ισχύουν οι εξής προδιαγραφές απόδοσης:

Χρόνος επεξεργασίας (ανά αξονική τομογραφία)	≤ 1 λεπτό (μετά την ανάκτηση από το PACS ή την ολοκλήρωση της αποστολής)
Ευαισθησία για τον εντοπισμό ισχαιμικών περιοχών ASPECTS	ελάχ. 50%
Ειδικότητα για την ταυτοποίηση των ισχαιμικών περιοχών ASPECTS	ελάχ. 94%
Ευαισθησία για την ανίχνευση LVO	ελάχ. 60%
Ειδικότητα για την ανίχνευση LVO	ελάχ. κατώτερο όριο του CI 80%
Ευαισθησία για την ανίχνευση ICH	ελάχ. 91%
Ειδικότητα για την ανίχνευση ICH	ελάχ. 94%

Η τεχνική πλατφόρμα Brainomix 360 συνοδεύεται από ξεχωριστό τεχνικό δελτίο με πληροφορίες σχετικές με το τμήμα πληροφορικής του οργανισμού σας, το οποίο παρέχεται κατά την αρχική εγκατάσταση και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος Brainomix 360 e-ASPECTS είναι απεριόριστη για την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και για τη διάρκεια της συμβατικής παροχής υπηρεσιών, όταν η εγκατάσταση πραγματοποιείται σε εικονική μηχανή που λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις λογισμικού από την Brainomix.

5 Συμβατότητα τομογράφων και εικόνων

Το λογισμικό Brainomix 360 e-ASPECTS έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με αξονικές τομογραφίες χωρίς σκιαγραφικό που αποστέλλονται μέσω του πρωτοκόλλου DICOM. Οι τομογραφίες αυτές θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πάχος τομής	Μέγιστο πάχος τομής 2 mm
Όγκος λήψης	Ενιαία ακολουθία cerebrum από το επίπεδο του κύκλου του Willis ή κάτω, έως την κορυφή
Μέθοδος ανασύνθεσης	Πυρήνας μαλακών ιστών (χωρίς υπερβολική εξομάλυνση). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαναληπτική ανασύνθεση, ανασύνθεση με βαθιά μάθηση ή ανασύνθεση με αντίστροφη προβολή με φιλτράρισμα, εφόσον το μέγεθος του πυρήνα δεν είναι υπερβολικά μεγάλο.
Παράθυρο	Παράθυρο εγκεφάλου (όχι παράθυρο οστών)

Η χρήση παχύτερων τομών ή υπερβολικά χαμηλής δόσης μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση τεχνουργημάτων στην εικόνα και, κατά συνέπεια, σε μειωμένη απόδοση βαθμολόγησης. Η χρήση λανθασμένου παραθύρου απεικόνισης συνήθως οδηγεί σε αποτυχία του Brainomix 360 e-ASPECTS να επεξεργαστεί την τομογραφία.

6 Κυβερνοασφάλεια

Το Brainomix 360 e-ASPECTS είναι συνήθως εγκατεστημένο σε διακομιστή (φυσικό ή εικονικό) εντός του νοσοκομειακού δικτύου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι ευάλωτο σε κακόβουλο λογισμικό ή ιούς που διεισδύουν στο εν λόγω δίκτυο, στο οποίο είναι ενσωματωμένο το Brainomix 360 e-ASPECTS, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Το Brainomix 360 e-ASPECTS δεν παρουσιάζει συγκεκριμένη ευπάθεια για το νοσοκομειακό δίκτυο στο οποίο είναι ενσωματωμένο και είναι απίθανο να αποτελέσει στόχο κακόβουλης εκμετάλλευσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που παρουσιαστούν τέτοιοι κίνδυνοι, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφή ή απώλεια δεδομένων επεξεργασίας που λαμβάνονται, αποθηκεύονται ή αποστέλλονται, αλλοίωση, απώλεια ή φθορά αποθηκευμένων δεδομένων διαμόρφωσης ή διακοπή ή παρεμπόδιση της κανονικής λειτουργίας.

Το Brainomix 360 e-ASPECTS έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτών των κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Ειδικότερα, το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε:

- Η πρόσβαση των χρηστών να μπορεί να περιοριστεί και να ελεγχθεί
- Τα στοιχεία αποθήκευσης δεδομένων να μην είναι προσβάσιμα μέσω δικτύου, παρά μόνο μέσω του διαδικτυακού συστήματος Brainomix
- Μόνο ο ελάχιστος αριθμός θυρών που απαιτούνται για όλες τις λειτουργίες να παραμένουν ανοικτές
- Η μετάδοση δεδομένων μέσω μη αξιόπιστων συνδέσεων να είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη
- Η Brainomix να μπορεί να παρακολουθεί το σύστημα εξ αποστάσεως και να εγκαθιστά με ασφάλεια ενημερώσεις ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες

Το Brainomix 360 e-ASPECTS έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί ένα πολυεπίπεδο μοντέλο εξουσιοδότησης που βασίζεται σε ρόλους χρηστών. Αυτό περιλαμβάνει τους τυπικούς χρήστες που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν το σύστημα και τους διαχειριστές που έχουν πρόσθετα προνόμια για να μπορούν να:

- Αποκοούν πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών ή στη διαμόρφωση του συστήματος
- Ορίζουν και διαχειρίζονται επιλογές ασφαλείας
- Διαγράφουν δεδομένα/σαρώσεων ασθενών
- Τροποποιούν ή καταργούν χρήστες

Το πακέτο εγκατάστασης του Brainomix 360 e-ASPECTS περιλαμβάνει τοπικό τείχος προστασίας, λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό για τον διακομιστή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν ή να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές πολιτικές ασφαλείας. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι Διαχειριστές να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη της Brainomix πριν από την αφαίρεση ή την επαναδιαμόρφωση αυτών των προκαθορισμένων μηχανισμών προστασίας, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του συστήματος.

Για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, το Brainomix 360 e-ASPECTS περιλαμβάνει ενσωματωμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης με όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, οι οποίοι περιγράφονται στην ενότητα Έλεγχος πρόσβασης του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Εάν οι χρήστες ή οι διαχειριστές υποπτευθούν ότι τα διαπιστευτήρια σύνδεσης ενός χρήστη έχουν παραβιαστεί, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αλλάξει άμεσα ή να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.

Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να οριστούν και να επαναρρυθμιστούν από τους χρήστες ή/και τους διαχειριστές, αλλά πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις πολυπλοκότητας του κωδικού πρόσβασης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις πολυπλοκότητας των κωδικών πρόσβασης έχουν οριστεί σε προκαθορισμένες τιμές, αλλά μπορούν να ρυθμιστούν από τους διαχειριστές για να προσφέρουν επιλογές αυξημένης πολυπλοκότητας, εφόσον αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται από τοπικές πολιτικές ασφαλείας.

Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση ειδικών χαρακτήρων, τη δημιουργία λιστών αποκλεισμένων κωδικών πρόσβασης που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν και τον καθορισμό μέγιστης χρονικής διάρκειας για την επαναφορά κωδικών πρόσβασης. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι προαιρετικός από προεπιλογή, αλλά μπορεί επίσης να επιβληθεί από τους διαχειριστές.

Το Brainomix 360 e-ASPECTS μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απενεργοποιεί αυτόματα τους λογαριασμούς χρηστών που δεν είχαν καμία δραστηριότητα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και, για τους ενεργούς χρήστες, περιλαμβάνει επίσης λειτουργία αυτόματης λήξης συνεδρίας, η οποία αποσυνδέει τους χρήστες μετά από περίοδο αδράνειας.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Brainomix 360 e-ASPECTS, οι χρήστες δεν θα πρέπει να κοινοποιούν τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και θα πρέπει να αποσυνδέονται αμέσως όταν δεν χρησιμοποιούν το σύστημα.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να επιλέξουν τη χρήση λογαριασμών χρηστών του Active Directory (μέσω LDAP) ή SSO με ενσωμάτωση σε παρόχους cloud, αντί του προεπιλεγμένου συστήματος ταυτοποίησης της Brainomix.

Παρόλο που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί διάφορα μέτρα κυβερνοασφάλειας, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ευπαθειών ασφαλείας του Brainomix 360 e-ASPECTS εξαρτάται από την υποδομή ασφαλείας του νοσοκομειακού δικτυακού περιβάλλοντος, τις βέλτιστες πρακτικές των χρηστών και τη διαχείριση από τους Διαχειριστές.

Το Brainomix 360 e-ASPECTS θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο σε ασφαλές νοσοκομειακό δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από τείχος προστασίας σε επίπεδο δικτύου, λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό και, ιδανικά, από λογισμικό ανίχνευσης εισβολών (IDS).


Τα μηχανήματα-πελάτες που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον διακομιστή που φιλοξενεί το Brainomix 360 e-ASPECTS θα πρέπει επίσης να προστατεύονται από λογισμικό προστασίας από ιούς/κακόβουλο λογισμικό και λογισμικό ανίχνευσης εισβολών (IDS) και να διατηρούνται ενημερωμένοι με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και διορθώσεις.

7 Έλεγχος πρόσβασης και ειδοποιήσεις

7.1 Σύνδεση

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση διακομιστή Brainomix 360 ή Brainomix 360 Cloud από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο web.
2. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή πρόσφατα από το τρέχον πρόγραμμα περιήγησής σας στο web. Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να σας δώσει τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας.

Brainomix 360:

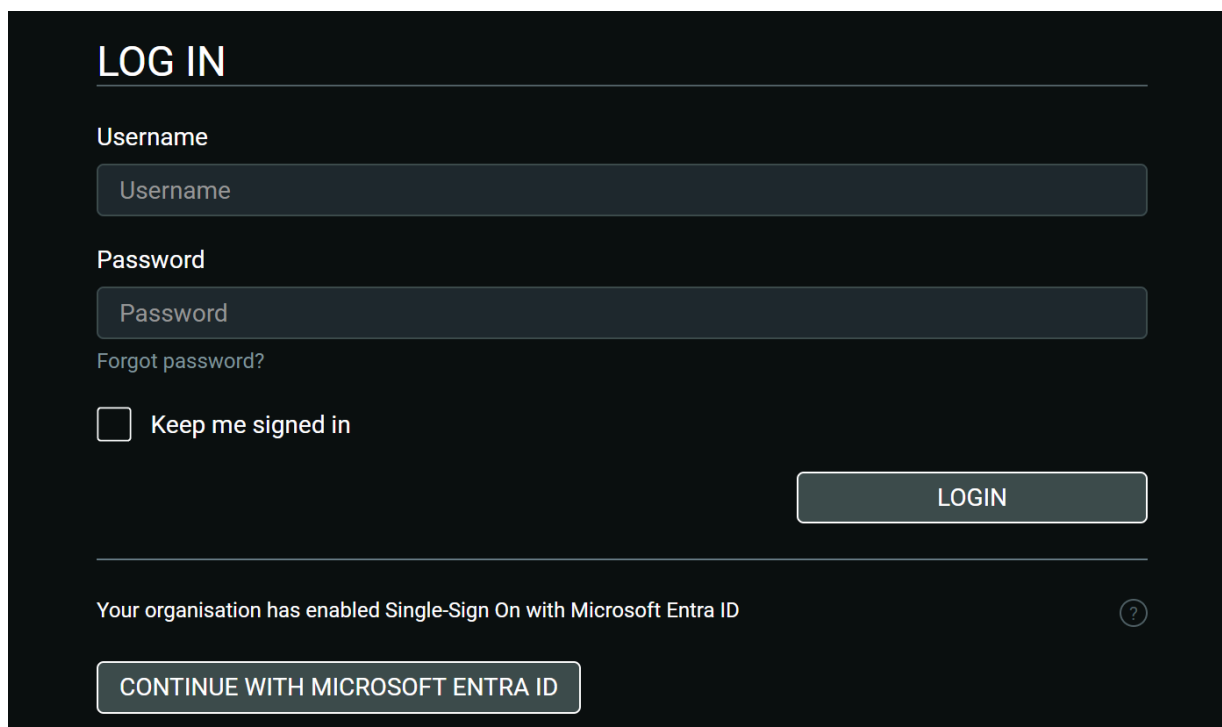

LOG IN

Username

Username

Password

Password

[Forgot password?](#)


☐ Keep me signed in

LOGIN

Your organisation has enabled Single-Sign On with Microsoft Entra ID [?](#)

CONTINUE WITH MICROSOFT ENTRA ID

Brainomix 360 Cloud:

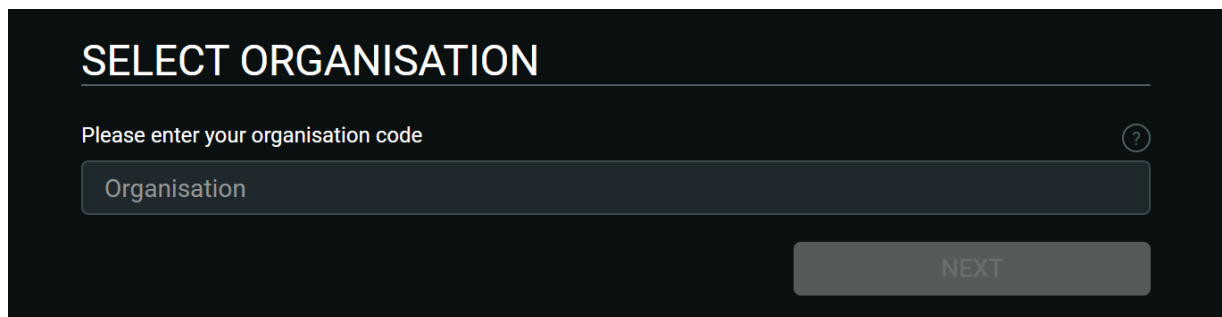

SELECT ORGANISATION


Please enter your organisation code [?](#)

Organisation

NEXT

1. Εάν συνδεθείτε στο Brainomix 360 Cloud, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό του οργανισμού σας
2. Εάν ο οργανισμός σας έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία Single Sign On, πατήστε 'Συνέχεια με Microsoft Entra ID' και ακολουθήστε την τυπική διαδικασία σύνδεσης. Διαφορετικά:
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
4. Αφήστε το πλαίσιο αποεπιλεγμένο εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε αυτόματα μετά από 1 ώρα ή όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε το πλαίσιο εάν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε αυτό τον υπολογιστή μέχρι να αποσυνδεθείτε.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση

- Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να ζητήσετε ένα email επαναφοράς κωδικού πρόσβασης κάνοντας κλικ στην επιλογή 'Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης'.

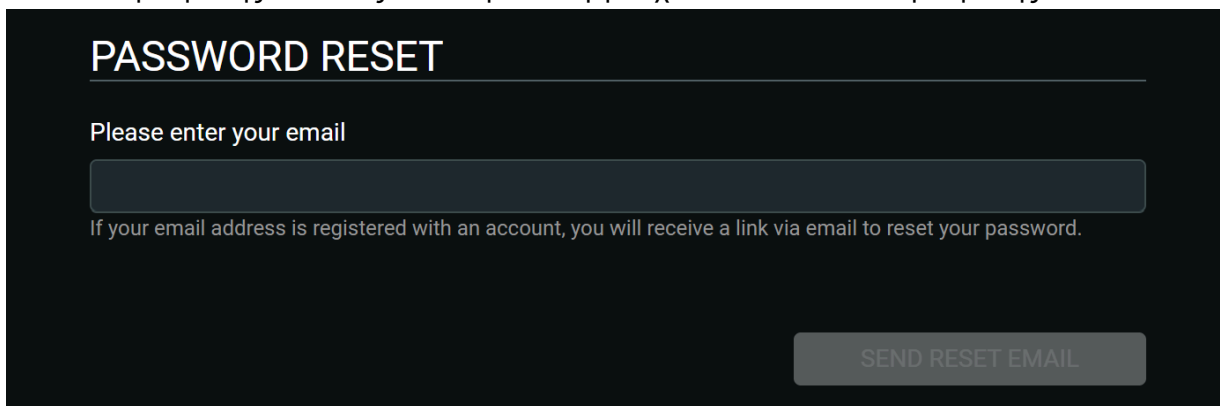


PASSWORD RESET

Please enter your email

If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password.

SEND RESET EMAIL

- Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό διακριτικού από την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείτε.

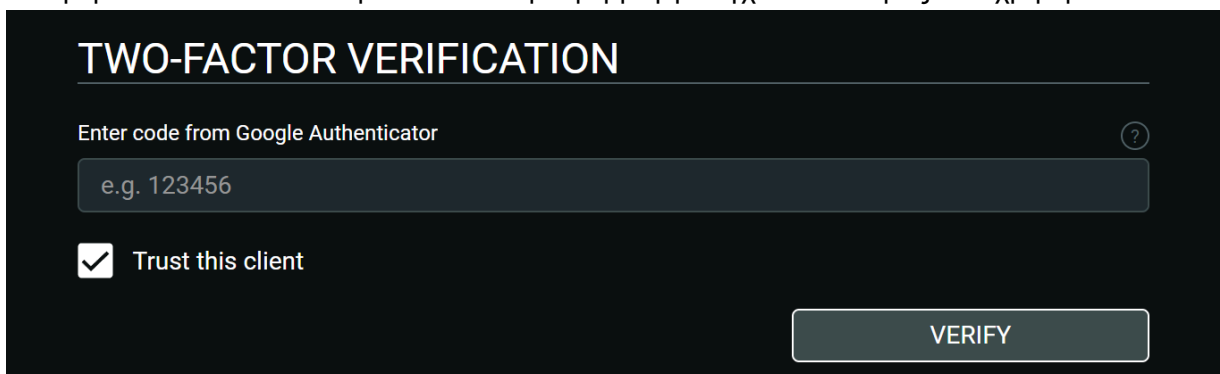

TWO-FACTOR VERIFICATION

Enter code from Google Authenticator ?


☒ Trust this client

VERIFY

- Επιλέξτε 'Ορισμός αυτού του πελάτη ως αξιόπιστου' για να μη σας ζητείται να συμπληρώνετε κωδικό διακριτικού κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή σε κοινές συσκευές.
- Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη κωδικού διακριτικού από την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητάς σας, μπορείτε να εισαγάγετε έναν μη χρησιμοποιημένο κωδικό ανάκτησης από τη λίστα που σας δόθηκε κατά την εγγραφή σας στον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

7.2 Αποσύνδεση

- Ανοίξτε το μενού και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.

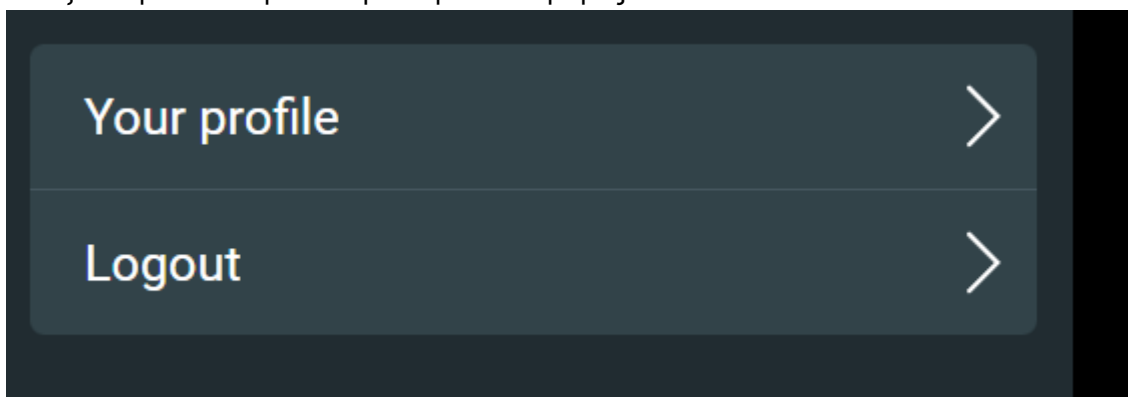

Your profile >

Logout >

- Κάντε κλικ στο κουμπί **Αποσύνδεση**

7.3 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας

1. Ανοίξτε το μενού και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω



2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Το προφίλ μου**
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**
4. Εισαγάγετε τον παλιό και τον νέο κωδικό πρόσβασής σας (Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις πολυπλοκότητας: 8 χαρακτήρες, με τουλάχιστον ένα γράμμα και έναν αριθμό.)
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** ή πατήστε Enter

7.4 Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

1. Ανοίξτε το μενού και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.




2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Το προφίλ μου**
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων**
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εγγραφή**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής στην οθόνη.

7.5 Τηλεφωνικός κατάλογος

Πρόσβαση


1. Η πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή από το Μενού της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής και του επιτραπέζιου υπολογιστή, εάν χρήστες στον οργανισμό

σας έχουν αποθηκεύσει τηλεφωνικούς αριθμούς.

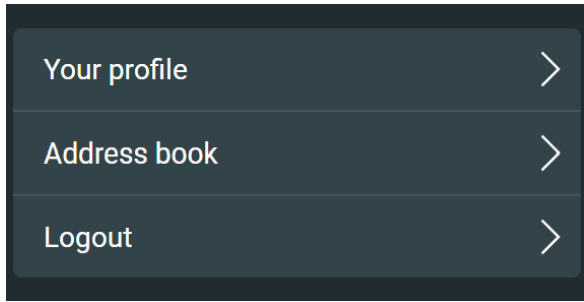

Χρήση


1. Όλοι οι χρήστες και οι καταχωρίσεις με τηλεφωνικό αριθμό προβάλλονται και μπορεί να τους γίνει κλήση.
2. Οι χρήστες που έχουν ορίσει την κατάστασή τους 'σε εφημερία' θα επισημαίνονται σαφώς και η κατάσταση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο.
3. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν έναν άλλο χρήστη με βάση το όνομά του εισάγοντας κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης.
4. Κατά την ενεργοποίηση κλήσης σε άλλο χρήστη, η κλήση καταγράφεται και μπορεί να προβληθεί στο προφίλ χρήστη και για τους δύο χρήστες.

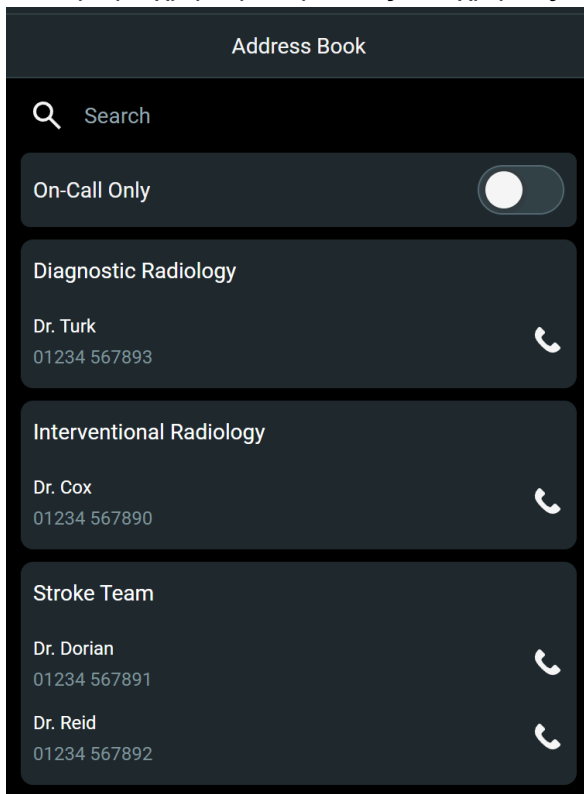

7.6 Κατάσταση εφημερίας


Διαμόρφωση

1. Η κατάσταση εφημερίας μπορεί να διαμορφωθεί μέσω της εφαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε να είστε σε εφημερία ή όχι, και για ποιους οργανισμούς θα είστε σε εφημερία.

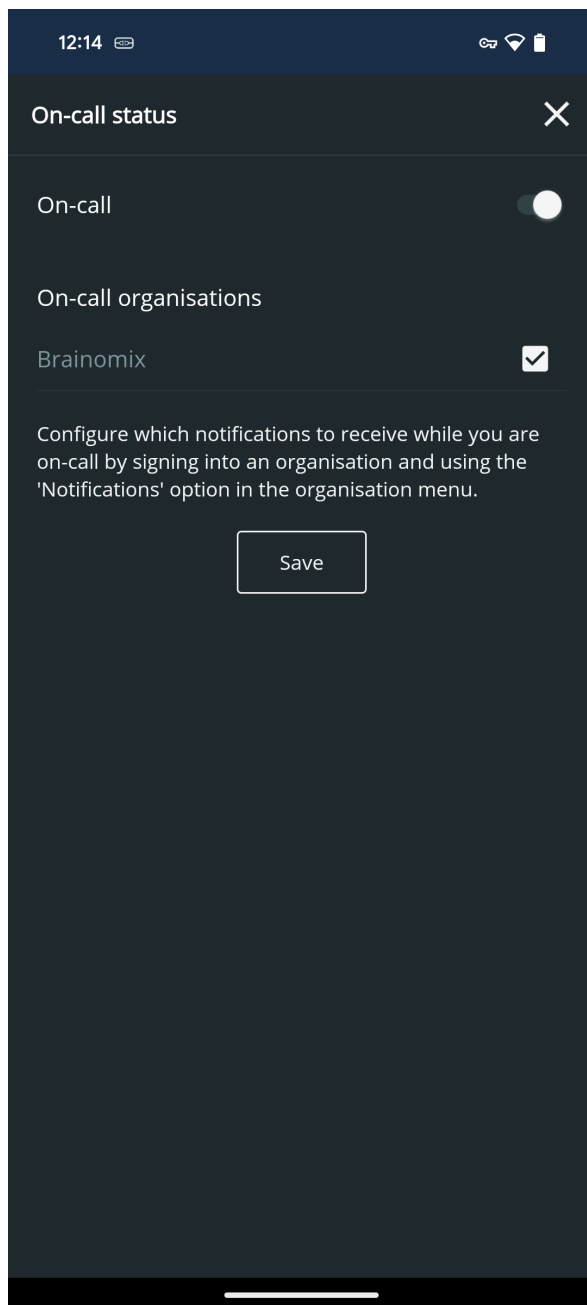

7.7 Ειδοποιήσεις εφαρμογής

1. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε πάντοτε ειδοποιήσεις, να τις λαμβάνετε μόνο όταν είστε σε εφημερία για έναν οργανισμό ή να μην τις λαμβάνετε ποτέ.
2. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν πατώντας 'Ειδοποιήσεις' στο μενού της εφαρμογής για έναν οργανισμό.

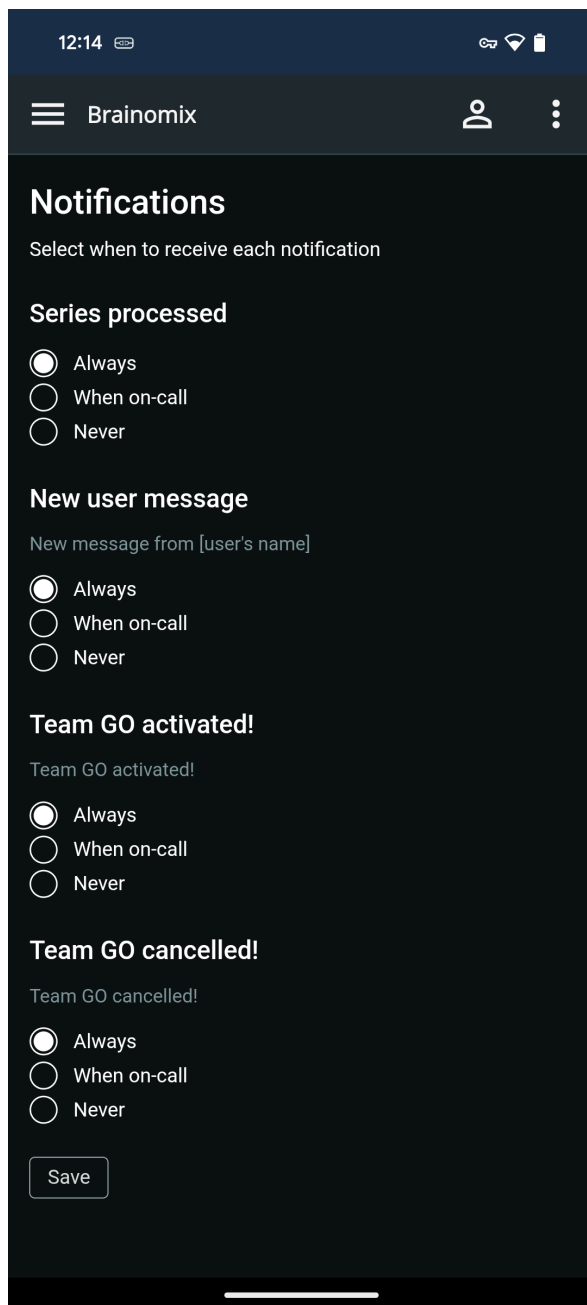

Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή Brainomix 360 Mobile, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες στην κινητή συσκευή σας. Αυτό μπορεί να γίνει κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής Brainomix 360 Mobile στην κινητή σας συσκευή ή να ρυθμιστεί αργότερα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

iOS

- Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
- Πατήστε 'Ειδοποιήσεις'.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή Brainomix 360 Mobile > Πατήστε.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις** στη θέση **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη **Ειδοποιήσεις ευαίσθητες στον χρόνο** στη θέση **Ενεργοποίηση** (οι ειδοποιήσεις παραδίδονται πάντα άμεσα και παραμένουν στην οθόνη κλειδώματος για μία ώρα).
- Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για τις ειδοποιήσεις – συνιστάται να ενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές (Οθόνη κλειδώματος, Κέντρο ειδοποιήσεων και Πανό) και ρυθμίστε το **Στυλ πανό** σε **Επίμονο**.
- Τοποθετήστε τους διακόπτες **Ήχοι και Σήματα** στη θέση **Ενεργοποίηση** (συνιστάται).

Android

- Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
- Πατήστε Εφαρμογές.
- Μετακινηθείτε στην επιλογή Brainomix 360 Mobile > Πατήστε.
- Πατήστε Ειδοποιήσεις.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις** στη θέση **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων, ήχων και δόνησης.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη **Εμφάνιση αθόρυβα** στη θέση **Απενεργοποίηση** (συνιστάται).
- Τοποθετήστε τον διακόπτη **Ορισμός ως προτεραιότητας** στη θέση **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιείται η οθόνη όταν είναι ενεργή η επιλογή 'Μην ενοχλείτε' (συνιστάται).

8 Διεπαφή επιφάνειας εργασίας

8.1 Λίστα ασθενών

The screenshot displays the BRAINOMIX patient list interface. At the top, there is a menu icon and the BRAINOMIX logo. Below this, a search bar and a sort dropdown (set to 'Last updated (newest first)') are visible. A 'Select all on page' checkbox is also present. The main area shows a list of six patients, each with a checkbox, a star icon, and a message icon. The patients are: William Parry (Suspected LVO, CTA, Intervention), Mary Malone (Suspected LVO, CTA), Roger Parslow (Suspected ICH), Lee Scoresby (Suspected ICH), Oliver Payne (Suspected ICH), and Marisa Coulter (Suspected ICH). Each patient entry includes their hospital name, patient ID, ACC, BX ID, and scan status. The interface also includes a 'Show 20 per page' dropdown and a 'Showing 1-6 of 6 results' indicator.

- Η σελίδα με τη λίστα ασθενών εμφανίζει όλους τους ασθενείς που έχετε στη διάθεσή σας. Από προεπιλογή, οι ασθενείς εμφανίζονται με πρώτο τον πιο ασθενή.
- Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες των ασθενών κάνοντας κλικ στους αριθμούς σελίδων κάτω από τη λίστα.
- Κάντε κλικ σε έναν ασθενή για να Κάντε κλικ σε έναν ασθενή για να τον ανοίξετε στο πρόγραμμα προβολής ασθενών (βλ. ενότητα Πρόγραμμα προβολής ασθενών).
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να επεκτείνετε τις λεπτομέρειες του ασθενούς και να δείτε τις λεπτομέρειες της τομογραφίας και μια μικρογραφία προεπισκόπησης κάθε τομογραφίας.

8.2 Εύρεση ασθενών

Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τη λίστα ασθενών κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Ταξινόμηση κατά'.

Sort by: Last updated (newest first) ▼

Επιλέξτε μια προτίμηση ταξινόμησης από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Sort by: Last updated (newest first) ▲

Last updated (newest first) ✓

Last updated (oldest first)

Patient name (ascending)

Patient name (descending)

Patient ID (ascending)

Patient ID (descending)

Αναζήτηση

Αναζητήστε έναν ασθενή χρησιμοποιώντας το όνομα, τον αριθμό καταχώρισης ή το αναγνωριστικό του, πληκτρολογώντας κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης επάνω από λίστα ασθενών.

Search

Φιλτράρισμα

Φιλτράρετε τους ασθενείς πατώντας το κουμπί 'Φίλτρα'.

Filters: 0 applied

Ορίστε τις επιλογές με βάση τις οποίες θέλετε να πραγματοποιήσετε φιλτράρισμα. Στη λίστα ασθενών θα εμφανίζονται μόνο οι ασθενείς με σειρές ή αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα επιλεγμένα φίλτρα.

FILTERS

FAVORITES

☐ Show Favorites

LABELS

☐ Suspected ICH

Suspected ICH

☐ Suspected LVO - NCCT

Suspected LVO NCCT

☒ Suspected LVO - CTA

Suspected LVO CTA

☐ Flagged for intervention

Intervention

DELETED SERIES

LAST UPDATED

INSTITUTION NAME

STATE

WORKFLOW

SCANNER

ORIGINAL ORGANISATION

Clear Filters

8.3 Εξαγωγή αποτελεσμάτων

- Επιλέξτε όλους τους ασθενείς που θέλετε να περιληφθούν κάνοντας κλικ στα σχετικά πλαίσια επιλογής. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για όλες τις σχετικές σελίδες της λίστας ασθενών

Menu

BRAINOMIX®

☒ Select all on page

Search

Sort by: Last updated (newest first)

Export

Series tools

Filters: 0 applied

☒ William Parry Suspected LVO NCCT CTA Intervention Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfd8b Last Updated: 2026-03-13 16:53:56 GMT Show 3 Scans	Export selected scans Export all scans
☒ Mary Malone Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48 Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT Show 3 Scans	
☒ Roger Parslow Suspected ICH Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y M • Patient ID: 1524011 • ACC: 638ICH011 • BX ID: ea0966 Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT Show 1 Scan 3 warnings	
☒ Lee Scoresby Suspected ICH Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9 Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT Show 1 Scan 1 warning	

Συμβουλή: Για να επιλέξετε όλους τους ασθενείς σε μια σελίδα, κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής στη γραμμή κεφαλίδων.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση 'Εμφάνιση X ανά σελίδα' στο κάτω μέρος της λίστας ασθενών, ώστε να εμφανίζονται περισσότεροι ασθενείς σε κάθε σελίδα.

Συμβουλή: Μπορείτε να επεκτείνετε έναν ασθενή και να επιλέξετε τομογραφίες εντός του ασθενούς για εξαγωγή.

- Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή και επιλέξτε αν θα εξαγάγετε μόνο τις επιλεγμένες τομογραφίες ή όλες τις τομογραφίες σε όλες τις σελίδες.
- Θα γίνει λήψη ενός υπολογιστικού φύλλου (μορφή XLSX).

- Το αρχείο αυτής της μορφής μπορεί να ανοιχθεί με διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Excel.
- Το ληφθέν αρχείο περιέχει πολλαπλά φύλλα με μια γραμμή για κάθε ασθενή, με πληροφορίες ταυτοποίησης, αποτελέσματα και οδηγίες για την ερμηνεία των εξαγόμενων πληροφοριών.

8.4 Πρόγραμμα προβολής ασθενών

Επισκόπηση

Όταν ανοίγετε έναν ασθενή από τη λίστα ασθενών, θα μεταφέρεστε στο πρόγραμμα προβολής ασθενών.

Στην αριστερή πλευρική γραμμή εμφανίζονται πληροφορίες ειδικά για τον ασθενή:

- Προβολή: δείτε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία τομογραφιών για τον επιλεγμένο ασθενή
- Σειρές: δείτε όλα τα μεταδεδομένα της συγκεκριμένης τομογραφίας, μαζί με τυχόν προειδοποιήσεις επεξεργασίας
- Μηνύματα: δείτε και αποστείλετε μηνύματα για τον συγκεκριμένο ασθενή

Πάνω από το πρόγραμμα προβολής ασθενών και την πλευρική γραμμή βρίσκεται η κάρτα πληροφοριών ασθενούς. Σε αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία του ασθενούς και παρέχεται η επιλογή 'αστερίσκου' για την επισήμανση ενός ασθενούς ως αγαπημένου. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να έχουν αφαιρεθεί εάν ο ασθενής έχει ψευδωνυμοποιηθεί, π.χ. εάν έχει ληφθεί μέσω συγχρονισμού peer-to-peer ή εάν προβάλλετε τον ασθενή στο Brainomix 360 Cloud.



Προβολή τομογραφιών

Κάτω από την κάρτα πληροφοριών ασθενούς και πάνω από την προβολή εικόνας υπάρχει μια γραμμή με στοιχεία ελέγχου προβολής εικόνας. Αυτά είναι, από αριστερά προς τα δεξιά:

- Ο επιλογέας προβολής (απεικονίζεται η 'Πηγή'). Αυτό επιτρέπει γρήγορες αλλαγές προβολής.
- Το στοιχείο ελέγχου πάχους τομής. Εφόσον είναι διαθέσιμο, επιτρέπει την προσαρμογή του πάχους τομής με τον συνδυασμό γειτονικών τομών μέσω φίλτρων μέσου όρου, MIP ή MiniIP.
- Το στοιχείο ελέγχου παραθυροποίησης. Αυτό παρέχει ρύθμιση πλάτους/επιπέδου παραθύρου και διάφορες προεπιλογές. Το παράθυρο μπορεί επίσης να ρυθμιστεί κάνοντας δεξί κλικ και σύροντας το ποντίκι.

- Ο διακόπτης εναλλαγής επικαλύψεων. Αυτό επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μεμονωμένων ή όλων των επικαλύψεων.
- Το στοιχείο ελέγχου MPR. Εφόσον είναι διαθέσιμο, πατώντας το κουμπί εμφανίζονται επιλογές για αλλαγή σε αξονικές, οβελιαίες ή μετωπιαίες προβολές.
- Το κουμπί Μεγιστοποίησης. Πατώντας αυτό το κουμπί, η προβολή εικόνας επεκτείνεται ώστε να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο.

Το κύριο στοιχείο του προγράμματος προβολής ασθενών είναι η προβολή εικόνας. Αυτή εμφανίζει την τρέχουσα τομή της επιλεγμένης προβολής, με εφαρμογή των κατάλληλων φίλτρων παραθύρου, πάχους τομής και MPR. Επικαλύψεις με πληροφορίες, καθώς και αποτελέσματα αλγορίθμων, μπορούν να εμφανιστούν πάνω από τη βασική εικόνα.

Στην επάνω δεξιά γωνία της προβολής εικόνας εμφανίζονται δείκτες από τα αποτελέσματα των αλγορίθμων, μαζί με τυχόν επεξεργασίες ή ενδείξεις παρέμβασης του χρήστη.

Κάτω από την προβολή εικόνας βρίσκεται το στοιχείο ελέγχου τομών. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις τομές μετακινώντας τον δρομέα.

Παραθυροποίηση

Τα εικονοστοιχεία σε μια αξονική τομογραφία μετρώνται σε μονάδες Hounsfield (HU), οι οποίες πρέπει να μετατραπούν σε επίπεδα του γκρι για την απεικόνιση. Τα στοιχεία ελέγχου πλάτους και επιπέδου παραθυροποίησης στο μενού **Παραθυροποίηση** σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το εύρος των τιμών HU που εμφανίζονται.

Αυτά τα προκαθορισμένα παράθυρα παρέχονται για να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε χειροκίνητα την τομογραφία:

- **Ιστός:** Παρέχει μια καλή συνολική προβολή του εγκεφαλικού ιστού.
- **Αγγεία:** Παρέχει καλύτερη αντίθεση για βελτιωμένη ορατότητα των ενισχυμένων αγγείων.
- **Οστά:** Ενδείκνυται για την προβολή οστικών δομών.
- **Υψηλή αντίθεση:** Παρέχει μια προβολή υψηλής αντίθεσης, στην οποία είναι περισσότερο ορατές οι πρώιμες υπόπυκνες μεταβολές.

Το πλάτος παραθύρου και το επίπεδο μπορούν επίσης να προσαρμοστούν κάνοντας κλικ και μετακινώντας το ποντίκι επάνω από το πρόγραμμα προβολής, μετακινώντας το ποντίκι επάνω/κάτω (για να αλλάξετε επίπεδο) ή αριστερά/δεξιά (για να αλλάξετε πλάτος).


Λεπτομέρειες σειράς

Η ημερομηνία/ώρα της σειράς εμφανίζεται σε επικάλυψη στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής εικόνας, μαζί με παραμέτρους προβολής όπως το πάχος τομής και ο αριθμός τομής. Πρόσθετες λεπτομέρειες θα βρείτε στην καρτέλα Σειρά. Ορισμένες λεπτομέρειες προέρχονται από τις ετικέτες DICOM της πηγαίας σειράς (π.χ. περιγραφή μελέτης), ενώ άλλες προκύπτουν από το ίδιο το λογισμικό (π.χ. έκδοση αλγορίθμου).

Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Στη Σύνοψη αποτελεσμάτων, στην καρτέλα Προβολή, υπάρχουν κουμπιά για λήψη των αρχικών εικόνων πηγής και των εικόνων αποτελεσμάτων σε μορφή DICOM για όλες τις διαθέσιμες σειρές.

8.5 Εμφάνιση e-ASPECTS

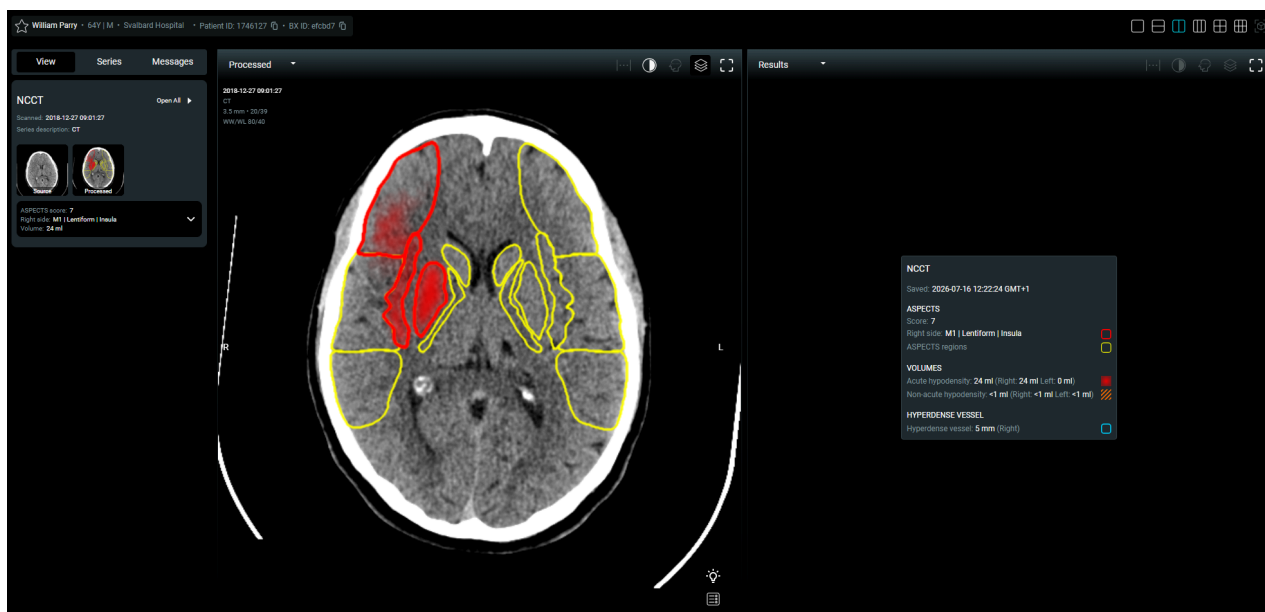

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Η βαθμολογία ASPECTS και οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται στην προβολή Σύνοψη αποτελεσμάτων. Αυτή περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

ASPECTS

Η ενότητα αυτή εμφανίζει τη βαθμολογία ASPECTS που υπολογίζεται από το e-ASPECTS και μια λίστα με τις περιοχές, οι οποίες έχουν βαθμολογηθεί ως περιέχουσες οξεία υπόπυκνη αλλοίωση, με αποτέλεσμα να έχουν μειώσει τη βαθμολογία ASPECTS.

Όγκοι - Υπερπύκνωση



Το Brainomix 360 e-ASPECTS θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει μη φυσιολογικές υπερπυκνώσεις σε αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό. Οι μη φυσιολογικές υπερπυκνώσεις αναφέρονται σε περιοχές του εγκεφάλου με αυξημένες τιμές HU, σε σύγκριση με αυτές που αναμένονται φυσιολογικά σε μια υγιή αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Συχνές αιτίες τέτοιων υπερπυκνώσεων σε ασθενείς με υποψία εγκεφαλικού επεισοδίου είναι οι οξείες αιμορραγίες, καθώς το φρέσκο αίμα είναι συνήθως πιο υπερπυκνό από τη φαιά ή τη λευκή ουσία, ή η διαρροή σκιαγραφικού, αν και αυτή δεν θα πρέπει να παρατηρείται σε αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό, εφόσον δεν έχει προηγηθεί πρόσφατη χορήγησή του.

Εάν ανιχνευτεί μία ή περισσότερες υπέρπυκνες περιοχές στην αξονική τομογραφία, οι περιοχές θα κατατμηθούν και θα εμφανιστούν ως ξεχωριστές επικαλύψεις. Τα χρώματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την οπτική διαφοροποίηση μεταξύ των κατατμημένων περιοχών και δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία από μόνα τους.

Οι όγκοι των κατατμημένων περιοχών εμφανίζονται στη Σύνοψη αποτελεσμάτων ως εξής:

- Συνολικός αριθμός υπέρπυκνων όγκων – καθένας εμφανίζεται με επικάλυψη διαφορετικού χρώματος (έως 5)
- Συνολικός υπέρπυκνος όγκος που ανιχνεύτηκε (σε χιλιοστόλιτρα), με ανάλυση ανά κατατμημένο όγκο

Κάθε επιμέρους υπέρπυκνος όγκος μπορεί να εξαιρεθεί από τον συνολικό όγκο που μπορεί να κατατμηθεί μέσω εφαρμογής φίλτρου. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στο πρόγραμμα προβολής και τα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή φίλτρου δεν μπορούν να αποθηκευτούν ως έξοδος.

Παρόλο που οι μετρήσεις όγκου θα πρέπει να αντιστοιχούν σωστά στις κατατμημένες περιοχές, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει οπτικά ότι οι κατατμημένες περιοχές αντιστοιχούν σωστά στις υποκείμενες υπερπυκνώσεις στην εικόνα.

Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα αυτή είναι ξεχωριστή σε σχέση με τη δυνατότητα υπερπύκνωσης αγγείων, η οποία επιχειρεί να εντοπίσει αποφράξεις ή ασβεστώσεις σε αγγεία.

Όταν ανιχνεύεται μεγάλος υπέρπυκνος όγκος, τα αποτελέσματα υπόπυκνου όγκου, βαθμολογίας ASPECTS και υπέρπυκνων αγγείων καταστέλλονται. Εάν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει τη χειροκίνητη επεξεργασία, η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανεμφάνιση των κατεσταλμένων αποτελεσμάτων.

Όγκοι - Οξεία / μη οξεία υπόπυκνη αλλοίωση

Ο όγκος των υπόπυκνων ευρημάτων σε ml, όπως υπολογίζεται από το Brainomix 360 e-ASPECTS. Πρόκειται για μια μέτρηση του 'θερμικού χάρτη'. Ο όγκος οξείας υπόπυκνης περιοχής αναφέρεται επίσης ως 'όγκος πυρηνικής περιοχής (NCCT)'. Η ακρίβεια του υπολογισμού του όγκου εξαρτάται από την ποιότητα του 'θερμικού χάρτη', η οποία θα πρέπει να επαληθεύεται χειροκίνητα.

Οι διαχειριστές μπορούν επιπλέον να ενεργοποιήσουν τον υπολογισμό της καθαρής πρόσληψης νερού, με βάση τη βαρύτητα της υποπυκνότητας εντός της οξείας υπόπυκνης περιοχής. Εφόσον ενεργοποιηθεί, η τιμή αυτή θα εμφανίζεται ως ποσοστό κάτω από τον όγκο της οξείας υπόπυκνης περιοχής, όταν ανιχνεύεται επαρκής υποπυκνότητα.

Υπέρπυκνα αγγεία



Το e-ASPECTS επιχειρεί να ανιχνεύσει εντοπισμένες υπερπυκνώσεις αγγείων σε σαρώσεις αξονικής τομογραφίας χωρίς χρήση σκιαγραφικού, οι οποίες συνήθως υποδεικνύουν την ύπαρξη απόφραξης (θρόμβου) ή ασβέστωσης. Οι ιδιότητες της εικόνας, όπως το σχήμα της υπερπύκνωσης και οι τιμές HU εντός ενός υπέρπυκνου αγγείου, λαμβάνονται υπόψη για την ταξινόμηση αυτών των χαρακτηριστικών, με τις ασβεστώσεις να έχουν συνήθως υψηλότερες και πιο σαφώς καθορισμένες τιμές HU σε σχέση με τους θρόμβους. Η υπέρπυκνη περιοχή θα κατατμηθεί και θα επισημανθεί στην εξαγόμενη εικόνα των αποτελεσμάτων.

Εάν εντοπιστούν περισσότερες από μία αποφράξεις, το μήκος της απόφραξης θα υποδεικνύεται με βάση τη μέτρηση του μεγαλύτερου άξονα της κατατμημένης περιοχής που σχετίζεται με την απόφραξη. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αποφράξεις και στα δύο ημισφαίρια μιας σάρωσης αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου, οι μετρήσεις μήκους θα παρέχονται ανά ημισφαίριο.

Να σημειωθεί ότι ορισμένες υπερπυκνώσεις μπορεί να μην ανιχνευτούν από το λογισμικό, ενώ ενδέχεται επίσης να επισημανθούν ψευδή θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα αυτά τα χαρακτηριστικά να επισημανθούν εκτός των αγγείων, περίπτωση στην οποία η υπερπύκνωση δεν οφείλεται σε απόφραξη, ακόμη και αν έχει ανιχνευτεί εσφαλμένα ως τέτοια.

Υποβλήθηκε σε επεξεργασία

Η προβολή 'Μετά από επεξεργασία' εμφανίζει την εικόνα αξονικής τομογραφίας μετά από επεξεργασία και ανάλυση με το e-ASPECTS. Οι τομές είναι σχολιασμένες και εμφανίζουν την κατάτμηση των περιοχών ASPECTS και τα ταυτοποιημένα υπόπυκνα ή υπέρπυκνα σημεία.

Επικαλύψεις

Οι επιμέρους επικαλύψεις που εμφανίζονται στην προβολή 'Μετά από επεξεργασία' έχουν ως εξής:


- **Περιοχές ASPECTS:** Εμφανίζει την κατατμημένη απεικόνιση των περιοχών ASPECTS.
- **Προσβληθείσες περιοχές:** Επισημαίνει τις περιοχές ASPECTS που έχουν βαθμολογηθεί ως περιέχουσες οξείες υπόπυκνες μεταβολές.
- **Οξεία υπόπυκνη αλλοίωση:** Επισημαίνει τις περιοχές με οξείες υπόπυκνες μεταβολές.
- **Μη οξεία υπόπυκνη αλλοίωση:** Υποδεικνύει περιοχές με παλαιότερες αλλαγές υπόπυκνης που έχουν εξαιρεθεί από τον αλγόριθμο e-ASPECTS
- **Υπερπύκνωση:** Υποδεικνύει περιοχές με σήματα ανώμαλης υπερπύκνωσης. Εάν κατατμηθούν μεμονωμένες υπέρπυκνες περιοχές, θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση των επιμέρους όγκων.
- **Υπέρπυκνο αγγείο:** Υποδεικνύει υπέρπυκνα αγγεία που ανιχνεύονται ως αποφράξεις.
- **Ασβέστωση:** Υποδεικνύει υπέρπυκνα αγγεία που ανιχνεύονται ως αποτιτανώσεις.
- **Περιοχές pc-ASPECTS:** Εμφανίζει την κατατμημένη απεικόνιση των περιοχών pc-ASPECTS.
- **Μέσο οβελιαίο επίπεδο:** Εμφανίζει την ένδειξη της γραμμής του μέσου οβελιαίου επιπέδου.
- **Κειμενικές επισημάνσεις:** Εμφανίζει τις ενδείξεις πλευράς και άλλες επεξηγηματικές κειμενικές επικαλύψεις.

Προειδοποιήσεις

Εάν υπάρχει εικονίδιο θαυμαστικού στο κουμπί 'Πληροφορίες' ή 'Σειρές', υπάρχουν προειδοποιήσεις από το e-ASPECTS οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της βαθμολογίας.

8.6 Χειροκίνητα αποτελέσματα

Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα από τον διαχειριστή σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε το αυτόματο αποτέλεσμα και να αποθηκεύσετε το δικό σας χειροκίνητο αποτέλεσμα στο Brainomix 360. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την προβολή τομογραφιών στο Brainomix 360 cloud.

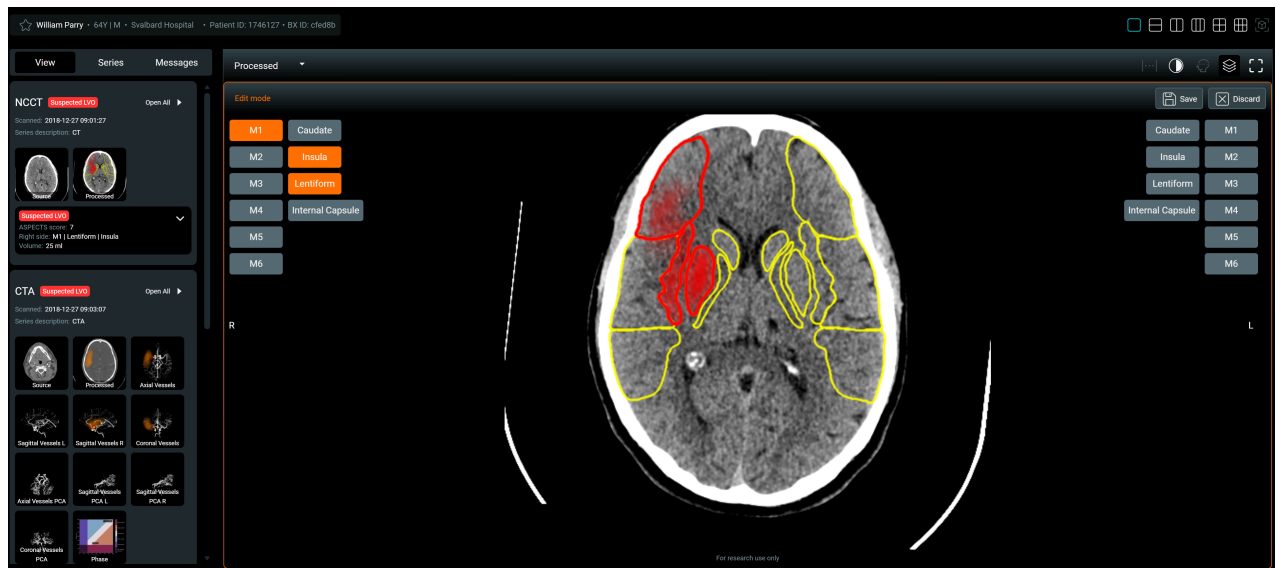

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αυτόματο αποτέλεσμα, αποθηκεύοντας τη δική σας βαθμολογία. Κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού 'Επεξεργασία' στην κάτω δεξιά γωνία της προβολής εικόνας για να ανοίξετε το παράθυρο επεξεργασίας.

Κάντε κλικ στα ονόματα των περιοχών που πρέπει να συνεισφέρουν στη βαθμολογία ASPECTS για να υπολογίσετε τη δική σας χειροκίνητη βαθμολογία ASPECTS.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε το αποτέλεσμα σας.


9 Προβολή σε κινητό

9.1 Λίστα ασθενών

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στο Brainomix 360 ή το Brainomix 360 Cloud χρησιμοποιώντας το κινητό σας, μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλους τους ασθενείς. Πατήστε σε έναν ασθενή για να ανοίξετε το Πρόγραμμα προβολής ασθενών. Αν κάνετε σάρωση προς τα κάτω, θα ανανεώσετε τη λίστα ασθενών.

Πατήστε το εικονίδιο ☆ για να επισημάνετε έναν ασθενή ως αγαπημένο ή το εικονίδιο ★ για να αναιρέσετε την επισημάνση αγαπημένου.

Πατήστε το εικονίδιο 📄 για να αντιγράψετε το αναγνωριστικό ασθενούς ή ΒΧ στο πρόχειρο.

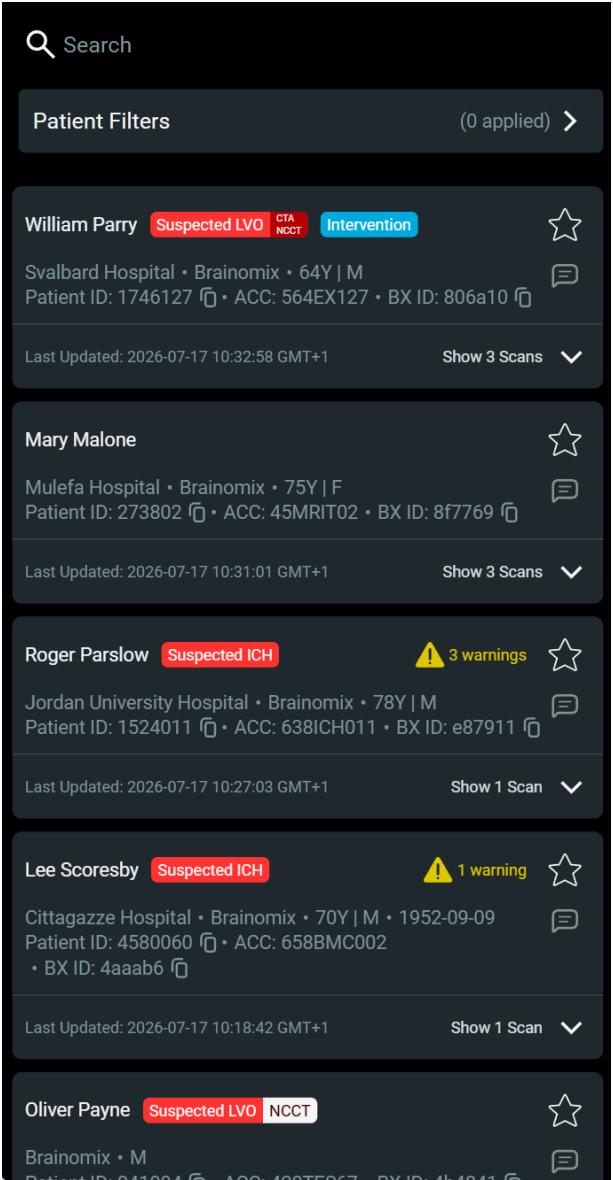

9.2 Πρόγραμμα προβολής ασθενών

Όλες οι σειρές

Όταν ανοίγετε έναν ασθενή από τη λίστα ασθενών, θα μεταβαίνετε στην προβολή 'Όλες οι σειρές'. Εναλλακτικά, αν βρίσκεστε ήδη στο πρόγραμμα προβολής, πατήστε το κουμπί ALL στην κάτω αριστερή γωνία. Μπορείτε να δείτε όλες τις σειρές και τα αποτελέσματα για αυτόν τον ασθενή και να πλοηγηθείτε σε οποιαδήποτε διαθέσιμη προβολή πατώντας τη μικρογραφία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά κουμπιά στο κάτω μέρος για να μεταβείτε απευθείας στην προβολή των αποτελεσμάτων μιας τομογραφίας:

- NCCT: εάν είναι διαθέσιμη, προβάλετε την αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό για αυτόν τον ασθενή και τυχόν συσχετιζόμενα αποτελέσματα
- CTA: εάν είναι διαθέσιμη, προβάλετε την αξονική αγγειογραφία για αυτόν τον ασθενή και τυχόν συσχετιζόμενα αποτελέσματα
- CTP: εάν είναι διαθέσιμη, προβάλετε τη σάρωση αξονικής τομογραφίας αιμάτωσης για αυτόν τον ασθενή και τυχόν συσχετιζόμενα αποτελέσματα
- MRI: εάν είναι διαθέσιμη, προβάλετε τις μαγνητικές τομογραφίες για αυτόν τον ασθενή και τυχόν συσχετιζόμενα αποτελέσματα

Σημειώστε ότι η πλατφόρμα Brainomix 360 θα εμφανίζει αποτελέσματα από όλα τα αδειοδοτημένα προϊόντα. Αυτό το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει αποτελέσματα από άλλα προϊόντα εκτός από το e-ASPECTS.

Info

GO

William Parry

Svalbard Hospital

Patient ID: 1746127

BX ID: 806a10


64Y | M

Scanned: 2018-12-27 09:01:27

Suspected LVO

NCCT

Source

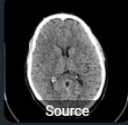

Processed



ASPECTS score: 7

Right side: M1 |

Lentiform | Insula

Volume: 25 ml

Results

Scanned: 2018-12-27 09:03:07

Suspected LVO

CTA

Source



Processed



Vessel MIPs



3D Vessels (Spin)



3D Vessels (Tilt)



Phase



Vessel density ratio: 59 %


Lower vessel density side: Right

Results

Scanned: 2018-12-27 09:09:36

CTP

Source

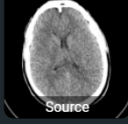


Overview



Mismatch



AIF/VOF curves

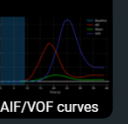

AIF/VOF MIP




rCBF




rCBV





Tmax

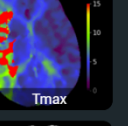

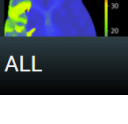



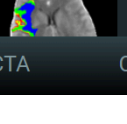

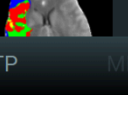

ALL

NCCT

CTA

CTP


MR

Προβολή τομογραφιών

Η διάταξη του προγράμματος προβολής εμφανίζει ορισμένα στοιχεία ελέγχου για τον ασθενή στο επάνω μέρος, με πρόσβαση σε:

- Πληροφορίες: προβολή όλων των μεταδεδομένων για αυτή την τομογραφία, μαζί με τυχόν προειδοποιήσεις επεξεργασίας
- Μηνύματα: προβολή και αποστολή μηνυμάτων για αυτό τον ασθενή
- GO: επισημάνση αυτού του ασθενούς για παρέμβαση
- Κοινή χρήση και υποστήριξη μέσω αναπτυσσόμενου μενού: πρόσβαση στις επιλογές 'Αποστολή στην Υποστήριξη' και 'Κοινή χρήση δεδομένων ασθενούς'
- Κλινικά δεδομένα μέσω αναπτυσσόμενου μενού: εισαγωγή των σχετικών κλινικών πληροφοριών για αυτόν τον ασθενή
- Έλεγχος επιλεξιμότητας: αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του ασθενούς βάσει κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών ή/και κατευθυντήριων οδηγιών κλινικών δοκιμών

Χρησιμοποιώντας την κίνηση τσιμπήματος για ζουμ (pinch-to-zoom), μπορείτε να κάνετε ζουμ στην τομογραφία για να τη δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ενώ μπορείτε επίσης να τη μετακινήσετε σύροντάς την με δύο δάχτυλα.

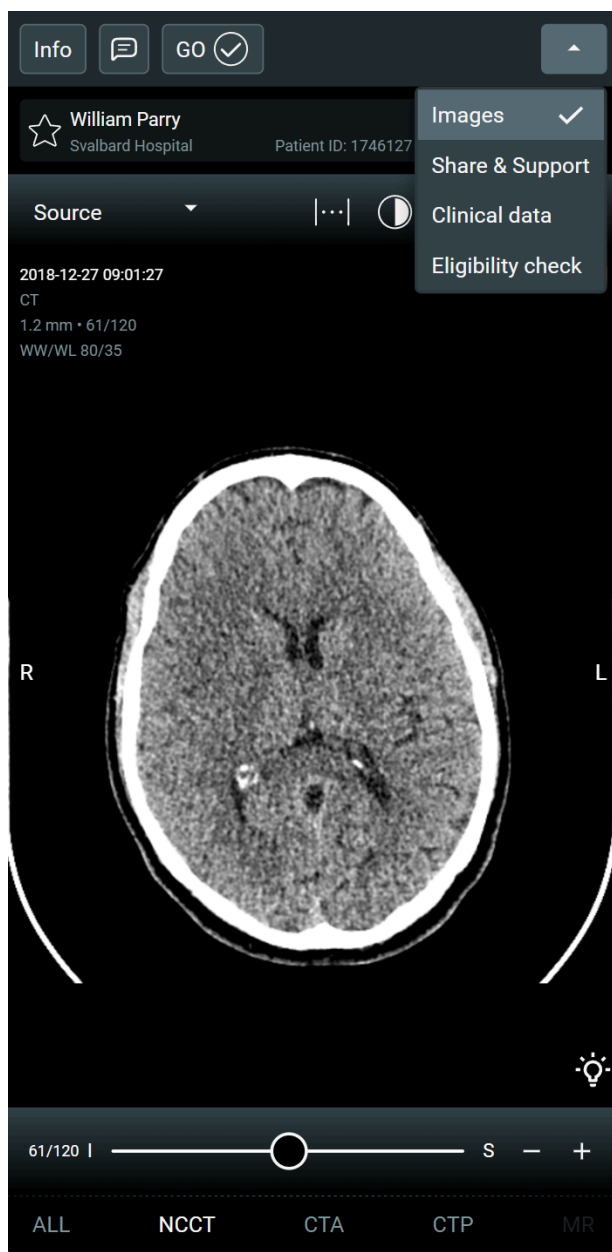



9.3 Ανταλλαγή μηνυμάτων

Εάν αυτό έχει ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του συστήματός σας, μπορούν να προβληθούν και να αποσταλούν τα μηνύματα για έναν ασθενή. Καθώς έρχονται νέα μηνύματα, θα είναι δυνατή η προβολή τους στον ασθενή και αν έχει γίνει η σχετική ρύθμιση, θα αποστέλλεται ειδοποίηση εφαρμογής κινητού σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Τα νέα μηνύματα θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της περιοχής συνομιλίας καθώς λαμβάνονται.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πληκτρολογήστε το μέσα στο πλαίσιο στο κάτω μέρος και κάντε κλικ στο κουμπί αποστολής στα δεξιά.

Για να δείτε ποιος έχει διαβάσει ένα μήνυμα, πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο πληροφοριών. Για να κλείσετε τη λίστα 'Διαβάστηκε από', κάντε κλικ στο εικονίδιο κλεισίματος.

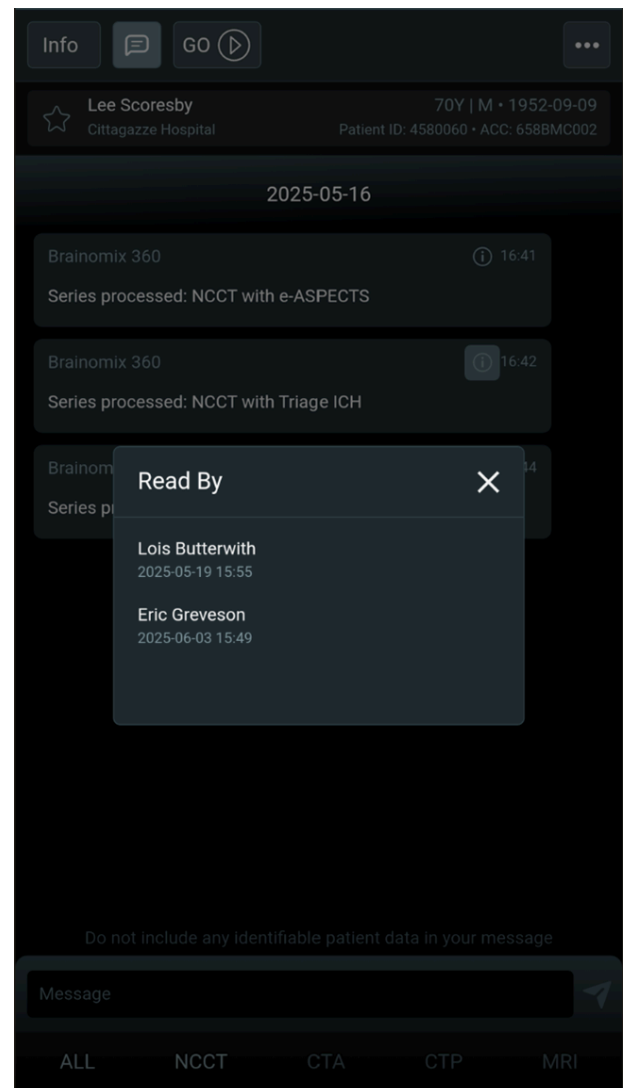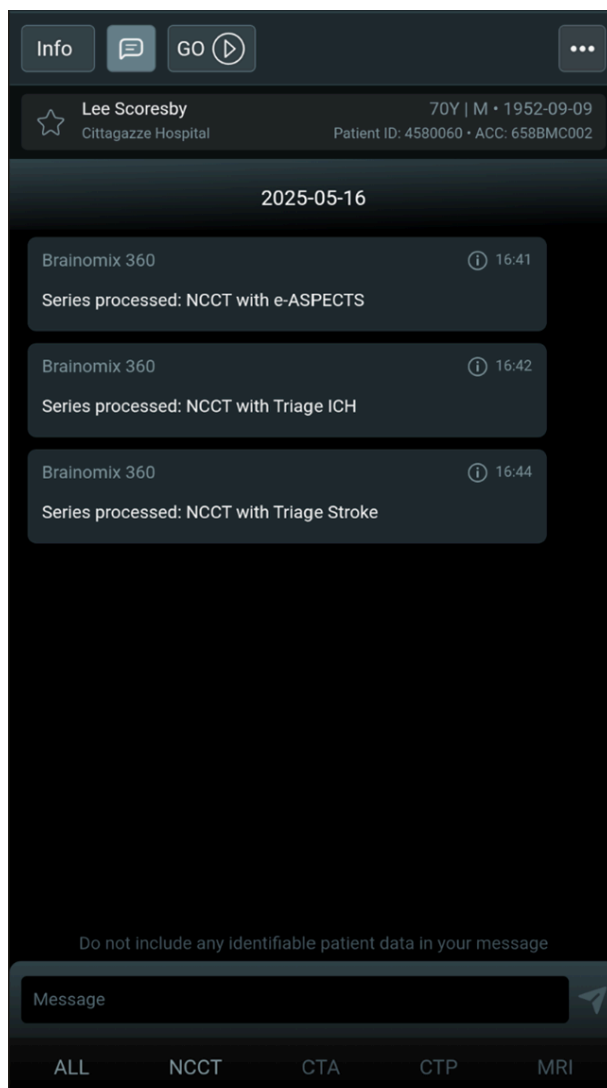

9.4 Επισήμανση ασθενή για παρέμβαση


Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από τον διαχειριστή του συστήματός σας, μπορείτε να επισημάνετε χειροκίνητα έναν ασθενή για παρέμβαση από το πρόγραμμα προβολής ασθενών.

Πατήστε το κουμπί 'GO' και σύρετε για επιβεβαίωση. Όλοι οι χρήστες με ενεργοποιημένες ειδοποιήσεις παρέμβασης θα ειδοποιηθούν ότι ο ασθενής έχει επισημανθεί.

Η επισήμανση μπορεί να ακυρωθεί, εάν απαιτείται, και οι χρήστες με ενεργοποιημένες ειδοποιήσεις παρέμβασης θα ειδοποιηθούν ότι έχει ακυρωθεί.

Είναι επίσης δυνατό να επισημανθεί μια παρέμβαση ως ολοκληρωμένη για έναν ήδη επισημασμένο ασθενή.

Σημειώστε ότι αυτό είναι ένα καθαρά χειροκίνητο εργαλείο επικοινωνίας και η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με χρήση αυτοματοποιημένων αποτελεσμάτων.

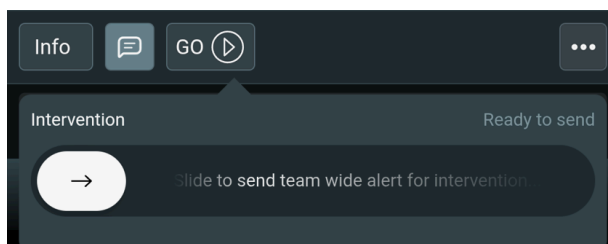

9.5 Κλινικά δεδομένα

Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα από τον διαχειριστή του συστήματός σας, η ενότητα κλινικών δεδομένων θα είναι διαθέσιμη σε ξεχωριστή καρτέλα. Η ενότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση πρόσθετων κλινικών δεδομένων για τον ασθενή. Όλα τα κλινικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως μπορούν να προβληθούν κάνοντας κλικ στην επιλογή 'Προβολή ιστορικού'.

Μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας μια προϋπολογισμένη συνολική βαθμολογία NIHSS ή να την υπολογίσετε διαδραστικά κάνοντας κλικ στην επιλογή 'Υπολογισμός βαθμολογίας' και εισάγοντας τη βαθμολογία για κάθε στοιχείο στη φόρμα. Μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία NIHSS μετά από 24 ώρες με τον ίδιο τρόπο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλα τα άλλα πεδία κλινικών δεδομένων για να προσθέσετε κλινικές πληροφορίες ή να τα αφήσετε κενά εάν δεν είναι συναφή.

Τα κλινικά δεδομένα που εισάγονται εδώ θα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις περιστατικού σε PDF και στα εξαγόμενα λογιστικά φύλλα XLSX.

Assessment

Intervention

Premorbid mRS

Unknown

0

1

2

3

4

5

Affected hemisphere

Unknown

Left

Right

Both

NIHSS

Calculate score

Affected hemisphere

Last known well (GMT)

Symptoms discovered (GMT)

Tap to select date and time

Tap to select date and time

Door in (GMT)

Door out (GMT)

Tap to select date and time

Tap to select date and time

CSC door in (GMT)

Tap to select date and time

Save changes

9.6 Έλεγχος επιλεξιμότητας

Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα από τον διαχειριστή του συστήματός σας, η επιλεξιμότητα του ασθενούς βάσει κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών ή/και κατευθυντήριων οδηγιών κλινικών δοκιμών αξιολογείται στην καρτέλα 'Έλεγχος επιλεξιμότητας'.

Από προεπιλογή, διατίθενται προς ενεργοποίηση από τους διαχειριστές του συστήματος τα κριτήρια των κλινικών οδηγιών ESO και AHA, καθώς και των κλινικών δοκιμών TRACE-III, EXTEND και WAKE-UP.

Μια σύνοψη της επιλεξιμότητας του ασθενούς βάσει των διαμορφωμένων κατευθυντήριων οδηγιών εμφανίζεται στην καρτέλα 'Έλεγχος επιλεξιμότητας' και στην έκθεση ασθενούς.

Η επιλεξιμότητα για κάθε κριτήριο καθορίζεται βάσει των αυτόματων αποτελεσμάτων απεικόνισης για κάθε τομογραφία και των κλινικών δεδομένων, εφόσον παρέχονται. Για την αξιολόγηση της πυρηνικής περιοχής αιμάτωσης, χρησιμοποιείται ο όγκος του χάρτη πυρηνικής περιοχής. Στην καρτέλα 'Έλεγχος επιλεξιμότητας' διατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα του ασθενούς για κάθε κριτήριο κάθε κατευθυντήριας οδηγίας.

Info

GO

☆ William Parry

64Y | M

Svalbard Hospital

Patient ID: 1746127

•

BX ID: 806a10

ESO Thrombectomy Guideline (<6 hours)

Data missing

NCCT

CTA

CTP

✓

✓

—

MRI DWI

MRI DSC

Clinical data

—

—

?

NIHSS >= 6

Missing

Information missing ▶

0-6 hours from last known well

Missing

Information missing ▶

Any occlusion

Match

2018-12-27 09:03:07 • Occlusion: ICA / Proximal MCA

ASPECTS >= 6

Match

2018-12-27 09:01:27 • ASPECTS: 7

Hide Criteria

^

ALL

NCCT

CTA

CTP

MR

9.7 Κοινή χρήση δεδομένων ασθενών

Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα από τον διαχειριστή σας, μπορείτε να κοινοποιήσετε τα δεδομένα ενός ψευδωνυμοποιημένου ασθενούς σε κάποιο άτομο εντός ή εκτός του οργανισμού σας μέσω συνδέσμου κοινής χρήσης.

Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο κοινής χρήσης:

- Κάντε κλικ στο κουμπί 'Κοινή χρήση και υποστήριξη' στο Πρόγραμμα προβολής ασθενών..
- Στην καρτέλα 'Ασθενής', πατήστε 'Κοινή χρήση διεύθυνσης URL' ή 'Αντιγραφή διεύθυνσης URL στο πρόχειρο'. Σημειώστε ότι αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η κοινή χρήση.
- Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές κοινής χρήσης ή επικολλήστε τον σύνδεσμο σε ένα email ή σε μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τους συνδέσμους κοινής χρήσης

- Με το άνοιγμα του κοινοποιημένου συνδέσμου παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις τομογραφίες ενός μόνο ασθενούς.
- Ο σύνδεσμος θα είναι ψευδωνυμοποιημένος, επομένως ο παραλήπτης δεν θα μπορεί να δει πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ασθενούς στο Πρόγραμμα προβολής ασθενών.
- Ο παραλήπτης πρέπει να διαθέτει πρόσβαση μέσω δικτύου στον διακομιστή, εάν αυτός βρίσκεται σε Intranet.
- Οποιοσδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον ψευδωνυμοποιημένο ασθενή έως τη λήξη του συνδέσμου. Ο χρόνος λήξης διαμορφώνεται από τον διαχειριστή σας.

10 Εξαγόμενα αποτελέσματα

10.1 DICOM

Εάν έχουν ρυθμιστεί οι σχετικές παράμετροι στο σύστημά σας, οι σειρές DICOM αποτελεσμάτων θα μεταφέρονται στο σύστημα PACS μέσω σύνδεσης δικτύου DICOM μόλις ολοκληρώνεται η επεξεργασία.

10.2 Συγχρονισμός νέφους

Εάν έχει ρυθμιστεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημά σας, τα ψευδωνυμοποιημένα αποτελέσματα θα συγχρονίζονται με την υπηρεσία Brainomix 360 Cloud. Τα αποτελέσματα μπορούν να προβληθούν στο Brainomix 360 Cloud σαν να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εκεί.

10.3 Ειδοποιήσεις εφαρμογής κινητού

Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο συγχρονισμός με το Brainomix 360 Cloud, μπορεί να ρυθμιστεί η αποστολή ειδοποιήσεων push, ώστε να ειδοποιούνται οι χρήστες της εφαρμογής Brainomix 360 Mobile όταν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα.

10.4 Εκθέσεις ασθενούς

Εάν έχει ρυθμιστεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημά σας, θα αποστέλλονται εκθέσεις ασθενών (PDF ή/και εικόνες), οι οποίες περιέχουν μια επισκόπηση όλων των απεικονιστικών μεθόδων και αποτελεσμάτων ενός ασθενούς, σε διαμορφωμένο PACS μέσω σύνδεσης δικτύου DICOM.

10.5 Εξερχόμενα μηνύματα HL7

Εάν έχουν ρυθμιστεί οι σχετικές παράμετροι στο σύστημά σας, τα μηνύματα HL7 θα αποστέλλονται σε καθορισμένο προορισμό μόλις ολοκληρώνεται η επεξεργασία.

11 Αποστολή και επεξεργασία

Η ενότητα αυτή ισχύει μόνο για το Brainomix 360. Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή επεξεργασία τομογραφιών απευθείας στο Brainomix 360 Cloud.

11.1 Επεξεργασία τομογραφιών

Ροές εργασιών

Το Brainomix 360 μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να παρέχει διαφορετικές ροές εργασιών για χρήση με την κλινική πορεία οξέος τύπου ή τις κλινικές μελέτες. Κάθε ροή εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποστέλλει αποτελέσματα σε διαφορετικές συσκευές προορισμού DICOM.

Παρέχονται δύο προεπιλεγμένα σύνολα ροών εργασιών, 'Οξεία' και 'Μελέτη'. Οι ροές εργασιών οξέος τύπου προορίζονται για την επεξεργασία μικρού αριθμού τομογραφιών με υψηλή προτεραιότητα, ενώ οι ροές εργασιών τύπου μελέτης ενδείκνυνται για την επεξεργασία μεγάλου αριθμού τομογραφιών χαμηλότερης προτεραιότητας. Εάν μια τομογραφία υποβάλλεται σε επεξεργασία με μια ροή εργασιών τύπου μελέτης την ώρα που λαμβάνεται μια τομογραφία οξέος τύπου, το Brainomix 360 θα τη διακόψει και θα επεξεργαστεί την τομογραφία οξέος τύπου πριν συνεχίσει.

Για βοήθεια σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των ροών εργασιών και την ενσωμάτωσή τους με εξωτερικά συστήματα (PACS, αξονικοί τομογράφοι, email κτλ.), επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή με την υποστήριξη της Brainomix.

Χειροκίνητη μεταφορά DICOM

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή DICOM προέλευσης (π.χ. PACS ή αξονικός τομογράφος) και η εφαρμογή ελέγχου (π.χ. πρόγραμμα προβολής PACS) έχουν ρυθμιστεί με τη Brainomix 360 διεύθυνση διακομιστή και τον Τίτλο οντότητας εφαρμογής (Application Entity Title) για την κατάλληλη Brainomix 360 ουρά εισερχόμενων τομογραφιών που είναι συνδεδεμένη στις επιθυμητές ροές εργασιών (βλ. παραπάνω). Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να σας βοηθήσει με αυτές τις ρυθμίσεις.
2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DICOM ελέγχου για να μεταφέρετε μια σειρά αξονικών τομογραφιών στον διακομιστή Brainomix 360. Ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής για περισσότερες πληροφορίες.
3. Ο διακομιστής Brainomix 360 θα ξεκινήσει αυτόματα την επεξεργασία της σειράς.
4. Για την παρακολούθηση της επεξεργασίας από το πρόγραμμα περιήγησης στο web:
 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση του διακομιστή Brainomix 360 στο πρόγραμμα περιήγησης στο web
 2. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή πρόσφατα από το τρέχον πρόγραμμα περιήγησής σας στο web. Συνδεθείτε όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.
 3. Επιλέξτε **Λίστα ασθενών** από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της σελίδας.
 4. Η νέα τομογραφία θα εμφανιστεί στη λίστα ασθενών. Εάν δεν εμφανιστεί, συμβουλευτείτε το αρχείο καταγραφής DICOM για να ελέγξετε για τυχόν σφάλματα.
5. Εάν έχουν ρυθμιστεί οι σχετικές παράμετροι, τα αποτελέσματα DICOM θα αποστέλλονται αυτόματα στο PACS όταν ολοκληρώνεται η επεξεργασία. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα προβολής PACS για να δείτε αυτά τα αποτελέσματα.
6. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στον ασθενή στη λίστα ασθενών για να δείτε τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Αυτόματη μεταφορά DICOM


Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια εξωτερική εφαρμογή, η οποία θα μεταφέρει αυτόματα τις σειρές τομογραφιών στον Brainomix 360 διακομιστή.

Εάν έχουν ρυθμιστεί οι σχετικές παράμετροι, τα αποτελέσματα DICOM θα αποστέλλονται αυτόματα στο PACS μόλις ολοκληρώνεται η επεξεργασία. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα προβολής PACS για να δείτε αυτά τα αποτελέσματα. Σε αυτή τη ρύθμιση παραμέτρων δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε Brainomix 360 καθόλου το περιβάλλον εργασίας web.

Εναλλακτικά, συνδεθείτε και οι τομογραφίες θα εμφανιστούν στη λίστα ασθενών μόλις μπουν στην ουρά για επεξεργασία. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα κάνοντας κλικ σε έναν ασθενή. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα δικτύου DICOM ελέγχοντας το αρχείο καταγραφής DICOM.

Χειροκίνητη αποστολή μέσω του περιβάλλοντος εργασίας web

1. Συνδεθείτε στο Brainomix 360
2. Ανοίξτε το μενού χρησιμοποιώντας το εικονίδιο μενού στο επάνω μέρος της σελίδας.
3. Επιλέξτε **Αποστολή σειράς** από το μενού.

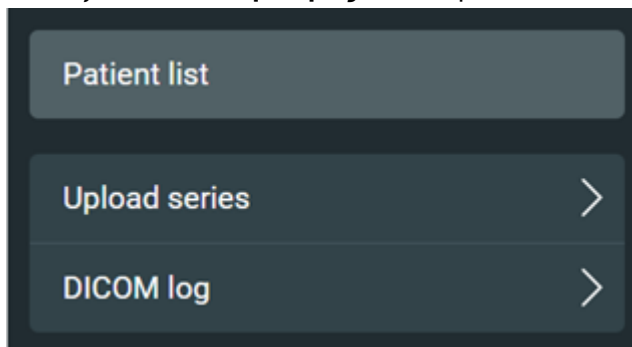

4. Επιλέξτε την κατάλληλη ουρά εισερχόμενων τομογραφιών από το αναπτυσσόμενο μενού κάτω από την περιοχή αποστολής. Η ρύθμιση αυτή θα οριστεί για χρήση της ουράς εισερχόμενων τομογραφιών μελέτης από προεπιλογή.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογή αρχείων** για να επιλέξετε αρχεία εικόνας DICOM ή συμπιεσμένα αρχεία zip που περιέχουν εικόνες DICOM.
Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινήσετε και να αποθέσετε αρχεία απευθείας στην περιοχή αποστολής εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.
Σημείωση: Εάν επιλέξετε πάρα πολλά αρχεία, το πρόγραμμα περιήγησης θα τα απορρίψει. Εάν συμβεί αυτό, πρέπει να συμπίεσετε τις εικόνες DICOM σε ένα μεμονωμένο αρχείο zip και να αποστείλετε αυτό το αρχείο.
6. Τα αρχεία σας θα αποσταλούν και θα ευρετηριαστούν. Εάν ο αριθμός των αρχείων είναι πολύ μεγάλος, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
7. Οι τομογραφίες θα δρομολογούνται αυτόματα σε μια ροή εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
8. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, τα μηνύματα email των αποτελεσμάτων και τα αποτελέσματα DICOM θα αποστέλλονται αυτόματα, όπως έχει ρυθμιστεί για τη ροή εργασίας.
9. Κάντε κλικ στον ασθενή στη λίστα ασθενών για να δείτε τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα περιήγησης στο web.

11.2 Αρχείο καταγραφής DICOM

Κάντε κλικ στη σύνδεση 'Αρχείο καταγραφής DICOM' για να δείτε ένα αρχείο καταγραφής των σειρών DICOM που έχουν ζητηθεί, ληφθεί και αποσταλεί από τον διακομιστή Brainomix 360.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

- ☒ Select all
-
- ☒ Series requested
- ☒ Series received
- ☒ At least one workflow can process the series
- ☒ No workflows can process the series
- ☒ Upload failed
- ☒ Transfer failed
- ☒ Series sent to external system
- ☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View

Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613
Description	Transfer failed
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b

12 Διαχείριση

Οι χρήστες-διαχειριστές έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον δυνατότητες για τη διαχείριση χρηστών, τη διαγραφή τομογραφιών και τη διαμόρφωση της ενσωμάτωσης του συστήματος Brainomix 360 στην κλινική ροή εργασιών. Γενικά, οι ρυθμίσεις αυτές δεν χρειάζεται να αλλάξουν και οι εσφαλμένες ρυθμίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων, λανθασμένο χειρισμό ή μειωμένο επίπεδο ασφάλειας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την ενσωμάτωση του συστήματος Brainomix 360 στην κλινική ροή εργασιών σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας ή με την υποστήριξη της Brainomix.

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση ή αν εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό διαχειριστή σας ή με την υποστήριξη της Brainomix σε μία από τις διαθέσιμες επιλογές επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 'Κανονιστικές πληροφορίες'.

14 Συντήρηση και αναβαθμίσεις υπηρεσίας

Σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης, η Brainomix θα ενημερώνει εκ των προτέρων τους επηρεαζόμενους χρήστες ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και θα διευκρινίζει το αναμενόμενο επίπεδο διακοπής της υπηρεσίας. Η πρόσβαση των χρηστών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια του διαστήματος συντήρησης. Εάν η εφαρμογή Brainomix 360 Mobile είναι εγκατεστημένη σε φορητή συσκευή, φροντίστε να την ενημερώνετε στην πιο πρόσφατη έκδοση όταν σας ζητηθεί ή όταν αυτή είναι διαθέσιμη στο Google Play ή στο Apple App Store.

15 Αναφορά περιστατικών

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) εάν εντοπίσετε κάποιο πιθανό πρόβλημα σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της σουίτας Brainomix 360. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλετε θα διέπεται από την Πολιτική απορρήτου μας (<https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support>). Εάν έχει προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας, μπορείτε να το αναφέρετε επίσης στην αρμόδια αρχή της χώρας σας:

- Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Ελβετία (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html>)
- Τουρκία (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Παροπλισμός

Σε περίπτωση διακοπής και απεγκατάστασης της υπηρεσίας, η Brainomix θα συντονίσει τη διαδικασία με τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού σας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και πλήρης αφαίρεση του συστήματος Brainomix 360, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων και δεδομένων. Ο αντίκτυπος της απεγκατάστασης θα αξιολογηθεί για να καθορισθεί εάν θα επιφέρει αλλαγές στη ροή της κλινικής σας εργασίας ή/και στη διαμόρφωση άλλων συστημάτων. Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στη Brainomix θα ανακτηθούν και οι ενσωματώσεις θα αφαιρεθούν από το σύστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιείται πλέον μεταφορά δεδομένων προς ή από τα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να αποσυρθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απόσυρσης του συστήματος Brainomix 360, επικοινωνήστε με τον διανομέα της περιοχής σας ή με την υποστήριξη της Brainomix.

17 Σύμβολα

Σύμβολο	Περιγραφή συμβόλου
	Υποδεικνύει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
	Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
	Υποδεικνύει τον φορέα που περιέχει πληροφορίες για το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής.
	Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
	Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελβετία.
	Υποδεικνύει τον φορέα που εισάγει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στην εκάστοτε περιοχή.
	Υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης.
	Υποδεικνύει ότι απαιτείται προσοχή κατά το χειρισμό της συσκευής ή του χειριστηρίου κοντά στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί το σύμβολο ή ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί την επίγνωση του χειριστή ή την ανάληψη δράσης από τον χειριστή για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών.
	Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.
	Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18 Υποβολή αιτήματος για έντυπο αντίγραφο

Εάν χρειάζεστε έντυπη έκδοση αυτής της αναθεωρημένης έκδοσης του εγχειριδίου χρήσης για το Brainomix 360 e-ASPECTS, μπορείτε να εκτυπώσετε αυτήν τη σελίδα (δεξί κλικ + Εκτύπωση ή να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από την ιστοσελίδα (<https://www.brainomix.com/docs/>) μας). Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) με το αίτημά σας και ένα έντυπο αντίγραφο θα σας αποσταλεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.