

e-ASPECTS®

Uporabniški priročnik

Različica 14.4

e-ASPECTS-MAN-14.4 - 2026-09-16

e-ASPECTS je del Brainomix 360.

Patent ZDA št. 10.902.596

Patent EU št. 3701495

Prejšnje različice (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Uvod
 - 1.1 Splošni pregled
 - 1.2 ASPECTS
- 2 Predvidena uporaba
 - 2.1 Indikacije
 - 2.2 Kontraindikacije
 - 2.3 Opozorila
 - 2.4 Previdnostni ukrepi
 - 2.5 Klinične koristi
 - 2.6 Okolje uporabe
- 3 Namestitev in usposabljanje
 - 3.1 Namestitev
 - 3.2 Usposabljanje
- 4 Sistemske specifikacije
 - 4.1 Strežnik
 - 4.2 Odjemalci
 - 4.3 Jeziki
 - 4.4 Učinkovitost in življenjska doba
- 5 Združljivost naprave za slikanje in slike
- 6 Kibernetška varnost
- 7 Nadzor dostopa in obvestila
 - 7.1 Prijava
 - 7.2 Odjava
 - 7.3 Spreminjanje gesla
 - 7.4 Dvostopenjska avtentikacija
 - 7.5 Adresar
 - 7.6 Status dežurstva
 - 7.7 Obvestila aplikacije
- 8 Vmesnik za namizje

- 8.1 Seznam bolnikov
- 8.2 Iskanje bolnikov
- 8.3 Izvoz rezultatov
- 8.4 Pregledovalnik bolnikov
- 8.5 e-ASPECTS prikaz
- 8.6 Ročni rezultati
- 9 Mobilni prikaz
 - 9.1 Seznam bolnikov
 - 9.2 Pregledovalnik bolnikov
 - 9.3 Pošiljanje sporočil
 - 9.4 Označite bolnika za poseg
 - 9.5 Klinični podatki
 - 9.6 Preverjanje upravičenosti
 - 9.7 Deljenje podatkov o bolnikih
- 10 Oblika izvoženih rezultatov
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Sinhronizacija v oblaku
 - 10.3 Obvestila mobilne aplikacije
 - 10.4 Poročila o bolniku
 - 10.5 Izhodi HL7
- 11 Nalaganje in obdelava
 - 11.1 Obdelava posnetkov
 - 11.2 Dnevnik DICOM
- 12 Skrbništvo
- 13 Odpravljanje težav
- 14 Vzdrževanje in nadgradnje storitev
- 15 Poročanje o dogodkih
- 16 Razgradnja
- 17 Simboli
- 18 Zahtevanje papirnega izvoda

Zakonsko predpisane informacije

 Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Združeno kraljestvo		 0197			
		EU/EGP/Turčija			
		<table border="1"><tr><td>EU</td><td>REP</td></tr></table>	EU	REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nizozemska
		EU	REP		
	Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Irska				
 +44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)		Švica			
		<table border="1"><tr><td>CH</td><td>REP</td></tr></table>	CH	REP	Taevas Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Švica
CH	REP				

1 Uvod

1.1 Splošni pregled

Brainomix 360 e-ASPECTS (v nadaljevanju imenovan tako Brainomix 360 e-ASPECTS kot tudi e-ASPECTS) je programski medicinski pripomoček za obdelavo posnetkov računalniške tomografije (CT) možganov pri bolnikih z možgansko kapjo. Zagotovljen je kot spletna storitev, pri čemer uporabniki lahko do sistema dostopajo prek spletnega brskalnika na katerem koli računalniku s povezavo s programsko opremo Brainomix 360 (npr. s povezavo LAN ali internetno povezavo) in se lahko prek lokalne omrežne povezave povežejo z drugimi napravami, skladnimi z DICOM, vključno z napravami za CT-slikanje in sistemi PACS.

Običajno je treba nekontrastne CT-posnetke možganov bolnikov po možganski kapi poslati s postopkom DICOM C-STORE iz naprave za CT-slikanje v programsko opremo Brainomix 360. Brainomix 360 je mogoče konfigurirati za samodejni prenos ustvarjenih serij rezultatov v sistem PACS s postopkom DICOM C-STORE. Brainomix 360 lahko dodatno konfigurirate tako, da se rezultati in poročila o bolnikih pošljejo dodatnim ciljem, kadar koli programska oprema obdela posnetke. Ti cilji lahko vključujejo Brainomix 360 Cloud ali druge instance Brainomix 360 in obvestila aplikacije Brainomix 360 Mobile.

1.2 ASPECTS

ASPECTS (Zgodnja CT ocena programa za možgansko kap v Alberti – Alberta Stroke Program Early CT Score) je topografski sistem za ocenjevanje, ki območje možganov, ki ga je prizadela kap, razdeli na 10 interesnih območij. Obstaja šest kortikalnih regij (M1–M6) in štiri regije bazalnih ganglij (kaudata, lentiforma, insula in notranja kapsula). Za vsako od določenih točk je odvzeta ena točka za območje zgodnjih ishemičnih sprememb, kot je parenhimska hipoatenuacija. Ocena nič kaže na difuzno ishemično poškodbo na celotni prizadeti hemisferi, medtem ko je normalnemu CT posnetku možganov dodeljenih 10 točk ASPECTS.

Upoštevajte, da pri računanju ocene ASPECTS niso upoštevane neakutne ishemične spremembe.

pc-ASPECTS

Dodatni sistem ocenjevanja za uporabo pri posteriorni cirkulacijski možganski kapi je pc-ASPECTS (ASPECTS za posteriorno cirkulacijo), kot je opredeljeno v Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>). Razdeljen je na osem interesnih območij: talamusi (vsak po eno točko), okcipitalni lobusi (vsak po eno točko), mezencefalon (dve točki), pons (dve točki), cerebralna hemisfera (vsaka po eno točko). Normalnemu CT posnetku je pripisan pc-ASPECTS v vrednosti deset točk.

Upoštevajte, da e-ASPECTS pri računanju ocene pc-ASPECTS ne upošteva akutnih in neakutnih ishemičnih sprememb v regijah pc-ASPECTS.

2 Predvidena uporaba

To poglavje vsebuje pomembne varnostne informacije o uporabi Brainomix 360 e-ASPECTS.

Brainomix 360 e-ASPECTS je programski paket za obdelavo slik, ki ga uporabljajo usposobljeni strokovnjaki, vključno z zdravniki, ki se ukvarjajo s kapjo, in radiologi. Programska oprema deluje na standardni strojni opremi (fizični ali virtualni) 'v redni prodaji'. Podatki in slike se pridobivajo z napravami za slikanje, ki so skladne z DICOM. To vključuje datoteke DICOM, naložene prek spletnega vmesnika.

Brainomix 360 e-ASPECTS zagotavlja možnosti analize in pregledovanja naborov podatkov v CT možganov bolnikov po možganski kapi. Možnosti analize so namenjene odkrivanju sprememb na sliki, povezanih z možgansko kapjo, izračunu obsega teh sprememb (kot je ASPECTS, ocena zgodnjega CT po programu Alberta Stroke Program) in vizualizaciji teh sprememb.

2.1 Indikacije

1. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran kot pomoč pri diagnozi in zdravljenju akutne hemoragične ali ishemične kapi. Pri ishemični kapi to vključuje bolnike z okluzijo srednje možganske arterije (MCA) ali intrakranialno okluzijo notranje karotidne arterije (ICA).
2. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran za uporabo pri CT-preiskavah možganov brez kontrastnega sredstva pri teh bolnikih kot orodje za podporo odločanju, ki omogoča avtomatizirano analizo posnetkov in točkovanje ASPECTS.
3. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran za uporabo pri CT-preiskavah možganov brez kontrastnega sredstva za poudarjanje domnevnih nenormalnih hiperdenznosti v parenhimu z avtomatizirano analizo posnetka.
4. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran za uporabo pri CT-preiskavah možganov brez kontrastnega sredstva za odkrivanje domnevnih okluzij znotraj intrakranialne veje ICA in MCA M1 z avtomatizirano analizo slik.

2.2 Kontraindikacije

Brainomix 360 e-ASPECTS ni primeren za uporabo s podatki skeniranja, ki vsebujejo slikovne značilnosti, povezane s:

- tumorji ali abscesi
- tuljavami, šanti, embolizacijo ali artefakti gibanja
- intrakranialnimi žilnimi patologijami, kot so arterijske anevrizme, arteriovenske malformacije ali venska tromboza.

Brainomix 360 e-ASPECTS ne smejo uporabljati osebe s telesno ali drugo okvaro, ki bi jih ovirala pri zaznavanju in razlagi rezultatov programske opreme ali jim onemogočala razlago slikanja brez pomoči e-ASPECTS za potrditev vseh rezultatov.

2.3 Opozorila

	Brainomix 360 e-ASPECTS se ne sme uporabljati kot edina podlaga za diagnozo. Rezultata ne smemo obravnavati kot dokončno diagnozo. Brainomix 360 e-ASPECTS kot pomoč pri razlagi sme uporabljati le usposobljen strokovnjak, ki se spozna na razlago CT slik.
	Brainomix 360 e-ASPECTS smejo uporabljati samo strokovnjaki, ki so bili ustrezno usposobljeni za uporabo programske opreme s strani usposobljenih inštruktorjev podjetja Brainomix ali pooblaščenih tretjih oseb.
	Brainomix 360 e-ASPECTS morda ne bo zaznal vseh kroničnih (starih) infarktov ali pa jih bo napačno razvrstil kot novo ishemično poškodbo.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ne bo pravilno identificiral zgodnjih ishemičnih sprememb pri vsakem posnetku in lahko v kateri koli regiji ustvari lažno pozitivne ali lažno negativne rezultate. Uporabnik mora uporabiti lastno strokovno znanje in izkušnje pri analizi CT-slik, da preveri, ali je rezultat programske opreme pravilen.
	Brainomix 360 e-ASPECTS morda ne bo prikazal ali zaznal vseh nenormalnih hiperdenznosti, tudi če bo prejeto obvestilo o sumu na ICH, ali pa bo nepravilno označevalo območja slike, tudi če ni obvestila ICH.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ni namenjen primarni razlagi CT-slik. Uporablja se za pomoč zdravniku pri ocenjevanju.
	Brainomix 360 e-ASPECTS se ne sme uporabljati v primerih ishemične možganske kapi zunaj območja ICA/MCA ali v primerih hemoragične kapi.
	Primeri s strukturnimi nepravilnostmi, kot so tumorji ali drugi slikovni artefakti, lahko posnemajo simptome ishemične kapi in lahko vplivajo na učinkovitost Brainomix 360 e-ASPECTS. V teh primerih se Brainomix 360 e-ASPECTS ne sme uporabljati. Drugi primeri z neishemičnimi možganskimi kapmi in strukturno normalnimi posnetki lahko prav tako posnemajo simptome ishemične možganske kapi in jih ne smete obdelati z uporabo Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Brainomix 360 e-ASPECTS sme biti nameščen le v varnem omrežju, ki je predmet ustreznih zaščitnih ukrepov, vključno z zaščito proti virusom, zaščito pred zlonamerno programsko opremo in s požarnim zidom.
	Za zmanjšanje tveganja nepooblaščen uporabe Brainomix 360 e-ASPECTS uporabniki ne smejo deliti poverilnic za dostop in se morajo odjaviti, ko prenehajo uporabljati sistem.
	Uporabniki, ki dostopajo do spletnega uporabniškega vmesnika Brainomix 360 e-ASPECTS, morajo zagotoviti, da vse analize ali preglede diagnostičnega posnetka izvajajo z odobrenim radiološkim prikazovalnikom.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ni namenjen diagnostičnemu pregledu posnetka, kadar do njega dostopate z mobilnih naprav.

	Pred vrednotenjem rezultatov obdelave je treba preveriti natančnost samodejno segmentiranih regij ASPECTS. Če obstaja kakršno koli nesoglasje ali pomisleki glede kakovosti segmentacije regij ASPECTS, naj uporabniki rezultate ročno uredijo ali pa jih prezrejo.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ne nadomesti potrebe po angiografiji pri obravnavi ishemične kapi – omogoča določanje prioritet in obveščanje o poteku dela.
	V primeru, da Brainomix 360 e-ASPECTS delno ali v celoti ni na voljo ali če obdelanih slik ni mogoče pridobiti, se morajo uporabniki zanašati na standardne metode razlage slik v skladu s standardom skrbnosti.
	Uporabniki morajo zagotoviti, da so obvestila omogočena na njihovih mobilnih napravah Android ali iOS, da lahko prejemajo potisna obvestila.
	Obvestilo morda ne bo ustvarjeno ali pa bo morda zakasnjeno iz več razlogov, med drugim vključno z naslednjimi razlogi: ▪ težave z algoritmičnimi podatki ali napake pri obdelavi med analizo skeniranj (za več informacij glejte previdnostne ukrepe) ▪ artefakti, gibanje ali drugi dejavniki, ki zmanjšujejo kakovost registracije, pomanjkanje prostora na disku za obdelavo novih slik ▪ napaka osnovne strežniške platforme ▪ počasna omrežna povezljivost ▪ počasna povezljivost skenerja/PACS s strežnikom Brainomix 360 ▪ počasna povezljivost s storitvijo Brainomix 360 Cloud prek interneta ▪ zamude pri storitvah za mobilno obveščanje Apple ali Google ▪ slab signal na prejemni mobilni napravi ▪ načini varčevanja z energijo nekaterih mobilnih naprav lahko povzročijo zamude pri obvestilih.

2.4 Previdnostni ukrepi

	Učinkovitost Brainomix 360 e-ASPECTS je omejena s kakovostjo vhodne CT-slike. Če Brainomix 360 e-ASPECTS prejme podatke slabe kakovosti, neveljavne ali poškodovane podatke, lahko to vpliva na zmogljivost sistema za učinkovito obdelavo rezultatov. Uporabnik mora zato ročno preveriti sliko glede artefaktov naprave za slikanje in slike slabe kakovosti, da se izogne nepravilnim rezultatom.
	Brainomix 360 e-ASPECTS je odvisen od pravilnega delovanja osnovne strežniške platforme, na kateri je nameščen, in ni namenjen uporabi kot podatkovna shramba. Rezultate in izvirne podatke je treba shraniti v sistem PACS in ustrezno varnostno kopirati.
	Vsi bolniki morajo prejeti ustrezno oskrbo za svoje simptome, vključno z angiografijo oziroma drugo ustrezno oskrbo v skladu s standardno klinično prakso, ne glede na izhodne podatke iz Brainomix 360 e-ASPECTS.

	Brainomix 360 e-ASPECTS ni namenjen kot naprava za izključitev in v primerih, ki jih je naprava obdelala brez obvestila o sumu na LVO, se ne sme razumeti kot znak, da je LVO izključena. V vseh primerih je treba opraviti angiografijo v skladu s standardno obravnavo možganske kapi.
	Pri pregledovanju posnetkov bodite previdni, saj lahko Brainomix 360 e-ASPECTS lahko prikaže obvestilo o sumu na LVO brez zaznave znaka hiperdenznega žilja na posnetku in lahko tudi ne prikaže obvestila o sumu na LVO kljub prisotnosti znaka hiperdenznega žilja.
	Brainomix 360 e-ASPECTS je bil validiran izključno pri odraslih bolnikih. Varnost in učinkovitost v pediatričnih primerih nista bili ugotovljeni.

2.5 Klinične koristi

Prednosti Brainomix 360 e-ASPECTS so naslednje:

- Zagotavlja referenčno oceno ASPECTS z občutljivostjo in specifičnostjo na ravni strokovnjaka.
- Omogoča triažo in prednostno razvrščanje obvestil o sumu na LVO ali ICH.
- Zagotavlja samodejno označevanje, vizualizacijo in volumetrično kvantifikacijo nenormalnih hiperdenznosti.

2.6 Okolje uporabe

Brainomix 360 e-ASPECTS je namenjen uporabi na namiznih ali mobilnih napravah, ki jih je zdravstvena organizacija odobrila za klinično uporabo. Tako namizni kot mobilni prikaz zagotavljata prednosti naprave, vendar se predogledne slike za mobilne naprave ne smejo uporabljati kot pripomoček za diagnostične obravnave.

3 Namestitev in usposabljanje

Pred prvo uporabo Brainomix 360 e-ASPECTS je potrebna namestitev programske opreme in usposabljanje uporabnikov.

3.1 Namestitev

Brainomix 360 e-ASPECTS je mogoče v vaši organizaciji namestiti z uporabo rešitve v oblaku bodisi v lokalnem virtualiziranem ali fizičnem okolju, glede na potrebe. Brainomix (ali pooblaščen distributer) pred namestitvijo zbere vse potrebne informacije o namestitvi, vključno z lokacijo, zahtevami glede napajanja in omrežja ter vsemi sistemi tretjih oseb, ki lahko interagirajo s programsko opremo Brainomix 360 e-ASPECTS. Glede načina in zahtev za namestitev se posvetujte z družbo Brainomix ali pooblaščenim distributerjem.

Za uporabo programske opreme na mobilnih napravah (pametnih telefonih in tabličnih računalnikih) prenesite aplikacijo Brainomix 360 Mobile na svojo napravo:

- App Store (za naprave iOS) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (za naprave Android) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Sledite navodilom svoje mobilne naprave, da dokončate postopek namestitve.

3.2 Usposabljanje

Uporaba Brainomix 360 e-ASPECTS zahteva usposobljenost za razlago nekontrastnih CT posnetkov za obravnavo bolnikov z akutno ishemično možgansko kapjo. Pred prvo uporabo programske opreme je potrebno usposabljanje. Usposabljanje je organizirano vnaprej in ga izvajajo usposobljeni inštruktorji družbe Brainomix (ali tretji inštruktorji, ki jih imenuje družba Brainomix) v času začetne namestitve za klinične predstavnike in/ali predstavnike za IT vaše organizacije. Nato lahko nove uporabnike za uporabo programske opreme usposobi eden ali več imenovanih vodilnih inštruktorjev v vaši organizaciji. Brainomix vam bo sporočil, ali bo potrebno novo usposabljanje po začetni namestitvi. Za vsa vprašanja v zvezi z usposabljanjem se obrnite na enega ali več vodilnih inštruktorjev v vaši organizaciji ali na Brainomix tako, da pošljete e-poštno sporočilo na support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>).

4 Systemske specifikacije

4.1 Strežnik

Za zanesljivo uporabo aplikacije je treba upoštevati naslednje minimalne specifikacije:

Procesor	Z arhitekturo x86-64 združljiv procesor s štirimi jedri pri 3,5+ GHz, ki podpira navodila AVX(npr. Intel Xeon, AMD EPYC)
Pomnilnik	16 GB RAM
Disk	500 GB SSD
Omrežje	1 Gb Ethernet
Operacijski sistem	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Odjemalci

Za zanesljivo delovanje spletnega uporabniškega vmesnika je treba upoštevati naslednje spletne brskalnike in platforme kot minimalne zahteve:

Spletni brskalnik	Podprta različica
Google Chrome	Zadnja različica
Mozilla Firefox	Zadnja različica
Microsoft Edge	Zadnja različica
Mobile Safari (iOS)	Zadnja različica
Platforma	Minimalne specifikacije
PC (namizni ali prenosni računalnik)	Pomnilnik: 4 GB RAM Velikost zaslona: 13,3 palcev in več Ločljivost zaslona: 1024 × 768 Procesor: Intel ali AMD CPU
Tablični računalnik	Pomnilnik: 2 GB RAM Velikost zaslona: 9,4 palcev in več Ločljivost zaslona: 2048 × 1536
Mobilni telefon (iPhone ali Android)	Pomnilnik: 2 GB RAM Velikost zaslona: 4,7 palcev in več Ločljivost zaslona: 1334 × 750

4.3 Jeziki

V trenutni različici programske opreme so podprti naslednji jeziki:

- bolgarščina (bg)
- češčina (cs)
- valižanščina (cy)
- nemščina (de)
- grščina (el)
- angleščina (en)
- španščina (es)
- finščina (fi)
- francoščina (fr)
- Hrvaščina (hr)
- madžarščina (hu)
- italijanščina (it)
- latvijščina (lv)
- litovščina (lt)
- nizozemščina (nl)
- poljščina (pl)
- portugalščina (pt)
- portugalščina (Brazilija) (pt-br)
- romunščina (ro)
- srbščina (sr)
- slovaščina (sk)
- slovenščina (sl)
- švedščina (sv)
- turščina (tr)

4.4 Učinkovitost in življenjska doba

Naslednje specifikacije učinkovitosti veljajo za trenutno različico programske opreme:

\n

Čas obdelave (na CT)	≤ 1 minuta (po pridobitvi iz PACS ali prenosu)
Občutljivost za identifikacijo ishemičnih območij ASPECTS	najmanj 50 %
Specifičnost za identifikacijo ishemičnih območij ASPECTS	najmanj 94 %
Občutljivost za odkrivanje LVO	najmanj 60 %
Specifičnost za odkrivanje LVO	najmanj spodnja meja CI 80 %
Občutljivost za odkrivanje ICH	najmanj 91 %
Specifičnost za odkrivanje ICH	najmanj 94 %

Poseben tehnični list za platformo Brainomix 360 z informacijami, pomembnimi za oddelek IT vaše organizacije, je na voljo ob prvi namestitvi in na zahtevo.

Življenjska doba izdelka Brainomix 360 e-ASPECTS je neomejena za trenutno različico programske opreme in za čas trajanja pogodbenega zagotavljanja storitev, če je nameščena na virtualnem računalniku, ki od podjetja Brainomix redno prejema posodobitve programske opreme.

5 Združljivost naprave za slikanje in slike

Programska oprema Brainomix 360 e-ASPECTS je zasnovana za delo z nekontrastnimi posnetki CT, poslanimi prek protokola DICOM. Ti posnetki morajo imeti naslednje značilnosti:

Debelina rezine	Največja debelina rezine: 2 mm
Volumen pridobivanja	Enotno cerebralno zaporedje od kroga Willisove stopnje ali nižje, vse do temena
Metodo rekonstrukcije	Jedro mehkega tkiva (brez pretiranega glajenja). Uporabite lahko iterativno rekonstrukcijo, rekonstrukcijo z globokim učenjem ali rekonstrukcijo FBP, če velikost jedra ni prevelika.
Okno	Okno Možgani (ne okno Kost)

Uporaba debelejših rezin ali pretirano nizkega odmerka lahko povzroči nastanek slikovnih artefaktov in posledično slabšo učinkovitost točkovanja. Uporaba napačnega okna običajno povzroči, da Brainomix 360 e-ASPECTS ne sme obdelati posnetka.

6 Kibernetenska varnost

Brainomix 360 e-ASPECTS je običajno nameščen na strežniku (fizičnem ali navideznem) znotraj bolnišničnega omrežja in je kot tak lahko potencialno ranljiv za zlonamerno programsko opremo ali viruse, ki vstopajo v bolnišnično omrežje, v katerem je e-ASPECTS nameščen, ali za druge oblike nepooblaščenega dostopa.

Brainomix 360 e-ASPECTS ne predstavlja posebne ranljivosti za bolnišnično omrežje, v katero je vgrajen, in je malo verjetno, da bi bil namerno izkoriščen. Če bi do takšnih tveganj vendarle prišlo, bi lahko povzročila okvaro ali izgubo podatkov, ki se sprejemajo, shranjujejo ali pošiljajo, okvaro, izgubo ali poškodbo shranjenih konfiguracijskih podatkov ali prekinitev ali preprečitev normalnega delovanja.

Brainomix 360 e-ASPECTS je bil zasnovan ter razvit s funkcijami in zahtevami za zmanjševanje teh tveganj kibernetiske varnosti. Sistem je bil posebej zasnovan tako, da je zagotovljeno naslednje:

- Dostop uporabnikov je mogoče omejiti in nadzorovati.
- Komponente za shranjevanje podatkov niso dostopne prek omrežja, razen prek komponent spletne storitve Brainomix.
- Odprto je le najmanjše število vrat, potrebnih za vse funkcije.
- Prenos podatkov prek nezaupljivih povezav je zaščiten in šifriran.
- Brainomix lahko na daljavo spremlja sistem in varno namesti varnostne posodobitve, če je treba.

Brainomix 360 e-ASPECTS je bil zasnovan tako, da uporablja večplastni model avtorizacije na podlagi vlog uporabnikov. To vključuje standardne uporabnike, ki dostopajo do sistema in ga uporabljajo, ter skrbnike z dodatnimi privilegiji, ki jim omogočajo:

- dostop do podatkov o bolnikih ali konfiguracije sistema,
- nastavitve in upravljanje varnostnih možnosti,
- izbris podatkov o bolnikih/posnetkih,
- spreminjanje ali odstranjevanje uporabnikov.

Namestitveni paket za Brainomix 360 e-ASPECTS vključuje lokalni požarni zid, zaščito proti virusom in pred zlonamerno programsko opremo za strežnik. Te je mogoče spremeniti ali dopolniti, da ustrezajo lokalnim varnostnim politikam, vendar je pomembno, da se skrbniki pred odstranitvijo ali ponovno konfiguracijo teh privzetih zaščit obrnejo na podporo Brainomix, da ne bi ogrozili varnosti sistema.

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa Brainomix 360 e-ASPECTS vključuje vgrajene uporabniško ime/geslo in mehanizme dvostopenjske avtentikacije, ki so opisani v razdelku Nadzor dostopa v tem priročniku za uporabo.

Če uporabniki ali skrbniki sumijo, da so bile uporabniške poverilnice za prijavo ogrožene, je treba takoj spremeniti geslo ali onemogočiti račun.

Gesla lahko nastavijo in ponastavijo uporabniki in/ali skrbniki, vendar morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede zapletenosti gesla. Kot privzete so nastavljene minimalne zahteve za zapletenost gesla, vendar jih lahko skrbniki konfigurirajo, da omogočijo možnosti za večjo zapletenost, kadar je to potrebno ali predpisano z lokalnimi varnostnimi pravili.

Te možnosti vključujejo nastavitve obvezne uporabe posebnih znakov, ustvarjanje črnih seznamov gesel, ki se ne smejo uporabljati, in nastavitve najvišje starosti za ponastavitve gesel. Dvostopenjska avtentikacija je privzeto neobvezna, vendar jo lahko skrbniki uveljavijo.

Brainomix 360 e-ASPECTS je mogoče nastaviti tako, da samodejno onemogoči uporabniške račune, ki so bili neaktivni v določenem obdobju, medtem ko za aktivne uporabnike vključuje tudi funkcijo samodejne prekinitve seje, ki po določenem obdobju neaktivnosti odjavi uporabnike.

Da bi zmanjšali tveganje nepooblaščne uporabe Brainomix 360 e-ASPECTS, uporabniki ne smejo deliti poverilnic za dostop in se morajo odjaviti takoj, ko prenehajo uporabljati sistem.

Skrbniki se lahko odločijo tudi za uporabo uporabniških računov Active Directory (prek LDAP) ali SSO z integracijo ponudnikov v oblaku namesto privzetega sistema avtentikacije Brainomix.

Čeprav so bili načrtovani in izvedeni različni ukrepi za kibernetsko varnost, je uspešna ublažitev varnostnih ranljivosti za Brainomix 360 e-ASPECTS odvisna od varnostne infrastrukture bolnišničnega omrežnega okolja, najboljše prakse s strani uporabnikov in upravljanja s strani skrbnikov.

Brainomix 360 e-ASPECTS je treba namestiti le v varno bolnišnično omrežje, ki je zavarovano s požarnim zidom na ravni omrežja, protivirusno programsko opremo in zaščito pred zlonamerno programsko opremo ter po možnosti s programsko opremo za odkrivanje vdorov (IDS).


Odjemalske naprave, ki se uporabljajo za dostop do strežnika, ki gosti Brainomix 360 e-ASPECTS, morajo biti prav tako zavarovane protivirusno programsko opremo in zaščito pred zlonamerno programsko opremo ter opremo IDS in morajo biti redno posodobljene z varnostnimi popravki in posodobitvami.

7 Nadzor dostopa in obvestila

7.1 Prijava

1. V svojem spletnem brskalniku odprite naslov strežnika Brainomix 360 ali Brainomix 360 Cloud.
2. Če aplikacije v zadnjem času niste uporabljali v svojem trenutnem spletnem brskalniku, se boste morali prijaviti. Vaš skrbnik sistema lahko zagotovi poverilnico za prijavo.

Brainomix 360:

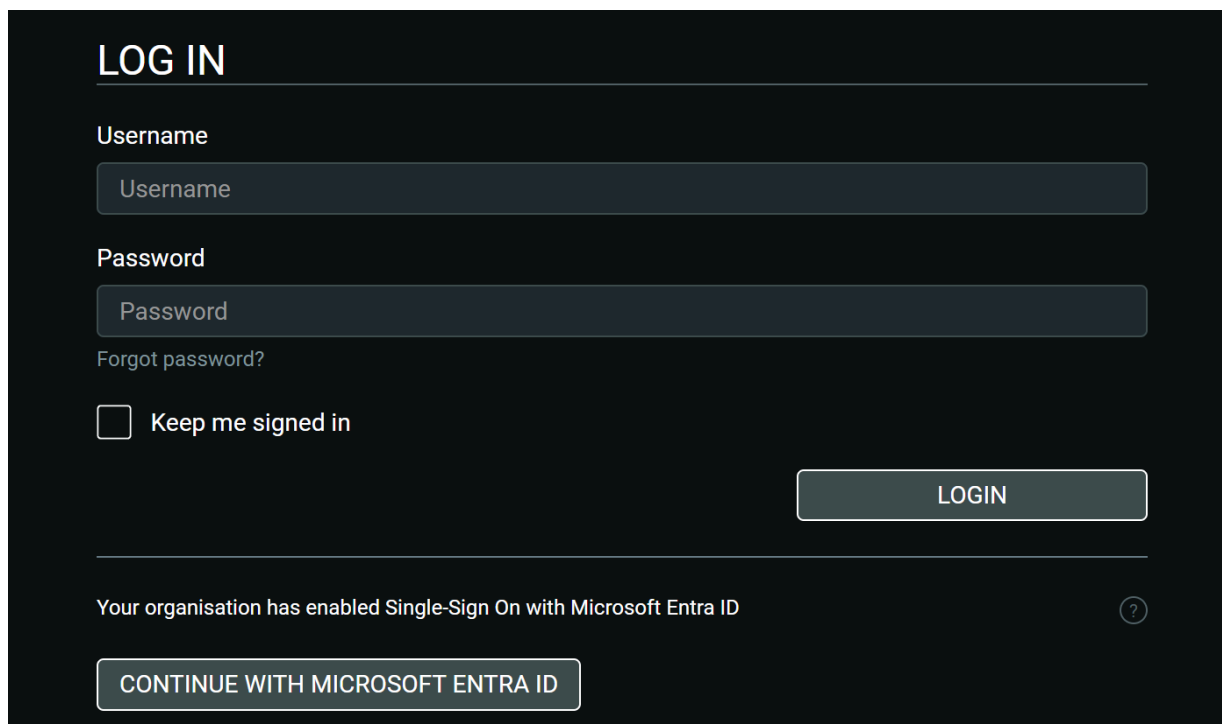

LOG IN

Username

Username

Password

Password

[Forgot password?](#)


☐ Keep me signed in

LOGIN

Your organisation has enabled Single-Sign On with Microsoft Entra ID [?](#)

CONTINUE WITH MICROSOFT ENTRA ID

Brainomix 360 Cloud:

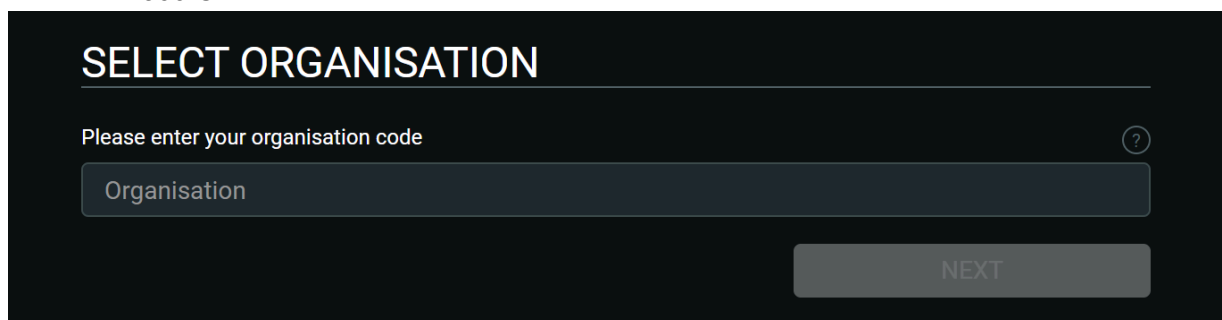


SELECT ORGANISATION

Please enter your organisation code [?](#)

Organisation

NEXT

1. Če se prijavljate v Brainomix 360 Cloud, vnesite ID svoje organizacije.
 2. Če je vaša organizacija omogočila enotno prijavo, pritisnite 'Nadaljuj z Microsoft Entra ID' in sledite standardnemu postopku prijave. V nasprotnem primeru:
 3. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.
 4. Če želite, da se izvede samodejna odjava po eni uri ali ob izhodu iz brskalnika, pustite polje neoznačeno. Označite polje, če želite ostati prijavljeni v tem računalniku, dokler se ne odjavite.
 5. Kliknite gumb Prijava.
3. Če ste pozabili geslo, lahko s klikom na besedilo 'Ste pozabili geslo?' zahtevate ponastavitev gesla.

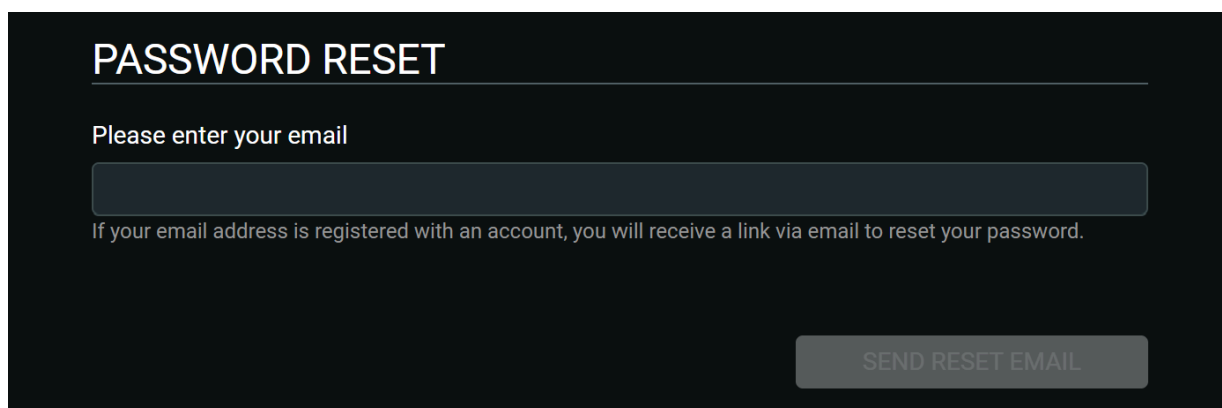


PASSWORD RESET

Please enter your email

If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password.

SEND RESET EMAIL

4. Če ste se vključili v dvostopenjsko avtentikacijo, boste morda morali v aplikacijo za preverjanje pristnosti vnesti kodo žetona.

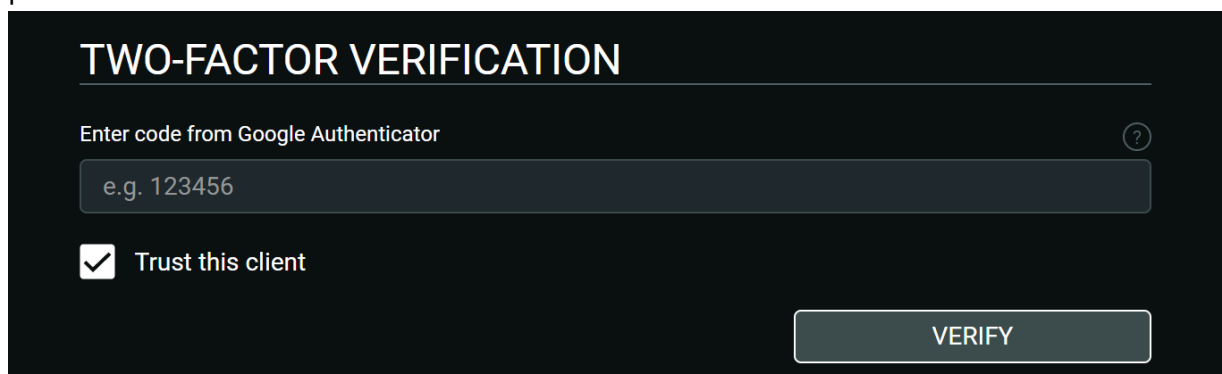

TWO-FACTOR VERIFICATION

Enter code from Google Authenticator

e.g. 123456


☒ Trust this client

VERIFY

- Izberite 'Zaupajte temu odjemalcu', da se izognete ponovni zahtevi po kodi žetona v tej napravi ali brskalniku. Te možnosti ne uporabljajte na skupnih napravah.
- Če iz aplikacije za preverjanje pristnosti ne morete dobiti kode žetona, lahko vnesete neuporabljeno kodo za obnovo s seznama, ki je na voljo ob vpisu v dvostopenjsko avtentikacijo.

7.2 Odjava

1. Odprite meni in se pomaknite do dna.

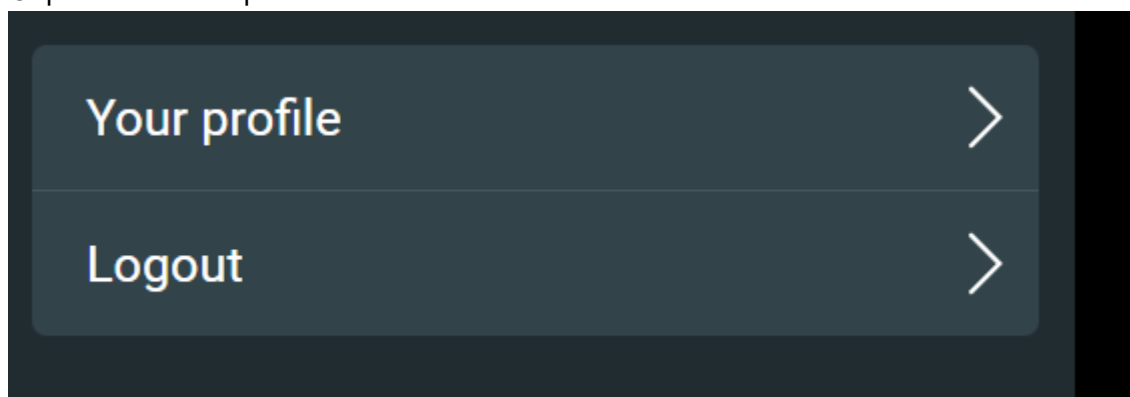


Your profile >

Logout >

2. Kliknite **Odjava**

7.3 Spreminjanje gesla


1. Odprite meni in se pomaknite do dna.

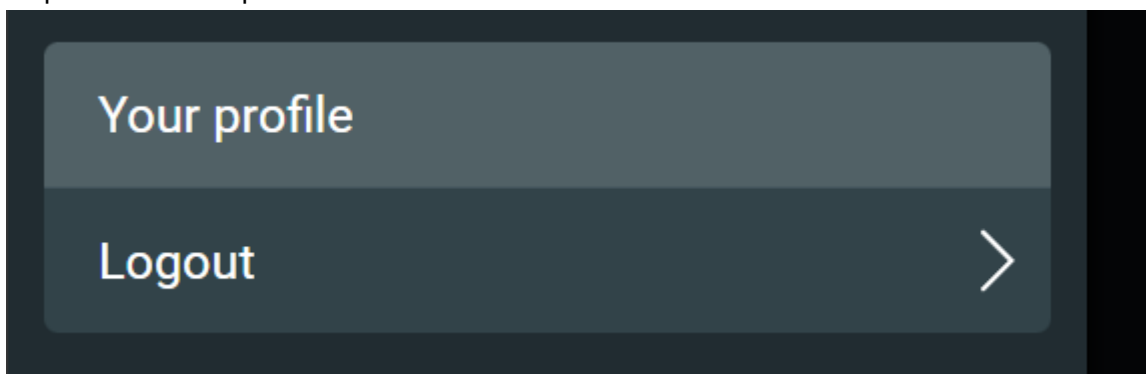

2. Kliknite **Vaš profil**
3. Kliknite zavihek z oznako **Spremeni geslo**
4. Vnesite staro in novo geslo (gesli morata izpolnjevati minimalne zahteve glede kompleksnosti: osem znakov z vsaj eno številko in črko.)
5. Kliknite **Shrani** ali pritisnite enter.

7.4 Dvostopenjska avtentikacija

1. Izberite svoje uporabniško ime na desni strani navigacijske vrstice.

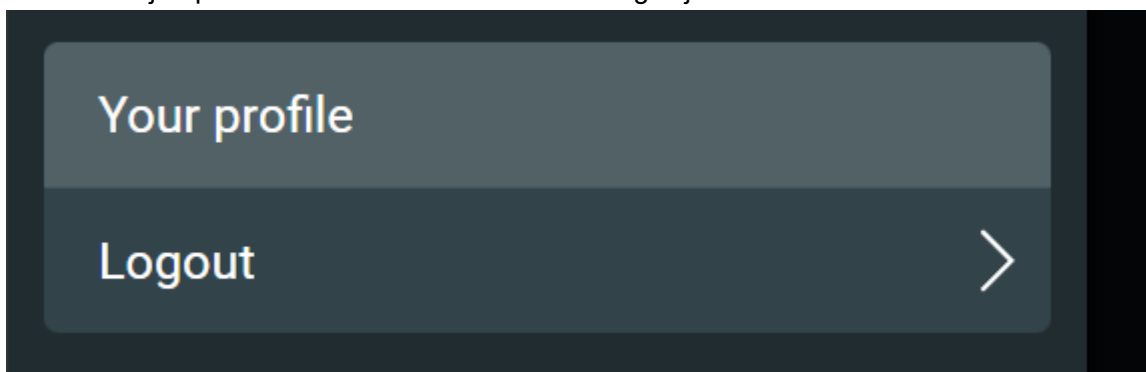


2. Kliknite **Vaš profil**.
3. Kliknite zavihek z oznako **Dvostopenjska avtentikacija**.
4. Kliknite gumb **za vpis**.
5. Sledite navodilom za vpis na zaslonu.

7.5 Adresar


Dostop

1. Do adresarja lahko vedno dostopate iz menija v aplikaciji in namiznem uporabniškem vmesniku, če so kateri koli uporabniki v vaši organizaciji shranili telefonske številke.

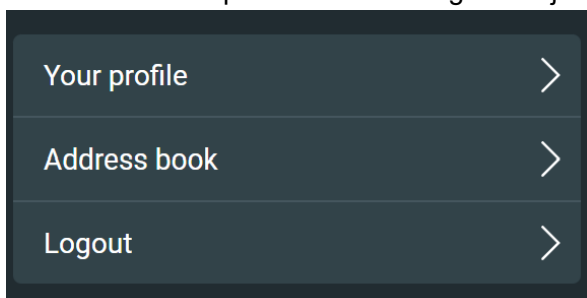

Uporaba


1. Vsi uporabniki in vnosi z dodeljeno telefonsko številko so prikazani in jih je mogoče poklicati.
2. Uporabniki, ki nastavijo status na 'dežurni', bodo jasno označeni, ta status pa se lahko uporablja kot filter.
3. Uporabniki lahko poiščejo drugega uporabnika po imenu tako, da ime vnesejo v iskalno polje.
4. Ob vzpostavitvi klica z drugim uporabnikom se klic zabeleži in si ga je mogoče ogledati v zgodovini klicev za oba uporabnika.

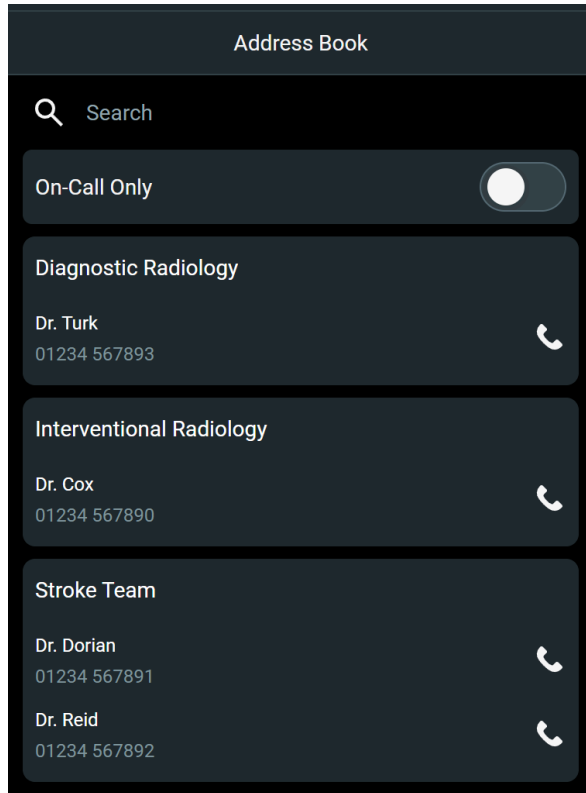

7.6 Status dežurstva

Konfiguracija


1. Vaš status dežurstva bo konfiguriran v tej aplikaciji. Izberete lahko ali boste dežurni ali ne in za katero organizacijo boste dežurali.

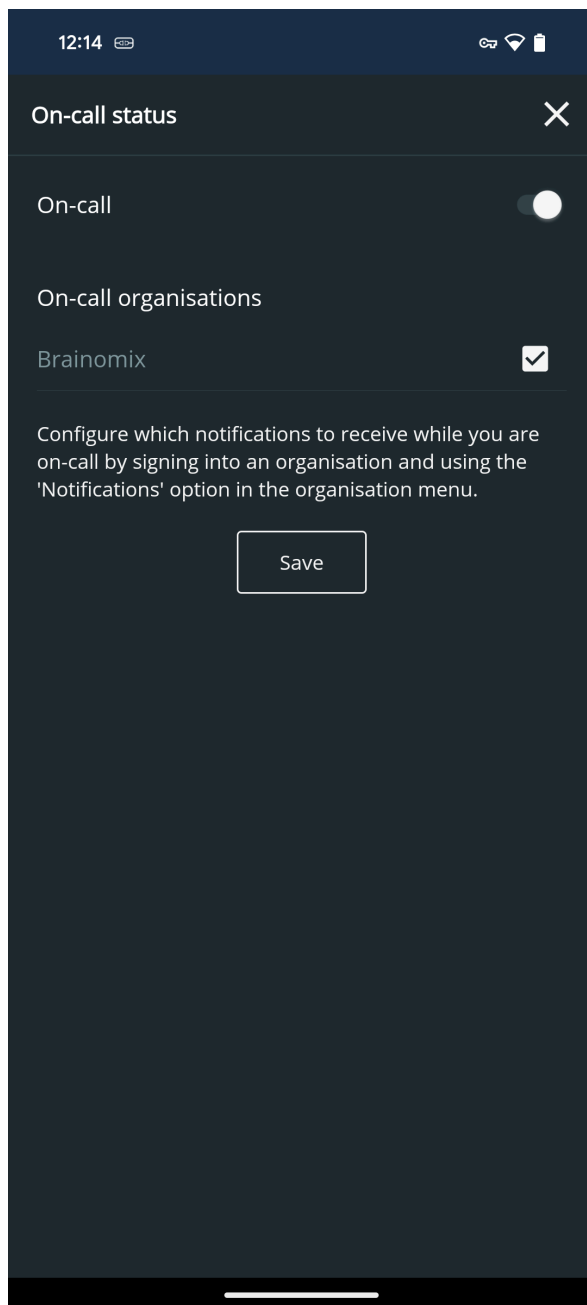

7.7 Obvestila aplikacije

1. Izberete lahko, ali želite vedno prejemati obvestila, ali jih želite prejemati le, ko ste dežurni za organizacijo, ali jih ne želite nikoli prejemati.

2. Te nastavitve lahko konfigurirate tako, da tapnete 'Obvestila' v meniju aplikacije za organizacijo.

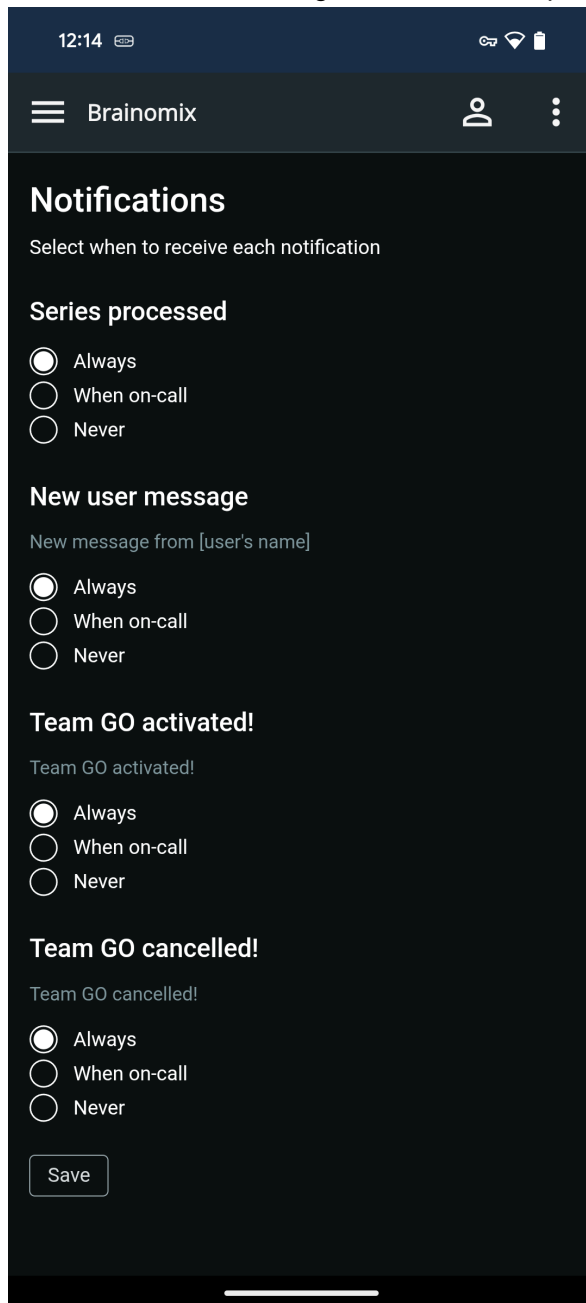

Če želite prejemati obvestila iz aplikacije Brainomix 360 Mobile, morate zagotoviti, da so obvestila v vaši mobilni napravi omogočena. To lahko storite ob namestitvi aplikacije Brainomix 360 Mobile v mobilno napravo ali pa to nastavite pozneje po spodnjih korakih.

iOS

- Zaženite aplikacijo Nastavitve.
- Tapnite Obvestila.
- Pomaknite se na Brainomix 360 Mobile > Tapnite.
- Preklopite stikalo **Dovoli obvestila** na **Vklopljeno**, da omogočite obvestila.
- Preklopite stikalo **Časovno občutljiva obvestila** na **Vklopljeno** (obvestila so vedno dostavljena takoj in ostanejo na zaklenjenem zaslonu eno uro).
- Izberite svoje nastavitve za opozorila – priporočljivo je izbrati vse (Zaklenjeni zaslon, Center za obvestila in Pasice) in nastavite **Slog Pasice** na **Trajno**.
- Preklopite stikala **Zvoki in oznake** na **Vklopljeno** (priporočljivo).

Android

- Zaženite aplikacijo Nastavitve.
- Tapnite Aplikacije.
- Pomaknite se do Brainomix 360 Mobile. > Tapnite.
- Tapnite Obvestila.
- Preklopite stikalo **Dovoli obvestila** na **Vklopljeno**, da omogočite obvestila, vključno s sporočili, zvoki in vibracijami.
- Preklopite stikalo **Tiho prikaži** na **Izklopljeno** (priporočljivo).
- Preklopite stikalo **Nastavi kot prednostno** na **Vklopljeno** za vklop zaslona, ko je vklopljena funkcija 'Ne moti' (priporočljivo).

8 Vmesnik za namizje

8.1 Seznam bolnikov

Menu

BRAINOMIX®

Select all on page Search Sort by: Last updated (newest first) Export Series tools Filters: 0 applied

☐ William Parry **Suspected LVO** CTA Intervention

Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y | M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfd8b

NCCT 2018-12-27 09:01:27 Completed CTA Suspected LVO 2018-12-27 09:03:07 Completed CTP 2018-12-27 09:09:36 Completed

Last Updated: 2026-03-13 16:42:06 GMT Hide 3 Scans

☐ Mary Malone

Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y | F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48

Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT Show 3 Scans

☐ Roger Parslow **Suspected ICH** 3 warnings

Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y | M • Patient ID: 1524011 • ACC: 638ICH011 • BX ID: ea0966

Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT Show 1 Scan

☐ Lee Scoresby **Suspected ICH** 1 warning

Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y | M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9

Last Updated: 2026-03-13 16:40:22 GMT Show 1 Scan

☐ Oliver Payne

Brainomix • M • Patient ID: 041004 • ACC: 428TES67 • BX ID: 962837

Last Updated: 2026-03-13 16:39:41 GMT Show 1 Scan

☐ Marisa Coulter **Suspected ICH** 1 warning

Showing 1-6 of 6 results 1 Show 20 per page

- Stran s seznamom bolnikov prikazuje vse bolnike, ki so vam na voljo. Privzeto so navedeni po vrstnem redu zadnjega posodobljenega bolnika.
- Po straneh z bolniki se premikate tako, da kliknete na številke strani pod seznamom.
- Kliknite na bolnika, da ga odprete v pregledovalniku bolnikov (preberite poglavje Pregledovalnik bolnikov).
- Kliknite ikono , da razširite podrobnosti o bolniku ter si ogledate podrobnosti skeniranja in sličico predogleda vsakega skeniranja.

8.2 Iskanje bolnikov

Razvrščanje

Seznam bolnikov razvrstite tako, da kliknete gumb Razvrsti po.

Sort by: Last updated (newest first) ▼

S spustnega seznama izberite prednostno razvrščanje.

Sort by: Last updated (newest first) ▲

Last updated (newest first) ✓

Last updated (oldest first)

Patient name (ascending)

Patient name (descending)

Patient ID (ascending)

Patient ID (descending)

Iskanje

Bolnika iščite po imenu, pristopni številki ali številki ID tako, da besedilo vnesete v iskalno polje nad seznamom bolnikov.

🔍 Search

Filtriranje

Bolnike filtrirajte tako, da pritisnete gumb Filtri.

🔗 Filters: 0 applied

Izberite možnosti, po katerih želite filtrirati. Na seznamu bolnikov bodo prikazani samo tisti bolniki, katerih serije ali rezultati ustrezajo izbranim filtrom.

FILTERS

FAVORITES

☐ Show Favorites

LABELS

☐ Suspected ICH Suspected ICH
☐ Suspected LVO - NCCT Suspected LVO NCCT
☒ Suspected LVO - CTA Suspected LVO CTA
☐ Flagged for intervention Intervention

DELETED SERIES

LAST UPDATED

INSTITUTION NAME

STATE

WORKFLOW

SCANNER

ORIGINAL ORGANISATION

Clear Filters

8.3 Izvoz rezultatov

1. S klikanjem ustreznih izbirnih polj izberite vse bolnike, ki jih želite vključiti. Ponovite za vse ustrezne strani seznama bolnikov.

Menu

BRAINOMIX®

☒ Select all on page

Sort by: Last updated (newest first)

Export

Series tools

Filters: 0 applied

☒ William Parry Suspected LVO NCCT CTA Intervention	Export selected scans Export all scans	☆ ⋮
Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y M • Patient ID: 1746127 • ACC: 564EX127 • BX ID: cfd8b		
Last Updated: 2026-03-13 16:53:56 GMT Show 3 Scans		
☒ Mary Malone		☆ ⋮
Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y F • Patient ID: 273802 • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 2a0b48		
Last Updated: 2026-03-13 16:41:20 GMT Show 3 Scans		
☒ Roger Parslow Suspected ICH		⚠ 3 warnings ☆ ⋮
Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y M • Patient ID: 1524011 • ACC: 63BICH011 • BX ID: ea0966		
Last Updated: 2026-03-13 16:40:49 GMT Show 1 Scan		
☒ Lee Scoresby Suspected ICH		⚠ 1 warning ☆ ⋮
Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y M • 1952-09-09 • Patient ID: 4580060 • ACC: 658BMC002 • BX ID: 3106c9		

Namig: Če želite izbrati vse bolnike na strani, kliknite izbirno polje v vrstici z glavo.

Namig: Nastavitev 'Prikaži X na stran' na dnu seznama bolnikov lahko spremenite, da prikažete več bolnikov na posamezni strani.

Namig: Bolnika lahko razširite in izberete preiskave znotraj bolnika za izvoz.

2. Kliknite gumb Izvozi in izberite, ali želite izvoziti samo izbrane preiskave ali vse preiskave na vseh straneh.
3. Prenesena bo preglednica (oblika zapisa XLSX).
 - To vrsto datoteke lahko odprete v različnih aplikacijah, vključno z Microsoft Excel.
 - Prenesena datoteka vsebuje več listov z vrstico za vsakega bolnika, s podatki za ugotavljanje istovetnosti, rezultati in navodili za razlago izvoženih informacij.

8.4 Pregledovalnik bolnikov

Splošni pregled

Ko odprete bolnika s seznama bolnikov, se odpre pregledovalnik bolnikov.

V levi stranski vrstici so na voljo informacije, ki se nanašajo na bolnika:

- Pogled: prikaz vseh podrobnosti skeniranja, ki so na voljo za izbranega bolnika
- Serija:
- Pošiljanje sporočil: prikaz in pošiljanje sporočil za tega pacienta

Nad pregledovalnikom bolnikov in stransko vrstico je kartica z informacijami o bolniku. Prikažejo se podatki o bolniku in možnost 'zvezdica', s katero lahko bolnika dodate med zaznamke. Upoštevajte, da so bile te informacije morda odstranjene, če je bil bolnik psevdonimiziran, npr. če je bil prejet s sinhronizacijo med uporabniki ali če si bolnika ogledujete v oblaku Brainomix 360 Cloud.



Ogled posnetkov

Pod kartico z informacijami o bolniku in nad prikazom slike je vrstica kontrolnikov za prikaz slike. To so od leve proti desni:

- Izbirnik prikaza (prikazan je 'Vir'). To omogoča hitro spreminjanje pogleda.
- Kontrolnik debeline sloja. Če je na voljo, omogoča prilagajanje debeline sloja z združevanjem sosednjih rezin s filtrom povprečja, MIP ali MinIP.
- Kontrolnik oken. Ta omogoča nastavitve širine in ravni okna ter izbiro med več prednastavitvami. Okno lahko prilagodite tudi tako, da kliknete z desno tipko miške in povlečete miško.
- Prekrivne plasti. Ta omogoča vklop ali izklop posameznih oziroma vseh prekrivnih plasti.
- Kontrolnik MPR. Če je na voljo, se s pritiskom tega gumba prikažejo možnosti za preklon na aksialni, sagitalni ali koronarni prikaz.
- Gumb za povečanje. S pritiskom tega gumba se prikaz slike razširi tako, da zavzame čim več prostora.

Glavna sestavina pregledovalnika bolnikov je prikaz slike. Prikaže se trenutna rezina izbranega pogleda z uporabljenimi filtri okna, plošče in MPR. Nad osnovno sliko se lahko prikažejo prekrivne plasti za informacije in prekrivne plasti iz rezultatov algoritmov.

V zgornjem desnem kotu prikaza slike so prikazani kazalniki iz rezultatov algoritma, skupaj z morebitnimi uporabniškimi popravki ali oznakami posegov.

Pod prikazom slike je kontrolnik rezine. Z vlečenjem drsnika se lahko pomikate po vseh rezinah.

Uporaba oken

Slikovne pike v računalniški tomografiji se merijo v Hounsfieldovih enotah (HU), ki jih je treba za prikaz pretvoriti v ravni sivine. Kontrolniki poravnave in širine oken v meniju **Uporaba oken** vam omogoča prilagajanje obsega vrednosti HU, ki so prikazane.

Ta prednastavljena okna so na voljo za pomoč pri ročni oceni posnetka:

- **Tkivo:** zagotavlja dober splošen pregled možganskega tkiva.
- **Žile:** zagotavlja boljši kontrast, da so poudarjene žile lažje vidne.
- **Kost:** omogoča pregledovanje kostnih struktur.
- **Visok kontrast:** zagotavlja pogled z visokim kontrastom, da so spremembe zgodnje hipodenznosti lažje vidne.

Širino in raven okna lahko prilagodite tudi tako, da nad pregledovalnikom kliknete in držite desni gumb miške ter medtem miško premikate navzgor/navzdol (za spremembo poravnave) ali levo/desno (za spremembo širine).

Podrobnosti o seriji

Datum/čas serije je prikazan v prekrivnem prikazu v zgornjem levem kotu prikaza slike skupaj s parametri prikaza, kot sta debelina rezine in število rezin. Dodatne podrobnosti so na voljo v zavihku Serija. Nekatere podrobnosti so prevzete iz izvornih oznak serij DICOM (npr. opis študije), druge pa iz same programske opreme (npr. različica algoritma).

Izvoz rezultatov

Na zavihku Povzetek rezultatov v pogledu so gumbi za prenos izvornih izvornih slik in slik rezultata v obliki zapisa DICOM za vse razpoložljive serije.

8.5 e-ASPECTS prikaz



Povzetek rezultatov

Rezultat ASPECTS in povezane informacije so prikazane v prikazu Povzetek rezultata. Ta vsebuje naslednje informacije.

ASPECTS

V tem razdelku je prikazana ocena ASPECTS, izračunana z e-ASPECTS, in seznam regij, ki so bila ocenjene kot regije z akutno hipodenznostjo in so zato zmanjšale oceno ASPECTS.

Volumni – hiperdenznost



Brainomix 360 e-ASPECTS bo poskušal odkriti nenormalne hiperdenzitete v nekontrastnem CT posnetku. Abnormalne hiperdenzitete pomenijo območja s povišanimi vrednostmi HU v možganih v primerjavi s tistimi, ki bi jih običajno pričakovali pri CT posnetku zdravih možganov. Pogosti vzroki za takšno hiperdenzitetu pri bolnikih s sumom na možgansko kap so akutne krvavitve, saj je sveža kri običajno bolj hiperdenzna kot siva ali bela snov, ali uhajanje kontrasta, čeprav ga pri nekontrastnem CT posnetku ne bi smeli opaziti, če kontrastno sredstvo ni bilo dano pred kratkim.

Če je na CT-posnetku zaznано eno ali več območij s povečano gostoto, se območja segmentirajo in prikažejo kot posamezne prekrivne plasti. Barve so namenjene samo vizualnemu razlikovanju med segmentiranimi območji in same po sebi nimajo nobenega pomena.

Prostornine segmentiranih območij so v povzetku rezultatov prikazane kot:

- skupno število območij s povečano gostoto – vsako ima svojo barvno prekrivno plast (največ 5),
- skupna prostornina zaznanih območij s povečano gostoto (v mililitrih) z razčlenitvijo po posameznih segmentiranih območjih.

Vsako posamezno območje s povečano gostoto je mogoče izločiti iz skupne prostornine, ki jo je mogoče segmentirati. Opomba: ta možnost je na voljo samo v pregledovalniku, filtriranih rezultatov pa ni mogoče shraniti kot izhod.

Čeprav bi morale meritve prostornine pravilno ustrezati segmentiranim območjem, mora uporabnik vizualno preveriti, ali so segmentirana območja pravilna glede na območja s povečano gostoto na sliki.

Upoštevajte, da je ta funkcija ločena od funkcije hiperdenznosti žil, ki bo poskušala identificirati okluzije ali kalcifikacije žil.

Ko je zaznana hiperdenznost z velikim volumenom, bodo volumen hipodenznosti, ocena ASPECTS in rezultati hiperdenzne žile zadržani. Če je skrbnik omogočil ročno urejanje, to funkcijo lahko uporabite za ponovno vzpostavitev zadržanih rezultatov.

Volumni – akutna/neakutna hipodenznost

Prostornina hipodenznih znakov v ml, kot jo izračuna Brainomix 360 e-ASPECTS. To je merilo 'toplotnega zemljevida'. Prostornina akutne hipodenznosti se imenuje tudi 'prostornina jedra (NCCT)'. Natančnost izračuna prostornine je odvisna od kakovosti 'toplotnega zemljevida', ki ga je treba ročno preveriti.

Skrbniki lahko dodatno omogočijo izračun neto absorpcije vode, ki temelji na resnosti hiperdenznosti v akutni regiji hiperdenznosti. Če je ta vrednost omogočena, bo prikazana kot odstotek pod akutnim volumnom hiperdenznosti, ko je zaznana zadostna gostota.

Hiperdenzne žile



e-ASPECTS poskuša identificirati lokalizirane hiperdenznosti žil na nekontrastnih CT posnetkih, kar običajno nakazuje na okluzijo (strdke) ali kalcifikacijo. Ko se te funkcije klasificirajo, se upoštevajo lastnosti slike, kot so oblika hiperdenznosti in vrednosti HU znotraj žile s hiperdenznostjo, pri čemer ima kalcifikacija običajno višje in bolj natančno definirane vrednosti HU v primerjavi s strdki. Območje hiperdenznosti bo segmentirano in označeno v izhodni sliki rezultatov.

Če je zaznana ena ali več okluzij, bo dolžina okluzije označena glede na merjenje najdaljše osi segmentirane regije, ki je povezana z okluzijo. V primeru, kjer je okluzija zaznana na CT posnetku na obeh hemisferah možganov, bo meritev dolžine podana na hemisfero.

Upoštevajte, da nekaterih hiperdenznosti programska oprema morda ne bo zaznala in prav tako je mogoče opaziti napačno pozitivno prepoznavo. Možno je tudi, da so te lastnosti označene zunaj žil, kar pomeni, da v tem primeru hiperdenznost ni nastala zaradi okluzije, četudi je nepravilno zaznana kot taka.

Obdelano

Pogled obdelanih podatkov prikazuje CT-sliko po obdelavi in analizi s pomočjo e-ASPECTS. Rezine imajo opombe z namenom prikaza segmentacije regij ASPECTS in prepoznano hipodenznost ali znake hiperdenznosti.

Prekrivne plasti

Posamezne prekrivne plasti, prikazane v obdelanem prikazu, so naslednje:

- **Območja ASPECTS:** Prikazuje segmentacijo območij ASPECTS;
- **Prizadeta območja:** Poudarja območja ASPECTS, za katera je bilo ocenjeno, da vsebujejo akutne hipodenzne spremembe;
- **Akutna hipodenznost:** Poudarja območja z akutnimi hipodenznimi spremembami;


- **Neakutna hipodenznost:** Poudarja območja s starejšimi hipodenznimi spremembami, ki jih je algoritem e-ASPECTS izključil;
- **območja s povečano gostoto:** Poudarja območja z nenormalnimi znaki povečane gostote. Če so posamezna območja s povečano gostoto segmentirana, bo mogoče prikaz posameznih prostornin vklopiti ali izklopiti.
- **Hiperdenzna žila:** Poudarja hiperdenzne žile, zaznane kot okluzije;
- **kalcifikacija:** Poudarja hiperdenzne žile, zaznane kot kalcifikacije;
- **območja pc-ASPECTS:** Prikazuje segmentacijo območij pc-ASPECTS;
- **Srednja sagitalna ravnina:** Prikazuje indikatorsko črto srednje sagitalne ravnine;
- **besedilne opombe:** Prikazuje stranske kazalnike in druge prekrivne plasti informacijskih besedil.

Opozorila

Če se v gumbu Informacije ali Serija prikaže ikona s klicajem, to pomeni, da obstajajo opozorila iz e-ASPECTS, ki lahko vplivajo na točnost ocene.

8.6 Ročni rezultati

Če vam skrbnik omogoči, lahko urejate samodejne rezultate in shranite vaše lastne ročne rezultate na Brainomix 360. Ta funkcija ni na voljo, ko si posnetke ogledujete na Brainomix 360 cloud.

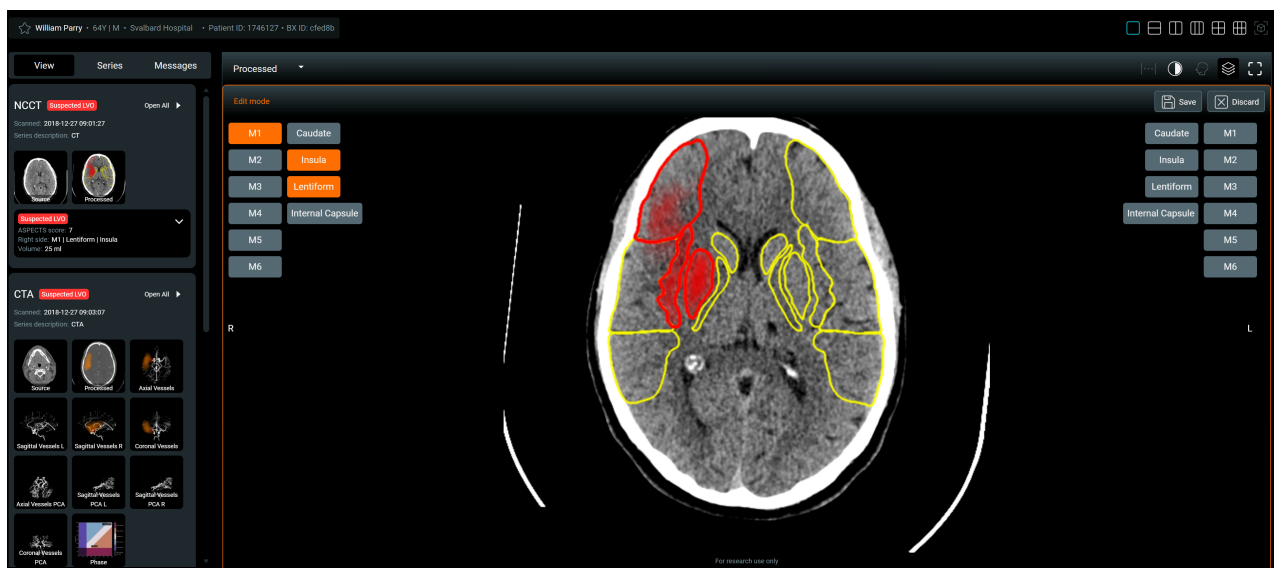

Samodejni rezultat lahko urejate tako, da shranite svoj rezultat. Kliknite ikono svinčnika 'Uredi' spodaj desno v prikazu slike, da odprete okno za urejanje.

Kliknite imena regije, ki naj bi prispevala k rezultatu ASPECTS, da izračunate svoj ročni rezultat ASPECTS.

Rezultate lahko shranite ali zavržete.

9 Mobilni prikaz

9.1 Seznam bolnikov

Če do Brainomix 360 ali Brainomix 360 Cloud dostopate s telefonom, si lahko ogledate seznam vseh bolnikov. Tapnite bolnika, da odprete pregledovalnik bolnikov. Ko podrsnete navzdol, se seznam bolnikov osveži.

Pritisnite na ikono ☆, če želite bolnika označiti kot priljubljenega, ali na ikono ★, če želite odstraniti oznako priljubljenega.

Pritisnite ikono , da ID bolnika ali BX kopirate v odložišče.

 Search	
Patient Filters (0 applied) >	
William Parry Suspected LVO CTA NCCT Intervention ☆ Svalbard Hospital • Brainomix • 64Y M Patient ID: 1746127  • ACC: 564EX127 • BX ID: 806a10  Last Updated: 2026-07-17 10:32:58 GMT+1 Show 3 Scans ▼	
Mary Malone ☆ Mulefa Hospital • Brainomix • 75Y F Patient ID: 273802  • ACC: 45MRIT02 • BX ID: 8f7769  Last Updated: 2026-07-17 10:31:01 GMT+1 Show 3 Scans ▼	
Roger Parslow Suspected ICH ⚠ 3 warnings ☆ Jordan University Hospital • Brainomix • 78Y M Patient ID: 1524011  • ACC: 638ICH011 • BX ID: e87911  Last Updated: 2026-07-17 10:27:03 GMT+1 Show 1 Scan ▼	
Lee Scoresby Suspected ICH ⚠ 1 warning ☆ Cittagazze Hospital • Brainomix • 70Y M • 1952-09-09 Patient ID: 4580060  • ACC: 658BMC002 • BX ID: 4aaab6  Last Updated: 2026-07-17 10:18:42 GMT+1 Show 1 Scan ▼	
Oliver Payne Suspected LVO NCCT ☆ Brainomix • M Patient ID: 944984  • ACC: 498TES67 • BX ID: 414844 	

9.2 Pregledovalnik bolnikov


Vse serije

Ko odprete bolnika s seznama bolnikov, se odpre prikaz Vse serije. Če ste že v pregledovalniku, tapnite gumb VSI v spodnjem levem kotu. Ogledate si lahko vse serije in rezultate za tega bolnika ter se z dotikom sličice pomikate do katerega koli razpoložljivega pogleda.

Za neposreden prehod na prikaz rezultatov slikanja lahko uporabite tudi gumbe za posamezne načine na dnu:

- NCCT: Če je na voljo, si oglejte nekontrastno slikanje CT za tega bolnika in vse povezane rezultate.
- CTA: Če je na voljo, si oglejte angiogram CT za tega bolnika in vse povezane rezultate.
- CTP: Če je na voljo, si oglejte perfuzijsko preiskavo CT za tega bolnika in vse povezane rezultate.
- MRI: Če je na voljo, si oglejte preiskave MRI za tega bolnika in vse povezane rezultate.

Upoštevajte, da bodo na platformi Brainomix 360 prikazani rezultati vseh licenčnih izdelkov. Ta zaslonska slika poleg e-ASPECTS prikazuje tudi rezultate drugih izdelkov.

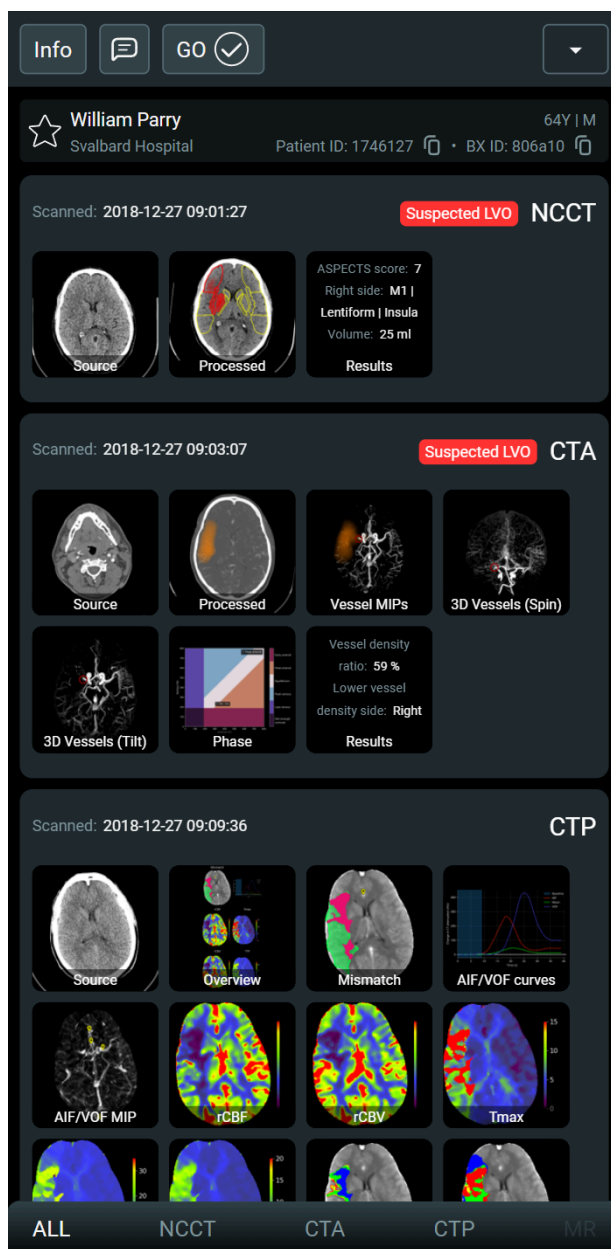

Ogled posnetkov

Na vrhu pregledovalnika so prikazani nekateri kontrolniki za posameznega bolnika, ki omogočajo dostop do naslednjih možnosti:

- Informacije: ogled vseh metapodatkov za to preiskavo in morebitnih opozoril pri obdelavi
- Sporočila: ogled in pošiljanje sporočil za tega bolnika
- GO: označitev tega bolnika za poseg
- Deljenje in podpora prek spustnega menija: dostop do možnosti 'Pošlji podpori' in deljenja podatkov o bolniku
- Klinični podatki prek spustnega menija: vnos ustreznih kliničnih podatkov za tega bolnika
- Preverjanje upravičenosti: ocena upravičenosti bolnika glede na klinične smernice in/ali smernice kliničnih preskušanj

S pomočjo funkcije 'ščipni za povečavo' lahko posnetek povečate, da vidite več podrobnosti, po posnetku pa se lahko pomikate tako, da ga povlečete z dvema prstoma.





9.3 Pošiljanje sporočil

Če je to omogočil skrbnik sistema, lahko pregledujete in pošiljate sporočila za bolnika. Ko prispejo nova sporočila, si jih lahko ogledate v območju za klepet in, če je konfigurirano, se vsem registriranim uporabnikom pošlje obvestilo iz mobilne aplikacije.

Nova sporočila se ob prejemu prikažejo na dnu območja za klepet.

Če želite poslati sporočilo, vnesite besedilo v polje na dnu in kliknite gumb za pošiljanje na desni strani.

Če želite videti, kdo je prebral sporočilo, kliknite ikono informacije. Če želite zapreti seznam 'Prebral/Prebrala', kliknite ikono za zapiranje.

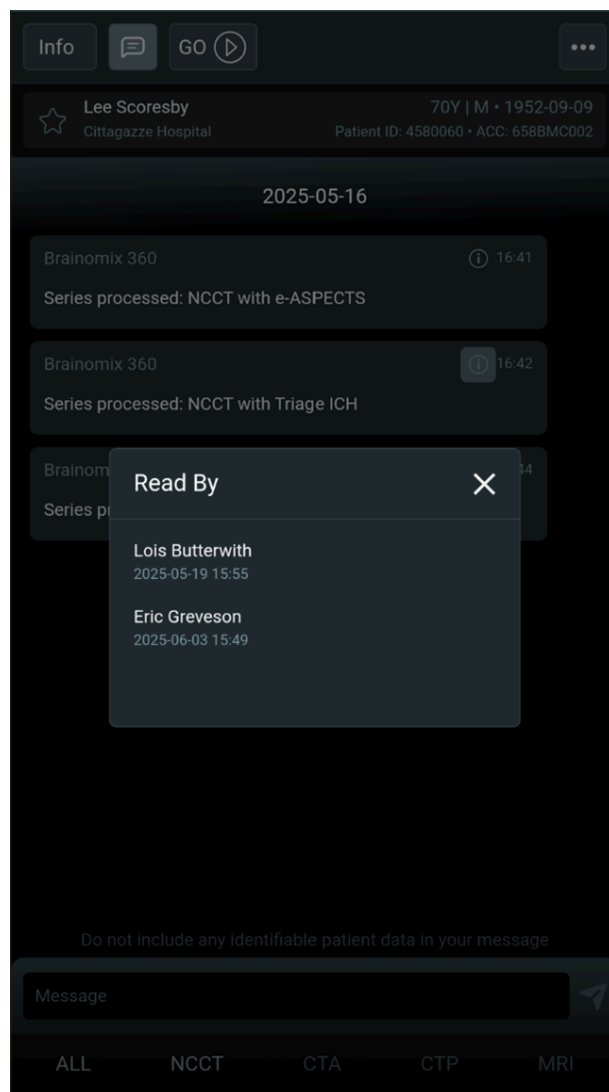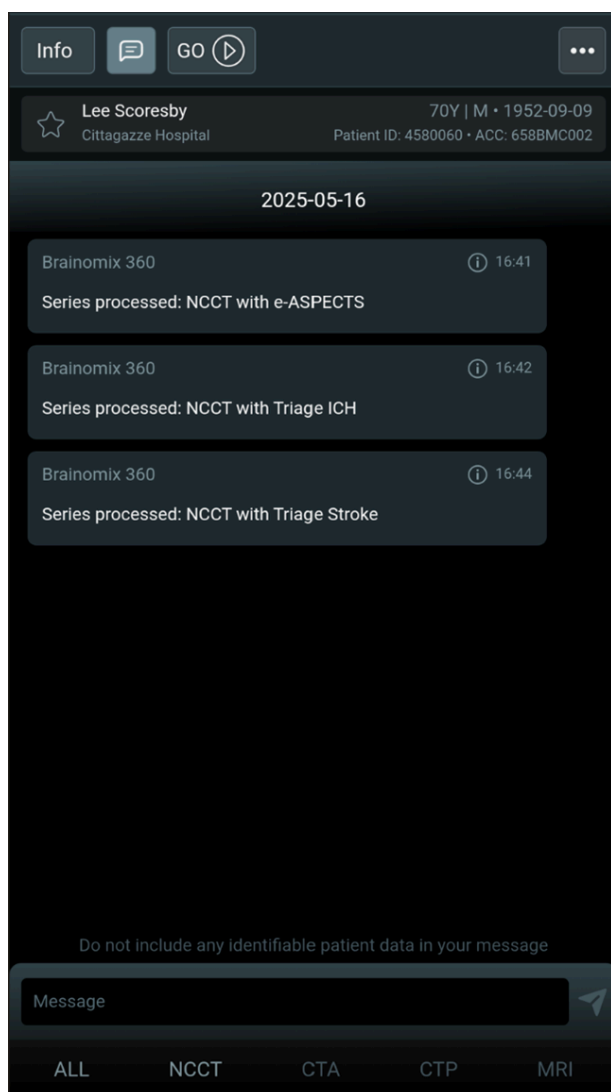

9.4 Označite bolnika za poseg


Če to funkcijo omogoči skrbnik sistema, lahko ročno označite bolnika za posredovanje iz pregledovalnika bolnikov.

Pritisnite gumb 'GO' in povlecite za potrditev. Vsi uporabniki, ki imajo omogočena obvestila o posegih, bodo obveščeni, da je bil bolnik označen.

Če je treba, lahko oznako prekličete, pri čemer bodo uporabniki, ki imajo omogočena obvestila o posegih, obveščeni o preklicu.

Za že označenega bolnika je mogoče poseg označiti kot dokončan.

Upoštevajte, da je to izključno ročno komunikacijsko orodje in te funkcije ni mogoče sprožiti z uporabo samodejnih rezultatov.

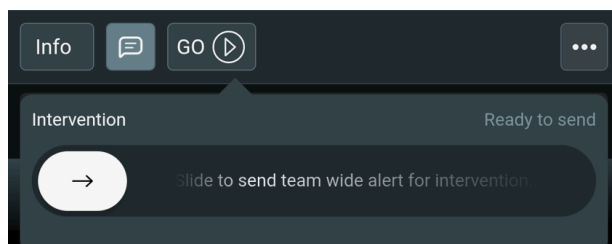

9.5 Klinični podatki

Če je skrbnik sistema to omogočil, bo razdelek s kliničnimi podatki na voljo v ločenem zavihku. To lahko uporabite za shranjevanje dodatnih kliničnih podatkov o bolniku. Vse predhodno shranjene klinične podatke si lahko ogledate s klikom na 'Ogled zgodovine'.

Predhodno izračunano skupno oceno NIHSS lahko vnesete neposredno ali pa jo izračunate interaktivno s klikom na 'izračunaj rezultat' in vnosom ocene za vsak element v obrazcu. Oceno NIHSS po 24 urah lahko dodate na enak način.

Vsa druga polja za klinične podatke je mogoče urediti za dodajanje kliničnih informacij ali jih pustiti prazna, če niso pomembna.

Tukaj vneseni klinični podatki bodo vključeni v poročilo PDF o bolniku in izvožene preglednice XLSX.

The screenshot shows the 'Assessment' tab of a clinical data form. The form is dark-themed and contains several sections for data entry:

- Premorbid mRS:** A grid of buttons for values 0, 1, 2, 3, 4, and 5. The 'Unknown' button is highlighted.
- Affected hemisphere:** A row of buttons for 'Unknown', 'Left', 'Right', and 'Both'. The 'Unknown' button is highlighted.
- NIHSS:** A text input field for the score and a 'Calculate score' button.
- Affected hemisphere:** A section header for the following time-based fields.
- Last known well (GMT):** A date and time picker button with the text 'Tap to select date and time'.
- Symptoms discovered (GMT):** A date and time picker button with the text 'Tap to select date and time'.
- Door in (GMT):** A date and time picker button with the text 'Tap to select date and time'.
- Door out (GMT):** A date and time picker button with the text 'Tap to select date and time'.
- CSC door in (GMT):** A date and time picker button with the text 'Tap to select date and time'.
- Save changes:** A button at the bottom of the form.

9.6 Preverjanje upravičenosti

Če je to omogočil sistemski skrbnik, se upravičenost bolnika glede na klinične smernice in/ali smernice kliničnih preskušanj oceni na zavihku 'Preverjanje upravičenosti'.

Sistemski skrbniki lahko privzeto omogočijo merila kliničnih smernic ESO in AHA ter preskušanj TRACE-III, EXTEND in WAKE-UP.

Povzetek upravičenosti bolnika glede na konfigurirane smernice je prikazan na zavihku za preverjanje upravičenosti in v poročilu o bolniku.

Upravičenost glede na posamezno merilo se določi na podlagi samodejnih rezultatov slikanja za vsako preiskavo in kliničnih podatkov, če so bili vneseni. Za oceno perfuzijskega jedra se uporablja prostornina zemljevida jedra. Na zavihku 'Preverjanje upravičenosti' je na voljo razčlenitev upravičenosti bolnika glede na posamezno merilo vsake smernice.

Info

GO

☆ William Parry

64Y | M

Svalbard Hospital

Patient ID: 1746127

BX ID: 806a10

ESO Thrombectomy Guideline (<6 hours)

Data missing

NCCT

CTA

CTP

MRI DWI

MRI DSC

Clinical data

NIHSS >= 6

Missing

Information missing ▶

0-6 hours from last known well

Missing

Information missing ▶

Any occlusion

Match

2018-12-27 09:03:07 • Occlusion: ICA / Proximal MCA

ASPECTS >= 6

Match

2018-12-27 09:01:27 • ASPECTS: 7

Hide Criteria

^

ALL

NCCT

CTA

CTP

MR

9.7 Deljenje podatkov o bolnikih

Če je skrbnik to omogočil, lahko s povezavo za deljenje psevdonimiziranega bolnika delite z osebo znotraj ali zunaj svoje organizacije.

Povezavo za deljenje ustvarite tako:

n

- V pregledovalniku bolnikov kliknite gumb 'Deljenje in podpora'.
- V zavihku 'Bolnik' kliknite 'Deli URL' ali 'Kopiraj URL v odložišče'. Upoštevajte, da je ta gumb onemogočen, če deljenje ni omogočeno.
- Izberite eno od razpoložljivih možnosti deljenja ali povezavo prilepite v e-poštno sporočilo oziroma aplikacijo za sporočanje.

Pomembne opombe o povezavah za deljenje

- Z odprtjem deljene povezave se omogoči dostop do vseh preiskav samo enega bolnika.
- Povezava bo psevdonimizirana, zato prejemnik v pregledovalniku bolnikov ne bo mogel videti nobenih podatkov, ki omogočajo osebno identifikacijo.
- Če je strežnik v intranetu, mora imeti prejemnik omrežni dostop do njega.
- Vsakdo s povezavo lahko dostopa do psevdonimiziranega bolnika, dokler povezava ne poteče. Čas poteka povezave lahko konfigurira skrbnik.

10 Oblika izvoženih rezultatov

10.1 DICOM

Če je konfigurirano na vašem spletnem mestu, bodo serije DICOM prenesene v PACS prek omrežne povezave DICOM, ko bo obdelava zaključena.

10.2 Sinhronizacija v oblaku

Če je bilo konfigurirano na vaši strani, bodo vsi rezultati sinhronizirani s storitvijo Brainomix 360 Cloud z izbirno psevdonimizacijo. Rezultate si je mogoče ogledati v Brainomix 360 Cloud, kakor da bi bil posnetek obdelan tam.

10.3 Obvestila mobilne aplikacije

Če je omogočena sinhronizacija s Brainomix 360 Cloud, je mogoče konfigurirati potisna obvestila za obveščanje uporabnikov aplikacije Brainomix 360 Mobile, da je na voljo rezultat.

10.4 Poročila o bolniku

Če je konfigurirano na vašem spletnem mestu, bodo poročila bolnika (PDF oziroma slike), ki vsebujejo pregled vseh načinov slikanja in rezultatov za bolnika, poslana na konfigurirane PACS prek omrežne povezave DICOM.

10.5 Izhodi HL7

Če je konfigurirano v vaši organizaciji, bodo sporočila HL7 po zaključku obdelave poslana na določeno ciljno mesto.

11 Nalaganje in obdelava

Ta razdelek se nanaša samo na Brainomix 360. Posnetkov ni mogoče naložiti ali obdelati neposredno v Brainomix 360 Cloud.

11.1 Obdelava posnetkov

Poteki dela

Brainomix 360 je mogoče konfigurirati tako, da zagotavlja različne delovne postopke za uporabo v akutni klinični poti ali za klinične študije. Vsak potek dela je mogoče konfigurirati tako, da pošlje rezultate različnim ciljnim napravam DICOM.

Na voljo sta dva privzeta sklopa potekov dela: 'Akutno' in 'Študija'. Akutni poteki dela so namenjeni za obdelovanje majhnega števila posnetkov z visoko prioriteto, medtem ko so študijski poteki dela primerni za obdelovanje velikega števila posnetkov z nizko prioriteto. Če se posnetek obdeluje s študijskim potekom dela, ko je prejeti akutni posnetek, bo Brainomix 360 obdelavo ustavil in bo pred nadaljevanjem obdelal akutno slikanje.

Za pomoč pri konfiguraciji vaših potekov dela in integracije z zunanjimi sistemi (PACS, naprava za CT slikanje, elektronska pošta itn.), se obrnite na lokalnega distributerja ali podporo za pomoč uporabnikom Brainomix.

Ročni prenos DICOM

1. Poskrbite, da sta izvorna naprava DICOM (npr. PACS ali naprava za CT-slikanje) in kontrolna aplikacija (npr. pregledovalnik PACS) konfigurirani z naslovom strežnika Brainomix 360 in naslovom entitete aplikacije za ustrezno čakalno vrsto prejetih posnetkov Brainomix 360, povezano z želenimi poteki dela (glejte zgoraj). Sistemski skrbnik vam bo lahko pomagal pri njihovi konfiguraciji.
2. Z uporabo nadzorne aplikacije DICOM prenesite serijo posnetkov na strežnik Brainomix 360. Več informacij poiščite v navodilih za aplikacijo.
3. Strežnik Brainomix 360 bo samodejno začel obdelovati serijo.
4. Spremljanje obdelave v spletnem brskalniku:
 1. V spletnem brskalniku pojdite na naslov strežnika Brainomix 360
 2. Če aplikacije v zadnjem času niste uporabljali, se boste morali prijaviti v trenutni spletni brskalnik. Prijavite se, kot je opisano v prejšnjem razdelku.
 3. V menijski vrstici na vrhu strani izberite **Seznam bolnikov**.
 4. Na seznamu bolnikov se mora prikazati nov posnetek. Če se to ne zgodi, preverite napake v dnevniku DICOM.
5. Če je konfigurirano, se rezultati DICOM po končani obdelavi samodejno pošljejo v sistem PACS. Za ogled teh rezultatov uporabite pregledovalnik PACS.
6. Za ogled rezultatov v spletnem brskalniku kliknite bolnika v seznamu bolnikov.

Samodejen prenos DICOM


Zunanjo aplikacijo je mogoče konfigurirati za samodejni prenos serij posnetkov na strežnik Brainomix 360.

Če je konfigurirano, se rezultati DICOM po končani obdelavi samodejno pošljejo v sistem PACS. Za ogled teh rezultatov uporabite pregledovalnik PACS. V tej konfiguraciji vam sploh ni treba uporabljati spletnega vmesnika Brainomix 360.

Lahko pa se tudi prijavite v sistem in posnetki se bodo pojavili v seznamu bolnikov takoj, ko bodo v vrsti za obdelavo. Rezultate si lahko ogledate tako, da kliknete bolnika. Dejavnost omrežja DICOM lahko spremljate z ogledom dnevnika DICOM.

Ročno nalaganje prek spletnega vmesnika

1. Prijavite se v Brainomix 360
2. Odprite meni z ikono menija na vrhu strani.
3. V meniju izberite **Naložite serijo**.

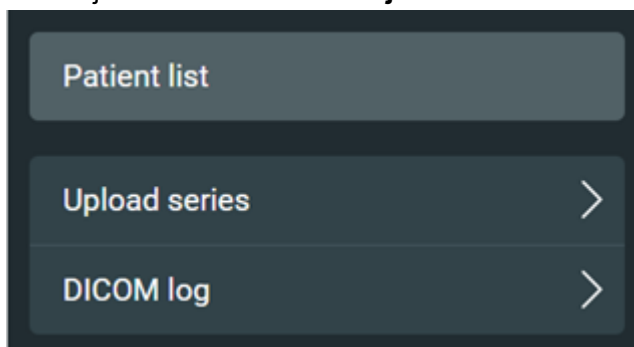

4. V spustnem meniju pod območjem za nalaganje izberite ustrezno čakalno vrsto prejetih posnetkov. Ta nastavitev bo privzeto nastavljena na uporabo čakalne vrste prejetih posnetkov.
5. Kliknite **Izberite datoteke**, da izberete datoteke slik DICOM ali stisnjene datoteke zip, ki vsebujejo slike DICOM.
Nasvet: Datoteke lahko povlečete in spustite neposredno na območje za nalaganje, če brskalnik podpira funkcijo povleci in spusti.
Opomba: Če izberete preveč datotek, jih bo brskalnik zavrnil. Če se to zgodi, morate namesto tega slike DICOM stisniti v eno datoteko zip in jo naložiti.
6. Vaše datoteke bodo naložene in indeksirane. Če je datotek zelo veliko, lahko to traja več minut.
7. Posnetki bodo samodejno usmerjeni v potek dela. Ko je nalaganje končano, kliknite **V redu**.
8. Ko se obdelava konča, se samodejno pošljejo elektronska sporočila z rezultati in rezultati DICOM, kot je nastavljeno za potek dela.
9. Kliknite bolnika na seznamu bolnikov, da si rezultate ogledate v spletnem brskalniku.

11.2 Dnevnik DICOM

Kliknite povezavo 'Dnevnik DICOM' za ogled dnevnika serije DICOM, ki jo je strežnik Brainomix 360 zahteval, prejel in poslal.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

- ☒ Select all
- ☒ Series requested
- ☒ Series received
- ☒ At least one workflow can process the series
- ☒ No workflows can process the series
- ☒ Upload failed
- ☒ Transfer failed
- ☒ Series sent to external system
- ☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View

Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613
Description	Transfer failed
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b

12 Skrbništvo

Skrbniki imajo na voljo dodatne funkcije za upravljanje uporabnikov, brisanje posnetkov in konfiguracijo integracije sistema Brainomix 360 v klinični potek dela. Na splošno teh nastavitev ne bo treba spreminjati in nepravilne nastavitve lahko vodijo v izgubo podatkov, nepravilno delovanje ali ogroženo varnost. Če potrebujete pomoč pri integraciji svojega sistema Brainomix 360 v svoj klinični potek dela, se obrnite na svojega lokalnega distributerja ali podporo za pomoč uporabnikom pri Brainomix.

13 Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav, ki se pojavijo med uporabo, ali če se prikažejo kakršna koli sporočila o napakah, se obrnite na lokalnega skrbnika ali podporo Brainomix tako, da uporabite eno od možnosti za stik, ki so navedene v razdelku Zakonsko predpisane informacije.

14 Vzdrževanje in nadgradnje storitev

V primeru načrtovanega vzdrževanja bo družba Brainomix vnaprej obvestila zadevne uporabnike, da se izvajajo vzdrževalna dela in o pričakovani stopnji prekinitve storitve. Dostop uporabnika se lahko med obdobjem vzdrževanja zavrne. Če je aplikacija Brainomix 360 Mobile nameščena v mobilni napravi, poskrbite za posodobitev na najnovejšo različico, ko se pojavi poziv ali ko je na voljo v trgovini Google Play ali Apple App Store.

15 Poročanje o dogodkih

Če ste odkrili morebitno težavo s katero koli od naših storitev iz sklopa Brainomix 360, se obrnite na nas prek support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>). Upoštevajte, da za vse podatke, ki jih posredujete, velja naš pravilnik o zasebnosti (<https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support>). Če je prišlo do resnega dogodka v zvezi s katerim koli našim izdelkom, ga prijavite tudi pristojnemu lokalnemu organu v svoji državi:

- državi članici Evropske unije, (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severni Irski (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Švici (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html>)
- Turčiji (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Razgradnja

V primeru prekinitve in odstranitve storitve bo Brainomix usklajeval postopek z ustreznimi zainteresiranimi stranmi v vaši organizaciji, da bi zagotovil nemoteno in popolno odstranitev sistema Brainomix 360 , vključno z vsemi sredstvi in podatki. Učinek odstranitve bo ocenjen, da se ugotovi, ali bo povzročil spremembe v kliničnem delovnem procesu in/ali konfiguraciji drugih sistemov. Vsa sredstva, ki so v lasti družbe Brainomix, bodo vrnjena, pri čemer bodo integracije odstranjene iz sistema, da se zagotovi, da se podatki ne bodo več prenašali v sredstva, ki bodo razgrajena, ali iz njih. Za več informacij o postopku razgradnje vašega sistema Brainomix 360 se obrnite na lokalnega distributerja ali podporo Brainomix.

17 Simboli

Simbol	Opis simbola
	Navaja ime in naslov proizvajalca medicinskega pripomočka.
	Označuje datum izdelave medicinskega pripomočka.
	Označuje nosilec, ki vsebuje informacije o edinstvenem identifikatorju pripomočka.
	Označuje pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti.
	Označuje pooblaščenega zastopnika v Švici.
	Označuje subjekt, ki uvaža medicinski pripomoček v lokalno okolje.
	Označuje, da mora uporabnik prebrati navodila za uporabo.
	Označuje, da je potrebna previdnost pri upravljanju pripomočka ali krmilnika v bližini mesta, kjer je simbol nameščen, ali da se mora izvajalec zavedati trenutne situacije ali ukrepati, da bi se izognil neželenim posledicam.
	Označuje, da je izdelek medicinski pripomoček.
	Oznaka CE pomeni, da je izdelek skladen z veljavnimi predpisi Evropske unije.

18 Zahtevanje papirnega izvoda

Če potrebujete natisnjen izvod te revizije uporabniškega priročnika za Brainomix 360 e-ASPECTS, si natisnite to spletno stran (desni klik + Natisni ali prenesite najnovejšo revizijo z našega spletnega mesta (<https://www.brainomix.com/docs/>)). Če vam ta možnost ni na voljo, se obrnite na nas prek support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) z zahtevo in tiskan izvod vam bo poslan v 7 koledarskih dneh po prejemu zahteve. Ta storitev je brezplačna.