

Welcome CAD CAM





Medit i600

Digital Dentistry at Your Fingertips





Experiencia de escaneo sorprendente

Ligero

245g de peso con mejor agarre para mayor comodidad.

Fluido

La velocidad mejorada y las imágenes escaneadas óptimas ofrecen una experiencia de escaneo más fluida.

Suave como la seda, independientemente de las especificaciones del PC.

Vívido

Transmite datos de escaneo vívidos a través del nuevo sistema óptico utilizado en el Medit i700.





Experiencia de escaneo sorprendente

El cerebro del i700 con un toque de color.

El flujo de trabajo digital comienza con la captación de datos precisos. Medit i600 permite adquirir datos precisos sin esfuerzo.

*Alta precisión de arco completo: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$

*Adquiere datos precisos de escaneo desde el segmento anterior hasta la superficie oclusal

A blue 3D model of a human head and neck is shown in profile. A Medit i600 dental scanner is positioned in the foreground, pointing towards the model. The scanner has a grey top section and a blue handle with a small circular button. The text "MEDIT i600" is overlaid in white on the blue model.

MEDIT i600



EL MÁS SIMPLE, EL MÁS FÁCIL.

Tome el control total de su escaneo con un clic.
¡No hay necesidad de numerosos cables y hubs!
Simplemente con Plug & Scan utilice un solo cable
para la conexión directa con un PC.



Punta reversible de 180°



Botón de Inicio de Escaneo



Cable extraíble

Todo se hace mas fácil

Medit i600 se puede **conectar directamente al PC** con un solo cable, **eliminando** el número de cables en la clínica para una mayor comodidad.



Área de escaneo más grande (comparada al i500)

Un área de escaneo más grande (15x13mm) captura más con una pasada para una experiencia de escaneo más conveniente.

i600 i500





Facilitando el escaneo

Experimente la increíble adquisición de datos digitalizados con **Medit Scan for Clinics**. Nuestra tecnología de software de vanguardia hace que el escaneo sea más conveniente para usted.



Smart Scan Guide

La guía de usuario reforzada proporciona ayuda para detectar anomalías durante el escaneo.



Smart Scan Filtering

El rendimiento mejorado de filtrado de I.A. facilita el proceso de escaneo al filtrar tejidos blandos como labios, mejillas y lengua.



Smart Color Filtering

Filtra automáticamente los colores registrados, como el color de los guantes médicos, durante el escaneo.



Smart Stitching

Escanee con su propia estrategia de escaneo. Los datos de escaneo fragmentados se alinean con el área común detectada automáticamente.



Mayor satisfacción del paciente

El tratamiento con datos precisos ayuda a mejorar la satisfacción del procedimiento. Utilizando imágenes 3D y las diversas aplicaciones de Medit durante la consulta también mejora la satisfacción gracias a una mejor experiencia en clínica.

Logre hacer más en su consulta.

¡Nunca se preocupe por el coste adicional de usar programas y sistemas complejos de nuevo! ¡La diversidad de Medit Apps hace que el tratamiento sea más fácil, sencillo y sin esfuerzo!




Especificaciones

Categoría		Medit i600
Tecnología de escaneo	Fotogramas por segundo	Hasta 35 FPS
	Tecnología de Imágenes	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura a todo color 3D
	Fuente de luz	LED
	Tecnología Antiempañamiento	Antiempañamiento adaptativo
Exactitud	Arco completo	10.9µm ± 0.98
Pieza de mano	Dimensiones	248 x 44 x 47.4 mm
	Peso total	245 g
Punta	Tamaño de Punta	22.2 x 15.9 mm
	Área de Escaneo	15 x 13 mm
	Autoclavable	Autoclave 100 veces 121°C 30 minutos 134°C 4 minutos (Tipo Pre-Vacío) 135°C 10 minutos (Tipo Gravedad)
	Punta Reversible	Sí
Modo especial	Modo de control remoto	No
	Desinfección UV-C	No
Conectividad		USB 3.1 Gen1

- El rendimiento puede variar dependiendo de las especificaciones del PC
- Prueba de precisión del escáner i600 por Medit R&D
- La punta de 150 ciclos de autoclave se vende por separado.



Por favor, escanee el código QR para conocer los requisitos actualizados del sistema. >>

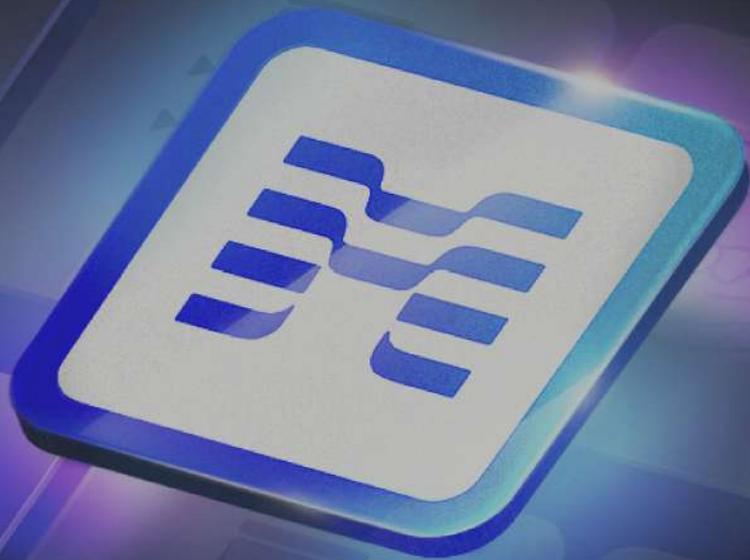

Crea más con Medit

Con Medit apps tienes
todo un mundo de posibilidades





SMILE DESIGN


Muestre al paciente su futura sonrisa con Medit Smile Design. Cargue una imagen del paciente y sus dientes, y muéstrele cómo podrían verse con el tratamiento.






ORTHO SIMULATION

Medit Ortho Simulation ayuda al paciente a visualizar los posibles resultados de varios escenarios de tratamiento de ortodoncia. Cargue hasta tres escenarios diferentes, agregue datos de escaneo facial y ¡el paciente puede ver su futura sonrisa!

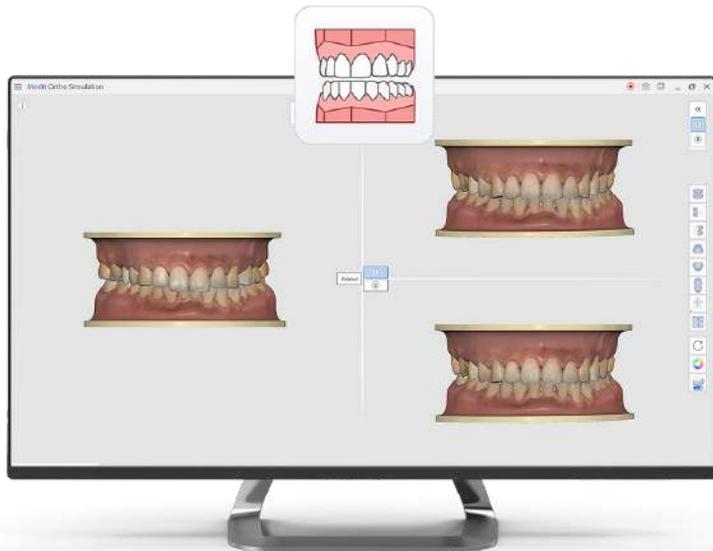

CROWN FIT

Con Medit Crown Fit, los profesionales clínicos pueden realizar un ajuste de corona sin modelo. Después de que se alinean la zona preparada y los datos de la corona, el software puede revelar dónde pueden ser necesarias alteraciones.

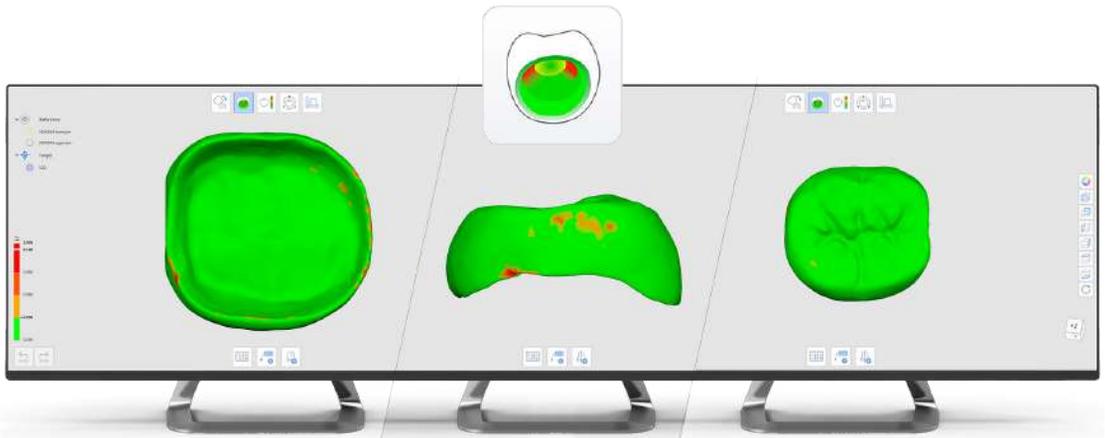

SPLINTS


Cree automáticamente sus férulas en un minuto con Medit Splints. Utilizando un análisis basado en inteligencia artificial, genera automáticamente diseños y establece contornos del perímetro de la férula oclusal para un flujo de trabajo digital sin esfuerzo. Los usuarios que desean tener más control sobre sus diseños pueden disfrutar del modo paso a paso.





DESIGN


Medit Design es una aplicación multifacética que analiza, alinea, mide y compara datos 3D. En la versión actualizada, los usuarios ahora pueden crear una copia simétrica de los datos de escaneo y utilizar varias herramientas como "Bridge", "Combine" y "Mesh Resolution". Hay muchas opciones de comando más disponibles para ayudar a lograr los resultados deseados. Medit Design es accesible para todos, desde principiantes hasta expertos, con su interfaz de usuario intuitiva y su flujo de trabajo.

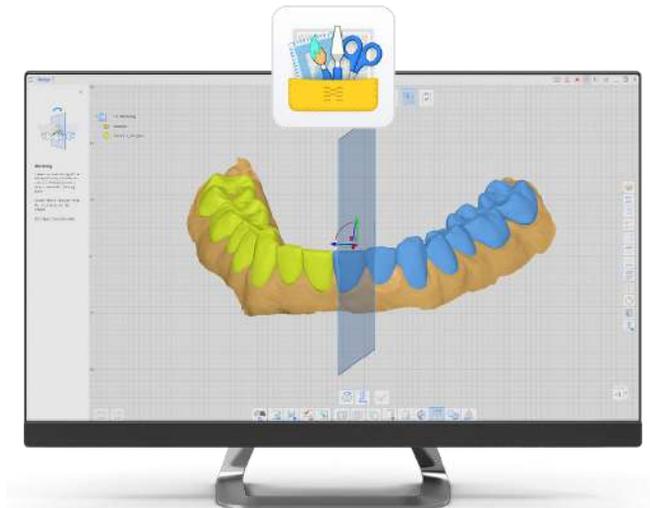



MODEL BUILDER

El software Medit Model Builder lo ayuda a crear rápidamente modelos físicos a partir de datos de escaneo oral digital. Puede crear una base con datos de escaneo, adjuntar un articulador a la base para verificar el estado de intersección y etiquetar cada base para ayudar a distinguir entre modelos.

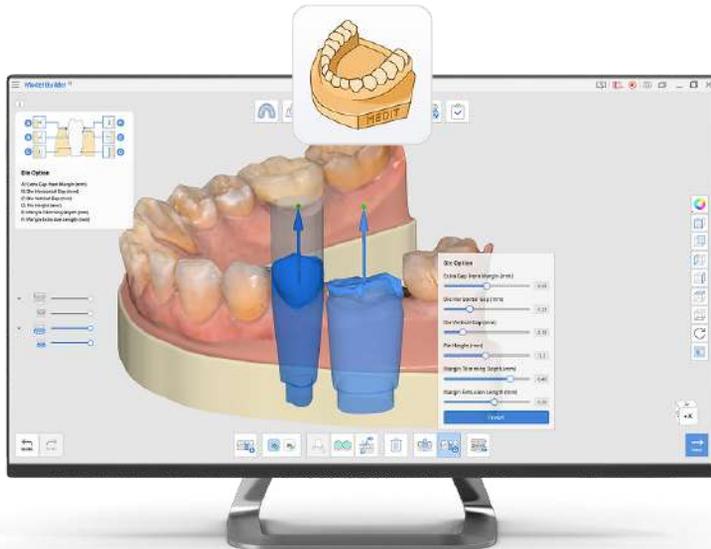



TEMPORARIES

Con Medit Temporaries, cree coronas y puentes temporales en menos de un minuto. Use la biblioteca de Medit o los datos preoperatorios para diseñar sus restauraciones. Tanto los usuarios avanzados como los principiantes sin experiencia previa en CAD pueden incorporar fácilmente la aplicación en su flujo de trabajo diario.





Diseño no es solo apariencia
es un lenguaje.

Queremos expresar creativamente un conjunto de principios:
Confianza, calidad, audacia y compromiso.

Para todos nosotros, nuestra naturaleza humana y nuestra propia existencia, depende de la capacidad para buscar, encontrar y alinearnos con personas que creen en lo que hacemos.

Inspiramos resultados increíbles con un producto que aporte innovación en una cultura de constante cambio.

Su confianza y atención significan mucho para nosotros.
Prometemos honrarlo.

Con sincera gratitud,

Sasha Der Avanesian & David Hidalgo

HarvestDental

LeafDental



¡Plantamos con fe, cosechamos con gozo!



leafdentalmx



harvestdental_mexico

 55 9922 5512