



 | adeptmedical.com

ADEPT

Medical
Supporting you

Issue Date: 10/2025



IMAGING TABLE ACCESSORIES

Product Improvements

CONTENTS

2 We believe in Supporting You

3 **STARSYSTEM**

7 **RETROGRADE IR PLATFORM**

10 **OVERHEAD ARM SUPPORT**

12 **DRAPE SUPPORT**

13 **HEAD IMMOBILISER**

14 ES | Spanish

15 FR | French

16 IT | Italian

17 DE | German

18 NL | Dutch

| We believe in Supporting You.

Adept Medical is dedicated to supporting our customer's needs through our continued drive for excellence and quality products.


This means we take your feedback and experiences with our products seriously.

When we see areas for improvement that would benefit your experience, we make sure to take the necessary steps towards revising and implementing the appropriate design changes.

Adept Medical's team of engineers and designers thank you for your continued support and feedback.

STARSYSTEM

The STARSsystem comprises of the STARBoard, STARSupport and STARTable to form a complete, clinically engineered solution for right-side radial access.

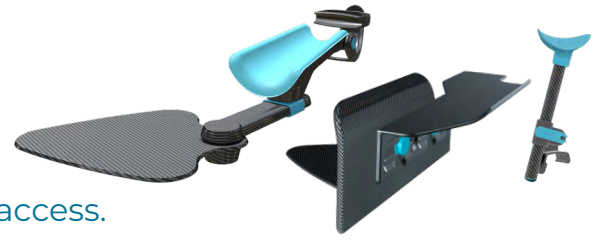

2025

Improved patient wrist security


The STARBoard handle now includes a locking thumbscrew, to hold the wrist securely in position during procedures.



2023

Quick-release Armrest

For fast removal of the STARBoard Armrest.

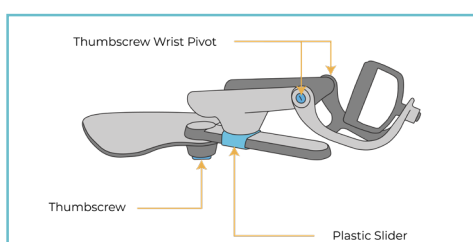

Improved visual cues

The STARBoard Thumbscrew and Thumbscrew Wrist Pivot have changed to blue as a reminder to adjust the friction to suit the procedural requirements.

2021

Arm Pad for improved pressure management

Made with a viscoelastic memory-foam core, and 4x more radiolucent than a standard 10mm gel pad, the Arm Support Pad is a customised solution for minimising pressure injury when using the STARBoard. Reusable, durable and comfortable.



2020




More durable STARTable Shelf

The STARTable Shelf has changed to nylon composite (10% Glass Fibre) for improved rigidity and durability.

2016

Improved Left Arm Support

Quick lock and release joint added to easily lock the Left Arm Support in place.

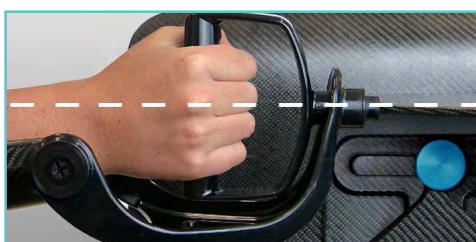

Seamless transition

Wrist height has been raised to table level for a more seamless guide wire transition.

40% lighter

The STARBoard offers a smaller storage footprint, and 40% weight reduction.



Adjustable Thumbscrews

Easily adjust device friction to your preference.


Enhanced Arm Bracket

For ease of use and improved strength, the arm bracket design has been simplified and made stronger.



Improved Side Slots

Strengthened and redesigned side slots on the STARTable.

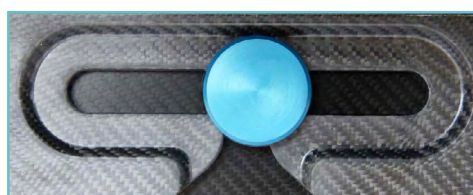



Stronger Spigots

Spigots strengthened using epoxy adhesive and mechanical fixtures.

Reduced X-ray shadow

A key improvement to the STARSsystem is the greatly reduced X-ray shadow at the armrest/shoulder pivot (*fig 1*) and wrist pivot (*fig 2*).



fig 1


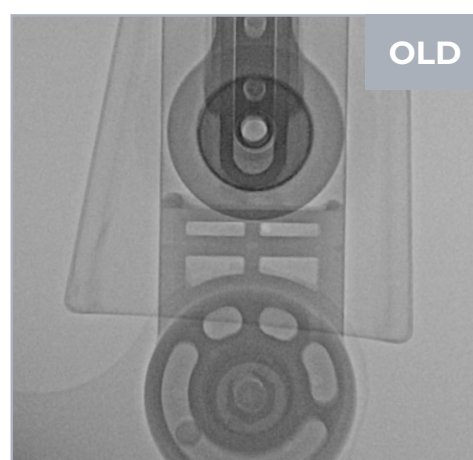


fig 2

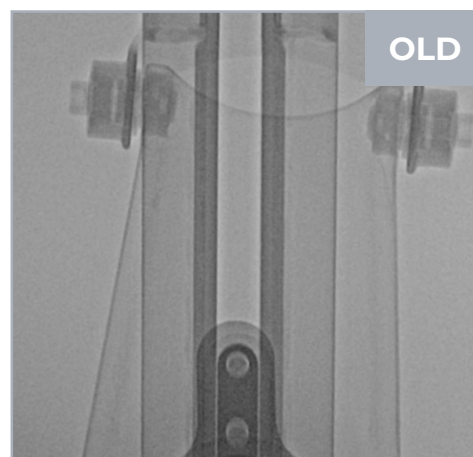

More durable and easy to clean Wrist Pivot

Improved strength and access to the wrist pivot for ease of cleaning.

RETROGRADE IR PLATFORM

An ideal over-patient work surface for retrograde femoral approach.

2025

Available in two sizes

Offered in wide and narrow sizes for a tailored working surface solution to suit your procedural requirements.



2020


Increased surface area

The wider work surface helps to reduce the likelihood of equipment slipping off.




Optional platform extension for longer guide wires

Optional extension for added platform length during Interventional Neuro procedures.

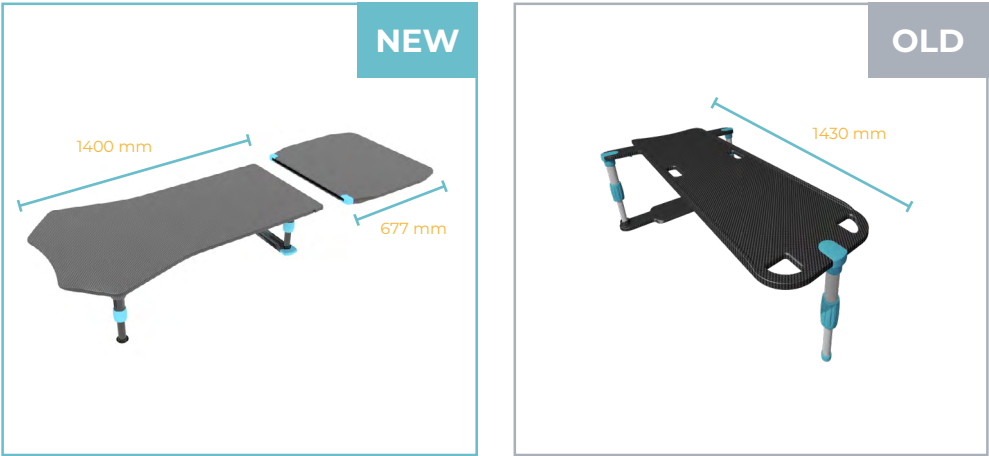


Suitable for a greater range of patient sizes

Leg adjustment height range is increased, with optional leg extensions for an even greater height range.

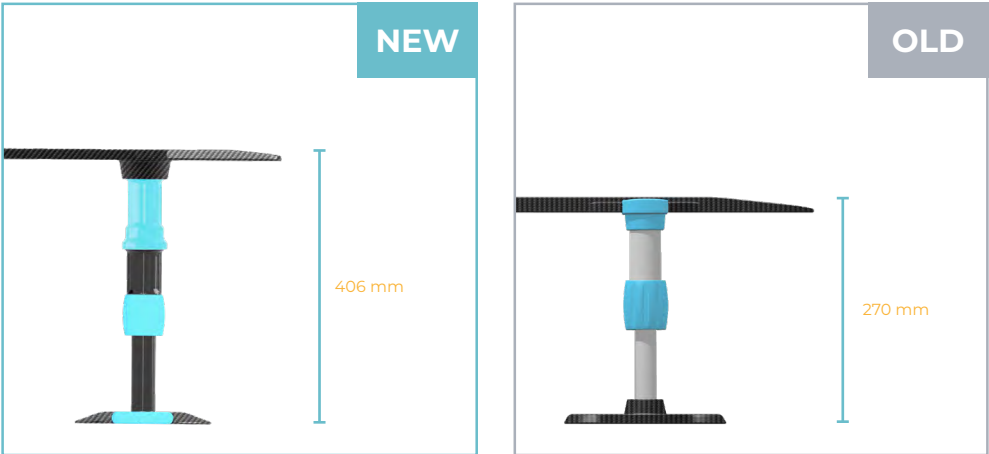


Improved stability

Improved work surface stability with four legs, instead of three.

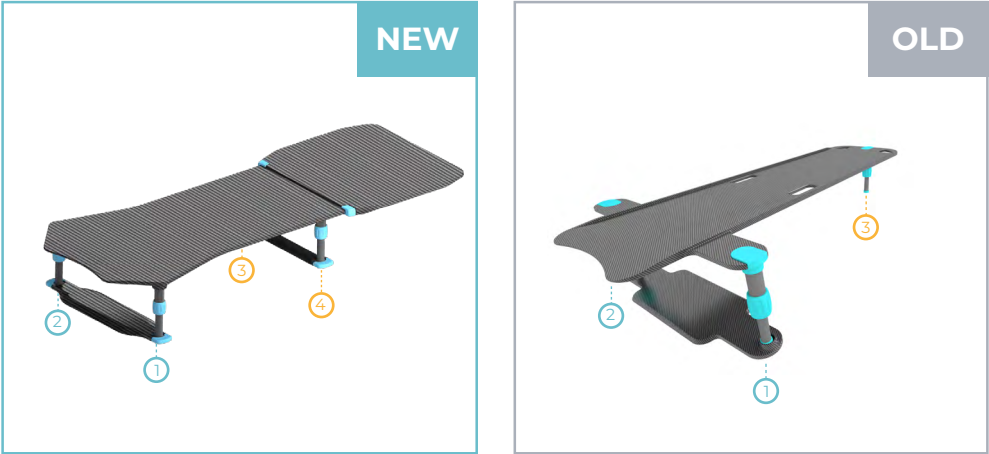


Improved patient security

Added ability to lock the leg assembly into the lower boards, improving patient security and reducing the chance of a restless patient dislodging equipment.

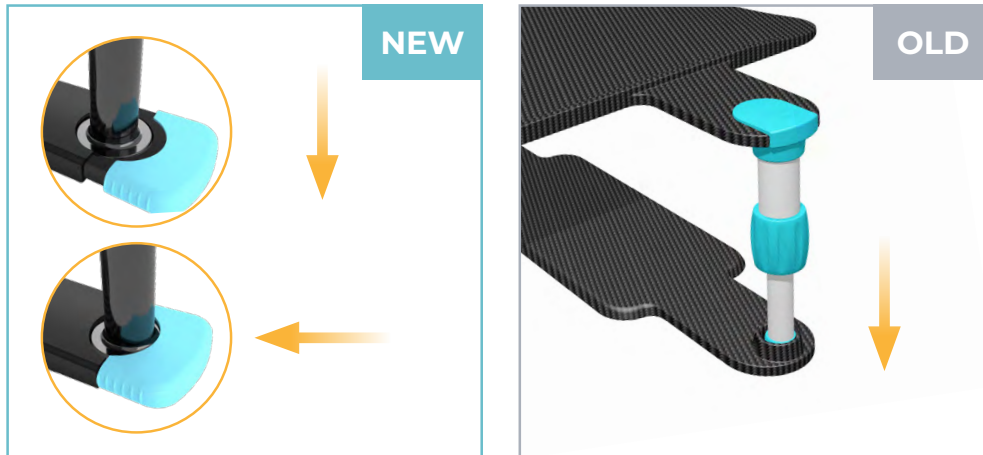

Streamlined design

Handle holes removed for a more streamlined design, preventing equipment from slipping through and the sterile drape from sagging.

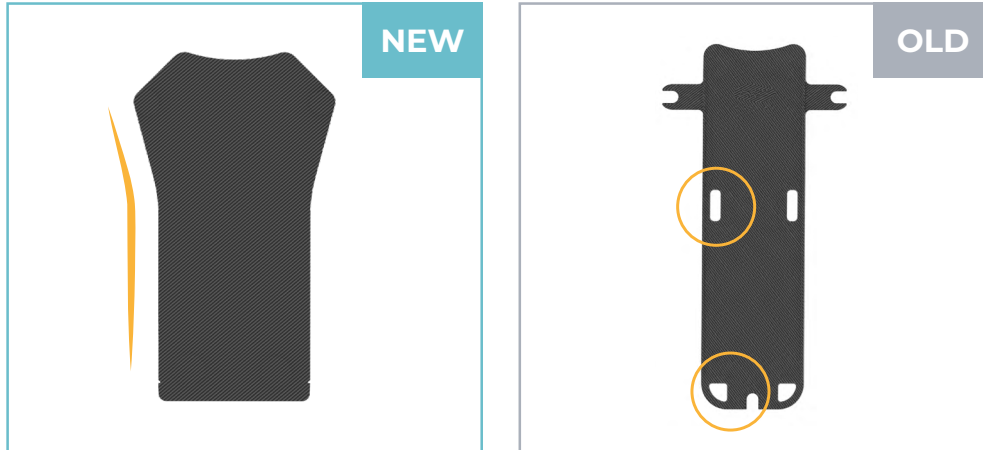

MR Safe

OVERHEAD ARM SUPPORT

For improved access and imaging.

2025

Available in two sizes

Offered in adult and small sizes for improved patient fit and comfort.

**2024**

Enlarged surface area for improved device stability

Increasing the base board dimensions improves device stability, reducing the likelihood of dislodgement by a restless or larger patient.



2021

MR Safe

The updated design means there are no metal components in the device, making it safe to use for MRI.




DRAPE SUPPORT

Versatile sterile drape management.

2020

Stronger surface material

Top surface material made tougher for a longer lasting product, that offers even better chemical resistance.

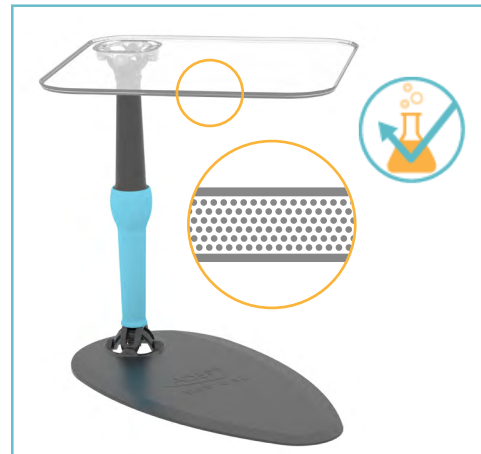

HEAD IMMOBILISER

A radiolucent, secure, and comfortable head support for image guided procedures in interventional radiology and neuroradiology.

2024

Improved imaging

The base board edge has been rounded to reduce cross-sectional thickness and the hood valve has had metal clips removed, reducing artefact.



2023

Consistent immobilisation

The inner part of the hood has been replaced with clear material to help users see the beads.



ES | Spanish

	Página
Accesorios de mesa de imagen	1
Mejoras en los productos	1
Contenido	2
Comprometidos en darle apoyo	2
STARSYSTEM	3
El STARSsystem consta de la STARBoard, el STARSsupport y la STARTable para formar una solución completa y de diseño clínico para el acceso radial en el lado derecho.	3
2025	3
Seguridad mejorada para la muñeca del paciente: El mango STARBoard ahora incluye un tornillo de bloqueo que mantiene la muñeca en su posición de forma segura durante los procedimientos.	3
NUEVO / ANTIGUO	3
2023	3
Reposabrazos (Armrest) de liberación rápida: Para la retirada rápida del reposabrazos (Armrest) STARBoard	3
Señales visuales mejoradas: El tornillo de apriete manual (Thumbscrew) y el pivote de muñeca del tornillo de apriete manual (Thumbscrew Wrist Pivot) (STARBoard) han cambiado a color azul como un recordatorio para ajustar la fricción para cumplir los requisitos del procedimiento.	3
2021	4
Almohadilla de brazo (Arm Pad) para un mejor control de la presión: La almohadilla de soporte de brazo (Arm Support Pad), fabricada con núcleo de espuma viscoelástica 4 veces más radiotransparente que una almohadilla de gel estándar de 10 mm, es una solución personalizada que permite minimizar las lesiones por presión al usar el STARBoard. Reutilizable, duradera y cómoda.	4
2020	4
Estante STARTable más duradero: El estante (Shelf) STARTable está fabricado ahora en compuesto de nailon (10% fibra de vidrio) para una mayor rigidez y durabilidad.	4
2016	5
Soporte de brazo izquierdo (Left Arm Support) mejorado: Junta de bloqueo rápido y liberación rápidas incluida para bloquear fácilmente el soporte de brazo izquierdo (Left Arm Support) en su sitio.	5
Transición más fluida: La altura de la muñeca se eleva al nivel de la mesa para una transición de la guía más fluida.	5
40% más ligero: El STARBoard ofrece un espacio de almacenamiento más pequeño y una reducción de peso del 40%.	5
Tornillos de apriete manual ajustables: Permiten ajustar fácilmente la fricción del dispositivo a su preferencia.	5
Soporte de brazo (Arm Bracket) mejorado: Para facilitar el uso y mejorar la resistencia, el diseño del soporte del brazo se ha simplificado y reforzado.	5
Ranuras laterales mejoradas: Ranuras laterales reforzadas y rediseñadas en el STARTable.	5
Espigas más resistentes: Espigas reforzadas con adhesivo epoxi y fijaciones mecánicas.	6
Sombra de rayos X reducida: Una de las mejoras clave del STARSsystem es la sombra de rayos X muy reducida en el reposabrazos / pivote del hombro (superior) y pivote de la muñeca (inferior).	6
NUEVO / ANTIGUO	6
NUEVO / ANTIGUO	6
Pivote de muñeca (Wrist Pivot) más duradero y fácil de limpiar: Mayor resistencia y mejor acceso al pivote de muñeca para facilitar la limpieza.	6
RETROGRADE IR PLATFORM	7
Una superficie de trabajo idónea colocada sobre el paciente para el abordaje femoral retrógrado.	7
2025	7
Disponible en dos tamaños: Se ofrece en tamaños anchos y estrechos para ofrecer una solución de superficie de trabajo a medida para adaptarse a sus requisitos de procedimiento.	7
NUEVO / ACTUAL	7

2020	7
Mayor área superficial: La superficie de trabajo más amplia ayuda a reducir la probabilidad de deslizamiento del equipo	7
NUEVO / ANTIGUO	7
Extensión de plataforma opcional para cables de guía más largos: Extensión opcional para longitud de plataforma adicional durante los procedimientos neuroquirúrgicos intervencionistas.	8
NUEVO / ANTIGUO	8
Adecuado para una mayor gama de tamaños de pacientes: Mayor rango de altura de ajuste de la pierna, con extensiones opcionales de la pierna para un rango de altura aún mayor.	8
NUEVO / ANTIGUO	8
Estabilidad mejorada: Estabilidad mejorada de la superficie de trabajo con cuatro patas, en lugar de tres.	8
NUEVO / ANTIGUO	8
Mayor seguridad para el paciente: Se ha incluido la capacidad de bloquear el conjunto de la pierna en las placas inferiores, mejorando la seguridad del paciente y reduciendo la posibilidad de que un paciente inquieto desacople los componentes.	9
NUEVO / ANTIGUO	9
Diseño optimizado: Los orificios de las asas se han eliminado para lograr un diseño más optimizado, evitando el deslizamiento del equipo y el hundimiento de las envolturas quirúrgicas.	9
NUEVO / ANTIGUO	9
OVERHEAD ARM SUPPORT seguro para RM	10
Para mejorar el acceso y la adquisición de imágenes.	10
2025	10
Disponible en dos tamaños: Se ofrece en tamaños de adulto y pequeño para mejorar el ajuste y la comodidad del paciente.	10
NUEVO / ACTUAL	10
2024	10
Mayor superficie para una mejor estabilidad de los dispositivos: Las mayores dimensiones de la placa base aumentan la estabilidad de los dispositivos, reduciendo la probabilidad de que se suelten por un paciente inquieto o de mayor tamaño.	10
NUEVO / ANTIGUO	10
2021	11
Seguro para RM: El diseño actualizado significa que no hay más componentes metálicos en el dispositivo, garantizándose su seguridad para RM.	11
DRAPE SUPPORT	12
Manejo versátil de la envoltura estéril.	12
2020	12
Material de la superficie más resistente: Material de la superficie superior más robusto para un producto más duradero, que ofrece una resistencia química aún mejor.	12
HEAD IMMOBILISER	13
Un soporte para la cabeza radiotransparente, seguro y cómodo para procedimientos de radiología intervencionista y neurorradiología.	13
2024	13
Mejor obtención de imágenes: El borde de la placa base ha sido redondeado para reducir el espesor de la sección transversal, y se han retirado los clips de la válvula de cubierta, reduciendo así los artefactos.	13
NUEVO / ANTIGUO	13
2023	13
Inmovilización sistemática: La parte interna del capuchón se ha reemplazado con material transparente para ayudar a los usuarios a ver las bolitas.	13
NUEVO / ANTIGUO	13

FR | French

	Page		
Accessoires pour table d'imagerie	1	2020	7
Améliorations des produits	1	Surface accrue : Grâce à la surface de travail plus large, le risque de voir des équipements glisser de la table est réduit.	7
Contenu	2	NOUVEAU / ANCIEN	7
Nous croyons qu'il est important vous soutenir	2	Extension de plateforme en option pour les fils-guides plus longs : Extension en option pour ajouter de la longueur à la plateforme lors des actes de neurologie interventionnelle.	8
STARSYSTEM	3	NOUVEAU / ANCIEN	8
Composé des dispositifs STARBoard, STARSupport et STARTable, l'ensemble STARSystem forme une solution d'ingénierie biomédicale complète pour l'abord radial droit.	3	Système compatible avec un plus grand éventail de corpulences : La plage de hauteur de réglage des pieds est accrue, avec des rallonges de pied en option pour disposer d'une plage de hauteur encore plus grande.	8
2025	3	NOUVEAU / ANCIEN	8
Sécurité améliorée du poignet du patient : La poignée STARBoard comprend désormais une vis de verrouillage qui maintient le poignet en place en toute sécurité pendant les procédures.	3	Amélioration de la stabilité : Stabilité de la surface de travail améliorée avec quatre pieds, au lieu de trois.	8
NOUVEAU / ANCIEN	3	NOUVEAU / ANCIEN	8
2023	3	Amélioration de la sécurité du patient : Ajout de la possibilité de verrouiller l'ensemble de pied dans les plaques inférieures afin d'améliorer la sécurité du patient et de réduire le risque qu'un patient agité puisse déplacer des équipements.	9
Repose-bras à retrait rapide : Pour permettre un retrait rapide du repose-bras STARBoard.	3	NOUVEAU / ANCIEN	9
Repères visuels améliorés : La vis à ailettes du dispositif STARBoard et celle du pivot de poignet (Wrist Pivot) sont désormais bleues pour rappeler la nécessité de régler la friction en fonction des exigences propres à chaque intervention.	3	Design épuré : Trous de poignée supprimés pour un design plus épuré empêchant les équipements de glisser à travers et les champs stériles de s'affaïsser.	9
2021	4	NOUVEAU / ANCIEN	9
Garniture de repose-bras pensée pour une meilleure prise en charge de la pression : Constitué d'un noyau de mousse viscoélastique à mémoire de forme et 4 fois plus radiotransparent qu'une garniture gel standard de 10 mm, le support de bras (Arm Support Pad) est une solution conçue sur mesure pour réduire au maximum l'apparition de plaies de pression lors de l'utilisation du STARBoard. Réutilisable, durable et confortable.	4	OVERHEAD ARM SUPPORT compatible IRM	10
2020	4	Pour un accès amélioré et une imagerie de meilleure qualité.	10
Tablette (STARTable Shelf) plus durable : La tablette (STARTable Shelf) est désormais en nylon composite (10% de fibre de verre) pour une rigidité et une durabilité améliorées.	4	2025	10
2016	5	Disponible en deux tailles: Dispositif proposé en version adulte et petite taille pour une meilleure adaptation au patient et un confort accru.	10
Amélioration du support de bras gauche (Left Arm Support) : Ajout d'une articulation à verrouillage et déverrouillage rapide pour verrouiller facilement le support de bras gauche (Left Arm Support) en place.	5	NOUVEAU / ACTUEL	10
Transition en douceur : La hauteur du poignet est relevée au niveau de la table pour une transition plus en douceur du fil-guide.	5	2024	10
40% plus léger : Le STARBoard offre un encombrement moindre en position de rangement et une réduction de poids de 40%.	5	Surface agrandie pour une meilleure stabilité du dispositif : L'augmentation des dimensions de la plaque de base améliore la stabilité du produit en réduisant le risque de déplacement par un patient agité ou plus corpulent.	10
Vis à ailettes réglables : Réglez facilement la friction du dispositif selon vos préférences.	5	NOUVEAU / ANCIEN	10
Support de bras (Arm Bracket) amélioré : Pour une facilité d'utilisation et une résistance accrues, la conception du support de bras a été simplifiée et renforcée.	5	2021	11
Fentes latérales améliorées : Fentes latérales renforcées et redessinées sur le dispositif STARTable.	5	Compatible IRM : Grâce à une conception actualisée, le dispositif ne comporte plus de composants métalliques, ce qui le rend utilisable sans danger en IRM.	11
Ergots plus solides : Ergots renforcés à l'aide de colle époxy et de fixations mécaniques.	6	DRAPE SUPPORT	12
Ombre radiographique réduite : Une amélioration essentielle du STARSystem réside dans l'ombre radiographique fortement réduite au niveau du pivot repose-bras/épaule (dessus) et du pivot de poignet (dessous).	6	Gestion polyvalente des champs stériles.	12
NOUVEAU / ANCIEN	6	2020	12
NOUVEAU / ANCIEN	6	Matériau de surface plus solide : Un matériau de la surface supérieure désormais plus robuste, pour un produit plus durable offrant une résistance chimique encore meilleure.	12
Pivot de poignet (Wrist Pivot) plus durable et facile à nettoyer : Solidité accrue et meilleur accès au pivot de poignet pour le nettoyage.	6	HEAD IMMOBILISER	13
RETROGRADE IR PLATFORM	7	Têtière radiotransparente sûre et confortable pour les actes guidés par l'image en radiologie et neuroradiologie interventionnelles.	13
Une surface de travail idéale au-dessus du patient pour l'abord fémoral rétrograde.	7	2024	13
2025	7	Imagerie améliorée : Le bord de la plaque de base a été arrondi pour réduire l'épaisseur transversale et les agrafes métalliques du robinet de coquille ont été retirées, ce qui réduit les artefacts.	13
Disponible en deux tailles: Dispositif proposé en version large et étroite : une solution sur mesure en termes de surface de travail pour répondre aux exigences propres à chaque intervention.	7	NOUVEAU / ANCIEN	13
NOUVEAU / ACTUEL	7	2023	13
		Immobilisation uniforme : La partie intérieure de la coquille a été remplacée par un matériau transparent pour permettre aux utilisateurs de voir les billes.	13
		NOUVEAU / ANCIEN	13

IT | Italian

	Pagina
Accessori per il tavolo per imaging	1
Migliorie apportate al prodotto	1
Sommario	2
Riteniamo importante sostenervi	2
STARSYSTEM	3
STARSystem è composto da STARBoard, STARSupport e STARTable che formano una soluzione completa, clinicamente ingegnerizzata per un accesso radiale destro.	3
2025	3
Miglioramento della sicurezza del polso del paziente: L'impugnatura STARBoard ora include una vite di bloccaggio che tiene il polso saldamente in posizione durante le procedure.	3
NUOVO / PRECEDENTE	3
2023	3
Bracciolo (Armrest) a sgancio rapido: rimozione rapida del bracciolo STARBoard.	3
Migliori indicazioni visive: la vite a farfalla di STARBoard e quella del perno a testa zigrinata per il sostegno del polso (Wrist Pivot) ora sono di colore blu per rammentare di regolarne la frizione per adattarla ai requisiti procedurali.	3
2021	4
Migliore gestione della pressione sull'imbottitura del sostegno per il braccio (Arm Support): con il suo interno in memory-foam viscoelastico e 4 volte più radioluciente rispetto a un'imbottitura standard in gel da 10 mm, l'imbottitura del sostegno per il braccio (Arm Support) è una soluzione personalizzata per ridurre al minimo le lesioni da pressione quando si usa STARBoard. Riutilizzabile, resistente e confortevole.	4
2020	4
Ripiano di STARTable più resistente: l'adozione di nylon composito (10% fibra di vetro) offre una rigidità e una resistenza maggiori del ripiano STARTable.	4
2016	5
Supporto per il braccio sinistro (Left Arm Support) migliorato: aggiunta della funzione di bloccaggio rapido e snodo di rilascio per facilitare il bloccaggio in posizione del supporto per il braccio sinistro (Left Arm Support).	5
Scorrimento senza soluzione di continuità: l'altezza del polso è stata elevata al livello del tavolo per un più agevole scorrimento del filo guida.	5
40% più leggero: STARBoard ora prevede un ingombro di immagazzinamento inferiore e una riduzione del 40% del suo peso.	5
Viti a farfalla regolabili: facile regolazione del dispositivo di attrito per adattarlo alle specifiche esigenze.	5
Staffa per il braccio (Arm Bracket) migliorata: il design rinnovato della staffa per il braccio (Arm Bracket) ne facilita l'uso e ne migliora la resistenza.	5
Scanalature laterali migliorate: rinforzo e riprogettazione delle scanalature laterali di STARTable.	5
Spigoli più robusti: raccordi rinforzati con adesivo epossidico e fissaggi meccanici.	6
Riduzione dell'ombra dei raggi X: una delle migliorie principali apportate a STARSystem è la notevole riduzione dell'ombra dei raggi X in corrispondenza del bracciolo/snodo della spalla (Shoulder Pivot) (in alto) e del perno per il sostegno del polso (Wrist Pivot) (in basso).	6
NUOVO / PRECEDENTE	6
NUOVO / PRECEDENTE	6
Perno per il sostegno del polso (Wrist Pivot) più resistente e più facile da pulire: maggiore resistenza e migliore accesso al perno di sostegno per il polso (Wrist Pivot) per facilitarne la pulizia.	6
RETROGRADE IR PLATFORM	7
Superficie di lavoro ideale posizionata sopra il paziente per gli approcci femorali retrogradi.	7
2025	7
Disponibile in due misure: Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni larghe e strette per fornire una soluzione di superficie di lavoro personalizzata e adatta alle esigenze procedurali.	7
NUOVO / ATTUALE	7

2020	7
Area superficiale più ampia: la superficie di lavoro più ampia contribuisce a ridurre il possibile scivolamento delle attrezzature.	7
NUOVO / PRECEDENTE	7
Estensione opzionale della piattaforma per l'uso di fili guida più lunghi: estensione opzionale che consente di aumentare la lunghezza della piattaforma nel corso di procedure di neuro-interventistica.	8
NUOVO / PRECEDENTE	8
Adatto a una gamma più ampia di pazienti: la regolazione dell'altezza delle gambe è stata incrementata grazie a prolunghe opzionali per le gambe che consentono raggiungere altezze ancora maggiori.	8
NUOVO / PRECEDENTE	8
Maggiore stabilità: l'adozione di quattro gambe invece di tre ha contribuito a migliorare la stabilità della superficie di lavoro.	8
NUOVO / PRECEDENTE	8
Maggiore sicurezza per il paziente: possibilità di bloccare il gruppo delle gambe ai supporti inferiori per migliorare la sicurezza del paziente e ridurre la possibilità che un paziente irrequieto possa spostare l'attrezzatura.	9
NUOVO / PRECEDENTE	9
Design ottimizzato: rimozione dei fori per le maniglie per ottenere un design più snello, per evitare che le attrezzature possano scivolare e che il telo sterile possa afflosciarsi.	9
NUOVO / PRECEDENTE	9
Compatibilità MR – SOSTEGNO PER IL BRACCIO SOPRA LA TESTA (OVERHEAD ARM SUPPORT)	10
Per un migliore accesso e diagnostica per immagini.	10
2025	10
Disponibile in due misure: Disponibile in dimensione per adulti e bambini per un migliore adattamento e comfort del paziente.	10
NUOVO / ATTUALE	10
2024	10
Area superficiale aumentata per una migliore stabilità del dispositivo: L'aumento delle dimensioni della piastra di base (Base Board) migliora la stabilità del dispositivo riducendo di conseguenza le probabilità di dislocazione causate da un paziente irrequieto o di corporatura superiore.	10
NUOVO / PRECEDENTE	10
2021	11
Compatibilità MR: il design aggiornato non prevede più la presenza di componenti metallici all'interno del dispositivo e consente di utilizzarlo in modo sicuro per la diagnostica MRI.	11
DRAPE SUPPORT	12
Gestione versatile del telo sterile.	12
2020	12
Materiale superficiale più resistente: rinforzato per prolungare la vita del prodotto e per offrire una maggiore resistenza agli agenti chimici.	12
HEAD IMMOBILISER	13
Sostegno per la testa radioluciente, sicuro e confortevole nel corso di procedure di diagnostica per immagini di radiologia e neuroradiologia interventistica.	13
2024	13
Migliore diagnostica per immagini: Il bordo della piastra di base (Base Board) è stato arrotondato per ridurre lo spessore della sezione trasversale e dalla valvola del cappuccio sono stati rimossi i fermagli metallici, con conseguente riduzione degli artefatti.	13
NUOVO / PRECEDENTE	13
2023	13
Immobilizzazione costante: la parte interna del cappuccio è stata sostituita con materiale trasparente per consentire agli utenti di rilevare l'eventuale presenza di microsferi.	13
NUOVO / PRECEDENTE	13

DE | German

	Seite		
Zubehör für Imaging Table	1	2020	7
Produktverbesserungen	1	Größere Oberfläche: Die breitere Arbeitsfläche senkt die Wahrscheinlichkeit, dass Instrumente hinabfallen.	7
Inhalt	2	NEU/ALT	7
Sie stehen bei uns an erster Stelle	2	Optionale Plattformverlängerung für längere Führungsdrähte: Optionale Verlängerung für größere Plattformlänge während neurointerventionellen Behandlungen	8
STARSYSTEM	3	NEU/ALT	8
Das STARSystem besteht aus dem STARBoard, dem STARSupport und dem STARTable und bildet eine komplette, klinisch ausgereifte Lösung für den rechtsseitigen radialen Zugang.	3	Für Patienten noch mehr unterschiedlicher Körpergrößen geeignet: Vergrößerter Höhenverstellbereich der Füße, optionale Verlängerungen für einen noch größeren Bereich.	8
2025	3	NEU/ALT	8
Verbesserte Sicherheit des Handgelenks des Patienten: Der STARBoard-Griff verfügt jetzt über eine Rändelschraube zum Feststellen, um das Handgelenk während des Eingriffs sicher in Position zu halten.	3	Verbesserte Stabilität: Verbesserte Stabilität der Arbeitsfläche dank vier anstelle von drei Füßen.	8
NEU/ALT	3	NEU/ALT	8
2023	3	Höhere Patientensicherheit: Neue Verriegelungsmöglichkeit der Fußbefestigung in den unteren Boards für höhere Patientensicherheit und geringeres Risiko, dass unruhige Patienten Teile entkoppeln oder lösen.	9
Schnellkupplung für Armrest: Zum schnellen Abnehmen der STARBoard Armrest.	3	NEU/ALT	9
Verbesserte Erkennungsmerkmale: Die STARBoard Thumbscrew und das Thumbscrew Wrist Pivot sind jetzt blau. Die neue Farbgebung soll daran erinnern, die Reibung passend zum jeweiligen Vorgang einzustellen.	3	Stromlinienförmige Konstruktion: Grifföffnungen entfernt, sodass keine Instrumente hindurchrutschen oder sterile Tücher durchhängen können.	9
2021	4	NEU/ALT	9
Arm Pad für verbessertes Druckmanagement: Mit einem Kern aus viskoelastischem Memory-Schaumstoff und einer gegenüber einem normalen 10-mm-Gelpad vier Mal höheren Strahlendurchlässigkeit ist das Arm Support Pad eine individuelle Lösung zur Minimierung von Druckverletzungen bei der Nutzung von STARBoard. Wiederverwendbar, langlebig und komfortabel.	4	MR Safe OVERHEAD ARM SUPPORT	10
2020	4	Für besseren Zugang und Bildgebung.	10
Langlebigere STARTable Shelf: Die STARTable Shelf wird jetzt aus einem Nylon-Verbundwerkstoff (10% Glasfaser) gefertigt, was Festigkeit und Strapazierfähigkeit erhöht.	4	2025	10
2016	5	In zwei Größen erhältlich: Das Produkt ist für eine bessere Passgenauigkeit und einen höheren Komfort in Größen für Kinder und Erwachsene erhältlich.	10
Verbesserte Left Arm Support: Schnellkupplung zum einfachen Verriegeln und Lösen des Left Arm Supports	5	NEU / AKTUELL	10
Stufenloser Übergang: Handgelenkhöhe an das Tischniveau angepasst, sodass ein stufenloser Übergang der Führungsdrähte möglich ist	5	2024	10
40% leichter: Das STARBoard benötigt weniger Platz, wenn es nicht genutzt wird, und ist 40% leichter.	5	Größere Oberfläche für verbesserte Hilfsmittelstabilität: Die größeren Abmessungen des Base Boards tragen zu einer höheren Stabilität des Hilfsmittels bei und reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verrutschens bei unruhigen oder größeren Patienten.	10
Verstellbare Thumbscrews: Einfaches Einstellen der Reibung an die Erfordernisse und Vorlieben.	5	NEU/ALT	10
Verbesserte Arm Bracket: Zur einfachen Verwendung und für eine höhere Festigkeit wurde die Konstruktion vereinfacht und verstärkt.	5	2021	11
Verbesserte Side Slots: Verstärkte und neu gestaltete Side Slots am STARTable.	5	MR Safe: Bei der Überarbeitung wurde komplett auf Metallbauteile verzichtet, sodass das Hilfsmittel bei der MRT eingesetzt werden kann.	11
Verstärkte Spigots: Mit Epoxidkleber und mechanischen Vorrichtungen verstärkte Spigots.	6	DRAPE SUPPORT	12
Reduzierter Röntgens Schatten: Als wesentliche Verbesserung beim STARSystem ist der Röntgens Schatten von Arm Rest/Shoulder Pivot (oben) und Wrist Pivot (unten) deutlich reduziert worden.	6	Vielseitiges Management steriler Abdeckungen.	12
NEU/ALT	6	2020	12
NEU/ALT	6	Verstärktes Oberflächenmaterial: Das Material für die Oberseite ist verstärkt und somit langlebiger und bietet eine höhere Chemikalienbeständigkeit.	12
Wrist Pivot stabiler und leichter zu reinigen: Erhöhte Festigkeit, Wrist Pivot für einfache Reinigung besser zu erreichen.	6	HEAD IMMOBILISER	13
RETROGRADE IR PLATFORM	7	Strahlendurchlässige, sichere und komfortable Head Support für bildgestützte Eingriffe in der interventionellen Radiologie und Neuroradiologie	13
Eine ideale Arbeitsfläche über dem Patienten für den retrograden femoralen Zugang.	7	2024	13
2025	7	Verbesserte Bildgebung: Die Kante des Base Boards wurde abgerundet, um die Querschnittsdicke zu reduzieren. Beim Hood Valve wurden die Metallclips entfernt, damit weniger Artefakte auftreten.	13
In zwei Größen erhältlich: Das Produkt ist in einer breiten und einer schmalen Ausführung erhältlich und bietet so genau die Arbeitsfläche, die zu Ihrer Vorgehensweise passt.	7	NEU/ALT	13
NEU / AKTUELL	7	2023	13
		Beständige Fixierung: Der Innenteil der Haube wurde durch ein transparentes Material ersetzt, das es dem Anwender ermöglicht, die Perlen zu erkennen.	13
		NEU/ALT	13

NL | Dutch

	Pagina		
Accessoires voor beeldvormingstafel	1	2020	7
Productverbeteringen	1	Vergroot oppervlak: het bredere werkoppervlak helpt de kans op wegglijden van instrumenten te verkleinen	7
Inhoud	2	NIEUW / OUD	7
We willen u ondersteunen	2	Optionele platformverlenging voor langere geleidingsdraden: optionele verlenging voor extra platformlengte tijdens interventionele neuroprocedures	8
STARSYSTEM	3	NIEUW / OUD	8
Het STARSystem bestaat uit de STARBoard, STARSupport en STARTable en vormt een complete, klinisch ontworpen oplossing voor toegang tot de rechter radiale zijde.	3	Geschikt voor een grotere verscheidenheid aan patiënten met verschillende omvang: de poten kunnen nog meer worden verlengd, met optionele verlengstukken voor een nog groter hoogtebereik.	8
2025	3	NIEUW / OUD	8
Verbeterde beveiliging van de pols van de patiënt: De STARBoard-hendel is nu voorzien van een vergrendelbare duimschroef, zodat de pols tijdens de procedures stevig op zijn plaats blijft.	3	Verbeterde stabiliteit: verbeterde stabiliteit op het werkoppervlak met vier poten, ten opzichte van drie.	8
NIEUW / OUD	3	NIEUW / OUD	8
2023	3	Verbeterde veiligheid van de patiënt: toegevoegde mogelijkheid om de poten in de onderste planken te vergrendelen, wat de veiligheid van de patiënt verbetert en de kans verkleint dat een onrustige patiënt apparatuur losmaakt.	9
Armrest met snelspanner: voor snelle verwijdering van de STARBoard Armrest	3	NIEUW / OUD	9
Verbeterde visuele aanwijzingen: de STARBoard Thumbscrew en Thumbscrew Wrist Pivot zijn nu blauw als herinnering om de wrijving aan te passen aan de procedurele vereisten.	3	Gestroomlijnd design: handvatgaten verwijderd voor een meer gestroomlijnd ontwerp, waardoor instrumenten of apparatuur er niet doorheen kunnen glijden en de steriele hoes niet doorhangt.	9
2021	4	NIEUW / OUD	9
Arm Pad voor een betere drukbeheersing: de Arm Support Pad is gemaakt van visco-elastisch traagschuim en 4 x meer radiolucent dan een standaard gelkussen van 10 mm. Het is een oplossing op maat om drukletsel te minimaliseren tijdens het gebruik van de STARBoard. Herbruikbaar, duurzaam en comfortabel.	4	MR-veilige OVERHEAD ARM SUPPORT	10
2020	4	Voor betere toegang en beeldvorming.	10
Duurzamere STARTable Shelf: de STARTable Shelf is nu van nyloncomposiet gemaakt (10% glasvezel) voor verbeterde stijfheid en duurzaamheid.	4	2025	10
2016	5	Verkrijgbaar in twee maten: Verkrijgbaar in maten voor volwassenen en kleine maten voor een betere pasvorm en meer comfort voor de patiënt.	10
Verbeterde Left Arm Support: snelle vergrendeling en ontgrendeling toegevoegd om gemakkelijk de Left Arm Support vast te zetten.	5	NIEUW / HUIDIG	10
Naadloze overgang: polshoogte is verhoogd tot tafelhoogte voor een meer naadloze overgang van de geleidingsdraad.	5	2024	10
40% lichter: de STARBoard heeft een kleinere opslagruimte nodig en is 40% lichter.	5	Vergroot oppervlak voor verbeterde stabiliteit van het apparaat: Door de afmetingen van de basisplaat te vergroten, wordt de stabiliteit van het apparaat verbeterd, waardoor de kans kleiner is dat het losraakt door een onrustige of grotere patiënt.	10
Adjustable Thumbscrews: pas de wrijving van het apparaat eenvoudig aan uw voorkeur aan.	5	NIEUW / OUD	10
Verbeterde armbeugel: voor gebruiksgemak en meer stevigheid is het ontwerp van de armbeugel vereenvoudigd en sterker gemaakt.	5	2021	11
Verbeterde zijgleuven: versterkte en opnieuw ontworpen zijgleuven op de STARTable.	5	MR-veilig: het vernieuwde design betekent dat er geen metalen onderdelen meer in het hulpmiddel zitten, waardoor het veilig te gebruiken is voor MRI.	11
Sterkere aansluitingen: aansluitingen verstevigd met epoxylijm en mechanische bevestigingen.	6	DRAPE SUPPORT	12
Minder röntgenschaduw: een belangrijke verbetering aan het STARSystem is de sterk verminderde röntgenschaduw bij de Arm Rest / het schouderdraaipunt (boven) en het polsdraaipunt (onder).	6	Veelzijdig beheer van steriele afdekdoeken.	12
NIEUW / OUD	6	2020	12
NIEUW / OUD	6	Sterker oppervlaktemateriaal: het materiaal van de bovenkant is sterker gemaakt voor een product dat langer meegaat en een nog betere chemische weerstand biedt.	12
Duurzamere en gemakkelijk schoon te maken Wrist Pivot: verbeterde stevigheid en toegang tot de Wrist Pivot voor eenvoudig schoonmaken.	6	HEAD IMMOBILISER	13
RETROGRADE IR PLATFORM	7	Een radiolucente, veilige en comfortabele hoofdsteen voor beeldgeleide procedures in interventionele radiologie en neuroradiologie.	13
Een ideaal werkoppervlak boven de patiënt voor retrograde femorale toegang.	7	2024	13
2025	7	Verbeterde beeldvorming: De rand van de basisplaat is afgerond om de dikte van de dwarsdoorsnede te verminderen en bij de klep van de kap zijn metalen clips verwijderd, waardoor artefacten worden verminderd.	13
Verkrijgbaar in twee maten: Verkrijgbaar in brede en smalle maten voor een werkoppervlak op maat dat voldoet aan de vereisten van uw procedure.	7	NIEUW / OUD	13
NIEUW / HUIDIG	7	2023	13
		Consistente immobilisatie: de binnenkant van de kap is vervangen door doorzichtig materiaal zodat gebruikers de kralen beter kunnen zien.	13
		NIEUW / OUD	13