



IT



| adeptmedical.com

ADEPT

Medical
Supporting you

RETROGRADE IR PLATFORM

AM0420 • AM0400 • AM0410
AM0460 • AM0450 • AM0470

Scheda prodotto

Superficie di lavoro leggera e sovrapposta al paziente che migliora il flusso di lavoro e la sicurezza nel corso delle procedure di accesso arterioso retrogrado.

Le Piattaforme IR retrograde (Retrograde IR Platforms) sono superfici di lavoro modulari per l'accesso arterioso nel corso di procedure diagnostiche per immagini.

La configurazione regolabile in altezza consente agli operatori di posizionarsi vicino al sito di accesso, mantenere le apparecchiature a portata di mano di fronte al medico e migliorare il comfort del paziente. Leggera, radiolucida e facile da installare sopra un paziente in posizione supina, la piattaforma si blocca saldamente in posizione e si adatta a un'ampia gamma di configurazioni procedurali.

Scegliere una delle due piattaforme che meglio si adatta al flusso di lavoro.

Piattaforma IR retrograda (Retrograde IR Platform) (AM0400): la sua ampia superficie garantisce uno spazio adeguato alle apparecchiature necessarie; ideale per le configurazioni che richiedono uno spazio sufficiente, perfetta quando l'ingombro non è un problema.

Piattaforma IR retrograda – Stretta (Retrograde IR Platform – Narrow) (AM0450): la sua superficie stretta non interferisce con le apparecchiature montate posteriormente; particolarmente adatta per aree di lavoro compatte.

Quando si usano apparecchiature più lunghe, a entrambe le piattaforme possono essere applicate prolunghie opzionali che garantiscono l'accessibilità e il comfort; ideali per sistemi di cablaggio dei cateteri su filo guida (Over The Wire Catheter Systems).




- ▶ Offre una superficie stabile per il filo guida e la gestione delle apparecchiature, riducendo la necessità di intervenire sul paziente
- ▶ Migliora il flusso di lavoro ottimizzando il lavoro di squadra con operatori affiancati e facilitando l'accesso al sito di intervento
- ▶ Le gambe regolabili in altezza si bloccano saldamente in posizione per garantire la stabilità nel corso delle procedure
- ▶ Piattaforma di fibra di carbonio leggera, radiolucida e facile da configurare
- ▶ Opzioni per la larghezza e la lunghezza adattabili alle esigenze procedurali e di spazio




Efficienza del flusso di lavoro

Disponibile in due larghezze per adattarsi alle varie configurazioni. La superficie di lavoro piana e stabile sopra il paziente favorisce il lavoro di operatori affiancati.

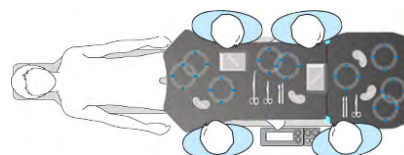


Prolunga (Extension) opzionale

L'adozione di una prolunga (Extension) opzionale consente di allungare entrambe le piattaforme di lavoro per consentire di sistemare ulteriore strumentazione e dispositivi più lunghi.

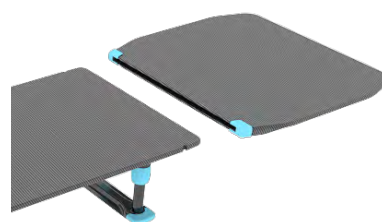

Piattaforma bloccabile

La piattaforma si aggancia alla base anteriore (Front Base) per assicurarne l'affidabilità e la stabilità anche in presenza di un paziente irrequieto.

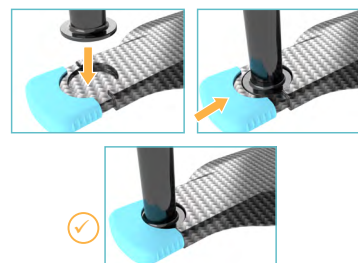

Data emissione: 03/2026

Codici prodotto



Retrograde IR Platform

AM0420

Retrograde IR Platform + Extension

AM0400

Retrograde IR Platform

AM0410

IR Platform Extension



Retrograde IR Platform – Narrow

AM0460

Retrograde IR Platform – Narrow
+ Extension

AM0450

Retrograde IR Platform – Narrow

AM0470

IR Platform Extension – Narrow

Applicazioni

Progettata per l'uso nel corso di procedure di radiologia, cardiologia e neuroradiologia interventistica.



Specifiche

Dispositivo	Retrograde IR Platform + Extension	Retrograde IR Platform – Narrow + Extension
Dimensioni	* La Prolunga della piattaforma IR (IR Platform Extension) consente di aumentare la lunghezza fino a 2.000 mm ** Altezza regolabile da 190 a 406 mm (estensione totale + prolunga per i piedini (Leg Extension))	* La Prolunga della piattaforma IR – Stretta (IR Platform Extension – Narrow) consente di aumentarne la lunghezza fino a 1.864 mm ** Altezza regolabile da 181 a 401 mm (estensione totale + prolunga per i piedini (Leg Extension))
Peso	Piattaforma IR retrograda (Retrograde IR Platform): 8,7 kg Prolunga piattaforma IR (IR Platform Extension): 3,6 kg	Piattaforma IR retrograda – Stretta (Retrograde IR Platform – Narrow): 5,3 kg Prolunga piattaforma IR – Stretta (IR Platform Extension – Narrow): 1,6 kg

Per ulteriori dettagli contattateci ad adeptmedical@adept.co.nz

Per saperne di più e conoscere la gamma completa accedere ad adeptmedical.com



Fabbricante

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, Morningside
Auckland 1025, Nuova Zelanda