



RETROGRADE IR PLATFORM

AM0420 • AM0400 • AM0410
AM0460 • AM0450 • AM0470



Brochure produit

Surface de travail légère qui améliore l'organisation des gestes pendant les interventions par voie artérielle rétrograde. Positionnée au-dessus du patient, elle renforce en outre la sécurité de celui-ci.

Les systèmes Retrograde IR Platform sont des surfaces de travail modulaires conçues pour l'abord artériel dans les procédures guidées par l'image.

Leur conception réglable en hauteur permet à l'équipe de se positionner près du site d'abord tout en gardant le matériel immédiatement à portée de main devant le médecin et tout en améliorant également le confort du patient. Légère, radiotransparente et facile à installer au-dessus d'un patient en décubitus dorsal, la plateforme se verrouille en place en toute sécurité et prend en charge un large éventail de configurations interventionnelles.

Choisissez la largeur de plateforme qui convient à l'organisation de votre travail.

Retrograde IR Platform (AM0400) : sa surface large procure un vaste espace permettant de disposer les matériels nécessaires pour la procédure ; elle est idéale pour les configurations proposant un espace suffisant. C'est la solution parfaite lorsqu'il n'y a pas de problèmes de place.

Retrograde IR Platform – Narrow (AM0450) : sa surface étroite permet de s'écarter des équipements montés à l'arrière ; elle convient donc bien aux espaces de travail compacts.


En cas d'utilisation de matériels plus longs, les deux plateformes peuvent être équipées d'extensions en option. Ces extensions seront idéales pour les systèmes de cathéters sur fil-guide.



- ▶ Surface stable pour la gestion des fils-guides et des différents matériels, réduisant ainsi la nécessité de travailler sur le patient
- ▶ Améliore l'organisation des gestes en favorisant le travail en équipe côte à côte avec un accès au plus près du site opératoire
- ▶ Les pieds réglables en hauteur se verrouillent en place en toute sécurité, un gage de stabilité pendant l'intervention
- ▶ Plateforme légère en fibre de carbone radiotransparente pour une mise en place facile
- ▶ Différentes options de largeur et de longueur pour s'adapter aux spécificités des interventions et aux besoins en termes d'espace

Efficacité dans l'organisation du travail

Disponible en deux largeurs en fonction de la configuration des équipements. Travail en équipe côte à côte facilité grâce à une surface plane et stable au-dessus du patient.

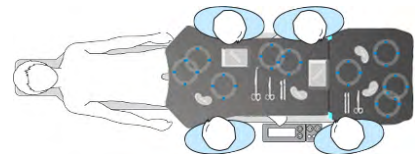


Extension en option

Augmentant la longueur utile de l'une ou l'autre plateforme, l'extension en option (Optional Extension) procure un espace supplémentaire qui permet de poser davantage de matériels et des dispositifs plus longs.



Plateforme verrouillable

La plateforme se verrouille dans la base avant (Front Base) de manière stable et fiable même si le patient est agité.

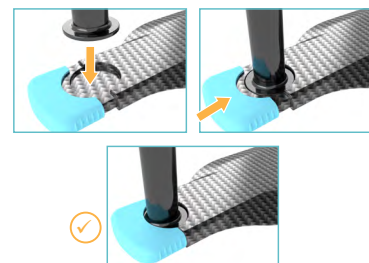

Codes produit



Retrograde IR Platform

AM0420

Retrograde IR Platform + Extension

AM0400

Retrograde IR Platform

AM0410

IR Platform Extension



Retrograde IR Platform – Narrow

AM0460

Retrograde IR Platform – Narrow
+ Extension

AM0450

Retrograde IR Platform – Narrow

AM0470

IR Platform Extension – Narrow

Applications

Dispositif conçu pour être utilisé en radiologie, cardiologie et neuroradiologie interventionnelles.



Caractéristiques techniques

Dispositif	Retrograde IR Platform + Extension	Retrograde IR Platform – Narrow + Extension
Dimensions	*Longueur extensible à 2 000 mm avec l'IR Platform Extension **Hauteur réglable de 190 à 406 mm (extension complète + rallonge de pied (Leg Extension))	*Longueur extensible à 1 864 mm avec l'IR Platform Extension – Narrow **Hauteur réglable de 181 à 401 mm (extension complète + rallonge de pied (Leg Extension))
Poids	Retrograde IR Platform : 8,7 kg IR Platform Extension : 3,6 kg	Retrograde IR Platform – Narrow : 5,3 kg IR Platform Extension – Narrow : 1,6 kg

N'hésitez pas à vous adresser à notre équipe pour de plus amples détails à l'adresse suivante : adeptmedical@adept.co.nz



Fabricant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande