



Resins for 3D printing





Resinas para impresión dental 3D

Compatible 4K, 8K, 12K & 14K



SeedPrint C&B A1

Seed Print C&B es una resina 3D dental especializada para la impresión de puentes y coronas provisionales. Destaca por su alta biocompatibilidad, asegurando seguridad y compatibilidad con los tejidos orales.

Disponible en envases de 500 g y en color A1, garantiza la integración perfecta de las coronas y puentes en la sonrisa del paciente.



SeedPrint C&B A2

Seed Print C&B es una resina 3D dental especializada para la impresión de puentes y coronas provisionales. Destaca por su alta biocompatibilidad, asegurando seguridad y compatibilidad con los tejidos orales.

Disponible en envases de 500 g y en color A2, garantiza la integración perfecta de las coronas y puentes en la sonrisa del paciente.



SeedPrint C&B A3

Seed Print C&B es una resina 3D dental especializada para la impresión de puentes y coronas provisionales. Destaca por su alta biocompatibilidad, asegurando seguridad y compatibilidad con los tejidos orales.

Disponible en envases de 500 g y en color A3, garantiza la integración perfecta de las coronas y puentes en la sonrisa del paciente.



SeedDB

Seed Denture Base, una resina 3D dental ideal para dentaduras biocompatibles de uso prolongado.

Destaca por su excepcional bioelasticidad, resistencia al desgarro y estabilidad dimensional sin contracción ni envejecimiento, asegurando un rendimiento duradero. Disponible en envases de 500 g, en color gingiva.



SeedCast

Seed Cast, diseñada exclusivamente para la fundición de piezas dentales, asegura una quema limpia para una fundición confiable en diversos modelos impresos en 3D.

Sin residuos al calcinar, presenta excelente adherencia entre capas y un relleno tipo cera para una calcinación precisa. Disponible en envases de 500 g, color verde.



Resinas para impresión dental 3D

Compatible 4K, 8K, 12K & 14K



SeedModel Ivory

Seed Print Model Ivory, resina 3D dental especializada para la impresión de modelos dentales de arcadas y modelos ortodónticos altamente complejos.

Cumple con los exigentes estándares de precisión, exactitud y rendimiento requeridos por los profesionales dentales. Disponible en envases de 1Kg, en color ivory.



SeedModel Gray

Seed Print Model Gray, resina 3D dental especializada para la impresión de modelos dentales de arcadas y modelos ortodónticos altamente complejos.

Cumple con los exigentes estándares de precisión, exactitud y rendimiento requeridos por los profesionales dentales. Disponible en envases de 1Kg, en color ivory.



SeedModel Ivory

Seed Print Model Ivory base agua, es una resina 3D dental especializada para la impresión de modelos dentales de arcadas y modelos ortodónticos altamente complejos.

Cumple con los exigentes estándares de precisión, exactitud y rendimiento requeridos por los profesionales dentales. Disponible en envases de 1Kg, en color ivory.



SeedModel Gray

Seed Print Model Gray base agua, es una resina 3D dental especializada para la impresión de modelos dentales de arcadas y modelos ortodónticos altamente complejos.

Cumple con los exigentes estándares de precisión, exactitud y rendimiento requeridos por los profesionales dentales. Disponible en envases de 1Kg, en color ivory.





SeedPrint C&B

Crown & Bridges

Resina dental
para impresión de
modelos provisionales
100% biocompatible.

Disponible en envases de 500 g,
en A1, A2 y A3.




LeafDental


SeedPrint C&B

A1, A2 y A3

100% biocompatible



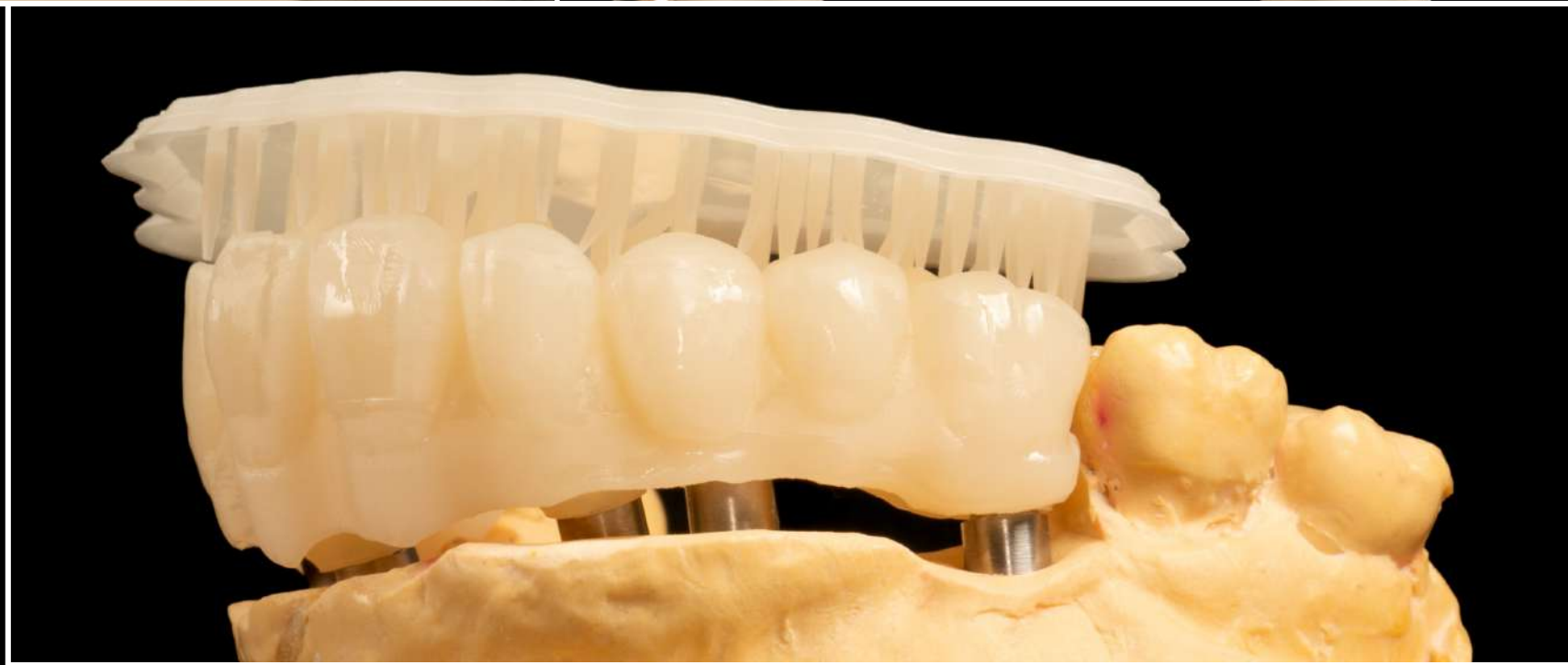

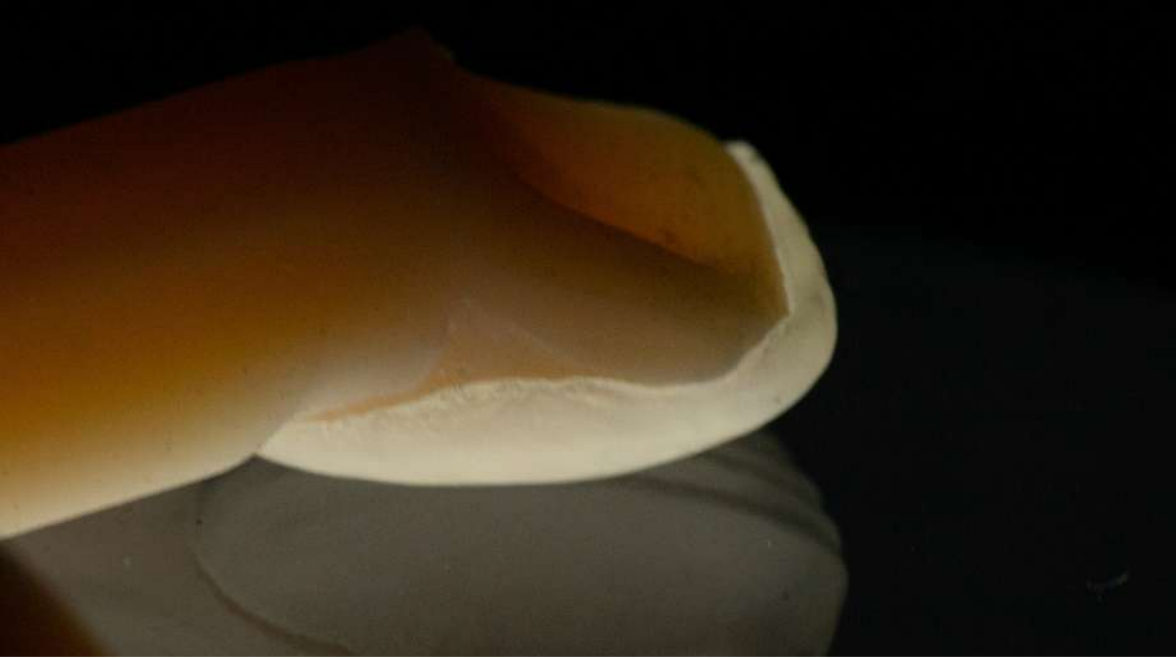

SeedPrint C&B

Resina para impresión 3D de prótesis provisionales

385nm / 405nm



Milos Miladinov

Seed DB

Denture Base

Resina 3D dental ideal
para dentaduras de uso prolongado.
100% biocompatible.

Disponible en envases de 500 g,
en color gingiva.




LeafDental



Seed DB Denture Base

100% biocompatible



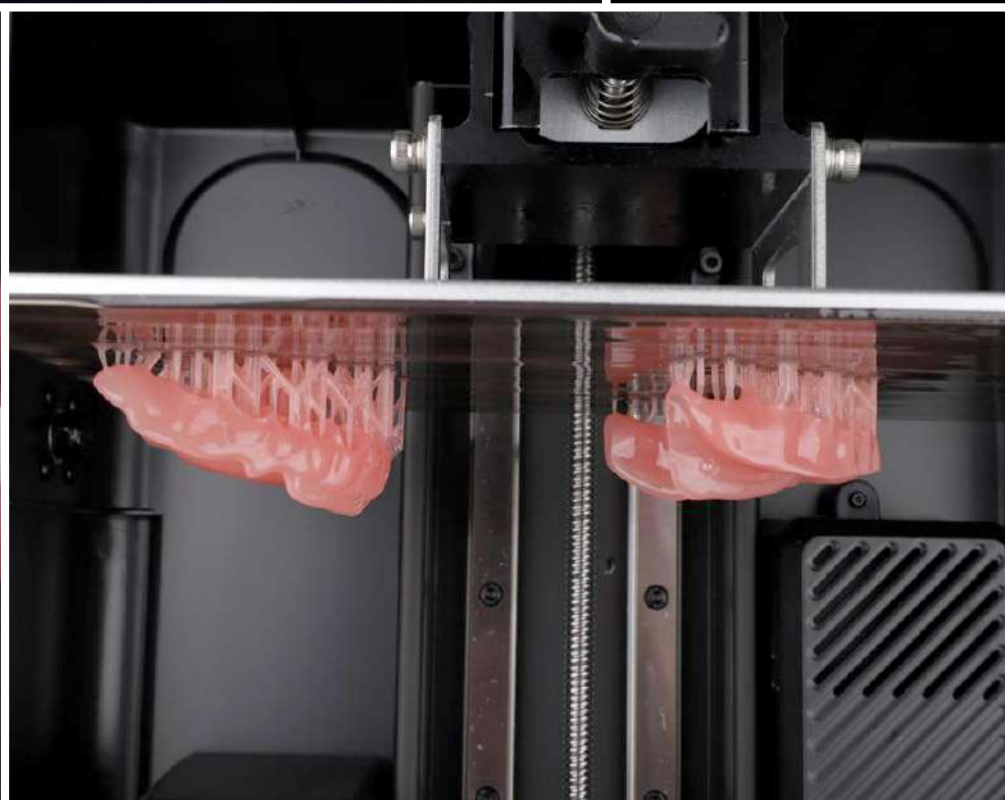

SeedDenture Base

Resina para impresión 3D de dentaduras de uso prolongado

385nm / 405nm





Seed Cast

Calcinable

Resina 3D dental ideal
para impresión de prótesis calcinables.

Disponible en envases de 500 g,
en color verde.



LeafDental

SeedCast

Resina calcinable
para prótesis dentales

500 g



TPD Erick Rincón



TPD Fernando González, Fusión Taller Dental



Seed Model


Resina 3D dental ideal
para impresión de modelos dentales
con gran detalle.



Disponible en envases de 1Kg,
en color ivory & gray.



LeafDental

SeedModel Ivory
Resina dental
para impresión de modelos
1Kg

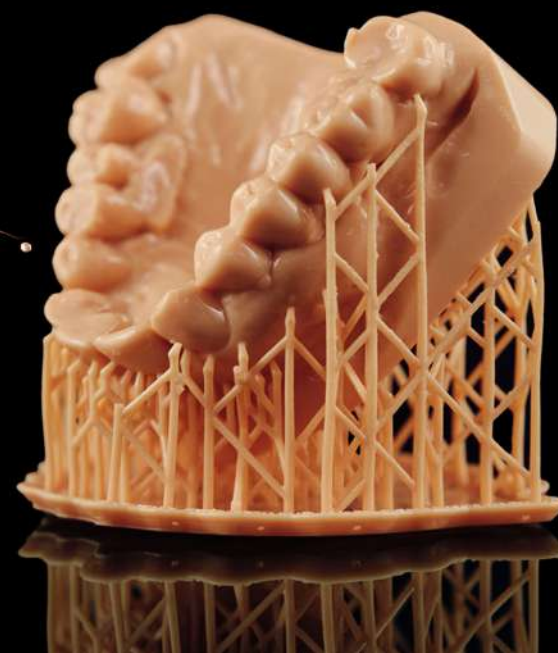

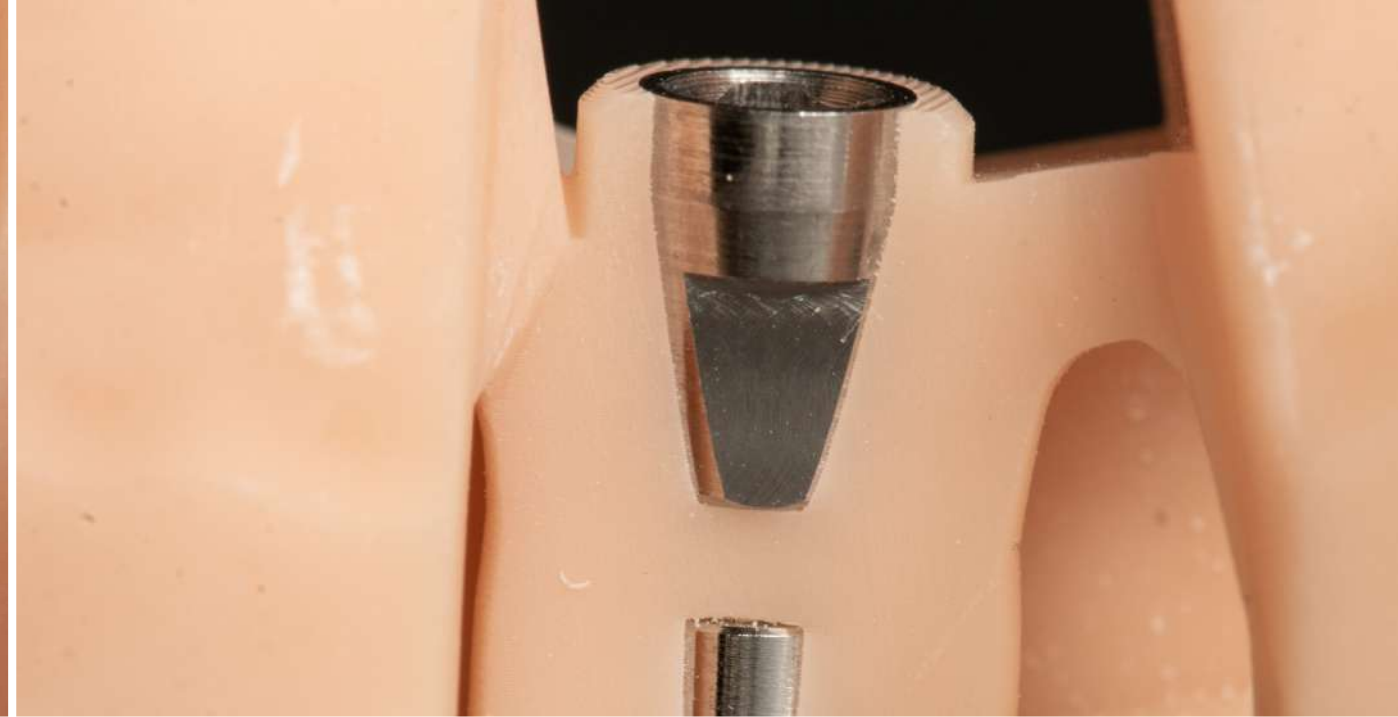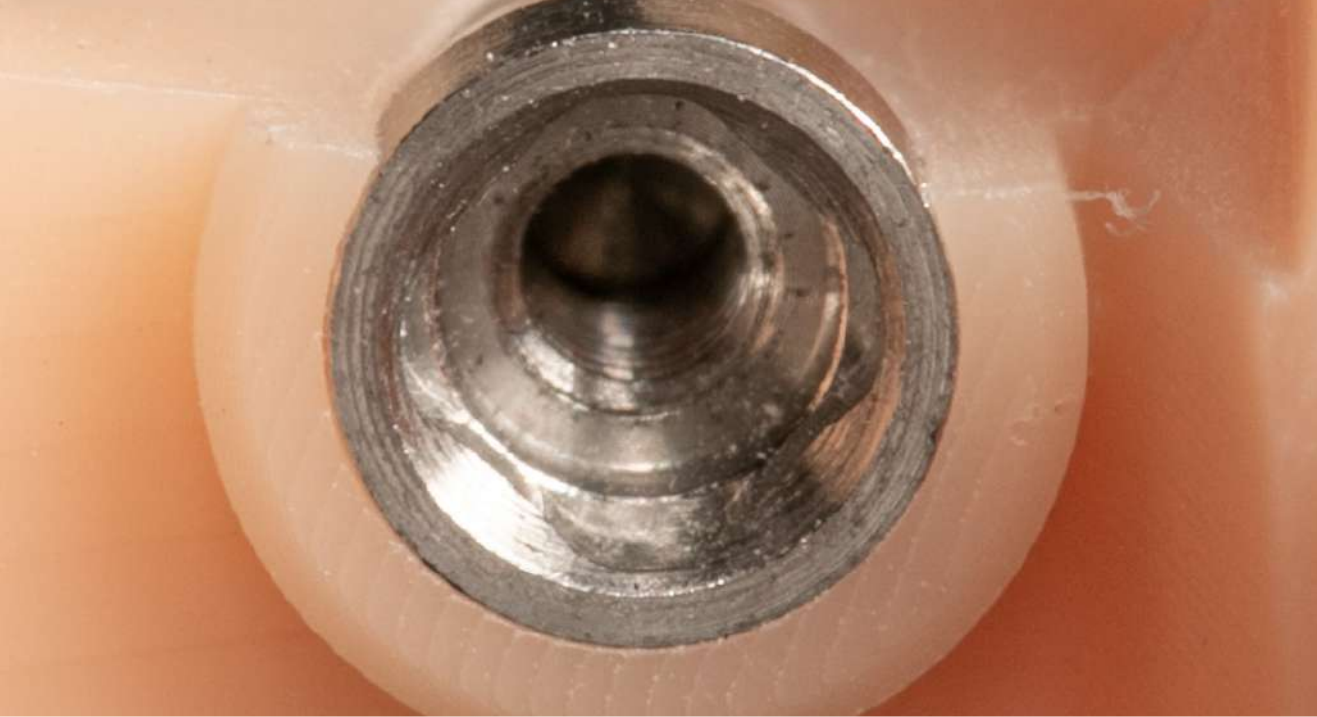




1Kg






Seed Model Gray es una resina dental para uso profesional.

Esta resina permite la creación de modelos con detalles muy finos y precisos, lo que es especialmente útil en aplicaciones que requieren alta definición.

Reduce el tiempo de trabajo y optimiza la eficiencia de impresión.

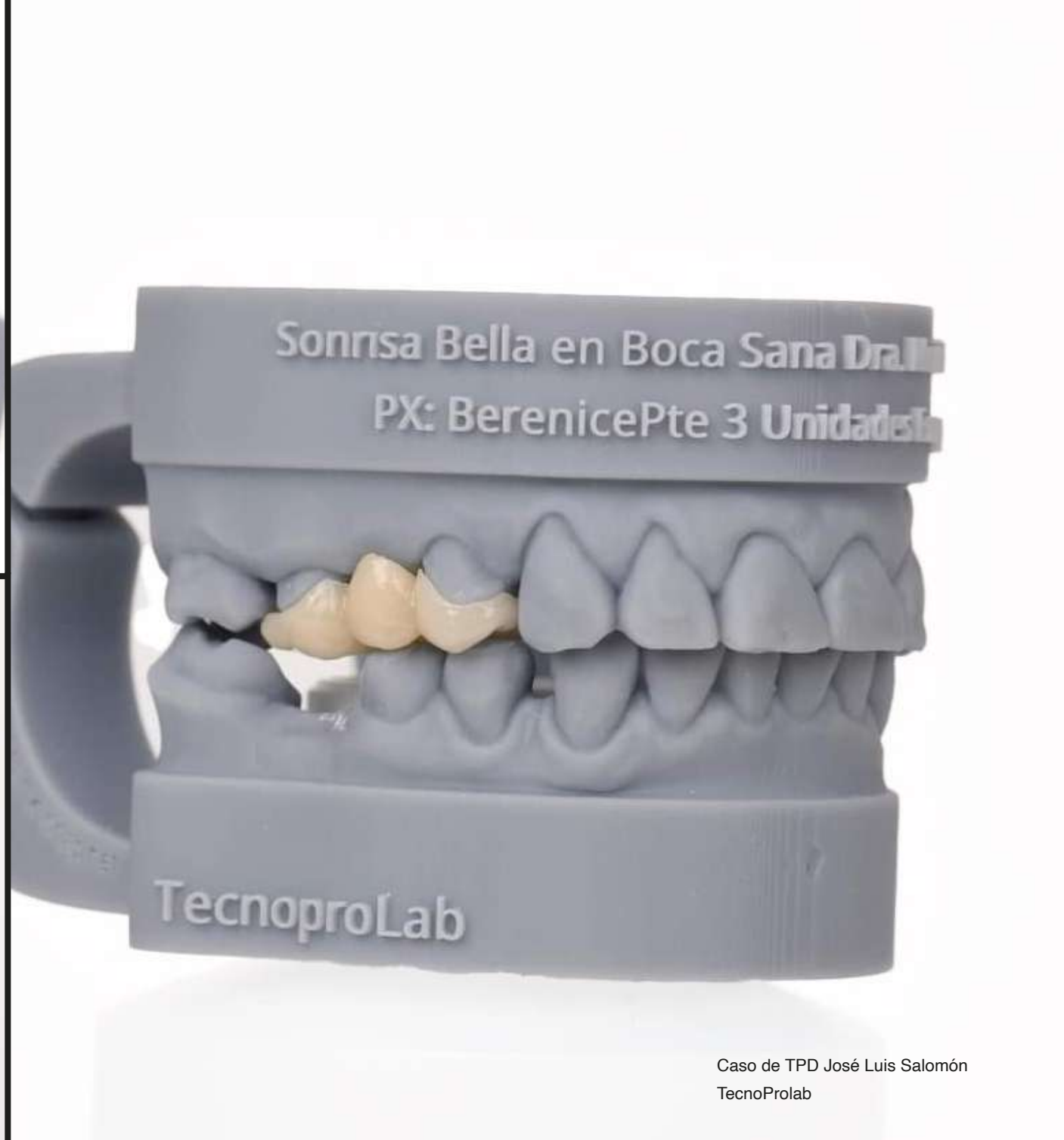

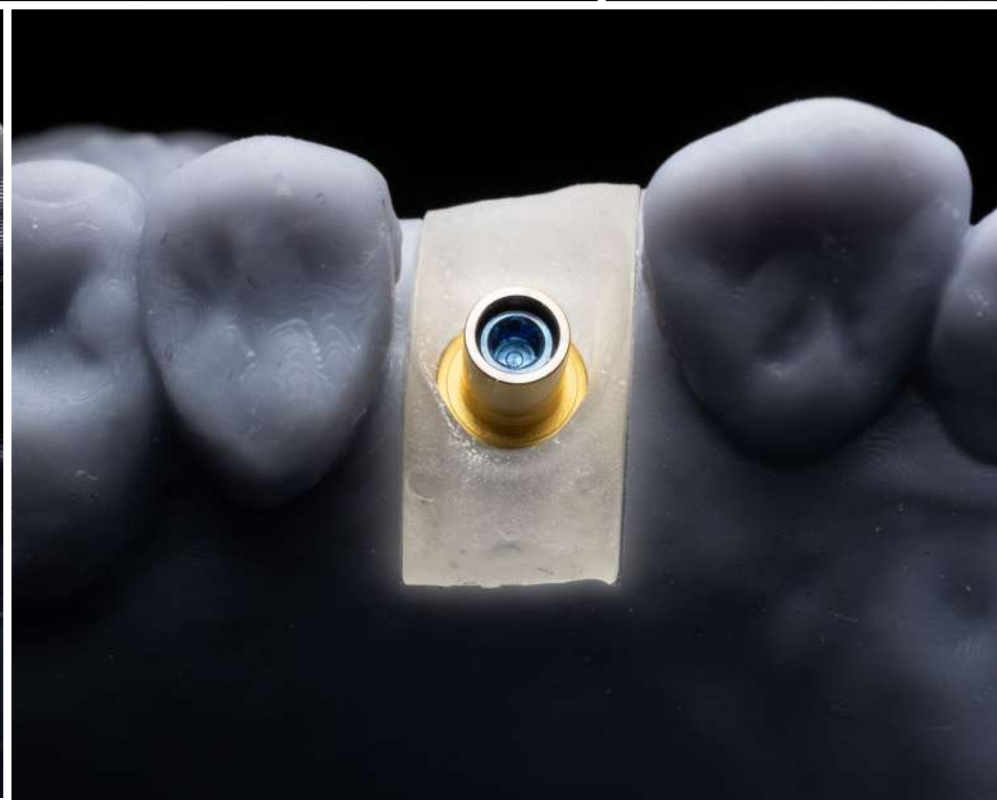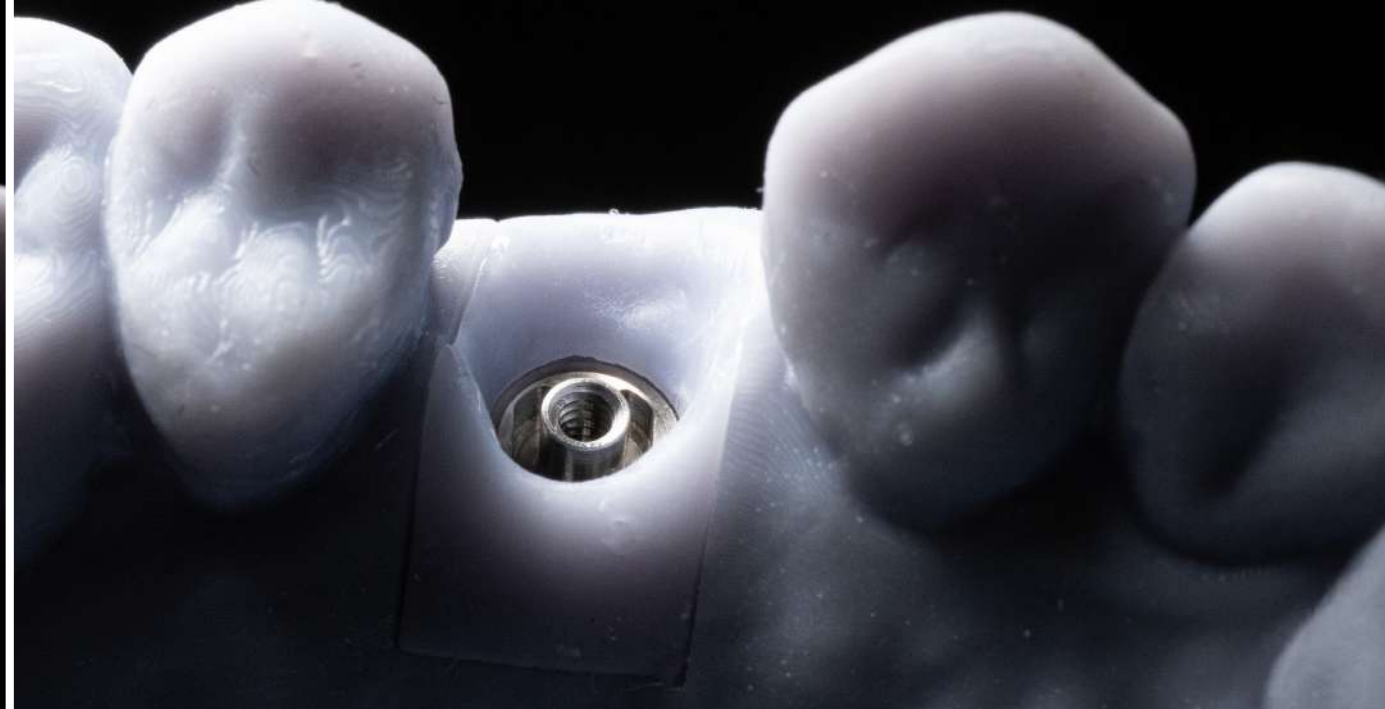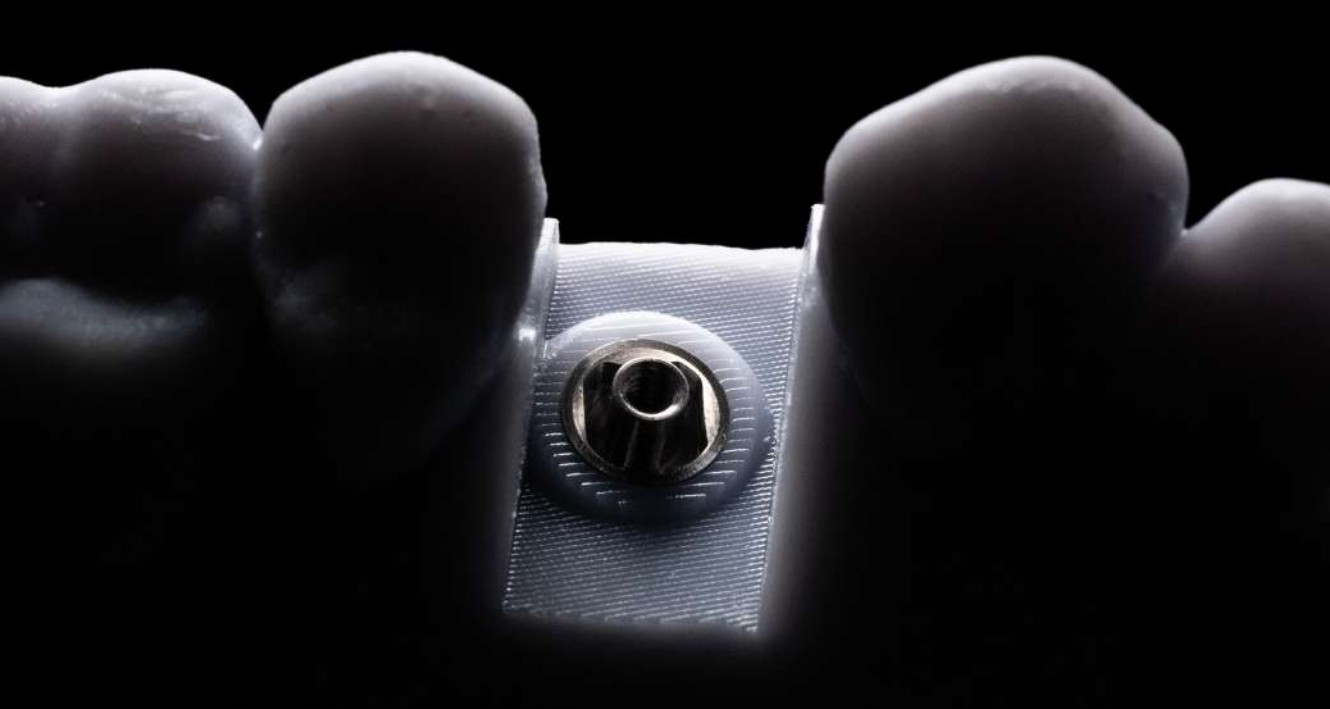



Seed Model Clear

Resina 3D dental ideal
para impresión de modelos dentales
con gran detalle.

Disponible en envases de 1Kg,
en color ivory & gray.



LeafDental



SeedModel

Resina 3D dental ideal
para impresión de modelos dentales
con gran detalle.

1Kg





LeafDental



SeedModel

Resina 3D dental ideal
para impresión de modelos dentales
con gran detalle.

1Kg





Componentes

Nuestras resinas están aprobadas por la FDA y las destinadas para uso directo en boca son 100% biocompatibles.

Monómeros y oligómeros


- **Metacrilato de metilo:** proporciona la base de la resina, asegurando una polimerización eficiente.
- **Metacrilato de etilo:** mejora la flexibilidad y la resistencia a la fractura.
- **Urethane dimetacrilato (UDMA):** mejora la resistencia a la abrasión y la dureza de la resina.
- **Bisfenol A glicidil metacrilato (BisGMA):** se utiliza por su alta viscosidad y capacidad para proporcionar una excelente resistencia mecánica y química.

Fotoiniciadores

- **Camforquinona y benzofenona:** permiten que las resinas se endurezcan de manera eficiente mejorando la velocidad y precisión del proceso de curado..

Aditivos

- **Plastificantes:** como el ftalato de difenilo, se utilizan para mejorar la flexibilidad de la resina.
- **Estabilizantes:** como el hidróxido de aluminio, se utilizan para prevenir la degradación de la resina.
- **Pigmentos:** como el dióxido de titanio, se utilizan para dar color a la resina.

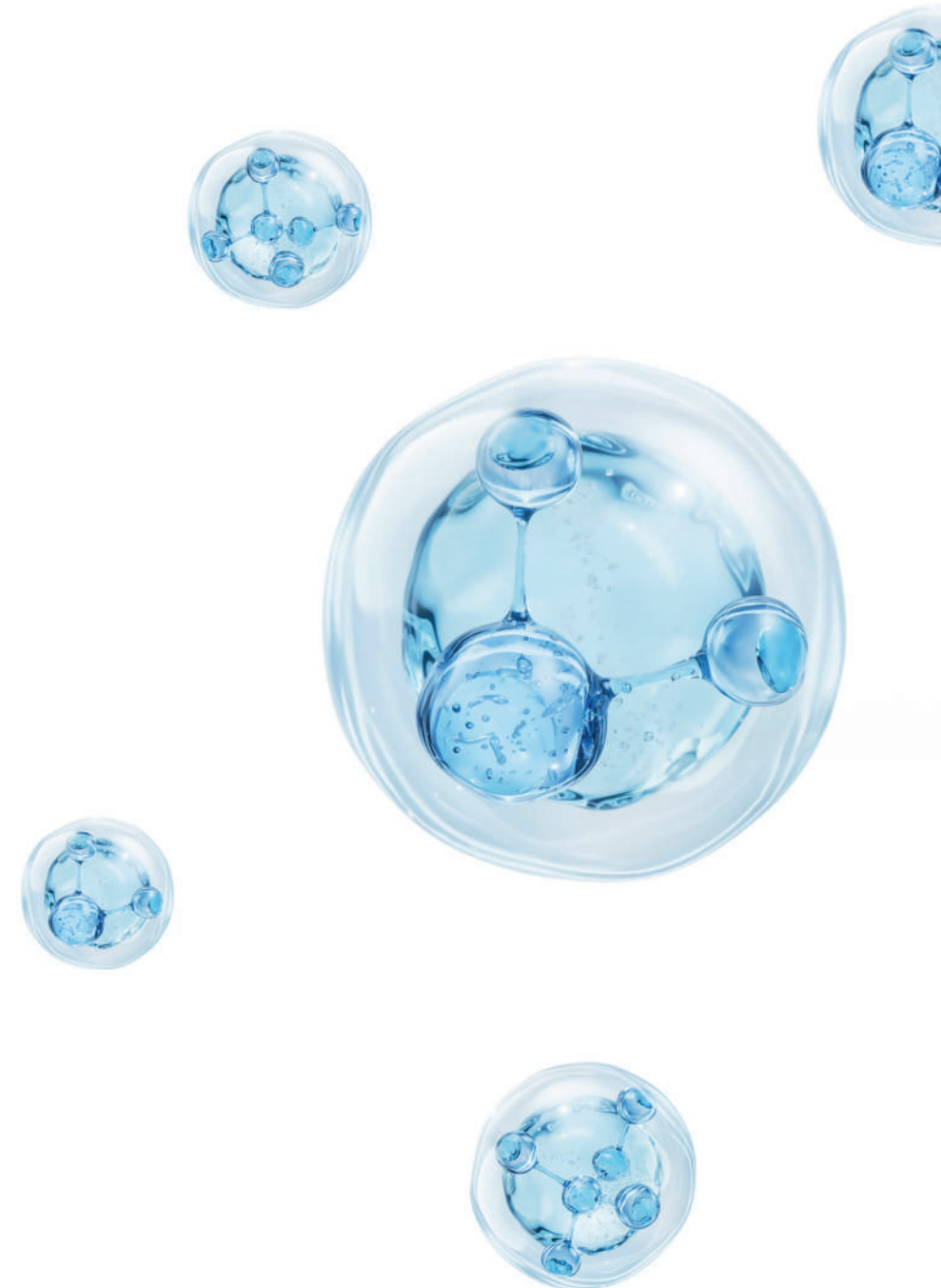The logo for the U.S. Food and Drug Administration (FDA), consisting of the letters "FDA" in a bold, blue, sans-serif font.



Parámetros de impresión 3D para Seed Print 2+ 14k

Seed Print 2+ 14 k	Seed Model Gray	Seed Model Ivory	Seed Print C&B	Seed Guide & Guard Crystal	Seed Print DB	Seed Model Ivory Clear	Seed Model Gray Clear	Seed Model Cast
Layer Thickness	0.10 mm	0.10 mm	0.05 mm	0.05 mm	0.05 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.05 mm
Rising Height	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Motor Speed	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s
Light off Delay	3 s	3 s	4 s	3 s	4 s	3 s	3 s	4 s
Initial Exposure	23 s	23 s	30 s	30 s	30 s	25 s	25 s	30 s
Bottom Layer Count	7	7	6	4	4	4	4	4
Exposure Time	2.7 s	2.7 s	2.3 s	2.5 s	2.3 s	2.5 s	2.5 s	2.8 s

Utilizar el FEP translúcido para óptimos resultados.



Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; engrandeceré tu nombre, y serás una bendición.

Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan;
¡por medio de ti serán bendecidas familias de la tierra!”

Génesis 12:2-3



Harvest Dental Products,
Brea, California 92821
United States of America

+1 714.674.7400 USA
www.harvestdental.com



Leaf Dental México,
Cuernavaca, Mor. 62050

+52 55.9222.5512 +52 55.5865.3951 Méx.
www.leafdental.store