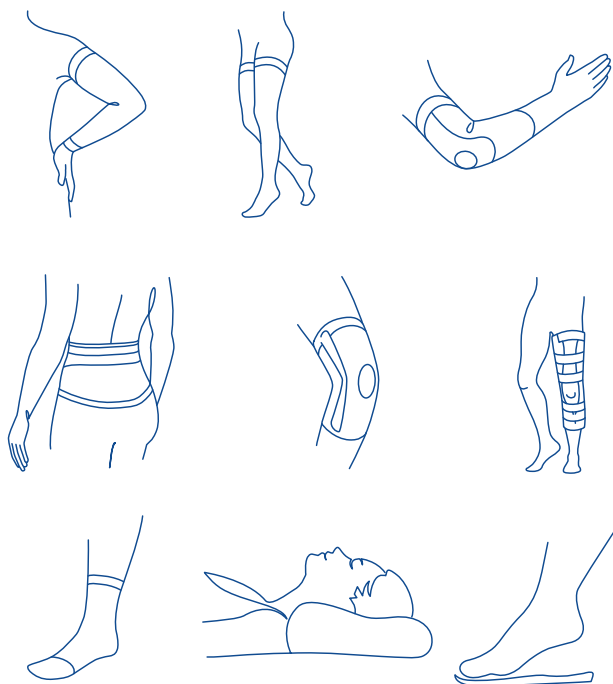


VERSORGUNGSHANDBUCH

Phlebologie · Lymphologie · Orthopädie



Schiebler

Medizinische Kompression
und Bandagen seit 1949.

Gute Versorgung ist mehr als ein Rezept.

Gute Produkte sind wichtig. Verlässliche Partner ebenso. Mit Schiebler unterstützen Sie Ihre Patienten mit wirksamen Lösungen – und können sich dabei auf starken Service verlassen.

Verordnen mit Sicherheit. Versorgen mit Vertrauen.

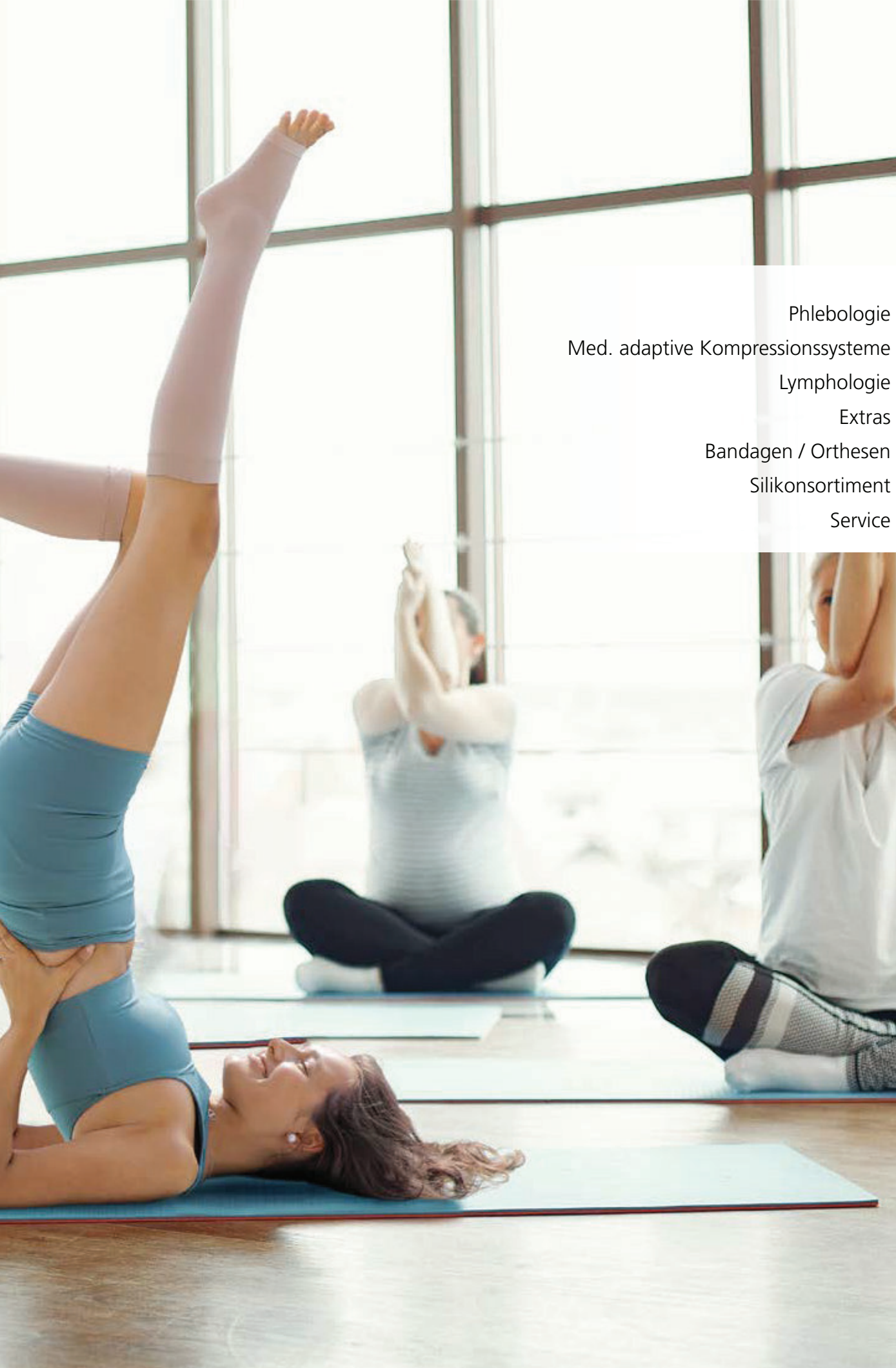
Seit 1949 steht der Name Schiebler für medizinische Kompression und Bandagen auf höchstem Niveau – entwickelt und gefertigt in Deutschland. Unsere Produkte verbinden therapeutische Wirksamkeit, verlässliche Qualität und angenehmen Tragekomfort. Dieses ausgewogene Zusammenspiel macht unsere Lösungen zu einem echten Gewinn – für Patienten und für die tägliche Arbeit im medizinischen Fachbereich.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit – und darauf, Sie und Ihre Patienten bestmöglich zu unterstützen.



Persönlich, schnell und unkompliziert sind wir für Sie da: Montag bis Freitag, 7.45 – 16.30 Uhr unter 0461 978999200 oder jederzeit per E-Mail an info@schiebler.de





THEMEN

Phlebologie	ab 06
Med. adaptive Kompressionssysteme	ab 16
Lymphologie	ab 22
Extras	ab 28
Bandagen / Orthesen	ab 30
Silikonsortiment	ab 58
Service	ab 60

Zusammen bringen wir die Freude am Leben zurück.

In unserer Flensburger Manufaktur entstehen medizinische Hilfsmittel mit Sorgfalt, Erfahrung und technischem Know-how. Für Produkte, die den Alltag von Patientinnen und Patienten spürbar verbessern.

Hoch hinaus. Mit modernster Technik und Fingerspitzengefühl.

Sie erwarten beste therapeutische Wirksamkeit und hohen Tragekomfort einer zuverlässigen Versorgung. Wir auch. Und so entwickeln wir in enger Abstimmung mit Mediziner*innen und dem Fachhandel Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Mit modernster Technik und handwerklicher Präzision werden unsere Produkte umgesetzt und stetig weiter entwickelt. Diese Kombination aus jahrzehntelangem Fachwissen, Flexibilität, Innovation und Liebe zum Detail macht den Unterschied. Sie sorgt dafür, dass Versorgung von Schiebler mehr ist als nur ein Produkt.



Hand in Hand aus Ihrer Manufaktur in Flensburg: Vom Maschinenführer bis zur Näherin sind wir für Sie da.



Innovationen seit 1949

Seit 1949 entwickeln wir bei Schiebler hochwertige medizinische Hilfsmittel – mit dem Anspruch, Versorgungsqualität kontinuierlich weiterzudenken. Unsere erste patentierte Lösung stammt aus dem Jahr 1954 – und der Innovationsgeist treibt uns zum Wohle Ihrer Patienten bis heute an.

www.schiebler.de/unternehmen



Verlässliche Qualität

Wir setzen auf wirksame Kompression, funktionale Konstruktion und schnitttechnische Präzision. Ob 3D-Wellengestrick oder Zusatzdetails in der Strumpfhose – unsere hochwertigen Produkte bieten zuverlässige Unterstützung im Versorgungsalltag und geben Patientinnen und Patienten ein gutes Gefühl.

www.schiebler.de/



Hilfe nach Maß

Wenn Standard nicht passt: Unsere Manufaktur fertigt individuelle medizinische Hilfsmittel – genau abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Patientinnen und Patienten. In Strickerei und Näherei verbinden qualifizierte Fachkräfte modernste Technik mit handwerklichem Können – für höchste Passgenauigkeit und optimalen Therapieerfolg.

shop.schiebler.de



Digitales vermessen

Die Schiebler 3D-Vapp macht Ihr Smartphone zum digitalen Maßband. Vermessen Sie rundgestrickte Kompressionsstrümpfe – für mehr Effizienz und Komfort in der Versorgung. Berührungslos, präzise und schnell: Maßband aus, Zukunft an und „let's go“ mit der 3D-Vapp in die digitale Vermessung.



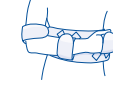
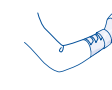
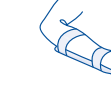

www.schiebler.de/vapp









Orthesen und Bandagen für Hand und Arm. Stabilisierend. Funktionell. Komfortabel.

Ob bei Verletzungen, Überlastungen oder chronischen Beschwerden – unsere Orthesen und Bandagen bieten gezielte Unterstützung im Alltag und bei der Therapie. Bandagen wirken stabilisierend und entlastend, während Orthesen zusätzlich durch ihre höhere Stützfunktion überzeugen.

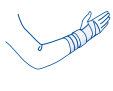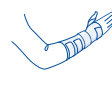Indikationen*

Reizzustände (posttraumatisch / postoperativ)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Instabilität (neurologisch)				↓		
Präoperativ			↓		↓	↓
Arthrose / Arthritis	↓	↓		↓	↓	↓
Karpaltunnelsyndrom				↓	↓	↓
Frakturen/Luxation			↓			
Prävention / Rezidivprophylaxe	↓					
Distorsion / Kontusion		↓			↓	↓
Tendovaginitis, Tendinitis					↓	↓
						
	Para Epi- condylitis**	Para Epidur	Schulterfix- Bandage	Arm- und Handgelenk	Para Carpal offen	Para Carpal geschlossen
HVN	05.08.01.1003	23.08.04.0013	23.09.01.0021	05.07.02.0073	23.07.02.3002	23.07.02.3002
Mehr auf Seite	32	32	33	33	34	34

Indikationen*

Reizzustände (posttraumatisch / postoperativ)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Instabilität (neurologisch)		↓				↓
Präoperativ	↓		↓	↓		↓
Arthrose / Arthritis	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Karpaltunnelsyndrom	↓	↓	↓	↓		
Prävention / Rezidivprophylaxe					↓	
Distorsion / Kontusion	↓	↓			↓	↓
Tendovaginitis, Tendinitis	↓	↓			↓	↓
						
	Manu Duplex	Handgelenk-/ Mittelhand.	Para Manu	Para Manu m. Daumenfix	Manu Dur	Para Dau- menschiene
HVN	23.07.02.4043	05.07.02.0038	23.07.02.0003	23.07.02.2005	05.07.02.0107	23.07.01.1012
Mehr auf Seite	35	35	36	36	36	37

Para Epicondylitis

Die klassische Ellenbogen-Bandage.



Indikationen

- zur Behandlung von Erkrankungen im Ellenbogenbereich
- bei arbeitsbedingter Überlastungstendinose (Golfarm, Tennisarm)
- Gelenkergüsse und Schwellungen bei Arthrose und Arthritis
- postoperative und posttraumatische Reizzustände

Wirkstrategie

- Epikondylen werden mit Silikonpelotte entlastet, die schmerzempfindliche Zone bleibt stoßgeschützt
- Schmerz- und Schwellungsreduktion durch Kompressionsgestrick

Schiebler-Vorteile

- auch als Maßanfertigung
- atmungsaktives 3D-Wellengestrick stabilisiert und fühlt sich auf der Haut extra soft an
- passt sich durch herausragenden Längszug anatomiegerecht an

HVN 05.08.01.1003


REF 19200X

Größe	U (cm)	Höhe
0	16,5 - 18,5	25
1	18,5 - 20,5	25
2	20,5 - 22,5	26
3	22,5 - 24,5	26
4	24,5 - 26,5	26
5	26,5 - 28,5	27
6	28,5 - 30,5	27

Zirkulärgurt: ohne, mit

Farben: Haut, Gletscher-Blau, Neon, Night

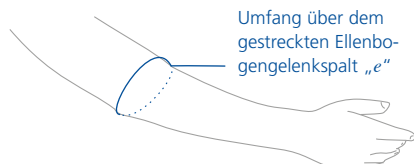Material: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan



Para Epidur Spange

Die klassische Ellenbogen-Bandage.



Indikationen

- bei Tendopathien im Ellenbogenbereich verursacht durch muskuläre Überlastung (sog. Tennisarm, Golfarm).
- Konservativ/postoperativ

Wirkstrategie

- Korrektur der fehlerhaften Muskelzugrichtung
- Propriozeptiver Spangendruck mit reflektorischer Tonusminderung
- Friktionsmassage
- Schmerzreduktion

Schiebler-Vorteile

- rutschfreier Sitz auch bei sportlichen Aktivitäten (Golf, Tennis, etc.)
- beidseitig (links/rechts) einsetzbar
- durch zonenverstellbaren Klettverschluss druckregulierbar


HVN 23.08.04.0013

REF 18160X

Größe	U (cm)
XS	22 - 23
S	24 - 25
M	26 - 27
L/Univ.	28 - 30
XL	31 - 34
XXL	35 - 38

Farben: Blau-Weiß

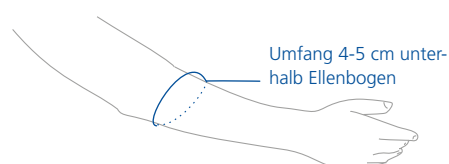Material: 72 % Polyamid, 20 % Baumwolle, 8 % Elasthan



Schulterfix-Bandage

Die anpassbare Schulter-Fix-Bandage.



Indikationen

- Insuffizienz des Bänder- / Kapselapparates nach Trauma oder habitueller Schulterluxation
- Immobilisierung des Acromioclaviculargelenkes nach Fraktur, Subluxation oder Distorsion
- Verkeilter Oberarmkopfbruch

Wirkstrategie

- Immobilisierung des Schultergelenks durch Fixierung von Ober- und Unterarm

Schiebler-Vorteile

- schnelles, individuelles, einfaches Anlegen durch Klettverschlüsse
- kein zusätzlicher Schultergurt notwendig
- keine Bewegungseinschränkung der Hand
- weiches Material für hohen Tragekomfort über den ganzen Tag

HVN 23.09.01.0021


REF 79211X

Größe	U (cm)	Höhe
S	80	17
M	100	17
L	130	17
XL	150	17

Ausführung: normal, mit Schultergurt

Farbe: Marineblau

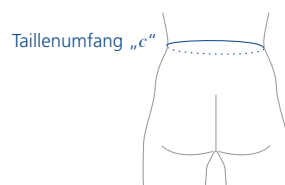Material: 68 % Polyamid, 31 % Baumwolle, 1 % Elasthan



Arm- und Handgelenkschiene

Die elastische Arm- und Handgelenk-Bandage.



Indikationen

- akute und chronische Sehnscheidenentzündung
- Handgelenksdistorsionen und -kontusionen
- Gipsnachbehandlung
- zur Stabilisierung des Handgelenks bei neurologischen Krankheitsbildern (Lähmungen der Handnerven, neurologische Engpasssyndrome, wie z.B. Carpal tunnelsyndrom)

Wirkstrategie

- Belastungsminderung von Handwurzelknochen, Gelenkkapsel und Bändern
- Fixierung der Handwurzel bei weiterhin möglicher Greiffunktion
- extra lange Bandage hält die Hand in entspannter Schonhaltung

Schiebler-Vorteile

- Stabilisierung durch individuell formbare Verstärkungsschiene
- alternativ mit Einhandschnürung
- weiche, luftdurchlässige Materialkombination für langen Tragekomfort
- keine Bewegungseinschränkung der Finger

HVN 05.07.02.0073

REF 3432X


Größe	U (cm)	Höhe
XS	11,5 - 14,0	23,5
S	14,0 - 16,5	23,5
M	16,5 - 18,5	23,5
L	18,5 - 20,5	23,5
XL	20,5 - 23,0	23,5

Ausführung: Normal oder Einhandschnürung

Seite: rechts, links

Farben: Haut, Schwarz, Marine

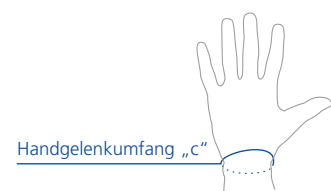Material: 49 % Baumwolle, 43 % Elasthan, 8 % Polyamid



Para Carpal (offen)

Die offene Handgelenksorthese mit Fingerauflage.



Para Carpal (geschlossen)

Die geschlossene Handgelenksorthese mit Fingerauflage.



Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis in schwerer Form
- Handgelenksarthrose
- Distorsionen nach Frakturen und Luxationen
- nach Operationen im Mittelhand-, Handgelenk- und Handwurzelbereich

Wirkstrategie

- dorsale Fixierung der Hand und der Finger
- Orthese stabilisiert das Handgelenk und die Fingergelenke
- beugt Kontrakturen vor.

Schiebler-Vorteile

- individuell formbare Stützscheibe
- deckt Hand und Finger gleichzeitig ab – und erlaubt später eine gezielte Freigabe für effiziente Therapiefortschritte
- einfaches An- und Ablegen
- breite, weiche Fixierungsbänder zur positionsgerechten Fixierung


HVN 23.07.02.3002

REF REF-Nr.: 18560X
Angabe rechts/links erforderlich

Gr.	U (cm)	Höhe
S	13-17	31
M	17-21	35
L	21-25	38
XL	25-30	38

Farbe: Marineblau

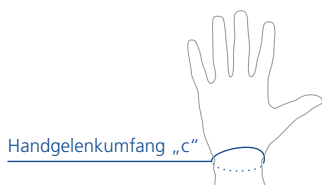Material: 77 % Polyamid, 11 % Baumwolle, 12 % sonstige Fasern



Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis in schwerer Form
- Handgelenksarthrose
- Distorsionen nach Frakturen und Luxationen
- nach Operationen im Mittelhand-, Handgelenk- und Handwurzelbereich mit Ruhigstellung des Handgelenks sowie Fingerfixierung

Wirkstrategie

- Stabilisiert die gesamte Hand vom Unterarm bis in die Finger und verhindert ungewollte Bewegungen.
- Schmerzreduktion

Schiebler-Vorteile

- deckt Hand und Finger gleichzeitig ab – und erlaubt später eine gezielte Freigabe für effiziente Therapiefortschritte
- großer Klettverschluss macht einfaches Anlegen mit nur einer Hand möglich
- weiches Material und die offen gestalteten Zonen für angenehmes Tragen sorgt.

HVN 23.07.02.3002

REF 1857X

Gr.	U (cm)	Höhe
S	13-17	29
M	17-21	33
L	21 - 30	36

Farbe: Marineblau

Material: 65 % Polyamid, 19 % Baumwolle, 16 % sonstige Fasern



Manu Duplex

Die anpassbare Handgelenkorthese.



Elastische Handgelenk-Mittelhandbandage



Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis (Sehnen-scheidenentzündung)
- Allgemein nach Zerrungen und Abnahme von Gipsverbänden zur Ruhigstellung
- Prä- sowie postoperativer Einsatz
- Rheumatische Beschwerden
- Unterschiedliche Handgelenkschmerzen und -verletzungen

HVN 23.07.02.4043

REF 3750X

Länge: kurz, 18cm; normal, 23,5 cm

Größen	U (cm)
XS	11,5-14,0
S	14,0-16,5
M	16,5-18,5
LUniv.	18,5-20,5
XL	20,5-23,0

Seite: rechts, links

Farbe: Schwarz

Material: 44 % Polyester, 37 % Polyamid, 11 % Polypropylen, 8 % Sonstiges

Wirkstrategie

- Immobilisierung in zwei Bewegungsrichtungen.
- Belastungsminderung von Handwurzelknochen, Gelenkkapsel und Bändern
- Fixierung der Handwurzel bei weiterhin möglicher Greiffunktion

Schiebler-Vorteile

- Daumen/Finger bleiben frei beweglich
- formbare Stützschiene zur Ruhigstellung von Arm und Handgelenk
- breites Fixierungsband gewährleistet die positionsgerechte Bandagenfixierung
- keine Bewegungseinschränkung der Finger



Indikationen

- akute und chronische Sehnen-scheidenentzündung
- Karpaltunnelsyndrom
- Handgelenksdistorsionen und -kontusionen
- Gipsnachbehandlung
- zur Stabilisierung des Handgelenks bei neurologischen Krankheitsbildern
- Lähmung von Hand- und Fingernerven
- Arthrose

HVN 05.07.02.0038

Angabe rechts/links erforderlich.

REF 34310X

Größen	U (cm)
XS	11,5-14,0
S	14,0-16,5
M	16,5-18,5
L	18,5-20,5
XL	20,5-23,0

Länge 18 cm
Seite: rechts, links

Farbe: Haut, Schwarz, Marineblau

Material: 49 % Baumwolle, 43 % Elasthan, 8 % Polyamid

Wirkstrategie

- Fingerfixierung
- Stabilisierung durch individuell formbare Verstärkungsschiene

Schiebler-Vorteile

- formbare Alu-Stützschiene zur Immobilisierung von Handgelenk und Fingern
- breites Fixierungsband gewährleistet die positionsgerechte Fixierung der Bandage
- weiche, luftdurchlässige Materialkombination auch für langen Tragekomfort.
- in drei Farben und fünf Größen



Para Manu

Die anpassbare Handgelenkorthese.



Manu Dur

Bandage zur Stabilisierung des Handgelenks.



Indikationen

ohne Daumenfixierung:

- Distorsionen (Verstauchungen)
- Karpaltunnelsyndrom
- zur Ruhigstellung als Gipserersatz nach Operationen
- Tendovaginitis
- Sehnen- und Gelenkverletzungen
- Arthrose und rheumatische Arthritis

inkl. Daumenfixierung:

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Handgelenkes
- Reizzustände des Daumengrundgelenkes
- Daumensattelgelenkverletzungen
- Tendovaginitis
- Bandverletzungen
- Lähmungsfolgen (Radialis Parese)

Wirkstrategie

- Stabilisierung, Bewegungseinschränkung und Fixierung der Handwurzel

Schiebler-Vorteile

- individuell anpassbares Schienenelement zur Ruhigstellung des Handgelenks
- alternativ inkl. Daumenfixierung

- breites Fixierungsband gewährleistet positionsgerechte Bandagenfixierung

HVN 23.07.02.0003

[REF] 3437X

bzw. 23.07.02.0005 (mit Daumenfixierung)

[REF] 3438X

Größe	U (cm)	Länge
XS	bis 12	20,5
S	12,5 - 15	20,5
M	15 - 18	20,5
L	18 - 20	20,5
XL	20	20,5

Daumenfixierung:

ohne, mit

Ausführung: normal (nur ohne Daumenfix) und light

Seite: rechts, links

Farbe: Schwarz

Material: 49 % Polyamid, 23 % Polyurethan, 11 % Baumwolle, 9 % Polyester, 7 % Elasthan

Indikationen

- Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- degenerative Gelenkserkrankungen (Arthrose)
- unterschiedliche Handgelenksschmerzen und Handgelenksverletzungen
- rheumatische Beschwerden

Wirkstrategie

- Stabilisierung und Belastungsminderung zur Handfunktionswiederherstellung
- individuell anpassbarer Innenhandstabilisator
- Ulnakopffentlastung

Schiebler-Vorteile

- Daumen/Finger bleiben frei beweglich
- Entlastung mittels Silikonpelotte
- individuelle Druckstärke mittels breitem Fixierband

HVN 05.07.02.0107

[REF] 35400X

Größe	U (cm)	Länge
1	13,5 - 14,5	17
2	14,5 - 15,5	17
3	15,5 - 16,5	17
4	16,5 - 17,5	17
5	17,5 - 18,5	17
6	18,5 - 19,5	17

Farbe: Gletscher/Blau, Haut, Night

Seite: rechts, links

Material: 68 % Polyamid, 32 % Elasthan



Para Daumenschiene

Die anpassbare Daumenschiene.



Indikationen

- Daumenfraktur
- Verletzungen, Bandinstabilitäten, Reizzustände im Daumengrund- und Daumensattelgelenkbereich
- Tendopathie

HVN 23.07.01.1012

REF 34390X

Größe	U (cm)	Länge
S	bis 17	14,5
M	17 - 19	15
L	über 19	16

Wirkstrategie

- Immobilisierung des Daumengrund- und Sattelgelenks
- Bewahrung der Greifbeweglichkeit

Farbe: Schwarz

Material: 87 % Polyester,
10 % Polyamid, 3 % Elasthan

Schiebler-Vorteile

- **anpassbare Stabilisierungsschiene**
- breites Fixierungsband gewährleistet die positionsgerechte Bandagenfixierung



Uns geht es gut mit der
Para Vertebral light Maternity.

Während der Schwangerschaft stabilisiert und entlastet die Para Vertebral light Maternity den Lenden- und Bauchbereich. Das angenehm weiche Material, die einfache Justage und die kaum aufragende Konstruktion machen den Alltag der werdenden Mutter angenehmer.



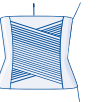

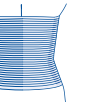
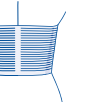
Mehr Informationen auf Setie 41






Orthesen und Bandagen für Wirbelsäule und Hals – Stabilität mit System.

Unsere Wirbelsäulen- und Halsorthesen sorgen für gezielte Stabilisierung bei degenerativen, posttraumatischen und postoperativen Beschwerden. Sie entlasten die Strukturen, fördern die Heilung und unterstützen eine natürliche Körperhaltung – für hohen Komfort und zuverlässige Funktion im Alltag und in der Therapie.

Indikationen*

Prävention/Prophylaxe	↓					
nachoperative Versorgung im Abdomen-/Thoraxbereich					↓	↓
Schmerzen im LWS-Bereich	↓		↓	↓	↓	↓
Rippenbruchfraktur/-prellung					↓	↓
Disbalancen, muskulär	↓	↓				
Prolaps/Protrusion		↓				
Osteoporose		↓	↓			
Gefügestörungen (Osteodondrose, Spondylarthrose)		↓			↓	
						
	Para Lumbal Soft	Para Lumbal Strong	Para Vertebral Light	Para Vert. Light Mater.	Abdominal-Bandage	Rippenbruch-Bandage
HVN	23.14.03.2034¹	23.14.04.0005	23.14.03.1010²	23.14.03.1010	05.11.01.0031	05.11.01.0032
Mehr auf Seite	40	40	41	41	42	42

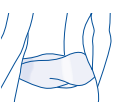Indikationen*

Cervicalsyndrom		↓	↓
Osteochondrose		↓	↓
Subluxation durch Trauma		↓	↓
Vertigo		↓	↓
nach operativen Eingriffen		↓	↓
Ruhigstellung (neuro)			↓
Tendopathien/Myalgien	↓		
ISG-Instabilität/-Blockierung	↓		
ISG-Arthrose	↓		
Morbus Bechterew/-Scheuermann			
			
	ISG-Orthese	Para Block Cervicalstütze	Para Cervical-stütze
HVN	23.11.01.1005	23.12.03.0020	23.12.03.0021
Mehr auf Seite	43	45	45

* Auszug möglicher Indikationen. Weitere Informationen auf www.schiebler.de ** auch als Maßanfertigung erhältlich ¹ Femina 23.14.03.2035 ² mit Pelotte 23.14.03.2022

Para Lumbal Soft

Die aktive Rückenstützbandage mit Pelotte.



Para Lumbal Strong

Die aktive Rückenstützorthese mit Pelotte.



Indikationen

- bei schmerzhaften Verschleißerscheinungen der Lendenwirbelsäule
- allgemein bei Schwächen und Fehlfunktionen der Rumpfmuskulatur
- zur postoperativen Behandlung
- Prophylaxe bei arbeitsbedingter Belastung und Vorschädigung der Wirbelsäule

Wirkstrategie

- Friktionsmassage mittels Silikonprofilpelotte
- Entspannung des Spinalkanals
- Schmerz- und Schwellungsreduktion durch Kompressionsgestrick
- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule

Schiebler-Vorteile

- kausal-lumbale Therapie mit Pelotte und stabilisierendem Flachstrick-Gewebe
- Eingearbeitete Korsettstäbchen zur Stabilisierung des Bauchbereichs
- bis 140 cm Taillenumfang
- in geradem und tailliertem Schnitt lieferbar

HVN 23.14.03.2034 Man
23.14.03.2035 Femina

REF 7795X


Gr.	U (cm)	Höhe
1	70 - 80	M:23 F:27
2	80 - 90	M:23 F:27
3	90 - 100	M:23 F:27
4	100 - 110	M:23 F:27
5	110 - 120	M:23 F:27
6	120 - 130	M:23 F:27
7	130 - 140	M:23 F:27

Ausführung: Universal/Man, Femina

Farben: Gletscher-Blau, Haut, Schwarz, Marineblau

Material: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

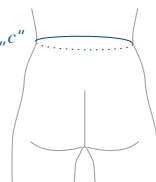Taillenumfang „c“



Indikationen

- zur postoperativen Behandlung nach Bandscheibenoperationen
- allgemeine Stabilisierung nach Operationen
- bei Schwächung der Muskulatur
- zur Lumbalschmerzbehandlung bei Osteoporose

Wirkstrategie

- Entlordosierung zur Entlastung der LWS
- starke Rückenschiene zur Übertragung von Bewegung und Lasten auf das Becken
- Reduktion rotatorischer Bewegungen
- Korrektur der Lendenlordose zur biomechanischen Entlastung

Schiebler-Vorteile

- einfaches Anlegen mittels Handschlaufe
- stabilisierendes, massierendes Flachstrick-Gewebe
- bis 140 cm Taillenumfang
- alternative, biegsamere Stabilisierungselemente erhältlich

HVN 23.14.04.0005

REF 79970X


Gr.	U (cm)	Höhe
1	70 - 80	32
2	80 - 90	32
3	90 - 100	32
4	100 - 110	32
5	110 - 120	32
6	120 - 130	32
7	130 - 140	32

Ausführung: Normal und Typ „Bauche“

Farben: Anthrazit, Marineblau

Material: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

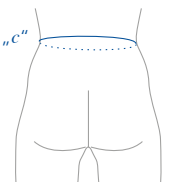Taillenumfang „c“



Para Vertebral Light

Die leichte Rückenstützbandage.



Para Vertebral Light Maternity

Die wohltuende Rückenbandage für Schwangere.



Indikationen

- Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich (Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie)
- Spondylolysen ohne Wirbelgleiten
- verschleißbedingte Veränderung der Bandscheibe und der angrenzenden Knochen (Spondylarthrose, Osteochondrose)

Wirkstrategie

- Teilentlastung und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule durch individuell dosierbaren Abdominaldruck.
- Therapeutisch wirksame Entlordosierung durch gezielten Druckaufbau im Bauchraum.

Schiebler-Vorteile

- schnelles, individuelles, einfaches Anlegen
- Elastisches, atmungsaktives Material für hohen Tragekomfort und gute Hautverträglichkeit auch bei längerer Tragedauer.

HVN 23.14.03.1010

[REF] 70980X

mit Pelotte:

HVN 23.14.03.3022

[REF] 70990X


Gr.	Taillenumfang	Länge/Höhe
1	52 - 62	26
2	63 - 74	26
3	75 - 89	26
4	90 - 105	26
5	106 - 120	26
6	121 - 140	26
7	über 140	26

Ausführung: normal

Farbe: Haut, Weiß, Schwarz

Material: 65 % Polyamid, 28 % Viskose, 7 % Elasthan

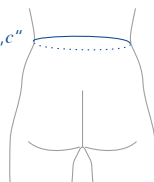Taillenumfang „c“



Indikationen

- bei Kreuzbeschwerden

Wirkstrategie

- entlastet die Lendenwirbelsäule und stabilisiert die Bauchdecke
- zur Unterstützung während der Schwangerschaft.
- zur Behandlung von LWS-bedingten Schmerzzuständen während der Schwangerschaft.

Schiebler-Vorteile

- weiches, hautfreundliches Material sorgt für hohen Tragekomfort auch bei längerem Gebrauch.
- individuell anpassbar und einfach anzulegen für den eigenständigen Gebrauch im Alltag.
- flache Konstruktion auch zum Tragen unter der Kleidung.

HVN 23.14.03.1010


[REF] 70982X

Gr.	Beckenkammhöhe	Länge/Höhe
0	75 - 91	22
1	91 - 105	22
2	105 - 119	22
3	119 - 140	22

Farben: Weiß

Material: 65 % Polyamid, 28 % Viskose, 7 % Elasthan

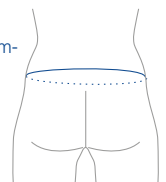Beckenkammumfang „c“



Abdominalbandage

Die anschmiegsame Rückenstützbandage.



Rippenbruchbandage

Der anschmiegsame Rippengurt.



Indikationen

- Entlastungs- sowie Stützverband nach Operationen
- zur nachoperativen Versorgung bei Operationen im Abdomen- und Thoraxbereich
- bei Bandscheibenleiden
- bei geringen Lumbalbeschwerden
- allgemein nach Bandscheibenerkrankungen
- bei Rippenbrüchen als Stützverband

Wirkstrategie

- Kompression bewirkt bessere Hautretraktion
- reduziert Zugbelastung auf Narben
- Schmerz- und Schwellungsreduktion
- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule

Schiebler-Vorteile

- luftdurchlässiges, hautfreundliches Material
- auch als XXL-Version
- in geradem und tailliertem Schnitt lieferbar


HVN 05.11.01.0031

[REF] 3927X

Größe	Taillenumfang	Länge/Höhe
Damen:		
S	58 - 72	26
M	71 - 87	26
L	86 - 102	26
XL	100 - 116	26
XXL	über 116	26
Herren:		
S	70 - 90	26
M	89 - 110	26
L	109 - 130	26
XL	125 - 150	26
XXL	über 150	26

Farben: Haut, Weiß, Schwarz

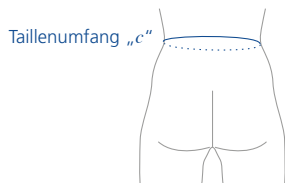Material: 65 % Polyamid, 28 % Viskose, 7 % Elastan



Indikationen

- Rippenfrakturen
- Traumafolgen im Ribbenbereich

Wirkstrategie

- zirkuläre Stabilisierung des Thorax – ideal bei Rippenfrakturen und Thoraxtraumata.

Schiebler-Vorteile

- anatomisch abgestimmt für Herren bzw. mit tailliertem Damenschnitt
- luftdurchlässiges, hautfreundliches Material
- flache Konstruktion – unter der Kleidung kaum sichtbar und daher auch im Alltag diskret tragbar.


HVN 05.11.01.0032

[REF] 1227X

Größe	Taillenumfang	Länge/Höhe
Damen:		
S	65 - 80	16
M	75 - 90	16
L	85 - 105	16
XL	100 - 125	16
Herren:		
S	65 - 80	16
M	75 - 90	16
L	85 - 105	16
XL	100 - 125	16

Farben: Haut, Weiß, Schwarz

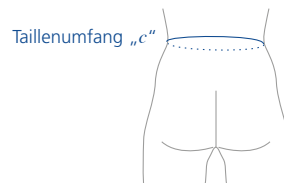Material: 65 % Polyamid, 28 % Viskose, 7 % Elastan



ISG-Orthese

Die angenehme Iliosakralgelenk-Orthese.



Indikationen

- ISG-Blockierung, ISG-Arthrose und/oder ISG-Instabilität
- Tendopathien und Myalgien in der Beckenregion
- Gefügestörungen nach Spondylodesen an der Lendenwirbelsäule

HVN 23.11.01.1005

REF 77900X

Größe	U c (cm)	Höhe
1	70 - 85	16
2	85 - 100	16
3	100 - 115	16
4	115 - 130	16
5	130 - 145	16

Wirkstrategie

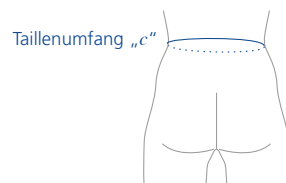
- direkte Entlastung von Becken und ISG durch zirkuläre Kompression
- Friktionsmassage durch zwei Massage-Pelotten stimuliert die Durchblutung
- Einschränkung der Nutation, Entlastung der Bänder und Schmerzlinderung mittels breitem Fixierungsband

Farbe: Gletscher

Material: 74 % Polyamid, 13 % Polyurethan, 10 % Polyester, 3 % Sonstiges

Schiebler-Vorteile

- intelligente Zugführung der einstellbaren Zuggurte bieten hohe Wirkung bei geringem Kraftaufwand
- angenehme Materialkombination für hohe Patientencompliance
- in fünf Größen für einen Beckenumfang von 70 bis 145 cm





Para Block Cervicalstütze

Die Cervicalstütze aus vollem Block.



Para Cervicalstütze

Die klassische Wickelstütz-Bandage.



Indikationen

- Cervicalsyndrom
- Osteochondrose
- Subluxation durch Trauma
- Weiterbehandlung nach Frakturen
- nach operativen Eingriffen
- Empfohlen zur Langzeittherapie

HVN 23.12.03.0020
23.12.03.1010 (mit Verst.)

REF 1497X

Größe	Kragenweite
S	32 - 40 cm
M	40 - 44 cm
L	44 - 48 cm
XL	44 - 48 cm

Wirkstrategie

- Effektive Stabilisierung und gezielte Entlastung der Halswirbelsäule (HWS)
- Unterstützt die Relaxation der Nacken-/Halsmuskulatur
- Anatomische Passform erhöht therapeutische Wirkung

Verstärkung: ohne, mit

Klettbänder: Normal, Lang

Höhe: Normalform, Schmalform, Hochform

Farben: Haut, Marineblau

Schiebler-Vorteile

- Erhältlich in drei Höhen und vier Kragenweiten für passgenaue Versorgung
- Hautfreundlicher, weicher Baumwollbezug – hoher Tragekomfort auch bei längerer Anwendung
- Einfache Handhabung – unterstützt hohe Patientencompliance

Material: PUR-Schaum, Bezug 50 % Baumwolle, 50 % Polyacryl



Halsumfang direkt über Kehlkopf gemesse „c“

Indikationen

- Cervicalsyndrom
- Osteochondrose
- Subluxation durch Trauma
- Weiterbehandlung nach Frakturen
- nach operativen Eingriffen
- Ruhigstellung bei neurologischen Krankheitsbildern

HVN 23.12.03.0021
23.12.03.1011 (m. Verst.)

REF 1438X

Größe	Kragenweite
S	32 - 40 cm
M	40 - 44 cm
L	44 - 48 cm

Wirkstrategie

- Effektive Stabilisierung und gezielte Entlastung der Halswirbelsäule (HWS)
- Unterstützt die Relaxation der Nacken-/Halsmuskulatur
- Anatomische Passform erhöht therapeutische Wirkung

Verstärkung: ohne, mit

Klettbänder: Normal, Lang

Höhe: Normalform, Schmalform, Hochform

Farben: Haut, Marineblau

Material: PUR-Schaum, Bezug 50 % Baumwolle, 50 % Polyacryl

Schiebler-Vorteile

- Einfache Handhabung – unterstützt hohe Patientencompliance
- Hautfreundlicher, weicher Baumwollbezug
- plus alternative Stabilisierungselemente

Höhe	S		M		L	
	Kinn	Nacken	Kinn	Nacken	Kinn	Nacken
Schmalform	7,0	8,5	7,0	9,0	7,5	9,5
Normalform	8,5	11,5	9,0	12,0	9,5	13,0
Hochform	9,5	13,0	10,0	14,0	10,5	14,0



Bandagen und Orthesen fürs Knie – Stabilität in jeder Bewegung.

Unsere Bandagen lindern Schmerzen, unterstützen die Tiefensensibilität und entlasten das Kniegelenk bei jeder Aktivität. Orthesen bieten zusätzlichen Halt und führen das Gelenk sicher – für eine kontrollierte Mobilisierung und eine optimale Genesung.

Indikationen*

Reizzustände (posttraumatisch/postop.)	↓	↓	↓	↓	↓
Prävention/Rückfallprophylaxe		↓	↓	↓	↓
konserv./postop. Therapie	↓			↓	↓
Morbus Schlatter	↓				↓
Instabilität	↓	↓	↓	↓	
Patellofemorales Schmerzsyndrom	↓	↓	↓		
Arthritis/Arthrose	↓	↓	↓	↓	
Meniskusverletzung		↓	↓	↓	
Chondropathia patellae	↓	↓	↓	↓	
Patellaluxation		↓		↓	



Para Patella



Para Patella N**



Para Patella N Extra mit Haftband**



Para Knie-orthese




Doktus Kniebandage

HVN	05.04.01.0004 ¹	05.04.01.0004	05.04.01.0004	23.04.03.0016 ²	-
Mehr auf Seite	48	48	49	49	50

Indikationen*

Reizzustände (posttraumatisch/postop.)	↓	↓
Prävention/Rückfallprophylaxe		↓
konserv./postop. Therapie		↓
Arthritis/Arthrose	↓	
Meniskusverletzung		↓
Chondropathia patellae	↓	
Patellaluxation	↓	↓

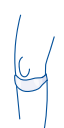

Patella Sehnenband



Para Recuro Immob.schiene

HVN	05.04.01.1024	23.04.01.00131
Mehr auf Seite	50	51

Para Patella

Die komfortable Kniebandage.



Auch als
Maßanfertigung

Para Patella N

Die anspruchsvolle Kniebandage.



massierendes
3D-Wellengestrick



Pelottenalternativen
zur Auswahl

Indikationen

- bei allen Reizzuständen des Kniegelenkes
- nach Operationen
- nach Sportverletzungen
- Morbus Schlatter

Wirkstrategie

- Unterstützung vor Überlastung nach einer Sportverletzung wie auch bei allgemeingültigen Reizzuständen des Kniegelenkes oder einer Operation.
- Kniescheibe von Silikonpols-ter umgeben und vermeidet das direkte Einwirken auf die Patella bei gewährleis-teter Führung der Knie-scheibe.

Schiebler-Vorteile

- vielseitiges Erweiterungs-programm zur individuellen Anpassung
- auch als Maßanfertigung
- in sieben Größen

Material: 60 % Polyamid, 38 % Elastodien, 2 % Elasthan
Soft: 36% Wolle, 34% Poly-amid, 30% Elastodien

HVN 05.04.01.0004 (Serie) 05.04.01.0999 (Maß)

[REF] 1717X

Gr. U (cm)

1	29 - 31
2	32 - 34
3	35 - 37
4	38 - 40
5	41 - 43
6	44 - 46
7	47 - 49

Ausführung: Normal, Soft

Länge: Normal, Verkürzt

Haftband oben: ohne, 5 cm, 3 cm

Pelotte: Typ A, offen; Typ B, geschlossen

Spiralen: eine Spirale; zwei Spiralen

Farben: Haut, Gletscher, Night, Blau, Weiß *

Umfang Kniemitte



Indikationen

- Patellofemorales Schmerz-syndrom
- chronische, postoperative und posttraumatische Reiz-zustände
- nach Sportverletzungen
- leichte Instabilität
- Arthrose und Arthritis
- Chondropathia patellae
- Meniskusschäden
- Überlastungserscheinungen

Wirkstrategie

- Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks durch seitlich eingearbeitete Spiralfederstäbe.
- die Durchblutung stimulie-rendes 3D-Wellengestrick
- Silikonpelotte führt die Kniescheibe. Pelloten-auswahl: Offen zur Scho-nung des Tibiabands und Entlastung der unteren Gelenkfacette. Geschlossen für gewollten Druck unten bei Entlastung der oberen Gelenkfacette; Silikonring massiert Gewebe und redu-ziert Schwellungen.

Schiebler-Vorteile

- Atmungsaktives, weichelas-tisches 3D-Wellengestrick
- Version „Wolle“ mit Schiebler ClimaWool

HVN 05.04.01.0004

[REF] 1715X

Gr. U (cm) O (N) O (N Plus)

0	25-28	35-38	-
1	28-31	38-41	-
2	31-34	41-44	-
3	34-37	44-47	47-50
4	37-40	47-50	50-53
5	40-43	50-53	53-56
6	43-46	53-56	56-59
7	46-49	56-59	59-62
8	49-52	59-62	62-65

Messpunkte siehe Seite 49.

Ausführung: Normal, Plus, Wolle

Haftband

innen: ohne; medial/lateral
oben: ohne; 5 und 3 cm

Pelotte: offen; geschlossen; Schmetterlingsform

Spiralen: eine; zwei

Farben: Gletscher-Blau, Gletscher-Neon, Night, Haut; „Wolle“ in Mondschein-Grau

Material: 68% Polyamid, 32% Elasthan; Wolle: 20 % Baumwolle, 62 % Polyamid, 18% Elasthan

Para Patella N Extra

Die Schiebler V-Strick-Kniebandage.*



Para Knieorthese

Die maximale Knieorthese.



Indikationen

- bei allen Reizzuständen des Kniegelenkes
- chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände
- nach Sportverletzungen
- leichte Instabilität des Kniegelenkes
- Arthrose und Arthritis
- Chondropathia patellae
- Meniskusschäden
- Überlastungserscheinungen

HVN 05.04.01.0004

REF 17154X

Gr.	U	O (N Extra)
4	37-40	56-59
5	40-43	59-62
6	43-46	62-65
7	46-49	65-68
8	49-52	68-71

Farbe: Night/Azalea

Wirkstrategie

- Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks durch seitlich eingearbeitete Spiralfederstäbe.
- Silikonpolster führt die Knie- scheibe und verhindert ihre Kompression.

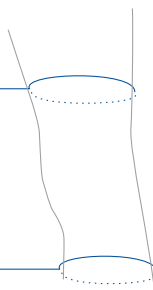
Material: 68 % Polyamid, 32 % Elastan

Schiebler-Vorteile

- für Oberschenkelumfänge bis zu 71 cm mit V-Form-Größenspreizung auch für Patienten mit anspruchsvollem Gewebe
- Haftband oben

O (N Plus und Extra) 17 cm oberhalb Kniemitte

U (N) 14 cm unterhalb Kniemitte



Indikationen

- bei allen Reizzuständen des Kniegelenkes
- chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände
- nach Sportverletzungen
- leichte Instabilität des Kniegelenkes
- Meniskusschäden
- Überlastungserscheinungen

HVN 23.04.03.0016 (1-8)
23.04.03.0999 (Maß)

REF 2496X

Gr.	U	O (N)	O (N Plus)
1	28-31	38-41	-
2	31-34	41-44	-
3	34-37	44-47	47-50
4	37-40	47-50	50-53
5	40-43	50-53	53-56
6	43-46	53-56	56-59
7	46-49	56-59	59-62
8	49-52	59-62	62-65

Wirkstrategie

- Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks durch Scharniergelenke.
- festes Gewirk fördert die Durchblutung
- Silikonpolster führt die Knie- scheibe und verhindert ihre Kompression.

Weite: Normal, Plus

Haftband oben: ohne, 3, 5 cm

Pelotte: offen; geschlossen

Farben: Gletscher-Blau, Gletscher-Neon, Night, Haut

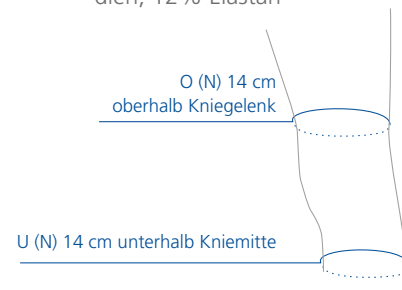
Material: Serie 68 % Polyamid, 32 % Elastan; Maß 68% Polyamid, 20% Elastodien, 12% Elastan

Schiebler-Vorteile

- Soft-Orthese mit hoher Seitenstabilität
- ausgezeichnete Fixierung durch zirkuläre Bänder
- individuell anpassbare Seitenscharnier-Schienen

O (N) 14 cm oberhalb Kniegelenk

U (N) 14 cm unterhalb Kniemitte



Doktus Kniebandage

Die Alltags-Kniebandage ohne Naht.



Indikationen

- alle Reizzustände des Kniegelenks
- nach Operationen
- nach Sportverletzungen
- Morbus Schlatter

Wirkstrategie

- Unterstützung vor Überlastung nach einer Sportverletzung wie auch bei allgemeingültigen Reizzuständen des Kniegelenks.
- Entlastung des Kniekehlenbereichs durch spezielle Strickgewirk.

Schiebler-Vorteile

- hoher Tragekomfort durch besonders atmungsaktives Gestrick mit hohem Microfaseranteil
- in acht Größen und fünf Farben

HVN nicht erstattungsfähig

REF 01100X

Größe Knieumfang

XS	29-31 cm
S	32-34 cm
M	35-37 cm
L	38-40 cm
XL	41-43 cm
XXL	44-46 cm
3XL	47-49 cm
4XL	50-52 cm

Länge: normal (30 cm), kurz (27 cm), lang (32 cm)

Haftband oben: ohne, 5 cm, 3 cm

Farben: Karamell, Gletscher, Night, Blau, Weiß

Material: 58 % Elastodien, 42 % Polyamid

Umfang Kniemitte



Patella Sehnenband

Die optimale Patella-Bandage.



Indikationen

- Chondropathia patellae
- Femoropatellare Arthrose
- Patellaspitzensyndrom

Wirkstrategie

- Aufbau eines gezielten, infrapatellaren Drucks zur Aktivierung sensomotorischer Kontrolle
- Entlastung des patellofemorale Gelenks durch gezielten Druck und Führung zur Schmerzlinderung
- Muskeltonisierung: Förderung der Tonisierung des M. quadriceps mit medialisierender Wirkung auf die Patella
- Stufenlos regulierbarer Pelottendruck

Schiebler-Vorteile

- genoppte Pelotte zur präzisen Reizgebung
- Zugband individuell einstellbar für optimalen Tragekomfort

HVN 05.04.01.1024

REF 17180X


Größe Umfang (cm)

1	bis 34
2	34 - 41
3	41 - 48

Farbe: Schwarz

Material: 71 % Polyamid, 19 % Polyurethan, 10 % Sonstiges

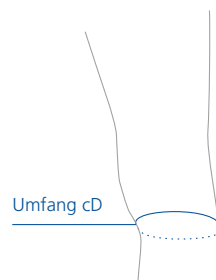Umfang cD



Para Recuro Immo.schiene

Die einteilige Immobilisierungsschiene.



Para Recuro Immo.schiene

Die weiche Immobilisierungsschiene.



Indikationen

- zur Ruhigstellung bei Kniebeschwerden wie z. B. Muskel- oder Bänderverletzungen
- Zustände nach Patellaluxation, präoperative Schmerzzustände
- nach Kniegelenksoperationen
- nach vorzeitiger Abnahme von Gipsverbänden

HVN 23.04.01.0013 (0°)
23.04.01.1006 (20°)

REF 800111X

Länge Größe

50	S
60	M
	L
	XL

Farbe: Blau

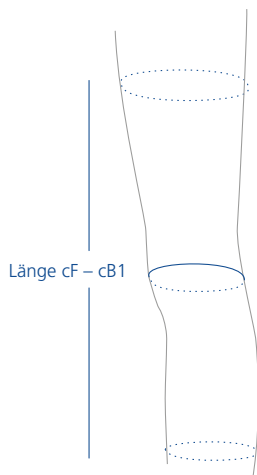
Wirkstrategie

- zur Ruhigstellung des Knies in gestreckter und gebeugter Position

Schiebler-Vorteile

- Einfache Handhabung durch den einteiligen Korpus
- hoher Tragekomfort durch Webflausch
- in 0°- und 20°-Variante lieferbar
- einfache Handhabung
- extra Tragekomfort durch einmaliges Flauschmaterial
- alternativ mit zusätzlicher Griffhilfe

Länge cF – cB1



Indikationen

- zur Ruhigstellung bei Kniebeschwerden wie z. B. Muskel- oder Bänderverletzungen
- Zustände nach Patellaluxation, präoperative Schmerzzustände
- nach Kniegelenksoperationen
- nach vorzeitiger Abnahme von Gipsverbänden

HVN 23.04.01.0013 (0°)
23.04.01.1006 (20°)

REF 80010X

Länge

40
50
55
60
65

Ausführung: normal, spezial¹

Farbe: Blau

Material: 75 % Polyester,
25 % Baumwolle

Wirkstrategie

- Ruhigstellung bei Kniebeschwerden, wie z.B. Muskel- Bänderverletzungen

Schiebler-Vorteile

- einfache Individualisierung auf den Beinumfang des Patienten zeichnen die Para Recuro aus.
- Webflausch für hohen Tragekomfort über den ganzen Tag
- alternativ mit zusätzlicher Griffhilfe

Auch als Para Recuro Pro
HVN 23.04.01.2005

REF 800103

- einstellbar durch beiliegende 0° und 20°-Schiene

¹ wie normale Ausführung mit 4 Bändern je Flügel (nicht bei Pro-Modell)



Orthesen und Bandagen für den Fuß. Stabilisierend. Funktionell. Komfortabel.

Ob bei Verletzungen, Überlastungen oder chronischen Beschwerden – unsere Orthesen und Bandagen bieten gezielte Unterstützung im Alltag und bei der Therapie. Bandagen wirken stabilisierend und entlastend, während Orthesen zusätzlich durch ihre höhere Stützfunktion überzeugen.

Indikationen*

Bandinsuffizienz / Instabilität	↓		↓	↓	↓	↓	
Reizzustände (posttraumatisch/ postoperativ)	↓	↓	↓				
frühfunktionelle Therapie	↓		↓				
konservative/postoperative Therapie	↓			↓	↓	↓	
Rehabilitation/Protektion				↓	↓	↓	
Rezidiv-/Supinationsprophylaxe	↓						
Arthrose/Arthritis	↓						
Tendomyo-/Tendopathie	↓						
Distorsion				↓	↓	↓	
Kapselbandverletzung/ -instabilität				↓	↓	↓	
Achillodynie / -bursitis		↓					
Hallux valgus (kons./post.)							↓



Para
Malleolus**



Para
Achill**



Socken AB1
Doktus**



Air-Gel-
Schiene



Air-Soft-
Schiene



Air-Air-
Schiene



Hallux-Val-
gus-Schiene

HVN	05.02.01.0004	05.02.01.1010	n.N.	23.02.02.0016	23.02.02.0072	23.02.02.0016	23.01.01.0010
Mehr auf Seite	54	54	55	55	56	56	57

Para Malleolus

Die starke Sprunggelenkbandage.



massierendes
3D-Wellengestrick



Auch als
Maßanfertigung

Indikationen

- Überlastungserscheinungen
- Reizzustände und Blutergüsse im Sprunggelenkbereich
- postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Sehnen- und Gleitlagererkrankungen

Wirkstrategie

- Stabilisierung und Entlastung des Sprunggelenks
- anatomisch geformte Silikon-Pelotte schützt den Knöchel vor Druckspitzen und verteilt den therapeutischen Druck gleichmäßig auf das umliegende Gewebe.
- Resorptionsbeschleunigung von Hämatomen und Ödemen beschleunigt, Stauungen werden reduziert

Schiebler-Vorteile

- auch als Maßanfertigung
- atmungsaktives, weich-elastisches 3D-Wellengestrick (Serie) stimuliert die Durchblutung und ermöglicht eine gesicherte Beweglichkeit im Alltag.
- normal und als Extra-Ausführung (Fesselumfang)

HVN 05.02.01.0004 (Serie)
05.02.01.0999 (Maß)

REF 17283X

Größe	U (cm)	PM Extra
1	17 - 19	18 - 20
2	19 - 21	20 - 22
3	21 - 23	22 - 24
4	23 - 25	24 - 26
5	25 - 27	26 - 28
6	27 - 29	28 - 30

Variante: normal; Extra (nur Night-Azalea)

Farben: Serie: Haut, Night, Gletscher-Blau und Neon;
Maß: Haut und Night; Para Malleolus Extra: Night-Azalea

Material: 63 % Polyamid, 37 % Elastan, mit Silikonpelotten

Fesselumfang „b“



Para Achill

Die ausgewogene Achillessehnenbandage.



Auch als
Maßanfertigung

Indikationen

- Achillessehnenentzündungen
- allgemein bei Reizzuständen oder Schmerz im Achillessehnenbereich
- Achillobursitis
- zur Nachbehandlung bei Achillessehnenriss

Wirkstrategie

- Kompressionsbandage zum gezielten Schwellungsabbau
- Silikonpelotte mit massierender Wirkung auf die Achillessehne
- kompressives Gestrick stabilisiert das Gelenk und fördert Propriozeption

Schiebler-Vorteile

- mit/ohne Fersenkeil (4 Höhen in 3 bis 10 mm wählbar)

HVN 05.02.01.1010 (Serie)
05.02.01.1999 (Maß)

REF 17270X

Größe	U (cm)
1	17 - 19
2	19 - 21
3	21 - 23
4	23 - 25
5	25 - 27
6	27 - 29

Farben: Serie: Haut, Night, Gletscher-Blau und Neon;
Maß: Haut und Night

Material: 63% Polyamid, 37% Elastan, mit Silikonpelotte

Fesselumfang „b“



Doktus AB1 Knöchelsocke

Die flauschige Knöchelbandage.



Indikationen

- leichte Instabilitäten
- Verstauchungen
- Sportunfälle
- Schmerz in der Achillessehne
- Verrenkungen, Zerrungen
- Knöchelverletzungen
- Knöchelgelenks-Entzündungen
- allgemein bei Überanspruchung
- Wasseransammlung
- Vorbeugung bei Hochbelastung, z. B. durch Sport
- Distorsionen, Prellungen
- Schwellungen und Gelenkgüsse (Arthrose / Arthritis)

HVN nicht erstattungsfähig

REF 01060X

Größe U (cm)

1	17 - 20
2	20 - 22
3	22 - 24
4	24 - 26
5	26 - 28
6	28 - 30
7	30 - 32

Farbe: Karamell, Schwarz, Marienblau

Material: 54% Polyamid, 46% Elasthan

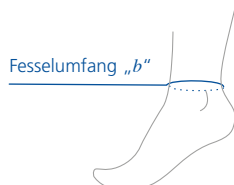
Wirkstrategie

- zur Stabilisierung nach Verletzungen und Vorbeugung
- nahtlose Zweizug-Knöchelbandage zur Weichteilkompression am Sprunggelenk.
- anatomisch geformtes Gestrick unterstützt Führung und Stabilisierung des Gelenks.

Schiebler-Vorteile

- hohe Trageakzeptanz durch Flauschinnenseite für den entspannten Einsatz über den ganzen Tag.

Fesselumfang „b“



Air-Gel-Schiene

Die starke Sprunggelenkorthese mit Luft-Gel-Kammern.



Indikationen

- postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
- konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen aller Schweregrade
- funktionelle Therapie von Bandrupturen
- Sprunggelenkfrakturen (Weber A)
- chronische Bandinstabilitäten

HVN 23.02.02.0016

REF 800001

Standardgröße

Ausführung: Normal, Kurzform

Farbe: Weiß

Material: 25 % Polyamid, 30 % PP, 35 % PVC, 10 % Gel

Wirkstrategie

- konservative oder funktionelle Nachbehandlung
- zur Stabilisierung, medialen/lateralen Bewegungslimitierung
- Möglichkeit von Eis- oder Wärmetherapieanwendungen

Schiebler-Vorteile

- individuell anpassbare Orthese mit Luft-Gel-Kammern
- auch in Kurzform lieferbar
- links/rechts verwendbar

Air-Soft-Schiene

Die starke Sprunggelenkbandage.



Indikationen

- postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
- konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen aller Schweregrade
- funktionelle Therapie von Bandrupturen
- Sprunggelenkfrakturen (Weber A)
- chronische Bandinstabilitäten

Wirkstrategie

- Zuverlässige Stabilisierung nach akuter Verletzung zur Rezidivprophylaxe
- Anatomisch geformte, gepolsterte Kunststoffschalen – flexibel unterhalb der Ferse verbunden für optimale Anpassung an die Fußbreite

Schiebler-Vorteile

- Individuell anpassbarer Sitz
- als rechts- bzw. links-Varian- te verfügbar

HVN 23.02.02.0072

REF 801201

Standardgröße

Farben: Schwarz

Material: 45 % Polyamid, 30 % PP, 20 % Pu Foam, 5 % Neopren

Air-Air-Schiene

Die ausgewogene Achillessehnenbandage.



Indikationen

- postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
- konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen aller Schweregrade
- funktionelle Therapie von Bandrupturen
- Sprunggelenkfrakturen (Weber A)
- chronische Bandinstabilitäten

Wirkstrategie

- Zuverlässige Stabilisierung nach akuter Verletzung zur Rezidivprophylaxe
- Anatomisch geformte, gepolsterte Kunststoffschalen – flexibel unterhalb der Ferse verbunden für optimale Anpassung an die Fußbreite

Schiebler-Vorteile

- Individuell anpassbarer Sitz mittels aufblasbarem Luftkissen
- rechts/ links verwendbar

HVN 23.02.02.0016

REF 801301

Standardgröße

Ausführung: Normal, Kurzform

Farben: weiß

Material: 45 % Polyamid, 30 % PP, 20 % Pu Foam, 5 % Neopren

Hallux-Valgus-Schiene

Die funktionale Orthese gegen Großzehen-Fehlstellung.



Indikationen

- Hallux Valgus-Fehlstellung
- postoperativ nach Hallux Valgus Korrektur
- Vorbeugung der Verschlimmerung des Hallux Valgus

HVN 23.01.01.0010

REF 64080X

Größe Schuhgröße

1 34 - 37

2 38 - 41

3 42 - 46

rechts/links angeben

Wirkstrategie

- mittels Gurtband und wechselseitiger Schiene wird die verkürzte Gelenkkapsel gedehnt und kann sich nicht noch weiter zusammenziehen.
- Postoperative Verhinderung des Zusammenziehens der Gelenkkapsel während der Narbenbildung.
- weniger schnell voranschreitende Fehlstellung

Farbe: Weiß-Blau

Material: 50 % Poly Propylene, 20 % PVC, 15 % Nylon, 15 % Eva

Schiebler-Vorteile

- einfach anzulegen und einstellbar



Im Schiebler-Wissens-

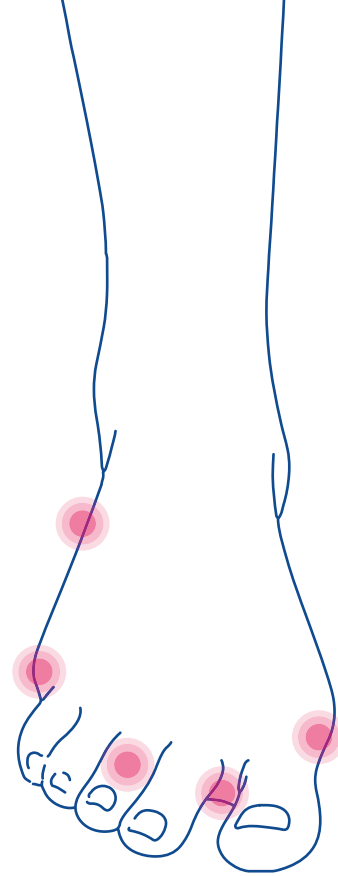
portal vermitteln wir Ihren Patienten die wichtigsten Fakten zu klassischen Krankheitsproblemen des Bewegungsapparats.

Mehr auf
www.schiebler.de



Gezielte Entlastung für Ferse, Fußsohle und die Zehen

Zur Korrektur und Entlastung von schmerzhaften Problemzonen dient unser orthopädisches Fußprogramm. Aus weichem Silikon gefertigt, wirkt es weiteren Folgeschäden entgegen.



Para Fersenkeil

Ein höhenausgleichender, stoßabsorbierender Silikon-Fersenkeil. In beständigem Material und vier verschiedenen Höhen von 3, 5, 8, 10 mm erhältlich (Soft-Variante nur in 8 mm).

HVN 08.03.06.1016

REF 659X0X

Para Fersenkeil Soft

mit Silikonweichkissen gegen Fersensporn

HVN 08.03.06.1017

REF 65940X

Größe	Schuhgröße
S	bis 35
M	36-39
L	40-43
XL	über 43

Para Fersenkeil Sporn

Ein höhenausgleichender, entlastender Fersenkeil mit Hohlkehle gegen Fersensporn. In beständigem, leicht zu reinigendem Material und einer Höhen von 8 mm sowie vier Größen erhältlich.

HVN 08.03.06.0017

REF 66900X

Größe	Schuhgröße
S	bis 35
M	36-39
L	40-43
XL	über 43
(Angaben links/rechts erforderlich)	

Para Fersenkissen (Soft)

Ein Fersenkissen mit einer weichen Silikoneinlage zur Dämpfung und Entlastung. Bewegungsbedingte Stöße auf Gelenke und Wirbelsäule werden reduziert und die Entlastung von Fersen, Gelenken, Bändern, Muskeln und Sehnen wird gefördert.

HVN 08.03.06.1014 (Standard)

08.03.06.1015 (Soft, gegen Aufpreis)

REF 648X0X (Paar)

Größe	Schuhgröße
XS	für Kinder
S	32-35
M	36-39
L	40-43
XL	über 43



Pedofit Aktiv Fußformsohle

Die Pedofit Aktivfußformsohle stützt den Fuß und entlastet empfindliche Bereiche im Vorfuß und Fersenbereich. Zur Unterstützung des Längs- und Außengewölbes des Fußes.

2 Stück

Größen	REF
small	387101
medium	387102
large	387103
x-large	387104

Para Zehenspreizer

Der Zehenspreizer trennt eng anliegende Zehen und unterstützt die korrekte Ausrichtung der Großzehen. Als Schutz gegen Hautirritationen, Hühneraugen und gegen Wundreiben. Auch für Diabetiker geeignet. **2 Stück**

Größen	REF
S	640001
M	640002
L	640003

Para Zehenseparator

Der Zehenseparator unterstützt die korrekte Ausrichtung der betroffenen Zehen, verhindert durch Reibung ausgelöste Hautreizungen und Hühneraugen. In hautfreundlichem, pflegeleichten Silikon eine entlastende Hilfe. Auch zur Prävention beim diabetischen Fuß. **2 Stück**

Größen	REF
small	640101
large	640102

Para Ballenschale

Der Ballenschutz ermöglicht mit seiner angenehmen Druckentlastung am Ballen eine ausgezeichnete Schmerzreduktion. Das weiche, pflegeleichte und langlebige Silikon passt sich dem Ballen durch seine anatomische Formgebung an. Auch zur Prävention beim diabetischen Fuß geeignet. **1 Stück**

Größen	REF
uni-size	640201

Para Zehenring

Der Zehenring wirkt entlastend und korrigierend auf die betroffenen Zehen ein. Reibungen und Hautreizungen werden durch das hautfreundliche, pflegeleichte Silikon vermieden. Auch zur Prävention beim diabetischen Fuß. **2 Stück**

Größen	REF
small (12 mm)	640301
large (15 mm)	640302

Para Vorfußpolster

Ein Kissen gegen Reizungen im Vorfußbereich und zur Unterstützung des Fußgewölbes. Entlastend wirkt das hautfreundliche, pflegeleichte Silikon auf den betroffenen Vorfuß ein.

2 Stück

Größen	REF
uni-size	640401

Para Zehenpolster

Das hautfreundliche, pflegeleichte Silikonpolster mildert und vermeidet die durch Fehlstellungen entstandenen Druckschmerzen im Zehenbereich. Auch zur Prophylaxe beim diabetischen Fuß. **1 Stück**

Größen	REF
uni-size links	640501
uni-size rechts	640502
rechts / links angeben	

Para Vorfußbeinlage

Die Einlage bietet mit der Entlastung bei bisherigen Druckspitzen durch das weiche, pflegeleichte und langlebige Silikon eine entspannende Stoßabsorbierung. Die Vorfußbeinlage wird direkt in den Schuh eingelegt. **2 Stück**

Größen	REF
uni-size	640601

Die Produkte dieser Seite sind nicht erstattungsfähig.

24/7 bestellen

Rund um die Uhr ist unser B2B-Onlineshop für Sie da. Einmal angemeldet, nutzen Sie diverse Vorteile wie Bestellschnellerfassung, Maßüberprüfung oder reduzierte Versandkosten. Jetzt online bestellen auf

shop.schiebler.de

Wir sind für Sie da.

Kompetent und mit einem Lächeln nehmen wir Ihre Bestellungen und Fragen entgegen. **Montags bis freitags von 7.45 bis 16.30 Uhr** heißt es auch für Sie: Herzlich willkommen bei Schiebler :)

Telefon +49 (0) 4 61 978999200

Telefax +49 (0) 4 61 978999111

E-Mail info@schiebler.de



Sie finden uns digital auf
Youtube, Instagram, Facebook und
natürlich auf www.schiebler.de





Geschäftsbedingungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Käufers sind ohne schriftliche Anerkennung des Lieferers für diesen unverbindlich.

Versandkosten	Preis
Maßaufträge in 24 Stunden	versandkostenfrei
Serien-Kleinaufträge unter 50 €	4,00 € je Auftrag und Lieferadresse
Serienaufträge von 50 bis 100 €	7,10 € Porto je Auftrag und Lieferadresse
Serienaufträge ab 100 €	je Auftrag und Lieferadresse portofrei
Expressversand	+ 19,60 €
Zustellung vor 09.00 Uhr	+ 24,50 €
Zustellung vor 10.00 Uhr	+ 12,30 €
Zustellung vor 12.00 Uhr	+ 4,50 €
Zustellung am Samstag	+ 11,20 €

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum, auch dann, wenn sie be- oder verarbeitet wird. Im Falle der Verarbeitung oder des Weiterverkaufs gehen die hieraus entstehenden Forderungen ohne Weiteres an uns über. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt gilt als vereinbart! Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Flensburg. Gerichtsstand: Flensburg.

Preise ohne Umsatzsteuer in Euro. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

Gewährleistung

Der Besteller hat bei Wareneingang sofort die gelieferte Ware auf Beschaffenheit zu prüfen. Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Warenerhalt berücksichtigt werden. Im übrigen verjähren Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Übergabe der Ware. Bei berechtigten Mängeln hat der Besteller Anspruch auf Ersatz bzw. Nachbesserung. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehler, welche auf normalen Verschleiß, missbräuchliche Verwendung und Überbelastung sowie Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

Zahlungsbedingungen

1 % Skonto innerhalb 10 Tagen

2 % Skonto bei Bankabruf (siehe Anlageschreiben)

30 Tage netto nach Rechnungsdatum

Reklamationen

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden! Retouren aus Lagerbereinigung und Auswahlendungen müssen vorab mit unserer Firma abgesprochen werden, ansonsten wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 % erhoben.

Umtausch

Nicht mehr aktuelle Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Dem Lieferer bleibt das Recht vorbehalten, Rücksendungen abzulehnen. Umtausch erfolgt nur gegen original verpackte Ware bei portofreier Einsendung. Umtausch erfolgt unter Abzug von Bearbeitungsgebühren für Prüfung, Neuverpackung sowie Wiedereinlagerung. Maß- und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Lagerung und Transport

Bei der Lagerung und beim Transport von Schiebler Medizinprodukten müssen folgende Punkte stets eingehalten werden:

- Die Lagerung erfolgt an einem trockenen Ort
- Die Produkte werden vor Staub, Regen, direkter Sonneneinstrahlung und Ungeziefer geschützt.

Die optimale Lagertemperatur von Schiebler Medizinprodukten beträgt generell 5° bis 40° C. Vor der Anwendung von Schiebler Produkten am Patienten ist die jeweilige Gebrauchsanweisung zu beachten.



Heinz Schiebler GmbH & Co. KG
Marienallee 74 · 24937 Flensburg
Telefon 04 61/9789990 · Fax 04 61/9789991 11 · E-Mail info@schiebler.de
www.schiebler.de