

PROMO *Sinuosa*

LA TECNOLOGIA CHE *MODELLA, SCOLPISCE E TRASFORMA.*

Modella viso e corpo per un'armonia perfetta delle forme.
Una sinergia avanzata di **Massaggio Endodermico**,
Radiofrequenza, **Soft Laser ed EMS** che agisce in profondità per
ridefinire le forme, tonificare e restituire equilibrio alla silhouette.

DA

285,00

€/MESE + IVA
TAN 10,99 - TAEG 12,41

✓ SENZA ANTICIPO

✓ PRIMA RATA DOPO **6** MESI

INCLUSO NELL'OFFERTA



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso di formazione
teorico e pratico con
rilascio dell'attestato
di partecipazione



ESTENSIONE A 3 ANNI DI GARANZIA

Estensione di garanzia
fino a **3 anni**.
con **apparecchio di
cortesia gratuito**



ASSISTENZA DA REMOTO

Supporto costante da
remoto
con le nostre beauty
trainer specialist



ART. 9166

SCAN ME



Per maggiori informazioni
o per aderire all'offerta
contattaci al



Numero Verde

800 265330



Oppure via mail all'indirizzo

commerciale@musterbt.com



muster
BEAUTY TECHNOLOGY

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida salvo approvazione dell'ente finanziatore convenzionato. Prima rata a 180 giorni dalla stipula del contratto, salvo approvazione finanziaria. Importo finanziato: €. 14.900,00 + IVA. Le condizioni economiche potrebbero variare in funzione del profilo del richiedente e della durata del finanziamento. Offerta riservata a operatori professionali titolari di partita IVA con esercizio aperto da almeno un anno. Salvo errori e omissioni.



CLIENTI MEDI ANNUI PER
UN CENTRO ESTETICO IN ITALIA

Tipo di centro	Clienti al giorno	Clienti al mese	Clienti all'anno
Piccolo	6	132	1.584
Medio	12	264	3.168
Grande	20	440	5.280

Un centro estetico in Italia serve in media circa
2.400 clienti all'anno
Fonti: Confartigianato Imprese Ufficio Parlamentare di Bilancio



Visto il numero medio dei clienti nei centri estetici italiani raggiungere il numero minimo previsto dalla “scheda incassi” è una certezza!

PREZZO DI LISTINO
€ 16.900,00 + IVA

ART. 9166



SE UN CENTRO ESTETICO HA MEDIAMENTE:



ESEMPIO DI SCHEDA INCASSI

NUMERO CLIENTI	TRATTAMENTI EFFETTUATI	NUMERO PACCHETTI	NUMERO SEDUTE PER PACCHETTO	PREZZO MEDIO A SEDUTA	PREZZO PER CLIENTE	TOT INCASSI ANNUI
10	Trattamento viso	10	8	70,00€	560,00€	5.600,00€
10	Trattamento corpo localizzato su addome e fianchi	10	10	70,00€	700,00€	7.000,00€
10	Trattamento corpo localizzato su cosce e glutei	10	10	80,00€	800,00€	8.000,00€
10	Trattamento addome/fianchi + cosce/glutei	10	10	110,00€	1.100,00€	11.000,00€



TOTALE INCASSI ANNUI

31.600,00€



Più clienti soddisfatti



Maggior valore al tuo centro



Trattamenti efficaci e clienti fidelizzati

Sinuosa

Art. 9166



FACE & BODY

LA BELLEZZA SCOLPITA IN OGNI DETTAGLIO



RADIOFREQUENZA



SOFT LASER



MASSAGGIO
ENDODERMICO
(VACUUM + RULLI)



EMS



TOUCH SCREEN



SINUOSA È LA TECNOLOGIA
CHE **MODELLA, SCOLPISCE,
TRASFORMA.**

Una sinergia avanzata
di **MASSAGGIO
ENDODERMICO,
RADIOFREQUENZA, SOFT
LASER** ed **EMS**

che agisce in profondità per
ridefinire le forme, tonificare e
restituire equilibrio alla silhouette.






RADIOFREQUENZA

trattamento non invasivo che sfrutta l'azione di corrente elettromagnetica ad alta frequenza per contrastare diversi tipi di inestetismi.

Più nel dettaglio, la **RADIOFREQUENZA** trova applicazione nel trattamento di inestetismi legati al foto e crono invecchiamento, lassità cutanea, smagliature e perfino miglioramento degli inestetismi legati alla cellulite.


La tecnica della **RADIOFREQUENZA** esercita la sua azione sostanzialmente grazie alla produzione di calore che si verifica in seguito al passaggio della corrente elettromagnetica nella cute e al trasferimento dello stesso attraverso i differenti strati della pelle.

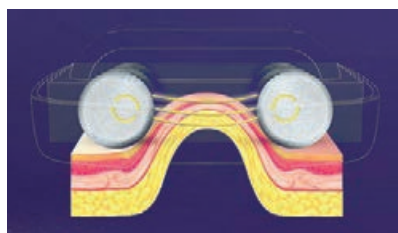



Il calore attraversa l'epidermide e raggiunge il derma, dove provoca la denaturazione termica delle proteine che formano il collagene con conseguente accorciamento delle fibre che lo compongono durante la rinaturazione e stimolazione dell'attività dei fibroblasti.

I fibroblasti così stimolati non solo **PRODUCONO NUOVO COLLAGENE** che andrà a sostituirsi a quello vecchio e danneggiato, ma producono anche **NUOVE FIBRE ELASTICHE E NUOVI GLICOSAMMINOGLICANI**. Inoltre, il calore generato, apporta un effetto benefico sul microcircolo, migliorandone l'efficienza localizzata e favorendo la rimozione di scarti metabolici dal tessuto. Grazie a tale effetto, quando il calore formatosi durante il trattamento di radiofrequenza raggiunge l'ipoderma, si assiste ad una riduzione della dell'accumulo di liquidi e alla riduzione degli inestetismi legati alla cellulite.

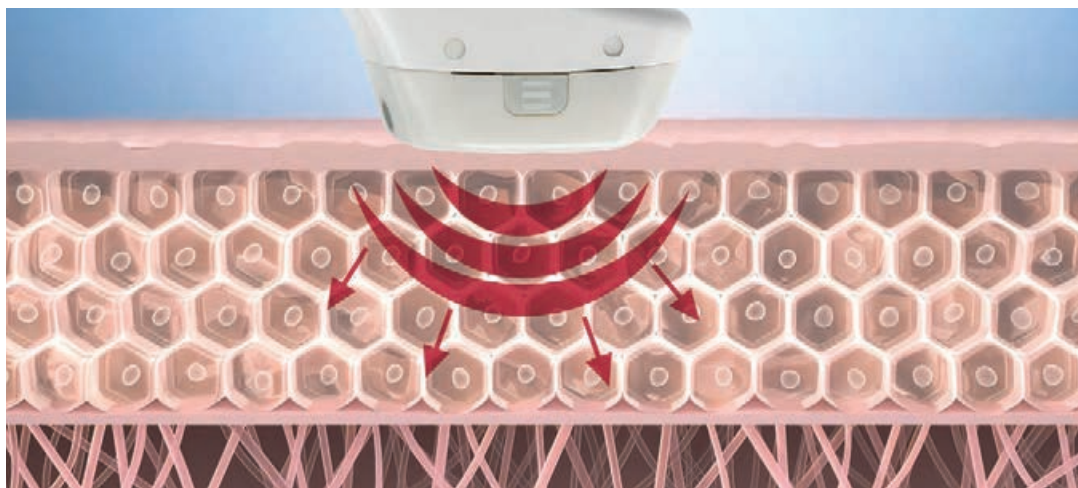



MASSAGGIO ENDODERMICO (VACUUM + RULLI)


Massaggio connettivale aspirato,
che mira a riattivare la circolazione
e ad ossigenare le cellule

attraverso un massaggio meccanico che sollecita la pelle, aspirandola
leggermente, come farebbe una piccola ventosa.

Durante il trattamento, vengono impiegati dei particolari rulli applicati sul manipolo,
che, ruotando automaticamente, esercitano una pressione sulla cute in combinazione
all'aspirazione vacuum, effettuando così un massaggio profondo ed intensivo.
Il trattamento comprende movimenti di pressione profonda, picchettamenti, oltre che
frizioni e compressioni.

Questi movimenti hanno diversi scopi:

- DRENAGGIO LINFATICO E LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
- RIDUCONO LA RITENZIONE IDRICA E RIMODELLANO LA SILHOUETTE
- AGENDO ANCHE SUGLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

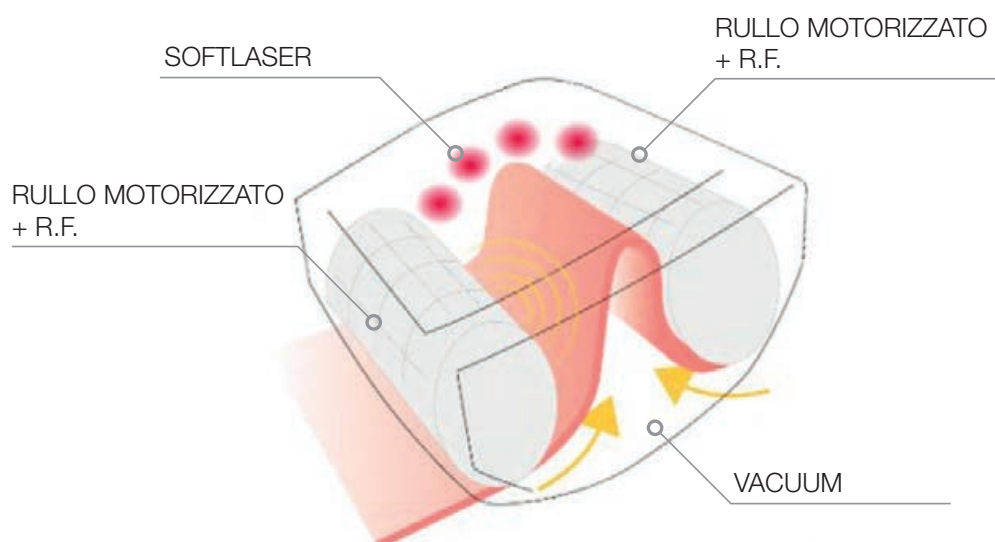




SOFT LASER

Il Soft Laser agisce sulla cute emettendo la luce alla lunghezza d'onda di 850nm

La foto-Biostimolazione con il Soft Laser estetico aumenta la produzione di collagene e di glicosamminoglicani migliorando il tono cutaneo e raddensando i tessuti che tendono a rilassarsi.

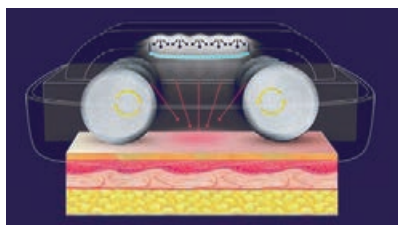



Il tessuto cutaneo risulta in modo visibile più tonico, luminoso, idratato e compatto.

Inoltre, esso agisce a livello del tessuto adiposo, stimolando gli adipociti attivandone il metabolismo.

Tale trattamento è sicuro, in quanto non va in nessun modo a danneggiare, distruggere o rimuovere nessuna cellula del corpo, stimola invece gli adipociti a rendere la propria membrana temporaneamente più permeabile, in modo che il fisiologico processo di trasudazione di alcuni dei suoi contenuti nello spazio extracellulare venga incentivato, permettendo così la **RIDUZIONE DEL VOLUME DEGLI ADIPOCITI ED IL MIGLIORAMENTO GENERALE DELLA VASCOLARIZZAZIONE DELL'AREA, NON PIÙ SOTTOPOSTA A PRESSIONE DA PARTE DEGLI ADIPOCITI.**






EMS ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE SUPERFICIALE

È un trattamento di elettrostimolazione muscolare

erogato con precisione mirata da appositi elettrodi, in alternanza ed in sinergia con la Radiofrequenza.

L'EMS è **MIRATO ALLA STIMOLAZIONE DELLA MUSCOLATURA PROSSIMALE DEL DERMA**, in modo che essa resti tonica e possa fungere da ottimo sostegno della cute e contrastare la formazione di rughe o inestetismi.

La contrazione leggera della muscolatura, inoltre, coadiuva il processo di movimentazione dei liquidi verso il sistema linfatico effettuato dal Massaggio Endodermico e dalla Radiofrequenza, **MIGLIORANDO ANCH'ESSA LA CIRCOLAZIONE.**

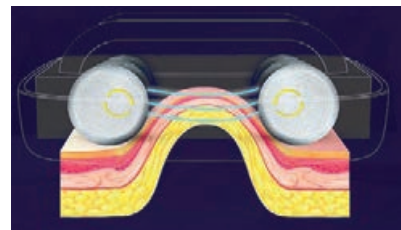

Sinuosa abbraccia **viso e corpo** **in un unico gesto**

per scolpire la bellezza
in ogni sua forma.

BENEFICI VISO

- RINGIOVANIMENTO CUTANEO: RINNOVA LA PELLE E NE CONTRASTA I SEGNI DEL TEMPO E DELL'ESPOSIZIONE SOLARE
- RASSODAMENTO DELLE ZONE CON PERDITA DI TONO
- MIGLIORAMENTO DELL'ELASTICITÀ E DELL'ASPETTO DELLA PELLE
- TRATTAMENTO DI SMAGLIATURE E SEGNI DELL'ETÀ
- ATTENUAZIONE VISIBILE DELLE RUGHE
- TONIFICAZIONE MUSCOLARE PROFONDA A SUPPORTO DEL DERMA

BENEFICI CORPO

- RIDEFINIZIONE DELLA SILHOUETTE: LE FORME SI SCOLPISCONO, IL CORPO RITROVA ARMONIA E PROPORZIONE
- RIDUZIONE DEGLI INESTETISMI DELLA CELLULITE PER UNA PELLE PIÙ LEVIGATA E UNIFORME
- STIMOLAZIONE PROFONDA DELLA CIRCOLAZIONE E DRENAGGIO DEI LIQUIDI PER LEGGEREZZA E BENESSERE IMMEDIATO
- RASSODAMENTO E LIFTING NATURALE DEI TESSUTI GRAZIE ALLA SINERGIA DI RADIOFREQUENZA ED EMS
- RIATTIVAZIONE DEL METABOLISMO LOCALE PER CONTRASTARE ACCUMULI ADIPOSI E MIGLIORARE IL TONO MUSCOLARE
- TONIFICAZIONE VISIBILE DI ADDOME, GLUTEI, COSCE E BRACCIA: LINEE PIÙ DEFINITE, CORPO PIÙ SCOLPITO
- TEXTURE CUTANEA RINNOVATA: PELLE PIÙ COMPATTA, LISCIA, LUMINOSA
- RIDUZIONE DI SMAGLIATURE E SEGNI DEL TEMPO, PER UNA BELLEZZA CHE SI RIVELA A OGNI TRATTAMENTO



Sinuosa dispone di

3 MANIPOLI CON 4 TESTE APPLICATORI

per adattarsi ad aree differenti e trattamenti diversificati del corpo e del viso:



2 MANIPOLI CORPO,

di cui uno **GRANDE** con display, e comandi incorporati per una migliore praticità di regolazione e visualizzazione dei parametri di trattamento.

Un manipolo corpo **INTERMEDIO** con due teste d'applicazione: una grande ed una piccola, per trattare tutte le aree anatomiche del corpo.



Attivazione e regolazione dei parametri del trattamento direttamente dal manipolo
Ottima ergonomia dei manipoli che facilitano il lavoro dell'operatore estetico
Passacavo no-stress: sostiene il peso dei cavi del manipolo per agevolare e non affaticare l'operatore.

MANIPOLO VISO

con un applicatore per trattamenti anti-age e ristrutturanti, studiati per adattare perfettamente l'area di trattamento al soggetto.

SAFETY AND SANITATION

Tutti i manipoli della Beauty Station 4in1 hanno applicatori amovibili e igienizzabili.



DISPLAY MANIPOLO CORPO 2.4"



Sostegno porata manipoli viso e corpo per un minor affaticamento dell'operatore

Ampio display Touch Screen da 10.4"
Software intuitivo e semplice

Silenziosa: rumorosità inferiore a 55DB

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Ampia possibilità di personalizzare i parametri di trattamento.
Semplicità di utilizzo



accessori inclusi **sinuosa**



n. 1 pezzo

Art. 99427

Skin Nova olio gel professionale per trattamenti di Radiofrequenza e Endomassaggio - Flacone 500ml con pratico dosatore



n. 1 pezzo

Art. 99661

Manipolo Grande corpo



n. 1 pezzo

Art. 99662

Applicatore per manipolo Grande corpo



n. 1 pezzo

Art. 99663

Manipolo Medio corpo



n. 1 pezzo

Art. 99664

Applicatore Grande per manipolo Medio corpo



n. 1 pezzo

Art. 99665

Applicatore Piccolo per manipolo Medio corpo



n. 1 pezzo

Art. 99666

Manipolo viso



n. 1 pezzo

Art. 99671

Applicatore piccolo per manipolo viso



n. 1 pezzo

Art. 99667

Applicatore grande per manipolo viso



n. 1 pezzo

Art. 99669

Pedale attivazione



n. 3 pezzi

Art. 99670

Filtro aria anti-impurità



n. 1 pezzo

Art. 9886

Occhiali di protezione operatore per trattamenti di epilazione con Luce Pulsata



n. 1 pezzo

Art. 9999

Occhiali di protezione cliente

merchandising incluso sinuosa



n. 1 pezzo

Art. 99715
X-Banner Sinuosa
dim. 80x200cm



n. 2 pezzi

Art. 21966
Dèpliant informativo
cliente Sinuosa - A5
(conf. 50 pz)



n. 1 pezzo

Art. 99726
Desk Display con
tasca porta dèpliant
Sinuosa

caratteristiche tecniche

Vacuum/Aspirazione: da 10 a 80kPa
Velocità Rulli da 0 a 15 rpm
R.F.: da 1 a 15Joule cm² - 500kHz
EMS: Potenza max 2W - 2-3Hz.
Soft Laser: 12mW/cm² - 850nm

Alimentazione: 220 - 240V ~ 50Hz - 110V ~ 60Hz - 150W
Dimensioni apparecchio: 64x61,5 H108,5cm
Dimensioni apparecchio con porta manipoli montati: 64x61,5 H168cm
Dimensioni imballo: 75x62x123cm
Peso apparecchio completo di manipoli: 54kg
Peso apparecchio con imballo: 84kg



i