

e-ASPECTS®

Uporabniški priročnik

Različica 14.2

e-ASPECTS-MAN-14.2 - 2026-01-28

e-ASPECTS je del Brainomix 360.

Patent ZDA št. 10.902.596

Patent EU št. 3701495

Prejšnje različice (<https://www.brainomix.com/docs/>)

- 1 Uvod
 - 1.1 Splošni pregled
 - 1.2 ASPECTS
- 2 Predvidena uporaba
 - 2.1 Indikacije
 - 2.2 Kontraindikacije
 - 2.3 Opozorila
 - 2.4 Previdnostni ukrepi
 - 2.5 Klinične koristi
 - 2.6 Okolje uporabe
- 3 Namestitev in usposabljanje
 - 3.1 Namestitev
 - 3.2 Usposabljanje
- 4 Sistemske specifikacije
 - 4.1 Strežnik
 - 4.2 Odjemalci
 - 4.3 Jeziki
 - 4.4 Učinkovitost in življenjska doba
- 5 Združljivost naprave za slikanje in slike
- 6 Kibernetska varnost
- 7 Nadzor dostopa in obvestila
 - 7.1 Prijava
 - 7.2 Odjava
 - 7.3 Spreminjanje gesla
 - 7.4 Dvostopenjska avtentikacija
 - 7.5 Status dežurstva
 - 7.6 Obvestila aplikacije
- 8 Vmesnik za namizje
 - 8.1 Seznam bolnikov

- 8.2 Iskanje bolnikov
- 8.3 Pregledovalnik bolnikov
- 8.4 e-ASPECTS prikaz
- 8.5 Ročni rezultati
- 9 Mobilni prikaz
 - 9.1 Seznam bolnikov
 - 9.2 Pregledovalnik bolnikov
 - 9.3 Pošiljanje sporočil
 - 9.4 Označite bolnika za poseg
- 10 Oblika izvoženih rezultatov
 - 10.1 DICOM
 - 10.2 Sinhronizacija v oblaku
 - 10.3 Obvestila mobilne aplikacije
 - 10.4 Poročila o bolniku
- 11 Nalaganje in obdelava
 - 11.1 Obdelava posnetkov
 - 11.2 Dnevnik DICOM
- 12 Skrbništvo
- 13 Odpravljanje težav
- 14 Vzdrževanje in nadgradnje storitev
- 15 Poročanje o dogodkih
- 16 Razgradnja
- 17 Simboli
- 18 Zahtevanje papirnega izvoda

Zakonsko predpisane informacije

 Brainomix Limited First Floor Seacourt Tower West Way Oxford OX2 0JJ Združeno kraljestvo	 0197			
	EU/EGP/Turčija			
	<table><tr><td>EU</td><td>REP</td><td>Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nizozemska</td></tr></table>	EU	REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nizozemska
EU	REP	Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nizozemska		
	<table><tr><td></td><td>Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Irska</td></tr></table>		Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Irska	
	Brainomix Europe Limited Suite 10380 26/27 Upper Pembroke Street D02 X361, Dublin 2 Irska			
 +44 (0) 1865 582740 (tel:+441865582740)				
 LinguaVox, S.L. Pl. Portal de Elche, 6 03001 Alicante Španija	Švica			
	<table><tr><td>CH</td><td>REP</td><td>Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Švica</td></tr></table>	CH	REP	Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Švica
CH	REP	Freyr Life Sciences GmbH Bahnhofplatz CH-6300 Zug Švica		
	<table><tr><td></td><td>Stryker Osteonics AG Burgunderstrasse 13 4562 Biberist Švica</td></tr></table>		Stryker Osteonics AG Burgunderstrasse 13 4562 Biberist Švica	
	Stryker Osteonics AG Burgunderstrasse 13 4562 Biberist Švica			

1 Uvod

1.1 Splošni pregled

Brainomix 360 e-ASPECTS (v nadaljevanju imenovan tako Brainomix 360 e-ASPECTS kot tudi e-ASPECTS) je programski medicinski pripomoček za obdelavo posnetkov računalniške tomografije (CT) možganov pri bolnikih z možgansko kapjo. Zagotovljen je kot spletna storitev, pri čemer uporabniki lahko do sistema dostopajo prek spletnega brskalnika na katerem koli računalniku s povezavo s programsko opremo Brainomix 360 (npr. s povezavo LAN ali internetno povezavo) in se lahko prek lokalne omrežne povezave povežejo z drugimi napravami, skladnimi z DICOM, vključno z napravami za CT-slikanje in sistemi PACS.

Običajno je treba nekontrastne CT-posnetke možganov bolnikov po možganski kapi poslati s postopkom DICOM C-STORE iz naprave za CT-slikanje v programsko opremo Brainomix 360. Brainomix 360 je mogoče konfigurirati za samodejni prenos ustvarjenih serij rezultatov v sistem PACS s postopkom DICOM C-STORE. Brainomix 360 lahko dodatno konfigurirate tako, da se rezultati in poročila o bolnikih pošljejo dodatnim ciljem, kadar koli programska oprema obdela posnetke. Ti cilji lahko vključujejo Brainomix 360 Cloud ali druge instance Brainomix 360 in obvestila aplikacije Brainomix 360 Mobile.

1.2 ASPECTS

ASPECTS (Zgodnja CT ocena programa za možgansko kap v Alberti – Alberta Stroke Program Early CT Score) je topografski sistem za ocenjevanje, ki območje možganov, ki ga je prizadela kap, razdeli na 10 interesnih območij. Obstaja šest kortikalnih regij (M1–M6) in štiri regije bazalnih ganglij (kaudata, lentiforma, insula in notranja kapsula). Za vsako od določenih točk je odvzeta ena točka za območje zgodnjih ishemičnih sprememb, kot je parenhimska hipoatenuacija. Ocena nič kaže na difuzno ishemično poškodbo na celotni prizadeti hemisferi, medtem ko je normalnemu CT posnetku možganov dodeljenih 10 točk ASPECTS.

Upoštevajte, da pri računanju ocene ASPECTS niso upoštevane neakutne ishemične spremembe.

pc-ASPECTS

Dodatni sistem ocenjevanja za uporabo pri posteriorni cirkulacijski možganski kapi je pc-ASPECTS (ASPECTS za posteriorno cirkulacijo), kot je opredeljeno v Puetz et al., Stroke, 2008 (<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.511162>). Razdeljen je na osem interesnih območij: talamusi (vsak po eno točko), okcipitalni lobusi (vsak po eno točko), mezencefalon (dve točki), pons (dve točki), cerebralna hemisfera (vsaka po eno točko). Normalnemu CT posnetku je pripisan pc-ASPECTS v vrednosti deset točk.

Upoštevajte, da e-ASPECTS pri računanju ocene pc-ASPECTS ne upošteva akutnih in neakutnih ishemičnih sprememb v regijah pc-ASPECTS.

2 Predvidena uporaba

To poglavje vsebuje pomembne varnostne informacije o uporabi Brainomix 360 e-ASPECTS.

Brainomix 360 e-ASPECTS je programski paket za obdelavo slik, ki ga uporabljajo usposobljeni strokovnjaki, vključno z zdravniki, ki se ukvarjajo s kapjo, in radiologi. Programska oprema deluje na standardni strojni opremi (fizični ali virtualni) 'v redni prodaji'. Podatki in slike se pridobivajo z napravami za slikanje, ki so skladne z DICOM. To vključuje datoteke DICOM, naložene prek spletnega vmesnika.

Brainomix 360 e-ASPECTS zagotavlja možnosti analize in pregledovanja naborov podatkov v CT možganov bolnikov po možganski kapi. Možnosti analize so namenjene odkrivanju sprememb na sliki, povezanih z možgansko kapjo, izračunu obsega teh sprememb (kot je ASPECTS, ocena zgodnjega CT po programu Alberta Stroke Program) in vizualizaciji teh sprememb.

2.1 Indikacije

1. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran kot pomoč pri diagnozi in zdravljenju akutne hemoragične ali ishemične kapi. Pri ishemični kapi to vključuje bolnike z okluzijo srednje možganske arterije (MCA) ali intrakranialno okluzijo notranje karotidne arterije (ICA).
2. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran za uporabo pri CT-preiskavah možganov brez kontrastnega sredstva pri teh bolnikih kot orodje za podporo odločanju, ki omogoča avtomatizirano analizo posnetkov in točkovanje ASPECTS.
3. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran za uporabo pri CT-preiskavah možganov brez kontrastnega sredstva za poudarjanje domnevnih nenormalnih hiperdenznosti v parenhimu z avtomatizirano analizo posnetka.
4. Brainomix 360 e-ASPECTS je indiciran za uporabo pri CT-preiskavah možganov brez kontrastnega sredstva za odkrivanje domnevnih okluzij znotraj intrakranialne veje ICA in MCA M1 z avtomatizirano analizo slik.

2.2 Kontraindikacije

Brainomix 360 e-ASPECTS ni primeren za uporabo s podatki skeniranja, ki vsebujejo slikovne značilnosti, povezane s:

- tumorji ali abscesi
- tuljavami, šanti, embolizacijo ali artefakti gibanja
- intrakranialnimi žilnimi patologijami, kot so arterijske anevrizme, arteriovenske malformacije ali venska tromboza.

Brainomix 360 e-ASPECTS ne smejo uporabljati osebe s telesno ali drugo okvaro, ki bi jih ovirala pri zaznavanju in razlagi rezultatov programske opreme ali jim onemogočala razlago slikanja brez pomoči e-ASPECTS za potrditev vseh rezultatov.

2.3 Opozorila

	Brainomix 360 e-ASPECTS se ne sme uporabljati kot edina podlaga za diagnozo. Rezultata ne smemo obravnavati kot dokončno diagnozo. Brainomix 360 e-ASPECTS kot pomoč pri razlagi sme uporabljati le usposobljen strokovnjak, ki se spozna na razlago CT slik.
	Brainomix 360 e-ASPECTS smejo uporabljati samo strokovnjaki, ki so bili ustrezno usposobljeni za uporabo programske opreme s strani usposobljenih inštruktorjev podjetja Brainomix ali pooblaščenih tretjih oseb.
	Brainomix 360 e-ASPECTS morda ne bo zaznal vseh kroničnih (starih) infarktov ali pa jih bo napačno razvrstil kot novo ishemično poškodbo.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ne bo pravilno identificiral zgodnjih ishemičnih sprememb pri vsakem posnetku in lahko v kateri koli regiji ustvari lažno pozitivne ali lažno negativne rezultate. Uporabnik mora uporabiti lastno strokovno znanje in izkušnje pri analizi CT-slik, da preveri, ali je rezultat programske opreme pravilen.
	Brainomix 360 e-ASPECTS morda ne bo prikazal ali zaznal vseh nenormalnih hiperdenznosti, tudi če bo prejeto obvestilo o sumu na ICH, ali pa bo nepravilno označevalo območja slike, tudi če ni obvestila ICH.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ni namenjen primarni razlagi CT-slik. Uporablja se za pomoč zdravniku pri ocenjevanju.
	Brainomix 360 e-ASPECTS se ne sme uporabljati v primerih ishemične možganske kapi zunaj območja ICA/MCA ali v primerih hemoragične kapi.
	Primeri s strukturnimi nepravilnostmi, kot so tumorji ali drugi slikovni artefakti, lahko posnemajo simptome ishemične kapi in lahko vplivajo na učinkovitost Brainomix 360 e-ASPECTS. V teh primerih se Brainomix 360 e-ASPECTS ne sme uporabljati. Drugi primeri z neishemičnimi možganskimi kapmi in strukturno normalnimi posnetki lahko prav tako posnemajo simptome ishemične možganske kapi in jih ne smete obdelati z uporabo Brainomix 360 e-ASPECTS.
	Brainomix 360 e-ASPECTS sme biti nameščen le v varnem omrežju, ki je predmet ustreznih zaščitnih ukrepov, vključno z zaščito proti virusom, zaščito pred zlonamerno programsko opremo in s požarnim zidom.
	Za zmanjšanje tveganja nepooblaščen uporabe Brainomix 360 e-ASPECTS uporabniki ne smejo deliti poverilnic za dostop in se morajo odjaviti, ko prenehajo uporabljati sistem.
	Uporabniki, ki dostopajo do spletnega uporabniškega vmesnika Brainomix 360 e-ASPECTS, morajo zagotoviti, da vse analize ali preglede diagnostičnega posnetka izvajajo z odobrenim radiološkim prikazovalnikom.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ni namenjen diagnostičnemu pregledu posnetka, kadar do njega dostopate z mobilnih naprav.

	Pred vrednotenjem rezultatov obdelave je treba preveriti natančnost samodejno segmentiranih regij ASPECTS. Če obstaja kakršno koli nesoglasje ali pomisleki glede kakovosti segmentacije regij ASPECTS, naj uporabniki rezultate ročno uredijo ali pa jih prezrejo.
	Brainomix 360 e-ASPECTS ne nadomesti potrebe po angiografiji pri obravnavi ishemične kapi – omogoča določanje prioritet in obveščanje o poteku dela.
	V primeru, da Brainomix 360 e-ASPECTS delno ali v celoti ni na voljo ali če obdelanih slik ni mogoče pridobiti, se morajo uporabniki zanašati na standardne metode razlage slik v skladu s standardom skrbnosti.
	Uporabniki morajo zagotoviti, da so obvestila omogočena na njihovih mobilnih napravah Android ali iOS, da lahko prejema potisna obvestila.
	Obvestilo morda ne bo ustvarjeno ali pa bo morda zakasnjeno iz več razlogov, med drugim vključno z naslednjimi razlogi: ▪ težave z algoritmičnimi podatki ali napake pri obdelavi med analizo skeniranj (za več informacij glejte previdnostne ukrepe) ▪ artefakti, gibanje ali drugi dejavniki, ki zmanjšujejo kakovost registracije, pomanjkanje prostora na disku za obdelavo novih slik ▪ napaka osnovne strežniške platforme ▪ počasna omrežna povezljivost ▪ počasna povezljivost skenerja/PACS s strežnikom Brainomix 360 ▪ počasna povezljivost s storitvijo Brainomix 360 Cloud prek interneta ▪ zamude pri storitvah za mobilno obveščanje Apple ali Google ▪ slab signal na prejemni mobilni napravi ▪ načini varčevanja z energijo nekaterih mobilnih naprav lahko povzročijo zamude pri obvestilih.

2.4 Previdnostni ukrepi

	Učinkovitost Brainomix 360 e-ASPECTS je omejena s kakovostjo vhodne CT-slike. Če Brainomix 360 e-ASPECTS prejme podatke slabe kakovosti, neveljavne ali poškodovane podatke, lahko to vpliva na zmogljivost sistema za učinkovito obdelavo rezultatov. Uporabnik mora zato ročno preveriti sliko glede artefaktov naprave za slikanje in slike slabe kakovosti, da se izogne nepravilnim rezultatom.
	Brainomix 360 e-ASPECTS je odvisen od pravilnega delovanja osnovne strežniške platforme, na kateri je nameščen, in ni namenjen uporabi kot podatkovna shramba. Rezultate in izvirne podatke je treba shraniti v sistem PACS in ustrezno varnostno kopirati.
	Vsi bolniki morajo prejeti ustrezno oskrbo za svoje simptome, vključno z angiografijo oziroma drugo ustrezno oskrbo v skladu s standardno klinično prakso, ne glede na izhodne podatke iz Brainomix 360 e-ASPECTS.

	Brainomix 360 e-ASPECTS ni namenjen kot naprava za izključitev in v primerih, ki jih je naprava obdelala brez obvestila o sumu na LVO, se ne sme razumeti kot znak, da je LVO izključena. V vseh primerih je treba opraviti angiografijo v skladu s standardno obravnavo možganske kapi.
	Pri pregledovanju slik bodite previdni, saj lahko Brainomix 360 e-ASPECTS povzroči sum na LVO brez identifikacije znaka hiperdenznosti žil na sliki in morda ne povzroči suma na LVO, kljub prepoznavi znaka hiperdenznosti žil.
	Brainomix 360 e-ASPECTS je bil potrjen in je namenjen le uporabi pri odraslih bolnikih. Varnost in učinkovitost v pediatričnih primerih nista bili ugotovljeni.

2.5 Klinične koristi

Glavna prednost Brainomix 360 e-ASPECTS je, da predvidenemu uporabniku zagotovi referenčno oceno ASPECTS z občutljivostjo in specifičnostjo na ravni strokovnjaka.

2.6 Okolje uporabe

Brainomix 360 e-ASPECTS je namenjen uporabi na namiznih ali mobilnih napravah, ki jih je zdravstvena organizacija odobrila za klinično uporabo. Tako namizni kot mobilni prikaz zagotavljata prednosti naprave, vendar se predogledne slike za mobilne naprave ne smejo uporabljati kot pripomoček za diagnostične obravnave.

3 Namestitev in usposabljanje

Pred prvo uporabo Brainomix 360 e-ASPECTS je potrebna namestitev programske opreme in usposabljanje uporabnikov.

3.1 Namestitev

Brainomix 360 e-ASPECTS lahko za vašo organizacijo namestite bodisi z uvedbo strežnika v oblaku bodisi v okviru lokalne namestitve na fizičnem strežniku. Brainomix (ali pooblaščen distributer) pred namestitvijo zbere vse potrebne informacije o namestitvi, vključno z lokacijo, zahtevami glede napajanja in omrežja ter vsemi sistemi tretjih oseb, ki lahko interagirajo s programsko opremo Brainomix 360 e-ASPECTS. Glede načina in zahtev za namestitev se posvetujte z družbo Brainomix ali pooblaščenim distributerjem.

Za uporabo programske opreme na mobilnih napravah (pametnih telefonih in tabličnih računalnikih) prenesite aplikacijo Brainomix 360 Mobile na svojo napravo:

- App Store (za naprave iOS) (<https://apps.apple.com/us/app/e-stroke-mobile/id1443749413>)
- Google Play (za naprave Android) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainomix.ess.android&gl=US>)

Sledite navodilom svoje mobilne naprave, da dokončate postopek namestitve.

3.2 Usposabljanje

Uporaba Brainomix 360 e-ASPECTS zahteva usposobljenost za razlago nekontrastnih CT posnetkov za obravnavo bolnikov z akutno ishemično možgansko kapjo. Pred prvo uporabo programske opreme je potrebno usposabljanje. Usposabljanje je organizirano vnaprej in ga izvajajo usposobljeni inštruktorji družbe Brainomix (ali tretji inštruktorji, ki jih imenuje družba Brainomix) v času začetne namestitve za klinične predstavnike in/ali predstavnike za IT vaše organizacije. Nato lahko nove uporabnike za uporabo programske opreme usposobi eden ali več imenovanih vodilnih inštruktorjev v vaši organizaciji. Brainomix vam bo sporočil, ali bo potrebno novo usposabljanje po začetni namestitvi. Za vsa vprašanja v zvezi z usposabljanjem se obrnite na enega ali več vodilnih inštruktorjev v vaši organizaciji ali na Brainomix tako, da pošljete e-poštno sporočilo na support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>)

4 Systemske specifikacije

4.1 Strežnik

Za zanesljivo uporabo aplikacije je treba upoštevati naslednje minimalne specifikacije.

Procesor	Z arhitekturo x86-64 združljiv procesor s štirimi jedri pri 3,5+ GHz, ki podpira navodila AVX(npr. Intel Xeon, AMD EPYC)
Pomnilnik	16 GB RAM
Disk	500 GB SSD
Omrežje	1 Gb Ethernet
Operacijski sistem	Ubuntu Linux 24.04

4.2 Odjemalci

Za zanesljivo delovanje spletnega uporabniškega vmesnika je treba upoštevati naslednje spletne brskalnike in platforme kot minimalne zahteve.

Spletni brskalnik	Podprta različica
Google Chrome	Zadnja različica
Mozilla Firefox	Zadnja različica
Microsoft Edge	Zadnja različica
Mobile Safari (iOS)	Zadnja različica
Platforma	Minimalne specifikacije
PC (namizni ali prenosni računalnik)	Pomnilnik: 4 GB RAM Velikost zaslona: 13,3 palcev in več Ločljivost zaslona: 1024 × 768 Procesor: Intel ali AMD CPU
Tablični računalnik	Pomnilnik: 2 GB RAM Velikost zaslona: 9,4 palcev in več Ločljivost zaslona: 2048 × 1536
Mobilni telefon (iPhone ali Android)	Pomnilnik: 2 GB RAM Velikost zaslona: 4,7 palcev in več Ločljivost zaslona: 1334 × 750

4.3 Jeziki

V trenutni različici programske opreme so podprti naslednji jeziki.

- bolgarščina (bg)
- češčina (cs)
- valižanščina (cy)
- nemščina (de)
- grščina (el)
- angleščina (en)
- španščina (es)
- finščina (fi)
- francoščina (fr)
- Hrvaščina (hr)
- madžarščina (hu)
- italijanščina (it)
- latvijščina (lv)
- litovščina (lt)
- nizozemščina (nl)
- poljščina (pl)
- portugalščina (pt)
- portugalščina (Brazilija) (pt-br)
- romunščina (ro)
- srbščina (sr)
- slovaščina (sk)
- slovenščina (sl)
- švedščina (sv)
- turščina (tr)

4.4 Učinkovitost in življenjska doba

Naslednje specifikacije učinkovitosti veljajo za trenutno različico programske opreme.

Čas obdelave (na CT-preiskavo)	≤1 minuta (po prevzemu iz PCS ali po zaključku nalaganja)
Občutljivost	povp. najm. 50 %
Specifičnost	povp. najm. 94 %

Poseben tehnični list za platformo Brainomix 360 z informacijami, pomembnimi za oddelek IT vaše organizacije, je na voljo ob prvi namestitvi in na zahtevo.

Življenjska doba izdelka Brainomix 360 e-ASPECTS je neomejena za trenutno različico programske opreme in za čas trajanja pogodbenega zagotavljanja storitev, če je nameščena na virtualnem računalniku, ki od podjetja Brainomix redno prejema posodobitve programske opreme.

5 Združljivost naprave za slikanje in slike

Programska oprema Brainomix 360 e-ASPECTS je zasnovana za delo z nekontrastnimi posnetki CT, poslanimi prek protokola DICOM. Ti posnetki morajo imeti naslednje značilnosti:

Debelina rezine	Največja debelina rezine: 2 mm
Volumen pridobivanja	Enotno cerebralno zaporedje od kroga Willisove stopnje ali nižje, vse do temena
Metodo rekonstrukcije	Jedro mehkega tkiva (brez pretiranega glajenja). Uporabite lahko iterativno rekonstrukcijo, rekonstrukcijo z globokim učenjem ali rekonstrukcijo FBP, če velikost jedra ni prevelika.
Okno	Okno Možgani (ne okno Kost)

Uporaba debelejših rezin ali pretirano nizkega odmerka lahko povzroči nastanek slikovnih artefaktov in posledično slabšo učinkovitost točkovanja. Uporaba napačnega okna običajno povzroči, da Brainomix 360 e-ASPECTS ne sme obdelati posnetka.

6 Kibernetenska varnost

Brainomix 360 e-ASPECTS je nameščen na strežniku (fizičnem ali virtualnem) v bolnišničnem omrežju in je kot tak potencialno ranljiv za vdor kakršne koli zlonamerne programske opreme ali virusov v bolnišnično omrežje, v katerega je e-ASPECTS nameščen, ali za katero koli drugo obliko nepooblaščenega dostopa.

Brainomix 360 e-ASPECTS ne predstavlja posebne ranljivosti za bolnišnično omrežje, v katerega je vgrajen, in je malo verjetno, da bo namerno izkoriščen. Če bi do takšnih tveganj vendarle prišlo, bi lahko povzročila okvaro ali izgubo podatkov, ki se sprejemajo, shranjujejo ali pošiljajo, okvaro, izgubo ali poškodbo shranjenih konfiguracijskih podatkov ali prekinitev ali preprečitev normalnega delovanja.

Brainomix 360 e-ASPECTS je bil zasnovan ter razvit s funkcijami in zahtevami za zmanjševanje teh tveganj kibernetiske varnosti. Sistem je bil posebej zasnovan tako, da je zagotovljeno naslednje:

- Dostop uporabnikov je mogoče omejiti in nadzorovati.
- Komponente za shranjevanje podatkov niso dostopne prek omrežja, razen prek komponent spletne storitve Brainomix.
- Odprto je le najmanjše število vrat, potrebnih za vse funkcije.
- Prenos podatkov prek nezaupljivih povezav je zaščiten in šifriran.
- Brainomix lahko na daljavo spremlja sistem in varno namesti varnostne posodobitve, če je treba.

Brainomix 360 e-ASPECTS je bil zasnovan tako, da uporablja večplastni model avtorizacije na podlagi vlog uporabnikov. To vključuje standardne uporabnike, ki dostopajo do sistema in ga uporabljajo, ter skrbnike z dodatnimi privilegiji, ki jim omogočajo:

- dostop do podatkov o bolnikih ali konfiguracije sistema,
- nastavitve in upravljanje varnostnih možnosti,
- izbris podatkov o bolnikih/posnetkih,
- spreminjanje ali odstranjevanje uporabnikov.

Namestitveni paket za Brainomix 360 e-ASPECTS vključuje lokalni požarni zid, zaščito proti virusom in pred zlonamerno programsko opremo za strežnik. Te je mogoče spremeniti ali dopolniti, da ustrezajo lokalnim varnostnim politikam, vendar je pomembno, da se skrbniki pred odstranitvijo ali ponovno konfiguracijo teh privzetih zaščit obrnejo na podporo Brainomix, da ne bi ogrozili varnosti sistema.

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa Brainomix 360 e-ASPECTS vključuje vgrajene uporabniško ime/geslo in mehanizme dvostopenjske avtentikacije, ki so opisani v razdelku Nadzor dostopa v tem priročniku za uporabo.

Če uporabniki ali skrbniki sumijo, da so bile uporabniške poverilnice za prijavo ogrožene, je treba takoj spremeniti geslo ali onemogočiti račun.

Gesla lahko nastavijo in ponastavijo uporabniki in/ali skrbniki, vendar morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede zapletenosti gesla. Kot privzete so nastavljene minimalne zahteve za zapletenost gesla, vendar jih lahko skrbniki konfigurirajo, da omogočijo možnosti za večjo zapletenost, kadar je to potrebno ali predpisano z lokalnimi varnostnimi pravili.

Te možnosti vključujejo nastavitve obvezne uporabe posebnih znakov, ustvarjanje črnih seznamov gesel, ki se ne smejo uporabljati, in nastavitve najvišje starosti za ponastavitev gesel. Dvostopenjska avtentikacija je privzeto neobvezna, vendar jo skrbniki lahko uveljavijo.

Brainomix 360 e-ASPECTS lahko nastavite tako, da samodejno onemogočite uporabniške račune, ki v določenem obdobju niso bili aktivni, za aktivne uporabnike pa vključuje tudi funkcijo samodejne prekinitve, ki po določenem obdobju neaktivnosti odjavi uporabnike.

Da bi zmanjšali tveganje nepooblaščne uporabe Brainomix 360 e-ASPECTS, uporabniki ne smejo deliti poverilnic za dostop in se morajo odjaviti takoj, ko prenehajo uporabljati sistem.

Skrbniki se lahko odločijo tudi za uporabo uporabniških računov Active Directory (prek LDAP) namesto privzetega sistema avtentikacije Brainomix.

Čeprav so bili načrtovani in izvedeni različni ukrepi za kibernetsko varnost, je uspešna ublažitev varnostnih ranljivosti za Brainomix 360 e-ASPECTS odvisna od varnostne infrastrukture omrežnega okolja bolnišnice, najboljših praks uporabnikov in upravljanja s strani skrbnikov.

Brainomix 360 e-ASPECTS naj se namesti le v varno bolnišnično omrežje, ki je zaščiteno s požarnim zidom na ravni omrežja, protivirusno in protivohunsko programsko opremo ter po možnosti s programsko opremo za odkrivanje vdorov (IDS).


Odjemalske naprave, ki se uporabljajo za dostop do strežnika, ki gosti Brainomix 360 e-ASPECTS, morajo biti prav tako zaščitene z antivirusno programsko opremo oziroma s programom za preprečevanje zlonamerne programske opreme in IDS ter morajo biti posodobljene z varnostnimi popravki in posodobitvami.

7 Nadzor dostopa in obvestila


7.1 Prijava

1. V svojem spletnem brskalniku odprite naslov strežnika Brainomix 360 ali Brainomix 360 Cloud.
2. Če aplikacije v zadnjem času niste uporabljali v svojem trenutnem spletnem brskalniku, se boste morali prijaviti. Vaš skrbnik sistema lahko zagotovi poverilnico za prijavo.


Brainomix 360:

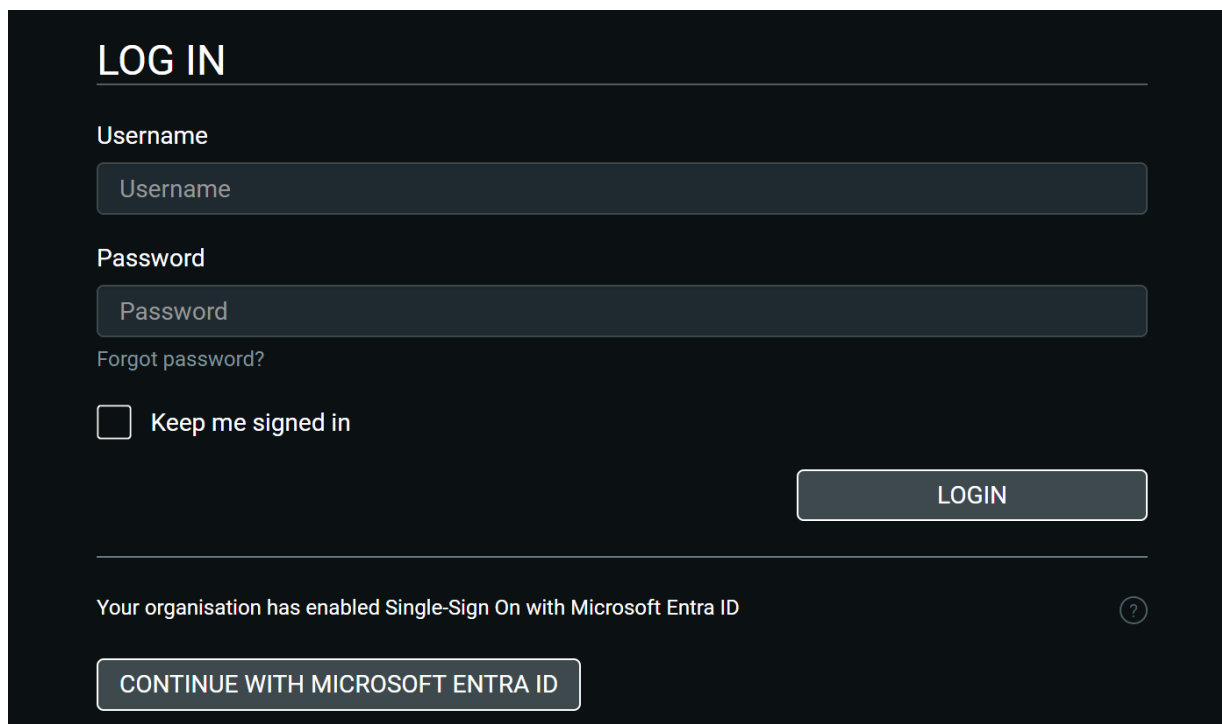

Brainomix 360 Cloud:

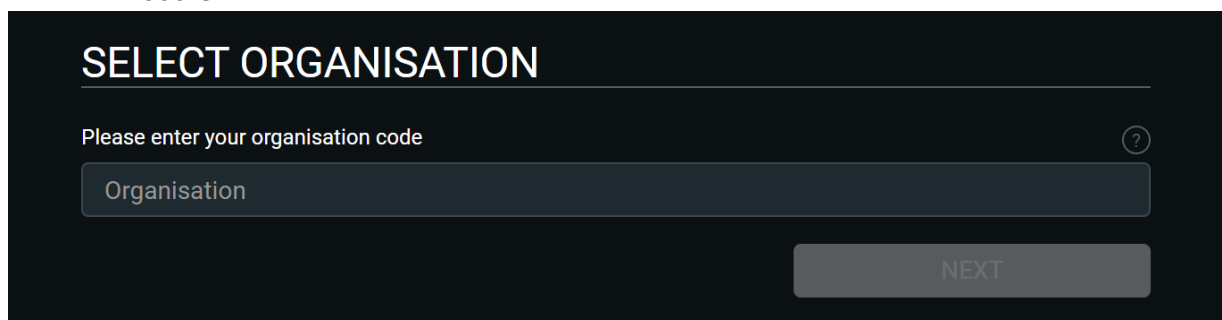

1. Če se prijavljate v Brainomix 360 Cloud, vnesite ID svoje organizacije.
 2. Če je vaša organizacija omogočila enotno prijavo, pritisnite 'Nadaljuj z Microsoft Entra ID' in sledite standardnemu postopku prijave. V nasprotnem primeru:
 3. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.
 4. Če želite, da se izvede samodejna odjava po eni uri ali ob izhodu iz brskalnika, pustite polje neoznačeno. Označite polje, če želite ostati prijavljeni v tem računalniku, dokler se ne odjavite.
 5. Kliknite gumb Prijava.
3. Če ste pozabili geslo, lahko s klikom na besedilo 'Ste pozabili geslo?' zahtevate ponastavitev gesla.

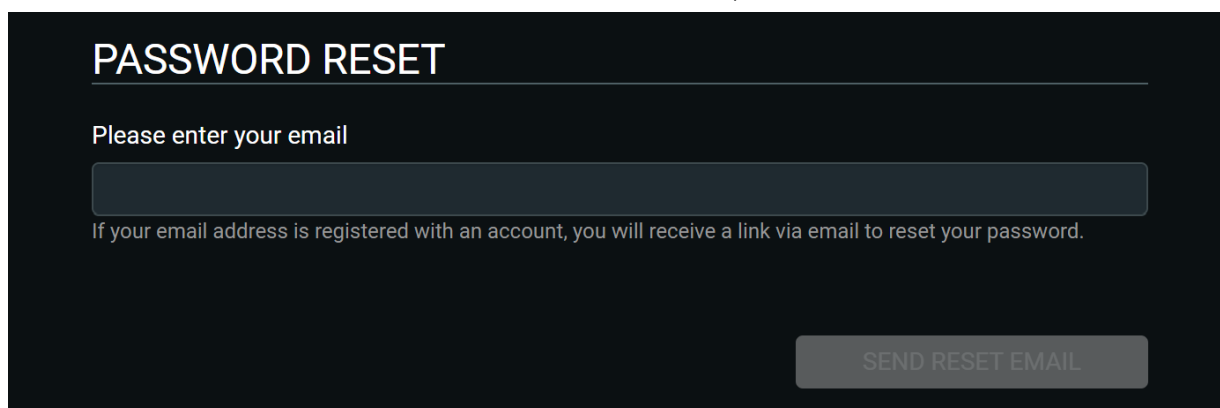


PASSWORD RESET

Please enter your email

If your email address is registered with an account, you will receive a link via email to reset your password.

SEND RESET EMAIL

4. Če ste se vključili v dvostopenjsko avtentikacijo, boste morda morali v aplikacijo za preverjanje pristnosti vnesti kodo žetona.

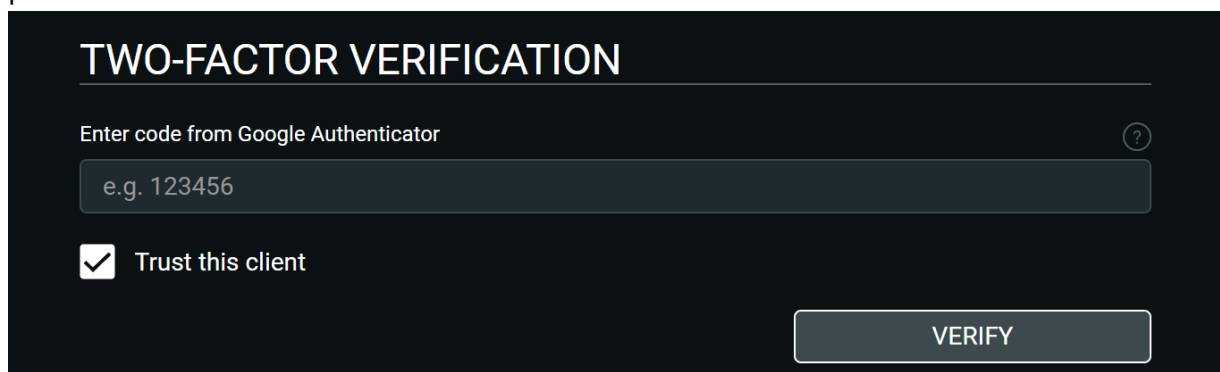

TWO-FACTOR VERIFICATION

Enter code from Google Authenticator ?


☒ Trust this client

VERIFY

- Izberite 'Zaupajte temu odjemalcu', da se izognete ponovni zahtevi po kodi žetona v tej napravi ali brskalniku. Te možnosti ne uporabljajte na skupnih napravah.
- Če iz aplikacije za preverjanje pristnosti ne morete dobiti kode žetona, lahko vnesete neuporabljeno kodo za obnovo s seznama, ki je na voljo ob vpisu v dvostopenjsko avtentikacijo.

7.2 Odjava

1. Odprite meni in se pomaknite do dna.

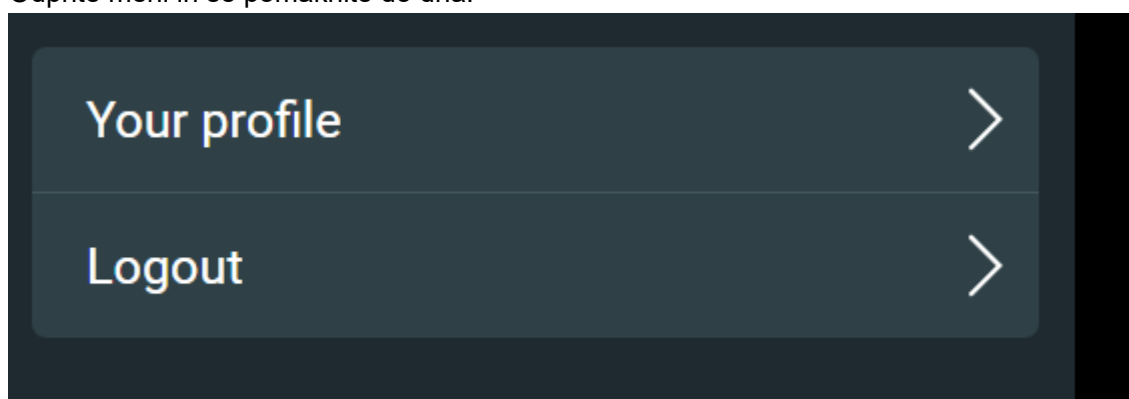


Your profile >

Logout >

2. Kliknite **Odjava**

7.3 Spreminjanje gesla


1. Odprite meni in se pomaknite do dna.

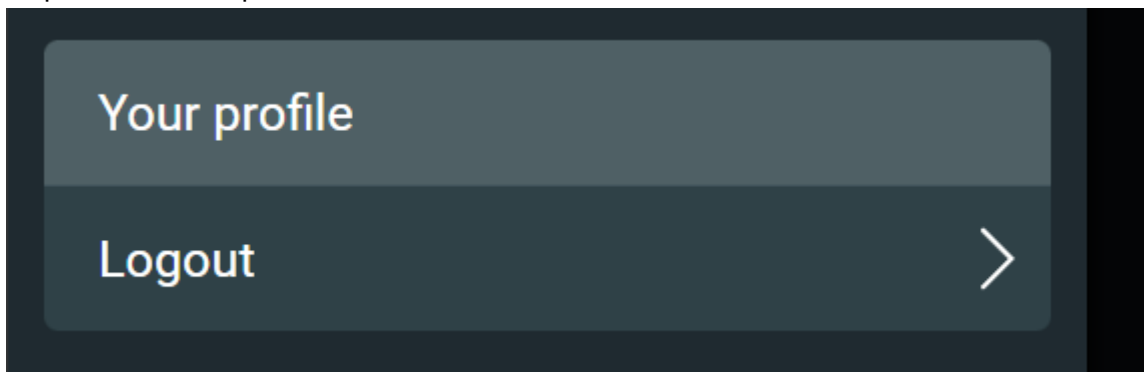

2. Kliknite **Vaš profil**
3. Kliknite zavihek z oznako **Spremeni geslo**
4. Vnesite staro in novo geslo (gesli morata izpolnjevati minimalne zahteve glede kompleksnosti: osem znakov z vsaj eno številko in črko.)
5. Kliknite **Shrani** ali pritisnite enter.

7.4 Dvostopenjska avtentikacija

1. Izberite svoje uporabniško ime na desni strani navigacijske vrstice.

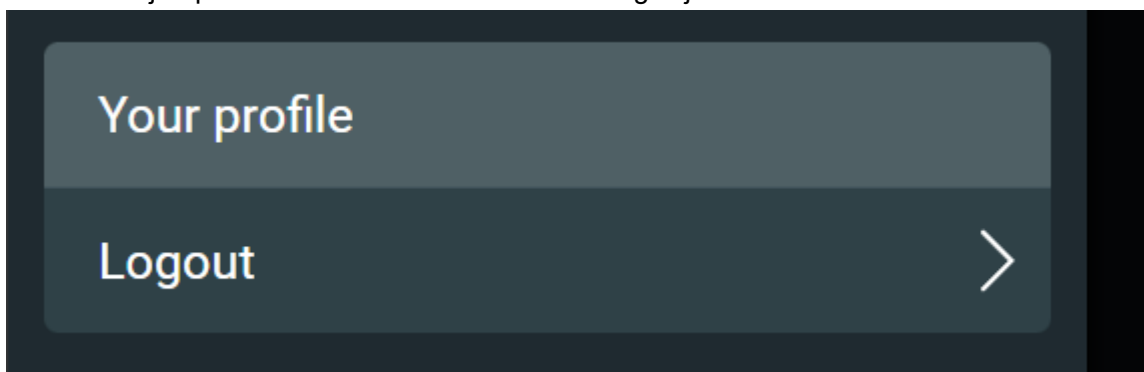


2. Kliknite **Vaš profil**.
3. Kliknite zavihek z oznako **Dvostopenjska avtentikacija**.
4. Kliknite gumb **za vpis**.
5. Sledite navodilom za vpis na zaslonu.

7.5 Status dežurstva

Konfiguracija


1. Vaš status dežurstva bo konfiguriran v tej aplikaciji. Izberete lahko ali boste dežurni ali ne in za katero organizacijo boste dežurali.

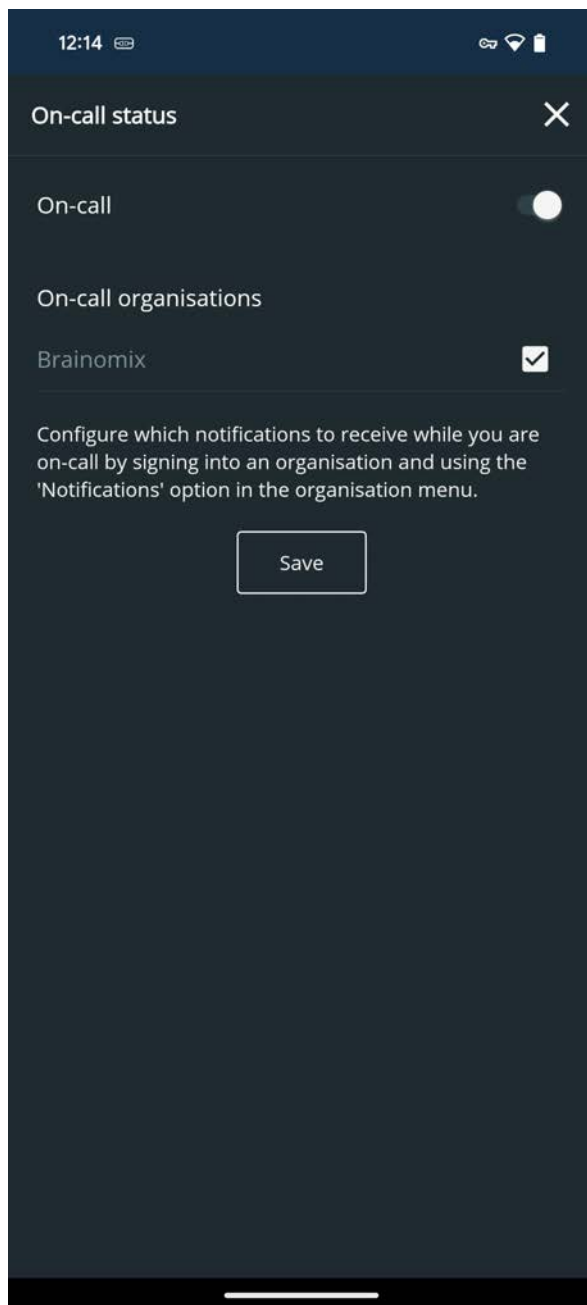

7.6 Obvestila aplikacije

1. Izberete lahko, ali želite vedno prejemati obvestila, ali jih želite prejemati le, ko ste dežurni za organizacijo, ali jih ne želite nikoli prejemati.

2. Te nastavitve lahko konfigurirate tako, da tapnete 'Obvestila' v meniju aplikacije za organizacijo.

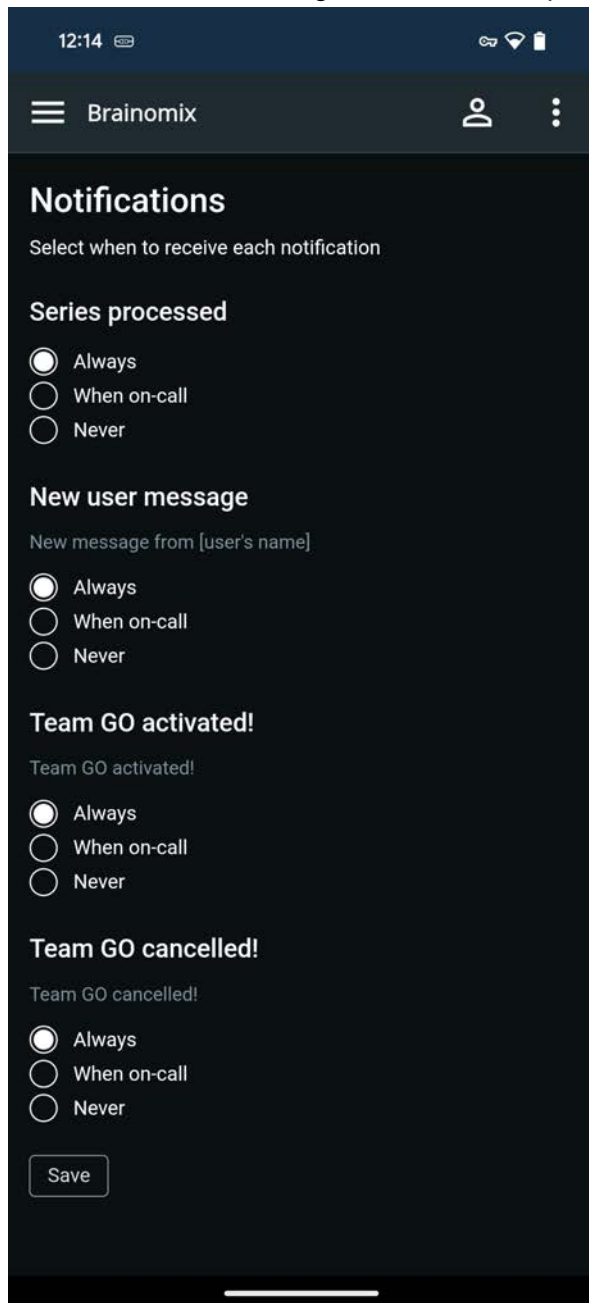

Če želite prejemati obvestila iz aplikacije Brainomix 360 Mobile, morate zagotoviti, da so obvestila v vaši mobilni napravi omogočena. To lahko storite ob namestitvi aplikacije Brainomix 360 Mobile v mobilno napravo ali pa to nastavite pozneje po spodnjih korakih.

iOS


- Zaženite aplikacijo Nastavitve.
- Tapnite Obvestila.
- Pomaknite se na Brainomix 360 Mobile > Tapnite.
- Preklopite stikalo **Dovoli obvestila** na **Vklopljeno**, da omogočite obvestila.
- Preklopite stikalo **Časovno občutljiva obvestila** na **Vklopljeno** (obvestila so vedno dostavljena takoj in ostanejo na zaklenjenem zaslonu eno uro).
- Izberite svoje nastavitve za opozorila – priporočljivo je izbrati vse (Zaklenjeni zaslon, Center za obvestila in Pasice) in nastavite **Slog Pasice** na **Trajno**.
- Preklopite stikala **Zvoki in oznake** na **Vklopljeno** (priporočljivo).

Android

- Zaženite aplikacijo Nastavitve.
- Tapnite Aplikacije.
- Pomaknite se do Brainomix 360 Mobile. > Tapnite.
- Tapnite Obvestila.
- Preklopite stikalo **Dovoli obvestila** na **Vklopljeno**, da omogočite obvestila, vključno s sporočili, zvoki in vibracijami.
- Preklopite stikalo **Tiho prikaži** na **Izklopljeno** (priporočljivo).
- Preklopite stikalo **Nastavi kot prednostno** na **Vklopljeno** za vklop zaslona, ko je vklopljena funkcija 'Ne moti' (priporočljivo).

8 Vmesnik za namizje

8.1 Seznam bolnikov

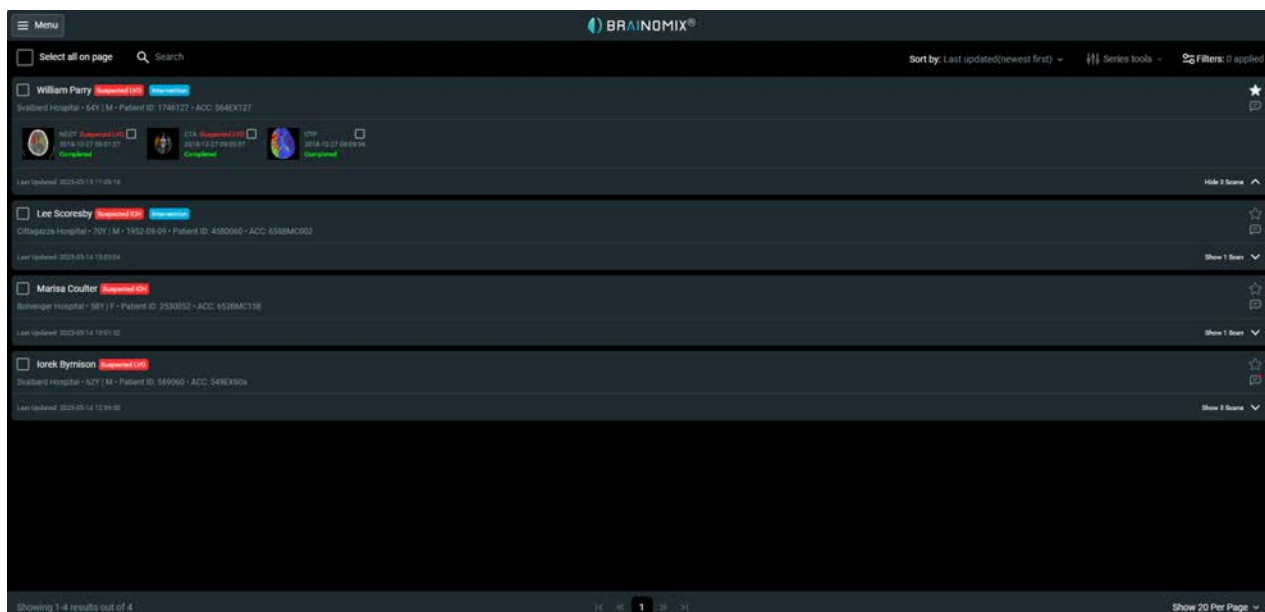

- Stran s seznamom bolnikov prikazuje vse bolnike, ki so vam na voljo. Privzeto so navedeni po vrstnem redu zadnjega posodobljenega bolnika.
- Po straneh z bolniki se premikate tako, da kliknete na številke strani pod seznamom.
- Kliknite na bolnika, da ga odprete v pregledovalniku bolnikov (preberite poglavje Pregledovalnik bolnikov).
- Kliknite ikono , da razširite podrobnosti o bolniku ter si ogledate podrobnosti skeniranja in sličico predogleda vsakega skeniranja.


8.2 Iskanje bolnikov

Razvrščanje

Seznam bolnikov razvrstite tako, da kliknete gumb Razvrsti po.


Sort by: Last updated(newest first) ▾

S spustnega seznama izberite prednostno razvrščanje.

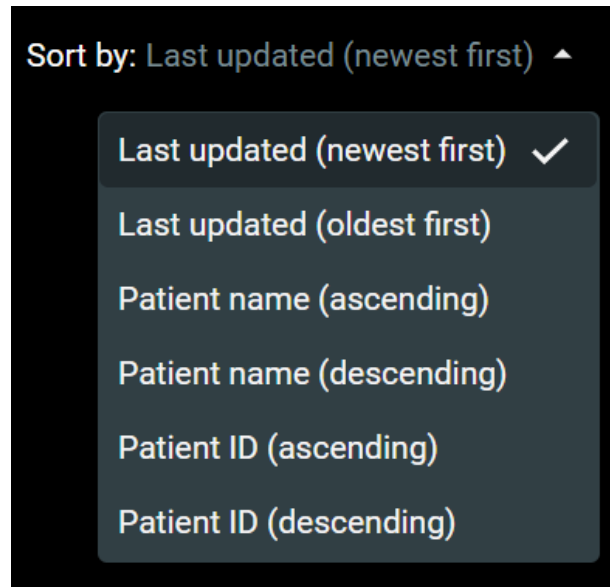


Iskanje

Bolnika iščite po imenu, pristopni številki ali številki ID tako, da besedilo vnesete v iskalno polje nad seznamom bolnikov.

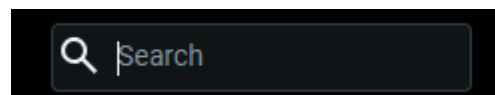

Filtriranje

Bolnike filtrirajte tako, da pritisnete gumb Filtri.

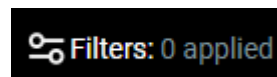

Izberite možnosti, po katerih želite filtrirati. Na seznamu bolnikov bodo prikazani samo tisti bolniki, katerih serije ali rezultati ustrezajo izbranim filtrom.

8.3 Pregledovalnik bolnikov


Splošni pregled

Ko odprete bolnika s seznama bolnikov, se odpre pregledovalnik bolnikov.

V levi stranski vrstici so na voljo informacije, ki se nanašajo na bolnika:

- Pogled: prikaz vseh podrobnosti skeniranja, ki so na voljo za izbranega bolnika
- Serija:
- Pošiljanje sporočil: prikaz in pošiljanje sporočil za tega pacienta

Nad pregledovalnikom bolnikov in stransko vrstico je kartica z informacijami o bolniku. Prikažejo se podatki o bolniku in možnost 'zvezdica', s katero lahko bolnika dodate med zaznamke. Upoštevajte, da so bile te informacije morda odstranjene, če je bil bolnik psevdonimiziran, npr. če je bil prejet s sinhronizacijo med uporabniki ali če si bolnika ogledujete v oblaku Brainomix 360 Cloud.

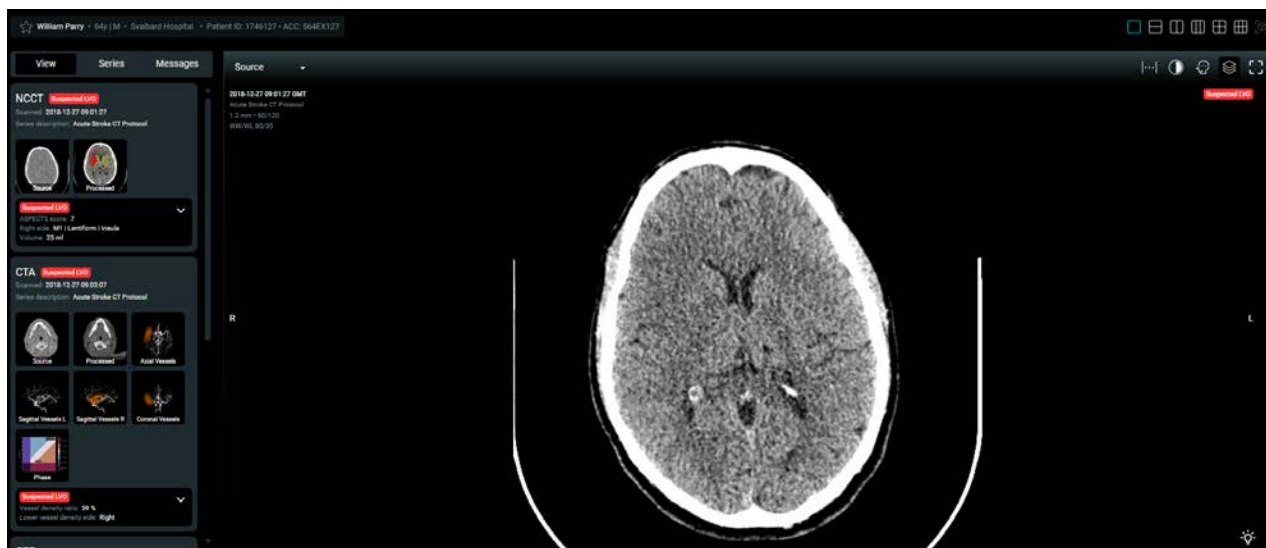

Ogled posnetkov

Pod kartico z informacijami o bolniku in nad prikazom slike je vrstica kontrolnikov za prikaz slike. To so od leve proti desni:

- Izbirnik pogleda (prikazan je 'Vir'). To omogoča hitro spreminjanje pogleda.
- Krmilnik Debelina plošče. Če je na voljo, omogoča prilagoditev debeline plošče z združevanjem sosednjih rezin s filtri za povprečje, MIP ali MinIP.
- Krmilnik oken. Ta omogoča nastavitve širine okna/ravni in več prednastavitev. Okno lahko prilagodite tudi z desnim klikom in vlečenjem miške.
- Preklopnik prekrivanja. S pritiskom na ta gumb izklopite ali vklopite prekrivanje.
- Krmilnik MPR. Če je na voljo, se s pritiskom na ta gumb odprejo možnosti za spremembo na aksialni, sagitalni ali koronarni pogled.
- Gumb za maksimiranje. S pritiskom tega gumba razširite prikaz slike, da zavzame čim več prostora.

Glavna sestavina pregledovalnika bolnikov je prikaz slike. Prikaže se trenutna rezina izbranega pogleda z uporabljenimi filtri okna, plošče in MPR. Nad osnovno sliko se lahko prikažejo prekrivne plasti za informacije in prekrivne plasti iz rezultatov algoritmov.

V zgornjem desnem kotu prikaza slike so prikazani kazalniki iz rezultatov algoritma, skupaj z morebitnimi uporabniškimi popravki ali oznakami posegov.

Pod prikazom slike je kontrolnik rezine. Z vlečenjem drsnika se lahko pomikate po vseh rezinah.

Uporaba oken

Slikovne pike v računalniški tomografiji se merijo v Hounsfieldovih enotah (HU), ki jih je treba za prikaz pretvoriti v ravni sivine. Kontrolniki poravnave in širine oken v meniju **Uporaba oken** vam omogoča prilagajanje obsega vrednosti HU, ki so prikazane.

V pomoč pri ročni oceni skeniranja so na voljo naslednja prednastavljena okna:

- **Tkivo:** zagotavlja dober splošen pregled možganskega tkiva.
- **Žile:** zagotavlja boljši kontrast, da so poudarjene žile lažje vidne.
- **Kost:** omogoča pregledovanje kostnih struktur.
- **Visok kontrast:** zagotavlja pogled z visokim kontrastom, da so spremembe zgodnje hipodenznosti lažje vidne.

Širino in raven okna lahko prilagodite tudi tako, da nad pregledovalnikom kliknete in držite desni gumb miške ter medtem miško premikate navzgor/navzdol (za spremembo poravnave) ali levo/desno (za spremembo širine).

Podrobnosti o seriji

Datum/čas serije je prikazan v prekrivnem prikazu v zgornjem levem kotu prikaza slike skupaj s parametri prikaza, kot sta debelina rezine in število rezin. Dodatne podrobnosti so na voljo v zavihku Serija. Nekatere podrobnosti so prevzete iz izvornih oznak serij DICOM (npr. opis študije), druge pa iz same programske opreme (npr. različica algoritma).

Izvoz rezultatov

Na zavihku Povzetek rezultatov v pogledu so gumbi za prenos izvornih izvornih slik in slik rezultata v obliki zapisa DICOM za vse razpoložljive serije.

8.4 e-ASPECTS prikaz




Povzetek rezultatov

Rezultat ASPECTS in povezane informacije so prikazane v prikazu Povzetek rezultata. Ta vsebuje naslednje informacije.

ASPECTS

V tem razdelku je prikazana ocena ASPECTS, izračunana z e-ASPECTS, in seznam regij, ki so bila ocenjene kot regije z akutno hipodenznostjo in so zato zmanjšale oceno ASPECTS.

Volumni – hiperdenznost

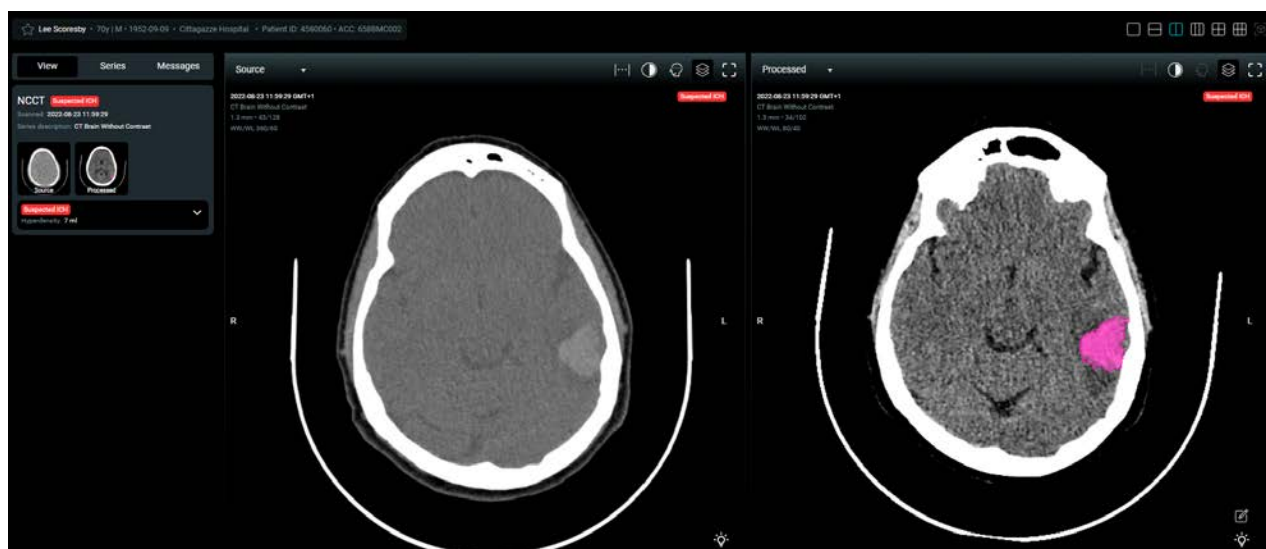

Brainomix 360 e-ASPECTS bo poskušal odkriti nenormalne hiperdenzitete v nekontrastnem CT posnetku. Abnormalne hiperdenzitete pomenijo območja s povišanimi vrednostmi HU v možganih v primerjavi s tistimi, ki bi jih običajno pričakovali pri CT posnetku zdravih možganov. Pogosti vzroki za takšno hiperdenzitetu pri bolnikih s sumom na možgansko kap so akutne krvavitve, saj je sveža kri običajno bolj hiperdenzna kot siva ali bela snov, ali uhajanje kontrasta, čeprav ga pri nekontrastnem CT posnetku ne bi smeli opaziti, če kontrastno sredstvo ni bilo dano pred kratkim.

Če je regija s povečano gostoto zaznana znotraj CT posnetka, bo regija segmentirana in prikazana kot prekrivna plast in o volumnu segmentirane regije bo poročano (v mililitrih). Čeprav mora to merjenje volumna pravilno ustrezati segmentirani regiji, mora uporabnik vizualno potrditi, da je segmentirana regija pravilna ob upoštevanju osnovnih hiperdenznosti na sliki.

Upoštevajte, da je ta funkcija ločena od funkcije hiperdenznosti žil, ki bo poskušala identificirati okluzije ali kalcifikacije žil.


Ko je zaznana hiperdenznost z velikim volumnom, bodo volumen hipodenznosti, ocena ASPECTS in rezultati hiperdenzne žile zadržani. Če je skrbnik omogočil ročno urejanje, to funkcijo lahko uporabite za ponovno vzpostavitev zadržanih rezultatov.

Volumni – akutna/neakutna hipodenznost

Volumen hipodenznih znakov v ml, izračunan z Brainomix 360 e-ASPECTS. To je merilo 'toplotnega zemljevida'. Natančnost izračuna volumna je odvisna od kakovosti 'toplotnega zemljevida', ki jo je treba ročno preveriti.

Skrbniki lahko dodatno omogočijo izračun neto absorpcije vode, ki temelji na resnosti hiperdenznosti v akutni regiji hiperdenznosti. Če je ta vrednost omogočena, bo prikazana kot odstotek pod akutnim volumnom hiperdenznosti, ko je zaznana zadostna gostota.

Hiperdenzne žile

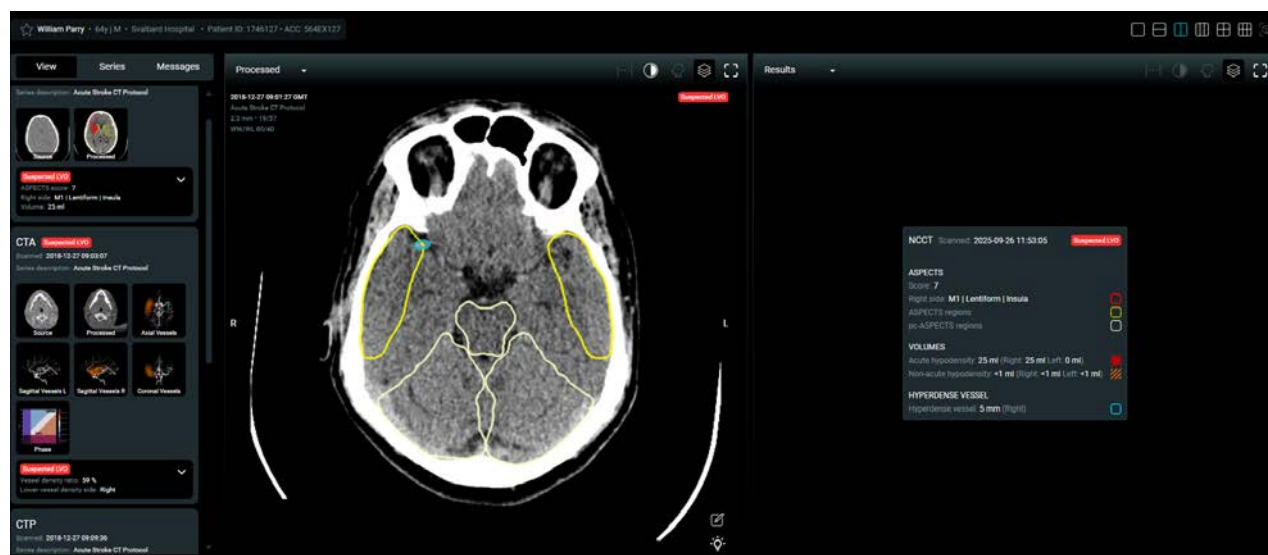

e-ASPECTS poskuša identificirati lokalizirane hiperdenznosti žil na nekontrastnih CT posnetkih, kar običajno nakazuje na okluzijo (strdke) ali kalcifikacijo. Ko se te funkcije klasificirajo, se upoštevajo lastnosti slike, kot so oblika hiperdenznosti in vrednosti HU znotraj žile s hiperdenznostjo, pri čemer ima kalcifikacija običajno višje in bolj natančno definirane vrednosti HU v primerjavi s strdko. Območje hiperdenznosti bo segmentirano in označeno v izhodni sliki rezultatov.

Če je zaznana ena ali več okluzij, bo dolžina okluzije označena glede na merjenje najdaljše osi segmentirane regije, ki je povezana z okluzijo. V primeru, kjer je okluzija zaznana na CT posnetku na obeh hemisferah možganov, bo meritev dolžine podana na hemisfero.

Upoštevajte, da nekaterih hiperdenznosti programska oprema morda ne bo zaznala in prav tako je mogoče opaziti napačno pozitivno prepoznavo. Možno je tudi, da so te lastnosti označene zunaj žil, kar pomeni, da v tem primeru hiperdenznost ni nastala zaradi okluzije, četudi je nepravilno zaznana kot taka.

Obdelano

Pogled obdelanih podatkov prikazuje CT-sliko po obdelavi in analizi s pomočjo e-ASPECTS. Rezine imajo opombe z namenom prikaza segmentacije regij ASPECTS in prepoznano hipodenznost ali znake hiperdenznosti.

Prekrivne plasti

Posamezne prekrivne plasti, prikazane v obdelanem pogledu, so naslednje:

- **regije ASPECTS:** prikazuje segmentacijo regij ASPECTS;
- **prizadete regije:** poudarja regije ASPECTS, ki so bila ocenjene kot regije z akutnimi hipodenznimi spremembami;
- **akutna hipodenznost:** poudarjena so področja z akutnimi hipodenznimi spremembami;
- **neakutna hipodenznost:** označi območja s starejšimi spremembami hipodenznosti, ki jih je algoritem e-ASPECTS izključil;
- **hiperdenznost:** označi območja z nenormalnimi znaki hiperdenznosti.
- **hiperdenzna žila:** označi žile s hiperdenznostjo, ki so zaznane kot okluzije;
- **kalcifikacija:** označi hiperdenzne žile, zaznane kot kalcifikacije;
- **regije pc-ASPECTS:** prikazuje segmentacijo regij pc-ASPECTS;
- **srednja sagitalna ravnina:** prikazuje indikatorsko črto srednje sagitalne ravnine;
- **besedilne opombe:** prikazuje stranske kazalnike in druge prekrivne plasti informacijskih besedil.

Opozorila

Če se v gumbu Informacije ali Serija prikaže ikona s klicajem, to pomeni, da obstajajo opozorila iz e-ASPECTS, ki lahko vplivajo na točnost ocene.

8.5 Ročni rezultati

Če vam skrbnik omogoči, lahko urejate samodejne rezultate in shranite vaše lastne ročne rezultate na Brainomix 360. Ta funkcija ni na voljo, ko si posnetke ogledujete na Brainomix 360 cloud.



Samodejni rezultat lahko urejate tako, da shranite svoj rezultat. Kliknite ikono svinčnika 'Uredi' spodaj desno v prikazu slike, da odprete okno za urejanje.

Kliknite imena regije, ki naj bi prispevala k rezultatu ASPECTS, da izračunate svoj ročni rezultat ASPECTS.


Rezultate lahko shranite ali zavrzete.

9 Mobilni prikaz

9.1 Seznam bolnikov

Če do Brainomix 360 ali Brainomix 360 Cloud dostopate s telefonom, si lahko ogledate seznam vseh bolnikov. Tapnite bolnika, da odprete pregledovalnik bolnikov. Ko podrsnete navzdol, se seznam bolnikov osveži.

Pritisnite na ikono ☆, če želite bolnika označiti kot priljubljenega, ali na ikono ★, če želite odstraniti oznako priljubljenega.

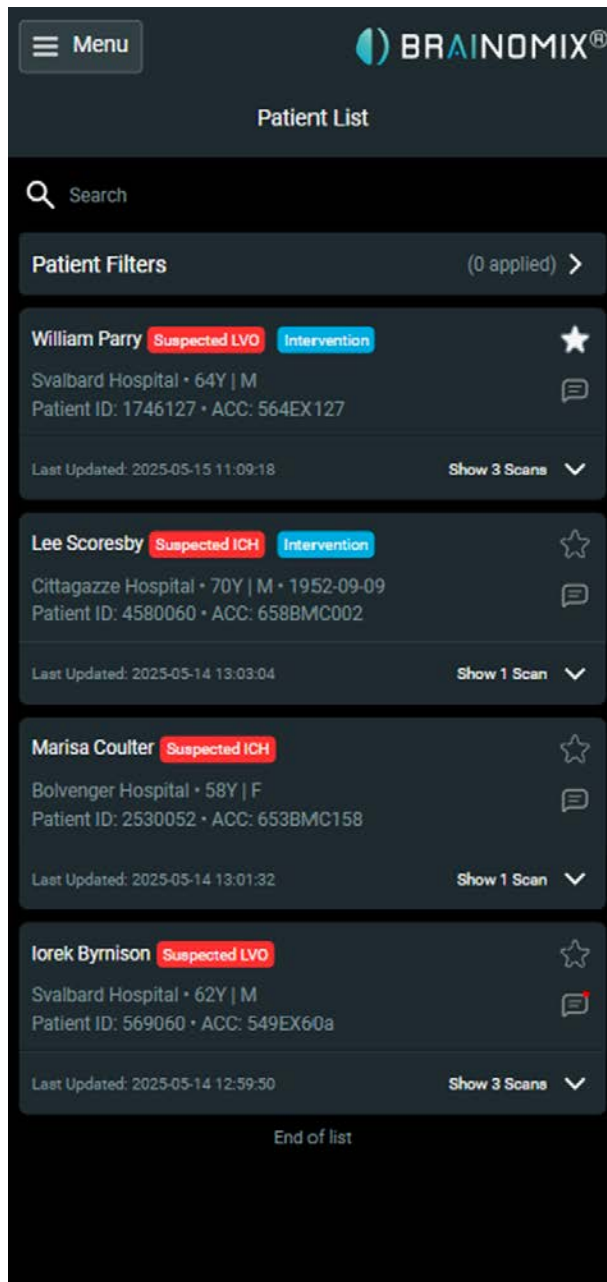

9.2 Pregledovalnik bolnikov


Vse serije

Ko odprete bolnika s seznama bolnikov, se odpre prikaz Vse serije. Če ste že v pregledovalniku, tapnite gumb VSI v spodnjem levem kotu. Ogledate si lahko vse serije in rezultate za tega bolnika ter se z dotikom sličice pomikate do katerega koli razpoložljivega pogleda.

Za neposreden prehod na prikaz rezultatov slikanja lahko uporabite tudi gumbe za posamezne načine na dnu:

- NCCT: Če je na voljo, si oglejte nekontrastno slikanje CT za tega bolnika in vse povezane rezultate.
- CTA: Če je na voljo, si oglejte angiogram CT za tega bolnika in vse povezane rezultate.
- CTP: Če je na voljo, si oglejte perfuzijsko preiskavo CT za tega bolnika in vse povezane rezultate.
- MRI: Če je na voljo, si oglejte preiskave MRI za tega bolnika in vse povezane rezultate.

Upoštevajte, da bodo na platformi Brainomix 360 prikazani rezultati vseh licenčnih izdelkov. Ta zaslonska slika poleg e-ASPECTS prikazuje tudi rezultate drugih izdelkov.

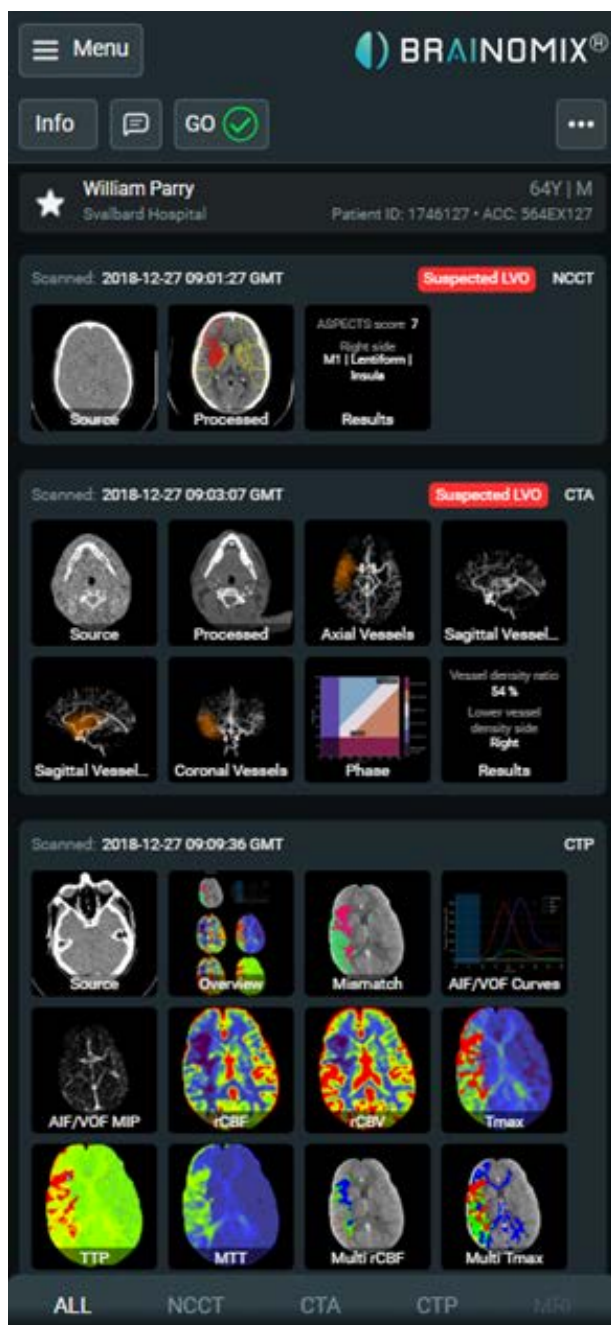

Ogled posnetkov

Na vrhu postavitve pregledovalnika so prikazani nekateri kontrolniki, značilni za bolnika, z dostopom do možnosti:

- Informacije: Prikaz vseh metapodatkov za to slikanje skupaj z morebitnimi opozorili o obdelavi;
- Pošiljanje sporočil: prikaz in pošiljanje sporočil za tega bolnika;
- GO: označite tega bolnika za poseg.

S pomočjo funkcije 'ščipni za povečavo' lahko posnetek povečate, da vidite več podrobnosti, po posnetku pa se lahko pomikate tako, da ga povlečete z dvema prstoma.




9.3 Pošiljanje sporočil

Če je to omogočil skrbnik sistema, lahko pregledujete in pošiljate sporočila za bolnika. Ko prispejo nova sporočila, si jih lahko ogledate v območju za klepet in, če je konfigurirano, se vsem registriranim uporabnikom pošlje obvestilo iz mobilne aplikacije.

Nova sporočila se ob prejemu prikažejo na dnu območja za klepet.

Če želite poslati sporočilo, vnesite besedilo v polje na dnu in kliknite gumb za pošiljanje na desni strani.

Če želite videti, kdo je prebral sporočilo, kliknite ikono informacije. Če želite zapreti seznam 'Prebral/Prebrala', kliknite ikono za zapiranje.

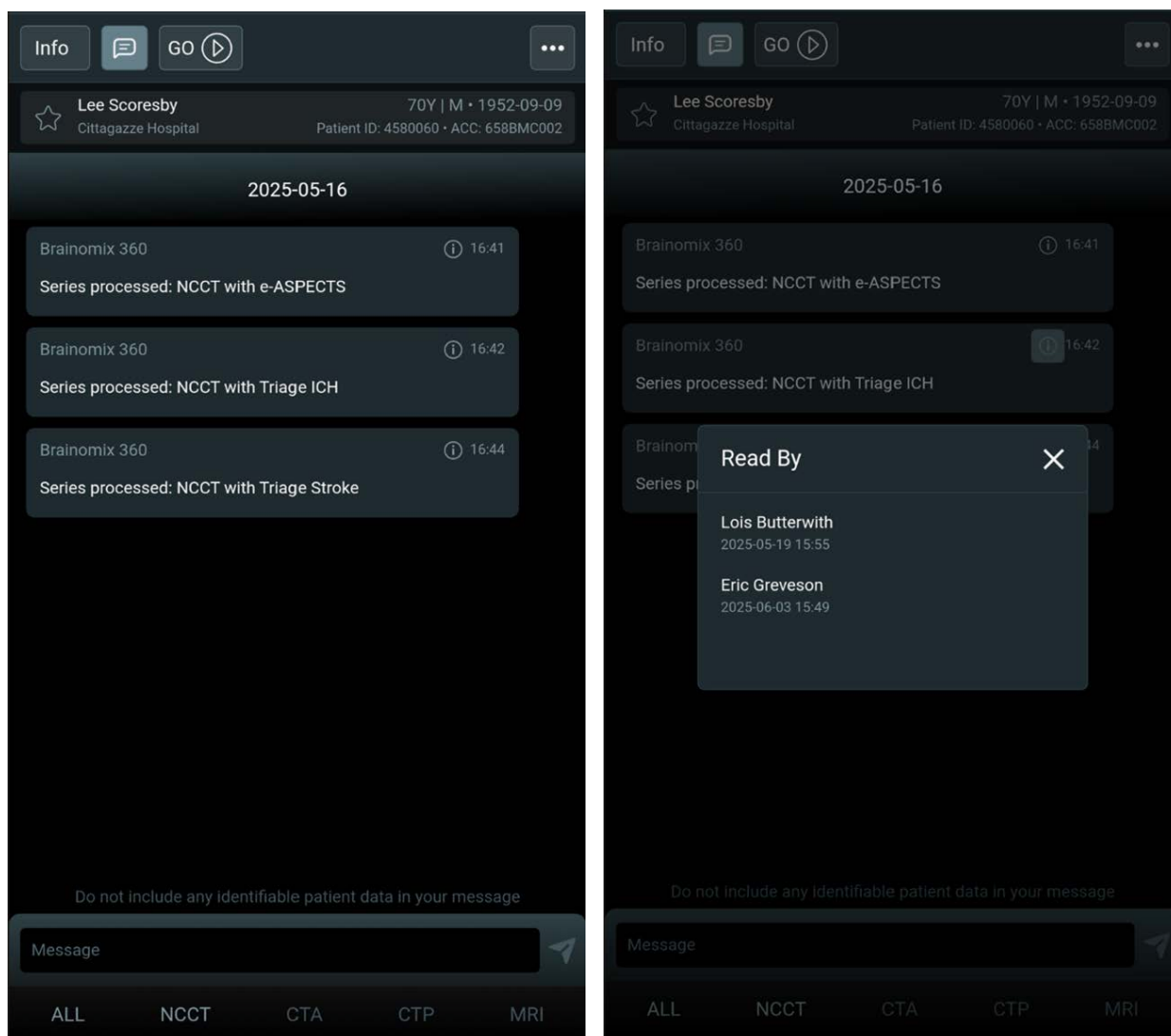

9.4 Označite bolnika za poseg


Če to funkcijo omogoči skrbnik sistema, lahko ročno označite bolnika za posredovanje iz pregledovalnika bolnikov.

Pritisnite gumb 'GO' in povlecite za potrditev. Vsi uporabniki, ki imajo omogočena obvestila o posegih, bodo obveščeni, da je bil bolnik označen.

Če je treba, lahko oznako prekličete, pri čemer bodo uporabniki, ki imajo omogočena obvestila o posegih, obveščeni o preklicu.

Za že označenega bolnika je mogoče poseg označiti kot dokončan.

Upoštevajte, da je to izključno ročno komunikacijsko orodje in te funkcije ni mogoče sprožiti z uporabo samodejnih rezultatov.

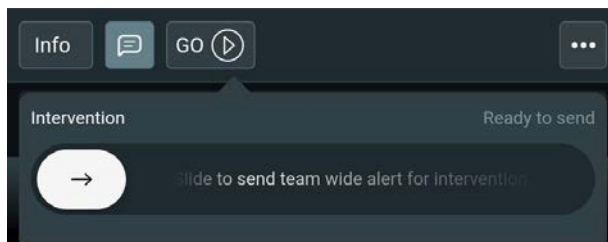

10 Oblika izvoženih rezultatov

10.1 DICOM

Če je konfigurirano na vašem spletnem mestu, bodo serije DICOM prenesene v PACS prek omrežne povezave DICOM, ko bo obdelava zaključena.

10.2 Sinhronizacija v oblaku

Če je bilo konfigurirano na vaši strani, bodo vsi rezultati sinhronizirani s storitvijo Brainomix 360 Cloud z izbirno psevdonimizacijo. Rezultate si je mogoče ogledati v Brainomix 360 Cloud, kakor da bi bil posnetek obdelan tam.

10.3 Obvestila mobilne aplikacije

Če je omogočena sinhronizacija s Brainomix 360 Cloud, je mogoče konfigurirati potisna obvestila za obveščanje uporabnikov aplikacije Brainomix 360 Mobile, da je na voljo rezultat.

10.4 Poročila o bolniku

Če je konfigurirano na vašem spletnem mestu, bodo poročila bolnika (PDF oziroma slike), ki vsebujejo pregled vseh načinov slikanja in rezultatov za bolnika, poslana na konfigurirane PACS prek omrežne povezave DICOM.

11 Nalaganje in obdelava

Ta razdelek se nanaša samo na Brainomix 360. Posnetkov ni mogoče naložiti ali obdelati neposredno v Brainomix 360 Cloud.

11.1 Obdelava posnetkov

Poteki dela

Brainomix 360 je mogoče konfigurirati tako, da zagotavlja različne delovne postopke za uporabo v akutni klinični poti ali za klinične študije. Vsak potek dela je mogoče konfigurirati tako, da pošlje rezultate različnim ciljnim napravam DICOM.

Na voljo sta dva privzeta sklopa potekov dela: 'Akutno' in 'Študija'. Akutni poteki dela so namenjeni za obdelovanje majhnega števila posnetkov z visoko prioriteto, medtem ko so študijski poteki dela primerni za obdelovanje velikega števila posnetkov z nizko prioriteto. Če se posnetek obdeluje s študijskim potekom dela, ko je prejeti akutni posnetek, bo Brainomix 360 obdelavo ustavil in bo pred nadaljevanjem obdelal akutno slikanje.

Za pomoč pri konfiguraciji vaših potekov dela in integracije z zunanjimi sistemi (PACS, naprava za CT slikanje, elektronska pošta itn.), se obrnite na lokalnega distributerja ali podporo za pomoč uporabnikom Brainomix.

Ročni prenos DICOM

1. Poskrbite, da sta izvorna naprava DICOM (npr. PACS ali naprava za CT-slikanje) in kontrolna aplikacija (npr. pregledovalnik PACS) konfigurirani z naslovom strežnika Brainomix 360 in naslovom entitete aplikacije za ustrezno čakalno vrsto prejetih posnetkov Brainomix 360, povezano z želenimi poteki dela (glejte zgoraj). Sistemski skrbnik vam bo lahko pomagal pri njihovi konfiguraciji.
2. Z uporabo nadzorne aplikacije DICOM prenesite serijo posnetkov na strežnik Brainomix 360. Več informacij poiščite v navodilih za aplikacijo.
3. Strežnik Brainomix 360 bo samodejno začel obdelovati serijo.
4. Spremljanje obdelave v spletnem brskalniku:
 1. V spletnem brskalniku pojdite na naslov strežnika Brainomix 360
 2. Če aplikacije v zadnjem času niste uporabljali, se boste morali prijaviti v trenutni spletni brskalnik. Prijavite se, kot je opisano v prejšnjem razdelku.
 3. V menijski vrstici na vrhu strani izberite **Seznam bolnikov**.
 4. Na seznamu bolnikov se mora prikazati nov posnetek. Če se to ne zgodi, preverite napake v dnevniku DICOM.
5. Če je konfigurirano, se rezultati DICOM po končani obdelavi samodejno pošljejo v sistem PACS. Za ogled teh rezultatov uporabite pregledovalnik PACS.
6. Za ogled rezultatov v spletnem brskalniku kliknite bolnika v seznamu bolnikov.

Samodejen prenos DICOM


Zunanjo aplikacijo je mogoče konfigurirati za samodejni prenos serij posnetkov na strežnik Brainomix 360.

Če je konfigurirano, se rezultati DICOM po končani obdelavi samodejno pošljejo v sistem PACS. Za ogled teh rezultatov uporabite pregledovalnik PACS. V tej konfiguraciji vam sploh ni treba uporabljati spletnega vmesnika Brainomix 360.

Lahko pa se tudi prijavite v sistem in posnetki se bodo pojavili v seznamu bolnikov takoj, ko bodo v vrsti za obdelavo. Rezultate si lahko ogledate tako, da kliknete bolnika. Dejavnost omrežja DICOM lahko spremljate z ogledom dnevnika DICOM.

Ročno nalaganje prek spletnega vmesnika

1. Prijavite se v Brainomix 360
2. Odprite meni z ikono menija na vrhu strani.
3. V meniju izberite **Naložite serijo**.

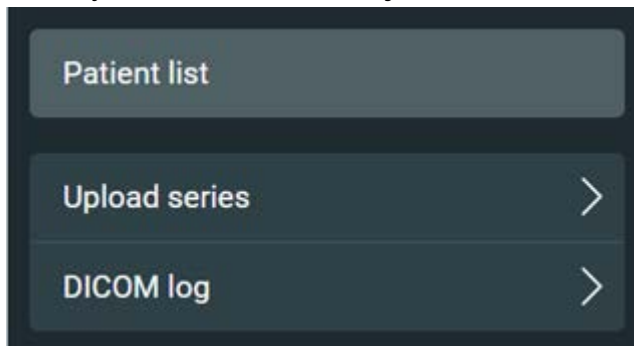

4. V spustnem meniju pod območjem za nalaganje izberite ustrezno čakalno vrsto prejetih posnetkov. Ta nastavitev bo privzeto nastavljena na uporabo čakalne vrste prejetih posnetkov.
5. Kliknite **Izberite datoteke**, da izberete datoteke slik DICOM ali stisnjene datoteke zip, ki vsebujejo slike DICOM.
Nasvet: Datoteke lahko povlečete in spustite neposredno na območje za nalaganje, če brskalnik podpira funkcijo povleci in spusti.
Opomba: Če izberete preveč datotek, jih bo brskalnik zavrnil. Če se to zgodi, morate namesto tega slike DICOM stisniti v eno datoteko zip in jo naložiti.
6. Vaše datoteke bodo naložene in indeksirane. Če je datotek zelo veliko, lahko to traja več minut.
7. Posnetki bodo samodejno usmerjeni v potek dela. Ko je nalaganje končano, kliknite **V redu**.
8. Ko se obdelava konča, se samodejno pošljejo elektronska sporočila z rezultati in rezultati DICOM, kot je nastavljeno za potek dela.
9. Kliknite bolnika na seznamu bolnikov, da si rezultate ogledate v spletnem brskalniku.

11.2 Dnevnik DICOM

Kliknite povezavo 'Dnevnik DICOM' za ogled dnevnika serije DICOM, ki jo je strežnik Brainomix 360 zahteval, prejel in poslal.

DICOM Log

Search for a Patient ID, Patient Name, Accession number, Series instance UID or Internal patient UID:

Search

Filter by event type

☒ Select all

☒ Series requested

☒ Series received

☒ At least one workflow can process the series

☒ No workflows can process the series

☒ Upload failed

☒ Transfer failed

☒ Series sent to external system

☒ New series was found by querying the external system

Filter by dates

2025-07-31

-

2025-08-20

Time	Patient ID	Name	Accession number	
2025-08-08 09:52:28 BST	ID1A	Name 1A	2010357	View
Series instance UID	1.3.12.2.1107.5.1.4.24320.4.0.5219886421837613			
Description	Transfer failed			
Details	Exception while processing command 'store': Association Request Failed: 0006:031c TCP Initialization Error: No route to host			
Internal patient UID	bdb17958-83f8-4a35-abc0-e50eae5d335b			

12 Skrbništvo

Skrbniki imajo na voljo dodatne funkcije za upravljanje uporabnikov, brisanje posnetkov in konfiguracijo integracije sistema Brainomix 360 v klinični potek dela. Na splošno teh nastavitev ne bo treba spreminjati in nepravilne nastavitve lahko vodijo v izgubo podatkov, nepravilno delovanje ali ogroženo varnost. Če potrebujete pomoč pri integraciji svojega sistema Brainomix 360 v svoj klinični potek dela, se obrnite na svojega lokalnega distributerja ali podporo za pomoč uporabnikom pri Brainomix.

13 Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav, ki se pojavijo med uporabo, ali če se prikažejo kakršna koli sporočila o napakah, se obrnite na lokalnega skrbnika ali podporo Brainomix tako, da uporabite eno od možnosti za stik, ki so navedene v razdelku Zakonsko predpisane informacije.

14 Vzdrževanje in nadgradnje storitev

V primeru načrtovanega vzdrževanja bo družba Brainomix vnaprej obvestila zadevne uporabnike, da se izvajajo vzdrževalna dela in o pričakovani stopnji prekinitve storitve. Dostop uporabnika se lahko med obdobjem vzdrževanja zavrne. Če je aplikacija Brainomix 360 Mobile nameščena v mobilni napravi, poskrbite za posodobitev na najnovejšo različico, ko se pojavi poziv ali ko je na voljo v trgovini Google Play ali Apple App Store.

15 Poročanje o dogodkih

Če ste odkrili morebitno težavo s katero koli od naših storitev iz sklopa Brainomix 360, se obrnite na nas prek support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>). Upoštevajte, da za vse podatke, ki jih posredujete, velja naš pravilnik o zasebnosti (<https://www.brainomix.com/privacy-eu/#:~:text=For%20users%20of%20Brainomix%20products,in%20order%20to%20provide%20support>). Če je prišlo do resnega dogodka v zvezi s katerim koli našim izdelkom, ga prijavite tudi pristojnemu lokalnemu organu v svoji državi:

- državi članici Evropske unije, (<https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/national-competent-authorities-human>)
- Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severni Irski (<https://www.gov.uk/report-problem-medicine-medical-device>)
- Švici (<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html>)
- Turčiji (<https://www.titck.gov.tr/>)

16 Razgradnja

V primeru prekinitve in odstranitve storitve bo Brainomix usklajeval postopek z ustreznimi zainteresiranimi stranmi v vaši organizaciji, da bi zagotovil nemoteno in popolno odstranitev sistema Brainomix 360 , vključno z vsemi sredstvi in podatki. Učinek odstranitve bo ocenjen, da se ugotovi, ali bo povzročil spremembe v kliničnem delovnem procesu in/ali konfiguraciji drugih sistemov. Vsa sredstva, ki so v lasti družbe Brainomix, bodo vrnjena, pri čemer bodo integracije odstranjene iz sistema, da se zagotovi, da se podatki ne bodo več prenašali v sredstva, ki bodo razgrajena, ali iz njih. Za več informacij o postopku razgradnje vašega sistema Brainomix 360 se obrnite na lokalnega distributerja ali podporo Brainomix.

17 Simboli

Simbol	Opis simbola
	Navaja ime in naslov proizvajalca medicinskega pripomočka.
	Označuje datum izdelave medicinskega pripomočka.
	Označuje nosilec, ki vsebuje informacije o edinstvenem identifikatorju pripomočka.
	Označuje pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti.
	Označuje pooblaščenega zastopnika v Švici.
	Označuje subjekt, ki uvaža medicinski pripomoček v lokalno okolje.
	Označuje, da mora uporabnik prebrati navodila za uporabo.
	Označuje, da je potrebna previdnost pri upravljanju pripomočka ali krmilnika v bližini mesta, kjer je simbol nameščen, ali da se mora izvajalec zavedati trenutne situacije ali ukrepati, da bi se izognil neželenim posledicam.
	Označuje, da je izdelek medicinski pripomoček.
	Oznaka CE pomeni, da je izdelek skladen z veljavnimi predpisi Evropske unije.

18 Zahtevanje papirnega izvoda

Če potrebujete natisnjen izvod te revizije uporabniškega priročnika za Brainomix 360 e-ASPECTS, si natisnite to spletno stran (desni klik + Natisni ali prenesite najnovejšo revizijo z našega spletnega mesta (<https://www.brainomix.com/docs/>)). Če vam ta možnost ni na voljo, se obrnite na nas prek support@brainomix.com (<mailto:support@brainomix.com>) z zahtevo in tiskan izvod vam bo poslan v 7 koledarskih dneh po prejemu zahteve. Ta storitev je brezplačna.