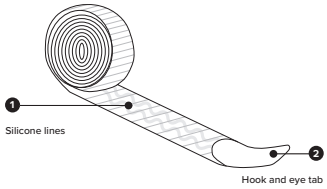
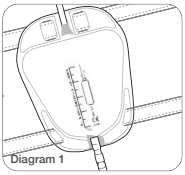
EN Libra® Leg Bag Strap

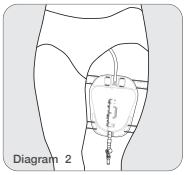
The **Libra®** Leg Bag Strap secures a leg bag to the leg. They feature a hook and eye style fastening for closure.

INSTRUCTIONS FOR USE

PLEASE READ CAREFULLY




Diagram 1


Diagram 2

Important: Do not let your leg bag hang unsupported from your Catheter as this will cause urethral discomfort and trauma.

Before Use

Ensure you are using the correct length strap as indicated in the table overleaf.

1. Feed the longer **Libra® Leg Bag Strap** (60cm or 70cm) through the 4 eyelets at the top of your leg bag **(Diagram 1)**
2. Feed the shorter **Libra® Leg Bag Strap** (40cm or 30cm) through the 2 eyelets at the bottom of your leg bag **(Diagram 1)**
3. Ensure the silicone lines **(Diagram 1)** will be facing your skin
4. Wrap the straps around your thigh or calf in the desired position **(Diagram 2)**
5. Secure using the hook and eye tabs **(Diagram 2)**. Ensure the strap is not overtightened around the leg as this can affect circulation

Cautions

- Use of any medical device carries associated risks. Device failures are rare, however in the event of a device failure of this product, you should contact Clinisupplies GB using the details provided within this leaflet
- If a failure has resulted in a serious incident, such as significant deterioration of health or death, you should contact Clinisupplies GB and your local Competent Authority as soon as possible. Details of your local Competent Authority can be found on your local government website

WASHING INSTRUCTIONS:

1. The **Libra® Leg Bag Strap** can be handwashed. It is not suitable for machine wash.
2. Do not Iron or Tumble dry

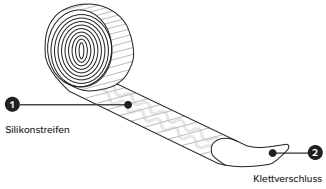


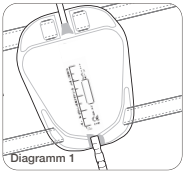
DE Libra® Beinbeutel-Band

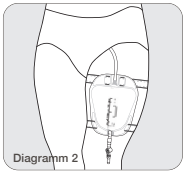
Das **Libra® Beinbeutel-Band** sichert einen Beinbeutel am Bein. Es ist mit einem Haken- und einem Ösenverschluss zum Schließen ausgestattet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE SORGFÄLTIG LESEN




Diagramm 1


Diagramm 2

Wichtig: Lassen Sie Ihren Beinbeutel nicht ungestützt am Katheter hängen, da dies zu Beschwerden und Verletzungen der Harnröhre führt.

Vor dem Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Bandlänge verwenden, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

1. Führen Sie das längere Band des **Libra®-Beinbeutels** (60 cm oder 70 cm) durch die 4 Ösen am oberen Ende des Beinbeutels **(Diagramm 1)**
2. Führen Sie das kürzere Band des Libra®-Beinbeutels (40 cm oder 30 cm) durch die 2 Ösen am unteren Ende des Beinbeutels **(Diagramm 1)**
3. Achten Sie darauf, dass die Silikonschicht **(Diagramm 1)** zur Haut zeigt
4. Legen Sie die Bänder in der gewünschten Position um Ihren Oberschenkel oder Ihre Wade **(Diagramm 2)**
5. Sichern Sie das Band mit den Haken- und Ösenlaschen **(Diagramm 2).** Achten Sie darauf, dass das Band nicht zu fest um das Bein gezogen wird, da dies die Blutzirkulation beeinträchtigen kann

Vorsichtshinweise

- Die Verwendung eines jeden Medizinprodukts ist mit Risiken verbunden. Geräteausfälle sind selten, aber im Falle eines Geräteausfalls dieses Produkts sollten Sie Clinisupplies GB unter Verwendung der in dieser Packungsbeilage angegebenen Details kontaktieren
- Wenn ein Fehler zu einem schwerwiegenden Zwischenfall geführt hat, wie z. B. einer erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Tod, sollten Sie sich so schnell wie möglich an Clinisupplies GB und Ihre zuständige lokale Behörde wenden. Einzelheiten zu Ihrer zuständigen Behörde finden Sie auf der Website Ihrer lokalen Regierung

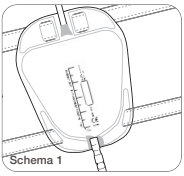
WASCHANWEISUNGEN

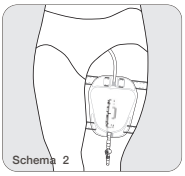
1. Das **Libra® Beinbeutel-Band** kann von Hand gewaschen werden. Es ist nicht für die Maschinenwäsche geeignet
2. Nicht bügeln oder im Wäschetrockner trocknen



FR Libra® Lanière de sac à jambe

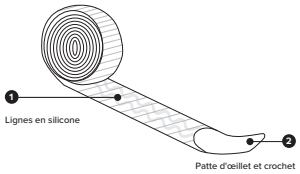
La lanière de sac à jambe **Libra**® permet de fixer la poche à la jambe.
Elle est dotée d'un système de fermeture à crochets et boucles.


Schema 1


Schema 2

MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT



Avant utilisation

Assurez-vous d'utiliser la lanière de la longueur appropriée, tel qu'indiqué dans le tableau au verso.

1. Passez la sangle longue **Libra**® pour poche à urine (60 cm ou 70 cm) à travers les 4 œillets situés en haut de la poche à urine **(voir Schéma 1)**
2. Passez la sangle courte **Libra**® pour poche à urine (40 cm ou 30 cm) à travers les 2 œillets situés en bas de la poche à urine **(voir Schéma 1)**
3. Assurez vous que les lignes en silicone **(Schéma 1)** se trouvent du côté de votre peau
4. Enroulez les lanières autour de votre cuisse ou de votre mollet dans la position souhaitée **(Schéma 2)**
5. Maintenez-les en place à l'aide des languettes à crochets et œillets **(Schéma 2)**. Assurez-vous que la lanière n'est pas trop serrée autour de la jambe afin de ne pas impacter la circulation

Important: Assurez-vous que votre sac de jambe est toujours soutenu par rapport à votre sonde, sans quoi une gêne urétrale et des lésions apparaîtront.

Attention

- Toute utilisation d'un dispositif médical s'accompagne de risques associés. Il est rare que le dispositif connaisse une défaillance, mais si tel est le cas avec ce produit, veuillez contacter Clinisupplies GB en utilisant les coordonnées fournies dans le présent document
- En cas de défaillance ayant entraîné un incident grave, tel qu'une détérioration significative de l'état de santé ou un décès, vous devez contacter Clinisupplies GB ainsi que l'Autorité compétente locale dans les plus brefs délais. Les coordonnées de votre Autorité compétente locale sont disponibles sur le site Internet de votre administration locale

CONSIGNES DE LAVAGE:

1. La lanière de sac à jambe **Libra**® peut être lavée à la main. Elle ne peut pas être lavée en machine.
2. Ne pas repasser ni passer au sèche-linge



Order codes

Ref	Leg position	Size	Use with	Quantity
10622C	Calf	70cm: 30cm	Long Tube and Adjustable Tube Leg Bags	5 pairs
10637T	Thigh	60cm: 40cm	Short Tube and Direct Inlet Leg Bags	5 pairs

SYMBOL EXPLANATION

LOT
EN: Batch code
DE: Chargencode
FR: Numéro de lot

EN: Manufacturer
DE: Hersteller
FR: Fabricant

CE
EN: European conformity mark
DE: Europäisches Konformitätszeichen
FR: Marque de conformité européenne

EN: Date of Manufacture
DE: Herstellungsdatum
FR: Date de fabrication

UDI
EN: Unique device identifier
DE: Eindeutige Gerätekennung
FR: Identifiant de dispositif unique

UK CA
EN: UK conformity mark
DE: GB-Konformitätszeichen
FR: Marque de conformité brittanique

EN: Use-by date
DE: Haltbarkeitsdatum
FR: Date limite d'utilisation

REF
EN: Catalogue number
DE: Katalognummer
FR: Numéro de catalogue

MD
EN: Medical Device
DE: Medizinisches Gerät
FR: Dispositif médical

LATEX
EN: Not made with natural rubber latex
DE: Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
FR: Ne comprend pas de latex de caoutchouc naturel

EC REP
EN: Authorized representative in the European community
DE: Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union
FR: Mandataire agréé dans la communauté européenne/l'union européenne

Clinisupplies

Clinisupplies GB Ltd, 1 Blackmoor Lane, Croxley Park, Watford, Hertfordshire WD18 8GA,
Tel: +44 (0)20 8863 4168 Email: info@clinisupplies.co.uk **www.clinisupplies.co.uk**

EC REP **MD Reps Ltd**
12-16 Bridge Street, Belfast, Northern Ireland, BT1 1LU

UK CA CE

CSF00841_1_v3
07/25