EN Libra® Leg Bag

INTENDED USE: Urine drainage leg bags are designed to collect urine from either sheaths or catheters.
Leg bag straps are intended for securing the leg bags to the calf/thigh of the leg.

Libra® Leg Bags are for the daytime storage and drainage of urine. **Libra®** Leg Bags can also be connected to a Night Bag for overnight drainage. **Libra®** Leg Bags should be changed every 5-7 days.

INSTRUCTIONS FOR USE

PLEASE READ CAREFULLY



Key

1. Protective Cap
2. Ridged Inlet Connector
3. Needle Free Sample Port
4. Inlet Tube
5. Eyelets
6. Graduated Scale*
7. Outlet Tap
8. Date Fitted Box
9. Silicone Sleeve

*The graduated scale is an approximation and should not be used for accurate measurement of urine output.

Before Use

1. Wash Hands
2. Open peel pouch and remove **Libra® Leg Bag** from its packaging
3. Ensure the lever on the outlet tap **(7)** is in the closed position **(Diagram 1)**.
4. Remove the grey protective cap **(1)** from the **Libra®** inlet connector **(2)**



Diagram 1
Close Tap



Diagram 2
Open Tap

Direct Connection

1. Insert the ridged inlet connector **(2)** into the end of the Indwelling Catheter or Sheath.
2. Insert the connector fully to allow a secure connection
3. The **Libra® Leg Bag** should be positioned on the thigh or calf, depending on the tube length, and secured appropriately with the leg bag straps provided.
4. Feed the **Libra® Leg Bag Straps** through the eyelets **(5)** on the bag and ensure the wavy silicone lines face onto the leg
5. Make sure the inlet tubing **(4)** isn't kinked which can restrict the flow of urine

Emptying

1. Empty the **Libra® Leg Bag** by pushing the lever on the outlet tap **(7)** downwards **(Diagram 2)**
2. After emptying, wipe the outlet tap with a tissue and pat a number of times before gently wiping around the inside of the valve. This will dislodge any residual urine
3. Remember to close the tap after emptying **(Diagram 1)**
4. The outlet tap **(7)** can be twisted to avoid accidental emptying

Overnight Drainage

If you require additional drainage for overnight use, a night bag can be connected as part of an overnight link system

1. When you go to bed, do not disconnect your **Libra® Leg Bag** from your Catheter or Sheath
2. Insert the connector of your Night Bag to the silicone sleeve **(9)** on your **Libra® Leg Bag**. Insert the connector fully to allow a secure connection
3. Once connected, turn the **Libra® Leg Bag** tap to the open position **(Diagram 2)** to allow the overnight drainage into the Night Bag
4. Before disconnecting the Night Bag in the morning, ensure the **Libra® Leg Bag** tap is in the closed position **(Diagram 1)**

Libra® Leg Bags with adjustable tubing

Adjustable **Libra® Leg Bag** have a 45cm tube **(4)**

If connecting directly to a Sheath, these can be cut to the desired length and fitted with the spare connector included in the pouch:

1. Place the **Libra® Leg Bag** on your leg in the desired position and secure as instructed above
2. Measure how long you need the tubing and cut to the desired length
3. Remove the **Libra® Leg Bag** from your leg and insert the spare connector into the tube ensuring it is secure
4. Connect the **Libra® Leg Bag** as per previously instructed

Caution: Do not cut the tube length yourself if you are connecting to an Indwelling Catheter as the sterility of the product may become compromised.

Storage and Disposal

1. The **Libra® Leg Bag** should be stored at an ambient temperature and allowed to return to room temperature before use
2. Dispose with normal household waste – do not flush down the toilet

Others

- Ensure you fill in the Date Fitted Box **(8)** to allow you to monitor how long the **Libra® Leg Bag** has been in use. Change the Leg Bag every 5-7 days.
- The **Libra® Leg Bag** should not be reused after disconnection from a catheter due to increased risk of infection
- Keep out of the reach of children
- Use of any medical device carries associated risks. Device failures are rare, however in the event of a device failure of this product, you should contact Clinisupplies using the details provided within this leaflet
- If a failure has resulted in a serious incident, such as significant deterioration of health or death, you should contact Clinisupplies and your local Competent Authority as soon as possible. Details of your local Competent Authority can be found on your local government website

Sterilization:

Leg bags are sterilized with EO gas. They are not suitable for resterilization


DA Libra® Benpose

TILTÆNKT BRUG: Urindrænposer til ben er designet til at opsamle urin fra enten kapper eller kateter.
Stropper til benposer er beregnet til at fastgøre benposerne til benets læg.

Libra® Benposer er til opbevaring i dagtimerne og aftapning af urin. **Libra®** Benposer kan også tilsluttes til en Natpose til drænning natten over. **Libra®** Benposer skal udskiftes hver 5-7 dage.

BRUGSANVISNING

LES DEN OMHYGGELIGT

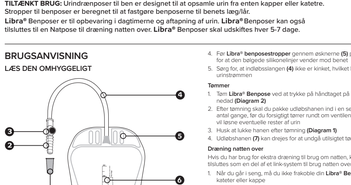

Forklaring

1. Beskyttelseshætte
2. Rillet indstøbsstudekonnektor
3. Nålefri prøveport
4. Indføringslange
5. Øskner
6. Gradueret skala*
7. Udløbshane
8. Feltet Dato for montering
9. Silikonehylster

*Den graderede skalaen er en tilnærmelse og bør ikke bruges til nøjagtig måling af urinen

For brug

1. Vask hænder
2. Åbn skrælposen, og tag **Libra® Benpose** fra emballagen
3. Sørg for at håndtaget på udløbshanen **(7)** er i den lukkede position **(Diagram 1)**
4. Fjern den grå beskyttelseshætte **(1)** fra **Libra®** indføringskonnektoren **(2)**

Diagramm 1:
Hahn schließen

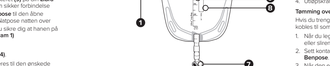


Diagramm 2:
Hahn öffnen

Direkte forbindelse

1. Læg det rillede indstøbsstik **(2)** ind i enden af det fastlagende kateter eller skeden.
2. Indsæt konnektoren helt for at sikre en sikker forbindelse
3. **Libra® Benpose** skal placeres på låret eller læggen, afhængigt af slangelængden, og fastgøres korrekt med de medfølgende remstrammere

4. Før **Libra® benposestropper** gennem åbninger **(5)** på posen og sørg for at den bølgede silikonelinje vender mod benet
5. Sørg for, at indføringslangen **(4)** ikke er knikket, hvilket kan begrænse urinstrømmen

Tømning

1. Tøm **Libra® Benpose** ved at trykke på håndtaget på udløbshanen **(7)** nedad **(Diagram 2)**
2. Efter tømning tørst dit pakke udløbshanen ind i en servet og klappe et antal gange, før du forsigtigt tørrer rundt om ventilens inderside. Dette vil fjerne eventuelle rester af urin
3. Husk at lukke hanen efter tømning **(Diagram 1)**
4. Udløbshanen **(7)** kan drejes for at undgå utilsigtet tømning

Drænning natten over

Hvis du har brug for ekstra drænning til brug om natten, kan en natpose tilsluttes som en del af et ble-system til brug natten over

1. Når du går i seng, må du ikke frakoble din **Libra® Benpose** fra dit kateter eller kappe
2. Indsæt konnektoren på din natpose på silikonehylsteret **(9)** på din **Libra® Benpose**. Indsæt konnektoren helt for at sikre en sikker forbindelse
3. Når tilsluttet, skal du dreje hanen på **Libra® Benpose** til den åbne position **(Diagram 2)** for at tillade drænning ind i Natposen natten over
4. Før du frakobler natposen om morgenen, skal du sikre dig at hanen på **Libra® Benpose** er i den lukkede position **(Diagram 1)**

Libra® Lår Benposer med slange, der kan justeres

Justerbar **Libra® Benpose** har en slange på 45 cm **(4)**

Hvis de tilsluttes direkte til en Kappe, kan de beskæres til den ønskede længde og monteres med den ekstra konnektor, der findes i posen natten:

1. Placer **Libra® Benpose** på benet i den ønskede position og fastgør den som beskrevet på over
2. Mål, hvor lang slangen skal være, og beskær den til i den ønskede længde
3. Fjern **Libra® Benpose** fra dit ben, og sæt den ekstra konnektor ind i indføringslangen
4. Tilslut **Libra® Benpose** som tidligere instruert

Forsigtig: Du må ikke selv klippe længden af slangen, hvis du tilslutter den til et fastliggende kateter, da produktets sterilitet kan blive kompromitteret.

Opbevaring og bortskaffelse

1. **Libra® Benpose** skal opbevares ved omgivelsestemperatur og have lov til at komme op på stuetemperatur før brug
2. Bortskaf med almindeligt husholdningsaffald – skyl ikke ud i toilettet

Forsigtig

- Sørg for at udfylde feltet Dato for montering **(8)** to giver dig mulighed for at overvåge, hvor længe **Libra® Benpose** har været i brug. Skift benposen hver 5-7 dage.
- **Libra® Benpose** bør ikke genbruges efter frakobling af et kateter på grund af øget risiko for infektion
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Brug af medicinske udstyr medfører risici. Enhedsfejl er sjældne, men i tilfælde af en enhedsfejl på dette produkt skal du kontakte Clinisupplies ved hjælp af oplysningerne i denne folder
- Hvis en fejl har resulteret i en alvorlig hændelse, såsom betydelig forringelse af helbredet eller død, skal du kontakte Clinisupplies og din lokale kompetente myndighed så hurtigt som muligt. Oplysninger om din lokale kompetente myndighed kan findes på din lokale regerings websted

Sterilisering:

Benposerne er steriliseret med ethylenoxid (EO). De er ikke beregnet til gensterilisering.

NO Libra® Benpose

TILTENKT BRUK: Urindrenasjeposer er utformet for å samle opp urin fra enten kateter eller hylser.
Stropper til benposer er beregnet på å sikre benposene til leggen/låret på benet.

Libra® benposer er beregnet for oppbevaring og drenering av urin på dagtid. **Libra®** benposer kan også kobles til en nattpose for drenering over natten. **Libra®** benposer bør skiftes hver 5.–7. dag.

BRUKSANVISNING

LES NØYE



Forklaring

1. Beskyttelseshette
2. Rillet innløpskobling
3. Nålefri prøveport
4. Innløpsrør
5. Maljer
6. Gradert skala*
7. Utløpskran
8. Dato montert boks
9. Silikonhylse

*Den graderte skalaen er en utjevknetting og bør ikke brukes til nøyaktig måling av urin

For bruk

1. Vask hendene
2. Åpne peel-posen og ta ut **Libra® Benpose** fra emballasjen
3. Kontroller at spaken på utløpskranen **(7)** er i lukket posisjon **(diagram 1)**
4. Fjern den grå beskyttelseshetten **(1)** fra **Libra®** innløpskontakten **(2)**



Diagram 1:
Lukk kranen



Diagram 2:
Åpne kran

Direkte tilkobling

1. Sett den rillede innløpskoblingen **(2)** inn i enden av det innelliggende kateteret eller mansjetten.
2. Sett kontakten helt inn for å få en sikker tilkobling
3. **Libra® Benpose** bør plasseres på låret eller leggen, avhengig av slangelengden, og festes på passende måte med de medfølgende stroppene
4. For **Libra® Benposestropper** gjennom hullene (5) på posen, og sørg for at de bølgede silikonlinjene vender mot benet
5. Sørg for at innløpsslangen **(4)** ikke er knekt, noe som kan begrense urinstrømmen

Tømming

1. Tøm **Libra® Benpose** ved å skyve spaken på utløpskranen **(7)** nedover **(Diagram 2)**
2. Etter tømming, pakk utløpskranen med et papirtømrekkerte og klapp flere ganger før du forsiktig tørker rundt innsiden av ventilen. Dette vil fjerne eventuell gjenværende urin
3. Husk å lukke kranen etter tømming **(Diagram 1)**
4. Utløpskranen **(7)** kan vris for å unngå utilsiktet tømming

Tømming over natten

Hvis du trenger ekstra drenering for bruk over natten, kan en nattpose kobles til som en del av et nattoblingssystem

1. Når du legger deg, må du ikke koble **Libra®** Benpose fra kateteret eller slirer ditt
2. Sett kontakten på nattposen inn i silikonhylsen **(9)** på **Libra®** Benpose. Sett kontakten helt inn for å få en sikker tilkobling
3. Når den er koblet til, vri du **Libra®** Benpose kranen til åpen posisjon **(Diagram 2)** for å tillate drenering inn i nattposen over natten
4. Før du kobler fra nattposen om morgenen, må du forsikre deg om at **Libra® Benpose**-kranen er i lukket posisjon **(Diagram 1)**

Libra® benposer med justerbar slange

Justerbar **Libra® Benpose** har en 45 cm lang slange **(4)**

Hvis du kobler direkte til et hylster, kan disse kuttes til ønsket lengde og monteres med reservekontakten som følger med i posen.

1. Plasser **Libra® Benpose** på benet i ønsket posisjon, og fest den som beskrevet over
2. Mål hvor lang slange du trenger, og klipp den til ønsket lengde
3. Fjern **Libra® Benpose** fra benet, og sett reservekontakten inn i slangeenden
4. Koble til **Libra® Benpose** i henhold til instruksjonene på side 1

Forsiktig: Ikke klipp av slangelengden selv hvis du kobler den til et innelliggende kateter, da produktets sterilitet kan bli svekket.

Oppbevaring og avhending

1. **Libra® Benpose** bør oppbevares ved omgivelsestemperatur og få lov til å oppnå romtemperatur før bruk.
2. Kast sammen med vanlig husholdningsavfall – ikke spyl ned i toalettet.

Forsiktig

- Forsikre deg om at du fyller ut boksen (8) for å kunne følge med på hvor lenge **Libra® Benpose** har vært i bruk. Skift benposer hver 5.–7. dag.
- **Libra® Benpose** skal ikke brukes på nytt etter frakobling fra et kateter på grunn av økt infeksjonsrisiko
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Bruk av medisinsk utstyr er forbundet med risiko. Feil på enheten er sjeldne, men i tilfelle feil på dette produktet bør du kontakte Clinisupplies ved hjelp av opplysningene i denne brosjyren
- Hvis en feil har resultert i en alvorlig hendelse, for eksempel betydelig forverring av helsetilstanden eller dødsfall, bør du kontakte Clinisupplies og din lokale kompetente myndighet så snart som mulig. Du finner informasjon om din lokale kompetente myndighet på nettstedet til din kommune

Sterilisering:

Benposene er sterilisert med etylenoksid (EO). De er ikke beregnet på resterilisering.

SV Libra® benpåse

AVSEDD ANVÄNDNING: Dränagepåsar för urin är designade för att samla upp urin från antingen katetrar eller hylsor.
Benpåsremmar är avsedda för att fästa benpåsen på vaden/låret.

Libra® benpåsar är avsedda för förvaring och dränering av urin under dagtid. **Libra®** benpåsar kan även anslutas till en nattpåse för nattdränage. **Libra®** benpåsar ska bytas var 5:e till 7:e dag.

BRUKSANVISNING

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA



Förklaring

1. Skyddshätta
2. Räfflad inloppsanslutning
3. Nålfri provport
4. Inloppsslang
5. Hål
6. Graderad skala*
7. Utloppskran
8. Plats för anslutningsdatum
9. Silikonhylsa

*Den graderade skalan är en uppskattning och ska inte användas för exakt mätning av urinen

Används före

1. Tvätta händerna
2. Öppna påsen och ta ut **Libra® benpåse** från förpackningen
3. Se till att kranspaken på utloppskranen **(7)** är i stängd position **(Bild 1)**
4. Avlägsna den grå skyddshatten **(1)** från **Libra®** inloppskoppling **(2)**



Bild 1:
Stängd kran



Bild 2:
Öppen kran

Direktanslutning

1. För in den räfflade inloppskoppling **(2)** i änden av kvarkateter eller hylsa
2. Fär in kopplingen helt för en säker anslutning

3. **Libra® benpåse** ska placeras på låret eller vaden, beroende på slanglängden, och fästs på lämpligt sätt med de medföljande benpåsremmarna
4. Dra **Libra® benpåsremmar** genom hålen **(5)** på påsen och se till att de vågiga silikonlinjerna är vända mot benet.
5. Se till att inloppsslangen **(4)** inte har veck som kan förhindra urinflödet.

Tömning

1. Töm **Libra® benpåse** genom att öta spaken på utloppskranen **(7)** nedåt **(Bild 2)**
2. Linda utloppskranen med en servett efter tömning och klappa några gånger innan du försiktigt torkar av insidan av ventilen. Detta avlägsnar eventuella urinrester
3. Kom ihåg att stänga kranen efter tömning **(Bild 1)**
4. Utloppskranen **(7)** kan vridas för att undvika oavsiktlig tömning.

Nattdränage

Om du behöver ytterligare dränage för användning över natten kan en nattpåse anslutas som en del av ett nattanslutningssystem

1. Koppla inte ur din **Libra® benpåse** från katetern eller hylsan när du går till sängs.
2. För in nattpåsens koppling i silikonhylsan **(9)** på **Libra® benpåse**. För in kopplingen helt för en säker anslutning
3. När den är ansluten den vrider du kranen på **Libra® benpåse** till öppen position **(Bild 2)** för att möjliggöra dränage över natten till nattpåsen.
4. Säkerställ att kranen på **Libra® benpåse** är stängd **(Bild 1)** innan du kopplar loss nattpåsen på morgonen.

Libra® benpåsar med justerbar slang

Justerbar **Libra® benpåse** har en 45 cm lång slang **(4)**

Om den ansluts direkt till en hylsa kan den klippas till önskad längd och monteras med extrakopplingen som medföljer i påsen:

1. Placera **Libra® benpåse** på benet i önskad position och fäst den enligt instruktionerna ovan
2. Mät hur lång slang du behöver och klipp till önskad längd.
3. Avlägsna **Libra® benpåse** från benet och för in extraanslutningen i inloppsslangen
4. Anslut **Libra® benpåse** enligt tidigare instruktioner

Försiktighet Klipp inte själv av slangen om du ansluter den till en kvarkateter eftersom produktsteriliteten kan äventyras.

Förvaring och kassering

1. **Libra® benpåse** ska förvaras vid rumstemperatur och ska ha uppnått rumstemperatur innan användning.
2. Kassera med vanligt hushållsavfall – får inte spolas ner i toaletten.

Försiktighet

- Se till att fylla i plasten för anslutningsdatum **(8)** för att övervaka hur länge **Libra® benpåse** har använts. Byt benpåsen var 5:e till 7:e dag.
- Använd inte **Libra® benpåse** efter återanslutning till en kateter på grund av risk för infektionsrisken.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Användning av medicinteknisk produkter medför risker. Produktfel är ovanliga, men vid händelse av produktfel ska du kontakta Clinisupplies med hjälp av uppgifterna som tillhandahålls i denna broschyren.
- Om ett fel har lett till en allvarlig incident, såsom betydande försämring av hälsa eller dödsfall ska du kontakta Clinisupplies och lokal behörig myndighet så snart som möjligt. Uppgifter om lokal behörig myndighet återfinns på din lokala myndighets webbplats.

Sterilisering:

Benpåsarna är sterila med etylenoxid (EO). De är inte avsedda för resterilisering.

FI Libra® reisipussi

KÄYTTÖTARKOITUS: Virtsankeräysreisipussit on tarkoitettu kerämämän virtsaa joko virtsankeräjästä tai katetrista.
Jalkaihmat on tarkoitettu kiinnittämään reisipussi potilaan reiteen tai pohkeeseen.

Libra® reisipussi on tarkoitettu virtsan päivän aikana tapahtuvaan keräämiseen ja säilyttämiseen. **Libra®** reisipussin voi yhdistää myös yökeräyspussiin yön yli kestävää keräystä varten. **Libra®** reisipussi on vaihdettava uusiten 5–7 vuorokauden välein.

KÄYTTÖOHJEET

LUE LÄPI HUOLELLISESTI

Selitys

1. Suojus
2. Porrastettu sisääntuloliitin
3. Neulavapaa näytteenottoportti
4. Sisääntulo
5. Kiinnityssilmukat
6. Mitta-asteikko*
7. Ulostuloliitin
8. Käyttöönottopäivän merkintä
9. Silikonihylsky

*Mitta-asteikko on suuntaa antava, eikä sitä tule käyttää virtsamäärän tarkkaan mittaamiseen.

Ennen käyttöä

1. Pese kätesi
2. Avaa avaa vedettävä tuotepakkaus ja ota **Libra®-reisipussi** esille.
3. Varmista, että ulostulohana **(7)** on kiinni-asennossa **(kuva 1)**.
4. Poista **Libra®** sisääntuloliittimen **(2)** harmaa suojus **(1)**.

Kuva 1:
hana kiinni

Kuva 2:
hana auki

Yhdistäminen suoraan

1. Työnnä porrastettu sisääntuloliitin **(2)** kestokatetriin tai virtsankeräjälaan.

2. Työnnä liitin kokonaan sisään, jotta liitos on pitävä.
3. **Libra®-reisipussi** tulee kiinnittää pohkeeseen tai reiteen, riippuen letkun pituudesta ja sitä tulee kiinnittää mukana toimitetuilla reisipussin hihnojen avulla.
4. Työnnä **Libra®-reisipussin** hihnat pussissa olevien kiinnityssilmukoiden **(5)** läpi niin, että pussissa olevat silikonipomut tulevat jalkaa vasten.
5. Varmista, että pussin tuloletku **(4)** ei ole taittunut, jotta virtsa pääsee virtaamaan vapaasti.

Tyhjentäminen

1. Tyhjennä **Libra®-reisipussi** painamalla ulostulohanan **(7)** vipua alas **(kuva 2)**.
2. Kun pussi on tyhjä, kierrä ulostulohanan ympärille paperipyyhe, napauta sitä muutaman kerran ja pyyhi sitten hanan sisäpuoli varovasti. Näin varmistat, että virtsaa ei jää hanaan.
3. Muista sulkea hana tyhjennyksen jälkeen **(kuva 1)**.
4. Ulostulohanaa **(7)** voi kiertää tahattomien tyhjentymisen estämiseksi.

Yön yli kestävä virtsankeräys

Jos virtsaa on kerättävä yön yli, kerätysjärjestelmän tilavuutta voi kasvattaa yhdistämällä reisipussin yökeräyspussiin.

1. Kun menet nukkumaan, älä irrota **Libra®-reisipussia** katetrista tai virtsankeräjästä.
2. Työnnä **Libra®-reisipussin** silikonihylsyn **(9)** yökeräyspussin tuloliitoksen. Työnnä liitin kokonaan sisään, jotta liitos on pitävä.
3. Kun pussi on yhdistetty, käännä **Libra®-reisipussin** ulostulohana auki-asentoon **(kuva 2)**, jotta yöllinen virtsa pääsee valumaan yökeräyspussiin.
4. Ennen kuin irrotat yökeräyspussin aamulla varmista, että **Libra®-reisipussin** ulostulohana on kiinni-asennossa **(kuva 1)**.

Mukautuvilla Libra-reisipussin letku

Libra®-reisipussin mukana toimitetun mukautuvilla 45 cm letku **(4)**.

Jos letku yhdistetään suoraan virtsankeräjään, sen voi leikata pituuteen, jota tarvitaan. Käytä pussissa olevaa kumpaa tahansa oleva liitin:

1. Aseta **Libra®-reisipussi** haluamaasi kohtaan jalassa, ja kiinnitä se ylläolevien ohjeiden mukaan.
2. Mittaa, miten pitkän letkun tarvitset, ja leikkaa se sopivan mittaiseksi.
3. Poista **Libra® Leg Bag** -reisipussi jalasta ja yhdistä varalliin pussin mukana toimitetulla liittimellä.
4. Sulut ole **Libra®-reisipussi** aiempien ohjeiden mukaisesti.

Varoitus: Jos yhdistät letkun kestokatetriin, älä leikkaa letkua itse, sillä tämä voi vaarantaa tuotteen steriliyden.

Säilytys ja hävittäminen

1. **Libra®-reisipussi** voi säilyttää normaalissa ympäristön lämpötilassa, kunhan sen annetaan palautua huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.
2. Hävitä osat tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Älä huuhtele sitä alas WC:stä.

Varoitukset

- Muista merkitä pussiin käyttöönottopäivä **(8)**, jotta tiedät, miten kauan **Libra® Leg Bag** -reisipussi on ollut käytössä. Pussi on vaihdettava 5–7 vuorokauden välein.
- **Libra®-reisipussia** ei pidä ottaa uudelleen käyttöön, kun se on irrotettu katetrista, koska tämä kasvattaa infektion riskiä.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Kaikkien lääkinnällisten laitteiden käyttöön liittyy riskejä. Laitevial ovat harvinaisia. Jos sellainen kuitenkin ilmenee, ota yhteys Clinisupplies -yhtiöön näissä ohjeissa annettujen yhteystietojen avulla.
- Jos laitevika aiheuttaa vakavan tapahtuman, kuten heidän terveytensä pahan heikentymisen tai kuoleman, ota yhteys Clinisupplies -yhtiöön ja oman alueesi toimivaltaiseen viranomaiseen niin pian kuin mahdollista. Oman alueesi toimivaltaisen viranomaisen tiedot löytät oman alueesi paikallishallinnon verkkosivuilta.

Sterilointi:

Reisipussit on steriloitu etyleenioksidilla (EO). Niitä ei ole tarkoitettu uudelleensterilointiin.

NL Libra® Beenzak

BEDOELD GEBRUIK: Urinedrainagebeenzakken zijn ontworpen om urine op te vangen uit sheaths of katheters.
Beenzakriemen zijn bedoeld om de beenzakken aan de kuit(bij) van het been vast te maken.

Libra® Beenzakken zijn bedoeld om overdag urine op te slaan en af te voeren. **Libra®** beenzakken kunnen ook worden aangesloten op een nachtzak voor nachtelijke drainage. **Libra®** Beenzakjes moeten om de 5-7 dagen vervangen worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

LEES AANDACHTIG

Uitleg

1. Beschermende kap
2. Geribbelde inlast
3. Naaldvrije monsterpoort
4. Inlaatbuis
5. Ogjes
6. Gegradueerde schaal*
7. Uitlaatkraan
8. Datum inbouwdoos
9. Siliconen hoes

*De schaalverdeling is een benadering en mag niet worden gebruikt voor het nauwkeurig meten van urine

Voor gebruik

1. Handen wassen
2. Open het peel zakje en verwijder de **Libra® Beenzak** uit de verpakking
3. Zorg ervoor dat de handel op de uitlaatkraan **(7)** in de gesloten stand staat **(Schema 1)**
4. Verwijder de grijze beschermkap **(1)** van de **Libra®**-inlaatconnector **(2)**

Schema 1:
Kraan sluiten

Schema 2:
Kraan openen

Directe verbinding

1. Steek de gerbbelde inlaatconnector **(2)** in het uiteinde van de verblijfskatheter of -huls.
2. Steek de connector er volledig in voor een veilige verbinding
3. De **Libra® beenzak** moet op de dij of kuit worden gepleatst, afhankelijk van de buislengte, en goed worden vastgemaakt met de meegeleverde beenzakriemen.
4. Voer de **Libra® Leg Bag Straps** door de oogjes **(5)** op de tas en zorg ervoor dat de golvende siliconen lijnen naar het been wijzen.
5. Zorg ervoor dat de inlaatslang **(4)** niet geknikt is, waardoor de urinestraal beperkt kan worden.

Legen

1. Leeg de **Libra® beenzak** door de handel op de uitlaopkraan **(7)** naar beneden te duwen **(Schema 2)**
2. Wikkel na het legen een tissue om de uitlaatkraan en klop een aantal keer op de kraan voordat je voorzichtig de binnenkant van de kraan schoonveegt. Dit verwijdert eventuele urineresten
3. Vergeet niet de kraan te sluiten na het legen **(Schema 1)**
4. De uitlaatkraan **(7)** kan worden gedraaid om onbedoeld legen te voorkomen.

Avond 'n nachts

Als je extra afvoer nodig hebt voor gebruik 'n nachts, kan een nachtzak worden aangesloten als onderdeel van een nachtverbindingssysteem.

1. Koppel je computer niet los als je naar bed gaat **Libra® beenzakje** van uw katheter of scheide
2. Steek de connector van uw Night Bag in de siliconen hub **(9)** op uw **Libra® beenzakje**. Steek de connector er volledig in voor een veilige verbinding
3. Draai na aansluiting de kraan van de **Libra® beenzak** naar de open stand **(Schema 2)** om de nachtelijke afvoer naar de nachtzak mogelijk te maken.
4. Voordat u de nachtzak 's ochtends loskoppelt, moet u ervoor zorgen dat de kraan van de **Libra® beenzak** in de gesloten stand staat **(Schema 1)**

Libra® beenzakken met verstelbare buis

Verstelbare **Libra® beenzakken** hebben een buis van 45 cm **(4)**.

Als u ze rechtstreeks aansluit op een scheide kunnen deze op de gewenste lengte worden afgekort en worden voorzien van de reserveconnector in het zakje:

1. Plaats de **Libra® beenzakken** op uw been in de gewenste positie en zet hem vast zoals aangegeven boven.
2. Meet hoe lang je de buis nodig hebt en knip af op de gewenste lengte
3. Haal de **Libra® beenzak** van uw been en steek de reserveconnector in de inlaatslang
4. Sluit de **Libra® beenzak** zoals eerder geïnstrueerd

Let op: Snijd de slang niet zelf af als u deze aansluit op een verblijfkatheter, omdat de steriliteit van het product dan in gevaar kan komen.

Opslag en verwijdering

1. De **Libra® beenzak** moet worden bewaard bij kamertemperatuur en voor gebruik op kamertemperatuur komen
2. Bij het normale huishoudelijke afval doen - niet door het toilet spoelen

Waarschuwingen

- Zorg ervoor dat u het vak Datum plaatsing **(8)** invult, zodat u kunt zien hoe lang de **Libra® beenzak** in gebruik is geweest. Vervang de beenzak om de 5-7 dagen
- De **Libra® beenzak** mag niet hergebruikt worden na het loskoppelen van een katheter vanwege een verhoogd infectierisico.
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Het gebruik van elk medisch hulpmiddel brengt risico's met zich mee. Defecten aan het apparaat zijn zeldzaam, maar in het geval van een defect aan dit product dient u contact op te nemen met Clinisupplies via de gegevens in deze bijsluiter.
- Als een storing heeft geleid tot een ernstig incident, zoals een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid of overlijden, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Clinisupplies en uw nationale bevoegde autoriteit. Informatie over de plaatselijke bevoegde autoriteit is te vinden op de website van uw plaatselijke overheid

Sterilisatie:

De beenzakken zijn gesteriliseerd met ethyleenoxide (EO). Ze zijn niet bedoeld voor resterilisatie.


PT Saco de Perna Libra®

UTILIZAÇÃO PREVISTA: Sacos de Perna de drenagem de urina foram concebidos para recolher urina a partir de bainhas ou cateteres. As fitas dos sacos de perna destinam-se a fixar os sacos de perna ao gémeo/coxa da perna.

Os Sacos de Perna. **Libra®** destinam-se ao armazenamento e drenagem diurna da urina.
Os Sacos de Perna **Libra®** também podem ser ligados a um Saco Noturno para drenagem durante a noite.
Os Sacos de Perna **Libra®** devem ser trocados a cada 5-7 dias.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO



Explicação

1. Tampa protetora
2. Conector de entrada estriado
3. Porta de amostra sem agulha
4. Tubo de entrada
5. Ilhós
6. Escala graduada*
7. Torneira de saída
8. Caixa datada
9. Manga de silicone

*A escala graduada é uma aproximação e não deve ser utilizada para a medição precisa da urina

Antes de usar

1. Lave as mãos
2. Abra a bolsa e retire o Saco de Perna **Libra®** da sua embalagem
3. Certifique-se de que a alavanca da torneira de saída **(7)** está na posição fechada **(Diagrama 1)**
4. Remova a tampa de proteção cinzenta **(1)** do conector de entrada **Libra® (2)**




Diagrama 1: Torneira fechada




Diagrama 2: Torneira aberta

Ligação direta

1. Insira o conector de entrada estriado **(2)** na extremidade do Cateter ou Bainha Permanente.
2. Insira o conector completamente para permitir uma ligação segura
3. O Saco de Perna **Libra®** deve ser posicionado na coxa ou na barriga da perna, dependendo do comprimento do tubo, e fixado adequadamente com as fitas do saco de perna fornecidas
4. Passe as fitas do Saco de Perna **Libra®** através dos ilhós (5) do saco e certifique-se de que as linhas onduladas de silicone estão viradas para a perna
5. Certifique-se de que o tubo de entrada **(4)** não está dobrado, o que pode restringir o fluxo de urina.

Esvaziar

1. Esvazie o Saco de Perna **Libra®** empurrando a alavanca da torneira de saída **(7)** para baixo **(Diagrama 2)**
2. Após esvaziar, envolva a torneira de saída com um lenço de papel e dê pancadinhas várias vezes antes de limpar suavemente à volta e dentro da válvula. Isto irá desalojar qualquer urina residual
3. Lembre-se de fechar a torneira após esvaziar **(Diagrama 1)**
4. A torneira de saída **(7)** pode ser torcida para evitar o esvaziamento acidental

Drenagem durante a noite

Se precisar de drenagem adicional para uso durante a noite, um saco noturno pode ser ligado como parte de um sistema de ligação noturno

1. Ao deitar-se, não desconecte o Saco de Perna **Libra®** do cateter ou da bainha
2. Insira o conector do seu Saco Noturno na manga de silicone **(9)** do seu Saco de Perna **Libra®**. Insira o conector completamente para permitir uma ligação segura
3. Uma vez ligado, rode a torneira do Saco de Perna **Libra®** para a posição aberta **(Diagrama 2)** para permitir a drenagem durante a noite para o Saco Noturno
4. Antes de desconectar o Saco Noturno de manhã, certifique-se de que a torneira do Saco de Perna **Libra®** está na posição fechada **(Diagrama 1)**

Sacos de Perna Libra® com tubo ajustável

O Saco de Perna **Libra®** tem um tubo de 45 cm **(4)**.

Se ligar diretamente a uma bainha, estes podem ser cortados no comprimento desejado e equipados com o conector de reserva incluído na bolsa

1. Coloque o Saco de Perna **Libra®** na perna na posição desejada e fixe-o de acordo com as instruções acima.
2. Meça quanto tempo precisa do tubo e corte no comprimento desejado
3. Retire o Saco de Perna **Libra®** da sua perna e insira o conector de reserva no tubo de entrada
4. Ligue o Saco de Perna **Libra®** conforme previamente instruído

Cuidado: Não corte você mesmo o comprimento desejado do tubo se estiver a ligar um cateter permanente, pois a esterilidade do produto pode ficar comprometida.

Armazenamento e eliminação

1. O Saco de Perna **Libra®** deve ser armazenado à temperatura ambiente e deve atingir a temperatura ambiente antes da utilização
2. Deite fora juntamente com o lixo doméstico normal - não deite na sanita

Cuidados

- Certifique-se de que preenche a Caixa Datada **(8)** para permitir monitorizar há quanto tempo o Saco de Perna **Libra®** está a ser utilizado. Troque o Saco de Perna a cada 5-7 dias
- O Saco de Perna **Libra®** não deve ser reutilizado após a desconexão de um cateter devido ao aumento do risco de infeção
- Manter fora do alcance das crianças
- O uso de qualquer dispositivo médico acarreta riscos associados. As falhas do dispositivo são raras, no entanto, em caso de falha do dispositivo, deverá contactar a Clinisupplies através dos dados fornecidos neste folheto
- Se uma falha resultou num incidente grave, como deterioração significativa da saúde ou morte, deverá contactar a Clinisupplies e a sua autoridade competente local o mais rapidamente possível. Os detalhes da autoridade competente local podem ser encontrados no site do governo local.

Esterilização:

As bolsas de perna são estéreis por óxido de etileno (EO). Não se destinam à reesterilização.


ES Bolsa para pierna Libra®

USO PREVISTO: Las Bolsas de drenaje para pierna se han diseñado para recoger la orina de sondas y catéteres. Las tiras de la bolsa para pierna están diseñadas para sujetar bien la bolsa al gemelo o al muslo.

Bolsas para pierna **Libra®** para almacenamiento durante el día y drenaje de la orina.
Las bolsas para pierna **Libra®** también se pueden conectar a una bolsa de noche para el drenaje nocturno.
Las bolsas para pierna **Libra®** deben cambiarse cada 5-7días.

INSTRUCCIONES DE USO

LEER ATENTAMENTE



Explicación

1. Tapón protector
2. Conector de entrada acanalado
3. Puerto de muestra sin aguja
4. Tubo de entrada
5. Ojales
6. Regla graduada*
7. Válvula de salida
8. Casilla para la fecha
9. Manguito de silicona

*La regla graduada es una aproximación y no debe usarse como una medición precisa de la orina

Antes de su uso

1. Lavarse las manos
2. Abrir la bolsa autoadhesiva y extraer la bolsa para pierna **Libra®** de su envase
3. Confirmar que la palanca en la válvula de salida **(7)** está en la posición cerrada **(Diagrama 1)**
4. Retirar el tapón protector de color gris (1) del conector de entrada **Libra® (2)**




Diagrama 1: Válvula cerrada




Diagrama 2: Válvula abierta

Conexión directa

1. Insertar el conector de entrada acanalado **(2)** en el extremo del catéter o la sonda permanente
2. Insertar el conector completamente para garantizar una conexión segura
3. La bolsa para pierna **Libra®** debe colocarse en el muslo o la pantorrilla, dependiendo de la longitud del tubo, y fijarse correctamente con las tiras que se suministran
4. Introduzca las tiras de la bolsa para pierna **Libra®** a través de los ojales **(5)** de la bolsa y asegúrese de que las líneas de silicona onduladas estén mirando hacia la pierna
5. Asegúrese de que el tubo de entrada **(4)** no esté pellizcado, lo que podría restringir el flujo de orina

Vaciado

1. Vaciar la bolsa para pierna **Libra®** presionando la palanca en la válvula de salida **(7)** hacia abajo **(Diagrama 2)**
2. Tras el vaciado, envolver la válvula de salida con un paño y dar pequeños golpes antes de frotar suavemente alrededor y en el interior de la válvula. Así se eliminará la orina residual.
3. Recuerde cerrar la válvula tras el vaciadog **(Diagrama 1)**
4. La válvula de salida **(7)** se puede girar para evitar un vaciado accidental

Drenaje nocturno

Si necesita un drenaje adicional para su uso nocturno, puede conectar una bolsa de noche como parte de un sistema nocturno

1. Cuando se vaya a la cama, no desconecte su bolsa para pierna **Libra®** del catéter o la sonda
2. Inserte el conector de su bolsa de noche en el manguito de silicona **(9)** de la bolsa para pierna **Libra®**. Insertar el conector completamente para garantizar una conexión segura
3. Una vez conectado, gire la válvula de la bolsa para pierna **Libra®** hacia la posición abierta **(Diagrama 2)** para activar el drenaje nocturno hacia la bolsa
4. Antes de desconectar la bolsa por la mañana, asegúrese de que la válvula de la bolsa para pierna **Libra®** esté en posición cerrada **(Diagrama 1)**

Bolsas para pierna Libra® con tubo ajustable

La bolsa para pierna con tubo ajustable **Libra®** incluye un tubo de 45 cm **(4).**

Si se conecta directamente a una sonda, se puede cortar a la longitud deseada y acoplar el conector de repuesto que se suministra en la bolsa.

1. Coloque la bolsa para pierna **Libra®** en la pierna, en la posición deseada, y fíjela como se indica encima
2. Mida cómo necesita que sea el tubo de largo y córtelo a la longitud deseada
3. Retire la bolsa para pierna **Libra®** de la pierna y coloque el conector de repuesto en el tubo de entrada
4. Conecte la bolsa para pierna **Libra®** según lo instruido previamente

Advertencia: No corte usted mismo el tubo si está conectando un catéter permanente ya que la esterilidad del producto podría verse comprometida.

Almacenamiento y eliminación

1. La bolsa para pierna **Libra®** debe guardarse a temperatura ambiente, permitiendo que se adapte a la temperatura de la estancia antes de su uso
2. Eliminar con los residuos domésticos habituales, no tirar por el inodoro

Advertencias

- Asegúrese de rellenar la casilla para la fecha **(8)** para poder controlar cuánto tiempo ha utilizado la bolsa para pierna **Libra®** Cambie la bolsa cada 5-7 días
- La bolsa para pierna **Libra®** no debe reutilizarse una vez desconectada del catéter, debido al aumento del riesgo de infección
- Mantener fuera del alcance de los niños
- El uso de un dispositivo médico acarrea riesgos asociados. Es poco frecuente que falle el dispositivo, pero si eso ocurriera, deberá ponerse en contacto con Clinisupplies, a través de los datos suministrados en este folleto
- Si el fallo produjese un incidente grave, como un deterioro significativo de la salud o incluso la muerte, deberá ponerse en contacto con Clinisupplies y con la Autoridad Local competente lo antes posible. Encontrará los datos sobre la Autoridad Local competente en el sitio web de su gobierno local

Esterilización:

Las bolsas para pierna son estériles mediante óxido de etileno (EO). No están destinadas a reesterilización.


FR Sac à Jambe Libra®

USAGE PRÉVU: Les sacs de drainage sont conçus pour recueillir l'urine provenant de sondes ou d'étui péniens. Les lanières de sac de jambe sont destinées à fixer les sacs de jambe au mollet/à la cuisse de la jambe.

Les sacs à jambe **Libra®** sont destinés à stocker et vidanger l'urine pendant la journée. Les sacs à jambe **Libra®** peuvent également être connectés à un sac de nuit afin de procéder à la vidange pendant la nuit. Les sacs à jambe **Libra®** doivent être changés tous les 5 à 7 jours.

MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT




Légende

1. Capuchon protecteur
2. Connecteur d'entrée strié
3. Port d'échantillon sans aiguille
4. Tube d'entrée
5. Œillets
6. Échelle graduée*
7. Robinet de sortie
8. Case Date de mise en place
9. Manchette en silicone


*L'échelle graduée est approximative et ne doit pas être utilisée pour établir une mesure fiable de l'urine.

Avant utilisation

1. Lavez-vous les mains
2. Ouvrez la pochette pelable et retirez le **sac à jambe Libra®** de son emballage
3. Assurez-vous que la manette située sur le robinet de sortie **(7)** se trouve en position fermée **(Schéma 1)**
4. Retirez le capuchon protecteur gris **(1)** du connecteur d'entrée **Libra® (2)**



Schema 1: Fermer le robinet



Schema 2: Ouvrir le robinet

Connexion Directe

1. Insérez le connecteur d'entrée strié **(2)** dans l'extrémité de la sonde à demeure ou de la gaine.
2. Insérez intégralement le connecteur afin de garantir une connexion sécurisée
3. Le **sac à jambe Libra®** doit être positionné sur la cuisse ou le mollet, en fonction de la longueur du tube, et maintenu en place de manière adéquate au moyen des sangles de sac à jambe fournies
4. Passez les **lanières du sac à jambe Libra®** à travers les œillets **(5)** sur le sac et assurez-vous que les lignes ondulées en silicone font face à la jambe
5. Assurez-vous que le tube d'entrée **(4)** n'est pas plié puisque cela pourrait limiter le flux de l'urine.

Vidage

1. Vider le **sac à jambe Libra®** en poussant vers le bas la manette située sur le robinet de sortie **(7) (Schéma 2)**
2. Une fois le vidage terminé, enroulez un mouchoir en papier autour du robinet de sortie et tapotez à plusieurs reprises, puis essuyez délicatement autour de l'intérieur de la valve. Ceci permet de retirer toute trace restante d'urine.
3. N'oubliez pas de refermer le robinet une fois le vidage terminé **(Schéma 1)**
4. Le robinet de sortie **(7)** peut être tourné pour éviter un vidage accidentel

Vidange de nuit

Si vous avez besoin d'une vidange supplémentaire durant la nuit, il est possible de connecter un sac de nuit comme élément d'un système de connexion pour la nuit

1. Lorsque vous allez vous coucher, ne déconnectez pas votre **sac à jambe Libra®** de votre sonde ou gaine
2. Insérez le connecteur de votre sac de nuit dans la manchette en silicone **(9)** sur votre **sac à jambe Libra®**. Insérez intégralement le connecteur afin de garantir une connexion sécurisée
3. Une fois la connexion faite, tournez le robinet du **sac à jambe Libra®** en position ouverte **(Schéma 2)** afin de permettre la vidange pendant la nuit dans le sac de nuit
4. Avant de déconnecter, le matin, le sac de nuit, assurez-vous que le robinet du **sac à jambe Libra®** est en position fermée **(Schéma 1)**

Sacs à jambe Libra® avec tubes ajustables

Le **sac à jambe Libra®** ajustable est doté d'un tube de 45 cm **(4)**.

En cas de connexion directe à une gaine, le tube peut être coupé à la longueur souhaité et équipé du connecteur de rechange inclus dans la pochette

1. Placez le **sac à jambe Libra®** sur votre jambe dans la position souhaitée, puis fixez-le en place tel qu'expliqué au-dessus
2. Mesurez la longueur de tube dont vous avez besoin, puis coupez-le à la longueur souhaitée
3. Retirez le **sac à jambe Libra®** de votre jambe et insérez le connecteur de rechange dans le tube d'entrée
4. Connectez le **sac à jambe Libra®** conformément aux instructions précédentes

Attention: Ne coupez pas vous-même le tube à la longueur souhaitée si vous allez le connecter à une sonde à demeure car la stérilité du produit pourrait s'en trouver compromise.

Conservation et Élimination

1. Le **sac à jambe Libra®** doit être conservé à température ambiante et ramené à la température de la pièce avant utilisation
2. Jeter avec les déchets ménagers normaux – ne pas jeter dans les toilettes

Attention

- Assurez-vous de remplir la case Date de mise en place **(8)** afin que vous puissiez vérifier depuis combien de temps le **sac à jambe Libra®** est utilisé. Changez le sac à jambe tous les 5 à 7 jours.
- Ne réutilisez pas un **sac à jambe Libra®** qui a été déconnecté d'une sonde car il existe un risque supérieur d'infection
- Garder hors de portée des enfants
- Toute utilisation d'un dispositif médical s'accompagne de risques associés. Il est rare que le dispositif connaisse une défaillance, mais si tel est le cas avec ce produit, veuillez contacter Clinisupplies en utilisant les coordonnées fournies dans le présent document.
- Si la défaillance a engendré un accident grave, tel qu'une atteinte majeure à la santé ou un décès, veuillez contacter dès que possible Clinisupplies et votre autorité compétente locale. Vous pouvez trouver des informations détaillées sur votre Autorité Compétente locale sur le site Internet de votre gouvernement local

Stérilisation:

Les sacs de jambe sont stériles à l'oxyde d'éthylène (EO). Ils ne sont pas destinés à une restérilisation.


DE Libra® Beinbeutel

VERWENDUNGSZWECK: Urin-Drainagebeutel sind so konzipiert, dass sie Urin entweder aus Urinalkondomen oder Kathetern auffangen. Bänder für Beinbeutel sind für die Befestigung der Beinbeutel an der Wade/dem Oberschenkel des Beins bestimmt.

Libra® Beinbeutel sind für das Auffangen und die Ableitung von Urin während des Tages gedacht.
Libra® Beinbeutel können auch mit einem Nachtbeutel verbunden werden, um den Urin über Nacht aufzufangen.
Libra® Die Beinbeutel sollten alle 5-7 Tage gewechselt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE SORGFÄLTIG LESEN



Legende

1. Schutzkappe
2. Geriffelter Einlasskonnektor
3. Nadelfreier Probenentnahme-Anschluss
4. Einlass-Schlauch
5. Ösen
6. Abgestufte Skala*
7. Ablass-Hahn
8. Datum der Anpassung
9. Silikon-Hülle

*Die Skala ist ein Näherungswert und sollte nicht zur genauen Messung der Urinausscheidung verwendet werden.

Vor dem Gebrauch

1. Hände waschen
2. Öffnen Sie den Peelbeutel und nehmen Sie den **Libra® Beinbeutel** aus seiner Verpackung
3. Vergewissern Sie sich, dass der Hebel des Ablass-Hahns **(7)** in der geschlossenen Position ist **(Diagramm 1)**
4. Entfernen Sie die graue Schutzkappe **(1)** vom **Libra®**-Einlasskonnektor **(2)**




Diagramm 1: Hahn schließen




Diagramm 2: Hahn öffnen

Direkte Verbindung

1. Stecken Sie den geriffelten Einlasskonnektor **(2)** in das Ende des Verweilkatheters oder des Kondom-Urinals.
2. Stecken Sie den Stecker vollständig ein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
3. Der **Libra® Beinbeutel** sollte je nach Schlauchlänge am Oberschenkel oder an der Wade positioniert und mithilfe der mitgelieferten Beinbeutelbänder entsprechend gesichert werden
4. Führen Sie die **Libra® Beinbeutel-Bänder** durch die Ösen **(5)** des Beutels und achten Sie darauf, dass die gewellten Silikonlinien auf das Bein zeigen.
5. Achten Sie darauf, dass der Einlass-Schlauch **(4)** nicht geknickt ist, da dies den Urinfluss behindern kann

Entleerung

1. Entleeren Sie den **Libra® Beinbeutel** indem Sie den Hebel am Ablass-Hahn **(7)** nach unten drücken **(Diagramm 2)**
2. Nach dem Entleeren den Ablass-Hahn mit einem Papiertuch umwickeln und einige Male abtupfen, bevor Sie vorsichtig um das Ventil herum und im Inneren des Ventils wischen. Dadurch werden etwaige Urinreste beseitigt
3. Denken Sie daran, den Hahn nach dem Entleeren zu schließen **(Diagramm 1)**
4. Der Ablass-Hahn **(7)** kann gedreht werden, um ein unbeabsichtigtes Entleeren zu verhindern.

Urin-Ableitung über Nacht

Wenn Sie eine zusätzliches Fassungsvermögen für die Nacht benötigen, kann ein Nachtbeutel als Teil eines Übernacht-Verbindungssystems angeschlossen werden.

1. **Libra® Beinbeutel** nicht von Ihrem Katheter oder Ihrem Kondom-Urinal
2. Stecken Sie das Verbindungsstück Ihres Nachtbeutels in die Silikon-Hülle **(9)** Ihres **Libra® Beunbeutels**. Stecken Sie den Stecker vollständig ein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, drehen Sie den Hahn des **Libra® Beinbeutels** in die geöffnete Position **(Diagram 2)** um den nächtlichen Harnabfluss in den Nachtbeutel zu ermöglichen.
4. Bevor Sie den Nachtbeutel am Morgen abnehmen, stellen Sie sicher, dass der **Libra® Beinbeutel** Hahn in der geschlossenen Position ist **(Diagram 1)**

Libra® Beinbeutel mit verstellbaren Schläuchen

Verstellbare **Libra® Beinbeutel** haben einen 45cm langen Schlauch **(4)**.

Bei direktem Anschluss an ein Kondom-Urinal können diese auf die gewünschte Länge zugeschnitten und mit dem in der Tasche enthaltenen Ersatzstecker versehen werden.

1. Platzieren Sie den **Libra® Beinbeutel** an der gewünschten Stelle an ie lang der Schlauch sein soll und schneiden Sie ihn auf die gewünschte Länge.
2. Nehmen Sie den **Libra® Beinbeutel** von Ihrem Bein ab und stecken Sie den Ersatzstecker in den Einlass-Schlauch
3. Schließen Sie den **Libra® Beinbeutel** wie zuvor angewiesen

Achtung: Kürzen Sie den Schlauch nicht selbst, wenn Sie ihn an einen Verweilkatheter anschließen, da die Sterilität des Produkts beeinträchtigt werden könnte.

Lagerung und Entsorgung

1. Der **Libra® Beinbeutel** sollte bei Raumtemperatur gelagert werden und sich vor dem Gebrauch auf Zimmertemperatur erwärmen
2. Im normalen Hausmüll entsorgen - nicht die Toilette runter spülen

Vorsichtshinweise

- Vergessen Sie nicht, das Feld „Datum der Anpassung" (8), auszufüllen, damit Sie nachverfolgen können, wie lange der **Libra® Beinbeutel** bereits in Gebrauch ist. Wechseln Sie den Beinbeutel alle 5-7 Tage
- Der **Libra® Beinbeutel** sollte nach dem Trennen vom Katheter nicht wiederverwendet werden, da das Infektionsrisiko erhöht ist
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Die Verwendung eines jeden Medizinprodukts ist mit Risiken verbunden. Geräteausfälle sind selten, aber im Falle eines Geräteausfalls dieses Produkts sollten Sie Clinisupplies unter Verwendung der in dieser Packungsbeilage angegebenen Details kontaktieren
- Wenn ein Fehler zu einem schwerwiegenden Zwischenfall geführt hat, wie z. B. einer erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Tod, sollten Sie sich so schnell wie möglich an Clinisupplies und Ihre zuständige lokale Behörde wenden. Einzelheiten zu Ihrer zuständigen Behörde finden Sie auf der Website Ihrer lokalen Regierung

Sterilisation:

Die Beinbeutel sind sterilisiert mit Ethylenoxid (EO). Sie sind nicht zur Resternilisation bestimmt.


IT Sacca da gamba Libra®

USO PREVISTO: Le sacche da gamba per il drenaggio dell'urina servono a raccogliere l'urina da cateteri o guaine. Le cinghie per le sacche da gamba servono a fissare le sacche da gamba al polpaccio/alla coscia della gamba

Le sacche da gamba **Libra®** servono alla conservazione e al drenaggio dell'urina durante il giorno.
Le sacche da gamba **Libra®** si possono anche collegare a una sacca notturna per il drenaggio durante la notte.
Le sacche da gamba **Libra®** vanno cambiate ogni 5-7 giorni.

ISTRUZIONI PER L'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE



Legenda

1. Tappo protettivo
2. Connettore d'ingresso scanalato
3. Porta per il campionamento senza aghi
4. Tubo di Ingresso
5. Occhielli
6. Scala graduata*
7. Rubinetto di uscita
8. Casella per data
9. Manicotto in silicone

*La scala graduata è approssimativa e non va usata per misurare l'urina in modo preciso

Prima dell'uso

1. Lavarsi le mani
2. Aprire la busta con pellicola ed estrarre la sacca da gamba **Libra®** dalla sua confezione
3. Assicurarsi che la levetta del rubinetto di uscita **(7)** sia in posizione chiusa **(diagramma 1)**
4. Rimuovere il tappo protettivo grigio **(1)** dal connettore di ingresso **Libra® (2)**




Diagramma 1: Chiudere il rubinetto




Diagramma 2: Aprire il rubinetto

Connessione diretta

1. Inserire il connettore d'ingresso scanalato **(2)** nell'estremità del catetere a permanenza o della guaina
2. Inserire completamente il connettore per garantire un collegamento saldo
3. La sacca da gamba **Libra®** va posizionata sulla coscia o sul polpaccio, a seconda della lunghezza del tubo, e fissata correttamente con le apposite strisce in dotazione
4. Far passare le strisce di fissaggio **Libra®** attraverso gli occhielli **(5)** sulla sacca e assicurarsi che le linee in silicone ondulate siano rivolte verso la gamba
5. Assicurarsi che il tubo di ingresso **(4)** non sia piegato poiché potrebbe limitare lo scorrimento dell'urina

Svuotamento

1. Svuotare la sacca da gamba **Libra®** spingendo la levetta sul rubinetto di uscita **(7)** verso il basso **(diagramma 2)**
2. Dopo lo svuotamento, avvolgere il rubinetto di uscita con un panno e tamponare diverse volte prima di pulire delicatamente l'interno della valvola. Questo rimuoverà l'eventuale urina residua
3. Ricordarsi di chiudere il rubinetto dopo lo svuotamento **(diagramma 1)**
4. Il tappo di uscita **(7)** si può girare per evitare lo svuotamento accidentale

Drenaggio notturno

Nel caso fosse necessario continuare il drenaggio durante la notte, si può collegare una sacca notturna come componente di un sistema di collegamento notturno

1. Quando si va a letto, non scollegare la sacca da gamba **Libra®** dal proprio catetere o guaina
2. Inserire il connettore della sacca notturna al manicotto in silicone **(9)** della propria sacca da gamba **Libra®**. Inserire completamente il connettore per garantire un collegamento saldo
3. Una volta collegato, girare il rubinetto della sacca da gamba **Libra®** in posizione aperta **(diagramma 2)** per consentire il drenaggio notturno nella sacca notturna
4. Il mattino dopo, prima di scollegare la sacca notturna, assicurarsi che il rubinetto della sacca da gamba **Libra®** sia in posizione chiusa **(diagramma 1)**

Sacche da gamba Libra® con tubo regolabile

Le sacche da gamba **Libra®** regolabili hanno un tubo da 45 cm **(4)**.

In caso di collegamento diretto a una guaina, si può tagliare alla lunghezza desiderata e fissarlo con il connettore di ricambio incluso nella busta

1. Posizionare la sacca da gamba **Libra®** sulla gamba nella posizione desiderata e fissarla seguendo sopra
2. Misurare la lunghezza del tubo necessaria e tagliare alla lunghezza desiderata
3. Rimuovere la sacca da gamba **Libra®** dalla gamba e inserire il connettore di ricambio nel tubo di ingresso
4. Collegare la sacca da gamba **Libra®** come precedentemente istruito

Attenzione: Non tagliare da soli il tubo se si effettua il collegamento a un catetere a permanenza in quanto si potrebbe compromettere la sterilità del prodotto.

Conservazione e smaltimento

1. La sacca da gamba **Libra®** va conservata a temperatura ambiente e deve poter raggiungere la temperatura ambiente prima dell'uso
2. Smaltire con i normali rifiuti domestici, non gettare nel W.C.

Attenzione

- Assicurarsi di compilare la casella per la data **(8)** per monitorare da quanto si utilizza la sacca da gamba **Libra®**. Cambiare la sacca da gamba ogni 5-7 giorni
- La sacca da gamba **Libra®** non va riutilizzata una volta scollegata dal catetere poiché vi è un maggior rischio di infezione
- Tenere al di fuori della portata dei bambini
- L'utilizzo dei dispositivi medici comporta dei rischi correlati. I guasti dei dispositivi sono rari, tuttavia, in caso di guasto del prodotto, contattare Clinisupplies utilizzando i recapiti forniti in questo foglietto illustrativo
- Qualora un guasto causi un incidente grave, ad esempio un netto deterioramento della salute o il decesso, contattare Clinisupplies e la propria autorità locale competente il prima possibile. I recapiti dell'autorità locale competente si trovano sul sito web dell'amministrazione locale

Sterilizzazione:

I sacchetti per gamba sono sterilizzati con ossido di etilene (EO). Non sono destinati alla resterilizzazione.

EN Symbol Explanation
NO Symbolforklaring
DA Symbolforklaring
SV Symbolförklaring
FR Explications des symboles
FI Symbolien merkitykset
NL Uitleg symbolen
ES Explicación de los símbolos
DE Erläuterung der Symbole
PT Explicação dos símbolos
IT Spiegazione dei simboli

STERILE EO
EN: Sterilised using Ethylene oxide
NO: Sterilisert ved hjelp av etylenoksid
DA: Steriliseret ved hjælp af ethylenoxid
SV: Steriliserad med etylenoxid
FI: Steriloitu etyleenioksidilla
NL: Gesteriliseerd met ethyleenoxide
ES: Esterilizado usando óxido de etileno
PT: Esterilizado com Óxido de Etileno
FR: Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
DE: Sterilisiert mit Ethylenoxid
IT: Sterilizzato con ossido di etilene

EN: Box and instructions for use are recyclable.
NO: Eske og bruksanvisning er resirkulerbare.
DA: Æske og brugsanvisning kan genbruges.
SV: Förpackning och bruksanvisning är återvinningsbara
FI: Laatikko ja käyttöohjeet ovat kierrätettäviä.
NL: Doos en gebruiksinstructies zijn recyclebaar.
ES: La caja y las instrucciones de uso son reciclables.
PT: A caixa e as instruções de utilização são recicláveis.
FR: La boîte et le mode d'emploi sont recyclables.
DE: Schachtel und Gebrauchsanweisung sind recycelbar.
IT: La scatola e le istruzioni per l'uso sono riciclabili.

EN: Do not resterilize
NO: Må ikke resteriliseres
DA: Må ikke resteriliseres
SV: Får inte omsteriliseras ren
FI: Älä steriloi uudelleen
NL: Niet opnieuw sterilise
ES: No reesterilizar
PT: Não reesterilizar
FR: Ne pas restériliser
DE: Nicht erneut Sterilisieren
IT: Non sterilizzare di nuovo

EN: Do not re-use
NO: Må ikke brukes om igjen
DA: Må ikke genbruges
SV: Får inte återanvändas
FI: Älä käytä uudelleen
NL: Niet hergebruiken
ES: No reutilizar
PT: Não reutilizar
FR: Ne pas réutiliser
DE: Nicht wiederverwenden
IT: Non riutilizzare

LATEX
EN: Not made with natural rubber latex
NO: Denne enheten er fri for naturlig lateks
DA: Denne enhed er fri for naturlig latex
SV: Denna produkt är fri från naturligt latexgummi
FI: Tämä laite ei sisällä luonnonkumilateksia
NL: Dit apparaat bevat geen natuurlatex
ES: Este producto no contiene látex natural
PT: Este dispositivo não contém látex natural
FR: Ce dispositif ne contient pas latex naturel
DE: Die Einmalkatheter sind frei von Naturkautschuklatex
IT: Dispositivo privo di lattice naturale

EN: Do not use if package is damaged
NO: Skal ikke brukes hvis pakken er skadet
DA: Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
SV: Får inte användas om förpackningen är skadad
FI: Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut
NL: Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is
ES: No usar si el envase presenta algún daño
PT: Não utilizar se a embalagem estiver danificada
FR: Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
DE: Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
IT: Non utilizzare se la confezione è danneggiata

EN: Keep dry
NO: Må holdes tørt
DA: Holdes tør
SV: Förvaras torrt
FI: Pidä kuivana
NL: Droog bewaren
ES: Mantener seco
PT: Manter seco
FR: À conserver au sec
DE: Trocken aufbewahren
IT: Tenere asciutto

EN: Consult instructions for use
NO: Se bruksanvisningen
DA: Se brugsanvisningen før brug
SV: Läs bruksanvisningen
FI: Lue käyttöohjeet
NL: Raadpleeg instructies voor gebruik
ES: Consultar las instrucciones de uso
PT: Consultar as instruções de utilização
FR: Lire la notice avant utilisation
DE: Gebrauchsanweisung beachten
IT: Consultare le istruzioni per l'uso

EU REP
EN: Authorized representative in the European community/European union
NO: Autorisert representant i EU
DA: Bemyndiget repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union
SV: Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen
FI: Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä/Euroopan unionissa
NL: Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie
ES: Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea
PT: Representante autorizado na comunidade Europeia/União Europeia
FR: Mandataire agréé dans la communauté européenne/l'union européenne
DE: Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union
IT: Rappresentante autorizzato nella comunità Europea/Unione Europea

EN: Caution
NO: Forsiktig
DA: Forsigtig
SV: Försiktighet
FI: Varoitus
NL: Let op
ES: Advertencia
DE: Achtung
FR: Attention
PT: Cuidado
IT: Attenzione

REF
EN: Catalogue number
NO: Katalognummer
DA: Katalognummer
SV: Katalognummer
FI: Luettelonumero
NL: Catalogusnummer
ES: Número de catálogo
PT: Número do catálogo
FR: Numéro de catalogue
DE: Katalognummer
IT: Numero di catalogo

LOT
EN: Batch code
NO: Batch-kode
DA: Batchkode
SV: Satskod
FI: Eräkoodi
NL: Batchcode
ES: Código de lote
PT: Código do lote
FR: Numéro de lot
DE: Chargencode
IT: Lotto di produzione

EN: Date of manufacture
NO: Produksjonsdato
DA: Fremstillingsdato
SV: Tillverkningsdatum
FI: Valmistuspäivämäärä
NL: Datum van fabricage
ES: Fecha de fabricación
PT: Data de fabrico
FR: Date de fabrication
DE: Herstellungsdatum
IT: Data di produzione

EN: Use-by-date
NO: Holdbarhetsdato
DA: Sidste anvendelsesdato
SV: Utgångsdatum
FI: Viimeinen käyttöpäivä
NL: Te gebruiken tot
ES: Fecha de caducidad
PT: Data de validade
FR: Date limite d'utilisation
DE: Verfallsdatum
IT: Da utilizzarsi entro

EN: Manufacturer
NO: Produsent
DA: Producent
SV: Tillverkare
FI: Valmistaja
NL: Fabrikant
ES: Fabricante
PT: Fabricante
FR: Fabricant
DE: Hersteller
IT: Produttore

EN: Single sterile barrier system
NO: Enkelt sterilt barrieresystem
DA: Enkelt sterilt barrieresystem
SV: System med en steril barriär
FI: Yksinkertainen steriili suojajärjestelmä
NL: Enkel steriel barrièresysteem
ES: Sistema de protección estéril único
PT: Sistema de barreira estéril único
FR: Système de barrière stérile unique
DE: Einfaches Sterilbarrieresystem
IT: Sistema a barriera sterile singola

MD
EN: Medical device
NO: Medisinsk enhet
DA: Medicinsk enhed
SV: Medicinteknisk produkt
FI: Lääketieteellinen laite
NL: Medisch hulpmiddel
ES: Dispositivo médico
PT: Dispositivo médico
FR: Dispositif médical
DE: Medizinprodukt
IT: Dispositivo medico

UDI
EN: Unique device identifier
NO: Unik enhetsidentifikator
DA: Entydig enhedsidentifikator
SV: Unik produktidentifiering (UDI)
FI: Ainutlaatuinen laitetunniste
NL: Unieke code voor hulpmiddelidentificatie
ES: Identificador único del dispositivo
PT: Identificador único do dispositivo
FR: Identifiant d'appareil unique
DE: Eindeutige Gerätekennung
IT: Identificatore unico del dispositivo

EN: European conformity mark
NO: Europeisk samsvarsmerke
DA: Europæisk overensstemmelsesmærke
SV: Europeiskt överensstämmelsemärke
FI: Eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkki
NL: Europees conformiteitsteken
ES: Marca de conformidad europea
PT: Marca europeia de conformidade
FR: Marque de conformité européenne
DE: Europäisches Konformitätszeichen
IT: Contrassegno di conformità europeo

UK CA
EN: UK conformity mark
NO: Britisk samsvarsmerke
DA: Britisk overensstemmelsesmærke
SV: Brittiskt överensstämmelsemärke
FI: Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusmerkintä
NL: UK conformiteitsmerkteken
ES: Marca de conformidad del Reino Unido
PT: Marca de conformidade do Reino Unido
FR: Marque de conformité brittanique
DE: GB-Konformitätszeichen
IT: Marchio di conformità del Regno Unito

EN: Keep away from sunlight
NO: Må ikke utsettes for sollys
DA: Holdes væk fra sollys
SV: Förvara skyddad från direkt solljus
FI: Pidä poissa suorasta auringonvalosta
NL: Beschermen tegen zonlicht
ES: Mantener fuera de la luz del sol
PT: Manter afastado da luz solar
FR: À conserver à l'abri de la lumière directe du soleil
DE: Von Sonnenlicht fernhalten
IT: Tenere lontano dalla luce del sole

EN: Wash hands
NO: Vask hendene
DA: Vask hænder
SV: Tvätta händerna
FI: Pese kädet
NL: Hände waschen
ES: Lavarse las manos
PT: Lave as mãos
FR: Lavez-vous les mains
DE: Hände waschen
IT: Lavarsi le mani

EN: Single sterile barrier system with protective packaging outside
NO: Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende ytteremballasje
DA: Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende udvendig emballage
SV: System med en steril barriär med skyddsförpackning på utsidan
FI: Yksinkertainen steriili suojajärjestelmä ja suojaava ulkopakkaus
NL: Enkel steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de buitenkant
ES: Sistema de protección estéril único con embalaje protector en el exterior
PT: Sistema de barreira estéril único com embalagem protetora exterior
FR: Système de barrière stérile unique avec emballage de protection externe
DE: Einfaches Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen
IT: Sistema a barriera sterile singola con involucro protettivo esterno

Libra® Leg Bag Prescription Pack
Leg bag with fabric backing and
1 x pair of leg bag straps

Ref	Capacity	Tube Length	Qty
10131H	500ml	Direct Inlet	10
10100A	350ml	Short (10cm)	10
10102C	500ml	Short (10cm)	10
10106G	750ml	Short (10cm)	10
10104E	500ml	Long (30cm)	10
10108J	750ml	Long (30cm)	10
10120W	1000ml	Long (30cm)	10
10105F	500ml	Adjustable (45cm)	10
10110L	750ml	Adjustable (45cm)	10
10122Y	1000ml	Adjustable (45cm)	10

Libra® Leg Bag Hospital Pack
Leg bag no fabric backing and
10 x pairs of leg bag straps

Ref	Capacity	Tube Length	Qty
10208E	750ml	Long (30cm)	10

UK CA 0086

CE 2797

Clinisupplies

Clinisupplies Ltd, 1 Blackmoor Lane, Croxley Park, Watford, Hertfordshire WD18 8GA, UK
Tel: +44 (0)20 8863 4168 Email: info@clinisupplies.co.uk **www.clinisupplies.co.uk**

EU REP **Advena Ltd.**
Tower Business Centre, 2nd floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013. Malta.

CSF01487_1_v1
11/25