


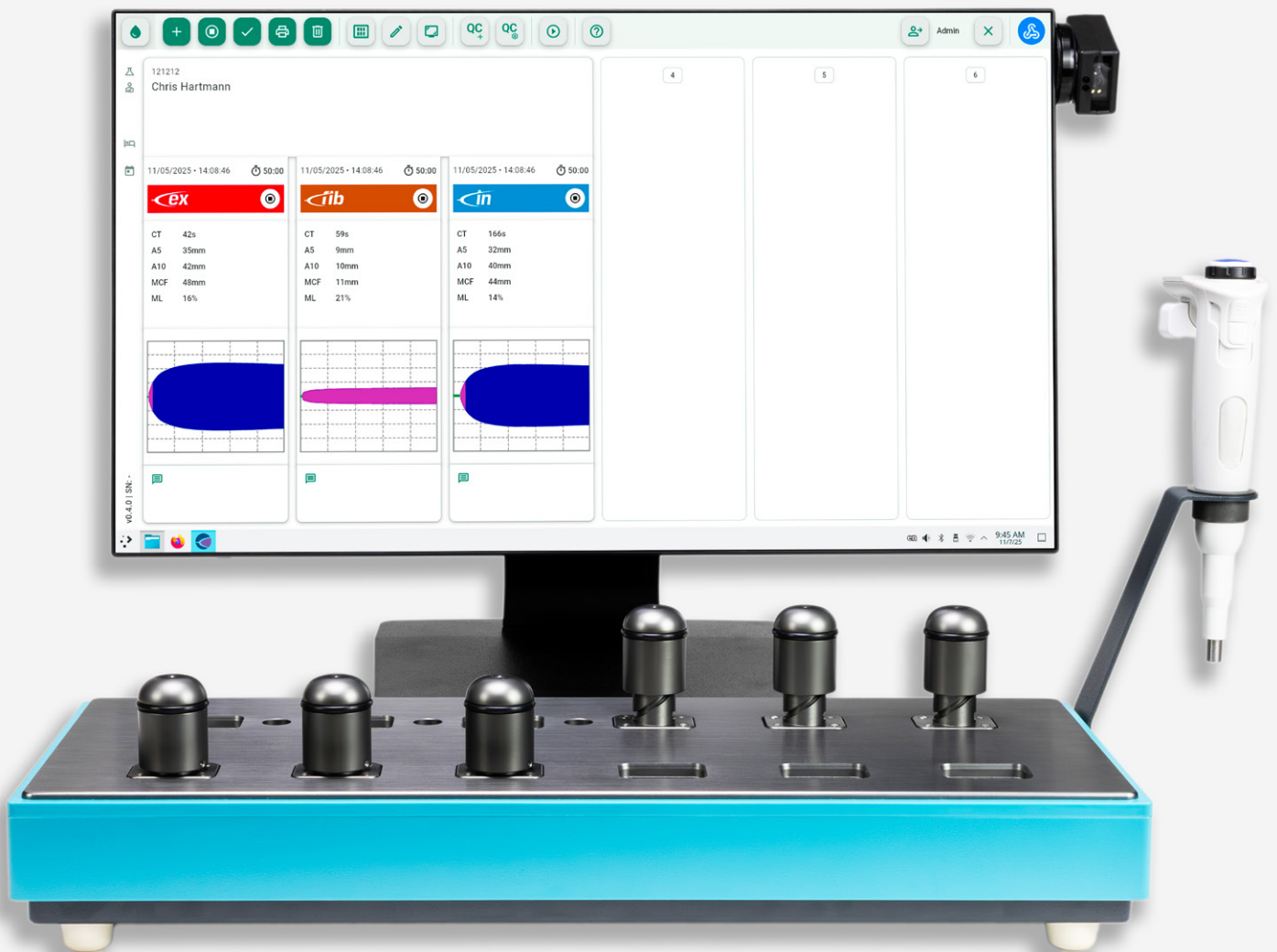


MultiClot[®]

Die nächste Generation der Vollblut-Gerinnungsdiagnostik


Schnelle, flexible und aufschlussreiche Viskoelastometrie mit sechs unabhängigen Kanälen, entwickelt für Forschung und klinische Anwendungen, die optimierte Arbeitsabläufe, Datenqualität und Kosteneffizienz erfordern.

MultiClot®

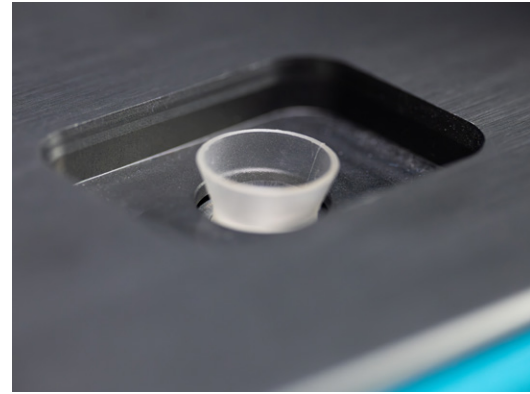

Hauptmerkmale

- Sechs Kanäle für gleichzeitiges Messen verschiedener Proben oder Tests
- Schnelle Ausgabe früher Gerinnungsindikatoren in Echtzeit
- Optimierte Mechanik und Elektronik für höchste Präzision und Sensitivität
- Moderne Touchscreen-Oberfläche mit integrierten Workflow-Tools
- Standardisierte Abläufe im gesamten Testportfolio
- Offenes Systemdesign, ideal für Forschung und klinische Anwendungen

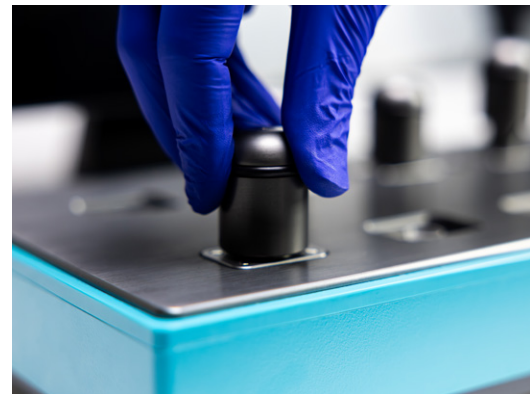

Reagent Tip Technology – Standardisierung leicht gemacht

Apiros Reagent-Tip-Technologie integriert die Reagenzien in die Pipettenspitze, sodass sich diese beim Pipettieren mit der Vollblutprobe vermischen.


Ihre Vorteile

- Kein aufwendiges Reagenz-Handling
- Gebrauchsfertige Trockenreagenz-Spitzen
- Einfach anzuwenden und standardisiert
- Gleichbleibende Vorgehensweise über das gesamte Testportfolio

Assays

MultiClot stellt ein umfassendes Spektrum an Assays bereit.

NAME	BESCHREIBUNG	PRODUKT	NAME	BESCHREIBUNG	PRODUKT
EX	Schnelle Beurteilung des Gerinnungsprozesses. Gewebefaktoraktivierung + Polybrene. Beurteilung der Gerinnungsaktivierung, Thrombusbildung und der Fibrinolyse.		AP	EX + Fibrinolyse-Hemmung (TXA) Beurteilung der Gerinnungsbildung unter Fibrinolyse-Hemmungsbedingungen.	
FIB	Funktionelle Bestimmung des Fibrinogenspiegels. Gewebsthromboplastin + Thrombozytenhemmung (Cytochalasin D + Eptifibatid)		TPA	EX + Fibrinolyseaktivierung durch TPA. Nachweis von Tranexamsäure (TXA).	
IN	Intrinsische Aktivierung mittels Ellagsäure für die Beurteilung von Heparin.		RVV	Hochsensitiver Test zum Nachweis von FXa-Antagonisten. Russel viper venom (FX Aktivator)	
HI	Intrinsischer Gerinnungsweg mit Heparin-Neutralisation. Ellagsäure + Heparinase Zu verwenden in Kombination mit dem IN.		ECA	Hochsensitiver Test zum Nachweis von Dabigatran. Ecarin (Prothrombin Aktivator)	

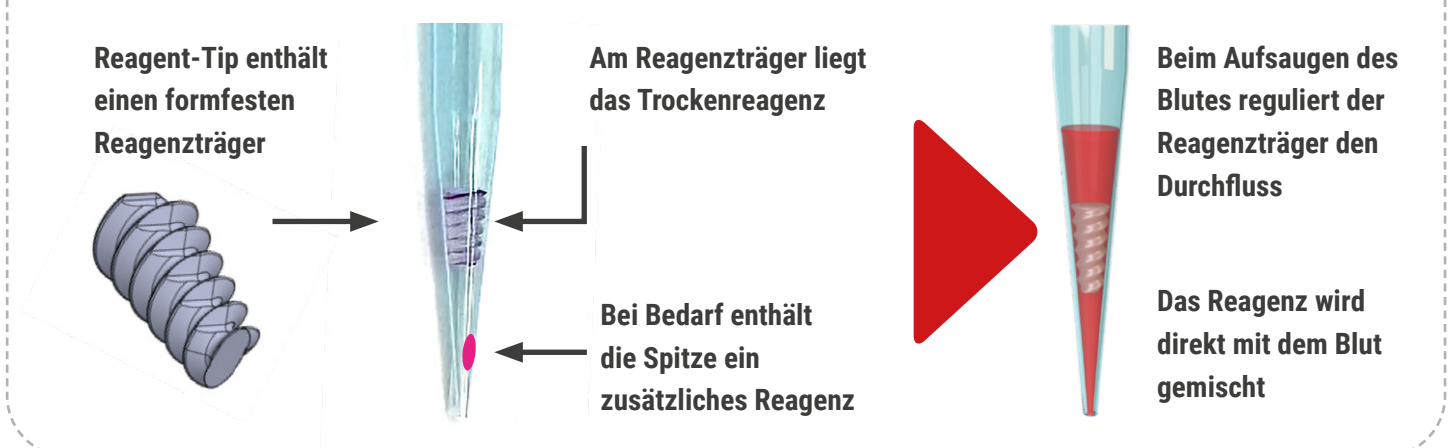

Produkte

BESTELLNUMMER	PRODUKTINFORMATION	VERPACKUNGSEINHEIT
Gerät und Zubehör		
3011EU	MultiClot analyzer (inkl. Benutzeroberflächen-Software, Mini-PC, Barcode-Scanner, elektronische Pipette, Pipettenhalter, Maus, Tastatur und 21"-Touchscreen)	1 Gerät inkl. Zubehör
Verbrauchsmaterial		
4011EU	Cups & Pins	6 × 20 Stk
1081EU	EX	10 × 1 tip
1061EU	FIB	10 × 1 tip
1051EU	AP	10 × 1 tip
1031EU	IN	10 × 1 tip
1041EU	HI	10 × 1 tip
1021EU	TPA	10 × 1 tip
1071EU	RVV	10 × 1 tip
1011EU	ECA	10 × 1 tip
2011EU	QC1	6 Stk
2021EU	QC2	6 Stk
Spezifikationen • Test Kanäle: 6 • Tests: EX, IN, FIB, AP, HI, TPA, RVV, ECA • Proben-Volumen: 340 µl Citratblut (3,2%) pro Test Zeit bis Ergebnis: CT innerhalb von Sekunden oder wenigen Minuten, Clot-Festigkeits-Parameter (A5, A10) innerhalb von 6–15 min., länger in abnormalen Proben; Standardlaufzeit 50 min. inklusive Lyse Parameter Ergebnis.		

EKOMED

Ekomed Handels GmbH

Karl Sarg Gasse 9/37
1230 Wien
Österreich

Tel. +43 1 869 27 71
office@ekomed.at
www.ekomed.at

MultiClot® ist eine eingetragene Marke der Apiro Diagnostics Kft.