



myoncare

# Care Pathways

Version 1.12





## Care Pathways



Care Pathways ermöglichen WebApp Nutzern, mehrere Caretasks miteinander zu verbinden in Bezug auf ein bestimmtes Referenzdatum (z.B. OP-Datum). Beispielsweise können mehrere prä- oder postoperative Aufgaben in einem Care Pathway kombiniert und zu unterschiedlichen Zeiten in Bezug auf das Referenzdatum mit nur einer einzigen Zuweisung dem Patienten ausgespielt werden.

Zugewiesene Care Pathways und die ihnen zugrundeliegenden Caretasks können überprüft werden.

Nach der Auswahl von "Care Pathway zuweisen" kann die medizinische Fachkraft einen Care Pathway auswählen. Innerhalb des Zuweisungssprozesses kann die medizinische Fachkraft den ausgewählten Behandlungspfad zu der Übersicht der Zuordnungen des Patienten hinzufügen oder den Behandlungspfad sofort versenden.


Falls im Rahmen eines Caretasks innerhalb des Care Pathways Komponenten Schwellenwerte oder Sprünge besitzen, wird der HCP darauf hingewiesen diese während der Zuweisung zu überprüfen.



## Erstellen eines Care Pathway

### ❖ Allgemeine Einstellungen & Caretask-Auswahl:

1. Klicken Sie auf **"Care Manager"** und anschließend auf **"Care Pathway erstellen"**: Es öffnet sich eine neue Seite in der WebApp.

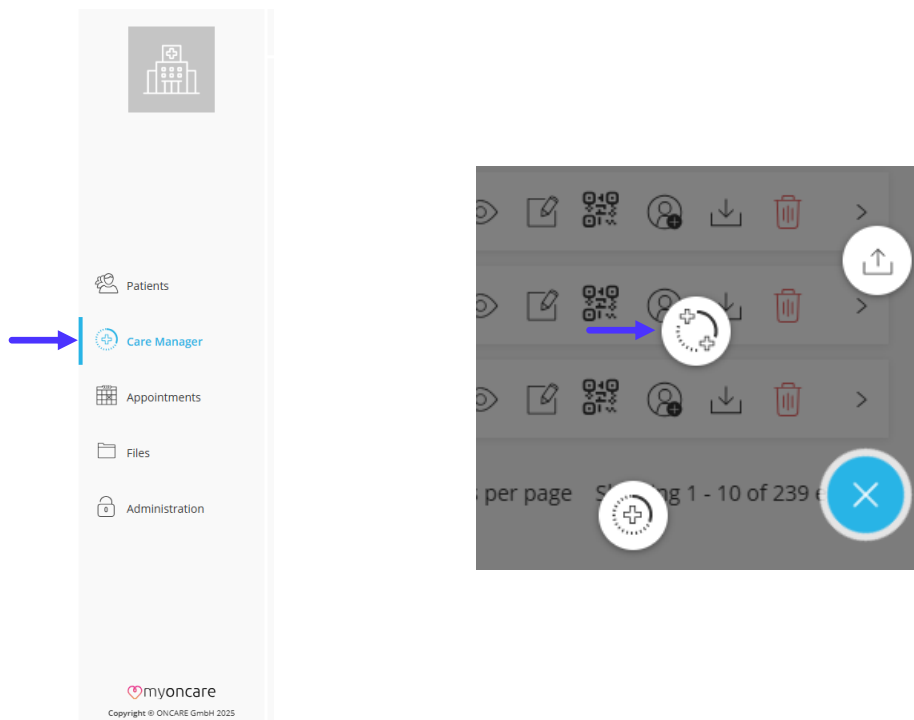

2. Beginnen Sie mit der Definition des Namens des Care Pathways.
3. Klicken Sie auf **"Care Pathway Einstellungen"**, um den ‚Referenztyp‘ und den zugehörigen ‚ICD-Code‘ auszuwählen.

Care Manager > Care Pathway erstellen Speichern & Beenden Speichern Schließen

\* Care Pathway Name  
Care Pathway Name hinzufügen 0/100 Caretask hinzufügen Care Pathway Einstellungen

0 / 300

CARE PATHWAY EINSTELLUNGEN

\* Referenztyp  
Referenztyp auswählen

\* ICD Code  
ICD-Codes oder Krankheit hinzufügen 0/5


CARE PATHWAY EINSTELLUNGEN

\* Referenztyp  
Referenztyp auswählen


Pflege  
Konsultation  
Entlassung  
Nachsorge  
Test  
Transport  
Behandlung  
Operationstermin  
Videoanruf



- Um einen Caretask zum Care Pathway hinzuzufügen, wählen Sie in der oberen Leiste "Caretask hinzufügen", die rechte Seitenleiste öffnet sich, und der Benutzer kann nun Caretasks suchen und hinzufügen. Wählen Sie unter dem Suchfeld die Art des Caretasks aus, die hinzugefügt werden soll – Übergeordneter Caretask oder Verknüpfter Caretask. Die Suchergebnisse werden unten angezeigt, und der ausgewählte Caretask kann per Drag & Drop zum Hauptbereich des Care Pathway hinzugefügt werden.

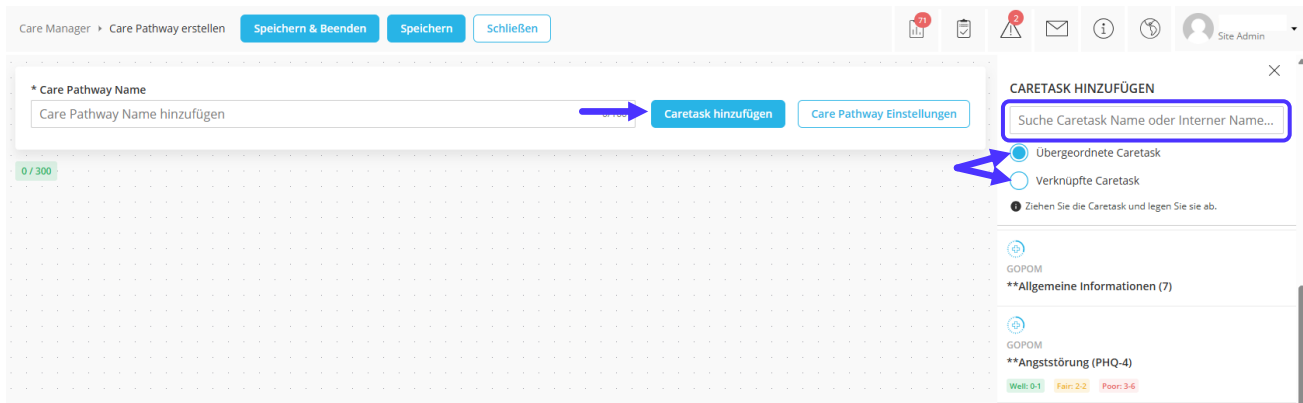

- Um einen Caretask zu entfernen, klicken Sie auf die zugehörige Karte und wählen Sie dann das "Papierkorb"-Symbol aus.

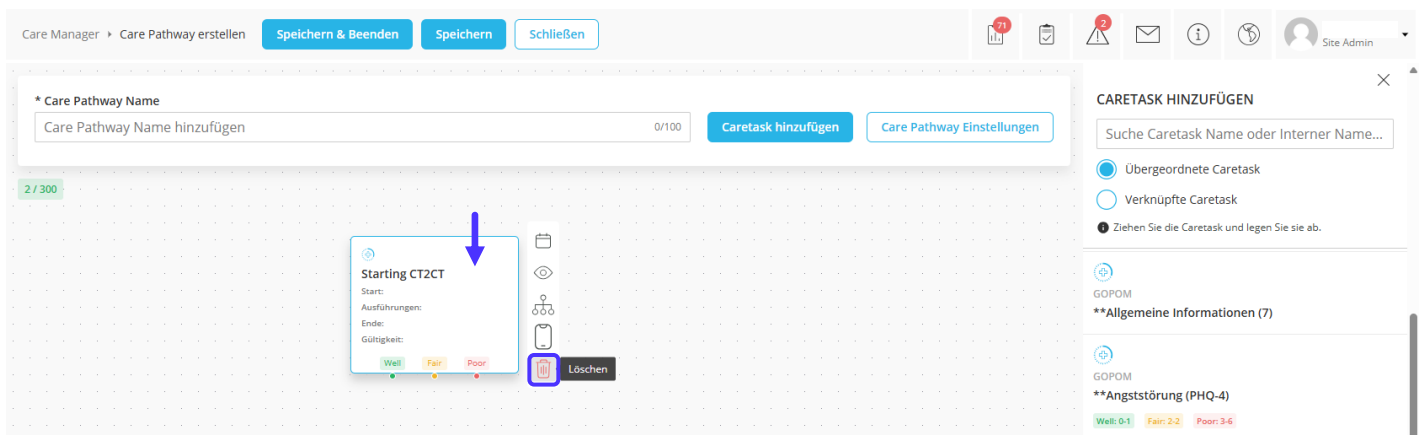






❖ **Caretask-Konfiguration:** Jeder übergeordneter Caretask erfordert spezifische Konfigurationen.

Klicken Sie auf die ausgewählte Caretask-Karte, um die rechte Seitenleiste zu öffnen. Definieren Sie die Dauer jedes Caretask in Bezug auf das gewählte Referenzdatum (wird bei der Zuweisung des Care Pathway an einen Patienten festgelegt). Legen Sie außerdem die Gültigkeit des Caretasks fest, die beschreibt, wie lange die Aufgabe für den Patienten zugänglich sein wird.

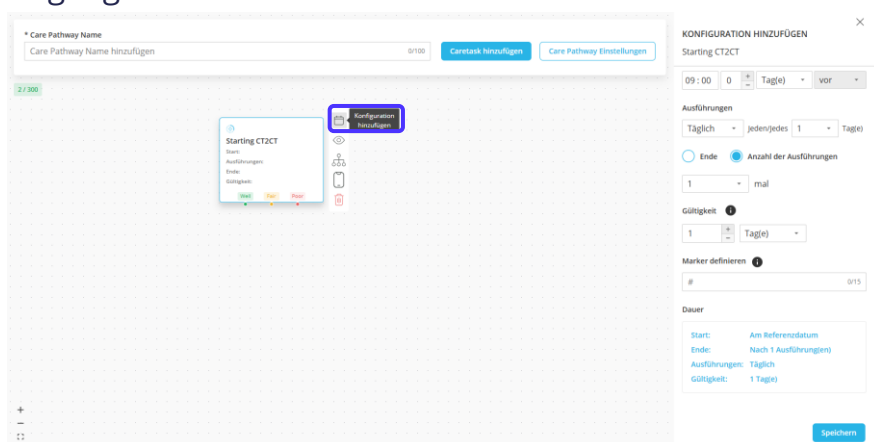


❖ **Caretasks verknüpfen:** Wenn ein übergeordneter Caretask ausgewählt wird, entweder während der Erstellung oder Bearbeitung des Care Pathways, zeigt die Caretask-Karte zwei bis drei Punkte an.

Über diesen Punkten werden die Begriffe **'Gut'**, **'Schlecht'** und, je nach Gesundheitsindikator des ausgewählten Caretasks, **'Mäßig'** angezeigt (wenn ein Caretask ohne Gesundheitsindikator ausgewählt wird, wird nichts angezeigt).

Im nächsten Schritt, um einen verknüpften Caretask zu erstellen, muss der Benutzer nach dem Klicken auf **"Caretask hinzufügen"** zum Menü in der rechten Seitenleiste navigieren. Hier muss der Benutzer das Optionsfeld von **"Übergeordnete Caretask"** in **"Verknüpfte Caretask"** ändern. Anschließend kann der Benutzer einen beliebigen Caretask zum Verknüpfen auswählen.

Sobald eine Caretask-Karte ausgewählt ist, wird auf der Caretask-Karte oben ein Punkt angezeigt. Um eine Verknüpfung herzustellen, klickt der Benutzer einfach auf einen der Punkte, hält die linke Maustaste gedrückt und zieht die Linie auf den gewünschten Punkt auf den verbundenen Caretask.

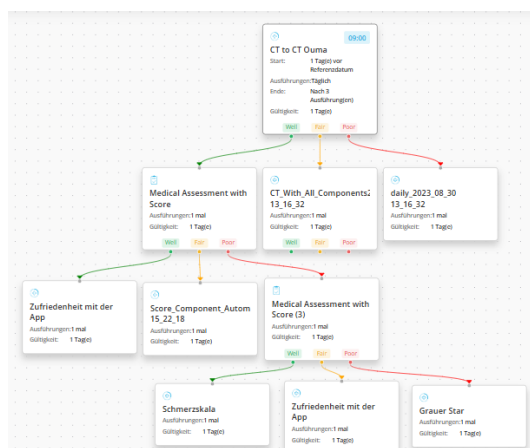



## Bearbeitung eines Care Pathways

Nachdem ein Care Pathway erstellt wurde, wird er im Care Manager auf der Registerkarte ‚Care Pathways‘ angezeigt. Auf der rechten Seite stehen dem medizinischen Fachpersonal einige Schaltflächen zur Verfügung, um mit den jeweiligen Versorgungspfaden zu interagieren.

| Care Pathways                          |          |                  |          | Suche |  | 0/150 |
|----------------------------------------|----------|------------------|----------|-------|--|-------|
| Titel                                  | Referenz | Durchgeführt von | ICD Code |       |  |       |
| regression_2_9_2023                    |          |                  | R63.5    |       |  |       |
| Schlaf Demo                            |          |                  | C50      |       |  |       |
| Score of Insanity                      |          |                  | F71      |       |  |       |
| Strahlentherapie Nachsorge Prostata-CA |          |                  | C61      |       |  |       |

Innerhalb der Patientenübersicht des jeweiligen Patienten kann die medizinische Fachkraft erkennen, ob der Care Pathway über ein Referenzdatum oder über einen Termin erstellt wurde, falls diese Funktion aktiviert ist. Demzufolge kann eine nötige Umplanung des Care Pathways über den „**Bearbeiten**“-Button des jeweiligen Care Pathways erfolgen oder über den Termin, mit dem der Care Pathway verknüpft ist.

Patientenverwaltung ▶ Basma Reset | #H5y8T | Geboren am 21 Apr. 1985 (Alter: 40) ▼

Offline

Übersicht

**Care Pathway anzeigen: \*\*\*Peri-OP kolorektal: Stationärer Aufenthalt (1)**

**Historie**

- Care Pathway erstellt von Basma Doctor  
04 Juni 2024 - 15:11
- Care Pathway verschickt von Basma Doctor  
04 Juni 2024 - 15:11

**Care Pathway**

\*\*\*Peri-OP kolorektal: Stationärer Aufenthalt (1)

**Caretasks**

8

**Caretask Reihenfolge**

- \*/Infos zur durchgeführten OP (1)
  - Start: 2 Tag(e) vor Referenzdatum
  - Ende: Nach 3 Ausführungen(en)
  - Ausführungen: Täglich
- \*/Zufriedenheit mit der OP-Begleitung (1)
  - Start: 2 Tag(e) vor Referenzdatum
  - Ende: Nach 1 Ausführungen(en)
  - Ausführungen: Monatlich

Schließen



Bei der Verschiebung eines Behandlungspfads auf ein früheres Referenzdatum passt das System das Referenzdatum automatisch an, um sicherzustellen, dass Caretasks angemessen ausgelöst werden und mit dem tatsächlichen Pflegezeitplan des Patienten übereinstimmen. Das medizinische Fachpersonal kann Caretasks auch während des letzten Schritts des Zuweisungsprozesses überprüfen und ändern, um die Genauigkeit und Vollständigkeit zu gewährleisten.

## Überprüfung eines Care Pathways für einen bestimmten Patienten

Zur Überprüfung der Ergebnisse eines Care Pathways und seiner Caretasks kann die medizinische Fachkraft in die Patientenübersicht eines Patienten gehen, dem der Care Pathway zugewiesen wurde. In der Patientenübersicht wird in der Care Pathway Übersicht der Care Pathway sowie sein Ergebnis und sein Status angezeigt

The screenshot displays the myoncare web application interface. At the top, there's a header with 'Patientenverwaltung' and a user profile 'anonymous anonymous | #dx232' with an 'Offline' status. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Übersicht', 'To-Dos 0', 'Care Pathways 1', 'Caretask 0', 'Medikamente 0', 'Termine 0', and 'Kalender'. A modal window titled 'Ergebnisse anzeigen: Willkommen bei myoncare' is open, showing a survey result for a patient named 'anonymous anonymous' on '15 März 2024 15:50'. The survey question is partially visible: '...ob Sie mit dem zweiten Teil fortfahren möchten. Klicken Sie dann auf "Fortfahren".' The response is 'Ja' with a 'Score: 0'. Below this, there's a section 'Zusätzliche Komponenten basierend auf dem Gesundheitsindikator' showing a green checkmark and 'Gut: Wertung 0 bis 0'. A list item '1' contains a message: 'Vielen Dank! Klicken Sie auf "Weiter" und im nächsten Schritt auf "Absenden". Danach können Sie einen Account erstellen. Für die Accounterstellung ist es wichtig, dass Sie eine E-Mail Adresse nutzen, auf welche Sie Zugriff haben. Während der Registrierung wird Ihnen eine E-Mail mit einem Bestätigungscode zugesendet. Diesen Bestätigungscode benötigen Sie, um die Registrierung abzuschließen.' At the bottom of the modal are buttons 'Ergebnisse exportieren' and 'Schließen'. The background shows a patient overview table with columns for date, day, and status, with one entry for '15 März 2024' showing '1 Mal' and 'Inaktiv'.



## Zuweisung von Pathways

myoncare Careplan Manager ermöglicht es den Nutzern, Caretasks auf drei Arten zuzuweisen:

- Zuweisung innerhalb der Patientenübersicht eines bestimmten Patienten
- Zuweisung über den Care Manager an ausgewählte Patienten
- Zuweisung über einen QR-Code oder Deeplink

### Zuweisung innerhalb der Patientenübersicht eines bestimmten Patienten



Im Workflow auf der Patientenübersichtsseite muss das medizinische Fachpersonal „**Pathway zuweisen**“ im Aktionsmenü auswählen (erscheint nach dem Klicken auf die „+“-Schaltfläche), das sie zum "Zuweisungsmodul" weiterleitet, in dem die vier Schritte durchlaufen werden müssen, um einem Patienten einen Care Pathway zuzuweisen.

#### 1. Care Pathway auswählen:

Wählen Sie einen Care Pathway, der an den Patienten gesendet werden soll. *Hinweis:* Die Suchfunktion sucht nur nach einer Übereinstimmung im Namen.

Care Pathway zuweisen an Basma Reset ×

1 Care Pathway auswählen 2 Einstellungen 3 Komponenten Konfigurationen 4 Zuweisen / Versenden

|                                                                                     |                                           |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---|
|  | <CreateCarePathway>2024_02_05<br>13_00_48 | P07.02 | > |
|  | <CreateCarePathway>2024_02_05<br>16_09_32 | P07.02 | > |
|  | 2 occ cpw assum                           | A00    | > |
|  | A-Carepathway                             | A00    | > |
|  | AddCarePathWayTest                        | A15    | > |
|  | AddCarePathWayTest (1)                    | A15    | > |

< Zurück 1 ...4 5 **6** ...25 Nächste > 10 Einträge pro Seite Anzeigen 51 - 60 von 243 Einträge anzeigen

Weiter





## 2. Einstellungen:

Im zweiten Schritt müssen Sie das Referenzdatum definieren.

Anhand des in diesem Schritt gewählten Datums werden alle Caretasks des Care Pathway für den Versand an den Patienten eingeplant. Auf der rechten Seite des Moduls können Sie die geplanten Vorgänge einsehen. *Hinweis:* Falls „Keine Zeitangabe“ als Uhrzeit ausgewählt wird, wird die Standard-Referenzzeit auf 12 Uhr festgelegt.

Standardmäßig ist die Funktion des Versendens von Care Pathways basierend auf bereits bestehenden Patiententerminen deaktiviert. Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, kontaktieren Sie bitte das ONCARE Service Team. Falls diese Funktion aktiviert ist, beachten Sie, dass die Zuweisung des Care Pathways an den Patienten über einen bestehenden Termin den neuesten Termin verwendet, um die Caretasks des Care Pathways für den Patienten zu planen.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Care Pathway zuweisen an Basma Reset' interface, specifically the 'Einstellungen' (Settings) step. Both screenshots show a progress bar at the top with four steps: 1. Care Pathway auswählen, 2. Einstellungen, 3. Komponenten Konfigurationen, and 4. Zuweisen / Versenden. The left screenshot shows the 'Definieren Sie das Referenzdatum' section with the 'Referenzdatum auswählen' radio button selected, and the 'Datum und Zeit definieren' section with the date '14.05.2025' and time '11:15' entered. The 'Keine Zeitangabe' checkbox is unchecked. The right screenshot shows the same section with the date '14.05.2025' and time '12:00' entered, and the 'Keine Zeitangabe' checkbox checked. A blue arrow points to the checkbox. Both screenshots show the 'Care Pathway Details' section on the right, which includes 'Care Pathway: A-Carepathway', 'Referenztyp: Pflege', 'ICD Code: A00', and 'Caretasks: 2 Reihenfolge'. The bottom of each screenshot has 'Zurück' and 'Weiter' buttons.



### 3. Komponenten-Konfigurationen:

Stellen Sie in diesem Schritt sicher, dass alle Punkte, Schwellenwerte und Sprünge überprüft wurden.

Zudem darf zu keiner Zeit eine Wertung als alleinige Grundlage für eine Intervention, relevanten medizinischen Behandlung oder Priorisierung einzelner Patienten führen. Innerhalb der medizinischen Variante wird auch das medizinische Fachpersonal aufgefordert, die festgelegten Schwellenwerte zu überprüfen. Darüber hinaus dürfen auch die Schwellenwerte nicht als alleinige Grundlage für eine Intervention, eine entsprechende medizinische Maßnahme oder eine Priorisierung einzelner Patienten verwendet werden.

Care Pathway zuweisen an Basma Reset

1 Care Pathway auswählen 2 Einstellungen 3 Komponenten Konfigurationen 4 Zuweisen / Versenden

Mäßig: Wertung 500 bis 999

☒ A Threshold - Auswahl -

☐ a Schwellenwert

☐ b Schwellenwert

Den Inhalt ausblenden

Schlecht: Wertung 0 bis 499

☒ A thresholds - Auswahl -

☐ a Schwellenwert

☐ b Schwellenwert

Den Inhalt ausblenden

☐ Ich bin mir bewusst, dass Schwellenwerte und Wertungen nicht als alleinige Grundlage für medizinische Interventionen, weitere medizinisch relevante Maßnahmen oder die Priorisierung von Patienten verwendet werden dürfen.

☐ Ich bestätige, dass alle Schwellenwerte, Wertungen und Sprünge validiert wurden und dem Zweck dieses Caretasks/Care Pathways angemessen Rechnung tragen.

Zurück Bitte nach unten Scrollen. Weiter

### 4. Zuweisen / Versenden:

Im letzten Schritt kann die medizinische Fachkraft die geplante Zuweisung überprüfen.

Care Pathway zuweisen an Basma Reset

1 Care Pathway auswählen 2 Einstellungen 3 Komponenten Konfigurationen 4 Zuweisen / Versenden

Zugewiesen an

Basma Reset

A-Carepathway

ICD Code

A00

Caretasks

2

Caretask Reihenfolge

A\_Caretask without review caretask

Start: Am Referenzdatum

Ende: Nach 2 Ausführungen

Ausführungen: Täglich

A\_Caretask without review caretask

A\_Caretask without review caretask

A\_Caretask without review caretask

A\_Caretask with review caretask

Start: Am Referenzdatum

Ende: Nach 2 Ausführungen

Ausführungen: Täglich

Zurück Zur Zuweisung hinzufügen Sofort versenden



## Zuweisen aus dem Care Manager-Modul zu bestimmten Patienten

Das Zuweisen von Care Pathways aus dem myoncare Care Manager-Modul ist die effizienteste Methode, um einen Care Pathway mehreren Patienten gleichzeitig zuzuweisen.

Nachdem Sie auf das Symbol "Zuweisen" auf der rechten Seite der Vorlagen Übersicht Bildschirms geklickt haben, wird ein "Zuweisungsmodul" angezeigt. Der HCP muss nun die Patienten auswählen, an die der Care Pathway zugesendet und entsprechend des oben beschriebenen Ablaufs zugewiesen werden soll.

| Titel                                  | Referenz | Durchgeführt von | ICD Code |
|----------------------------------------|----------|------------------|----------|
| regression_2_9_2023                    |          |                  | R63.S    |
| Schlaf Demo                            |          |                  | C50      |
| Score of Insanity                      |          |                  | F71      |
| Strahlentherapie Nachsorge Prostata-CA |          |                  | C61      |

**Hinweis:** Die Einstellungen können noch während des Zuweisungs-Ablaufes geändert werden. Nur der zuvor ausgewählte Care Pathway, d. h. der Pathway, der in der Zeile angezeigt wird und mit "Zuweisen" ausgewählt wurde, kann zugewiesen werden.

Care Pathways können nur denjenigen Patienten zugeordnet werden, zu deren Careteam der aktuelle Nutzer gehört. Nur diese Patienten werden durch Filter angezeigt.

Um einen Care Pathway effizient einer bestimmten Patientengruppe zuzuweisen, kann der HCP die Filterfunktion im ersten Zuweisungsschritt innerhalb des Care Managers verwenden. Auf diese Weise kann der Care Pathway einer vorsortierten Patientengruppe in Ihrer Gesamtheit zugewiesen werden.



## Zuweisung eines Care Pathways per QR-Code oder Deeplink

Durch Klicken auf das QR-Code-Symbol innerhalb des Care Managers beim jeweiligen Caretask wird ein Modul auf der rechten Seite der myoncare Careplan Manager für medizinische Fachkräfte geöffnet. Dieses Modul zeigt einen QR-Code, einen Deeplink, eine Schaltfläche zum Exportieren des QR-Codes sowie eine Möglichkeit, den QR-Code zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um Care Pathways über den QR-Code oder den Deeplink zuzuweisen, muss der QR-Code über den Schieberegler „QR-Code aktivieren“ aktiviert werden. Dies ist nicht möglich für Care Pathways mit Aufgaben in der Vergangenheit sowie für Care Pathways, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden sollten.

Wenn der Patient den angezeigten QR-Code scannt oder den Deeplink öffnet, wird der Caretask zugewiesen und an den Patienten ausgespielt.

In dem Moment, wenn der Patient einen QR-Code scannt oder den Deeplink öffnet, wird der Zeitpunkt des Scannens als Referenzdatum und -uhrzeit festgelegt. Alle Caretasks, die im Care Pathway enthalten sind, werden auf der Basis dieses Datums und dieser Uhrzeit geplant. Wenn ein QR-Code eines Care Pathways gescannt wird, wird eine einzige Ausführung dieses Care Pathways an den Patienten gesendet.

Der QR-Code kann als PNG oder JPG exportiert werden, um individuelle Einladungs- oder Registrierungsbriefe zu erstellen.

Alle Patienten, die den QR-Code scannen und nicht bei dem Standort der Gesundheitsdienstleister angemeldet sind, starten durch das Scannen automatisch den Verbindungsprozess. Damit wird die Selbstregistrierung ausgelöst.

The screenshot shows the 'Care Manager' interface with the 'Care Pathways' tab selected. A table lists several care tasks, including 'Bewertung der Behandlung', 'Hüft-TEP Pathway (Ortho generisch)', 'Intervention Knie-Entlassung Tag 7 (QV)', 'Patientenpfad Hüft-Operation elektiv', 'Schulung', and 'Test-Pathway Endoprothetik'. The 'Bewertung der Behandlung' task is highlighted, and its QR code is displayed on the right side of the screen. The QR code is labeled 'training QR-Code' and includes a URL: <https://pwa-stage.myoncare.care>. Below the QR code is a toggle switch for 'QR-Code aktivieren' which is currently turned on.



## KI-gestützter Care Pathway und Caretask-Empfehlung "myon.ai"

Mit myon.ai können Sie die Erstellung von Care Pathways und Caretasks mithilfe von KI-gesteuerter Unterstützung optimieren. Durch die Analyse wichtiger Eingaben – wie z. B. des Kontexts, der klinischen Stadien (z. B. Planung, Behandlung, Nachsorge) und Rahmenbedingungen wie PROMs (ICHOM), ICD-Codes oder bestimmter Krankheiten generiert myon.ai automatisch strukturierte und detaillierte Empfehlungen für Caretasks, wodurch ein manueller Aufbau bei gleichzeitiger Beibehaltung der Genauigkeit und Konsistenz entfällt.

Jeder Care Pathway besteht aus mehreren, miteinander verbundenen Caretasks, die eine Eltern-Kind-Struktur bilden, in der die Caretasks mit dem übergeordneten Behandlungsplan verknüpft sind. myon.ai vereinfacht diesen Prozess, indem es Caretasks mit wesentlichen Elementen wie Punktzahlen, Sprüngen, Übergängen und Schwellenwerten vor-designed, was schnelle Anpassungen und Verfeinerungen ermöglicht.

Sie behalten die volle Kontrolle und haben die Möglichkeit, Caretasks zu überprüfen, zu verfeinern und zu validieren, um sicherzustellen, dass sie sowohl den medizinischen als auch den organisatorischen Standards entsprechen. Vor dem Abschluss weist ein Bestätigungsschritt nochmals auf Ihre Verantwortung hin: Beim Speichern eines Caretasks wird ein Popup-Fenster mit der Meldung angezeigt: "Ich bestätige, dass ich den gesamten Inhalt des Caretasks überprüft habe und er korrekt, vollständig und für den Patientengebrauch geeignet ist." Um fortzufahren, müssen Sie das Kontrollkästchen für die Zustimmung aktivieren und sicherstellen, dass jedes Element vor der Implementierung die erforderlichen wissenschaftlichen Standards erfüllt.

Durch die Integration von myon.ai in Ihren Workflow können Sie die Effizienz steigern, die Konsistenz wahren und das Pflegemanagement effektiv skalieren.

**Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die medizinische Fachkraft (HCP) dafür verantwortlich ist, die Richtigkeit der von "myon.ai" generierten Inhalte zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie mit den klinischen Richtlinien und den Standards für die Patientensicherheit übereinstimmen.**





## Warnungen



- myoncare erhebt weder den Anspruch noch die Absicht, die Erfahrung und das Fachwissen einer medizinischen Fachkraft zu ersetzen, unabhängig vom Anwendungsszenario. Es bietet dem Benutzer lediglich eine zusätzliche Unterstützung bei der Überwachung des Gesundheitszustandes von Patienten. Alle Inhalte, die innerhalb von myoncare angezeigt und erstellt werden, setzen voraus, dass der Nutzer eine Plausibilitätsprüfung durchführt, bevor er weitere Maßnahmen und Behandlungen einleitet oder die Ergebnisse der medizinischen sowie der nicht-medizinischen Geräte beurteilt.
- Verwenden Sie den Gesundheitsindikator NIEMALS als alleiniges Entscheidungskriterium für Diagnose und/oder Therapie. Dies wird auch durch die folgende Warnung im System angezeigt: „Ich bin mir bewusst, dass Schwellenwerte und Wertungen nicht als alleinige Grundlage für medizinische Interventionen, weitere medizinisch relevante Maßnahmen oder die Priorisierung von Patienten verwendet werden dürfen.“
- Vor der Zuweisung von Care Pathways oder Caretasks sollten alle Wertungen, Schwellenwerte und Jumps auf Richtigkeit überprüft werden. Darüber hinaus darf eine Wertung oder Schwellenwert zu keinem Zeitpunkt die alleinige Grundlage für eine Intervention, eine medizinisch relevante Maßnahme oder die Priorisierung einzelner Patienten bilden. Dies wird in der folgenden Warnung beschrieben: "Ich bin mir bewusst, dass Schwellenwerte und Punktzahlen nicht als alleinige Grundlage für medizinische Eingriffe, weitere medizinisch relevante Maßnahmen oder die Priorisierung von Patienten verwendet werden dürfen". "Ich bestätige, dass alle Schwellenwerte, Wertungen und Sprünge validiert wurden und dem Zweck dieses/r Caretask/Care Pathways angemessen Rechnung tragen."
- Sobald der medizinische Fachkraft eine weitere Komponente mit Bewertung hinzufügt oder die bestehende Bewertung einer Komponente in einem vorhandenen Caretask anpasst, muss das gesamte Bewertungsschema des Caretasks überprüft und angepasst werden.
- Es muss sichergestellt werden, dass nur Patienten ausgewählt werden, die diesen Care Pathway oder Caretask gemäß der Absicht des medizinischen Fachpersonals erhalten sollen.
- Es muss darauf geachtet werden, dass der Referenztyp korrekt ausgewählt ist, da alle Caretasks des Care Pathway in fester Beziehung zum Referenztyp definiert sind. Andernfalls werden die Caretasks zu einem anderen Zeitpunkt an die Patienten gesendet.



## Warnungen



- Wenn ein Start- oder Enddatum definiert ist, definiert die Beschreibung von „vor“ und „nach“ das Datum in Bezug auf den Referenztyp (z. B. 9:00 Uhr, 3 Tage vor der Operation).
- Falls ein Termin neu geplant wird (aber bereits mit Care Pathways verbunden ist), zeigt das Umplanungsschema auch potenzielle Konflikte mit einem roten Umriss an (z. B. ein Caretask ist in der Vergangenheit). Stellen Sie sicher, dass alle Care Pathways und die damit verbundenen Caretasks noch korrekt sind, oder passen Sie diese entsprechend an (Hinweis: manuelle Anpassung notwendig). Folgende Warnung wird angezeigt: "Markierte Caretasks haben ein Startdatum in der Vergangenheit und werden daher nicht an den Patienten versendet. Um sie an den Patienten zu senden, gehen Sie zu dem betreffenden Patienten und ändern Sie dort das Startdatum der Caretask". Um einen Konflikt innerhalb eines Caretasks anzupassen (z. B. ist ein Caretask in der Vergangenheit), schließen Sie den Workflow der Terminanpassung ab und gehen Sie zu der Übersicht des bestimmten Patienten, für den der Termin neu geplant wurde. Gehen Sie zum spezifischen Caretask und wählen Sie „Zuweisung bearbeiten“ und passen Sie das Startdatum entsprechend an.
- Falls bereits ein Termin und ein Care Pathway verbunden waren (über Referenztyp und ICD-Code), ist es nicht möglich, denselben Care Pathway ein zweites Mal zu verbinden. Die folgende Meldung wird angezeigt: "Der Care Pathway '<name of care pathway>' ist bereits aktiv für diesen Patienten. Sie können einen Care Pathway nicht mehrere Male zuweisen."
- Beim Scannen eines QR-Codes eines Caretasks oder eines Care Pathway wird die neueste Aktualisierung des Inhalts zugewiesen und an den Patienten gesendet.
- Aus Gründen der Datensicherheit und des Datenschutzes wird den Anwendern empfohlen, das von ONCARE voreingestellte Initialkennwort unmittelbar nach der ersten Anmeldung zu ändern.
- Wenn die Filtereinstellung so gewählt ist, dass nicht alle Patienten sichtbar sind, wird die folgende Warnung angezeigt: „Filter angewandt!“.



## Warnungen



- Anwendern und medizinischem Fachpersonal wird hiermit empfohlen, sich nicht allein auf Schwellenwertbenachrichtigungen für die Diagnose/Intervention oder eine spätere Anpassung der Therapie eines Patienten zu verlassen.
- Alle Schwellenwerte und Wertungen müssen aus den Vorlagen entfernt werden, falls ein oder mehrere Patienten nicht 18 Jahre alt sind.
- Caretasks und Vorlagen, welche Wertungen oder Schwellenwerte enthalten, können Patienten unter 18 Jahren nicht zugewiesen werden. Dies wird durch eine Warnung am unteren Ende der Patientenauswahl angegeben sowie dadurch, dass der „Weiter“-Button deaktiviert ist.
- Falls Anwender Gesundheitsdaten von öffentlich zugänglichen Registrierungsverfahren einholen wollen, z.B. indem sie die Registrierungs-QR-Codes oder Deep-Links auf einer Website in anonymer Form öffentlich zugänglich machen, muss der entsprechende Anwender dafür Sorge tragen, dass die rechtlichen Grundlagen zur Datenverarbeitung ausreichend geschaffen sind. Alternativ müssen die Daten zu jedem Zeitpunkt anonym bleiben. ONCARE übernimmt in derartigen – und ähnlichen – Fällen keinerlei Haftung.
- Die angezeigten Aktivitätsdaten können ungenau oder unvollständig sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Entscheidungsfindung.
- Verwenden sie die Videoanruffunktion von myoncare NICHT für einen NOTRUF oder zur Diagnose. Die Anrufqualität hängt von der Netzwerkverfügbarkeit und Kameraqualität ab und kann daher nicht ausreichen, um den Gesundheitszustand eines Patienten zu diagnostizieren oder zu beurteilen.
- Der Care Pathway kann Caretasks enthalten, die vor dem Referenzdatum geplant sind. In diesem Fall erscheint ein Popup, um den Benutzer darauf hinzuweisen, die Planung des Caretasks sowie das gewählte Referenzdatum zu überprüfen.
- Wenn der Benutzer einen Care Pathway auf der Grundlage eines bestehenden Termins des Patienten zuweisen möchte, muss er sicherstellen, dass der Termin des Patienten mit dem entsprechenden Referenztyp und ICD-Code gekennzeichnet ist. Ist dies noch nicht geschehen, wird im Zuordnungsprozess eine Warnung angezeigt, dass der Patient noch keinen genauen Termin hat. Daher kann die medizinische Fachkraft den Termin dem Patienten nicht zuweisen.



## Warnungen



- Durch die Veröffentlichung von QR-Codes oder Deep-Links auf einer Website, auf Flyern oder als Aushang in Kliniken in anonymisierter Form müssen Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal proaktiv sicherstellen, dass der Caretask oder der Care Pathway nur zur allgemeinen Unterstützung gedacht ist, aber keine für einen einzelnen Patienten individualisierten Inhalte enthält. Die Caretasks sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung gedacht und sollten nicht alleinstehend als medizinischen oder persönlichen Rat angesehen werden. Seien Sie sich bewusst, dass die Caretasks von Einzelpersonen aus der Öffentlichkeit beantwortet werden können und dass dadurch keine Arzt-Patienten-Beziehung entsteht. Alle medizinischen Informationen sollten nur als allgemeine Informationen zur Verfügung gestellt werden. Unter Öffentlichkeit ist jeder zu verstehen, nicht die Mitglieder einer bestimmten Gruppe, und Öffentlichkeit bedeutet nicht, dass ein bestimmtes Arzt-Patienten-Verhältnis besteht. ONCARE übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für möglicherweise auftretende Unterlassungen, Fehler oder für jeglichen Missbrauch der öffentlich zugänglich gemachten QR-Codes. ONCARE kann die Verfügbarkeit des Dienstes zu keinem bestimmten Zeitpunkt garantieren. Da die Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt, werden Sie aufgefordert, alle möglichen Mittel und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die oben genannten Faktoren zu vermeiden. ONCARE übernimmt keine Garantie für die Sicherheit oder Wirksamkeit und haftet nicht für Verluste oder Schäden, sich aus der oben genannten Nutzung ergeben können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche Verluste, Verletzungen, Krankheiten oder Tod.



We make healthcare scalable.

[www.myon.academy](http://www.myon.academy) | [www.myoncare.com](http://www.myoncare.com)

Bei Fragen: [service@myoncare.com](mailto:service@myoncare.com)