


Správný postup při odběru vzorku ze stolice


Testovací zkumavka

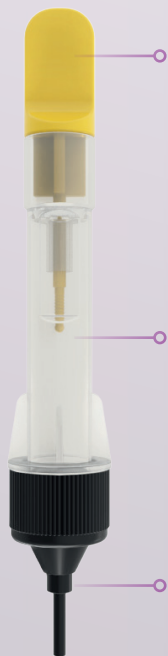

Žluté podlouhlé víčko:
Obsahuje odběrovou tyčinku, kterou použijete k odběru vzorku.


Průhledné tělo:
Obsahuje konzervační tekutinu, kterou nikdy nevylévejte.

Černý uzávěr s dlouhou špičkou:
Na tento konec nesahejte, slouží pouze lékaři v ordinaci pro vyšetření přístrojem.

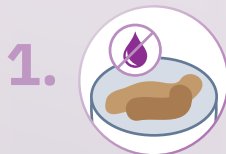


Odeberte vzorek stolice do **čisté a suché** nádoby.

 **Vzorek nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo močí!**

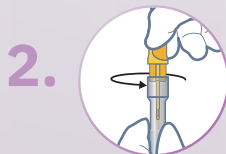

Otočte extrakční zkumavku a uvolněte víčko, ke kterému je připojena odběrová tyčinka (žluté barvy).

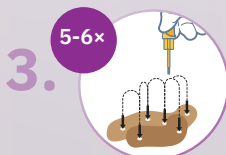

Zapíchněte odběrovou tyčinku do vzorku stolice přibližně **5 až 6krát na různých místech**.

Při odběru vzorku dbejte na to, aby nebyly zachyceny velké pevné částice.*



Vraťte odběrovou tyčinku zpět do extrakční zkumavky. Pevně uzavřete víčko a zkumavku důkladně protřepejte přibližně 10krát, aby se vzorek rovnoměrně rozptýlil v extrakčním pufru.



Vzorek je možné uchovat v pokojové teplotě pouze maximálně 3 hodiny a v chladničce (2–8 °C) maximálně 7 dní.

*Je-li stolice v tekuté formě, přeneste 10 µl vzorku do extrakční zkumavky pomocí pipety.

Reference: Manuály přístrojů Afias a cartridge iFob Neo, č. dokumentu: INS-FQ_X-CS; dat. revize: 28. dubna 2026 (Rev.00)